

# Complete Dynamics

Gyakorlati kiadás

iPhone számára

*Verzió 24.13*

# Erről a kézikönyvről

## Ez a megfelelő kézikönyv az Ön számára?

A *Complete Dynamics* dokumentáció számos változatban áll rendelkezésre.

A különböző programkonfigurációkhoz különböző kézikönyvek állnak rendelkezésre.

- Programkiadás: Böngésző, Gyakorló vagy Mester.
- Számítógép típusa: Apple OS-X, Windows, iPhone, iPhone, Android.
- Különböző nemzetközi nyelvek.

A megfelelő kézikönyv pontosan az Ön helyzetéhez igazodik.

Ha úgy gondolja, hogy nem a tökéletes kézikönyvet olvassa, kérjük, látogasson el honlapunkra [www.completedynamics.com](http://www.completedynamics.com), a *Dokumentáció* szakaszba, és töltsse le onnan a kézikönyvet.

## Fordítások

Amikor a *Complete Dynamics* új verzióját adjuk ki, gondoskodunk arról, hogy az angol nyelvű kézikönyv naprakész legyen. A megváltozott szövegek fordítása némi plusz időt vehet igénybe.

*A kézikönyv még le nem fordított részei az eredeti angol szöveget mutatják, e szöveghez hasonlóan nyomtatva.*

# Üdvözljük

Üdvözljük a *Complete Dynamics* - Practitioner Edition című kiadványban.

A *Complete Dynamics* szoftverprogram a *Complete Repertory* számítógépes olvasásának és tanulmányozásának tökéletes élményét kínálja. A homeopátiával foglalkozó szakemberek körében a *Complete Repertory* világszerte ismert a teljességéről, pontosságáról és az eredeti források lefedettségéről.

A szoftver elérhető Apple macOS®, Microsoft Windows®, Linux®, Apple iOS®, Android® rendszerekre.

A *Practitioner kiadással* Ön képes lesz:

- Olvassa és tanulmányozza a teljes *Complete Repertory*-t, több nyelven.
- A betegek aktáinak kezelése.
- Elemzések elvégzése.
- Materia Medica könyvek olvasása.

Ezek az oldalak segítenek eligazodni a programban.

Javasoljuk, hogy kezdje a *Kezdő lépések* című résszel, amely áttekintést nyújt a lehetőségekről.

Összintén reméljük, hogy a *Complete Dynamics* gazdagítani fogja homeopátiás életét, akár hivatásos gyakorló, akár diák, tanár vagy kutató.

A *Complete Dynamics* fejlesztőcsapat.

# Kezdetben


## Intuitív tervezés

A *Complete Dynamics*-ot úgy tervezték, hogy intuitív módon használhassák azok, akiknek van szakmai háttérük a homeopátiában. A program egyes funkciói sokkal hatékonyabban használhatók, ha megtanulsz néhány trükköt.

## Felugró menük

Sok helyzetben a felugró menük gyors hozzáférést biztosítanak a funkciókhoz. Csak érintse meg a képernyőt, és tartsa lenyomva 1 másodpercig. Ekkor megjelenik egy menü, ha elérhető az elem, amelyre rákattintott.

Példa:

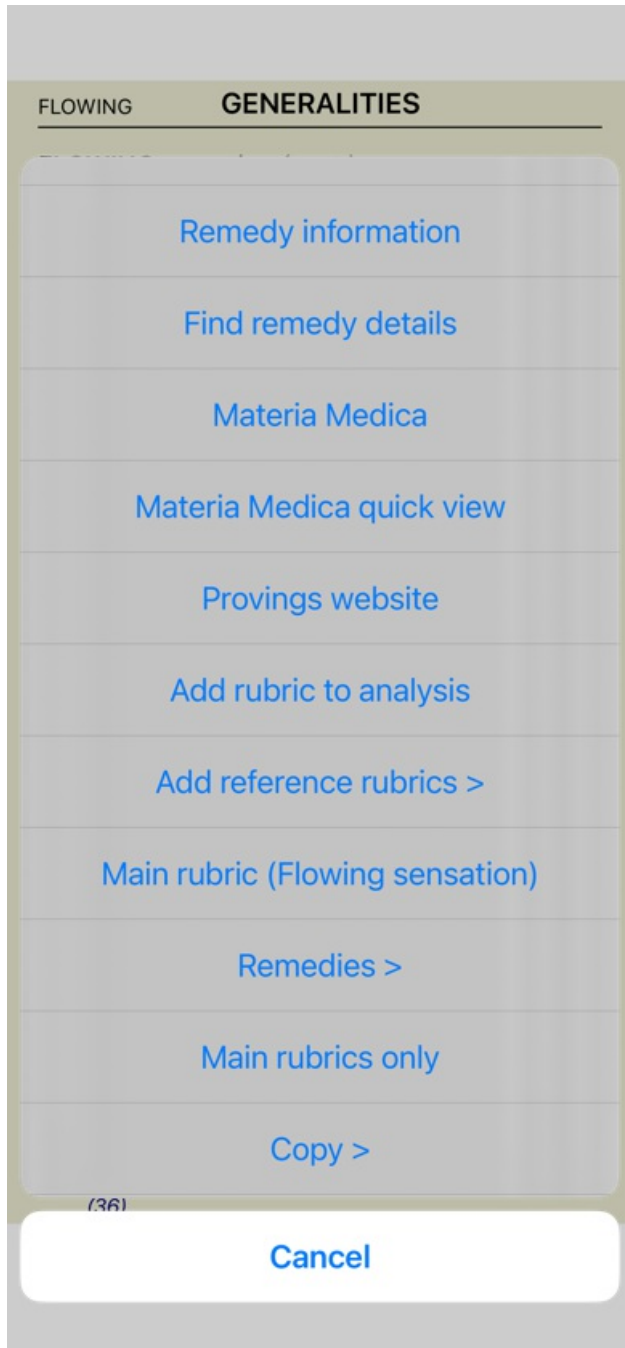

## Többszörös kiválasztás

Sok helyzetben előfordulhat, hogy egy bizonyos feladatot egyszerre több elemen is el szeretne végezni, nem pedig csak egy kiválasztott elemen.

Ezekben az esetekben először több elemet is kijelölhet, majd a feladatot az összes kijelölt elemen elvégezheti.

### Több elem kiválasztása

Az alábbi példák a *Analysis* modulban található rubrikák többszörös kiválasztását mutatják. Más helyeken az elvek ugyanazok.

Egyetlen sor kijelöléséhez egyszerűen kattintson rá az egérrel:

16 Mind; Activity; night  
1 Mind; Activity; midnight, until  
9 Mind; Activity; sleeplessness, with  
83 Mind; Activity; hyperactive  
488 Mind; Cheerfulness  
26 Mind; Noises; aversion to  
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive  
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain  
1 Mind; Theorizing; evening  
2 Mind; Theorizing; night

Egyetlen sor kijelölését megváltoztathatja, ha a szöveg bal oldalán kattint. (A *Book* és a *Find* modulokban a rubrika címkéjétől balra kattintva a következőre kattinthat)

16 Mind; Activity; night  
1 Mind; Activity; midnight, until  
9 Mind; Activity; sleeplessness, with  
83 Mind; Activity; hyperactive  
488 Mind; Cheerfulness  
26 Mind; Noises; aversion to  
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive  
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain  
1 Mind; Theorizing; evening  
2 Mind; Theorizing; night

16 Mind; Activity; night  
1 Mind; Activity; midnight, until  
9 Mind; Activity; sleeplessness, with  
83 Mind; Activity; hyperactive  
488 Mind; Cheerfulness  
26 Mind; Noises; aversion to  
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive  
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain  
1 Mind; Theorizing; evening  
2 Mind; Theorizing; night

## Több kiválasztott elemre ható műveletek

### Könyv modul

A *Book* modulban több rubrikát is kiválaszthat. Egyes funkciók több rubrikán is működnek, mások csak egyetlen rubrikán.

Ezek azok a funkciók, amelyek több rubrikán is működnek:

- Adjon hozzá rubrikákat az elemzéshez. (Előugró menü opció *Rubrika hozzáadása az elemzéshez*).
- Rubrikák hozzáadása egy adott tünethez az elemzésben. (Előugró menü opció *Rubrika hozzáadása... / Új tünet...*).
- A rubrika címkék másolása a vágólapra. (Előugró menü opció *Másolás / Rubrika címkéjének másolása*).
- Másolja a rubrikacímkeket a jogorvoslataikkal együtt a vágólapra. (Előugró menü opció *Másolás / Rubrikák és szerek másolása*).

Minden más funkció egyetlen rubrikán működik. Ha több rubrikát választott ki, akkor az a rubrika lesz a használt, amelyre utoljára kattintott.

### Modul keresése

A *Find* modulban a több rubrikára vonatkozó funkciók megegyeznek a *Book* modulban található funkciókkal.

### Esetmodul

A *Case* modulban a következő funkciók működnek a többszörös kiválasztás esetén:

- Többszörös elemzések törlése. (Előugró menü opció *Elemzés törlése*).
- Többszörös elemzések áthelyezése egy másik esetbe. (Előugró menü opció *Elemzés mozgatása az esethez...*).
- Több recept törlése. (Előugró menü opció *Felírás törlése*).

### Elemzési modul

A *Analysis* modulban a következő funkciók működnek többszörös kijelöléssel:

- Több rubrika vagy tünet törlése. (Előugró menü opció *Kijelöltek törlése*).
- Súlytényező hozzárendelése. (Előugró menü opció *Súly / Súlyozás x2*). És így tovább.
- Tünetosztályozási osztály hozzárendelése. (Előugró menü opció *Tünet klasszifikáció / Pszóra*). És így tovább.
- Minden csoportosítási funkció.
- A rubrikacímkek másolásának funkciói, jogorvoslattal vagy anélkül.
- A kiválasztott rubrikák másolása, hogy beilleszthesse őket egy másik elemzésbe. (Előugró menü opció *Több / Kijelölt sorok másolása*, előugró menü opció *Több / Másolt sorok beillesztése*).

- A kiválasztott rubrikák felfelé vagy lefelé mozgatása egy másik tünetbe. (Előugró menü opció *Több / Mozgatás fölfelé*, előugró menü opció *Több / Mozgatás lefelé*).
- Több rubrika kiválasztása kiemeli az elemzés eredményei területen az adott rubrikák jogorvoslatait.
- Ha az elemzés eredményterületén több jogorvoslati lehetőséget választ ki, akkor kiemeli azokat a rubrikákat, amelyekben ezek a jogorvoslatok előfordulnak.

## MM modul

A *MM modul Repertórium* részében a MM modulban a több rubrikára vonatkozó funkciók megegyeznek a *Könyv modulban* találhatóakkal.

## Index fülek

A *Complete Dynamics* fő moduljai az úgynevezett indexfülek segítségével érhetők el.

A *Practitioner kiadásban* ezek a következők: *Index*, *Book*, *Find*, *Case*, *Analysis* és *Materia Medica*.

Preferences User and license About Help

Mind	Fever, heat
Vertigo	Perspiration
Head	Skin
Eyes	Generalities
Vision	Boger's general analysis
Ears	Clinical
Hearing	Mirilli's themes
Nose	Psychological themes
Smell	Rx & Associations
Face	Anatomical index
Mouth	Remedies
Taste	Kingdoms & families
Teeth	
Throat	
Neck	
Stomach	
Abdomen	
Rectum	
Stool	
Bladder	
Kidneys	
Urethra	
Urine	
Male	
Female	
Larynx & trachea	
Speech & voice	
Respiration	
Cough	
Expectoration	
Chest	
Heart & circulation	
Blood	
Back	
Extremities	
Sleep	
Dreams	
Chill	



Index

Book

Find

Case

MM

A *Index* modul gyors hozzáférést biztosít a könyv fejezeteihez, mind szöveges, mind grafikus megjelenítéssel. A részletekért lásd a *Index modul* című súgószekciót.

A *Book* modul mutatja a repertoárt. Úgy olvashatja, mint egy nyomtatott könyvet, de tömörebb formában is megtekintheti. A részletekért lásd a súgó *Könyv modul* című részét.

A *Find* modul hatékony funkciókat kínál a könyvben található rubrikák és jogorvoslatok megtalálásához. A részletekért lásd a súgó *Find module* című részét.

A *Case* modul segítségével létrehozhatja és rendszerezheti betegei ügyiratát. A részletekért lásd a *Case modul* című súgószekciót.

A *Analysis* modul az Ön eseteinek elemzésére szolgál. A részletekért lásd a *elemzési modul* című súgószekciót.

A *Materia Medica* modul a gyógymódokról ad tájékoztatást. A részletekért lásd a *Materia Medica modul* súgóját.

Egy iPhone-on legfeljebb 5 lap jeleníthető meg.

A *Analysis* fül jelenik meg, amint megnyit egy ügyiratot.

Ezután ideiglenesen elrejtjük a *Index* lapot.

# iOS verzió

## Az iOS használata

Az Apple iPhone® nem rendelkezik egérrel és billentyűzettel, mint a PC-ken. Az iPhone nem rendelkezik olyan alkalmazás menüsorral, mint a PC-n található alkalmazások.

Ehelyett a felugró menük olyan funkciókat kínálnak, amelyek egyébként a billentyűzet és a menüsor segítségével érhetők el.

Az iPhone érintőképernyője számos olyan lehetőséget kínál, amelyek egy számítógépen nem állnak rendelkezésre, ezeket gesztusoknak nevezzük.

Példák ezekre a gesztusokra, amelyeket a *Complete Dynamics*-ban használnak:

- Húzd meg. Helyezze az ujját a képernyőre, és húzza balra, jobbra, felfelé vagy lefelé. Gyakran használják könyvek lapozására. Olyan tartalmak görgetésére is használható, amelyek túl nagyok ahhoz, hogy elférjenek a képernyőn.
- Csípés. Helyezzen két ujját a képernyőre, majd mozgassa őket egymás felé vagy távolítsa el egymástól. A *Könyv modulban* a szöveg kisebbé vagy nagyobbá tételére használható.

Az iPhone és a számítógép közötti megosztás kissé másképp működik, mint két számítógép között, mivel a fájlok másolásához az iPhone-re és az iPhone-ről a számítógépen lévő iTunes alkalmazás használata szükséges. Erről külön fejezetet talál a *Case module, case sharing* alatt.

## Készülék tájolása

Az iPhoneet két különböző helyzetben tarthatod, úgynevezett tájoló és portré tájolásban. A *Complete Dynamics* alkalmazás automatikusan beállítja az információk megjelenítésének módját annak megfelelően, ahogyan az iPhoneet tartja.

A jelen kézikönyvben található összes kép az iPhone függőleges tájolású iPhonedel készült. Ez egyszerűen azért történt, mert általában így tartja a telefont.

Az Ön feladata, hogy felfedezze, hogyan néz ki minden, amikor megváltoztatja a pozíciót, és döntse el, mi a legkényelmesebb az Ön számára.

## Sebesség és memória

Az iPhone nem egy nagy számítógép, mint egy igazi PC, szinte korlátlan sebességgel és memóriával.

Mivel a *Complete Dynamics* egy nagyon összetett és nagyméretű program, ez bizonyos korlátokat szab az iPhone verzióra. Ha megérti ezeket a korlátozásokat, akkor nem jelenthetnek problémát.

A *Complete Repertory* közel 250.000 rubrikát tartalmaz, amely 2.500.000 jogorvoslati bejegyzést tartalmaz!

Ahhoz, hogy a *Find modulban* konkrét információkat keressen, ezeket az információkat össze kell hasonlítani. Ennek hatékonyabbá tétele érdekében a program igyekszik minél több információt a memóriában tartani. Ha az információ nincs a memóriában, akkor azt az adatbázisból kell beolvasni.

Az első kereséskor észreveheti, hogy a keresés viszonylag lassú lehet. A következő keresés azonban lényegesen gyorsabb, gyakran csak néhány másodperc (a lekérdezés összetettségétől függően), mivel a rubrikák és a jogorvoslatok már a memóriában vannak.

## Több mint 1 program

Ön általában 1-nél több programot használ az iPhonején. Mindezen programoknak az iPhone korlátozott memóriáját kell használniuk. Ha nem áll rendelkezésre elegendő memória minden program számára, az iPhone kéri a programokat, hogy szabadítsanak fel memóriát. Amikor ez megtörténik, a *Complete Dynamics* annyi memóriát szabadít fel, amennyit csak tud. Következésképpen a következő találat ismét több időt vehet igénybe.

Amíg Ön az egyik programmal dolgozik, a többi program nem csinál semmit. Ez idő alatt, ha a memória túlságosan szűkössé válik, az iPhone egyszerűen, figyelmeztetés nélkül befejezi a többi programot. Ez nem úgy történik, mint a PC-ken, de az iPhone szoftverét így tervezték.

A program befejezésekor az iPhone inkább a nagyobb programokat fejezi be. A legtöbb esetben ez a *Complete Dynamics* lesz, mert ez nem csak egy kis játékprogram.

Ez azt jelenti, hogy amikor egy másik programmal dolgozik, a *Complete Dynamics* csendben befejeződik, és a következő kiválasztáskor újra kell kezdeni az egészet.

A váratlan leállás elkerülése érdekében a *Complete Dynamics* a lehető legtöbb memóriát szabadítja fel, amikor másik alkalmazásra vált. Amikor visszakapcsol, ismét beolvassa a korábban felszabadított információkat.

Ez leginkább a *Find modulban* és a *Reverse Materia Medica modulban* érhető tetten. Ezek a modulok sokkal gyorsabbak, ha az összes szöveg és gyógymód már a memóriában van.

A memória állapota az eszköztáron látható:





Minden rubrika neve és jogorvoslati lehetőség a memóriában van. A keresés most már gyors lesz. Telefonon ez a smiley nem jelenik meg, hogy megőrizze a kijelzőterületet.




Néhány lényeges információ még nem olvasható. A keresésnek várnia kell néhány pillanatot.



 A rubrikák nevei a memóriában vannak, de a jogorvoslatok nem. A szöveg keresése gyors lesz. A jogorvoslatok keresése lassú lehet.

 A rubrikák nevei még nem olvashatók. A keresés lassú lehet.

 Az iPhone kénytelen felszabadítani a memóriát. A keresés lassú lehet.  
Az információk olvasása megszakadt, kattintson a gombra az olvasás újraindításához.

A memória felszabadítását a Beállítások beállítással engedélyezheti és letilthatja.

## **Az adatok mentése**

Mivel a programot az iPhone bármikor csendben leállíthatja, a megfelelő pillanatokban megpróbálja elmenteni az ügy adatait. Az ügy adatai automatikusan mentésre kerülnek, amikor:

- néhány másodpercig nem csinálsz semmit;
- másik alkalmazásra vált;
- egy nyitott ügy lezárult.

## **Tippek az optimális teljesítményhez**


A *Complete Dynamics* akkor teljesít a legjobban, ha:

- ne váltson át más programokra, kivéve, ha szüksége van rájuk;
- zárjon be minden olyan alkalmazást, amelyet nem igazán használ.

# Index modul

## Az Index modul megnyitása

Lépjen az Index modulba a *Index* fülre kattintva.

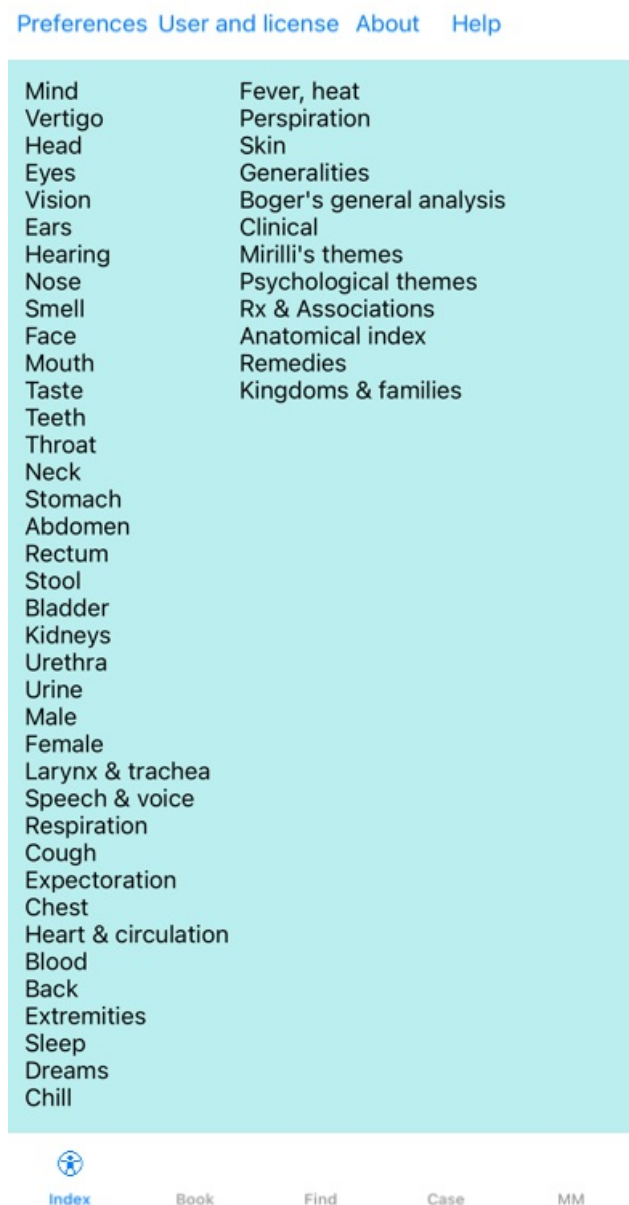

## Az Index modul használata

Az index modul gyors hozzáférést biztosít a repertórium tartalmához.

Csak kattintson egy elemre a művelet végrehajtásához.

## Több repertórium használata

Ha további repertoárokhoz is rendelkezik licenccel, a repertoár fejezetek indexében a repertoár neve is megjelenik.

Complete Repertory (...)

Ha a repertórium nevére kattint, a program kiválasztja a következő repertóriumot, és megmutatja annak fejezeteit. Van egy felugró menü is, amelyben kiválaszthat egyet a rendelkezésre álló repertoárok közül.

# Könyv modul

## A könyv modul megnyitása

Lépjen a Könyv modulba a *Könyv* fülre kattintva.

A következő példában a könyvet a *Mind; Anxiety; flushes of heat, with* rubrikánál nyitjuk ki.

ANXIETY

MIND

ANXIETY (cont.)

flushes of heat, with:

aesc agar aloe **Ambr** aml-n  
**Anac** androc ang arn ars **Asaf Bar-c Bry CALC** camph  
**CARB-V CHAM Chin-ar Cimic** coff cop croc cupr  
cygn-c **DROS** electr glyc-g **Gran** graph **Hep** ign **Ip**  
kali-bi lipp lsd **Merc** nat-c op phos **PLAT PULS Ruta**  
**SEP SPONG** sul-i  
• Congestion, with (32)  
• Anxiety; heat; during; face, of (11)  
• Generalities; heat; flushes of (597)

emphysema, in:

**CARB-V**  
• Chest; emphysema (158)

food, warm, hot, agg.:

mag-c  
• Anxiety; warmth; agg. (9)  
• Warmth; agg. (43)

foot bath, after

• Bathing, washing feet, after (2)  
• Bathing, washing; agg.; feet (6)

formication, crawling, with:

acon bar-m **CIST** lat-h  
**Nat-m** schis-g verat  
• Anxiety (1100)

fingers, of:

acon verat  
• Extremities; formication, crawling; fingers (89)

fright, fear

after:

**Acon** bell both-a **CUPR** gels hir **IGN KALI-BR** lach  
lyc merc nat-m op **PLUT-N** rob sac-l samb **SIL VERAT**  
• Mirilli's themes; fearful (830)

• pregnancy, in seventh month of: **IGN**  
• Anxiety; pregnancy, in (6)  
• Pregnancy, in (90)

fear of fright still remaining

• Fright, fear agg., ailments from; fear of fright still remaining (24)

fullness in abdomen, with:

**ARG-N**  
• Abdominal complaints, in (108)  
• Abdomen; anxiety; with (93)

green stripes, on seeing:

**THUJ**

headache, with:

**ACON AETH Alum** ambr ant-c ant-t  
**Argo ARN ARS** ars-s-f **Atist** bell benz-ac bov **But-ac**



Index

Book

Find

Case

MM

## Jogorvoslatok és hivatkozások

Egy rubrika mutatja a szövegét, majd a Jogorvoslatok és a Hivatkozások következnek.

**ABUSIVE, insulting:** **ABIES-N** **ACON** acon-f agath-a agki-p **Alco** aloe **AM-C** am-m **ANAC ANDROC** aran-ix arn ars ars-s-f **Astac** atro **AUR** aur-m-n aur-s **BELL** beryl-n **Biti-a** bor bov bufo **Bung-f** bute-j calc-i **CAMPH** canth carc **CAUST** cere-s **CHAM** chin cic **CON** cor-r coriand **CROC** cub culx cupr-ar der **Dulc** elae falco-p **FERR** fic **GALL-AC** gels gink granit-m **Hafn** harp helx-t hema-h **HEP** hist hydr hydr-ac **HYOS** ign iod **Ip KALI-AR** kali-c **KALI-I LAC-C** lac-d lach lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r **LYC LYSS** m-aust mag-c mangi med **MERC MOSCH** nat-c nat-m **Nit-ac** **NUX-V** ozon **PALL PETR PHYSALA-P PLAT** plb **Raja-s** ran-b rhus-g sac-l **Sanic Sarr** **SCORP SENEG SEP Sil** spong **Staph STRAM** stront-c **SULPH** syph **TARENT** thlaspi **THUJ** thul-f trich-d **Tritic-v TUB URAN** **VERAT** verbe-h viol-t vip **Xeno**

• General (1769)

• Answer, answering, answers; offensive (1)

• Contemptuous (119)

• Cursing, swearing, desires (141)

• Insolence, impertinence (51)

• Nipping at everyone (1)

• Quarrelsomeness, scolding (284)

• Rudeness (92)

• Mirilli's themes; offensive (458)

• Psychological themes; aggression (975)

**forenoon:** ran-b

• Forenoon (118)

**evening:** am-c am-m

• Evening; agg. (436)

**acts, after indecent:** bung-f

**angry, without being:** **Bell** dulc

**crying, with:** **STRAM**

**drunkards, in:** hep nux-v **PETR**

• Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (63)

**fever, during**

• Fever; during (327)

**intermittent:** **FERR**

• Fever; during (327)

• Fever, heat; intermittent, malarial (360)

A gyógymódok 4 fokozatban mutathatók ki.

A fokozatokat úgy különböztetjük meg, hogy különböző stílusban és színekben mutatjuk be őket.

Ebben a példában ezek a következők:

- 4: **CHAM, LYC, NUX-V.**

- 3: **ABIES-N, ACON, AM-C, ANAC, ANDROC, AUR ...**

- 2: **Alco, Bung-f, Dulc, Ip, Nit-ac, Sarr, Sil, Staph.**

- 1: acon-f, agath-a, agki-p, aloe, am-m ...

A jogorvoslatok listáját más rubrikákra való hivatkozások követik. Ebben a példában 10 hivatkozás van.

Egyszerűen kattintson a hivatkozásra a hivatkozott rubrikára.

## Teljes vagy kompakt nézet

### Jogorvoslatok és hivatkozások elrejtése

A kompakt nézetben csak a rubrikák jelennek meg, az általuk tartalmazott jogorvoslatok számával együtt, elrejtve a jogorvoslatokat a rendelkezésre álló képernyőterület optimális kihasználása érdekében.

Az összes jogorvoslat és hivatkozás elrejtéséhez vagy megjelenítéséhez kattintson duplán az oldal bármely fehér foltjára. A rubrika címkéjére duplán is kattinthat.

ANXIETY	MIND
<b>ANXIETY (cont.)</b>	
<b>flushes of heat, with:</b> (45)	
emphysema, in: (1)	
<b>food, warm, hot, agg.:</b> (1)	
<b>foot bath, after</b>	
<b>formication, crawling, with:</b> (7)	
fingers, of: (2)	
<b>fright, fear</b>	
after: (19)	
• pregnancy, in seventh month of: (1)	
fear of fright still remaining	
<b>fullness in abdomen, with:</b> (1)	
<b>green stripes, on seeing:</b> (1)	
<b>headache, with:</b> (72)	
agg., lying down: (1)	
gastric: (1)	
menses, before: (1)	
<b>heart complaints, in:</b> (261)	
<b>heat</b>	
before: (4)	
during: (92)	
• abdomen, in: (3)	
• chest, in	
• face, of: (11)	
• during and after: (1)	
• flushes of	
• hands, of	
• head, of	
• soup, after: (1)	
• sudden: (1)	
<b>heaviness, with:</b> (11)	
abdomen, in	



Index

Book

Find

Case

MM

### Alrubrikák elrejtése

Lehetőség van arra is, hogy az összes alrovatot elrejtse, így csak a repertoár legfelső szintű rovatai jelennek meg. (Előugró menü opció *Csak a legfontosabb rubrikák*).

Ez a lehetőség rendkívül hasznos azok számára, akik szeretnék megtanulni a repertoár szerkezetét.

ANXIETY

MIND

---

**ANXIETY:** (1100)  
**APOLOGIZES** frequently: (2)  
**APOPLEXY**, after: (43)  
**APPETITE**, with diminished: (40)  
**APPLICATIONS**  
**APPRECIATION**, desires: (109)  
**APPROACH** of a person agg.: (89)  
**APPROACHED**, aversion of being: (38)  
**ARDENT:** (15)  
**ARTISTIC**  
**ASCENDING** agg.: (11)  
**ASCETIC:** (1)  
**ASKING** for nothing, requesting no favors: (1)  
**ASKS**  
**ASTONISHED:** (7)  
**ATTACHED**, very: (89)  
**ATTACK** others, desire to: (23)  
**ATTENDED** to, desires to be: (9)  
**ATTENTION**  
**ATTRACTION**, luring sexual, women: (2)  
**AUDACITY:** (92)  
**AUTHORITY**, refusal to accept some one's: (52)  
**AUTISM**, mutinism: (38)  
**AUTOMATIC** behavior, acts: (28)  
**AVARICE:** (54)  
**AVERSION**  
**AWARENESS** heightened  
**AWKWARDNESS:** (150)  
**BARGAINING:** (5)  
**BARKING:** (17)  
**BATHING**, washing  
**BED**

Index

Book

Find

Case

MM

Könnyedén visszatérhet az összes rubrika megjelenítéséhez. (Előugró menü opció *Csak a legfontosabb rubrikák*).  
A rubrikára kattintva vissza is válthat a normál repertoár nézetre.

## Jogorvoslat rendezési sorrend

A jogorvoslatok nyomtatásának alapértelmezett sorrendje ábécésorrendben van.

A jogorvoslatokat a relevancia sorrendjében mutathatja be. (Előugró menü opció *Szerek / Fontossági sorrend*).

Betűrendes rendezés

Fontosság szerint rendezve



**ABUSIVE, insulting:** **ABIES-N** **ACON** acon-f agath-a agki-p **Alco** aloe **AM-C** am-m **ANAC** **ANDROC** aran-ix arn ars ars-s-f **Astac** atro **AUR** aur-m-n aur-s **BELL** beryl-n **Biti-a** bor bov bufo **Bung-f** bute-j calc-i **CAMPH** canth carc **CAUST** cere-s **CHAM** chin cic **CON** cor-r coriand **CROC** cub culx cupr-ar der **Dulc** elae falco-p **FERR** fic **GALL-AC** gels gink granit-m **Hafn** harp helx-t hema-h **HEP** hist hydr hydr-ac **HYOS** ign iod **Ip** **KALI-AR** kali-c **KALI-I** **LAC-C** lac-d lach lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r **LYC** **LYSS** m-aust mag-c mangi med **MERC** **MOSCH** nat-c nat-m **Nit-ac** **NUX-V** ozon **PALL** **PETR** **PHYSALA-P** **PLAT** plb **Raja-s** ran-b rhus-g sac-l **Sanic** **Sarr** **SCORP** **SENEG** **SEP** **Sil** spong **Staph** **STRAM** stront-c **SULPH** syph **TARENT** thlaspi **THUJ** thul-f trich-d **Tritic-v** **TUB** **URAN** **VERAT** verbe-h viol-t vip **Xeno**

- General (1769)
- Answer, answering, answers; offensive (1)
- Contemptuous (119)
- Cursing, swearing, desires (141)
- Insolence, impertinence (51)
- Nipping at everyone (1)
- Quarrelsomeness, scolding (284)
- Rudeness (92)
- Mirilli's themes; offensive (458)
- Psychological themes; aggression (975)

**forenoon:** ran-b

- Forenoon (118)

**evening:** am-c am-m

- Evening; agg. (436)

**acts, after indecent:** bung-f

**angry, without being:** **Bell** dulc

**crying, with:** **STRAM**

**drunkards, in:** hep nux-v **PETR**

- Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (63)

**fever, during**

- Fever; during (327)

**intermittent:** **FERR**

- Fever; during (327)
- Fever, heat; intermittent, malarial (360)

**ABUSIVE, insulting:** **NUX-V** **VERAT** **CHAM** **LYC**

**MOSCH** **THUJ** **CON** **HYOS** **CAMPH** **GALL-AC** **MERC** **SCORP** **CROC** **KALI-I** **PLAT** **STRAM** **URAN** **AUR** **LYSS** **PETR** **AM-C** **HEP** **BELL** **ABIES-N** **ANAC** **ANDROC** **CAUST** **IGN** **KALI-AR** **PALL** **SULPH** **ACON** **FERR** **LAC-C** **PHYSALA-P** **SENEG** **SEP** **TARENT** **TUB** **Nit-ac** **Ip** **Bung-f** **Dulc** **Astac** **Sanic** **Alco** **Sarr** **Sil** **Staph** **Biti-a** **Hafn** **Raja-s** **Tritic-v** **Xeno** am-m lava-e cor-r lach hydr agath-a aur-m-n bov calc-i carc falco-p gels helx-t nat-c nat-m ran-b acon-f agki-p aloe aran-ix arn ars ars-s-f atro aur-s beryl-n bor bufo bute-j canth cere-s chin cic coriand cub culx cupr-ar der elae fic gink granit-m harp hema-h hist hydr-ac iod kali-c lac-d lava-f lava-h lil-t loxo-r m-aust mag-c mangi med ozon plb rhus-g sac-l spong stront-c syph thlaspi thul-f trich-d verbe-h viol-t vip

- General (1769)
- Answer, answering, answers; offensive (1)
- Contemptuous (119)
- Cursing, swearing, desires (141)
- Insolence, impertinence (51)
- Nipping at everyone (1)
- Quarrelsomeness, scolding (284)
- Rudeness (92)
- Mirilli's themes; offensive (458)
- Psychological themes; aggression (975)

**forenoon:** ran-b

- Forenoon (118)

**evening:** am-c am-m

- Evening; agg. (436)

**acts, after indecent:** bung-f

**angry, without being:** **Bell** dulc

**crying, with:** **STRAM**

**drunkards, in:** **PETR** hep nux-v

- Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (63)

**fever, during**

- Fever; during (327)

**intermittent:** **FERR**

- Fever; during (327)
- Fever, heat; intermittent, malarial (360)

## A megjelenített információk korlátozása

A teljes és a kompakt nézet közötti váltás mellett lehetőség van a megjelenített jogorvoslatok számának korlátozására is.

Ez a megjelenített gyógymódokat csak azokra korlátozza, amelyek legalább az adott 1, 2, 3 vagy 4 fokozatúak. (Előugró menü opció *Szerek / Minden szint*, előugró menü opció *Szerek / 2+ fokozat*, előugró menü opció *Szerek / 3+ fokozat*, előugró menü opció *Szerek / 4+ fokozat*).

Példa, ismét a *Mind; Abusive*:

ABUSIVE	MIND
<b>ABUSIVE, insulting:</b> <i>CHAM LYC NUX-V VERAT</i> (+120)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>General</i> (538)</li> <li>• <i>Answer, answering, answers; offensive</i></li> <li>• <i>Contemptuous</i> (5)</li> <li>• <i>Cursing, swearing, desires</i> (7)</li> <li>• <i>Insolence, impertinence</i> (3)</li> <li>• <i>Nipping at everyone</i></li> <li>• <i>Quarrelsomeness, scolding</i> (21)</li> <li>• <i>Rudeness</i> (4)</li> <li>• <i>Mirilli's themes; offensive</i> (46)</li> <li>• <i>Psychological themes; aggression</i> (115)</li> </ul>	
<b>forenoon:</b> (+1)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Forenoon</i> (2)</li> </ul>	
<b>evening:</b> (+2)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Evening; agg.</i> (68)</li> </ul>	
<b>acts, after indecent:</b> (+1)	
<b>angry, without being:</b> (+2)	
<b>crying, with:</b> (+1)	
<b>drunkards, in:</b> (+3)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from</i> (9)</li> </ul>	
<b>fever, during</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Fever; during</i> (69)</li> </ul>	
<b>intermittent:</b> (+1)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Fever; during</i> (69)</li> <li>• <i>Fever, heat; intermittent, malarial</i> (59)</li> </ul>	
<b>typhoid:</b> (+1)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Fever, heat; continued, typhoid</i> (51)</li> </ul>	
<b>irritability, with:</b> (+3)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Irritability</i> (155)</li> </ul>	
<b>jealousy, out of:</b> (+3)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Jealousy</i> (7)</li> </ul>	
<b>menses, before:</b> (+2)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Menses; before</i> (20)</li> </ul>	
<b>molestation, after:</b> (+1)	
mamma molested: (+1)	
<b>opposition, from:</b> (+3)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Mirilli's themes; offensive</i> (46)</li> </ul>	



**ABUSIVE, insulting:** ABIES-N ACON AM-C ANAC  
 ANDROC AUR BELL CAMPH CAUST **CHAM** CON  
 CROC FERR GALL-AC HEP HYOS IGN KALI-AR  
 KALI-I LAC-C **LYC** LYSS MERC MOSCH **NUX-V** PALL  
 PETR PHYSALA-P PLAT SCORP SENEG SEP STRAM  
 SULPH TARENT THUJ TUB URAN **VERAT** (+85)

- General (980)
- Answer, answering, answers; offensive
- Contemptuous (20)
- Cursing, swearing, desires (35)
- Insolence, impertinence (19)
- Nipping at everyone
- Quarrelsomeness, scolding (67)
- Rudeness (17)
- Mirilli's themes; offensive (122)
- Psychological themes; aggression (336)

**forenoon:** (+1)

- Forenoon (21)

**evening:** (+2)

- Evening; agg. (146)

**acts, after indecent:** (+1)

**angry, without being:** (+2)

**crying, with:** **STRAM**

**drunkards, in:** **PETR** (+2)

- Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (20)

**fever, during**

- Fever; during (146)

**intermittent:** **FERR**

- Fever; during (146)
- Fever, heat; intermittent, malarial (159)

**typhoid:** (+1)

- Fever, heat; continued, typhoid (124)

**irritability, with:** (+3)

- Irritability (361)

**jealousy, out of:** **NUX-V** (+2)

- Jealousy (35)

**menses, before:** **CHAM** (+1)

- Menses; before (69)

**molestation, after:** (+1)

ABUSIVE	MIND
<b>ABUSIVE, insulting:</b> ABIES-N ACON <i>Alco</i> AM-C ANAC ANDROC <i>Astac</i> AUR BELL <i>Biti-a Bung-f</i> CAMPH CAUST <i>CHAM</i> CON CROC <i>Dulc</i> FERR GALL-AC <i>Hafn</i> HEP HYOS IGN <i>Ip</i> KALI-AR KALI-I LAC-C <i>LYC</i> LYSS MERC MOSCH <i>Nit-ac</i> <i>NUX-V</i> PALL PETR PHYSALA-P PLAT <i>Raja-s Sanic Sarr</i> SCORP SENEG SEP <i>Sil Staph</i> STRAM SULPH TARENT THUJ <i>Tritic-v</i> TUB URAN <i>VERAT</i> <i>Xeno</i> (+70)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• General (1251)</li> <li>• Answer, answering, answers; offensive</li> <li>• Contemptuous (26)</li> <li>• Cursing, swearing, desires (50)</li> <li>• Insolence, impertinence (24)</li> <li>• Nipping at everyone</li> <li>• Quarrelsomeness, scolding (103)</li> <li>• Rudeness (26)</li> <li>• Mirilli's themes; offensive (200)</li> <li>• Psychological themes; aggression (481)</li> </ul>	
<b>forenoon:</b> (+1) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forenoon (30)</li> </ul>	
<b>evening:</b> (+2) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evening; agg. (214)</li> </ul>	
<b>acts, after indecent:</b> (+1)	
<b>angry, without being:</b> <i>Bell</i> (+1)	
<b>crying, with:</b> STRAM	
<b>drunkards, in:</b> PETR (+2) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (25)</li> </ul>	
<b>fever, during</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fever; during (185)</li> </ul>	
<b>intermittent:</b> FERR <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fever; during (185)</li> <li>• Fever, heat; intermittent, malarial (203)</li> </ul>	
<b>typhoid:</b> (+1) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fever, heat; continued, typhoid (145)</li> </ul>	
<b>irritability, with:</b> <i>Ip</i> (+2) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Irritability (488)</li> </ul>	
<b>jealousy, out of:</b> <i>NUX-V</i> (+2) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jealousy (50)</li> </ul>	
<b>menses, before:</b> CHAM (+1)	

Minden jogorvoslati lehetőség látható.

**ABUSIVE, insulting:** **ABIES-N** **ACON** acon-f agath-a agki-p **Alco** aloe **AM-C** am-m **ANAC** **ANDROC** aran-ix arn ars ars-s-f **Astac** atro **AUR** aur-m-n aur-s **BELL** beryl-n **Biti-a** bor bov bufo **Bung-f** bute-j calc-i **CAMPH** canth carc **CAUST** cere-s **CHAM** chin cic **CON** cor-r coriand **CROC** cub culx cupr-ar der **Dulc** elae falco-p **FERR** fic **GALL-AC** gels gink granit-m **Hafn** harp helx-t hema-h **HEP** hist hydr hydr-ac **HYOS** **IGN** iod **Ip** **KALI-AR** kali-c **KALI-I** **LAC-C** lac-d lach lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r **LYC** **LYSS** m-aust mag-c mangi med **MERC** **MOSCH** nat-c nat-m **Nit-ac** **NUX-V** ozon **PALL** **PETR** **PHYSALA-P** **PLAT** plb **Raja-s** ran-b rhus-g sac-l **Sanic** **Sarr** **SCORP** **SENEG** **SEP** **Sil** spong **Staph** **STRAM** stront-c **SULPH** syph **TARENT** thlaspi **THUJ** thul-f trich-d **Tritic-v** **TUB** **URAN** **VERAT** verbe-h viol-t vip **Xeno**

- General (1769)
- Answer, answering, answers; offensive (1)
- Contemptuous (119)
- Cursing, swearing, desires (141)
- Insolence, impertinence (51)
- Nipping at everyone (1)
- Quarrelsomeness, scolding (284)
- Rudeness (92)
- Mirilli's themes; offensive (458)
- Psychological themes; aggression (975)

**forenoon:** ran-b

- Forenoon (118)

**evening:** am-c am-m

- Evening; agg. (436)

**acts, after indecent:** bung-f

**angry, without being:** **Bell** dulc

**crying, with:** **STRAM**

**drunkards, in:** hep nux-v **PETR**

- Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (63)

**fever, during**

- Fever; during (327)

**intermittent:** **FERR**

- Fever; during (327)
- Fever, heat; intermittent, malarial (360)

## Szöveg mérete

A szöveg kisebb vagy nagyobb méretben is megjeleníthető. (Előugró menü opció *Kisebb szöveg*, előugró menü opció *Standard szöveg méret*, előugró menü opció *Nagyobb szöveg*).


Az iPhoneen a szöveget a csippentés gesztusával kisebbre vagy nagyobbra állíthatod. A szöveg méretének megváltoztatásához helyezze két ujját a képernyőre, és mozgassa őket egymástól távolabb vagy egymás felé.

## Rubrikák másolása a vágólapra

Néha hasznos lehet a rubrikát a vágólapra másolni, és beilleszteni egy másik alkalmazásba, például egy szövegszerkesztőbe. (Előugró menü opció *Másolás / Rubrika címkéjének másolása*, előugró menü opció *Másolás / Rubrikák és szerek másolása*).

## Nyelvválasztás

A program kiadásától és a licenctől függően a *Complete Repertory* több nyelvi opció is elérhető lehet.

A rendelkezésre álló nyelvi beállítások a menüből vagy a gombsoron keresztül választhatók ki. (Előugró menü opció *Nyelv / Angol könyv*). (Zászló gomb, )

A *Practitioner* kiadásban, egy második nyelv is választható (a lehetőségek a licenctől függenek), hogy a rubrika szövege más nyelven jelenjen meg.

Például francia: (Előugró menü opció *Nyelv / Extra francia könyv*).

**ABUSIVE, insulting:** **ABIES-N** **ACON** acon-f agath-a agki-p **Alco** aloe **AM-C** am-m **ANAC** **ANDROC** aran-ix arn ars ars-s-f **Astac** atro **AUR** aur-m-n aur-s **BELL** beryl-n **Biti-a** bor bov bufo **Bung-f** bute-j calc-i **CAMPH** canth carc **CAUST** cere-s **CHAM** chin cic **CON** cor-r coriand **CROC** cub culx cupr-ar der **Dulc** elae falco-p **FERR** fic **GALL-AC** gels gink granit-m **Hafn** harp helx-t hema-h **HEP** hist hydr hydr-ac **HYOS** **IGN** iod **Ip** **KALI-AR** kali-c **KALI-I** **LAC-C** lac-d lach lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r **LYC** **LYSS** m-aust mag-c mangi med **MERC** **MOSCH** nat-c nat-m **Nit-ac** **NUX-V** ozon **PALL** **PETR** **PHYSALA-P** **PLAT** plb **Raja-s** ran-b rhus-g sac-l **Sanic** **Sarr** **SCORP** **SENEG** **SEP** **Sil** spong **Staph** **STRAM** stront-c **SULPH** syph **TARENT** thlaspi **THUJ** thul-f trich-d **Tritic-v** **TUB** **URAN** **VERAT** verbe-h viol-t vip **Xeno**

- General (1769)
- Answer, answering, answers; offensive (1)
- Contemptuous (119)
- Cursing, swearing, desires (141)
- Insolence, impertinence (51)
- Nipping at everyone (1)
- Quarrelsomeness, scolding (284)
- Rudeness (92)
- Mirilli's themes; offensive (458)
- Psychological themes; aggression (975)

**forenoon:** ran-b

- Forenoon (118)

**evening:** am-c am-m

- Evening; agg. (436)

**acts, after indecent:** bung-f

**angry, without being:** **Bell** **dulc**

**crying, with:** **STRAM**

**drunkards, in:** hep nux-v **PETR**

- Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (63)

**fever, during**

- Fever; during (327)

**intermittent:** **FERR**

- Fever; during (327)
- Fever, heat; intermittent, malarial (360)



Index

Book

Find

Case

MM

## Kedvenc rubrikák

Egyes rubrikákat fontosnak, másokat kevésbé fontosnak tarthat. Ez különösen akkor igaz, ha a *Find modul* segítségével keres rubrikákat. Az Ön számára fontos rubrikák külön hangsúlyt kaphatnak, ha kedvencként jelölheti meg őket.

Egy rubrikát kedvencnek jelölhet, ha rákattint a rubrikára, majd megjelöli.

Minden olyan rubrika, amelyet kedvencnek jelöltek, aláhúzással lesz jelölve.

Ha bármelyik rubrikát kedvencnek jelölte meg, a *Find modulban* () megjelenik egy extra mező, amely lehetővé teszi, hogy a keresést csak a kedvenc rubrikákra korlátozza.

## Könyv modul standard repertoár szűrők

Normális esetben a *Book modul* a *Complete Repertory* teljes tartalmát mutatja.

Néhány standard szűrő áll rendelkezésre. Kiválaszthatja őket a menüsoron keresztül, vagy az oldal szélén található felugró menükön keresztül. (Előugró menü opció *Könyv válogatás / Teljes*).

<i>Teljes</i>	A teljes repertoár megjelenítése szűrés nélkül.
<i>Klasszikus</i>	Csak klasszikus szerzőktől származó rubrikákat és jogorvoslatokat mutasson. Ez a repertóriumot a főbb klasszikus repertóriumokban előforduló rubrikákra és az 1930 előtti könyvekből származó gyógymódokra korlátozza.

<i>Megbízható szerzők</i>	George Vithoulkas szerint csak a legmegbízhatóbbnak tartott szerzőket mutassa meg.
<i>Kent rubrikák</i>	A repertoár a Kent repertoárjából származó rubrikákra korlátozódik.
<i>Rubrikák az Allen's Therapeutic Pocket Bookból</i>	A repertórium az Allen's Therapeutic Pocket Bookból származó rubrikákra korlátozódik.

Ha egy szűrő ki van választva, a neve megjelenik a repertóriumkönyv elrendezésének fejlécében. Így könnyen láthatja, hogy melyik repertoár opciót használja.

Megjegyzés: A repertoárszűrők csak a *Complete Repertory* tartalmára vonatkoznak.


Ha a licenc támogatja további repertóriumok használatát, vagy ha saját maga hozott létre további repertóriumokat, a szűrők nem vonatkoznak ezekre az anyagokra.



# Modul keresése

## A Keresés modul megnyitása

Lépjen a Keresés modulba a *Keresés* fülre kattintva.

Find   Found 71 rubrics

**MIND**  
ANXIETY; afternoon; agg.; four pm.: **LYC** (+8)  
CONSCIENTIOUS about trifles; four pm. - eight pm.: **LYC**  
WEEPING, tearful mood; afternoon; agg.; four pm.: **LYC** (+2)  
WEEPING, tearful mood; afternoon; agg.; four pm.; eight pm., until: **LYC** (+1)


**HEAD**  
PAIN, headache; afternoon; agg.; four pm.: **LYC** (+54)  
PAIN, headache; afternoon; agg.; four pm.; eight pm., until: **LYC** (+4)  
PAIN, headache; vertex; afternoon; four pm. - eight pm.: **LYC**  
PAIN, headache; pressing; vertex; afternoon; four pm. - eight pm.: **LYC**

**EYES**  
PAIN; afternoon; four pm.: **LYC** (+7)  
PAIN; afternoon; four pm.; eight pm., until: **LYC**


**VISION**  
AFTERNOON; three pm. or four pm.: **LYC** (+10)  
LOSS of, blindness; afternoon; four pm.: **LYC**

**HEARING**  
NOISES; afternoon; four pm.: **LYC** (+2)  
REVERBERATING, echoes and reechoes; four pm.: **LYC**  
ROARING; afternoon; four pm.: **LYC**

**NOSE**  
EPISTAXIS, hemorrhage; afternoon; four pm.: **LYC** (+1)

 [Index](#) [Book](#) [Find](#) [Case](#) [MM](#)

## Mezők keresése

A kis képernyőkön a helykímélés érdekében a Keresés mezők kezdetben nem jelennek meg. A mezők a Keresés mező mögötti  gomb megnyomásával jeleníthetők meg. A mezők a *Hide* gomb megnyomásával távolíthatók el a képernyőről.

Text

Remedies

Min. grade

Min. rubric size

Max. rubric size

Complete symptoms ☐

Chapters


Rubric types

[Clear](#) [Hide](#)

Szöveg

Adja meg a keresendő szövegrészleteket:

xyz	Minden szó, amely a <i>xyz</i> kezdőbetűvel kezdődik.
=xyz	A szónak pontosan <i>xyz</i> kell lennie.
*xyz	A Word a <i>xyz</i> címet tartalmazza bárhol a szövegben.
"abc xyz"	Szövegekombináció <i>abc</i> , amelyet a <i>xyz követ</i>
abc + def	Mindkét szövegnek, <i>abc</i> ÉS <i>def</i> , elő kell fordulnia.
abc+def	Ugyanaz, mint fent, a szóközök használata nem kötelező.
abc def	Ugyanaz, mint fent, az AND az alapértelmezett. (A + automatikusan beillesztésre kerül a <i>def</i> előtt.)
-abc	A szöveg <i>abc</i> NEM szerepelhet a szövegben. Ez a fenti módon kombinálható az =, * és "" jelekkel. Példák: - <i>morning</i> - <i>*ation</i> - <i>"az ágyból"</i>
abc / def	Vagy <i>abc</i> VAGY <i>def</i> kell, hogy szerepeljen (a szóközök használata nem kötelező).
Ezek kombinációi is lehetségesek. Példák:	
délután négy/nyolc óra	( <i>négy</i> VAGY <i>nyolc</i> ), ÉS <i>pm</i> .
pm négy/nyolc	Ugyanaz, mint fent, a sorrend nem fontos.
"ágyból felkelés" reggel	A szekvencia <i>felkelés az ágyból</i> , ÉS <i>reggel</i> .
félelem / szorongás	( <i>félelem</i> VAGY <i>szorongás</i> ) ÉS ( <i>tömeg</i> VAGY <i>emberek</i> ).
tömeg/emberek	(A + automatikusan beillesztésre kerül a <i>tömeg</i> előtt)



**Jogorvoslatok** Adja meg a keresendő jogorvoslatok rövidítéseit. A mező jobb oldala mellett található  gomb megnyomásával egy keresőablak jelenik meg, amely lehetővé teszi, hogy interaktív módon válasszon ki egy gyógymódot, ha nem tudja fejből a rövidítést.

sep	Jogorvoslat <i>sep</i>
sep.	Ugyanúgy, mint fentebb, a pontjelölés használható, de itt nincs rá szükség (a <i>Find</i> mezőben van rá szükség).
-sep	Jogorvoslat <i>sep</i> NEM lehet jelen a rubrikában.
sep / nat-m	Vagy a <i>sep</i> OR <i>nat-m</i>
sep nat-m	Ugyanaz, mint fent, a VAGY az alapértelmezett. (A / automatikusan beillesztésre kerül a <i>nat-m</i> ) előtt
sep/staph+nat-m/mag-m	( <i>sep</i> OR <i>staph</i> ) ÉS ( <i>nat-m</i> OR <i>mag-m</i> )
szept. staphylococcus. + nat-m. mag-m.	Ugyanaz, mint fent. (A / automatikusan beillesztésre kerül a <i>staph</i> és a <i>mag-m</i> előtt)

**Min. fokozat** Adja meg a jogorvoslatok minimális osztályozását (1-4).

**Minimális rubrikaméret** Adja meg a minimális számú jogorvoslatot egy rubrikában.

**Maximális rubrikaméret** Adja meg a maximális számú jogorvoslatot egy rubrikában.

<i>Teljes tünetek</i>	Korlátozza a keresést a teljes tünetre. A teljes tünet olyan tünet, amely egy helyből, egy érzésből és a módozatokból vagy kísérőjelenségekből áll. Ez az opció kizárólag a <i>Complete Repertory</i> oldalon történő kereséskor használható. Más repertóriumok általában nem tartalmazzák ezt az információt.
<i>Rubrika típusok</i>	A mező jobb oldala mellett található  gomb megnyomásával egy ablak jelenik meg, amely lehetővé teszi a rubrikák típusainak interaktív kiválasztását, mint például Times, Sides, Location stb. Amennyiben az Ön licencében további repertóriumok használata engedélyezett, kérjük, vegye figyelembe, hogy a további repertóriumok gyakran nem jelölték a rubrikákat, mint Times, Sides, Location stb. Bármelyik kiválasztás, amit itt tesz, csak olyan repertoárokhoz alkalmazható, amelyeket megfelelően előkészítettek erre, mint például a <i>Complete Repertory</i> .
<i>Fejezetek</i>	A mező jobb oldala mellett található  gomb megnyomásával egy ablak jelenik meg, amely lehetővé teszi a fejezetek interaktív kiválasztását.

A keresés automatikusan elindul a keresési feltételek megadása után, nincs szükség semmilyen gomb megnyomására.

Vegye figyelembe, hogy a szöveg esetében az alapértelmezett érték több töredék esetén az ÉS, de a jogorvoslatok esetében a VAGY. Ennek oka az, hogy több szövegrészlet megadásakor valószínűleg korlátozni kívánja a keresési eredményt, míg több jogorvoslat esetén differenciáldiagnózist szeretne végezni.

## Eredmények keresése

Az iPhoneen a keresés azonnal elindul, amint befejezte a mező beírását. Ha a képernyőn megjelenő billentyűzetet használja, először el kell rejtenie azt. Ha külső billentyűzetet használ, nyomja meg az Enter billentyűt.

A részletesség szintje attól függ, hogy mit keresett. Ha gyógymódokat keresett, a kiválasztott gyógymódok szerepelnek a keresési eredményben. Ha csak szöveget kerestek, nem jelennek meg a jogorvoslatok.  
Röviden, a keresési eredmény arra összpontosít, amit kért, nem pedig a nem kért részletekre.

A keresési eredményterület sok hasonlóságot mutat a *Book* modullal.  
A navigáció ugyanazzal a billentyűzettel, egérrel, gombsorral vagy menüfunkciókkal történik.  
Emellett az elrendezés automatikusan az ablak méretéhez igazodik.

A *Find* modulban a jogorvoslatok megjelenítése a valamivel kisebb rubrikákra korlátozódik. A sok jogorvoslatot tartalmazó rubrikák csak a jogorvoslatok számát mutatják.

A *könyv* modulban található navigációs lehetőségeken kívül a keresési eredmény lehetőséget kínál arra, hogy a könyvben található rubrikára egyszerűen az egérrel történő dupla kattintással közvetlenül a rubrikára ugorjon.



# Esetmodul

## Az ügy modul megnyitása

Lépjen az ügymodulba a *Case* fülre kattintva.

Patients

Colleagues

Study

Seminars

Other

Archived

Filter

Abif, Hiram

Al-Rashidi, Muhammed

Andrews, Sandra - 197.

Baker, Charles

Barrett, Elizabeth Jane.

Boyle, Susan - 1961 (61

Clappin, Charles Berna

Clappin, Edward - 1960

Garrod, Rishi - 1955 (61

Grinsven, Eduard van -.

Grinsven, Kyra van - 19

Grinsven, Michel van -..

Huidekooper, Rolf - 196

Hyper, John

Open

New

Edit

Archive

Index

Book

Find

Case

MM

Az Eset modul lehetővé teszi, hogy létrehozza és rendszerezze betegei esetfájljait, regisztrálja az Ön által kiállított recepteket, valamint elemzéseket készítsen és rendszerezzen.

Az Ügyek modullal való munka olyan, mintha valódi ügyiratokkal dolgozna.

Az ügyek csoportokba vannak rendezve, ahogyan a való életben az ügyiratokat különböző iratszekrényekbe vagy fiókokba rendezné.

Először válassza ki a csoportot vagy csoportokat, amelyekben dolgozni szeretne.

A kiválasztott csoportokba tartozó esetek egy listában jelennek meg, a betegadatoknak csak egy összefoglalójával: Név és születési év.

Az esetek szűrhetők a betegnév egy vagy több részének megadásával a lista alatti *Filter* mezőben.

Ha egy ügyet kiválasztott a listában, az ügyirat a képernyő jobb oldalán jelenik meg.

A következő lépés az ügyirat megnyitása lenne, de előbb néhány részletet ismertetünk az ügykezelésnek erről a részéről.

## Csoportok kiválasztása és saját csoportok létrehozása

A csoportok kiválasztóját egyfajta fiókos szekrénynek tekintheti.

Patients
Colleagues
Study
Seminars
Other
Archived

Ezen a képen a *Patients* fiókot nyitották ki.

A standard csoportok a következők:

<i>Betegek</i>	Minden olyan esettípus, amely az esetleírásban <i>Patient</i> (további információ alább) megjelöléssel van ellátva, és amelynek Ön a szerzője.
<i>Kollégák</i>	Minden olyan ügyirat, amelyet az esetleírásban <i>Beteg</i> megjelöléssel jelöltek, és amelynek más a szerzője.
<i>Tanulmány</i>	Minden olyan ügyirat, amelyet <i>tanulmányként</i> jelöltek meg. Ezek olyan esetek, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül egyik betegéhez sem, hanem csak az Ön személyes tanulmányozására szolgálnak.
<i>Szemináriumok</i>	Minden olyan ügyirat, amelyet <i>szemináriumként</i> jelöltek meg. Ebben a csoportban olyan eseteket hozhat létre, amelyek szemináriumokon és képzéseken fordulnak elő.
<i>Egyéb</i>	Minden olyan eset, amely nem tartozik más csoportba.
<i>Archivált</i>	Az összes archivált ügy. Az archivált esetek már nem jelennek meg a többi csoportban.

Egyszerre egy vagy több fiókot is kinyithat. Csak kattintson egy fiókra a megnyitáshoz vagy bezáráshoz. Az egyik fiókra való dupla kattintással megnyithatja azt, és ezzel egyidejűleg bezárhatja az összes többi.

Patients
Colleagues
Study
Seminars
Other
Archived

Két fiókot nyitnak ki.

Az eseteket tartalmazó listán az összes olyan eset látható, amely "Tanulmány" vagy "Szeminárium" megjelöléssel van ellátva.

Természetesen ezek a csoportok nem felelnek meg az Ön személyes kívánságainak. Új fiókok létrehozása saját csoportokkal egyszerű. Az esetinformációk szerkesztésekor megadhatja, hogy az eset mely csoportokban szerepeljen. Használhatja a három standard csoportot: "Beteg", "Tanulmány" és "Szeminárium", de saját csoportneveket is megadhat. Az új fiókok automatikusan felkerülnek a listára:

Patients
Colleagues
Study
Seminars
Family
Teaching
Workgroup
Other
Archived

A *Család*, *Tanítás* és *Munkacsoport* fiókok automatikusan hozzáadódnak a listához, mivel néhány esetben ezeket a csoportneveket használták az esetinformációkban.

## A megfelelő ügyirat kiválasztása

A listában megjelenik az összes olyan eset, amely megfelel a kiválasztott csoportnak vagy csoportoknak. Ha a *Szűrő* mezőben valamilyen szöveget ír be, a lista a szűrőszövegnek megfelelő esetekre korlátozódik.

Egy példa a szűrő használatára:

Patients
Colleagues
Study
Seminars
Other
Archived

Filter 

Abif, Hiram
Al-Rashidi, Muhammed...
Andrews, Sandra - 197...
Baker, Charles
Barrett, Elizabeth Jane...
Boyle, Susan - 1961 (61)
Clappin, Charles Bernar...
Clappin, Edward - 1960...
Garrod, Rishi - 1955 (68)
Grinsven, Eduard van - ...
Grinsven, Kyra van - 19...
Grinsven, Michel van - ...
Huidekooper, Rolf - 199...
Hyper, John

Open New Edit Archive

Patients
Colleagues
Study
Seminars
Other
Archived

Filter 

Huidekooper, Rolf - 199...
Rolf, Charles - 1972 (51)
Rolf, Saskia - 1973 (50)
Rolf, Victor - 1970 (53)

Open New Edit Archive

Patients
Colleagues
Study
Seminars
Other
Archived

Filter 

Rolf, Victor - 1970 (53)
--------------------------

Open New Edit Archive

A szűrőnek van néhány nagyon hatékony lehetősége a megfelelő eset kiválasztására. Ugyanazokat a szűrési feltételeket használja, mint a

Find mező a szöveg és a jogorvoslatok esetében.

A *Case modulban*, a szöveg a listában szereplő név, a gyógymódok pedig a betegnek felírt (vagy NEM felírt) gyógymódok. A részletekért kérjük, olvassa el a "Keresés" mező című szakaszt.

Példa: *John* vagy *Joseph*, akinek a *nux-v*, de soha nem *sulph*, csak írja be:  
*jános / joseph nux-v. -sulph*.  
(Figyelje meg a pontot a gyógymódok neve mögött!).

## Ügyirat létrehozása

Új ügyiratot a *New* gombra kattintva hozhat létre.


Ekkor megjelenik egy párbeszédpanel, ahol megadhatja a beteg adatait, valamint az eset háttérinformációit.

### Az eset adatainak szerkesztése

A *Beteg* szakaszban kitölthet minden olyan személyes adatot, amelyet a betegről tárolni szeretne. Nyomja meg a *Photo* gombot a fénykép készítéséhez. A fénykép mérete automatikusan átméreteződik. A *Clear* gomb segítségével eltávolíthat egy meglévő fényképet. Ha a beteg születési éve, hónapja vagy napja nem ismert, egyszerűen írja be a 0 értéket.

Ha a pontos születési nap nem ismert, de a páciens csak a jelenlegi életkorát adja meg, akkor a születési év mezőben megadhatja az életkort.

### Case information

Family name	<input type="text" value="Barrett"/>		
First name	<input type="text" value="Elizab..."/>		
Middle name	<input type="text" value="Jane"/>		
Initials	<input type="text" value="E.J.M."/>		
Gender	<input type="text" value="Female"/>		
Birth year	<input type="text" value="1950"/>	<input type="button" value="−"/>	<input type="button" value="+"/>
Birth month	<input type="text" value="7"/>	<input type="button" value="−"/>	<input type="button" value="+"/>
Birth day	<input type="text" value="4"/>	<input type="button" value="−"/>	<input type="button" value="+"/>
Photo			

A *Case* szakaszban megadhat néhány háttérinformációt az esetről, amelyek nem kapcsolódnak magához a beteghez.

A *Case groups* csoportban kiválaszthatja a szabványos csoportok egyikét, és/vagy megadhatja saját csoportneveit szóközzel vagy pontosvesszővel elválasztva.

A *Ügy háttere* csoport hasznos, ha ez az ügy egy szemináriumból, magazinból stb. származik, és emlékezni szeretne arra, hogy honnan származik az ügy.

### Case information

Patient



Study



Seminar



Other groups

---

Personal info   Address info   Family info   **Case groups**   Case background

**Cancel**   **OK**

---

## Ügy megnyitása

Megnyithat egy meglévő ügyiratot, ha kiválasztja azt a listában, majd a *Megnyitás* gombra kattint.

A listában lévő bejegyzésre duplán is kattinthat.

Amikor új ügyet hoz létre, az automatikusan megnyílik.

Egy ügyirat megnyitása után olyan tartalmakat mutat, amelyeket általában egy valós ügyiratban is elvárna:

- egy darab papír a betegadatokkal,
- recepteket tartalmazó nyomtatvány,
- az ügyiratban szereplő összes elemzés áttekintését tartalmazó formanyomtatvány,

Példa:



### Prescription

Remedy



Phosphoricum acidum

Potency

Reactions

Instructions

Notes

Year

2023

— +

Month

3

— +

Day

3

— +

Cancel OK

Ha a hónap vagy a nap nem ismert, egyszerűen írja be a 0 értéket.

Töröljön egy vényt a listában történő kijelölésével, majd a Vény törlése parancsot választva. (Előugró menü opció *Felírás törlése*).

Szerkesszen egy receptet a listában lévő bejegyzésre való dupla kattintással. (Előugró menü opció *Felírás szerkesztése*).

### Elemzések kezelése

Új elemzést a menüpont segítségével adhat hozzá, vagy duplán kattinthat az elemzési index tetején lévő üres sorra. (Előugró menü opció *Analízis hozzáadása*).

Egy új párbeszédpanel jelenik meg, ahol megadhat néhány információt az elemzésről:



## Analysis

Description

Diagnosis

Notes

Year

2023

— +

Month

3

— +

Day

3

— +

Cancel

OK

Ha a hónap vagy a nap nem ismert, egyszerűen írja be a 0 értéket.

Töröljön egy elemzést a listában való kijelölésével, majd az elemzések törlésével. (Előugró menü opció *Elemzés törlése*).

Szerkesszen egy elemzést a listában lévő bejegyzésre való dupla kattintással. (Előugró menü opció *Elemzés szerkesztése*).

Ha egy elemzést egy új elemzés alapjául szeretne másolni, használja az Elemzés duplikálása parancsot. (Előugró menü opció *Elemzés duplikálása*).

Ha egy elemzést egy másik esetben szeretne áthelyezni, használja az Elemzés áthelyezése esetben menüpontot. (Előugró menü opció *Elemzés mozgatása az esethez...*).

Ha rákattint a listában szereplő elemzések egyikére, akkor ez az elemzés lesz az, amelyet a *Elemzés modul* (lásd a *Elemzés* című szakaszt) használ.

## Nyomtatás

Kinyomtathatja az ügyét, vagy annak egyes részeit. (Előugró menü opció *Nyomtatás*).

Egy ügy kinyomtatása csak az ügy megnyitása után lehetséges.

Egy párbeszédpanel segítségével kiválaszthatja, hogy mit szeretne nyomtatni:

**Print options**

What to print?

Case cover ☐

Analyses Current analy...

Analysis details ☐

Rubrics and remedies ☐

Printing options

Color ☒

High resolution ☐

Cancel OK

<i>Tokfedél</i>	Ha bejelöli ezt a lehetőséget, a nyomtatás első oldala tartalmazza a beteg adatait, valamint a receptek áttekintését.
<i>Jelenlegi elemzés</i>	Válassza ezt a lehetőséget, ha csak az aktuálisan kiválasztott elemzést szeretné kinyomtatni, a <i>elemzési modulban</i> használt beállításokkal.
<i>Nincsenek elemzések</i>	Válassza ezt a lehetőséget, ha nem kívánja kinyomtatni az elemzések egyikét sem (csak a tok borítóját).
<i>Elemzési részletek</i>	Ha bejelöli ezt a lehetőséget, az egyes elemzésekhez megadott információk (diagnózis, megjegyzések) kinyomtatásra kerülnek.
<i>Rubrikák és jogorvoslatok</i>	Ha bejelöli ezt az opciót, akkor minden elemzés kinyomtatása tartalmazni fogja az elemzésben használt rubrikák összes jogorvoslatának áttekintését. Felhívjuk figyelmét, hogy a szerzői jogi korlátozások miatt legfeljebb 20 rubrika kerül kinyomtatásra az összes jogorvoslattal együtt. Ha 20-nál több rubrikát nyomtat ki, a legtöbb jogorvoslattal rendelkező rubrikák nem fogják felsorolni a jogorvoslataikat.
<i>Színes</i>	Színes nyomtatás. Ha nincs bejelölve, a nyomtatás fekete-fehér nyomtatókra optimalizálva van.
<i>HTML fájlba írás</i>	Válassza ezt a lehetőséget a HTML-fájlba való íráshoz. Ez egy kényelmes formátum, ha a kimenet egyes részeit más dokumentumba szeretné másolni.

### Több eset áttekintésének nyomtatása


Ha nem nyitott ügyet, akkor több ügyről is kinyomtathatja az áttekintést. (Előugró menü opció *Nyomtatás*). Ez például akkor lehet praktikus, ha egy olyan kolléga számára szeretne listát készíteni, aki figyelemmel kíséri a betegeit. Ezután készíthetne egy listát, amely csak az elmúlt 6 hónapban látott betegek nevét és születési dátumát tartalmazza, a gyógyszerkészítmények receptjeinek listájával együtt.

A nyomtatási párbeszédpanel beállításai nem igényelnek további magyarázatot.

### Jelszóvédelem

Az Ön betegadatait megvédelheti mások nem kívánt hozzáférésétől, amíg Ön távol van a számítógépétől.

Ehhez beállíthat egy jelszót.

Ha jelszót állított be, a *Case modulban* egy új gomb  jelenik meg.

Ha megnyomja ezt a gombot, a tokmodul azonnal zárolásra kerül, és a megnyitásához be kell írni a jelszót.

Lehetőség van az ügyinformációk automatikus zárolására is, miután egy ideig nem használta a programot.

Az automatikus zárolás előtti időt Ön konfigurálhatja a *Preferences* beállítások között.

Ha az időt 0 percre állítja, akkor nem történik automatikus zárolás.

Legyen nagyon óvatos a jelszó beállításakor. Rajtad kívül senki más nem ismeri a jelszavadat. Ha elfelejti a jelszavát, az olyan, mintha elvesztette volna a lakáskulcsát; nincs többé hozzáférés.

## Archiválás és törlés

### Ügyek archiválása

Ha már nem szeretné, hogy egy eset megjelenjen az ügyek listájában, archiválhatja azt.

Egy ügy archiválása után az a *Archivált* csoportban jelenik meg.

Bár archiválva van, az ügyet továbbra is meg tudja nyitni. Ha bármilyen módosítást végez az ügyön, az automatikusan kikerül a *Archived* csoportból, és visszakerül a többi aktív ügy közé.

Több régebbi esetet is archiválhat. (Előugró menü opció *Archiválja a régi eseteket*).

A megnyíló párbeszédpanelen megadhatja a hónapok számát. Egy lista mutatja az összes olyan esetet, amelyet az adott számú hónap alatt nem módosítottak. Ezután archiválhatja a listában kijelölt összes esetet.

### Ügyirat törlése

Ha már nem szeretne megtartani egy ügyiratot, törölheti azt.

Egy ügyet csak az archiválás után lehet törölni.

Lehetőség van arra is, hogy a régebbi archivált ügyek automatikusan törlődjenek. Erre van egy lehetőség a *Preferences* beállítások között. Alapértelmezés szerint az archivált ügyek nem törlődnek automatikusan.

### Automatikus biztonsági mentések

Ha véletlenül törölt egy ügyfájlt, visszaállíthatja azt egy biztonsági mentésből.

A biztonsági mentések automatikusan készülnek.

- Minden nap, már egy hónapja.
- Minden hónapban, az elmúlt egy évben.
- Egy év elteltével a biztonsági másolat véglegesen eltávolításra kerül.
- Ne feledje, hogy a biztonsági mentések helyben, a számítógépén tárolódnak.

## Felhő kiszolgáló

### Bevezetés

Ha egynél több számítógépet használ a rendelőjében, akkor érdemes az ügyinformációkat szinkronizálva tartani közöttük.

Így mindig naprakész információkkal rendelkezhet az ügyekről, bárhol is dolgozik. Még akkor is, ha úton van, telefonjával vagy táblagéppel.

Felhőszerverünk rugalmas és egyszerű mechanizmust kínál az ügyek automatikus szinkronizálásához.

Sok más felhőalapú megoldással ellentétben a *Complete Dynamics* a internetkapcsolattal és anélkül is használható.

Internetkapcsolat nélkül az összes esetet helyben tárolja a készülékén. Az összes elvégzett módosítás helyben tárolódik.

Ha van internetkapcsolat, az ügyei automatikusan szinkronizálhatók a Cloud Server segítségével.

Ha az eseteket különböző eszközökön módosítja, miközben nem csatlakozik az internethez, ez nem jelent semmilyen különbséget. Ha a kapcsolat a felhőkiszolgálóval elérhető, a különböző eszközökön végzett összes módosítás összevonható. Még akkor is, ha ugyanazon az ügyön dolgoztak.

### Mit csinál a Cloud Server?

A Cloud Server célja, hogy az Ön ügyei azonosak legyenek a szolgáltatást használó összes eszközön.

Amit az egyik eszközön hozzáad, az a többi eszközön is hozzáadódik.

Amit az egyik eszközön megváltoztat, az a többi eszközön is megváltozik.

Amit az egyik eszközön töröl, az a többi eszközön is törlődik.

Egy ügy archiválása azt jelenti, hogy a többi eszközön is archiválásra kerül.

## A Cloud Server használatának előnyei

- Az ügyei az automatikus szinkronizálás után naprakészek, függetlenül attól, hogy milyen eszközt használ.
- Működik az összes olyan eszközzel, amely az Ön licencében szerepel.
- Internetkapcsolat nélkül is dolgozhat.
- A szinkronizálás automatikus, amint az internet elérhető.
- Mindig van egy másolat az ügyeidről, arra az esetre, ha a számítógéped meghalna.

## Milyen eszközökhöz érdemes használni a Cloud Server-t?

Ez az Ön saját döntése.

Ha egy számítógépet használ, a Cloud Server segítségével biztosíthatja ügyei másolatát. Ha a számítógépe meghal, az ügyek automatikusan átkerülhetnek az új számítógépére.

Ha két vagy több eszközt használ, a Felhőkiszolgáló az egyik eszközön végrehajtott módosításokat a többi eszközön is alkalmazhatja.

Ön dönti el, hogy minden egyes használt eszköz használja-e a Felhőkiszolgálót vagy sem. Például használhatja a Felhőkiszolgálót az otthoni és az irodai számítógépekhez, de a telefonjához nem.

## Biztonság és adatvédelem

Tisztában vagyunk azzal, hogy a biztonság és az adatvédelem rendkívül fontos.

### Biztonság

Az Ön ügyének adatai nagyon jól védettek.

- A Cloud Serverhez való hozzáférés csak olyan eszközről lehetséges, amely érvényes licenccel rendelkezik az Ön nevére.
- Más eszköznek nincs hozzáférése az Ön ügyeihez.
- Egy extra jelszóra van szükség, amelyet csak Ön ismer.
- A szerverrel való kapcsolat titkosított.

### Adatvédelem

Ön nem köteles a Cloud Server szolgáltatásunkat használni. Nagyon jól megértjük, hogy Ön talán nem szeretné, ha a páciensei adatait valahol egy távoli számítógépen tárolnák.

Teljesen az Ön döntése, hogy használja-e a Cloud Server-t vagy sem.

Teljes mértékben tiszteletben tartjuk az Ön és betegei magánéletét.

Az Ön adatait semmilyen módon nem fogjuk felhasználni vagy feldolgozni. A felhőkiszolgáló csak annyit tesz, hogy átmásolja azt az Ön eszközeire és azokról.

## A Cloud Server beállítása

Ahhoz, hogy elkezdhesse használni az eszközt a Cloud Serverrel, először aktiválnia kell azt.

Az aktiválás a *Beállítások*, a *Eset* szakaszban történik. Itt választhatja a *Use Cloud Server* opciót.

Ha most aktiválja először a Cloud Server-t, akkor a rendszer automatikusan felkéri, hogy hozza létre az ügy adatainak védelmét biztosító PIN-kódot. Ezt a PIN-kódot később bármikor megváltoztathatja.

Ne felejtse el a Cloud PIN-kódját, szükség lesz rá egy másik eszköz aktiválásakor.

## Cloud Server állapot

A *Case* modulban az oldal tetején egy ikon jelzi a szerverkapcsolat állapotát.

- ☁ A Cloud Server elérhető.
- ☁ Folyamatban lévő közlemény.
- ✖ Nincs internetkapcsolat, vagy a szerver átmenetileg nem elérhető.  
ha nem jelenik meg ikon, a Felhőkiszolgáló még nincs konfigurálva.

Ha az ikonra kattint, a szinkronizálás azonnal végrehajtott.

## Korlátozások

A Cloud Server célja, hogy az egyik eszközön végrehajtott módosításokat az összes többi eszközre is alkalmazza. Ez azonban nem mindig lehetséges.

Ez segít megérteni, hogy mik a korlátozások.

Különösen off-line munka esetén előfordulhat, hogy ugyanazon ügyet különböző eszközökön módosítják, mielőtt a Cloud Serverrel való kapcsolat újra létrejönne. Normális esetben ez ritkán jelentene problémát.

Egy ügy információi több független elemből épülnek fel:

- A betegre vonatkozó információk.
- Az ügyre vonatkozó információk.
- Minden elemzés.
- Minden egyes gyógyszerkészítmény vénye.

Az egyik elemet módosíthatja, egy másik eszközön pedig egy másik elemet módosíthat.

Ha azonban például ugyanazt az elemzést két eszközön is módosítja, csak az utolsó módosítás kerül mentésre.

Ha egy elemzést megváltoztat az egyik eszközön, egy másikat pedig egy másik eszközön, az nem jelent problémát.

Vagy ha az egyik eszközön egy gyógyszerkészítményre vonatkozó receptet, egy másik eszközön pedig egy másik gyógyszerkészítményre vonatkozó receptet ad hozzá, az nem jelent problémát.

### **Biztonsági mentések**

A felhő kiszolgálón tárolt esetek az Ön eszközén lévő esetek másolatát képezik. Az eredeti adatok az Ön készülékén vannak.

A számítógépéről készített biztonsági másolatokért mindig Ön a felelős.

## **Esetmegosztás**

### **Az Ön eseteinek megosztása kollégáival**

Sok helyzetben előfordulhat, hogy az egyik esetet és/vagy elemzést át akarja adni egy kollégájának, diáktársának, tanárának, vagy esetleg közzé akarja tenni egy internetes fórumon.

A *Complete Dynamics* lehetőséget kínál arra, hogy egy ügyet teljes egészében vagy csak részben exportáljon egy fájlba. Ezt a fájlt ezután átadhatja kollégájának, és importálhatja a számítógépére. Kollégájának ehhez nem kell *Practitioner Edition* licenc, az ingyenes *Browser Edition* segítségével a fájl is importálható és megtekinthető.

Az esetmegosztás anonim módon is történhet, így biztosítva a páciens és az Ön személyes adatainak védelmét.

Az alábbiakban ismertetjük, hogyan történik az exportálás és importálás. Először az ügymegosztás egy másik fontos jellemzőjét nézzük meg.

### **Ügyek szinkronizálása több számítógép között**

*A kézi szinkronizálás csak akkor releváns, ha nem kívánja használni a Felhő kiszolgálón keresztül történő automatikus szinkronizálást.*

A tokmegosztással két hatékony lehetőséget kap arra, hogy a tokokat egyik számítógépről a másikra vigye.

A legegyszerűbb módja, ha az egyik számítógépen exportálja az ügyadatbázis teljes másolatát, és importálja azt a másik számítógépen. Ez helyettesíti a másik számítógépen tárolt összes esetinformatíót.

Ez az opció arra is használható, hogy rendszeresen biztonsági mentést készítsen az ügyadatbázisról.

A legfejlettebb módszer az, hogy csak az egyik számítógépen módosított eseteket exportálja, és azokat importálja a másik számítógépen. Ebben a helyzetben csak a módosított információkat másolják és egyesítik a második számítógép adatbázisába. Ez a hatékony szinkronizációs mechanizmus még akkor is működik, ha az ügyet mindkét számítógépen módosították!

### **Az esetek szinkronizálása az iPhone és a PC között**

Az esetek szinkronizálása az iPhone és a számítógép között pontosan ugyanazt a mechanizmust használja, mint a több számítógép közötti szinkronizálás. A különbség abban rejlik, hogy az exportált fájlok hogyan kerülnek az iPhone-re és az iPhone-ről.


Két számítógép között például USB-pendrive-ot használhat a fájl átvitelére. Az iPhone esetében a fájlok átvitele a számítógép iTunes alkalmazásával történik.

Az iTunesban a fájlok átmásolhatók a *Complete Dynamics* iPhone-re, illetve onnan átmásolhatók.

Ehhez válassza ki az iPhone-t az iTunesban, és nyissa meg az Alkalmazások részt. Az Alkalmazások listája alatt láthatja a Fájlok megosztását lehetővé tevő alkalmazások listáját. Ebben a listában meg kell jelennie a *Complete Dynamics*-nak. Válassza ki a *Complete Dynamics* alkalmazást, ha rákattint. Az alkalmazás jobb oldalán található egy terület, ahol fájlokat adhat hozzá vagy törölhet. Az iPhone-en létrehozott ügyexportfájl ott található, és átmásolható a számítógépre, hogy ott importálhassa. A számítógépen létrehozott exportfájl itt adható hozzá, és ezután importálható lesz az iPhone-re.

További információkért kérjük, olvassa el az iTunes súgóját.

Az iPhone-en a következő szakaszokban ismertetett opciókat tartalmazó felugró menü a *Case modulban*, a képernyő bal oldalán található.

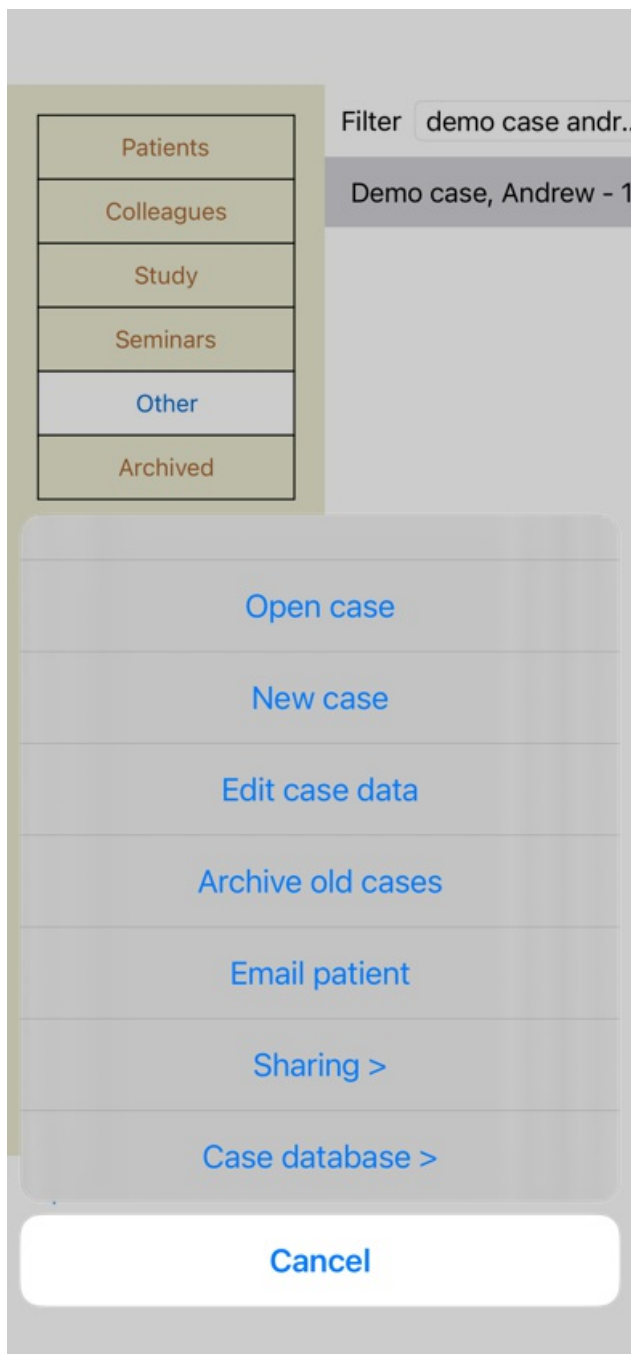

### Egyetlen eset exportálása

Egyetlen eset exportálásához nyissa meg a *Case modult*, és válassza ki az exportálni kívánt esetet. Ezután használja az Aktuális eset exportálása... (Előugró menü opció *Megosztás / Jelenlegi eset exportálása...*). Megnyílik egy párbeszédpanel, amelyben kiválaszthatja, hogy az ügy mely részeit szeretné exportálni:

### Case Export options

Author information ☒

Patient information ☒

Case notes ☒

Prescriptions ☒

Analyses

Jan 1, 2009-A sim...

Jan 2, 2009-A sim...

Jan 3, 2009-A sim...

Jan 4, 2009-An ex...

Feb 1, 2009-Sympt...

Feb 1, 2009-Group...

Mar 1, 2009-Simpl...

Jan 25, 2011-Bönni...

Sep 1, 2015-Family...

Mar 1, 2016-DD ex...

Mar 3, 2016-DD ex...

Password (optional)

All None Cancel OK

*Szerzői információk* Ha nem jelöli ki ezt a lehetőséget, az Ön neve nem szerepel az exportálásban.

*Betegtájékoztató* Ha nem jelöli ki ezt a lehetőséget, a beteg névtelenné válik. Csak a beteg nemét és születési évét használják. Ha ez az opció be van jelölve, a beteg összes személyes adatát tartalmazza az exportálás.

*Eseti jegyzetek* Ha ez az opció be van jelölve, akkor az exportálás tartalmazza az ügy háttérinformációit. (Az eset háttere, jegyzetek és csoportok).

*Receptek* Ha ez az opció be van jelölve, akkor az Ön által felírt receptek szerepelnek az exportálásban.

*Elemzések* Az ügy minden egyes elemzése esetében eldöntheti, hogy azt exportálni kívánja-e vagy sem. Kattintson egy sorra a kijelölés be/ki kapcsolásához. A *All* és a *None* gombokkal az összes vagy egyik elemzés sem választható ki a könnyebb kiválasztás érdekében.

*Jelszó* Ha itt ad meg egy értéket, az exportfájl jelszóval védett lesz. Ahhoz, hogy valaki importálni tudja, ismernie kell a jelszót. Javasoljuk, hogy minden megosztott információhoz használjon jelszót, kivéve azokat az anonim eseteket, amelyeket mindenki számára közzé akar tenni az interneten.

Ha készen áll, nyomja meg a *OK* gombot, és a rendszer megkérdezi a fájl nevét és az Ön által választott helyet. Az alapértelmezett fájlnev már ki van töltve, de tetszőleges nevet választhat.

#### Egyetlen elemzés exportálása

Egyetlen elemzés exportálásához nyissa meg az elemzést tartalmazó ügyet, és válassza ki az exportálni kívánt elemzést.

Ezután használja az Aktuális elemzés exportálása menüpontot... (Előugró menü opció *Megosztás / Jelenlegi analízis exportálása...*).

Megnyílik egy párbeszédpanel, amelyben kiválaszthatja, hogy az eset mely részeit szeretné az elemzéssel együtt exportálni:

### Case Export options

Author information ☒

Patient information ☒

Case notes ☒

Password (optional)

Cancel OK

---

A mezők jelentésével kapcsolatban lásd a fenti információkat.

#### **Több eset exportálása**

Több esetet is exportálhat egyetlen fájlba. (Előugró menü opció *Megosztás / Több eset exportálása...*).



### Case Export options

Patients
Colleagues
Study
Seminars
Other
Archived

Abif, Hiram
Al-Rashidi, M...
Andrews, San...
Baker, Charles
Barrett, Eliza...
Boyle, Susan...
Clappin, Char...
Clappin, Edw...
Garrod, Rishi...
Grinsven, Ed...

Author information ☒

Patient information ☒

Case notes ☒

Prescriptions ☒

To protect the privacy, please

Password

[Cancel](#) [OK](#)

Az eseteket tartalmazó listában válassza ki azokat, amelyeket exportálni szeretne, és kattintson rájuk.

### Eset vagy elemzés importálása

Ha valaki más adott Önnek egy esetet vagy elemzési exportfájlt, akkor az Importálás menüpont segítségével könnyedén importálhatja azt. (Előugró menü opció *Megosztás / Importálás...*).

A rendszer megkérdezi az importálni kívánt fájlt.

A fájl kiválasztása után az importálásra kerül az Ön esetadatbázisába. Ha a fájl jelszóval védett, először a jelszót kell megadnia.

Az importált esetet a *Kollégák* csoportban találja meg, ha a szerző neve szerepelt a fájlban, egyébként a *Egyéb* csoportban. Az eset megnyitása után könnyedén módosíthatja az eset adatait, vagy áthelyezhet egy elemzést valamelyik másik esethez.

### A teljes ügyadatbázis exportálása

Ha a teljes ügyadatbázist exportálja, az csak olyan számítógépen importálható, amely rendelkezik az Ön nevére regisztrált licenccel.

A teljes ügyadatbázis exportálásához használja a Teljes ügyadatbázis exportálása menüpontot... (Előugró menü opció *Megosztás / Teljes eset adatbázis exportálása...*).

Megnyílik egy párbeszédpanel, amely lehetővé teszi, hogy jelszót adjon meg a fájl védelmére (erősen ajánlott).

### Case Export options

To protect the privacy, please use a pas

Password

Cancel OK

---

A *OK* gomb megnyomása után a rendszer megkérdezi a fájl nevét és helyét.  
Vigye a fájlt egy másik számítógépre, és ott végezze el az Importálást.

#### **Módosított esetek exportálása**

A módosított esetek exportálása a legrugalmasabb módja az esetinformációk több számítógép közötti szinkronizálásának.

A módosítások exportálásához használja a Módosított esetek exportálása menüpontot. (Előugró menü opció *Megosztás / Módosított esetek exportálása...*).

Megnyílik egy párbeszédpanel, amelyben megadhatja, hogy mit kell szinkronizálni:

### Case Export options

Last synchronisation

Start at

3/3/23

12:25

Number of selected cases 12

To protect the privacy,

Password

Details Cancel OK

Alapértelmezés szerint az utolsó szinkronizálás dátuma van kitöltve. Ha az összes módosítást egy másik dátum és időpont után szeretné szinkronizálni, csak módosítsa az értéket.

Ha áttekintést szeretne kapni arról, hogy mely esetek szerepelnek az exportálásban, akkor a *Részletek...* gombra kattintva megjelenik az esetek listája és az utolsó módosítási időpontjuk.

#### Módosított esetek importálása

A módosított esetek importálhatók egy másik számítógépre. (Előugró menü opció *Megosztás / Importálás...*).

A fájl kiválasztása után egy párbeszédpanel nyílik meg, amely a szükséges szinkronizálási műveletekre vonatkozó információkat mutatja:

## Options for importing modified cases

New - Jan 5, 2014 - Holiday, Jimmy - 1942

Merge - Jan 6, 2014 - St.Clair, Bonnie - 1970

Replace - Jan 6, 2014 - Eastwood, Herny - 1...

New - Jan 6, 2014 - Baker, Charles - 1950

New - Jan 7, 2014 - Smarting, All - 1962

Merge - Jan 7, 2014 - Williams, Charita - 1970

Ignore - Jan 20, 2014 - Underwood, Sam - 2...

Ignore New Replace Merge Reset

Cancel OK

A fontos rész itt a bal szélső oszlop. Ennek az oszlopnak négy különböző értéke lehet:

*Új* Az eset nincs jelen a helyi adatbázisban. Újonnan jön létre.

*Cserélje ki a címet* Az eset nem változik a helyi adatbázisban, de az exportált fájlban szereplő verzió újabb. Az új információ felülírásra kerül.

*Összevonás* A tok mindkét számítógépen módosításra került. Az exportált fájlokban lévő információk összevonásra kerülnek a helyi adatbázisban lévő információkkal. A meglévő információk nem kerülnek felülírásra, de az új információk bemásolásra kerülnek.

*Ne törődj a* Úgy tűnik, hogy ez az eset nem változott egyik számítógépen sem. Semmi sem történik.

A listában szereplő bármelyik esethez módosíthatja a műveletet. Válasszon ki több esetet a kattintással, majd nyomja meg a *Ignore*, *New*, *Replace*, vagy *Merge* gombok valamelyikét. A *Reset* gomb megnyomásával minden művelet visszaáll az eredeti beállításra.

Ha egy művelet kifejezetten a *New* értékre van beállítva, az esetet új esetként másolja, még akkor is, ha a helyi adatbázisban már van hasonló eset. Ezt akkor teheti meg, ha kétségei vannak, az importálás után két azonos nevű esetet fog látni, amelyeket saját maga ellenőrizhet. Normális esetben erre soha nincs szükség, a *Merge* opció nem dob el semmilyen információt.

### Automatikus biztonsági mentések

A mentések elkészítésének megkönnyítése érdekében a program naponta egyszer automatikusan létrehoz egy teljes ügyadatbázis exportálást. Ezek a biztonsági mentések az elmúlt 7 napra vonatkoznak. Ezzel saját biztonsági mentéseket készíthet, anélkül, hogy tudnia kellene, hol tárolja a program a belső adatbázisokat. Ha többet szeretne tudni arról, hogy hol vannak a biztonsági mentések, és hogyan lehet azokat vészhelyzet esetén visszaállítani, kérjük, forduljon a támogatási osztályhoz.

# Elemzési modul

## Gyors indítás

### A türelmetlenek számára...

Nyomatékosan javasoljuk, hogy olvassa el az elemzésekről szóló súgót, mert egy kis háttérinformációval sokkal hatékonyabbá teheti a munkáját.

Ha később akarod elolvasni, és azonnal belevágni, ez az összefoglaló egy perc alatt el tudja indítani.

### Kezdjük egy tokkal vagy sem?

Sok esetben egy elemzés azért készül, mert az egy beteghez kapcsolódik, és esetleg meg akarja őrizni későbbi hivatkozás céljából. Ebben a helyzetben célszerű először létrehozni egy ügyet, vagy megnyitni egy meglévő ügyet, mert így az elemzés a megfelelő helyen tárolódik.

Ha egy ügyet megnyitottunk, könnyen hozzáadhatunk egy új elemzést.

Az esetek és elemzések rendszerezésével kapcsolatos részletes információkért olvassa el a *esetmodul* című részt.

Ha csak egy gyors elemzést szeretne végezni, egy valódi eset kontextusa nélkül, egyszerűen ne nyisson meg vagy hozzon létre egy esetet, és automatikusan létrejön egy alapértelmezett eset (a neve *Névtelen eset*), és az elemzés ott lesz tárolva. Az elemzés a mai dátummal ellátott esetben található.

### Rubrikák hozzáadása

Az elemzéshez könnyen hozzáadhat egy rubrikát.

Először válassza ki a rubrikát a *Book* modulban. Egy rubrika akkor van kiválasztva, ha élénk sárga színnel van jelölve.

Ezután kattintson és tartsa lenyomva a rubrikát, hogy megnyíljon a felugró menü. (Előugró menü opció *Rubrika hozzáadása az elemzéshez*).

A megfelelő rubrika megtalálásában a *Find* modul segíthet.

## Elemzés készítése

### Az elemzési modul megnyitása

Lépjen az Elemzés modulba a *Elemzés* fülre kattintva.

Feltételezve, hogy már megnyitott egy ügyet és kiválasztott egy elemzést, a képernyő valahogy így fog kinézni:

**Demo case, Andrew**  
**Analysis January 3, 2009, A simple analysis - us**  
 Analysis uses 15 rubrics in 4 symptoms.

- ▼ **523 Mental activity**
  - 16 Mind; Activity; night
  - 1 Mind; Activity; midnight, until
  - 83 Mind; Activity; hyperactive
  - 488 Mind; Cheerfulness
  - 32 Mind; Restlessness, nervousness; se
  - 1 Mind; Theorizing; evening
  - 2 Mind; Theorizing; night
- ▼ **83 Sensitive to noise**
  - 25 Mind; Noises; aversion to
  - 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise
  - 58 Sleep; Waking; noise, from
- ▼ **60 Sleeplessness**
  - 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
  - 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivaci
  - 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse,
- ▼ **102 Generalities**

Standard	Small remedies	Sm
coff •	coff •	cof
nux-v	bor	nux
lach	sel	lac
chin	chin	chi
sulph	kola	sul
acon	nux-v	cor
calc •	sia-c	cal
con	sul-ac	acc
bell •	con	bor
sul-ac	ang	bel
bor	op	ars
ars	ign	ign
sel	bamb-a	sul
ign	tax	sel
phos	lach	nat
op	ars	pho
nat-m	ant-c	op
agar	mez	pul
puls	canth	lyc
ang	anis	ang

repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort

Book Find Case Analysis MM

Az ablak két részre van osztva:

- az elemzéshez használt tünetek és rubrikák,
- az elemzés eredményei.

Részletesen tárgyaljuk őket, kezdve az elsővel.

Vegye figyelembe, hogy az itt használt példák az Ön Case moduljának "Egyéb" csoportjában található demo esetek részét képezik. Ezekkel a példákkal szabadon játszhat. A *Complete Dynamics* minden egyes indításakor az eredeti demo esetek visszakérülnek az "Egyéb" csoportba.

### Tünetek kontra rubrikák

Miután összegyűjtötte a páciens adatait, a hagyományos megközelítés az, hogy a repertóriumban olyan rubrikákat keres, amelyek megfelelnek a páciens helyzetének.

Ennek a megközelítésnek nagy hátránya, hogy a páciens egyes tüneteire egyetlen repertórium rubrikára van szükség, míg más tünetekhez több olyan rubrikát is találhatunk, amelyek együttesen kifejezik a panaszt. Ha egy tünet kifejezésére több rubrikát használnak, az adott tünetnek megfelelő gyógymódok automatikusan erősebben számítanak, így a tünet a többi tünethez képest eltúlzott értéket kap. A páciens a tüneteit sem a repertórium nyelvén fejezi ki. A repertórium rubrikák gyűjteménye ezért nem reprezentálja a beteg panaszait, különösen, ha nem találunk olyan rubrikákat, amelyek 100%-ban szó szerint kifejezik a beteg tüneteit.

A *Complete Dynamics* úgy oldja meg ezeket a problémákat, hogy különbséget tesz a Tünetek és a Rubrikák között.

Először a beteg elemzett tüneteinek adhatók meg. Másodszor, ezekhez a Tünetekhez köthetők a repertoár rubrikák.

Az Elemző modul automatikusan kompenzálni tudja az elemzési eredményeket annak figyelembevételével, hogy egyes Tünetek kevés rubrikával, míg más Tünetek nagy számú rubrikával vannak kifejezve. Tehát szabadon megválaszthatja, hogy hány rubrika szükséges ahhoz, hogy a beteg tüneteit megfelelően kifejezze a repertórium rubrikákba, anélkül, hogy az elemzés eredményei kiegyensúlyozatlanná válnának!

A Tünetek használatának több előnye is van. Mivel a tünetek a beteg nyelvén szólnak meg, könnyen hozzárendelhetünk egy fontossági sorrendet egy Tünethez anélkül, hogy kifejezetten manipulálnunk kellene az egyes rubrikák rangsorát (ezeket Tünet-súlynak és Rubrika-súlynak nevezzük, máshol magyarázzuk el). Több előnye is van, de ezeket majd meglátod magad.

Természetesen egy gyors és egyszerű elemzéshez a Tünetek létrehozása olyan többletköltséget okoz, amit nem biztos, hogy szeretnél. Ebben az esetben egyszerűen ne hozzon létre tüneteket. Ezután az összes rubrika automatikusan egy "általános tünet" alá kerül, amely az Ön számára láthatatlan.

Egy példa. Az alábbiakban két képernyőfotó a *Demo esetből Andrew*, egy a Tünetek használata nélkül és egy a Tünetek használatával:

**Demo case, Andrew**  
**Analysis January 1, 2009, A simple analysis**  
Analysis uses 15 rubrics.

- 16 Mind; Activity; night
- 1 Mind; Activity; midnight, until
- 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
- 83 Mind; Activity; hyperactive
- 488 Mind; Cheerfulness
- 25 Mind; Noises; aversion to
- 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitivity
- 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sound
- 1 Mind; Theorizing; evening
- 2 Mind; Theorizing; night
- 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
- 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after
- 58 Sleep; Waking; noise, from
- 80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcohol
- 140 Generalities; Food and drinks; coffee; des

**Demo case, Andrew**  
**Analysis January 3, 2009, A simple analysis - using symptoms**  
Analysis uses 15 rubrics in 4 symptoms.

- ▼ 523 Mental activity
  - 16 Mind; Activity; night
  - 1 Mind; Activity; midnight, until
  - 83 Mind; Activity; hyperactive
  - 488 Mind; Cheerfulness
  - 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitivity
  - 1 Mind; Theorizing; evening
  - 2 Mind; Theorizing; night
- ▼ 83 Sensitive to noise
  - 25 Mind; Noises; aversion to
  - 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise
  - 58 Sleep; Waking; noise, from
- ▼ 60 Sleeplessness
  - 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
  - 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity
  - 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse

A változat Tünetekkel sokkal egyértelműbb!

### Tünetek létrehozása és rubrikák hozzáadása

Ha egy eset meg van nyitva és egy elemzés ki van jelölve, egy új tünetet lehet hozzáadni egy elemzéshez. (Előugró menü opció *Tünet hozzáadása*).

Egy Tünet (és a hozzá kötött összes Rubrika) törléséhez jelölje ki a listában az egérrel vagy a billentyűzettel, majd nyomja meg a Törlés billentyűt. (Előugró menü opció *Kijelöltek törlése*).

A Tünet részleteit a Tünetre való dupla kattintással szerkesztheti. (Előugró menü opció *Tünet szerkesztése*).

A rubrikát mindig a *Book* vagy a *Find* modulból kell hozzáadni. (Előugró menü opció *Rubrika hozzáadása az elemzéshez*).

A Rubrikát ezután hozzáadjuk a Tünetlistában "aktuális" Tünetként kiválasztott Tünethez.

## Eredmények

### Az elemzés eredménye


Miután a Tüneteket és a Rubrikákat hozzáadtuk az Elemzéshez, itt az ideje, hogy megnézzük az eredményeket. Ezek az eredmények az ablak jobb oldalán jelennek meg.




Az elemzés eredményét alapvetően kétféleképpen lehet megtekinteni:

- ugyanazon elemzésen alapuló több eredmény áttekintése.
- részletes áttekintés egy-egy elemzési eredményről.

### Többszörös elemzési eredmények megtekintése

Több eredmény áttekintése is kiválasztható. (Eszköztár gomb ).

Így fog kinézni:

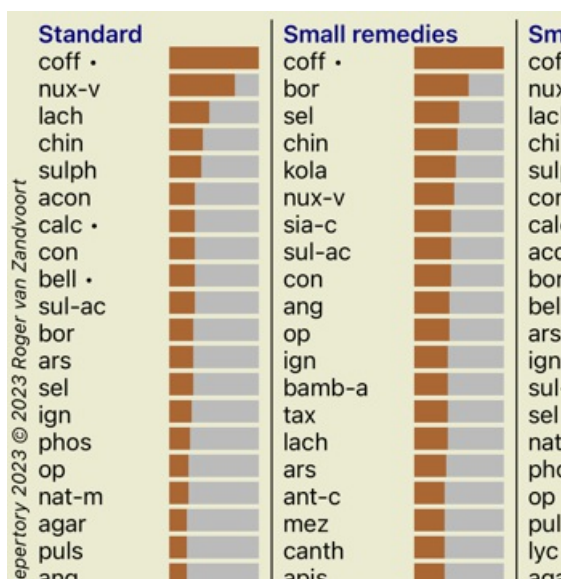

### A szabványos elemzési módszerek

A képen látható standard eredmények a következőket jelentik:

<i>Standard</i>	Ez a standard elemzési eredmény, amely gondosan kiválasztott paramétereken alapul.
<i>Kis jogorvoslatok</i>	Ez az eredmény, a kisebb jogorvoslatok nagyobb jelentőséget kapnak, mint a nagyobb jogorvoslatok (polychrests). Ez kompenzálja a gyógymódok egyenlőtlen előfordulását a repertoárban. A polihisztorok nem maradnak ki az elemzésből, csak a dominanciájuk csökken.
<i>Kis rubrikák</i>	Ebben az eredményben a kevés jogorvoslattal rendelkező rubrikák nagyobb jelentőséget kapnak, mint a sok jogorvoslattal rendelkező rubrikák. Így a karakteresebb rubrikák nagyobb hatással vannak az eredményre, mint a nagyon gyakori rubrikák.
<i>Bönningshausen</i>	Az ilyen típusú elemzés során egy gyógymódot a repertórium kapcsolódó rubrikáiban való előfordulása alapján számolnak. A Bönningshausen-elemzést elsősorban a nagyobb és általánosabb rubrikák esetében használják. A poláris rubrikák korrekciója is fontosabb. További információért lásd: <i>Analysis - Bönningshausen</i> .
<i>Egyszerű számolás</i>	Ez egy nagyon egyszerű számolás, olyan, mint amelyet régen ceruzával és papírral végeztek. Az elemzésben szereplő összes rubrika esetében az összes jogorvoslat fokozatossága egyszerűen összeadódik.

### Az alkalmazott elemzési módszerek kiválasztása

Talán nem mindig érdekli Önt a *Complete Dynamics* által kínált összes standard elemzési módszer.

Ön döntheti el, hogy mely elemzések jelenjenek meg, és milyen sorrendben.

Ezt a *Preferences* beállítások között módosíthatja. További információkért lásd a *Preferences* című részt.


### Elemzési eredmények részletei

Ha megnézi a fenti képen látható eredményt, észreveheti, hogy egyáltalán nem nyomtat számokat. Minden egyes gyógymód mögött egy sáv látható, amely a gyógymód relatív fontosságát mutatja. A jogorvoslatok fontossági sorrendben vannak rendezve. Minél rövidebb a színes sáv, annál kevésbé fontos a gyógymód az adott eredményben.

Ha inkább számokat szeretne látni az eredményben, akkor nyomja meg az eszköztár gombját. (Eszköztár gomb **1**).

Az eredmény így fog kinézni:



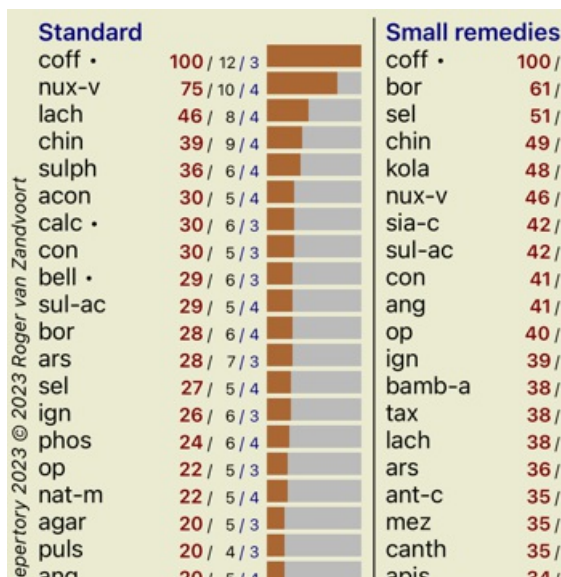

Bizonyos helyzetekben előfordulhat, hogy nem fontossági sorrendben, hanem a tünetek és rubrikák száma szerint szeretné rendezni az eredményt, amelyekben a gyógymód előfordul.

Ezután megnyomhatja az eszköztár **!** gombját, ami azt jelenti, hogy "Sort analysis on number of symptoms/rubrics". (Eszköztár gomb **!** ).


### Már felírt gyógymódok

Gyakran kényelmes lehet gyorsan felismerni, hogy mely jogorvoslatokat írták már fel a betegnek. Minden korábban felírt gyógymódot a név mögött egy ponttal jelölünk.

### A rubrikák és a jogorvoslatok közötti kapcsolat megtalálása

Gyorsan láthatja a rubrikák és a jogorvoslatok közötti kapcsolatot, ha az eredményben vagy a rubrikára, vagy a jogorvoslatra kattint. A megfelelő jogorvoslatok vagy rubrikák ekkor kiemelésre kerülnek.

Példa: A *Mind; érzékeny, túlérzékeny; zaj, a; fájdalmas érzékenység* rubrikára kattintva a következő jelenik meg az eredmény területen:

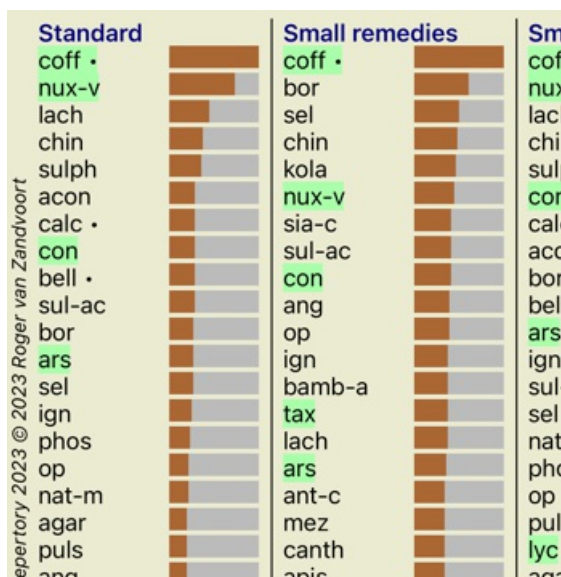

Egy pillantással megnézheted, hogy mely jogorvoslatok vannak ebben a rubrikában!

Példa: A *sulph* gyógymódra kattintva a következő Tünet és Rubrika áttekintés jelenik meg:



**Demo case, Andrew**  
**Analysis January 3, 2009, A simple analysis - u**  
 Analysis uses 15 rubrics in 4 symptoms.

- ▼ 523 **Mental activity**
  - 16 Mind; Activity; night
  - 1 Mind; Activity; midnight, until
  - 83 Mind; Activity; hyperactive
  - 488 Mind; Cheerfulness
  - 32 Mind; Restlessness, nervousness; se
  - 1 Mind; Theorizing; evening
  - 2 Mind; Theorizing; night
- ▼ 83 **Sensitive to noise**
  - 25 Mind; Noises; aversion to
  - 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise
  - 58 Sleep; Waking; noise, from
- ▼ 60 **Sleeplessness**
  - 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
  - 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivaci
  - 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse,
- ▼ 192 **Generalities**

És egy pillantást vehetsz arra, hogy mely rubrikákban fordul elő *sulph*. Ezenfelül a kiválasztott gyógymód a többi elemzési eredményben is kiemelésre kerül, így azonnal láthatja a különböző elemzésekben elfoglalt relatív rangsorát.

Eddig a többszörös elemzések áttekintéséhez. Most nézzük meg egy elemzés eredményének részletes áttekintését...

### Egyetlen elemzési eredmény részletes áttekintésének megtekintése

Az egyes elemzések részletesebb áttekintése tetszés szerint a táblázatos vagy a rácsos nézetben is megjeleníthető. (Eszköztár gomb , eszköztár gomb .

A táblázat nézet így néz ki:

**Demo case, Andrew**  
**Analysis January 3, 2009, A simple analysis - u**  
 Analysis uses 15 rubrics in 4 symptoms.


- ▼ 523 **Mental activity**
  - 16 Mind; Activity; night
  - 1 Mind; Activity; midnight, until
  - 83 Mind; Activity; hyperactive
  - 488 Mind; Cheerfulness
  - 32 Mind; Restlessness, nervousness; se
  - 1 Mind; Theorizing; evening
  - 2 Mind; Theorizing; night
- ▼ 83 **Sensitive to noise**
  - 25 Mind; Noises; aversion to
  - 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise
  - 58 Sleep; Waking; noise, from
- ▼ 60 **Sleeplessness**
  - 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
  - 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivaci
  - 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse,

Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Z.

	coff	nux-v	lach	chin	sulph	acon	calc	con	bell	sul-ac	bor	ars	sel	ign	phos	op
Mi Activ																
Mi Activ																
Mi Activ																
Mi Chee																
Mi Restl																
Mi Theor																
Mi Theo																
Mi Noise																
Mi Sens																
SI Wakin																
Mi Activ																

Standard

A Rács nézet így néz ki:

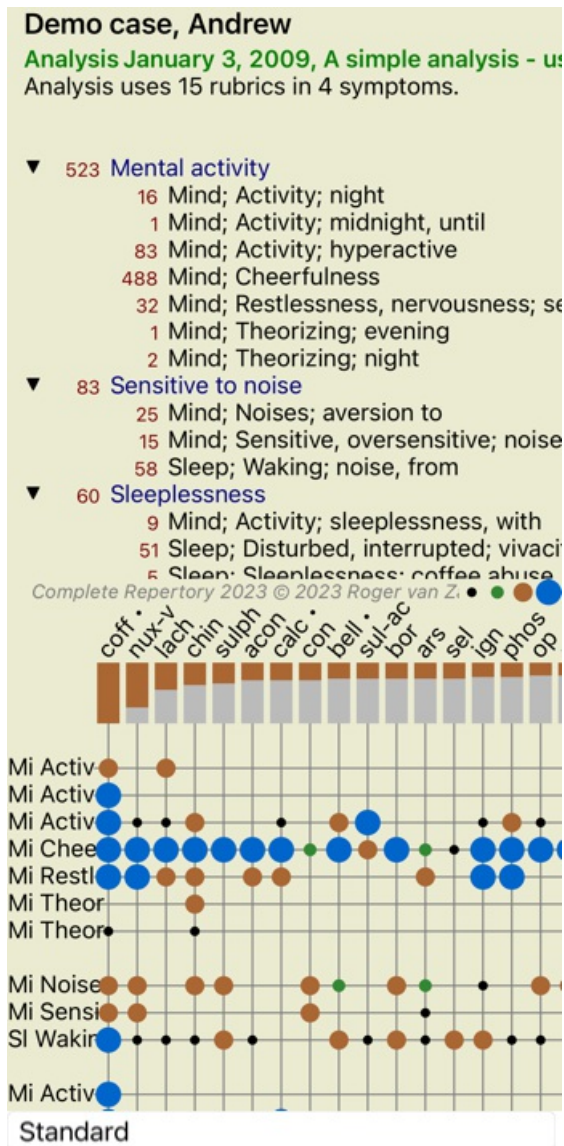

Így egyetlen képen láthatja a rubrikák és a jogorvoslatok közötti kapcsolatot. Természetesen ez csak egyetlen elemzés esetében lehetséges.

Az iPhoneen a rubrikák és a jogorvoslatok közötti kapcsolat sokkal világosabb, ha az iPhoneet tájolásra állítja.

A blokkok vagy pontok azt jelzik, hogy a jogorvoslat egy rubrikában fordul elő:

- • 1. osztály
- • 2. osztály
- • 3. osztály
- • 4. osztály

Ha további részletekre van szüksége, kattintson duplán a golyóra a teljes gyógymóddal kapcsolatos információkhoz:

## Remedy information

**Rubric:** MIND, CHEERFULNESS.

**Remedy abbreviation:** coff. grade 4.

**Standard name:** Coffea cruda.

**English name:** Coffee cruda.

**Taxonomy:** kingdom *Plantae*, sub kingdom *Viridiplantae*, infra kingdom *Streptophyta*, super division *Embryophyta*, division *Tracheophyta*, sub division *Spermatophytana*, class *Magnoliopsida*, super order *Asteranae*, order *Gentianales*, family *Rubiaceae*, genus *Coffea*, species *Coffea arabica*.

**APG II taxonomy:** angiosperms, eudicots, core eudicots, asterids, euasterids I, Gentianales, Rubiaceae.


**Occurrences in related rubrics:** 5. **average grade:** 2.2.

### Sources.

**Hering J. C. M. D.** *Systematisches alphabetisches Repertorium der antipathischen und nicht-antipathischen Arzneien mit handschriftlichen annotations*, 1833.  
**Cullen J. D.** *Repertory of psychic medicines with Materia Medica*, 1897.  
**Hering J.** *Analytical Repertory of Symptoms of Mind*, 1881.  
**Hering J.** *Guiding Symptoms of our Materia Medica*, 1879.  
**Hering J.** *Handbuch der Haupt-Anzeigen für die richtige Wahl der homöopathischen Heilmittel*, Hermann Reinman, 1851.  
**Hering J.** *Systematisch-alphabetisches Repertorium der homöopathischen Arzneimittellehre*, Hermann Reinman (Leipzig), 1848.  
**Klein J. B.** *Repertory of Hering's Guiding Symptoms*, 1896.  
**Louis J. M.** *Keywords and Red line symptoms of Materia Medica*, 1915.  
**Trübner J. F. & Müller J.** *Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III*, T.O. Weigel (Leipzig), 1847.  
**Wentworth J.** *Lectures*, 1985.

[Close](#)

Emellett a rubrikákat vagy jogorvoslatokat is kiemelheti, ha rájuk kattint:

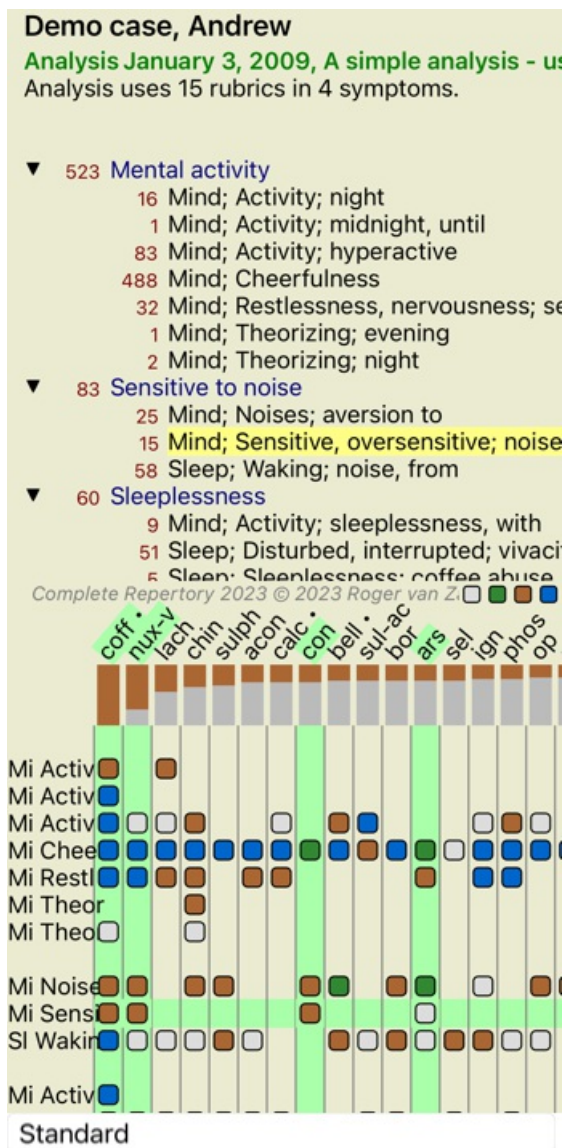

És természetesen az eszköztár **1** és **!** gombjai is használhatók a számok megjelenítésére vagy a rendezési sorrend megváltoztatására.

## Az elemzési eredmények szűrése

### Haladó témák

#### Az elemzés finomhangolása

Most, hogy az elemzés létrehozásának és az eredmények értelmezésének alapjaival már megismerkedett, itt az ideje néhány haladó témakörnek, amelyek lehetővé teszik az elemzés finomhangolását a páciens információinak értelmezésével összhangban.

A következő témákkal foglalkozunk:

- Súlyok használata.
- A tünetek kiegyensúlyozása.
- Poláris rubrikák és kontraindikációk.
- Rubrika csoportok.
- Rubrika áttekintése.

Számos művelet végezhető egyszerre több kijelölt soron.

#### Súlyok használata

Minden Tünethez és minden Rubrikához rendelhető egy adott Súly. Ahogyan egy beteg tüneteire is bizonyos fontosságot rendelünk, vagy ahogyan a repertóriumban egy gyógymód különböző fokozatokkal fordulhat elő, úgy a tünetek és a rubrikák mindegyikéhez is rendelhetünk bizonyos fontosságot.

A magasabb érték hozzárendelésével a Tünet vagy a Rubrika nagyobb jelentőséggel bír az elemzés eredményében. Ha pedig 0 súlyt rendelünk hozzá, a Tünet vagy a Rubrika teljesen kikerül az elemzésből.

A súly beállításához először válassza ki a Tünetet vagy a Rubrikát az egérrel történő kattintással.

A súly beállításának több módja is van:

- 0 (Előugró menü opció *Súly / Elutasít*).



- 1 (Előugró menü opció *Súly / Normál súlyozás*).
- 2 (Előugró menü opció *Súly / Súlyozás x2*).
- 3 (Előugró menü opció *Súly / Súlyozás x3*).
- 4 (Előugró menü opció *Súly / Súlyozás x4*).

A következő példa egy olyan elemzést mutat be, amelyben a súlyok be vannak állítva (csak a szemléltetés kedvéért)

**Demo case, Andrew**  
**Analysis January 4, 2009, An example of symptom analysis**  
 Analysis uses 10 rubrics in 3 symptoms.

- ▼ **523 Mental activity**
  - 16 Mind; Activity; night
  - 1 Mind; Activity; midnight, until
  - 83 Mind; Activity; hyperactive
  - 488 Mind; Cheerfulness
  - 2 32 Mind; Restlessness, nervousness
  - X 1 Mind; Theorizing; evening
  - X 2 Mind; Theorizing; night
- ▼ **3 83 Sensitive to noise**
  - 25 Mind; Noises; aversion to
  - 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise
  - 3 58 Sleep; Waking; noise, from
- ▼ **X 60 Sleeplessness**
  - 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
  - 51 Sleep; Disturbed, interrupted; with
  - 2 5 Sleep; Sleeplessness; coffee after
- ▼ **102 Generalities**

Standard	Small remedies	Bör
coff .	coff .	cof
nux-v	bor	nux
sulph	asar	bor
ign	lac-rup	sulph
bell .	op	bell
bor	aur-m-n	ign
sel	sel	asa
ars	ign	sel
lach	sia-c	aur
chin	aur-s	chir
asar	ang	lach
aur-m-n	chin	ars
con	ven-m	con
op	bamb-a	aur
phos	onc-t	hyo
aur-s	am-c	mei
hyos	nat-p	cal
acon	ars	sia-
agar	sul-ac	lac-
lac-rup	agar	on

Book Find Case Analysis MM

A bal oldalon láthatja az eszköztár gombjait. Az eszköztár gombjai mindig a kiválasztott Tünet vagy Rubrika aktuális súlyértékét mutatják.

A Tünet vagy Rubrika előtti X 0 súlyt jelez, tehát az elemzésből kizárt.

### A tünetek kiegyensúlyozása

A Tünetek kiegyensúlyozása egy fejlett elemzési mechanizmus, amely kompenzálja a sok/kevesebb Rubrika használatát egy Tünetben. Ha a kiegyensúlyozás be van kapcsolva (ami általában így van), akkor annyi Rubrikát helyezhet egy Tünet alá, amennyit csak akar, anélkül, hogy az elemzés megzavarná.

A hagyományos elemzésekben gondosan ki kellett választani a rubrikákat az elemzésben, mert ha túl sok rubrikát használtunk egy bizonyos tünet kifejezésére, akkor az adott tünetnek megfelelő gyógymódok kezdtek dominálni az elemzésben. Hasonlóképpen, ha csak egyetlen rubrikát használna, az abban a rubrikában szereplő jogorvoslatok nem járulnának hozzá kellőképpen az átfogó elemzéshez, összehasonlítva a többi tünethez használt rubrikákkal.

Ha a Tünetek kiegyensúlyozása be van kapcsolva, minden Tünet a hozzá rendelt Súly (lásd *Súlyok használata* fentebb) súlyával számít, függetlenül attól, hogy egyetlen Rubrikát helyezel el alatta, vagy mondjuk 10 Rubrikát.


A kiegyensúlyozási tünet az eszköztár gombjával kapcsolható be/ki, amely az ablak jobb oldalán található. (Eszköztár gomb ).

Nézzünk egy példát. A következő elemzésben számos rubrikát használunk a fejfájás kifejezésére. Ha nem használunk kiegyensúlyozót, akkor a *Glonoinum* dominál az eredményekben, míg kiegyensúlyozóval *Natrum Muriaticum* válik hangsúlyosabbá.

**Demo case, Andrew**  
**Analysis February 1, 2009, Symptoms with man**  
 Analysis uses 13 rubrics in 4 symptoms.

- ▼ **954 Head pains**
  - 14 Head; Pain, headache; morning; agg
  - 160 Head; Pain, headache; extending to;
  - 188 Head; Pain, headache; extending to;
  - 110 Head; Pain, headache; extending to;
  - 119 Head; Pain, headache; extending to;
  - 944 Head; Pain, headache; forehead
  - 57 Head; Pain, headache; forehead; air;
  - 48 Head; Pain, headache; forehead; eye
  - 14 Head; Pain, headache; bursting; mer
- ▼ **84 Sadness**
  - 84 Mind; Sadness, depression; menses
- ▼ **163 Menses**
  - 127 Female; Menses; pale, watery
  - 105 Female; Menses; thin, liquid
- ▼ **173 Aversions and desires**
  - 173 Generalities; Food and drinks; salt o

Elemzési eredmény:

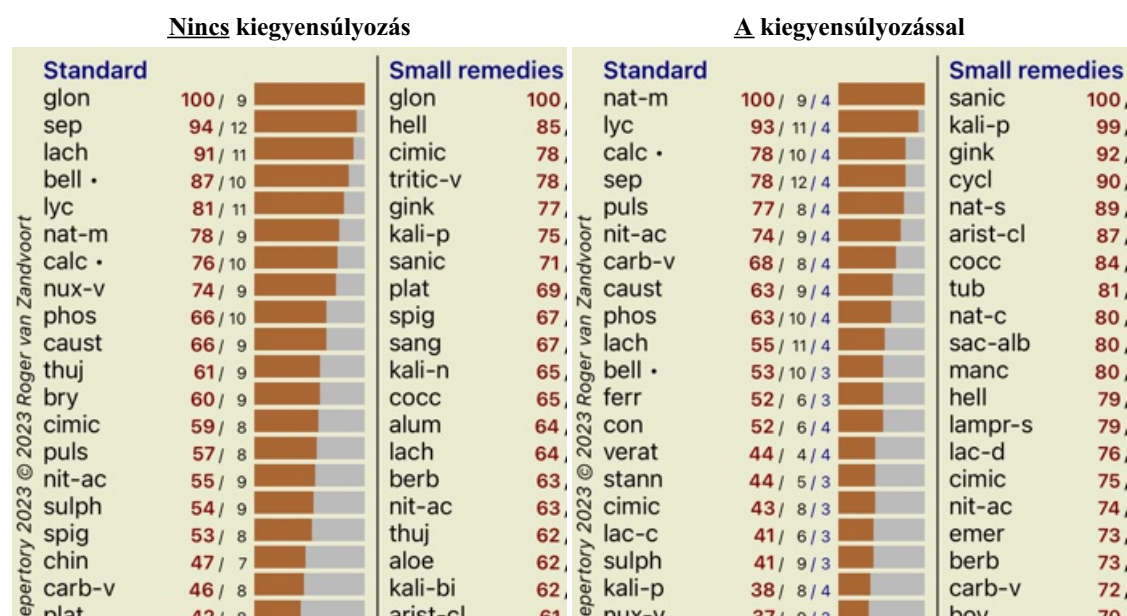


Megjegyzés: A Tünetek kiegyensúlyozása nincs hatással az alapelemzésre *Simple Counting*.

### Sarki rubrikák és kontraindikációk

A poláris rubrikák két olyan rubrika, amelyek ellentétet jelentéssel bírnak.

Példaként nézzünk meg egy egyszerű esetet, amelyben kezdetben a *coff* orvosságot írták fel:

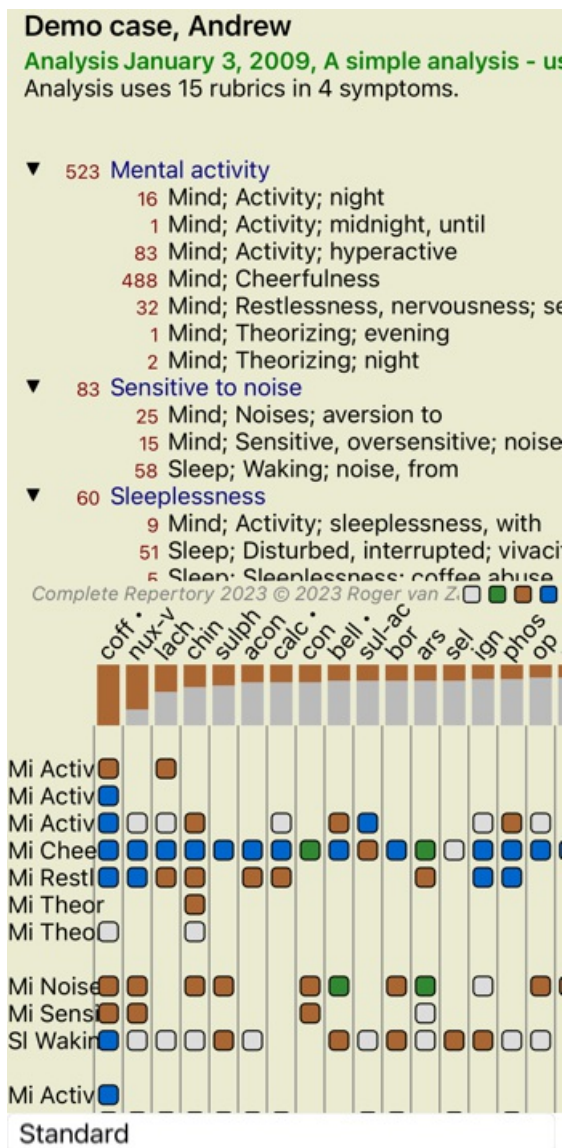

A *Generalities* alatt két rubrikát látunk, amelyek mindegyike poláris rubrikával rendelkezik:


- *amel* - agg.
- *vágyak* - *averzió*.

Ezeket a poláris rubrikákat az elemzésben az eszköztár ↔ gombjának megnyomásával lehet használni, amely az ablak jobb oldalán található. (Eszköztár gomb ↔).

Most mind a *amel*, mind a *desires* rubrika alatt a poláris rubrikák jelennek meg.

Az elemzés eredménye is megváltozik, mivel a jogorvoslatok értékeit most a poláris rubrikák értékeivel korrigáljuk.



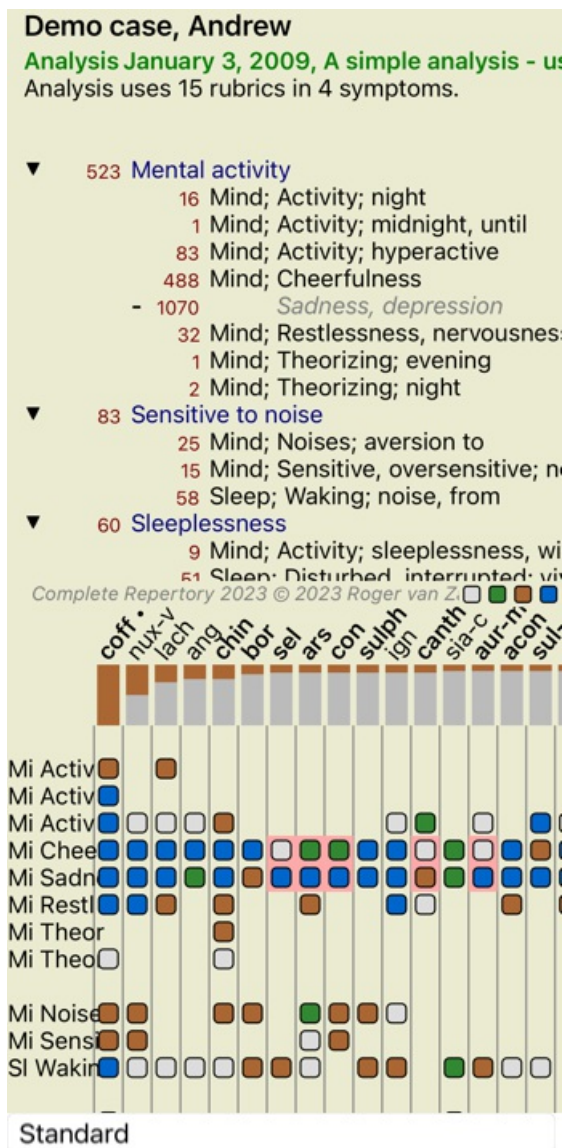

Remedy *coff* most piros színű, mert ebben az elemzésben ez contra jelzett.

Az ellenjavallat olyan helyzet, amikor egy javítás az egyik rubrikában alacsony osztályzatban (1, 2, vagy egyáltalán nem fordul elő), de a poláris rubrikában magas osztályzatban (3 vagy 4) fordul elő.

Egy összetettebb példát mutatunk be a következő Boenninghausen-stílusú elemzésben:

## Demo case, Andrew

Analysis January 25, 2011, Bönninghausen style

Analysis uses 10 rubrics.

- 762 Generalities; Exercise, exertion; agg.
- 74 Generalities; Hanging down limbs; amel.
- 930 Generalities; Motion, motions; during
- 650 Generalities; Pressure; agg.
- 187 Generalities; Raising; agg.; limbs
- 590 Generalities; Sit, sitting; agg.
- 179 Generalities; Stand, standing; amel.
- 759 Generalities; Touch; agg.
- 656 Generalities; Warmth; agg.
- 102 Generalities; Wrapping up; agg.

Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Z.

	bell	bry	sulph	puls	phos	calc	led	rhust	lach	ars	nat-m	nux-v	merc	con	chin	ferr
Ge Exer	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ge Hang	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ge Moti	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ge Press	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ge Raisi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ge Sit,	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ge Stan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ge Touch	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ge Warm	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ge Wrap	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Standard

## Demo case, Andrew

Analysis January 25, 2011, Bönninghausen style

Analysis uses 10 rubrics.

- 762 Generalities; Exercise, exertion; agg.
- 158 amel.
- 74 Generalities; Hanging down limbs; amel.
- 81 agg.
- 930 Generalities; Motion, motions; during
- 339 amel.
- 650 Generalities; Pressure; agg.
- 503 amel.
- 187 Generalities; Raising; agg.; limbs
- 77 amel.; limbs
- 590 Generalities; Sit, sitting; agg.
- 404 amel.
- 179 Generalities; Stand, standing; amel.
- 454 agg.
- 759 Generalities; Touch; agg.
- 22 amel.

Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Z.

	led	berb	bor	ran-b	iris	camp	cupr	nit-ac	ferr	tell	acon	verat	iod	crot-i	spig	asar
Ge Exer																
Ge Exerc																
Ge Hang																
Ge Hangi																
Ge Moti																
Ge Moti																
Ge Press																
Ge Press																
Ge Raisi																
Ge Raisi																
Ge Sit,																
Ge Sit,																
Ge Stan																
Ge Stan																

Standard

### Rubrika csoportok

A rubrikák csoportosítására akkor kerül sor, ha két vagy több rubrikát úgy akarsz figyelembe venni, mintha azok együtt egyetlen rubrikát alkotnának.

A rubrikák csoportosításának két módja van:

- Átkelés. Csak az MINDEN rubrikában előforduló jogorvoslatokat használjuk.
- Kombinálás. Bármelyik rubrikából származó gyógymódot használjuk.

### Példák a csoportosításra

A rubrikák keresztezése akkor lehet hasznos, ha a repertóriumban nincs olyan rubrika, amely pontosan leírja a beteg tünetét, hanem csak általánosabb rubrikák vannak.

A beteg például elmondja, hogy láz idején reggelente szorong az ágyban. A repertóriumnak nincs rovata *Elme; szorongás; reggel; ágyban, bent; láz, közben*. De ehelyett van két általánosabb rubrika *Elme; szorongás; reggel; ágyban, a* és a *Elme; szorongás; lázas meleg; a* alatt. A két rubrika keresztezésével egy új, csoportosított rubrika jön létre, amely csak azokat a jogorvoslatokat tartalmazza, amelyek mindkét rubrikában előfordulnak.

A rubrikák kombinálása hasznos lehet, ha a betegnek van olyan tünete, amely nem található meg pontosan, de specifikusabb tünetek alatt megtalálható.

Például a pizza iránti vágy. Miért van az, hogy a beteg szereti a pizzát? Talán a tészta (lisztes étel), a paradicsom, a szalámi, a szardella, a sajt vagy az olajbogyó. Hasznos lehet több ilyen specifikus rubrikát egy új rubrikába kombinálni, anélkül, hogy az elemzési képleteket megzavarnánk azzal, hogy sok olyan specifikus rubrikát adunk hozzá, amelyek a beteg fő panaszaihoz képest nem igazán számítanak.

### Rubrikacsoportok létrehozása


Egy példa, egy olyan eset, akinek járás közben szűrő fejfájása van, és többféle állattól fél:

## Demo case, Andrew

### Analysis February 1, 2009, Grouping example

Analysis uses 5 rubrics.

57 Mind; Fear; dogs, of  
12 Mind; Fear; rats  
5 Mind; Fear; wolves, of  
496 Head; Pain, headache; stitching  
786 Generalities; Walk, walking; during

Keresztbe akarjuk tenni a két rubrikát, amelyek együttesen írják le a fejfájást. Válassza ki a *Head; pain; stitching* rubrikát, kattintson rá, majd nyomja meg az eszköztár gombját . (Előugró menü opció *Csoportba foglalás / Csoport más rubrikákkal...*). Megjelenik egy párbeszédpanel, amelyben kiválaszthatja a kiválasztott rubrikával összekapcsolható rubrikákat. A tetején válassza a *Cross* lehetőséget. Válassza ki a *Generalities; walk, walking; during* rubrikát, és nyomja meg az OK gombot.

### Add rubrics to a rubric group


Grouping method

Label

Select one or more rubrics to add

Rubrics

- Mind; Fear; dogs, of
- Mind; Fear; rats
- Mind; Fear; wolves, of
- Head; Pain, headache; stitching
- Generalities; Walk, walking; during

A második csoport esetében egy másik módszert fogunk alkalmazni. Válassza ki a *Mind három rubrikáját; félelem* és nyomja meg még egyszer a  gombot.

### Demo case, Andrew

Analysis February 1, 2009, Grouping example

Analysis uses 4 rubrics.

- 57 Mind; Fear; dogs, of
- 12 Mind; Fear; rats
- 5 Mind; Fear; wolves, of
- ▼ 408 Crossed rubrics
  - 496 Head; Pain, headache; stitching
  - 786 Generalities; Walk, walking; during

Most válassza a *Combine* lehetőséget, és nyomja meg az OK gombot.

#### Add rubrics to a rubric group

Grouping method

Label

Select one or more rubrics to ac

Rubrics

Mind; Fear; dogs, of

Mind; Fear; rats

Mind; Fear; wolves, of




Az így kapott rubrikák listája a következő lett:

## Demo case, Andrew

### Analysis February 1, 2009, Grouping example

Analysis uses 2 rubrics.

- ▼ 66 Combined rubrics
  - 57 Mind; Fear; dogs, of
  - 12 Mind; Fear; rats
  - 5 Mind; Fear; wolves, of
- ▼ 408 Crossed rubrics
  - 496 Head; Pain, headache; stitching
  - 786 Generalities; Walk, walking; during

Egy csoport megváltoztatásához egyszerűen kattintson a csoport fő rubrikájára, és nyomja meg a  gombot. A párbeszédpanelen a rubrikák be- és kikapcsolásához kattintson rájuk. Egy rubrikát úgy is eltávolíthat egy csoportból, hogy rákattint, és megnyomja a  gombot. (Előugró menü opció *Csoportba foglalás / Csoportosítás eltávolítása*). Egy csoport teljes eltávolításához kattintson a csoport fő rubrikájára, és nyomja meg a  gombot. (Előugró menü opció *Csoportba foglalás / Csoportosítás eltávolítása*).

Van két menüpont, amely lehetővé teszi, hogy gyorsan hozzon létre egy csoportot, anélkül, hogy a párbeszédpanelen rubrikákat kellene kiválasztania, ahogy a fenti ábrán látható.

Először kiválaszthat két vagy több rubrikát, majd kombinálhatja őket. (Előugró menü opció *Csoportba foglalás / Kombinálja a kiválasztott rubrikákat*).

Először kiválaszthat két vagy több rubrikát, majd keresztezheti őket. (Előugró menü opció *Csoportba foglalás / Keresztezi a kiválasztott rubrikákat*).

## Hogyan használják a rubrikák csoportjait az elemzésben

Ha több rubrikát keresztez, a csoport csak azokat a jogorvoslatokat tartalmazza, amelyek a összes rubrikában előfordulnak. A jogorvoslati osztályzat a legalacsonyabb osztályzata lesz a jogorvoslatnak az összes rubrikában.

Több rubrika kombinálásakor a csoport tartalmazza azokat a korrekciókat, amelyek a bármelyik oldalon a csoportban lévő rubrikák közül előfordulnak. Az orvoslásra adott osztályzat a legmagasabb osztályzat lesz, amelyet a csoport bármelyik rubrikájában találtak az orvoslásra.

## Rubrika áttekintés

Néha kényelmes, ha áttekintést kapunk az elemzésben szereplő összes rubrikáról és azok orvoslásáról.

Csoportosított rubrikák esetén azt is érdemes megnézni, hogy a kapott csoportban milyen jogorvoslatok fordulnak elő.

Az összes rubrika áttekintéséhez válassza a Rubrika áttekintés megjelenítése lehetőséget. (Előugró menü opció *Több / Rubrikák áttekintésének mutatása*).

Megnyílik a *Find* modul, amely a következőket mutatja:



## COMBINED RUBRICS: MIND; FEAR; DOGS, OF / MIND; FEAR; RATS / MIND; FEAR; WOLVES, OF:

absin acon agar **Alum** amph  
androc arn astac **BAC BELL** BOS-S BUFO CALC  
calc-ar carc **CAUST** cer chel **CHIN** choc **CIMIC** Con  
cupr-acet dor dpt dysp-n **Hydrog** HYOS insul **LAC-C**  
lac-d lac-f lac-h lach lycpr lyss mag-c **Manc** mand  
med **NAT-M** nat-p nit-ac op ory-c phos **Plac** plat  
**PLUT-N** polyst pras-c **PULS** **Sanic** **Scirr** **SCORP** sep  
sil sol-t **STRAM** sulph syc-co tax **TUB** tub-k verat **Xan**

## MIND; FEAR; dogs, of:

agar **Alum** amph androc astac  
**BAC BELL** BUFO CALC carc **CAUST** cer chel **CHIN**  
choc **Con** cupr-acet dor dpt dysp-n **Hydrog** HYOS  
insul **LAC-C** lac-d lac-f lac-h lach lycpr lyss mag-c  
**Manc** mand med **NAT-M** nat-p nit-ac ory-c phos plat  
**PLUT-N** polyst pras-c **PULS** **Sanic** **Scirr** **SCORP** sil  
sol-t **STRAM** sulph syc-co tax **TUB** tub-k verat **Xan**

## MIND; FEAR; rats:

absin acon arn bell BOS-S CALC  
calc-ar **CIMIC** op phos **Plac** sep

## MIND; FEAR; wolves, of:

amph bell cer chel dor

## CROSSED RUBRICS: HEAD; PAIN, HEADACHE; STITCHING / GENERALITIES; WALK, WALKING; DURING:

acan-p **ACON** act-sp adam **AESC** **AETH**  
**AGAR** **AGN** aids alch-v **ALL-C** allox **ALOE** **ALUM**  
**ALUM-P** **ALUM-SIL** **ALUMN** **AM-C** **AM-M** **AMBR**  
ammc **ANAC** anag **ANATH** **ANG** **ANT-C** **ANT-T** **APIS**  
apoc aq-des **ARAN** **ARG** **ARG-N** **ARN** **ARS** **ARS-I**  
ars-met ars-s-f **Ars-s-r** arum-t **ASAF** **Asar** asc-t astac  
aster **ATRO** **AUR** aur-ar aur-i **AUR-M-N** aur-s bacch-a  
**Bad** **BAMB-A** bapt **Bar-acet** **BAR-C** bar-i bar-m bar-s  
**BELL** bell-p **BERB** biti-g blatta **BOR** bos-s both-a **BOV**  
**BROM** **Bros-g** bruc **BRY** **BUFO** bux cadm-s cahin  
**Calad** **CALC** **Calc-acet** calc-ar calc-caust calc-f  
calc-i **CALC-P** **CALC-S** calc-sil calen **CAMPH** **CANN-I**  
cann-s **CANTH** **CAPS** caras carb-ac **CARB-AN**  
**CARB-V** carbn-o **CARBN-S** **CARC** card-b carl **Cassi-s**  
cast caul **CAUST** cedr cere-b **CHAM** **CHEL** **CHIN**  
chin-ar **Chin-s** choc **CIC** **CIMIC** **CINA** cinnb cist **CLEM**

## Osztályozás

### Bevezetés a tünetek osztályozásába

Samuel Hahnemann' *Organon* és *Krónikus betegségek* című művei azt mutatják, hogy Hahnemann nem a beteg jelenlegi vagy korábbi helyzetében fellelhető összes tünet összessége alapján választotta ki gyógymódjait. Gondosan osztályozta a beteg tüneteit több kategóriába, és a kezelését erre az osztályozásra alapozta.

Hahnemann osztályozása elérhető, valamint a felhasználó által meghatározott A, B, C, D és E csoportok saját használatra.

A képernyő bal oldalán található eszköztáron elérhető osztályozási lehetőségek:

Szimbólum	Név	Jelentése
○	Psora	Az alapvető zavarok. Organon 6. kiadás 80. § (pszoriális miazma).
⚡	Incidens	Életrajzi esemény, olyan dolgok, amelyek a beteggel történtek és hatással voltak rá. Akut betegség. Organon 72. § (káros hatások).
⋯	Járványos	Külső forráson keresztül terjedő betegségek; influenza, légionella, SARS, kanyaró, mumpsz és mások. (köztes betegségek). Organon 73. § (járványos betegségek).
⤿	Akut miasmatikus	A betegség belülről jön, gyakran egy kívülről érkező esemény, inger váltja ki. A panaszok súlyosak. Organon 73. § (a látens psora átmeneti robbanása).
⤿	Öröklött tendencia	Azok a betegségek, amelyek az ősökben előfordultak, és amelyek genetikailag öröklődnek a betegre.
⤿	Iatrogén	A gyógyszerhasználat és az oltások, amelyeket valaki kapott. Organon § 74.
⤿	Szikózis	Gonorrhea fertőzés. Organon 79. § (szikotikus miazma).
⤿	Szifilisz	Szifilisz fertőzés. Organon § 79 (szifilisz miazma).

<b>A</b>	A felhasználó Saját használatra ingyenes.
<b>B</b>	B felhasználó Saját használatra ingyenes.
<b>C</b>	Felhasználó C Saját használatra ingyenes.
<b>D</b>	Felhasználó D Saját használatra ingyenes.
<b>E</b>	Felhasználó E Saját használatra ingyenes.

Az osztályozás alkalmazható a Tünetek szintjén, vagy az egyes Rubrikákon.

A Tünetre vonatkozó osztályozás beállítása a Tünet összes Rubrikájára érvényes lesz. A Rubrikákra alkalmazott beállítások ezután már nem lesznek használhatók.

Lásd még Demo eset *Egyszerű osztályozási példa*.

### Jogorvoslati szűrő és osztályozás

Ha a Tünetek vagy Rubrikák osztályozását használja egy elemzésben, az egyes elemzésekhez tartozó jogorvoslatok automatikusan szűrésre kerülnek. Ez a szűrés a Hahnemann íásaiban található információkkal összhangban történik.

A *Psora*, a gyógymódok a következők: minden ásványi anyag és nozóda, valamint Lach, Lyc, Sep, de kivéve Merc.

*Incident, Acute Miasmatic, Epidemic*, a gyógymódok: minden növény és állat, valamint Merc, Ars, Ant-c.

A *Iatrogén*, a gyógymódok a *Gyógyszeres mérgezés után*, és a *Oltásból eredő betegségek* rovatokban találhatóak.

A *Öröklött tendencia*, a gyógymódok a következők: minden nosodák.

A többi csoport esetében az összes jogorvoslati lehetőség szerepel.

### Clipboardok

Az A-B-C-D-D-E osztályok vágólapként is használhatók. Ezeket a Tünetekhez vagy egyedi Rubrikákhoz rendelve nagyon könnyen létrehozhatók különböző nézetek az elemzési eredményekről.

### További információ

A fenti besorolásra vonatkozó információk korlátozottak.

Hahnemann osztályozásának alkalmazásáról kiváló információk találhatók a <http://www.ewaldstoteler.com> weboldalon

## Többféle nézet

Most már tudja, hogyan kell elemzést készíteni. Azt is tudja, hogyan finomítsa az elemzést, a tünetek értelmezése alapján az adott esetben.

Lehet, hogy súlyokat rendelt a tünetekhez vagy a rubrikákhoz. Lehet, hogy besorolásokat rendelt hozzájuk. A használt rubrikákhoz kiválasztott egy elemzési képletet a jogorvoslatok fontosságának mérlegelésére. És talán már megszűrte az eredményeket egy adott jogorvoslati királyságon.

Mindezek a beállítások segítettek Önnek abban, hogy az Ön értelmezése alapján a legjobb elemzési eredményt kapja.

De ez az Ön értelmezése, az Ön véleménye a beteg tüneteiről. Ezek a tünetek változatlanok, ezek a megfigyelt tények, amelyeket összegyűjtöttél. Nem számít, hogy milyen véleményen van, a megfigyelt tünetek jelentik a valóságot, amivel dolgoznia kell. (Organon §18)

Azonban megfontolhatná, hogy ugyanazokat a tüneteket más szemszögből, más szemlélettel nézze, másképp értelmezze. Természetesen megváltoztathatja az elemzés összes beállítását, és megnézheti, mi történik. Ekkor azonban az eredeti elemzésed megváltozott, és ahhoz, hogy újra láthasd, vissza kell módosítanod az összes módosított beállítást.

Annak érdekében, hogy lehetővé tegye az elemzés beállításainak módosítását anélkül, hogy elveszítené az eredeti beállításokat, létrehoztuk a több nézetet.

### Mi az az elemzési nézet?

Az Elemzési nézet az elemzésre alkalmazható összes beállítás összessége.

Súlyok	·0 ·1 ·2 ·3 ·4
Osztályozás	○ ⚡ ⋯ ^ U → ⊗ × A B C D E
Egysúlyi tünetek	☐
Helyes Polar	↔
Elemzési képlet	Például a "Small Remedies"
Gyógyszűrő	Például "Növények"

Több nézetet is létrehozhat, amelyek mindegyike saját beállításgyűjteménnyel rendelkezik.



Példaként nézze meg a *Demo case Andrew*, elemzés *Több nézet*.

## Nézet létrehozása

Új nézetet a menüben vagy az eszköztáron keresztül hozhat létre. (Előugró menü opció *Nézet / Új nézet hozzáadása*).

Az új nézet az eredeti nézet másolata, pontosan ugyanazokkal a beállításokkal. Az új nézetben a beállításokon végzett módosítások kizárólag az adott nézetre vonatkoznak. Az összes többi nézet pontosan ugyanolyan marad, mint volt. Ha szeretné, opcionálisan nevet is adhat az új nézetnek.

Vegye figyelembe, hogy minden nézet pontosan ugyanazt a tünet- és rubrikagyűjteményt használja. A páciens helyzete ugyanaz, az Ön értelmezése az, ami minden egyes nézet esetében más és más.

A menü segítségével könnyen válthat egyik nézetről a másikra. (Előugró menü opció *Nézet / Standard*).

Ha a továbbiakban nem kívánja használni a kiválasztott nézetet, törölheti azt. (Előugró menü opció *Nézet / Az aktuális nézet eltávolítása*).

A nézetnek adott nevet bármikor megváltoztathatja. (Előugró menü opció *Nézet / Az aktuális nézet átnevezése*).


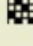
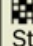
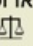
A nézetek sorrendjét is megváltoztathatja a menüben vagy az eszköztáron. (Előugró menü opció *Nézet / Mozgassa az aktuális nézetet balra*).

## Az egyes nézetek elemzési eredményeinek megtekintése

A képernyő jobb oldalán található elemzési eredmények terület mutatja a kiválasztott nézet elemzési eredményeit. Ha másik nézetre vált, az eredmények az adott nézet eredményeihez fognak igazodni.

Az összes megtekintési eredményt egyszerre is megtekintheti. (Eszköztár gomb ).

Így fog kinézni:

Standard	With Weights	Clas
 Standard	 Standard	 Standard
הצג את כל הארוכות	Show all remedies	Aut
•1 	•1 •2	•1 (
calc •	dulc •	dulc
sil	calc •	ma
puls	sil	me
merc	rhus-t	nux
sulph	puls	kali
sep	sep	rhu
nat-m	merc	stic
chin	nux-v	nux
rhus-t	kali-c	sep
tub	calc-p	kali
ars	mang	me
con	nux-m	kali
kali-c	bell •	calc
bell •	bry	me
dulc •	hep	lem

Hasonló az elemzés listájának áttekintéséhez, de nézetenként egy eredménylistát mutat.

A tetején az egyes nézetekhez használt beállítások összefoglalója látható.

- A táblázat kimeneti stílusához kiválasztott elemzés.
- Ha az elemzés osztályozást használ, akkor az alkalmazott elemzési képletet.
- A használt korrekciós szűrő.
- Egy kis kép minden egyes hatályos elemzési beállításhoz.

## Böninghausen

### Néhány információ a Böninghausen-analízisről

A Böninghausen-elemzési módszer nem használ más repertóriumot, hanem a *Complete Repertory* címmel dolgozik, mint a többi elemzés. A régi Böninghausenes-repertoárok összes rubrikája megtalálható a *Complete Repertory* oldalon.

A Böninghausen-féle analitikus rendszer egy olyan módszertan, amelyet akkor használunk, amikor a páciens tünetei megkívánják, semmi köze semmilyen konkrét repertóriumhoz, hanem olyan általánosított rubrikákhoz van köze, amelyek bármely repertóriumban megtalálhatók.

A különbség a számítás módjában van.

Ahelyett, hogy csak azt vizsgálánánk, hogy egy gyógymód hogyan szerepel egy adott rubrikában, nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a repertórium más részein lévő kapcsolódó rubrikákban is előforduljon.

A számítás a következőképpen történik:

- Ne vegye figyelembe a javítás osztályzatát, ahogyan az a rubrikában megjelenik.
- Ehelyett használjon olyan javítási osztályzatot, amelyet a kapcsolódó rubrikákban a javítás előfordulása alapján számítanak ki.
- Adjon nagyobb súlyt egy gyógymódnak, ha az több kapcsolódó rubrikában fordul elő különböző repertóriumrészekben (mint például Elme, Fej, Általánosságok stb.).
- Végezzen korrekciókat a poláris rubrikákban való előfordulásra (mint amel. - agg., vagy vágy - ellenszenv).

A bönninghauseni elemzési stílusban általában általánosabb és nagyobb rubrikákat használ.

A kisebb specifikus rubrikák és a nagyobb általános rubrikák vegyes használata általában nem hasznos.

## **Elemzés Minőség**

### **A jó elemzés készítésének művészete**

A beteg tüneteinek jó elemzése művészet, amelynek elsajátítása nem nyilvánvaló. A különböző iskolák különböző módszereket taníthatnak. Az egyes tanárok személyes stílusukat és elméleteiket népszerűsítik. A jó elemzés pedig páciensenként eltérő. Az Elemzésminőség eszköz megpróbál segíteni a gyakori hibák megelőzésében, ezáltal növelve a siker esélyét.

### **A minőségi mutató**

Az Analysis modulban, az oldal tetején egy kis színes gomb látható.

A szín az elemzés minőségét jelzi.


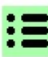
- Zöld: Csak kisebb javítási javaslatok.
- Sárga: A minőség javítható.
- Piros: Ezzel az elemzéssel komoly problémák vannak.

Kattintson a minőségi mutatóra, ha egy jelentést szeretne látni a lehetséges javítási javaslatokkal.

# Materia Medica modul

## A Materia Medica modul megnyitása

Lépjen a Materia Medica modulba a *MM* fülre kattintva.



Complete

Allen, He

Keynote

The Mai

Allen, Tir

Clinical

The Enc

Anschut:

New, ok

Boericke

Pocket

Boger, C

A synop

Bönningl

Charact

Clarke, J

Dictione

Cowpert

A Textb

Dewey, V

Essentie

Farringtc

Clinical

Hahnem:

Materia

Organoi

Hansen,

A Text-é

Hering, C

The Gui

Hutchins

700 Rec

Kent, Jar

Boericke, William - Pocket Ma (...)


**Arnica montana**


Leopard's Bane


Produces conditions upon the system quite similar to those resulting from injuries, falls, blows, contusions. Tinnitus aurium. *Putrid phenomena*. Septic conditions; prophylactic of pus infection. Apoplexy, red, full face.


It is especially suited to cases when any injury, however remote, seems to have caused the present trouble. *After traumatic injuries*, overuse of any organ, strains. Arnica is disposed to cerebral congestion. Acts best in plethoric, feebly in debilitated with impoverished blood, cardiac dropsy with dyspnea. A muscular tonic. Traumatism of grief, remorse or sudden realization of financial loss. Limbs and body ache as if beaten; joints as if sprained. Bed feels too hard. Marked effect on the blood. Affects the venous system inducing stasis. Ecchymosis and hemorrhages. Relaxed blood vessels, black and blue spots. Tendency to hemorrhage and low-fever states. Tendency to tissue degeneration, septic conditions, abscesses that do not mature. *Sore, lame, bruised feeling*. Neuralgias originating in disturbances of pneumo-gastric. Rheumatism of muscular and tendinous tissue, especially of back and shoulders. Aversion to tobacco. *Influenza*. Thrombosis. Hematocele.


**Mind.** -Fears touch, or the approach of

 Index


 Book

 Find

 Case

 MM

## A jogorvoslat kiválasztása

Az eszköztár fenti mezőjébe beírhatja a gyógymód rövidítését. Ha nem ismeri a rövidítést, a mező mögötti  megnyomásával megkeresheti a gyógymódot.

## Könyv kiválasztása

A gyógymód kiválasztása után a képernyő bal oldalán felsorolt Materia Medica források közül választhat. Ha a kiválasztott gyógymód nem fordul elő könyvben, a könyv címe szürke színnel jelenik meg.

**Complete**  
**Allen, He**  
*Keynote*  
*The Ma*  
**Allen, Tir**  
*Clinical*  
*The Enc*  
**Anschut**  
*New, ol*  
**Boericke**  
*Pocket*  
**Boger, C**  
*A synop*  
**Bönningl**  
*Charact*  
**Clarke, J**  
*Dictione*  
**Cowpert**  
*A Textb*  
**Dewey, V**  
*Essentia*  
**Farringto**  
*Clinical*  
**Hahnema**  
*Materia*  
*Organoi*  
**Hansen,**  
*A Text-b*  
**Hering, C**  
*The Gui*  
**Hutchins**  
*700 Rec*  
**Kent, Jar**

Ha a maximális helyet szeretné felhasználni az olvasáshoz, akkor az indexet az eszköztár ☰ gombjával elrejtheti.

## Boericke, William - Pocket Manual of (...)

### Arnica montana

#### *Leopard's Bane*

Produces conditions upon the system quite similar to those resulting from injuries, falls, blows, contusions. Tinnitus aurium. *Putrid phenomena*. Septic conditions; prophylactic of pus infection. Apoplexy, red, full face.

It is especially suited to cases when any injury, however remote, seems to have caused the present trouble. *After traumatic injuries*, overuse of any organ, strains. Arnica is disposed to cerebral congestion. Acts best in plethoric, feebly in debilitated with impoverished blood, cardiac dropsy with dyspnea. A muscular tonic. Traumatism of grief, remorse or sudden realization of financial loss. Limbs and body ache as if beaten; joints as if sprained. Bed feels too hard. Marked effect on the blood. Affects the venous system inducing stasis. Ecchymosis and hemorrhages. Relaxed blood vessels, black and blue spots. Tendency to hemorrhage and low-fever states. Tendency to tissue degeneration, septic conditions, abscesses that do not mature. *Sore, lame, bruised feeling*. Neuralgias originating in disturbances of pneumo-gastric. Rheumatism of muscular and tendinous tissue, especially of back and shoulders. Aversion to tobacco. *Influenza*. Thrombosis. Hematocele.


**Mind.** -Fears touch, or the approach of anyone. Unconscious; when spoken to answers correctly, but relapses. Indifference; inability to perform continuous active work; morose, delirious. Nervous; cannot bear pain; whole body oversensitive. Says there is nothing the matter with him. Wants to be let alone. Agoraphobia (fear of space). After mental


[Index](#)
[Book](#)
[Find](#)
[Case](#)
[MM](#)

## Jogorvoslati index

Ha áttekintést szeretne kapni a könyvben elérhető összes gyógymódról, nyissa meg a könyv címén lévő felugró menüt. (Előugró menü opció *Index*).



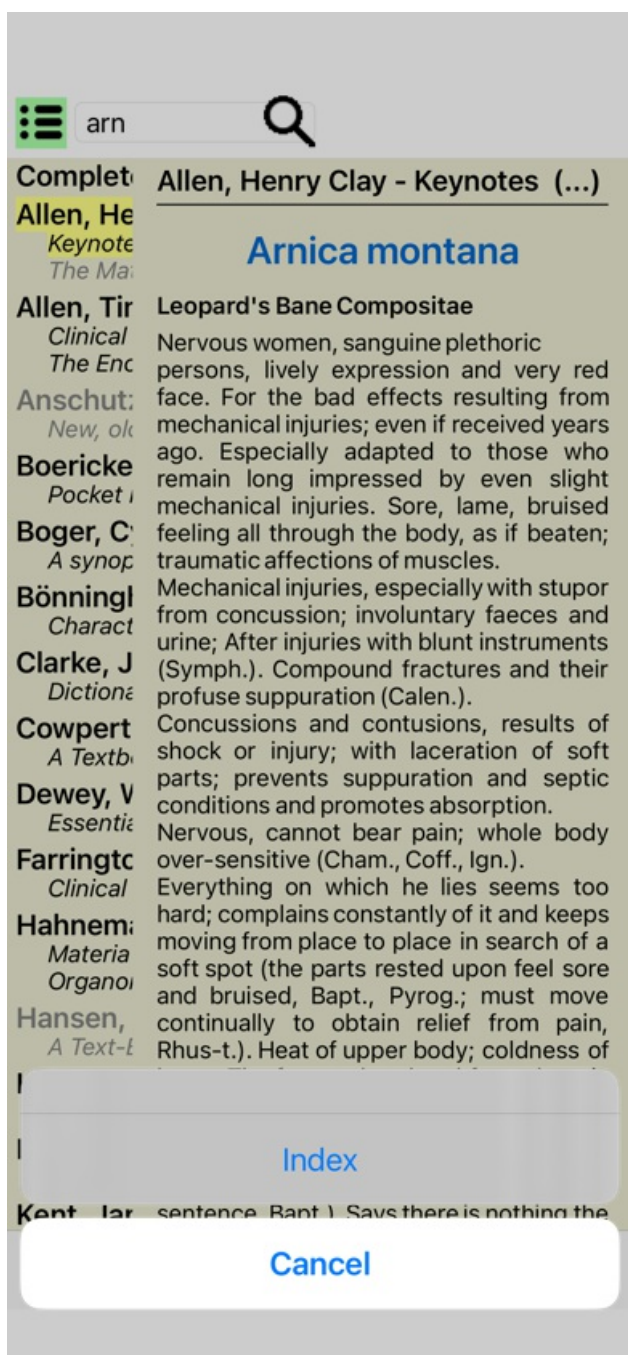

A könyvben szereplő összes jogorvoslatot tartalmazó lista látható. A gyógymód nevére kattintva megnyithatja a gyógymód könyvét.

## Allen, Henry Clay / Keynotes a

Abrotanum  
Aceticum acidum  
Aconitum napellus  
Aesculus hippocastanum  
Aethusa cynapium  
Agaricus muscarius  
Agnus castus  
Allium cepa  
Aloe socotrina  
Alumina  
Ambra grisea  
Ammonium carbonicum  
Ammonium muriaticum  
Amylenum nitrosum  
Anacardium orientale  
Anthracinum  
Antimonium crudum  
Antimonium tartaricum  
Apis mellifera  
Apocynum cannabinum  
Argentum metallicum  
Argentum nitricum  
Arnica montana  
Arsenicum album  
Arum triphyllum  
Asarum europaeum  
Asterias rubens  
Aurum metallicum

Baptisia tinctoria  
Baryta carbonica  
Belladonna  
Benzoicum acidum  
Berberis vulgaris  
Bismuthum oxidatum  
Borax veneta  
Bovista

## Elérhető könyvek és internetes oldalak

A Materia Medica modulban több könyv is elérhető. A könyvek elérhetősége a nyelvi beállításoktól függően változhat.

A Materia Medica modul számos olyan internetes weboldalt integrál, amelyek gyógyászati információkat nyújtanak. Ezeknek a weboldalaknak az elérhetősége az Ön nyelvi beállításaitól függ.

Felhívjuk figyelmét, hogy az internetes weboldalak tartalma nem része a *Complete Dynamics*-nak, csak a Materia Medica modulban jelenik meg az Ön kényelme érdekében.

Egyes weboldalak fizetést kérhetnek az információhoz való hozzáférésért. Ez kizárólag a weboldal tulajdonosának politikája, és semmilyen módon nem kapcsolódik az Ön *Complete Dynamics* licencéhez.

## Fordított Materia Medica

A *Reverse Materia Medica* megmutatja a legfontosabb tüneteket a repertóriumból az adott gyógymódhoz, ahogyan azok a repertóriumban megtalálhatók.

Az értelmezést nem emberi szakértők végzik, ahogyan azt a hagyományos Materia Medica esetében szokás, a *Reverse Materia Medica* teljes mértékben a repertóriumban tárolt szakértelemre épül.

A *könyv* modulban található rubrikára való áttéréshez egyszerűen kattintson rá duplán.

A fontosabb tüneteket nagyobb méretben nyomtatják, mint a kevésbé fontosakat, így könnyen megkülönböztetheti a különböző tünetek relatív fontosságát.

Az eredményeket a következő gombokkal módosíthatja:

*Szűrő* A szűrő legördülő listában kiválaszthatja a fordított Materia Medica-ban megjelenő rubrikák kritériumait:

<i>Automatikus</i>	A legrelevánsabb rubrikák automatikus kiválasztása történik.
<i>Megerősített tünetek</i>	Csak a 3. vagy 4. fokozatú jogorvoslatokat használják. Ezek olyan tüneteket jeleznek, amelyek a gyakorlatban is megerősítést nyernek.
<i>Teljes tünetek</i>	Csak a teljes tüneteket használjuk. A tünetek akkor teljesek, ha legalább 3 különböző típusú információt egyesítenek. Példa: Idő + hely + hosszabbítás.
<i>Megerősítve és befejezve</i>	Csak a <i>megerősített és teljes</i> tünetek jelennek meg.
<i>Piros vonal tünetei</i>	Előnyben részesíti azokat a tüneteket, amelyek a repertoár több részében összefüggő módon fordulnak elő.
<i>Kulcsszavak</i>	A jogorvoslat 3. vagy 4. fokozatú, de az összes többi jogorvoslat alacsonyabb fokozatú.
<i>Egyedi rubrikák</i>	Csak olyan rubrikákat mutasson, ahol a gyógymód az egyetlen előforduló gyógymód.

## További Materia Medica

A *Complete Dynamics*hoz könnyen hozzáadhatók más felhasználók által létrehozott további Materia Medica könyvek. A Materia Medica könyv egy fájlban van tárolva, amely megosztható más felhasználókkal. Az új könyv telepítéséhez másolja a fájlt a *Complete Dynamics* mappába, amely a *Documents* mappa alatt található. Ezután állítsa le és indítsa újra a *Complete Dynamics* programot. Az új könyvnek ezután automatikusan láthatónak kell lennie a *MM* oldalon.

Új Materia Medica könyvek létrehozásához a *Master Edition* licencére van szükség.

## Materia Medica gyorsnézet

Nagyon kényelmes lehet egyszerre több könyv Materia Medica szövegének gyors megtekintése.

A *Materia Medica gyorsnézet* ablakban egyszerre több kompaktabb Materia Medica könyv szövege is megjelenik. (Előugró menü opció *Materia Medica gyors nézet*).



## Cyclamen Europaeum

### *Pharmacokinship - Remedy Relations (Nambison)*

*Followed well by:* Phos., Puls., Rhus-t., Sep., Sulph.

*Antidoted by:* Camph., Coff., Puls.

*Duration of action:* 14 - 20 d

*Dose:* 3 attenuation

### *700 Red Line Symptoms (Hutchinson)*

1. - Flickering before the eyes, as of various colours, glittering needles, fiery specks and sparks.

### *Keynotes of the homeopathic Materia Medica (Lippe)*

Sow Bread

Pressing, drawing and tearing pain, principally in the periosteum.

Chilblains of the feet.

As long as he walks about he feels well with the exception of languor,

but as soon as he sits down, especially in the evening, he suffers various inconveniences.

Thirstlessness.

Menses too profuse.

Bad effects from eating much fat food (pork).

Aggravation in the evening and while at rest.

Amelioration whilst walking.

### *Keynotes and Characteristics (Allen)*

#### **Sow Bread Primulaceae**

Best suited for leucophlegmatic persons with anaemic or chlorotic conditions; easily fatigued, and in consequence not inclined to any kind of labor; feeble or suspended functions of organs or special senses. *Pale, chlorotic; deranged menses* (Ferr., Puls.), accompanied by vertigo, headache, dim vision. Pains; pressive, drawing or tearing of parts where bone lie near the surface. Ailments: from suppressed grief and terrors of conscience; from duty not done or bad act committed. Great sadness and peevishness, irritable, morose, ill-humored; inclined to weep; desire for solitude; *aversion to open air* (reverse of Puls.). Headache in

[Close](#)

# Információ a jogorvoslatról

## Részletes információ a jogorvoslatról

Példaként nézzük meg a *általánosságok; ételek és italok; alma; vágtyak* rubrikát:

FOOD	GENERALITIES
<b>FOOD and drinks; apples (cont.)</b>	
<b>desires:</b> adam <b>Adon</b> <b>ALOE</b> aml-n <b>ANT-T</b> ap-g arge-p <b>Asaf</b> biti-at bros-g <b>Cham</b> cit-n cub dama-d fel <b>GUAI</b> <b>Hafn</b> helod-c kali-p lac-drom lsd lyss <b>Manc</b> menth merl meteo-a ory-c ozon phos polyst prun pyrus-c <b>Ruta</b> sabad sep stront-c <b>SULPH</b> tax <b>TELL</b> toxop-p <b>Tritic-v</b> vip • Food and drinks; cool things, like apples, desires (2) • Food and drinks; fruits; desires (233)	
• eleven thirty pm., on falling asleep: fel • Night, nine pm. - five am.; agg.; eleven thirty pm. (8)	
• water, with desire for cold: <b>ANT-T</b> • Food and drinks; cold; drinks; desires (342)	
• butter: lyss	
• cider • Food and drinks; cider; desires (6)	
• juice: <b>Adon</b> ozon	
•• cold: <b>Adon</b> ozon • Food and drinks; cold; drinks; desires (342) • Food and drinks; fruits; desires; juicy, juices (47)	
• sour: <b>Adon</b> cit-n • Food and drinks; fruits; desires; sour, acid (26)	
• strudel: meteo-a	
<b>aromatic food</b>	
agg., smell of: ign puls • Food and drinks; food in general; agg.; smell of (109) • Odors, strong, agg. (169)	
<b>desires</b> • Food and drinks; herbs, desires (11)	
• drinks: anath	
• food: bufo meteo-a	
<b>artichokes</b>	
aversion: abies-c acon <b>MAG-C</b> sulph • Food and drinks; vegetables; aversion (95)	
<b>desires: ABIES-C</b> • Food and drinks; vegetables; desires (133)	
<b>artificial agg.:</b> <b>ALUM</b> <b>ARS</b> <b>CALC</b> calc-p gaert lyc	

További információért kattintson duplán a **ANT-T** gombra.  
Ekkor megjelenik a Remedy információs ablak:

## Remedy information

**Rubric:** GENERALITIES; FOOD and drinks; apples; desires.

**Remedy abbreviation:** ant-t, grade 3.

**Standard name:** Antimonium tartaricum.

**English name:** Tartrate of antimony & potash.

Occurrences in related rubrics: 2, average grade: 2.0.

## Sources

Allen TF      *Encyclopedia of Pure Materia Medica*, 1874.

Allen, F. *Index of Encyclopaedia*, 1876

**Eintrag:** *Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht antipsorischen Arzneien mit handwritnen annotations, 1833.*

KNAPP C H      *Repertory of Hering's Guiding Symptoms*, 1896.

Litaval S *Homoeopathic Therapeutics*, Jain. B. (New Delhi), 1890.

1028-3000 *Keynotes and Red line symptoms of Materia Medica*, 1915.

Site A: *Materia Medica Para Project*, 2018.

Trübner's Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III, T.O. Weigel (Leipzig), 1847.

Close

## Előfordulások a kapcsolódó rubrikákban

A kapcsolódó rubrikák olyan rubrikák, amelyek valamilyen kapcsolatban állnak azzal a rubrikával, amelyet éppen megtekint az adott jogorvoslathoz.

Ebben a példában ezek a rubrikák a következők:

*Általános dolgok; Ételek és italok; hűvös dolgok, mint az alma, vágyak*

*Általánosság; Ételek és italok; alma, vágyak; víz, hideg iránti vágyakozással*

Mindkét rubrika tartalmazza a *ant-t* is.


Minél nagyobb az előfordulások száma a kapcsolódó rubrikákban, és minél nagyobb az átlagos súly ezekben a rubrikákban, annál nagyobb jelentőséget lehet tulajdonítani a jogorvoslatnak.

## Források

Felsorolja az összes forrást, ahonnan a gyógymód származik. Ez legalább a szerző nevét, a könyv vagy folyóirat címét és a megjelenés évét tartalmazza.

# Mező keresése

## Hatékony és könnyen használható keresés

Find before/during \*3 

- Szöveg** A szövegrészletek automatikusan szöveggént értelmeződnek, mintha a *szöveg* mezőbe írta volna be.  
A /, + és - ugyanúgy használható (lásd a példákat a *Find modul* című szakaszban).  
A fenti példában a keresés a *menses* szóra történik a *előtt* vagy a *alatt* kombinációban.
- Jogorvoslatok** A gyógymód rövidítéseit ponttal kell befejezni.  
A *Remedies* mezőben ez nem kötelező, de itt egy ponttal kell befejezni, hogy elkerülhető legyen a szövegrészek és a gyógymódok rövidítései közötti összetévesztés. (Zavaró példa: *sep* jelentheti a *sepia* vagy a *separation*).  
A / és a + használata itt is érvényes, lásd a példákat a *Find module* szakaszban.  
A fenti példában a keresés a *sepia* vagy a *cimicifuga* oldalon történik.  
Megjegyzés: még az olyan jogorvoslatokat is, amelyek önmagukban nem jelentenek rövidítést (mint például *Apis* vagy *Bufo*), ponttal kell befejezni (apis. bufo.).
- Gradáció** Az 1-4 minimális gyógymódok fokozatai a \*1, \*2, \*3, vagy \*4 beírásával adhatók meg. Ez a kifejezés a következőképpen olvasható: Minden (\*) kért jogorvoslatnak legalább ilyen osztályzattal kell rendelkeznie.  
Alternatívaként az 1, 2, 3 és 4 számok a \* nélkül szintén a minimális korrekciós fokozatként értelmezhetők. Tehát 4 ugyanaz, mint \*4.
- Rubrika mérete** A minimális és maximális rubrikaméret számmal adható meg, amelyet > vagy < előz meg.  
<50 azt jelenti, hogy 50 jogorvoslat vagy annál kevesebb.  
>10 azt jelenti, hogy 10 vagy több jogorvoslat.  
Alternatívaként bármely 5-tel kezdődő vagy annál nagyobb szám automatikusan maximális rubrikaméretként értelmeződik. Tehát 50 ugyanaz, mint <50.

## Példák

Bővítjük ki a fenti példát a legfeljebb 50 jogorvoslatot tartalmazó rubrikákra való korlátozással.  
A kritériumok megadásának alábbi módjai mind ugyanazt az eredményt eredményezik:

szept. cim. menstruáció előtt/alatt \*3 <50  
szept. cim. menstruáció előtt/alatt 3 50  
menstruáció szept. előtt/alatt 3 <50 cimic.  
50 menstruáció + a szeparáció előtt/alatt/közben. 3  
menstruáció előtt/alatt szept. 2 cimic. 200 50 3

Az utolsó példában látható, hogy a kezdeti 2-es fokozatot később 3 váltja fel, és a 200-as maximális rubrikaméret 50-re változik. Ez egy példában zavarosnak tűnhet, de valójában nagyon hatékony, amikor keresés közben szűkíteni szeretné az eredményeket. Új kritériumot írhat be anélkül, hogy először törölnie kellene a korábban beírt kritériumot; az utolsó egyszerűen felülírja az elsőt.

Tipp: Ne feledje, hogy a szöveges keresés a =, \* és "" speciális jelöléseket is használja:  
= *kutyát* talál *kutya*, de nem *dogmatikus*.  
\* *ation* megtalálja *szívdobogás* valamint *izzadás* és *peteérés*.  
"he is" csak *he* és *is* talál, ha pontosan ebben a sorrendben vannak.

# Preferencia beállítások

A program számos beállítása konfigurálható az Ön személyes preferenciái szerint. Ezeket a beállításokat a *Index* modulban található *Preferences* gombbal módosíthatja.

Megnyílik egy párbeszédpanel, amely több részből áll.

## Általános beállítások

Preferences

Program language

English

Animations

☐

Optimize for

Higher speed

Include Kent's repertory

☐

General

Book

Case

Analysis

MM

Cancel

OK

*A program nyelve* Itt több nyelvi lehetőség közül választhat.

A rendelkezésre álló nyelvek a *Complete Dynamics* egyes verzióiban változhatnak; előfordulhat, hogy a nem elérhető nyelvek egy újabb kiadásban kerülnek hozzá.

*Animációk*

A *Complete Dynamics* egyes részein animációkat használnak, például egy ügy megnyitásakor és lezárásakor. Ezek szépen néznek ki, de időbe telik befejezni. Ha nem szeretné ezeket az animációkat, törölje a jelölőnégyzetet.

*Standard*

*betűtípus neve*

Itt kiválaszthatja a kívánt betűtípust, amelyet a program használni fog.

*Optimalizálja a*

Ez a beállítás befolyásolja az iPhone alkalmazás memóriahasználatát.

*Nagyobb sebesség.* Ha ezt választja, a program megpróbálja az adatokat a memóriában tartani, hogy növelje a sebességet. Ez a beállítás akkor ajánlott, ha főként a *Complete Dynamics* programmal dolgozik.

*Kevesebb memóriahasználat.* Ha be van jelölve, a program a lehető legtöbb memóriát szabadítja fel, amikor másik programra vált. Ez csökkenti annak kockázatát, hogy az iPhone megszakítja, de lassabbá teszi a programot. Ez a beállítás akkor ajánlott, ha több programmal dolgozik, vagy ha régebbi iPhonedel rendelkezik.

*Beleértve Kent repertoárját*

Jelölje be ezt az opciót, ha azt szeretné, hogy a *Kent's Repertory*, 6. kiadás külön repertóriumként legyen elérhető. A *Kent's Repertory* teljes tartalma már szerepel a *Complete Repertory*. Egyesek azonban inkább a *Kent* honlapon tájékozódnak, más anyagokból származó összes kiegészítés nélkül. Az opció bejelölése után a *Kent* elérhető lesz a *Index* modulban.

## Könyvbeállítások

### Preferences

Repertory language

Author numbers ☐

Show rubric size ☐

Rubrics in alphabetic order ☐

---

☐ General ☒ **Book** ☐ Case ☐ Analysis ☐ MM

---

<i>Repertórium nyelve</i>	A repertóriumhoz használandó nyelv. A második lehetőség a másodlagos nyelv, amely a rubrika szövege után látható. A második nyelv csak akkor érhető el, ha megvásárolta a repertoár fordítást.
<i>Vízszintes görgetés</i>	Ha ez az opció be van jelölve, akkor a vízszintes görgetés funkció engedélyezve van. Ez a funkció csak akkor érhető el, ha az egér vagy a trackpad támogatja a vízszintes görgetést.
<i>Rubrikaméret megjelenítése</i>	Ha be van jelölve, a Könyv modulban mindig megjelenik a rubrikához tartozó jogorvoslatok száma. Ha nincs bejelölve, a szám csak akkor jelenik meg, ha a jogorvoslatok nem láthatóak.
<i>Rubrikák ábécé sorrendben</i>	Ha be van jelölve, a Könyv modulban a rubrikák mindig ábécé sorrendben jelennek meg. Ha nincs bejelölve, akkor a Kent által bevezetett standard repertoár sorrend kerül alkalmazásra.

## Eseti beállítások

## Preferences

Minutes until auto... 5 —

Automatically delete archived cases Never

Use Cloud Server ☐

---

General Book **Case** Analysis MM

Cancel OK

---

*Percek az esetek automatikus lezárásáig*

Ha jelszót állított be a betegadatok védelmére, ez az opció beállítja, hogy az Eset modul hány perc múlva automatikusan zárolásra kerül.  
Ha ide 0-t ír be, akkor nem történik automatikus zárolás.

*Archivált ügyek automatikus törlése*

Válassza ki, hogy az archivált ügyek mennyi idő elteltével kerüljenek véglegesen törlésre.  
Ha a *Soha* lehetőséget választja, az archivált ügyek nem törlődnek automatikusan.

*Cloud szerver használata*

Tárolja az ügyek másolatát a Cloud Serverben.

## Elemzési beállítások

## Preferences

Remedy coloring HFA



Show only relevant rubrics



Analysis formulas

Standard	✓
Small remedies	✓
Small rubrics	
Bönninghausen	✓
Simple counting	✓

↑ ↓

General

Book

Case



Analysis

MM

Cancel

OK

**Remedy színező HFA** Ha ez az opció be van jelölve, akkor az elemzés a Grant Bentley arcelemzési módszere szerinti színhelyesbítéseket is elvégezheti. Az Elemzés modulban megjelenik egy új eszköztárgomb (🎨), amellyel a színezés be- és kikapcsolható.

Ennek a lehetőségnek a használata csak akkor hasznos, ha már sikeresen elvégeztél egy tanfolyamot ezzel a módszerrel.

**Csak a releváns rubrikák megjelenítése**

Az Analysis modulban a rubrikák és a jogorvoslatok közötti kapcsolat az eredményül kapott táblázatos grafikonokon látható.

A 0 súlyértékkel rendelkező tünetek és rubrikák valójában nem járulnak hozzá az elemzés eredményeihez.

Ha ez a beállítás be van jelölve, akkor az elemzés eredményeihez nem hozzájáruló rubrikákból származó jogorvoslatok kimaradnak az eredménytáblázat grafikonjából. Így könnyebben láthatja, hogy a rubrikák hogyan járulnak hozzá az elemzés eredményéhez.

**Elemzési képletek**

Az Elemzés modulban számos elemzési képlet használható.

Kiválaszthatja, hogy ezek közül a képletek közül melyek és milyen sorrendben jelenjenek meg.

Az elemzések megjelenítési sorrendjének megváltoztatásához válasszon ki egy elemzést a nevére kattintva.

Ezután a ↑ és ↓ gombokkal felfelé vagy lefelé mozgathatja a listában.

Egy elemzés felvételéhez vagy kizárásához jelölje ki az in, majd kattintson a *Show analysis* jelölőnégyzetre.

## Materia Medica beállítások



## Preferences

- English ☒
- Portuguese ☐
- Spanish ☐
- French ☐
- German ☐
- Russian ☐

---

General

Book

Case

Analysis

MM

Cancel

OK

---

*Nyelvek* Számos Materia Medica nyelv áll rendelkezésre.

Alapértelmezés szerint a nyelvek a számítógép nyelvi és országbeállításainak, valamint a licencbeállításoknak megfelelően jelennek meg.


Kiválaszthatja, hogy a *Materia Medica modulban* milyen könyvnyelvek jelenjenek meg.

## Homeopátiás szerek vásárlása

A programon belül egyszerűen megrendelheti homeopátiás készítményeit, közvetlenül egy online gyógyszertárból.

A gyógyszertár elérhetősége országonként eltérő lehet, a helyi és nemzetközi előírásoktól függően. Ez a rendelkezésre állás a program indításakor kerül meghatározásra.

Gyógyszer rendeléséhez nyissa meg a felugró menüt a gyógyszerkészítmény nevénel, bárhol a Könyv vagy az Elemzés modulban, és válassza a *Gyógyszer vásárlása a gyógyszertárból* lehetőséget. (Előugró menü opció *Szer vásárlása a gyógyszertárból*).

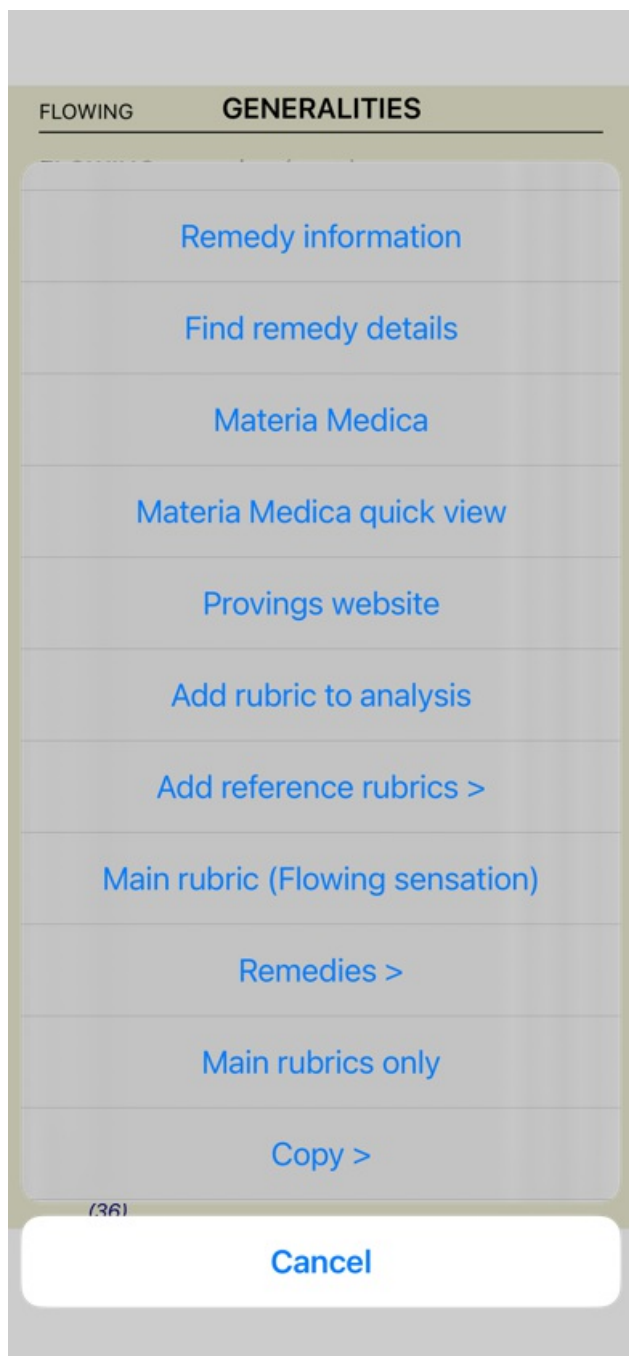

Ha a lehetőség nem elérhető, akkor az Ön országában nem támogatott gyógyszertár.

Az opció kiválasztása után automatikusan az Ön számára elérhető online gyógyszertárba kerül.

Felhívjuk figyelmét, hogy a *Complete Dynamics* független a gyógyszertáraktól. Ügyfeleink számára szolgáltatásként közvetlen hozzáférést biztosítunk a gyógyszertárhoz.

# Visszajelzés

## Szükségünk van a segítségedre, és értékeljük a visszajelzéseidet!

A *Complete Dynamics* készítői elkötelezték amellet, hogy a lehető legjobb minőséget és használhatóságot biztosítsák Önnek, a kereskedelmi kiadások mérsékelt árazása mellett.

Ami a minőséget illeti, a szoftverfejlesztés során zéró hibatűrést alkalmazunk. A programhibák egyszerűen nem elfogadhatóak számunkra, és ha megtaláljuk őket, a lehető legmagasabb prioritással fogjuk megoldani.

A használhatóság összetettebb kérdés, mivel a használhatóság nagyon személyes kérdés. Mi és a szakmai értékelők elkötelezett csoportja folyamatosan keressük a lehető legjobb használhatóságot, mindig értékelve az Ön visszajelzéseit.

Az Ön segítségével folyamatosan tovább tudjuk fejleszteni a *Complete Dynamics*-ot.

## Hogyan adjunk visszajelzést

Ha visszajelzést szeretne küldeni nekünk, kérjük, látogasson el honlapunkra [www.completedynamics.com](http://www.completedynamics.com), a *Kapcsolat* részre.

Küldhet nekünk egy e-mailt is a [support@completedynamics.com](mailto:support@completedynamics.com) címre.