

Complete Dynamics

Vydanie pre praktikov

pre iPhone

Verzia 24.12

O tejto príručke

Je to pre vás tá správna príručka?

Dokumentácia *Complete Dynamics* je k dispozícii v mnohých variantoch.

Máme rôzne príručky pre rôzne konfigurácie programov.

- Vydanie programu: Prehliadač, Practitioner alebo Master.
- Typ počítača: Apple OS-X, Windows, iPhone, iPhone, Android.
- Rôzne medzinárodné jazyky.

Správna príručka je presne prispôbena vašej situácii.

Ak si myslíte, že nečítate ideálnu príručku, prejdite na našu webovú stránku www.completedynamics.com, sekciu *Dokumentácia*, a stiahnite si príručku tam.

Preklady

Vždy, keď vydáme novú verziu *Complete Dynamics*, uistíme sa, že anglická príručka je aktuálna.

Preklady textov, ktoré sa zmenili, si môžu vyžadovať určitý čas navyše.

V častiach príručky, ktoré ešte nie sú preložené, je uvedený pôvodný anglický text, vytlačený ako tento text.

Vitajte na

Vitajte na stránke *Complete Dynamics* - Practitioner Edition.

Softvérový program *Complete Dynamics* vám ponúka dokonalý zážitok z čítania a štúdia na počítači *Complete Repertory*. Medzi homeopatickými odborníkmi je *Complete Repertory* celosvetovo známe svojou úplnosťou, presnosťou a pokrytím pôvodných zdrojov.

Softvér je k dispozícii pre Apple macOS®, Microsoft Windows®, Linux®, Apple iOS®, Android®.

S edíciou *Practitioner* budete môcť:

- Prečítajte si a preštudujte celú stránku *Complete Repertory*, a to vo viacerých jazykoch.
- Spravujte spisy pacientov.
- Vykonajte analýzy.
- Prečítajte si knihy *Materia Medica*.

Tieto stránky vám majú pomôcť zorientovať sa v programe.

Odporúčame vám začať s kapitolou *Začínáme*, ktorá vám poskytne prehľad možností.

Úprimne dúfame, že *Complete Dynamics* obohatí váš homeopatický život, či už ste profesionálny lekár, študent, učiteľ alebo výskumník.

Vývojový tím *Complete Dynamics*.

Začíname

Intuitívny dizajn

Complete Dynamics je navrhnutý tak, aby ho mohli intuitívne používať aj tí, ktorí majú profesionálne skúsenosti s homeopatiou. Niektoré funkcie programu môžete využívať oveľa efektívnejšie, ak sa naučíte niekoľko trikov.

Vyskakovacie ponuky

V mnohých situáciách poskytujú vyskakovacie ponuky rýchly prístup k funkciám. Stačí sa dotknúť obrazovky a podržať ju 1 sekundu. Potom sa zobrazí ponuka, ak je k dispozícii pre položku, na ktorú ste klikli.

Príklad:




Viacnásobný výber

V mnohých situáciách môžete chcieť vykonať určitú úlohu na viacerých položkách súčasne, a nie iba na jednej vybranej položke. V týchto prípadoch môžete najprv vybrať viacero položiek a potom vykonať úlohu na všetkých vybraných.

Ako vybrať viacero položiek


Nižšie uvedené príklady ukazujú viacnásobný výber rubriek v module *Analysis*. Na iných miestach sú zásady rovnaké.

Ak chcete vybrať jeden riadok, kliknite naň myšou:

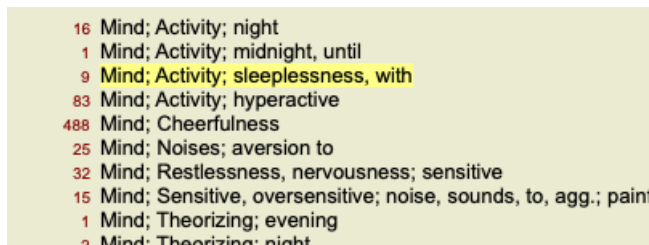


16 Mind; Activity; night
1 Mind; Activity; midnight, until
9 Mind; Activity; sleeplessness, with
83 Mind; Activity; hyperactive
488 Mind; Cheerfulness
25 Mind; Noises; aversion to
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
1 Mind; Theorizing; evening
2 Mind; Theorizing; night

Výber jedného riadku môžete zmeniť aj kliknutím na ľavý okraj textu. (V moduloch *Book* a *Find* môžete kliknúť na ľavú stranu štítku rubriky)

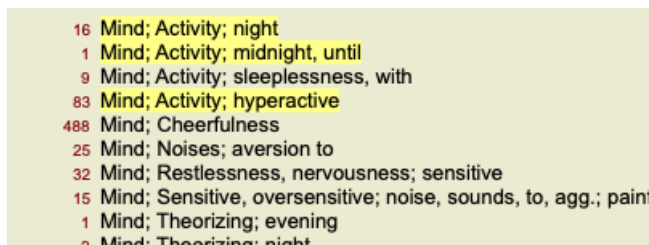

16 Mind; Activity; night
1 Mind; Activity; midnight, until
9 Mind; Activity; sleeplessness, with
83 Mind; Activity; hyperactive
488 Mind; Cheerfulness
25 Mind; Noises; aversion to
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
1 Mind; Theorizing; evening
2 Mind; Theorizing; night

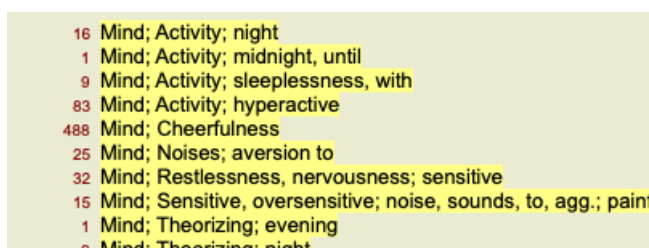

16 Mind; Activity; night
1 Mind; Activity; midnight, until
9 Mind; Activity; sleeplessness, with
83 Mind; Activity; hyperactive
488 Mind; Cheerfulness
25 Mind; Noises; aversion to
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
1 Mind; Theorizing; evening
2 Mind; Theorizing; night

Akcie, ktoré fungujú na viacerých vybraných položkách

Modul knihy

V module *Book* môžete vybrať viacero rubriík. Niektoré funkcie pracujú s viacerými rubrikami, iné len s jednou rubrikou.

Toto sú funkcie, ktoré pracujú s viacerými rubrikami:

- Pridajte do analýzy rubriky. (Možnosť kontextového menu *Pridanie rubriky k analýze*).
- Pridajte rubriky k danému príznaku v analýze. (Možnosť kontextového menu *Pridať rubriku do ... / Nový príznak...*).
- Skopírujte štítky rubriík do schránky. (Možnosť kontextového menu *Kopírovať / Skopírujte názov rubriky*).
- Skopírujte štítky rubriík s ich opravnými prostriedkami do schránky. (Možnosť kontextového menu *Kopírovať / Kopírovanie rubriky a liekov*).

Všetky ostatné funkcie pracujú v jednej rubrike. V prípade, že ste vybrali viac rubriík, použije sa tá, na ktorú ste klikli ako na poslednú.

Nájsť modul

V module *Nájsť* sú funkcie na viacerých rubrikách rovnaké ako v module *Knihy*.

Prípadový modul

V module *Case* sú to funkcie, ktoré pracujú s viacnásobným výberom:

- Odstránenie viacerých analýz. (Možnosť kontextového menu *Vymazať analýzu*).
- Presunutie viacerých analýz do iného prípadu. (Možnosť kontextového menu *Presun analýzy do prípadu...*).
- Vymazanie viacerých predpisov. (Možnosť kontextového menu *Vymazať predpis*).

Analytický modul

V module *Analysis* sú to funkcie, ktoré pracujú s viacnásobným výberom:

- Odstránenie viacerých rubriík alebo príznakov. (Možnosť kontextového menu *Odstrániť vybrané*).
- Priradenie váhového faktora. (Možnosť kontextového menu *Hmotnosť / Hmotnosť x2*). Atď.
- Priradenie triedy klasifikácie príznakov. (Možnosť kontextového menu *Klasifikácia príznakov / Psora*). Atď.
- Všetky funkcie zoskupovania.
- Funkcie na kopírovanie štítkov rubriík s opravnými prostriedkami alebo bez nich.
- Kopírovanie vybraných rubriík s cieľom vložiť ich do inej analýzy. (Možnosť kontextového menu *Viac na / Kopírovanie vybraných riadkov*, možnosť kontextového menu *Viac na / Vložiť skopírované riadky*).

- Presun vybraných rubrik nahor alebo nadol do iného príznaku. (Možnosť kontextového menu *Viac na / Posunúť sa nahor*, možnosť kontextového menu *Viac na / Posunúť sa nadol*).
- Výberom viacerých rubrik sa v oblasti výsledkov analýzy zvýraznia lieky týchto rubrik.
- Výberom viacerých nápravných opatrení v oblasti výsledkov analýzy sa zvýraznia rubriky, v ktorých sa tieto lieky vyskytujú.

Modul MM

V časti *Repertórium* modulu *MM* sú funkcie na viacnásobné rubriky rovnaké ako v module *Kniha*.

Indexové karty

Hlavné moduly *Complete Dynamics* sú prístupné prostredníctvom tzv. indexových kariet.

V edícii *Practitioner* sú to *Index*, *Book*, *Find*, *Case*, *Analysis* a *Materia Medica*.

[Predvoľby](#) [Používateľ a licencia](#) [O stránke](#) [Pomoc](#)

Mind	Fever, heat
Vertigo	Perspiration
Head	Skin
Eyes	Generalities
Vision	Boger's general analysis
Ears	Clinical
Hearing	Mirilli's themes
Nose	Psychological themes
Smell	Rx & Associations
Face	Anatomical index
Mouth	Remedies
Taste	Kingdoms & families
Teeth	
Throat	
Neck	
Stomach	
Abdomen	
Rectum	
Stool	
Bladder	
Kidneys	
Urethra	
Urine	
Male	
Female	
Larynx & trachea	
Speech & voice	
Respiration	
Cough	
Expectoration	
Chest	
Heart & circulation	
Blood	
Back	
Extremities	
Sleep	
Dreams	
Chill	



Index

Kniha

Nájsť

Prípad

MM

Modul *Index* poskytuje rýchly prístup ku kapitolám knihy pomocou textového aj grafického zobrazenia. Podrobnosti nájdete v časti nápovery *Indexový modul*.

Modul *Book* zobrazuje repertórium. Môžete ju čítať ako tlačенú knihu, ale aj prezerat' v skrátenej podobe. Podrobnosti nájdete v časti nápovery *Modul Book*.

Modul *Find* ponúka výkonnú funkciu na vyhľadavanie rubrik a opravných prostriedkov v knihe. Podrobnosti nájdete v časti nápovery *Nájsť modul*.

Modul *Case* umožňuje vytvárat' a organizovat' súbory prípadov pacientov. Podrobnosti nájdete v časti nápovery *Modul Case*.

Modul *Analysis* slúži na analýzu vašich prípadov. Podrobnosti nájdete v časti nápovery *Modul analýzy*.

Modul *Materia Medica* poskytuje informácie o liekoch. Podrobnosti nájdete v časti nápovery *Modul Materia Medica*.

V iPhone sa môže zobrazit' najviac 5 kariet.
Karta *Analysis* sa zobrazí hneď po otvorení spisu.
Potom dočasne skryjeme kartu *Index*.

verzia pre iOS

Používanie systému iOS

Apple iPhone® nemá myš a klávesnicu, ako ste zvyknutí na PC. Okrem toho iPhone nemá panel s ponukou aplikácií ako aplikácie v počítači.

Namiesto toho sa vyskakovacie ponuky používajú na ponuku funkcií, ktoré by inak boli dostupné prostredníctvom klávesnice a panela ponúk.

Dotyková obrazovka iPhoneu ponúka niekoľko možností, ktoré na počítači nie sú k dispozícii, tzv. gestá.

Príklady týchto gest používaných v programe *Complete Dynamics* sú:

- Potiahnite prstom. Položte prst na obrazovku a potiahnite ho doľava, doprava, nahor alebo nadol. Často sa používa na otáčanie stránok v knihe.
Používa sa aj na posúvanie obsahu, ktorý je príliš veľký na to, aby sa zmestil na obrazovku.
- Uštipnutie. Položte dva prsty na obrazovku a pohybujte nimi smerom k sebe alebo od seba. Používa sa v *module Kniha* na zmenšenie alebo zväčšenie textu.

Zdieľanie prípadov medzi iPhoneom a počítačom funguje trochu inak ako medzi dvoma počítačmi, pretože kopírovanie súborov do iPhoneu a z neho si vyžaduje použitie aplikácie iTunes v počítači. V časti *Case module, case sharing (zdieľanie prípadov)* nájdete špeciálnu časť.

Orientácia zariadenia

iPad môžeš držať v dvoch rôznych polohách, v orientácii na šírku a na výšku. Aplikácia *Complete Dynamics* automaticky upraví spôsob zobrazovania informácií podľa toho, ako držíte iPhone.

Všetky obrázky v tejto príručke sú urobené so zariadením iPhone v orientácii na výšku. Urobili sme to jednoducho preto, že takto telefón zvyčajne držíte.

Je na vás, aby ste zistili, ako všetko vyzerá pri zmene polohy, a sami sa rozhodli, čo vám najviac vyhovuje.

Rýchlosť a pamäť

iPad nie je veľký počítač ako skutočný počítač s takmer neobmedzenou rýchlosťou a pamäťou.

Keďže *Complete Dynamics* je veľmi komplexný a rozsiahly program, vo verzii pre iPhone to prináša určité obmedzenia. Ak týmito obmedzeniami rozumiete, nemali by pre vás predstavovať problém.

Stránka *Complete Repertory* obsahuje takmer 250 000 rubrik, v ktorých sa nachádza 2 500 000 záznamov o opravných prostriedkoch! Ak chcete vyhľadať konkrétne informácie v module *Find*, je potrebné všetky tieto informácie porovnať. Aby to bolo efektívnejšie, program sa snaží udržať čo najviac informácií v pamäti. Ak sa informácie nenachádzajú v pamäti, je potrebné ich načítať z databázy.

Pri prvom vyhľadávaní si môžete všimnúť, že vyhľadávanie môže byť pomerne pomalé. Ďalšie vyhľadávanie je však podstatne rýchlejšie, často trvá len niekoľko sekúnd (v závislosti od zložitosti dopytu), pretože rubriky a lieky sú už v pamäti.

Viac ako 1 program

Na iPhonee zvyčajne používate viac ako 1 program. Všetky tieto programy musia byť spustené s využitím obmedzenej pamäte iPhoneu. Ak nie je dostatok pamäte pre všetky programy, iPhone požiada programy o uvoľnenie pamäte. Keď sa tak stane, *Complete Dynamics* uvoľní čo najviac pamäte. V dôsledku toho môže ďalšie vyhľadávanie opäť trvať dlhšie.

Kým pracujete s jedným programom, ostatné programy nerobia nič. Ak je počas tejto doby pamäť príliš obmedzená, iPhone jednoducho ukončí ostatné programy bez upozornenia. Nie je to tak, ako sa to robí na počítačoch, ale takto bol navrhnutý softvér pre iPhone.

Pri ukončovaní programu iPhone uprednostňuje ukončovanie väčších programov. Vo väčšine prípadov to bude *Complete Dynamics*, pretože nejde len o malý herný program.

To znamená, že keď pracujete s iným programom, *Complete Dynamics* sa môže v tichosti ukončiť a pri ďalšom výbere sa musí začať znova.

Aby sa zabránilo neočakávanému zničeniu, *Complete Dynamics* uvoľní čo najviac pamäte pri prepnutí na inú aplikáciu.

Po prepnutí späť sa opäť načítajú informácie, ktoré boli predtým uvoľnené.

Najlepšie je to viditeľné v module *Find* a v module *Reverse Materia Medica*. Tieto moduly sú oveľa rýchlejšie, ak sú všetky texty a lieky už v pamäti.

Stav pamäte sa zobrazuje na paneli nástrojov:



Všetky názvy rubrik a lieky sú v pamäti. Vyhľadávanie bude teraz rýchle. V telefóne sa tento smajlík nezobrazuje, aby sa zachovalo miesto na displeji.



Niektoré podstatné informácie ešte nie sú prečítané. Vyhľadávanie bude musieť chvíľu počkať.



Názvy rubrik sú v pamäti, ale lieky nie. Vyhľadávanie textu bude rýchle. Vyhľadávanie nápravných opatrení môže byť pomalé.



Názvy rubrik sa ešte nečítajú. Vyhľadávanie môže byť pomalé.



IPad je nútený uvoľniť pamäť. Vyhľadávanie môže byť pomalé.
Čítanie informácií bolo zastavené, kliknutím na tlačidlo obnovíte čítanie.

Uvoľňovanie pamäte môžete povoliť a zakázať pomocou nastavenia Predvoľby.

Ukladanie údajov

Keďže program môže byť kedykoľvek v tichosti ukončený iPhoneom, pokúša sa vo vhodných okamihoch uložiť údaje o vašom prípade. Údaje o vašom prípade sa uložia automaticky, keď:

- niekoľko sekúnd nerobíte nič;
- prepnete na inú aplikáciu;
- otvorený prípad je uzavretý.

Tipy pre optimálny výkon

Complete Dynamics bude fungovať najlepšie, ak:

- neprepínajte na iné programy, okrem prípadov, keď ich potrebujete;
- zatvorte všetky aplikácie, ktoré v skutočnosti nepoužívate.

Indexový modul

Otvorenie modulu Index

Prejdite do modulu Index kliknutím na kartu *Index*.

[Predvoľby](#) [Používateľ a licencia](#) [O stránke](#) [Pomoc](#)

Mind	Fever, heat
Vertigo	Perspiration
Head	Skin
Eyes	Generalities
Vision	Boger's general analysis
Ears	Clinical
Hearing	Mirilli's themes
Nose	Psychological themes
Smell	Rx & Associations
Face	Anatomical index
Mouth	Remedies
Taste	Kingdoms & families
Teeth	
Throat	
Neck	
Stomach	
Abdomen	
Rectum	
Stool	
Bladder	
Kidneys	
Urethra	
Urine	
Male	
Female	
Larynx & trachea	
Speech & voice	
Respiration	
Cough	
Expectoration	
Chest	
Heart & circulation	
Blood	
Back	
Extremities	
Sleep	
Dreams	
Chill	



Index

Kniha

Nájsť

Prípad

MM

Používanie modulu Index

Indexový modul poskytuje rýchly prístup k obsahu repertoáru.

Ak chcete vykonať akciu, stačí kliknúť na položku.

Používanie viacerých repertoárov

V prípade, že máte licenciu na ďalšie repertoáre, v indexe kapitol repertoárov sa zobrazí aj názov repertoáru.

Complete Repertory (...)

Po kliknutí na názov repertoáru sa vyberie ďalší repertoár a zobrazia sa jeho kapitoly. Má tiež vyskakovacie menu, v ktorom si môžete vybrať jeden z dostupných repertoárov.

Modul knihy

Otvorenie modulu Kniha

Prejdite do modulu Kniha kliknutím na kartu *Book*.

V nasledujúcom príklade je kniha otvorená na rubrike *Mind; Anxiety; flushes of heat, with*.

ANXIETY

MIND

ANXIETY (cont.)

flushes of heat, with: aesc agar aloe **Ambr** aml-n
Anac androc ang arn ars **Asaf Bar-c Bry CALC** camph
CARB-V CHAM Chin-ar Cimic coff cop croc cupr
cygn-c **DROS** electr glyc-g **Gran** graph **Hep** ign **Ip**
kali-bi lipp lsd **Merc** nat-c op phos **PLAT PULS Ruta**
SEP SPONG sul-i
• Congestion, with (32)
• Anxiety; heat; during; face, of (11)
• Generalities; heat; flushes of (597)

emphysema, in: **CARB-V**
• Chest; emphysema (158)

food, warm, hot, agg.: mag-c
• Anxiety; warmth; agg. (9)
• Warmth; agg. (43)

foot bath, after
• Bathing, washing feet, after (2)
• Bathing, washing; agg.; feet (6)

formication, crawling, with: acon bar-m **CIST** lat-h
Nat-m schis-g verat
• Anxiety (1100)

fingers, of: acon verat
• Extremities; formication, crawling; fingers (89)

fright, fear
after: **Acon** bell both-a **CUPR** gels hir **IGN KALI-BR** lach
lyc merc nat-m op **PLUT-N** rob sac-l samb **SIL VERAT**
• Mirilli's themes; fearful (830)
• pregnancy, in seventh month of: **IGN**
• Anxiety; pregnancy, in (6)
• Pregnancy, in (90)

fear of fright still remaining
• Fright, fear agg., ailments from; fear of fright still
remaining (24)

fullness in abdomen, with: **ARG-N**
• Abdominal complaints, in (108)
• Abdomen; anxiety; with (93)

green stripes, on seeing: **THUJ**

headache, with: **ACON AETH Alum** ambr ant-c ant-t
Argo ARN ARS ars-s-f **Atist** bell benz-ac bov **But-ac**

Index

Kniha

Nájsť

Případ

MM

Lieky a odkazy

V rubrike je uvedený jej text, po ktorom nasledujú položky Lieky a Odkazy.

ABUSIVE, insulting: **ABIES-N** **ACON** acon-f agath-a agki-p **Alco** aloe **AM-C** am-m **ANAC ANDROC** aran-ix arn ars ars-s-f **Astac** atro **AUR** aur-m-n aur-s **BELL** beryl-n **Biti-a** bor bov bufo **Bung-f** bute-j calc-i **CAMPH** canth carc **CAUST** cere-s **CHAM** chin cic **CON** cor-r coriand **CROC** cub culx cupr-ar der **Dulc** elae falco-p **FERR** fic **GALL-AC** gels gink granit-m **Hafn** harp helx-t hema-h **HEP** hist hydr hydr-ac **HYOS** ign iod **Ip KALI-AR** kali-c **KALI-I LAC-C** lac-d lach lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r **LYC LYSS** m-aust mag-c mangi med **MERC MOSCH** nat-c nat-m **Nit-ac NUX-V** ozon **PALL PETR PHYSALA-P PLAT** plb **Raja-s** ran-b rhus-g sac-l **Sanic Sarr SCORP SENEG SEP Sil** spong **Staph STRAM** stront-c **SULPH** syph **TARENT** thlaspi **THUJ** thul-f trich-d **Tritic-v TUB URAN VERAT** verbe-h viol-t vip **Xeno**

- General (1769)
- Answer, answering, answers; offensive (1)
- Contemptuous (119)
- Cursing, swearing, desires (141)
- Insolence, impertinence (51)
- Nipping at everyone (1)
- Quarrelsomeness, scolding (284)
- Rudeness (92)
- Mirilli's themes; offensive (458)
- Psychological themes; aggression (975)

forenoon: ran-b

- Forenoon (118)

evening: am-c am-m

- Evening; agg. (436)

acts, after indecent: bung-f

angry, without being: **Bell** dulc

crying, with: **STRAM**

drunkards, in: hep nux-v **PETR**

- Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (63)

fever, during

- Fever; during (327)

intermittent: **FERR**

- Fever; during (327)

- Fever, heat; intermittent, malarial (360)

Prostriedky sa môžu zobrazovať v 4 stupňoch.

Odstupňovanie sa vyznačuje tým, že sa zobrazuje v rôznych štýloch a farbách.

V tomto príklade sú to:

- 4: **CHAM, LYC, NUX-V.**

- 3: **ABIES-N, ACON, AM-C, ANAC, ANDROC, AUR ...**

- 2: **Alco, Bung-f, Dulc, Ip, Nit-ac, Sarr, Sil, Staph.**

- 1: acon-f, agath-a, agki-p, aloe, am-m ...

Za zoznamom opravných prostriedkov nasledujú odkazy na iné rubriky. V tomto príklade je 10 odkazov.

Jednoduchým kliknutím na odkaz prejdete na rubriku, na ktorú sa odkazuje.

Úplné alebo kompaktné zobrazenie

Skrývanie opravných prostriedkov a odkazov

V kompaktnom zobrazení sa zobrazujú len rubriky s počtom liekov, ktoré obsahujú, pričom sa lieky skryjú, aby sa optimálne využilo dostupné miesto na obrazovke.

Ak chcete skryť alebo zobrazit' všetky lieky a odkazy, dvakrát kliknite na ľubovoľné biele miesto na stránke. Môžete tiež dvakrát kliknúť na štítok rubriky.

ANXIETY (cont.)**flushes of heat, with:** (45)

emphysema, in: (1)

food, warm, hot, agg.: (1)**foot bath, after****formication, crawling, with:** (7)

fingers, of: (2)

fright, fear

after: (19)

• pregnancy, in seventh month of: (1)

fear of fright still remaining

fullness in abdomen, with: (1)**green stripes, on seeing:** (1)**headache, with:** (72)

agg., lying down: (1)

gastric: (1)

menses, before: (1)

heart complaints, in: (261)**heat**

before: (4)

during: (92)

• abdomen, in: (3)

• chest, in

• face, of: (11)

•• during and after: (1)

• flushes of

• hands, of

• head, of

• soup, after: (1)

• sudden: (1)

heaviness, with: (11)

abdomen, in

[Index](#)[Kniha](#)[Nájsť](#)[Prípad](#)[MM](#)**Skrytie čiastkových rubriík**

Je tiež možné skryť všetky vedľajšie rubriky, čím sa zobrazia len rubriky najvyššej úrovne repertoáru. (Možnosť kontextového menu *Len hlavné rubriky*).

Táto možnosť je mimoriadne užitočná pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť štruktúru repertoáru.

ANXIETY	MIND
ANXIETY: (1100) APOLOGIZES frequently: (2) APOPLEXY , after: (43) APPETITE , with diminished: (40) APPLICATIONS APPRECIATION , desires: (109) APPROACH of a person agg.: (89) APPROACHED , aversion of being: (38) ARDENT: (15) ARTISTIC ASCENDING agg.: (11) ASCETIC: (1) ASKING for nothing, requesting no favors: (1) ASKS ASTONISHED: (7) ATTACHED , very: (89) ATTACK others, desire to: (23) ATTENDED to, desires to be: (9) ATTENTION ATTRACTION , luring sexual, women: (2) AUDACITY: (92) AUTHORITY , refusal to accept some one's: (52) AUTISM , mutinism: (38) AUTOMATIC behavior, acts: (28) AVARICE: (54) AVERSION AWARENESS heightened AWKWARDNESS: (150) BARGAINING: (5) BARKING: (17) BATHING , washing BED	



Index

Kniha

Nájsť

Případ

MM

Lahko sa môžete vrátiť k zobrazeniu všetkých rubriík. (Možnosť kontextového menu *Len hlavné rubriky*).
 Kliknutím na rubriku sa môžete vrátiť do normálneho zobrazenia repertoáru.

Poradie triedenia nápravných opatrení

Predvolené poradie, v akom sú lieky vytlačené, je abecedné.

Lieky môžete zobraziť v poradí podľa dôležitosti. (Možnosť kontextového menu *Lieky / Zoradiť podľa dôležitosti*).

Abecedné poradie triedenia

Zoradené podľa dôležitosti

ABUSIVE, insulting: **ABIES-N** **ACON** acon-f agath-a agki-p **Alco** aloe **AM-C** am-m **ANAC** **ANDROC** aran-ix arn ars ars-s-f **Astac** atro **AUR** aur-m-n aur-s **BELL** beryl-n **Biti-a** bor bov bufo **Bung-f** bute-j calc-i **CAMPH** canth carc **CAUST** cere-s **CHAM** chin cic **CON** cor-r coriand **CROC** cub culx cupr-ar der **Dulc** elae falco-p **FERR** fic **GALL-AC** gels gink granit-m **Hafn** harp helx-t hema-h **HEP** hist hydr hydr-ac **HYOS** ign iod **Ip** **KALI-AR** kali-c **KALI-I** **LAC-C** lac-d lach lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r **LYC** **LYSS** m-aust mag-c mangi med **MERC** **MOSCH** nat-c nat-m **Nit-ac** **NUX-V** ozon **PALL** **PETR** **PHYSALA-P** **PLAT** plb **Raja-s** ran-b rhus-g sac-l **Sanic** **Sarr** **SCORP** **SENEG** **SEP** **Sil** spong **Staph** **STRAM** stront-c **SULPH** syph **TARENT** thlaspi **THUJ** thul-f trich-d **Tritic-v** **TUB** **URAN** **VERAT** verbe-h viol-t vip **Xeno**

- General (1769)
- Answer, answering, answers; offensive (1)
- Contemptuous (119)
- Cursing, swearing, desires (141)
- Insolence, impertinence (51)
- Nipping at everyone (1)
- Quarrelsomeness, scolding (284)
- Rudeness (92)
- Mirilli's themes; offensive (458)
- Psychological themes; aggression (975)

forenoon: ran-b

- Forenoon (118)

evening: am-c am-m

- Evening; agg. (436)

acts, after indecent: bung-f

angry, without being: **Bell** dulc

crying, with: **STRAM**

drunkards, in: hep nux-v **PETR**

- Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (63)

fever, during

- Fever; during (327)

intermittent: **FERR**

- Fever; during (327)
- Fever, heat; intermittent, malarial (360)

ABUSIVE, insulting: **NUX-V** **VERAT** **CHAM** **LYC**

MOSCH **THUJ** **CON** **HYOS** **CAMPH** **GALL-AC** **MERC** **SCORP** **CROC** **KALI-I** **PLAT** **STRAM** **URAN** **AUR** **LYSS** **PETR** **AM-C** **HEP** **BELL** **ABIES-N** **ANAC** **ANDROC** **CAUST** **IGN** **KALI-AR** **PALL** **SULPH** **ACON** **FERR** **LAC-C** **PHYSALA-P** **SENEG** **SEP** **TARENT** **TUB** **Nit-ac** **Ip** **Bung-f** **Dulc** **Astac** **Sanic** **Alco** **Sarr** **Sil** **Staph** **Biti-a** **Hafn** **Raja-s** **Tritic-v** **Xeno** am-m lava-e cor-r lach hydr agath-a aur-m-n bov calc-i carc falco-p gels helx-t nat-c nat-m ran-b acon-f agki-p aloe aran-ix arn ars ars-s-f atro aur-s beryl-n bor bufo bute-j canth cere-s chin cic coriand cub culx cupr-ar der elae fic gink granit-m harp hema-h hist hydr-ac iod kali-c lac-d lava-f lava-h lil-t loxo-r m-aust mag-c mangi med ozon plb rhus-g sac-l spong stront-c syph thlaspi thul-f trich-d verbe-h viol-t vip

- General (1769)
- Answer, answering, answers; offensive (1)
- Contemptuous (119)
- Cursing, swearing, desires (141)
- Insolence, impertinence (51)
- Nipping at everyone (1)
- Quarrelsomeness, scolding (284)
- Rudeness (92)
- Mirilli's themes; offensive (458)
- Psychological themes; aggression (975)

forenoon: ran-b

- Forenoon (118)

evening: am-c am-m

- Evening; agg. (436)

acts, after indecent: bung-f

angry, without being: **Bell** dulc

crying, with: **STRAM**

drunkards, in: **PETR** hep nux-v

- Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (63)

fever, during

- Fever; during (327)

intermittent: **FERR**

- Fever; during (327)
- Fever, heat; intermittent, malarial (360)

Obmedzenie zobrazovaných informácií

Okrem prepínania medzi úplným a kompaktným zobrazením je možné obmedziť počet zobrazených opravných prostriedkov. Tým sa zobrazené lieky obmedzia len na tie, ktoré majú aspoň danú gradáciu 1, 2, 3 alebo 4. (Možnosť kontextového menu *Lieky / Všetky triedy*, možnosť kontextového menu *Lieky / Trieda 2+*, možnosť kontextového menu *Lieky / Trieda 3+*, možnosť kontextového menu *Lieky / Trieda 4*).

Príklad, opäť s rubrikou *Mind; Abusive*:

ABUSIVE	MIND
ABUSIVE, insulting: <i>CHAM LYC NUX-V VERAT</i> (+120)	
<ul style="list-style-type: none"> • General (538) • Answer, answering, answers; offensive • Contemptuous (5) • Cursing, swearing, desires (7) • Insolence, impertinence (3) • Nipping at everyone • Quarrelsomeness, scolding (21) • Rudeness (4) • Mirilli's themes; offensive (46) • Psychological themes; aggression (115) 	
forenoon: (+1)	
<ul style="list-style-type: none"> • Forenoon (2) 	
evening: (+2)	
<ul style="list-style-type: none"> • Evening; agg. (68) 	
acts, after indecent: (+1)	
angry, without being: (+2)	
crying, with: (+1)	
drunkards, in: (+3)	
<ul style="list-style-type: none"> • Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (9) 	
fever, during	
<ul style="list-style-type: none"> • Fever; during (69) 	
intermittent: (+1)	
<ul style="list-style-type: none"> • Fever; during (69) • Fever, heat; intermittent, malarial (59) 	
typhoid: (+1)	
<ul style="list-style-type: none"> • Fever, heat; continued, typhoid (51) 	
irritability, with: (+3)	
<ul style="list-style-type: none"> • Irritability (155) 	
jealousy, out of: (+3)	
<ul style="list-style-type: none"> • Jealousy (7) 	
menses, before: (+2)	
<ul style="list-style-type: none"> • Menses; before (20) 	
molestation, after: (+1)	
mamma molested: (+1)	
opposition, from: (+3)	
<ul style="list-style-type: none"> • Mirilli's themes; offensive (46) 	

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON AM-C ANAC
 ANDROC AUR BELL CAMPH CAUST **CHAM** CON
 CROC FERR GALL-AC HEP HYOS IGN KALI-AR
 KALI-I LAC-C **LYC** LYSS MERC MOSCH **NUX-V** PALL
 PETR PHYSALA-P PLAT SCORP SENEG SEP STRAM
 SULPH TARENT THUJ TUB URAN **VERAT** (+85)

- General (980)
- Answer, answering, answers; offensive
- Contemptuous (20)
- Cursing, swearing, desires (35)
- Insolence, impertinence (19)
- Nipping at everyone
- Quarrelsomeness, scolding (67)
- Rudeness (17)
- Mirilli's themes; offensive (122)
- Psychological themes; aggression (336)

forenoon: (+1)

- Forenoon (21)

evening: (+2)

- Evening; agg. (146)

acts, after indecent: (+1)

angry, without being: (+2)

crying, with: **STRAM**

drunkards, in: **PETR** (+2)

- Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (20)

fever, during

- Fever; during (146)

intermittent: **FERR**

- Fever; during (146)
- Fever, heat; intermittent, malarial (159)

typhoid: (+1)

- Fever, heat; continued, typhoid (124)

irritability, with: (+3)

- Irritability (361)

jealousy, out of: **NUX-V** (+2)

- Jealousy (35)

menses, before: **CHAM** (+1)

- Menses; before (69)

molestation, after: (+1)

ABUSIVE	MIND
ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON <i>Alco</i> AM-C ANAC ANDROC <i>Astac</i> AUR BELL <i>Biti-a Bung-f</i> CAMPH CAUST <i>CHAM</i> CON CROC <i>Dulc</i> FERR GALL-AC <i>Hafn</i> HEP HYOS IGN <i>Ip</i> KALI-AR KALI-I LAC-C <i>LYC</i> LYSS MERC MOSCH <i>Nit-ac NUX-V</i> PALL PETR PHYSALA-P PLAT <i>Raja-s Sanic Sarr</i> SCORP SENEG SEP <i>Sil Staph</i> STRAM SULPH TARENT THUJ <i>Tritic-v</i> TUB URAN <i>VERAT Xeno</i> (+70)	
<ul style="list-style-type: none"> • General (1251) • Answer, answering, answers; offensive • Contemptuous (26) • Cursing, swearing, desires (50) • Insolence, impertinence (24) • Nipping at everyone • Quarrelsomeness, scolding (103) • Rudeness (26) • Mirilli's themes; offensive (200) • Psychological themes; aggression (481) 	
forenoon: (+1) <ul style="list-style-type: none"> • Forenoon (30) 	
evening: (+2) <ul style="list-style-type: none"> • Evening; agg. (214) 	
acts, after indecent: (+1)	
angry, without being: <i>Bell</i> (+1)	
crying, with: STRAM	
drunkards, in: PETR (+2) <ul style="list-style-type: none"> • Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (25) 	
fever, during <ul style="list-style-type: none"> • Fever; during (185) 	
intermittent: FERR <ul style="list-style-type: none"> • Fever; during (185) • Fever, heat; intermittent, malarial (203) 	
typhoid: (+1) <ul style="list-style-type: none"> • Fever, heat; continued, typhoid (145) 	
irritability, with: <i>Ip</i> (+2) <ul style="list-style-type: none"> • Irritability (488) 	
jealousy, out of: NUX-V (+2) <ul style="list-style-type: none"> • Jealousy (50) 	
menses, before: CHAM (+1)	

Zobrazené sú všetky lieky.

ABUSIVE	MIND
ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON acon-f agath-a agki-p Alco aloe AM-C am-m ANAC ANDROC aran-ix arn ars ars-s-f Astac atro AUR aur-m-n aur-s BELL beryl-n Biti-a bor bov bufo Bung-f bute-j calc-i CAMPH canth carc CAUST cere-s CHAM chin cic CON cor-r coriand CROC cub culx cupr-ar der Dulc elae falco-p FERR fic GALL-AC gels gink granit-m Hafn harp helx-t hema-h HEP hist hydr hydr-ac HYOS IGN iod Ip KALI-AR kali-c KALI-I LAC-C lac-d lach lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r LYC LYSS m-aust mag-c mangi med MERC MOSCH nat-c nat-m Nit-ac NUX-V ozon PALL PETR PHYSALA-P PLAT plb Raja-s ran-b rhus-g sac-l Sanic Sarr SCORP SENEG SEP Sil spong Staph STRAM stront-c SULPH syph TARENT thlaspi THUJ thul-f trich-d Tritic-v TUB URAN VERAT verbe-h viol-t vip Xeno <ul style="list-style-type: none"> • General (1769) • Answer, answering, answers; offensive (1) • Contemptuous (119) • Cursing, swearing, desires (141) • Insolence, impertinence (51) • Nipping at everyone (1) • Quarrelsomeness, scolding (284) • Rudeness (92) • Mirilli's themes; offensive (458) • Psychological themes; aggression (975) 	
forenoon: ran-b <ul style="list-style-type: none"> • Forenoon (118) 	
evening: am-c am-m <ul style="list-style-type: none"> • Evening; agg. (436) 	
acts, after indecent: bung-f	
angry, without being: Bell dulc	
crying, with: STRAM	
drunkards, in: hep nux-v PETR <ul style="list-style-type: none"> • Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (63) 	
fever, during <ul style="list-style-type: none"> • Fever; during (327) 	
intermittent: FERR <ul style="list-style-type: none"> • Fever; during (327) • Fever, heat; intermittent, malarial (360) 	

Veľkosť textu


Text je možné zmenšiť alebo zväčšiť. (Možnosť kontextového menu *Menší text*, možnosť kontextového menu *Štandardná veľkosť textu*, možnosť kontextového menu *Väčší text*).

Na iPhonee môžete text zmenšiť alebo zväčšiť gestom zoštipnutia. Ak chcete zmeniť veľkosť textu, položte dva prsty na obrazovku a pohybujte nimi od seba alebo k sebe.

Kopírovanie rubriky do schránky

Niekedy je užitočné skopírovať rubriku do schránky a vložiť ju do inej aplikácie, napríklad do textového editora. (Možnosť kontextového menu *Kopírovať* / *Skopírujte názov rubriky*, možnosť kontextového menu *Kopírovať* / *Kopírovanie rubriky a liekov*).

Výber jazyka

V závislosti od vydania programu a licencie môže byť k dispozícii niekoľko jazykových možností pre *Complete Repertory*. Dostupné jazykové možnosti môžete vybrať z ponuky alebo pomocou lišty s tlačidlami. (Možnosť kontextového menu *Jazyk* / *Kniha Angličtina*). (Tlačidlo vlajky, )

V edícii *Practitioner*, je možné vybrať druhý jazyk (možnosti závisia od vašej licencie) a zobrazíť text rubriky v inom jazyku. Napríklad francúzština: (Možnosť kontextového menu *Jazyk* / *Kniha navyše Francúzština*).

ABUSIVE, insulting: **ABIES-N** **ACON** acon-f agath-a agki-p **Alco** aloe **AM-C** am-m **ANAC** **ANDROC** aran-ix arn ars ars-s-f **Astac** atro **AUR** aur-m-n aur-s **BELL** beryl-n **Biti-a** bor bov bufo **Bung-f** bute-j calc-i **CAMPH** canth carc **CAUST** cere-s **CHAM** chin cic **CON** cor-r coriand **CROC** cub culx cupr-ar der **Dulc** elae falco-p **FERR** fic **GALL-AC** gels gink granit-m **Hafn** harp helx-t hema-h **HEP** hist hydr hydr-ac **HYOS** **IGN** iod **Ip** **KALI-AR** kali-c **KALI-I** **LAC-C** lac-d lach lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r **LYC** **LYSS** m-aust mag-c mangi med **MERC** **MOSCH** nat-c nat-m **Nit-ac** **NUX-V** ozon **PALL** **PETR** **PHYSALA-P** **PLAT** plb **Raja-s** ran-b rhus-g sac-l **Sanic** **Sarr** **SCORP** **SENEG** **SEP** **Sil** spong **Staph** **STRAM** stront-c **SULPH** syph **TARENT** thlaspi **THUJ** thul-f trich-d **Tritic-v** **TUB** **URAN** **VERAT** verbe-h viol-t vip **Xeno**

- General (1769)
- Answer, answering, answers; offensive (1)
- Contemptuous (119)
- Cursing, swearing, desires (141)
- Insolence, impertinence (51)
- Nipping at everyone (1)
- Quarrelsomeness, scolding (284)
- Rudeness (92)
- Mirilli's themes; offensive (458)
- Psychological themes; aggression (975)

forenoon: ran-b

- Forenoon (118)

evening: am-c am-m

- Evening; agg. (436)

acts, after indecent: bung-f

angry, without being: **Bell** dulc

crying, with: **STRAM**

drunkards, in: hep nux-v **PETR**

- Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (63)

fever, during

- Fever; during (327)

intermittent: **FERR**

- Fever; during (327)
- Fever, heat; intermittent, malarial (360)



Index

Book

Find

Case

MM

Obľúbené rubriky

Niektoré rubriky môžete považovať za dôležité a iné za menej dôležité. Platí to najmä vtedy, keď na vyhľadávanie rubriek použijete modul *Find*.

Ak chcete klásť väčší dôraz na rubriky, ktoré sú pre vás dôležité, môžete ich označiť ako obľúbené.

Ak chcete rubriku označiť ako obľúbenú, kliknite na rubriku a potom ju označte.

Každá rubrika, ktorá je označená ako obľúbená, bude podčiarknutá.

Keď označíte niektorý z rubriek ako obľúbený, v module *Find* sa objaví ďalšie pole, ktoré vám umožní obmedziť vyhľadávanie len na obľúbené rubriky.

Štandardné repertoárové filtre modulu Kniha

Za normálnych okolností sa v module *Book* zobrazuje kompletný obsah stránky *Complete Repertory*.

K dispozícii je niekoľko štandardných filtrov. Môžete ich vybrať prostredníctvom panela ponúk alebo vyskakovacích ponúk na okrajoch stránky. (Možnosť kontextového menu *Výber kníh / Kompletné*).

Kompletné	Zobrazenie celého repertoáru bez filtrovania.
Klasické	Zobrazte len rubriky a lieky od klasických autorov. Tým sa repertoár obmedzuje na rubriky, ktoré sa vyskytujú v hlavných klasických repertoároch, a na lieky z kníh spred roku 1930.

<i>Spôľahliví autori</i>	Zobrazte len autorov, ktorí sú podľa Georgea Vithoulkasa považovaní za najspoľahlivejších.
<i>Rubriky spoločnosti Kent</i>	Repertoár je obmedzený na rubriky odvodené z Kentovho repertoáru.
<i>Rubriky z Allenovej terapeutickrej vreckovej knihy</i>	Repertoár je obmedzený na rubriky odvodené z Allenovej terapeutickrej vreckovej knihy.

Ak je vybraný filter, jeho názov sa zobrazí v záhlaví rozloženia repertoárovej knihy. Takto môžete ľahko zistiť, ktorú možnosť repertoáru používate.

Poznámka: Filtre repertoáru sa uplatňujú len na obsah *Complete Repertory*.

Ak vaša licencia podporuje používanie ďalších repertoárov alebo ak ste sami vytvorili ďalší repertoárový materiál, filtre sa na tento materiál nevzťahujú.

Nájst' modul

Otvorenie modulu Nájst'

Prejdite do modulu Nájst' kliknutím na kartu *Nájst'*.



Nájst'

four pm lyc. 2



Nájdene 71 rubriky

MIND

ANXIETY; afternoon; agg.; four pm.: **LYC** (+8)

CONSCIENTIOUS about trifles; four pm. -
eight pm.: **LYC**

WEeping, tearful mood; afternoon; agg.; four
pm.: **LYC** (+2)

WEeping, tearful mood; afternoon; agg.; four
pm.; eight pm., until: **LYC** (+1)

HEAD

PAIN, headache; afternoon; agg.; four pm.:
LYC (+54)

PAIN, headache; afternoon; agg.; four pm.;
eight pm., until: **LYC** (+4)

PAIN, headache; vertex; afternoon; four pm. -
eight pm.: **LYC**

PAIN, headache; pressing; vertex; afternoon;
four pm. - eight pm.: **LYC**

EYES

PAIN; afternoon; four pm.: **LYC** (+7)

PAIN; afternoon; four pm.; eight pm., until: **LYC**

VISION

AFTERNOON; three pm. or four pm.: **LYC** (+10)

LOSS of, blindness; afternoon; four pm.: **LYC**

HEARING

NOISES; afternoon; four pm.: **LYC** (+2)

REVERBERATING, echoes and reechoes; four
pm.: **LYC**

ROARING; afternoon; four pm.: **LYC**

NOSE



Index


Kniha

Nájst'

Případ

MM

Nájst' polia

Na malých obrazovkách sa vyhľadávacie polia spočiatku nezobrazujú, aby sa ušetrilo miesto. Polia môžete zobrazit' stlačením tlačidla  za poľom Find. Polia môžete z obrazovky odstrániť stlačením tlačidla *Hide*.

Text

Opravné prostriedky

Min. trieda

Min. veľkosť rubriky

Maximálna veľkosť rubriky

Úplné príznaky ☐

Kapitoly

Typy rubriík


Jasné Skryť

Text

Zadajte fragmenty textu, ktoré chcete vyhľadať:

xyz	Akéoľvek slovo začínajúce na xyz.
=xyz	Slovo musí byť presne xyz.
*xyz	Slovo obsahuje xyz kdekoľvek v texte.
"abc xyz"	Kombinácia textov abc, za ktorou nasleduje xyz
abc + def	Musia sa vyskytovať oba texty abc A def.
abc+def	Rovnako ako vyššie, medzery sú nepovinné.
abc def	Rovnako ako vyššie, AND je predvolené nastavenie. (A + sa automaticky vloží pred def.)
-abc	Text abc sa v texte NESMIE vyskytovať. Túto možnosť možno kombinovať s =, * a "", ako je uvedené vyššie. Príklady: -ráno -*ation -"z postele"
abc / def	Musí sa vyskytnúť buď abc ALEBO def (medzery nie sú povinné).
Možné sú aj ich kombinácie. Príklady:	
štyri/osem hodín večer	(štyri ALEBO osem), A pm.
pm štyri/osem	Rovnako ako vyššie, poradie nie je dôležité.
"vstávanie z postele" ráno	Sekvencia vstávanie z postele, A ráno.
strach / úzkosť dav/ľudia	(strach ALEBO úzkosť) A (dav ALEBO ľudia). (A + sa automaticky vloží pred dav)

Lieky

Zadajte skratky liekov, ktoré chcete vyhľadať. Stlačením tlačidla , ktoré sa nachádza v blízkosti pravej strany poľa, sa zobrazí vyhľadávacie okno, ktoré vám umožní interaktívne vybrať liek v prípade, že skratku nepoznate naspamäť.

sep	Náprava sep
sep.	Rovnako ako vyššie, bodkový zápis sa môže použiť, ale tu nie je potrebný (je potrebný v poli Find).
-sep	Náprava sep sa v rubrike NESMIE vyskytovať.
sep / nat-m	Buď náprava sep ALEBO nat-m
sep nat-m	Rovnako ako vyššie, predvolené je OR. (A / sa automaticky vloží pred nat-m)
sep/staph+nat-m/mag-m	(sep ALEBO staph) A (nat-m ALEBO mag-m)
sep. staph. + nat-m. mag-m.	To isté ako vyššie. (A / sa automaticky vkladá pred staph a pred mag-m)

Min.
stupeň

Zadajte minimálne odstupňovanie nápravných opatrení (1 až 4).

Min.
veľkosť
rubriky

Zadajte minimálny počet opravných prostriedkov v rubrike.

Maximálna veľkosť rubriky Zadajte maximálny počet opravných prostriedkov v rubrike.

Kompletné príznaky Obmedzte vyhľadávanie na úplné príznaky.

Úplný symptóm je príznak, ktorý pozostáva z miesta, pocitu a modalít alebo sprievodných znakov. Táto možnosť sa používa výlučne pri vyhľadávaní na stránke *Complete Repertory*. Ostatné repertoáre tieto informácie spravidla neobsahujú.

Typy rubrik Stlačením tlačidla **Q**, ktoré sa nachádza v blízkosti pravej strany poľa, sa zobrazí okno umožňujúce interaktívny výber typov rubrik, ako sú Times, Sides, Location atď. V prípade, že vaša licencia podporuje používanie ďalších repertoárov, upozorňujeme, že ďalšie repertoáre často nemajú označené rubriky ako Times, Sides, Location atď. Každý výber, ktorý tu vykonáte, možno použiť len na repertoáre, ktoré boli na to riadne pripravené, ako napríklad *Complete Repertory*.

Kapitoly Stlačením tlačidla **Q**, ktoré sa nachádza v blízkosti pravej strany poľa, sa zobrazí okno umožňujúce interaktívny výber kapitol.

Vyhľadávanie sa spustí automaticky po zadaní kritérií vyhľadávania, nie je potrebné stlačiť žiadne tlačidlo.

Všimnite si, že pre text je predvolená hodnota pre viacnásobné fragmenty AND, ale pre lieky je to OR.

Dôvodom je, že pri zadávaní viacerých textových fragmentov pravdepodobne zamýšľate obmedziť výsledok vyhľadávania, zatiaľ čo pri viacerých liekoch môžete chcieť vykonať diferenciálnu diagnostiku.

Vyhľadávanie výsledkov

V zariadení iPhone sa vyhľadávanie spustí hneď po dokončení písania do poľa. Pri písaní pomocou klávesnice na obrazovke ju musíte najprv skryť. Ak používate externú klávesnicu, stlačte tlačidlo Enter.

Úroveň podrobnosti závisí od toho, čo sa hľadalo. Ak sa hľadali lieky, vybrané lieky sa zahrnú do výsledku vyhľadávania. Ak sa hľadal len text, nezobrazia sa žiadne lieky.

Skrátka, výsledok vyhľadávania sa zameriava na to, čo ste požadovali, a nie na podrobnosti, ktoré sa nepožadovali.

Oblasť výsledkov vyhľadávania má mnoho podobností s modulom *Book*.

Navigácia sa vykonáva pomocou rovnakej klávesnice, myši, panela tlačidiel alebo funkcií ponuky.

Rozloženie sa tiež automaticky prispôsobí veľkosti okna.

V module *Find* je zobrazovanie opravných prostriedkov obmedzené na trochu menšie rubriky. Rubriky s mnohými liekmi zobrazujú len počet liekov.

Okrem možností navigácie v module *Book* ponúka výsledok vyhľadávania možnosť prejsť priamo na rubriku v knihe, a to jednoduchým dvojitém kliknutím myšou na rubriku.

Prípadový modul

Otvorenie modulu Case

Prejdite do modulu Prípad kliknutím na kartu *Prípad*.

Pacienti

Kolegovia

Štúdium

Semináre

Iné

Archivované

Filter

Abif, Hiram

Al-Rashidi, Muhamme

Andrews, Sandra - 19

Baker, Charles

Barrett, Elizabeth Jan

Boyle, Susan - 1961 (

Clappin, Charles Bern

Clappin, Edward - 19

Garrod, Rishi - 1955 (

Grinsven, Eduard van

Grinsven, Kyra van - 1

Grinsven, Michel van

Huidekooper, Rolf - 1

Hyper, John

Otvoriť

Nový

Upraviť

Archív

Index

Kniha

Nájsť

Prípad

MM

Modul Prípad vám umožňuje vytvárať a organizovať súbory prípadov pacientov, registrovať recepty, ktoré ste vystavili, a vytvárať a organizovať analýzy.

Práca s modulom Case je ako práca so skutočnými spismi.

Prípady sú usporiadané do skupín, podobne ako by ste v reálnom živote usporiadali svoje spisy do rôznych kartoték alebo zásuviek. Najprv si vyberte skupinu alebo skupiny, v ktorých chcete pracovať.

Prípady vo vybraných skupinách sa zobrazia v zozname, pričom sa zobrazí len súhrn informácií o pacientovi: Meno a rok narodenia. Prípady možno filtrovať zadáním jednej alebo viacerých častí názvu pacienta do poľa *Filter* pod zoznamom.

Po výbere prípadu v zozname sa súbor prípadu zobrazí na pravej strane obrazovky.

Ďalším krokom by malo byť otvorenie spisu, ale najprv sa budeme venovať niekoľkým podrobnostiam o tejto časti správy prípadov.

Výber skupín a vytváranie vlastných skupín

Výber skupín si môžete predstaviť ako druh zásuvkovej skrinky.

Pacienti
Kolegovia
Štúdium
Semináre
Iné
Archivované

Na tomto obrázku je zásuvka *Patients* otvorená.

Štandardné skupiny sú:

<i>Pacienti</i>	Všetky súbory prípadov, ktoré sú v opise prípadu označené ako <i>Patient</i> (viac informácií nižšie) a ktorých ste autorom.
<i>Kolegovia</i>	Všetky spisy, ktoré sú v opise prípadu označené ako <i>Patient</i> a ktorých autorom je niekto iný.
<i>Štúdia</i>	Všetky spisy, ktoré sú označené ako <i>Štúdia</i> . Ide o prípady, ktoré sa priamo netýkajú žiadneho z vašich pacientov, ale slúžia len na vaše osobné štúdium.
<i>Semináre</i>	Všetky spisy, ktoré sú označené ako <i>Seminár</i> . V tejto skupine vytvárate prípady pre všetky prípady, ktoré sa vyskytnú na seminároch a školeniach.
<i>Iné</i>	Všetky prípady, ktoré nepatria do žiadnej inej skupiny.
<i>Archivované</i>	Všetky prípady, ktoré ste archivovali. Archivované prípady sa už neobjavujú v žiadnej z ostatných skupín.

Môžete otvoriť jednu alebo viac zásuviek súčasne. Kliknutím na zásuvku ju otvoríte alebo zatvoríte. Dvojitým kliknutím na jednu zo zásuviek ju otvoríte a zároveň zatvoríte všetky ostatné.

Otvoria sa dve zásuvky.

V zozname s prípadmi sa zobrazia všetky prípady, ktoré sú označené ako "Study" (Štúdium) alebo ako "Seminars" (Semináre).

Pacienti
Kolegovia
Štúdium
Semináre
Iné
Archivované

Samozrejme, že tieto skupiny nezodpovedajú vašim osobným želaniam. Vytváranie nových zásuviek s vlastnými skupinami je jednoduché. Pri úprave informácií o prípade môžete určiť, v ktorých skupinách má byť prípad zaradený. Môžete použiť tri štandardné skupiny "Pacient", "Štúdiá" a "Seminár", ale môžete zadať aj vlastné názvy skupín. Nové zásuvky sa do zoznamu pridávajú automaticky:

Pacienti
Kolegovia
Štúdium
Semináre
Family
Teaching
Workgroup
Iné
Archivované

Zásuvky *Rodina*, *Vyučovanie* a *Pracovná skupina* sa do zoznamu pridávajú automaticky, pretože v niektorých prípadoch boli tieto názvy skupín použité v informáciách o prípade.

Výber správneho spisu

V zozname sa zobrazia všetky prípady, ktoré zodpovedajú vybranej skupine alebo skupinám. Ak do poľa *Filter* vyplníte nejaký text, zoznam sa obmedzí na tie prípady, ktoré zodpovedajú textu filtra.

Príklad použitia filtra:

Pacienti
Kolegovia
Štúdium
Semináre
Iné
Archivované

Filter

Abif, Hiram
Al-Rashidi, Muhammed...
Andrews, Sandra - 197...
Baker, Charles
Barrett, Elizabeth Jane...
Boyle, Susan - 1961 (61)
Clappin, Charles Bernar...
Clappin, Edward - 1960...
Garrod, Rishi - 1955 (68)
Grinsven, Eduard van - ...
Grinsven, Kyra van - 19...
Grinsven, Michel van - ...
Huidekooper, Rolf - 199...
Hyper, John

Pacienti
Kolegovia
Štúdium
Semináre
Iné
Archivované

Filter rolf

Huidekooper, Rolf - 199...
Rolf, Charles - 1972 (51)
Rolf, Saskia - 1973 (50)
Rolf, Victor - 1970 (53)

Pacienti
Kolegovia
Štúdium
Semináre
Iné
Archivované

Filter vic rolf

Rolf, Victor - 1970 (53)

Otvoríť Nový Upraviť Archiv

Otvoríť Nový Upraviť Archiv

Otvoríť Nový Upraviť Archiv

Filter má niekoľko veľmi výkonných možností na výber správneho prípadu. Používa rovnaké kritériá filtrovania ako pole *Find* pre text a

lieky.

V module *Case (Prípady)*, text je meno, ako je uvedený v zozname, a lieky sú všetky lieky, ktoré boli pacientovi predpísané (alebo NEBOLI predpísané).

Podrobnosti nájdete v časti "*Vyhľadávanie*" na stránke.

Príklad: *John* alebo *Joseph*, ktorému bol predpísaný *nux-v*, ale nikdy *sulph*, stačí zadať:

john / joseph nux-v. -sulph.

(Všimnite si bodku za názvom lieku!).

Vytvorenie súboru prípadu

Nový súbor prípadu môžete vytvoriť kliknutím na tlačidlo *New*.

Zobrazí sa dialógové okno, v ktorom môžete zadať informácie o pacientovi, ako aj základné informácie o prípade.

Úprava údajov o prípadoch

V časti *Pacient* môžete vyplniť všetky osobné údaje, ktoré chcete o pacientovi uložiť. Stlačením tlačidla *Photo* nasnímajte fotografiu.

Veľkosť fotografie sa automaticky zmení. Odstráňte existujúcu fotografiu pomocou tlačidla *Vyčistiť*.

Ak rok, mesiac alebo deň narodenia pacienta nie sú známe, jednoducho vyplňte 0.

V prípade, že nie je známy presný deň narodenia, ale pacient uvedie len aktuálny vek, môžete ho zadať do poľa Rok narodenia.

Informácie o prípade

Rodinné meno	<input type="text" value="Barrett"/>
Krstné meno	<input type="text" value="Elizab..."/>
Stredné meno	<input type="text" value="Jane"/>
Iniciály	<input type="text" value="E.J.M."/>
Pohlavie	<input type="text" value="Ženy"/>
Rok narodenia	<input type="text" value="1950"/> <input type="button" value="−"/> <input type="button" value="+"/>
Mesiac narodenia	<input type="text" value="7"/> <input type="button" value="−"/> <input type="button" value="+"/>
Deň narodenia	<input type="text" value="4"/> <input type="button" value="−"/> <input type="button" value="+"/>
Foto	

[Foto](#) [Jasné](#) [Otočiť](#)

[Osobné informácie](#) [Informácie o adrese](#) [Informácie o rodine](#) [Skupiny prípadov](#) [Pozadie prípadu](#)

[Zrušiť](#) [OK](#)

V časti *Case* môžete zadať niektoré základné informácie o prípade, ktoré sa netýkajú samotného pacienta.

V skupine *Case groups* môžete vybrať jednu zo štandardných skupín a/alebo vyplniť vlastné názvy skupín oddelené medzerami alebo bodkočiarkami.

Skupina *Case background* je užitočná, ak tento prípad pochádza zo seminára, časopisu atď. a chcete si zapamätať, odkiaľ prípad pochádza.

Informácie o prípade

Pacient



Štúdia



Seminár



Ostatné skupiny

[Osobné informácie](#) [Informácie o adrese](#) [Informácie o rodine](#) [Skupiny prípadov](#) [Pozadie prípadu](#)

[Zrušiť](#)

[OK](#)

Otvorenie prípadu

Existujúci súbor prípadu môžete otvoriť tak, že ho vyberiete v zozname a potom kliknete na tlačidlo *Open*. Na položku v zozname môžete kliknúť aj dvakrát. Keď vytvoríte nový prípad, automaticky sa otvorí.

Po otvorení súboru prípadu sa zobrazí obsah, ktorý by ste bežne očakávali aj v skutočnom súbore prípadu:

- papier s informáciami o pacientovi,
- formulár s predpismi,
- formulár s prehľadom všetkých analýz v spise,

Príklad:

Informácie pre pacientov

Názov

Barrett, Elizabeth Jane (E.J.M.)

Pohlavie

Žena

Dátum narodenia

4. júla 1950 (72)

Adresa

379 San Vicente blvd
CA 90049 Santa Monica, LA
USA

Tel. domov

310-442-8447

Tel. kancelária

Tel. mobil

E-mail

lisabarret50@gmail.com

Manžel

Bill

Deti

Jane, Peter

2. feb 2008	prn-ac	LM1	
5. nov 2007	cimic	C200	
5. aug 2006	sep	C200	
júl 2005	arn	C30	Repeat until br (...)
apr 2003	dros	C30	

Dostupné analýzy

Dátum	Popis
5. jan 2009	Grief remains, eczema from youth g (...)
2. feb 2008	Grief after death mother
3. nov 2007	
5. aug 2006	

Kniha

Nájsť

Prípad

Analýza


MM

Ak chcete zatvoriť otvorený prípad, kliknite na malú šípku ◀ v ľavom hornom rohu. (Možnosť kontextového menu *Zatvoriť prípad*).

Správa predpisov

Ak chcete pridať nový recept, dvakrát kliknite na prázdny riadok v hornej časti receptov. (Možnosť kontextového menu *Pridať predpis*). Zobrazí sa nové dialógové okno, v ktorom môžete zadať niektoré informácie o predpise:

Predpis

Náprava 
Phosphoricum acidum
Potencia
Reakcie

Pokyny

Poznámky

Rok 2023
Mesiac 3
Deň 3

[Zrušiť](#) [OK](#)

Ak mesiac alebo deň nie sú známe, jednoducho zadajte 0.

Odstráňte predpis tak, že ho vyberiete v zozname a potom Odstrániť predpis. (Možnosť kontextového menu *Vymazať predpis*).

Predpis upravíte dvojitém kliknutím na položku v zozname. (Možnosť kontextového menu *Upraviť predpis*).

Riadenie analýz

Novú analýzu môžete pridať pomocou možnosti v ponuke alebo dvakrát kliknúť na prázdny riadok v hornej časti indexu analýz. (Možnosť kontextového menu *Pridať analýzu*).

Zobrazí sa nové dialógové okno, v ktorom môžete zadať niektoré informácie o analýze:

Analýza

Popis

Diagnóza

Poznámky

Rok	2023	—	+
Mesiac	3	—	+
Deň	3	—	+

Zrušiť OK

Ak mesiac alebo deň nie sú známe, jednoducho zadajte 0.

Analýzu odstránite tak, že ju vyberiete v zozname a potom Odstrániť analýzu. (Možnosť kontextového menu *Vymazať analýzu*).

Analýzu upravíte dvojitém kliknutím na položku v zozname. (Možnosť kontextového menu *Analýza úprav*).

Ak chcete skopírovať analýzu ako základ pre novú analýzu, použite položku Duplikovať analýzu. (Možnosť kontextového menu *Duplicitná analýza*).

Ak chcete analýzu presunúť do iného prípadu, použite možnosť ponuky Presunúť analýzu do prípadu. (Možnosť kontextového menu *Presun analýzy do prípadu...*).

Ak kliknete na jednu z analýz v zozname, táto analýza sa stane analýzou, ktorá sa používa v module *Analysis* (pozri časť *Analysis*).

Tlač

Môžete si vytlačiť svoj prípad alebo jeho časti. (Možnosť kontextového menu *Tlač*).

Tlač prípadu je možná až po jeho otvorení.

V dialógovom okne môžete vybrať, čo chcete vytlačiť:

Možnosti tlače

Co vytlačiť?

Kryt puzdra



Analýzy

Aktuálna analýza

Podrobnosti o analýze



Rubriky a opravné prostriedky



Možnosti tlače

Farba



Vysoké rozlíšenie



Zrušiť

OK

<i>Kryt puzdra</i>	Ak túto možnosť zaškrtnete, prvá strana výťažku bude obsahovať informácie o pacientovi, ako aj prehľad receptov.
<i>Aktuálna analýza</i>	Túto možnosť vyberte, ak chcete vytlačiť iba aktuálne vybranú analýzu s nastaveniami, ktoré sa používajú v module <i>Analysis (Analýza)</i> .
<i>Žiadne analýzy</i>	Túto možnosť vyberte, ak nechcete vytlačiť žiadnu z analýz (len obal prípadu).
<i>Podrobnosti o analýze</i>	Ak zaškrtnete túto možnosť, vytlačia sa informácie, ktoré ste zadali pre každú analýzu (diagnóza, poznámky).
<i>Rubriky a lieky</i>	Ak túto možnosť zaškrtnete, každá tlač analýzy bude obsahovať prehľad všetkých opravných prostriedkov v rubrikách, ktoré sa v analýze používajú. Upozorňujeme, že z dôvodu obmedzenia autorských práv bude vytlačených najviac 20 rubrik so všetkými opravnými prostriedkami. Ak vytlačíte viac ako 20 rubrik, rubriky s najväčším počtom opravných prostriedkov nebudú uvedené.
<i>Farba</i>	Tlačte farebne. Ak nie je začiarknuté, tlač je optimalizovaná pre čiernobiele tlačiarne.
<i>Zápis do súboru HTML</i>	Túto možnosť vyberte, ak chcete zapisovať do súboru HTML. Tento formát je vhodný, ak chcete časti výstupu kopírovať do iných dokumentov.

Tlač prehľadu viacerých prípadov

Ak ste prípad neotvorili, môžete vytlačiť prehľad viacerých prípadov. (Možnosť kontextového menu *Tlač*).


To môže byť praktické napríklad vtedy, ak chcete vytvoriť zoznam pre kolegu, ktorý monitoruje vašich pacientov. Potom by ste mohli vytvoriť zoznam s menami a dátumami narodenia pacientov, ktorých ste navštívili za posledných 6 mesiacov, so zoznamom receptov na lieky.

Možnosti v dialógovom okne tlače si nevyžadujú ďalšie vysvetlenie.

Ochrana heslom

Informácie o vašom pacientovi môžu byť chránené pred neželaným prístupom iných osôb, aj keď ste mimo svojho počítača.

Na tento účel môžete nastaviť heslo.

Ak bolo nastavené heslo, v module *Case* sa zobrazí nové tlačidlo .

Po stlačení tohto tlačidla sa modul kufra okamžite uzamkne a na jeho otvorenie je potrebné zadať heslo.

Informácie o prípade je možné automaticky uzamknúť aj po určitom čase, keď ste program nepoužívali.

Čas pred automatickým uzamknutím môžete nakonfigurovať sami v nastaveniach *Preferences*.

Ak nastavíte čas na 0 minút, automatické uzamknutie sa nevykoná.

Pri nastavovaní hesla buďte veľmi opatrní. Okrem vás nikto iný vaše heslo nepozná. Ak zabudnete heslo, je to ako keby ste stratili kľúče od domu - už nemáte prístup.

Archivácia a vymazávanie

Archivácia prípadov

Ak už nechcete, aby sa prípad zobrazoval v zozname vašich prípadov, môžete ho archivovať.

Po archivácii prípadu sa tento zobrazí v skupine *Archivované*.

Aj keď je prípad archivovaný, môžete ho otvoriť. Ak v prípade vykonáte akékoľvek zmeny, automaticky sa odstráni zo skupiny *Archivované* a zaradí sa späť medzi ostatné aktívne prípady.

Môžete archivovať viacero starších prípadov. (Možnosť kontextového menu *Archivácia starých prípadov*).

V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, môžete zadať počet mesiacov. V zozname sa zobrazia všetky prípady, ktoré neboli upravované počas daného počtu mesiacov. Ďalej môžete archivovať všetky prípady, ktoré sú vybrané v zozname.

Odstránenie súboru prípadu

Ak si už nechcete ponechať súbor prípadu, môžete ho vymazať.

Prípad je možné vymazať až po jeho archivácii.

Je tiež možné, aby sa staršie archivované prípady automaticky vymazali. Táto možnosť je k dispozícii v nastaveniach *Preferences*. V predvolenom nastavení sa archivované prípady automaticky neodstraňujú.

Automatické zálohovanie

Ak ste neúmyselne vymazali súbor prípadu, môžete ho obnoviť zo zálohy.

Zálohovanie sa vykonáva automaticky.

- Posledný mesiac každý deň.
- Každý mesiac za posledný rok.
- Po jednom roku sa záloha odstráni natrvalo.
- Upozorňujeme, že zálohy sa ukladajú lokálne v počítači.

Cloudový server

Úvod

V prípade, že pre svoju prax používate viac ako jeden počítač, možno budete chcieť, aby sa informácie o vašich prípadoch synchronizovali medzi nimi.

Takto budete mať vždy k dispozícii aktuálne informácie o prípadoch, nech pracujete kdekoľvek. Aj keď ste na cestách a máte telefón alebo tablet.

Náš cloudový server ponúka flexibilný a jednoduchý mechanizmus na automatickú synchronizáciu vašich prípadov.

Na rozdiel od mnohých iných cloudových riešení môžete *Complete Dynamics* používať s internetovým pripojením aj bez neho.

Bez pripojenia na internet sú všetky prípady uložené lokálne v zariadení. Všetky vykonané zmeny sa ukladajú lokálne.

Ak je k dispozícii internetové pripojenie, vaše prípady sa môžu automaticky synchronizovať prostredníctvom cloudového servera.

Ak vykonáte zmeny v prípadoch na rôznych zariadeniach, pričom nie ste pripojení k internetu, nemá to žiadny význam. Keď je k dispozícii pripojenie k serveru Cloud Server, všetky zmeny vykonané v rôznych zariadeniach sa môžu zlúčiť. Aj keď ste pracovali na tom istom prípade.

Čo robí cloudový server?

Cieľom cloudového servera je zachovať rovnaké prípady vo všetkých zariadeniach, ktoré túto službu používajú.

To, čo pridáte do jedného zariadenia, sa pridá aj do ostatných zariadení.

To, čo zmeníte na jednom zariadení, sa zmení aj na ostatných zariadeniach.

To, čo vymažete v jednom zariadení, sa vymaže aj v ostatných zariadeniach.

Archivácia prípadu znamená, že bude archivovaný aj na ostatných zariadeniach.

Výhody používania cloudového servera

- Po automatickej synchronizácii sú vaše prípady aktuálne bez ohľadu na to, aké zariadenie používate.
- Funguje so všetkými zariadeniami, ktoré sú vo vašej licencií.
- Môžete pracovať bez pripojenia na internet.
- Synchronizácia je automatická, keď je k dispozícii internet.
- Vždy máte k dispozícii kópiu svojich prípadov pre prípad, že sa váš počítač vybije.

Pre ktoré zariadenia by som mal používať Cloud Server?

Je to vaša vlastná voľba.

Ak používate jeden počítač, na zabezpečenie kópie vašich prípadov môžete použiť cloudový server. V prípade, že váš počítač zomrie, prípady sa môžu automaticky preniesť do nového počítača.

Ak používate dve alebo viac zariadení, Cloud Server môže aplikovať zmeny vykonané v jednom zariadení na ostatné zariadenia.

Pre každé zariadenie, ktoré používate, sa môžete rozhodnúť, či má používať cloudový server alebo nie. Cloudový server môžete používať napríklad pre počítače doma a v kancelárii, ale nie pre telefón.

Bezpečnosť a ochrana súkromia

Sme si vedomí, že bezpečnosť a ochrana osobných údajov sú mimoriadne dôležité.

Zabezpečenie

Údaje o vašom prípade sú veľmi dobre chránené.

- Prístup k serveru Cloud Server je možný len zo zariadenia, ktoré má platnú licenciu na vaše meno.
- Žiadne iné zariadenie nemá prístup k vašim prípadom.
- Vyžaduje sa ďalšie heslo, ktoré poznáte len vy.
- Pripojenie k serveru je šifrované.

Ochrana osobných údajov

Nie ste povinní používať náš cloudový server. Veľmi dobre chápeme, že možno nechcete, aby boli informácie o vašom pacientovi uložené niekde na vzdialenom počítači.

Je len na vašom rozhodnutí, či budete cloudový server používať, alebo nie.

Plne rešpektujeme súkromie vás a vašich pacientov.

Vaše údaje nebudeme nijakým spôsobom používať ani spracovávať. Cloudový server ju len kopíruje do vašich zariadení a z nich.

Nastavenie cloudového servera

Ak chcete začať používať zariadenie so serverom Cloud Server, musíte ho najprv aktivovať.

Aktivácia sa vykonáva na stránke *Preferences*, v časti *Case*. Tu môžete vybrať možnosť *Use Cloud Server*.

Ak aktivujete cloudový server prvýkrát, automaticky sa zobrazí pokyn na vytvorenie kódu PIN, ktorý chráni údaje o vašom prípade. Tento kód PIN môžete kedykoľvek neskôr zmeniť.

Nezabudnite na kód PIN do cloudu, budete ho potrebovať pri aktivácii ďalšieho zariadenia.

Stav cloudového servera

V hornej časti stránky v module *Case* sa nachádza ikona označujúca stav pripojenia k serveru.

☁ Cloudový server je k dispozícii.

☁ Prebiehajúca komunikácia.

✖ Nie je k dispozícii internetové pripojenie alebo je server dočasne vypnutý.
ak sa nezobrazuje žiadna ikona, cloudový server ešte nie je nakonfigurovaný.

Po kliknutí na ikonu sa synchronizácia vykoná okamžite.

Obmedzenia

Cieľom cloudového servera je aplikovať všetky zmeny vykonané v jednom zariadení na všetky ostatné zariadenia. Nie vždy je to však možné.

Pomôže vám to pochopiť, aké sú obmedzenia.

Najmä pri práci v režime off-line sa môže stať, že zmeny v tom istom prípade sa vykonajú na rôznych zariadeniach skôr, ako sa obnoví pripojenie ku cloudovému serveru. Za normálnych okolností by to zriedkavo predstavovalo problém.

Informácie v prípade sa skladajú z niekoľkých nezávislých prvkov:

- Informácie o pacientovi.
- Informácie o prípade.
- Každá analýza.
- Každý predpis lieku.

Môžete vykonať zmeny v jednom z týchto prvkov a zmeny v inom prvku na inom zariadení.

Ak však napríklad zmeníte tú istú analýzu na dvoch zariadeniach, uloží sa len posledná zmena.

Ak zmeníte jednu analýzu na jednom zariadení a inú analýzu na inom zariadení, nebude to problém.

Alebo ak pridáte predpis lieku na jednom zariadení a iný predpis lieku na inom zariadení, nebude to problém.

Zálohovanie

Prípady uložené na cloudovom serveri sú kópiou prípadov vo vašom zariadení. Pôvodné údaje sú vo vašom zariadení.

Za zálohovanie počítača ste vždy zodpovední sami.

Zdieľanie prípadov

Zdieľanie vašich prípadov s kolegami

V mnohých situáciách budete chcieť jeden zo svojich prípadov a/alebo analýz poskytnúť kolegovi, spolužiakovi, učiteľovi alebo ho možno zverejniť na internetovom fóre.

Complete Dynamics vám ponúka možnosť exportovať celý prípad alebo len jeho časť do súboru. Tento súbor potom môžete odovzdať svojmu kolegovi a importovať ho do jeho počítača. Váš kolega na to nepotrebuje licenciu *Practitioner Edition*, pomocou bezplatnej *Browser Edition* je možné súbor aj importovať a prezerať.

Zdieľanie prípadov sa môže uskutočniť aj anonymne, čím sa zabezpečí osobné súkromie pacienta a vás.

Spôsob exportu a importu je opísaný nižšie. Najprv sa pozrieme na ďalšiu dôležitú funkciu zdieľania prípadov.

Synchronizácia vašich prípadov medzi viacerými počítačmi

Manuálna synchronizácia je relevantná len vtedy, ak ste sa rozhodli nepoužívať automatickú synchronizáciu prostredníctvom cloudového servera.

Pomocou zdieľania kufríkov získate dve výkonné možnosti prenášania kufríkov z jedného počítača do druhého.

Najjednoduchšie je exportovať úplnú kópiu databázy prípadov do jedného počítača a importovať ju do druhého počítača.

Tým sa nahradia všetky informácie o prípadoch uložené v druhom počítači.

Túto možnosť môžete použiť aj na pravidelné vytváranie zálohy databázy prípadov.

Pokročilejším spôsobom je exportovať iba prípady, ktoré sú upravené v jednom počítači, a importovať ich do druhého počítača. V tejto situácii sa do databázy v druhom počítači skopírujú a zlúčia len zmenené informácie. Tento výkonný synchronizačný mechanizmus funguje dokonca aj vtedy, keď bol prípad upravený na oboch počítačoch!

Synchronizácia puzdier medzi iPhoneom a počítačom

Synchronizácia prípadov medzi iPhoneom a počítačom používa presne ten istý mechanizmus ako synchronizácia medzi viacerými počítačmi. Rozdiel spočíva v spôsobe presunu exportných súborov do zariadenia iPhone a z neho.


Na prenos súboru medzi dvoma počítačmi môžete použiť napríklad kľúč USB. Prenos súborov do zariadenia iPhone sa vykonáva pomocou aplikácie iTunes v počítači.

V iTunes môžete kopírovať súbory do aplikácie *Complete Dynamics* v zariadení iPhone a z nej.

Ak to chcete urobiť, vyberte iPhone v iTunes a otvorte časť Aplikácie. Pod zoznamom aplikácií sa zobrazí zoznam aplikácií, ktoré umožňujú zdieľanie súborov. V tomto zozname by ste mali vidieť *Complete Dynamics*. Vyberte aplikáciu *Complete Dynamics* kliknutím na ňu. Na pravej strane aplikácie sa nachádza oblasť, kde môžete pridávať alebo odstraňovať súbory. Nájdete tam súbor exportu prípadu vytvorený v zariadení iPhone, ktorý môžete skopírovať do počítača a importovať ho tam. Sem môžete pridať exportný súbor vytvorený v počítači, ktorý potom bude k dispozícii na import do iPhoneu.

Ďalšie informácie nájdete v časti Pomocník v iTunes.

V zariadení iPhone sa vyskakovacia ponuka s možnosťami popísanými v nasledujúcich častiach otvorí v module *Case*, na ľavej strane obrazovky.

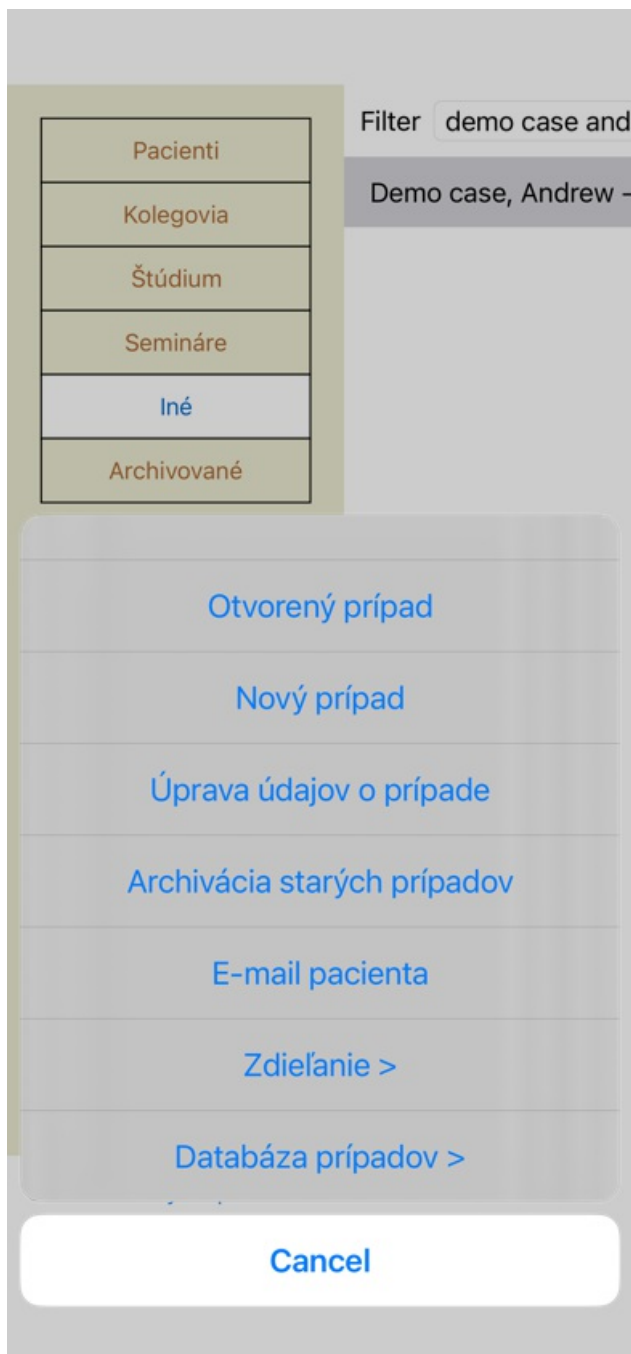

Exportovanie jedného prípadu

Ak chcete exportovať jeden prípad, otvorte modul *Case* a vyberte prípad, ktorý chcete exportovať. Potom použite možnosť *Exportovať aktuálny prípad...* (Možnosť kontextového menu *Zdieľanie / Export aktuálneho prípadu...*). Otvorí sa dialógové okno, v ktorom môžete vybrať časti prípadu, ktoré chcete exportovať:

Možnosti exportu prípadu

- Informácie o autorovi ☒
- Informácie pre pacienta ☒
- Poznámky k prípadu ☒
- Predpisy ☒
- Analýzy

1. jan 2009-A s...
2. jan 2009-A s...
3. jan 2009-A s...
4. jan 2009-An...
1. feb 2009-Sy...
1. feb 2009-Gr...
1. mar 2009-Si...
25. jan 2011-B...
1. sep 2015-Fa...
1. mar 2016-D...
3. mar 2016-D...

Heslo (voliteľné)

[Všetky](#) [Žiadne](#) [Zrušiť](#) [OK](#)

Informácie o autorovi Ak zrušíte začiarknutie tejto možnosti, vaše meno sa do exportu nezahrmie.

Informácie pre pacienta Ak zrušíte začiarknutie tejto možnosti, pacient bude anonymný. Používa sa len pohlavie a rok narodenia pacienta.

Ak je táto možnosť začiarknutá, do exportu sa zahrnú všetky osobné údaje pacienta.

Poznámky k prípadu Ak je táto možnosť začiarknutá, do exportu sa zahrnú aj základné informácie o vašom prípade. (Pozadie prípadu, poznámky a skupiny).

Predpisy Ak je táto možnosť začiarknutá, do exportu sa zahrnú aj vykonané predpisy.

Analýzy Pre každú analýzu v prípade sa môžete rozhodnúť, či ju chcete exportovať alebo nie. Kliknutím na riadok zapnete/vypnete výber. Tlačidlá *All (Všetky)* a *None (Žiadne)* môžete použiť na výber všetkých alebo žiadnych analýz, aby ste uľahčili výber.

Heslo Ak tu zadáte hodnotu, exportný súbor bude chránený heslom. Aby ho niekto mohol importovať, musí poznať heslo. Odporúčame používať heslo pre všetky informácie, ktoré zdieľate, s výnimkou anonymných prípadov, ktoré chcete zverejniť pre všetkých na internete.

Keď ste pripravení, stlačte tlačidlo **OK** a zobrazí sa výzva na zadanie názvu a umiestnenia súboru podľa vášho výberu.

Predvolený názov súboru je už vyplnený, ale môžete si vybrať ľubovoľný názov.

Exportovanie jednej analýzy

Ak chcete exportovať jednu analýzu, otvorte prípad, ktorý obsahuje analýzu, a vyberte analýzu, ktorú chcete exportovať.

Potom použite možnosť Exportovať aktuálnu analýzu... (Možnosť kontextového menu *Zdieľanie / Analýza exportu prídu...*).

Otvorí sa dialógové okno, v ktorom môžete vybrať časti prípadu, ktoré chcete exportovať spolu s analýzou:

Možnosti exportu prípadu

Informácie o autorovi



Informácie pre pacienta



Poznámky k prípadu



Heslo (voliteľné)

Zrušiť OK

Význam polí nájdete vo vyššie uvedených informáciách.

Exportovanie viacerých prípadov

Do jedného súboru môžete exportovať viacero prípadov. (Možnosť kontextového menu *Zdieľanie / Export viacerých prípadov...*).

Možnosti exportu prípadu

Pacienti	Abif, Hiram
Kolegovia	Al-Rashidi, M...
Štúdium	Andrews, San...
Semináre	Baker, Charles
Iné	Barrett, Eliza...
Archivované	Boyle, Susan...
	Clappin, Char...
	Clappin, Edw...
	Garrod, Rishi...
	Grinsven, Ed...

Informácie o autorovi

Informácie pre pacienta

Poznámky k prípadu

Predpisy

Na ochranu súkromia pou

Heslo

Zrušiť

OK

V zozname prípadov vyberte tie, ktoré chcete exportovať, kliknutím na ne.

Importovanie prípadu alebo analýzy

Ak vám niekto iný poskytol exportný súbor prípadu alebo analýzy, môžete ho jednoducho importovať pomocou možnosti Importovať. (Možnosť kontextového menu *Zdieľanie / Import...*).

Zobrazí sa výzva na zadanie súboru, ktorý chcete importovať.

Po výbere súboru sa súbor importuje do databázy prípadov. V prípade, že je súbor chránený heslom, budete najprv požiadaní o zadanie hesla.

Importovaný prípad nájdete v skupine *Kolegovia*, ak bolo v súbore uvedené meno autora, inak ho nájdete v skupine *Iné*. Po otvorení prípadu môžete sami ľahko zmeniť informácie o prípade alebo presunúť analýzu do niektorého z vašich ďalších prípadov.

Export celej databázy prípadov

Keď exportujete celú databázu prípadov, je možné ju importovať len do počítača, ktorý má licenciu registrovanú na vaše meno.

Ak chcete exportovať celú databázu prípadov, použite možnosť Export complete Case Database... (Možnosť kontextového menu *Zdieľanie / Export kompletnej databázy prípadov...*).

Otvorí sa dialógové okno, v ktorom môžete zadať heslo na ochranu tohto súboru (dôrazne odporúčame).

Možnosti exportu prípadu

Na ochranu súkromia používajte heslo.

Heslo

Zrušiť OK

Po stlačení tlačidla *OK* budete požiadaní o zadanie názvu a umiestnenia súboru.
Preneste súbor do iného počítača a tam vykonajte Import.

Exportovanie upravených prípadov

Export upravených prípadov je najflexibilnejší spôsob synchronizácie informácií o prípadoch medzi viacerými počítačmi.

Ak chcete exportovať úpravy, použite možnosť Exportovať upravené prípady. (Možnosť kontextového menu *Zdieľanie / Export upravených prípadov...*).

Otvorí sa dialógové okno, v ktorom môžete zadať, čo sa má synchronizovať:

Možnosti exportu prípadu

Posledná synchronizácia

Zachráňte na

3/3/23

1:37

Počet vybraných prípadov 12

Na ochranu súkromia p

Heslo

Podrobnosti na [Zrušiť](#) [OK](#)

V predvolenom nastavení je vyplnený dátum poslednej synchronizácie. Ak chcete synchronizovať všetky zmeny po inom dátume a čase, stačí zmeniť hodnotu.

Ak chcete získať prehľad o tom, ktoré prípady budú zahrnuté do exportu, stlačte tlačidlo *Details...*, čím získate zoznam prípadov a časy ich posledných úprav.

Import upravených prípadov

Upravené prípady možno importovať do iného počítača. (Možnosť kontextového menu *Zdieľanie / Import...*).

Po výbere súboru sa otvorí dialógové okno s informáciami o potrebných synchronizačných činnostiach:

Možnosti importu upravených prípadov

Nový - 5. jan 2014 - Holiday, Jimmy - 1942

Zlúčiť - 6. jan 2014 - St.Clair, Bonnie - 1970

Nahradiť - 6. jan 2014 - Eastwood, Herny - 1...

Nový - 6. jan 2014 - Baker, Charles - 1950

Nový - 7. jan 2014 - Smarting, All - 1962

Zlúčiť - 7. jan 2014 - Williams, Charita - 1970

Ignorovať - 20. jan 2014 - Underwood, Sam...

[Ignorovať](#) [Nový](#) [Vymeňte stránku](#) [Zlúčenie](#) [Obnovenie](#)

[Zrušiť](#) [OK](#)

Dôležitý je tu stĺpec úplne vľavo. Tento stĺpec môže mať štyri rôzne hodnoty:

Nový Prípád sa nenachádza v miestnej databáze. Bude novo vytvorená.

Vymeňte stránku Prípád sa v miestnej databáze nemení, ale verzia v exportnom súbore je novšia. Prepíše sa novými informáciami.

Zlúčenie Puzdro bolo na oboch počítačoch upravené. Informácie v exportných súboroch sa zlúčia s informáciami v miestnej databáze. Žiadne existujúce informácie sa neprepíšu, ale skopírujú sa nové informácie.

Ignorovať Zdá sa, že tento prípad nie je upravený na žiadnom z oboch počítačov. Nič sa nedeje.

Akciu môžete upraviť pre ktorýkoľvek z prípadov v zozname. Vyberte niekoľko prípadov kliknutím na ne a potom stlačte niektoré z tlačidiel *Ignorovať*, *Nový*, *Nahradiť* alebo *Zlúčiť*. Stlačením tlačidla *Reset* obnovíte všetky činnosti na ich pôvodné nastavenie.

Ak je akcia explicitne nastavená na *New*, prípad sa skopíruje ako nový prípad, aj keď sa podobný prípad už nachádza v miestnej databáze. Môžete to urobiť, keď máte pochybnosti, po importe sa vám zobrazia dva prípady s rovnakým názvom, ktoré si môžete sami overiť. Za normálnych okolností to nikdy nie je potrebné, možnosť *Merge* nevyhodí žiadne informácie.

Automatické zálohovanie

Na uľahčenie zálohovania program automaticky vytvára export celej databázy prípadov raz denne. Tieto zálohy sa uchovávajú za posledných 7 dní. Pomocou neho môžete vytvárať vlastné zálohy bez toho, aby ste museli vedieť, kde program ukladá svoje interné databázy. Ak potrebujete vedieť viac o tom, kde sa nachádzajú zálohy a ako ich v prípade núdze obnoviť, obráťte sa na oddelenie podpory.

Analytický modul

Rýchly štart

Pre netrpezlivých z vás...

Odporúčame vám, aby ste si prečítali časti nápovedy o analýze, pretože trochu základných informácií vám uľahčí prácu. Ak si ju chcete prečítať neskôr a začať hneď, toto zhrnutie by vám malo stačiť na začiatok.

Začať s prípadom alebo nie?

V mnohých prípadoch sa analýza vykonáva preto, že sa týka pacienta a možno si ju budete chcieť uchovať na neskoršie použitie. V takejto situácii sa odporúča najprv vytvoriť prípad alebo otvoriť existujúci prípad, pretože vaša analýza sa potom uloží na správne miesto.

Po otvorení prípadu k nemu možno ľahko pridať novú analýzu.

Podrobné informácie o organizácii prípadov a analýz nájdete v časti *Modul prípadov*.

Ak chcete vykonať len rýchlu analýzu bez kontextu skutočného prípadu, jednoducho neotvárajte ani nevytvárajte prípad a automaticky sa vytvorí predvolený prípad (s názvom *Unnamed case*) a analýza sa uloží do neho. Analýzu nájdete v tomto prípade označenú dnešným dátumom.

Pridávanie rubriík

Pridanie rubriky do analýzy je jednoduché.

Najprv vyberte rubriku v module *Book*. Rubrika je vybraná, keď je označená jasne žltou farbou.

Potom kliknite na rubriku a podržte na nej prst, čím otvoríte kontextovú ponuku. (Možnosť kontextového menu *Pridanie rubriky k analýze*).

Pri hľadaní správnej rubriky vám pomôže modul *Find*.

Vytvorenie analýzy

Otvorenie modulu Analýza

Prejdite do modulu Analýza kliknutím na kartu *Analýza*.

Za predpokladu, že ste už otvorili prípad a vybrali analýzu, bude obrazovka vyzeráť takto:

Demo case, Andrew
Analýza 3. januára 2009, A simple analysis - usi
 Analýza používa 15 rubriky v 4 príznakoch.

- ▼ **523 Mental activity**
 - 16 Mind; Activity; night
 - 1 Mind; Activity; midnight, until
 - 83 Mind; Activity; hyperactive
 - 488 Mind; Cheerfulness
 - 32 Mind; Restlessness, nervousness; se
 - 1 Mind; Theorizing; evening
 - 2 Mind; Theorizing; night
- ▼ **83 Sensitive to noise**
 - 25 Mind; Noises; aversion to
 - 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise
 - 58 Sleep; Waking; noise, from
- ▼ **60 Sleeplessness**
 - 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 - 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivaci
 - 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse,
- ▼ **102 Generalities**

Štandard	Malé opravné p (...)	Ma
coff •	coff •	cof
nux-v	bor	nux
lach	sel	lac
chin	chin	chi
sulph	kola	sul
acon	nux-v	cor
calc •	sia-c	cal
con	sul-ac	acc
bell •	con	bor
sul-ac	ang	bel
bor	op	ars
ars	ign	ign
sel	bamb-a	sul
ign	tax	sel
phos	lach	nat
op	ars	pho
nat-m	ant-c	op
agar	mez	pul
puls	canth	lyc
ang	anis	ang

repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort

Kniha Nájsť Prípad **Analýza** MM

Okno je rozdelené na dve časti:

- príznaky a rubriky použité na túto analýzu,
- výsledky analýzy.

Podrobne sa im budeme venovať, pričom začneme prvým z nich.

Všimnite si, že príklady použité v tomto dokumente sú súčasťou demonštračných prípadov, ktoré nájdete v skupine "Iné" modulu Case. S týmito príkladmi sa môžete voľne hrať. Pri každom spustení programu *Complete Dynamics* sa pôvodné demonštračné prípady vrátia do skupiny "Ostatné".

Symptómy verzus rubriky

Po zozbieraní informácií o pacientovi je tradičným prístupom vyhľadať v repertoári rubriky, ktoré zodpovedajú situácii pacienta. Veľkou nevýhodou tohto prístupu je, že pre niektoré symptómy pacienta je potrebná jedna repertoárová rubrika, zatiaľ čo pre iné symptómy možno nájsť niekoľko rubriek, ktoré spoločne vyjadrujú sťažnosť. Vždy, keď sa na vyjadrenie jedného symptómu použije viacero rubriek, lieky, ktoré zodpovedajú tomuto symptómu, sa automaticky započítavajú silnejšie, takže symptóm dostane v porovnaní s ostatnými symptómami zvýšenú hodnotu.

Pacient tiež nevyjadruje svoje symptómy v zmysle repertoárového jazyka. Zbierka repertoárových rubriek preto nie je skutočným zobrazením pacientových ťažkostí, najmä ak sa nedajú nájsť rubriky, ktoré by vyjadrovali pacientove symptómy 100 % doslovne.

Complete Dynamics rieši tieto problémy tým, že rozlišuje medzi príznakmi a rubrikami.

Najprv je možné zadať analyzované príznaky pacienta. Po druhé, repertoárové rubriky môžu byť viazané na tieto príznaky.

Modul Analýza môže automaticky kompenzovať výsledky analýzy vzhľadom na skutočnosť, že niektoré príznaky sú vyjadrené malým počtom rubriek, zatiaľ čo iné príznaky sú vyjadrené veľkým počtom rubriek. Môžete si teda slobodne vybrať, koľko rubriek potrebujete na adekvátne vyjadrenie symptómov pacienta do repertoárových rubriek bez toho, aby ste narušili rovnováhu výsledkov analýzy!

Používanie aplikácie Symptoms má viac výhod. Keďže symptómy sú jazykom pacienta, je ľahké priradiť symptómom poradie dôležitosti bez toho, aby bolo potrebné explicitne manipulovať s poradím jednotlivých rubriek (nazývame ich Váha symptómu a Váha rubriky, sú vysvetlené na inom mieste). Výhod je viac, ale o tom sa presvedčíte sami.

Samozrejme, pre rýchlu a jednoduchú analýzu spôsobuje vytvorenie Symptómov určitú réžiu, ktorú by ste možno nechceli. V tomto prípade jednoducho nevytvárajte Symptómy. Všetky rubriky sa potom automaticky umiestnia pod "všeobecný príznak", ktorý je pre vás neviditeľný.

Príklad. Nižšie sú uvedené dva zábery obrazovky z prípadu *Demo Andrew*, jeden bez a jeden s použitím príznakov:

Demo case, Andrew
Analysis January 1, 2009, A simple analysis
Analysis uses 15 rubrics.

- 16 Mind; Activity; night
- 1 Mind; Activity; midnight, until
- 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
- 83 Mind; Activity; hyperactive
- 488 Mind; Cheerfulness
- 25 Mind; Noises; aversion to
- 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
- 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sound
- 1 Mind; Theorizing; evening
- 2 Mind; Theorizing; night
- 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
- 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after
- 58 Sleep; Waking; noise, from
- 80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcohol
- 140 Generalities; Food and drinks; coffee; des

Demo case, Andrew
Analysis January 3, 2009, A simple analysis - using symptoms
Analysis uses 15 rubrics in 4 symptoms.

- ▼ 523 Mental activity
 - 16 Mind; Activity; night
 - 1 Mind; Activity; midnight, until
 - 83 Mind; Activity; hyperactive
 - 488 Mind; Cheerfulness
 - 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
 - 1 Mind; Theorizing; evening
 - 2 Mind; Theorizing; night
- ▼ 83 Sensitive to noise
 - 25 Mind; Noises; aversion to
 - 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise
 - 58 Sleep; Waking; noise, from
- ▼ 60 Sleeplessness
 - 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 - 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity
 - 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse

Variant s Symptómy je oveľa jasnejší!

Vytváranie symptómov a pridávanie rubriek

Po otvorení prípadu a výbere analýzy možno do analýzy pridať nový symptóm. (Možnosť kontextového menu *Pridať príznak*). Ak chcete odstrániť symptóm (a všetky rubriky, ktoré sú s ním spojené), vyberte ho v zozname myšou alebo klávesnicou a potom stlačte tlačidlo Delete. (Možnosť kontextového menu *Odstrániť vybrané*). Podrobnosti o príznaku môžete upraviť dvojitém kliknutím naň. (Možnosť kontextového menu *Upraviť príznak*).

Rubrika sa vždy pridáva z modulu *Book* alebo *Find*. (Možnosť kontextového menu *Pridanie rubriky k analýze*). Rubrika sa potom pridá k príznaku, ktorý bol vybraný ako "aktuálny" príznak v zozname príznakov.

Výsledky

Výsledok analýzy

Po pridaní symptómov a rubriek do analýzy je čas pozrieť sa na výsledky. Tieto výsledky sa zobrazia na pravej strane okna.


V zásade existujú dva spôsoby zobrazenia výsledku analýzy:

- prehľad viacerých výsledkov na základe rovnamej analýzy.
- podrobný prehľad jedného výsledku analýzy.

Zobrazenie výsledkov viacnásobnej analýzy

Môžete si vybrať prehľad viacerých výsledkov. (Tlačidlo na paneli nástrojov ).

Bude to vyzeráť takto:

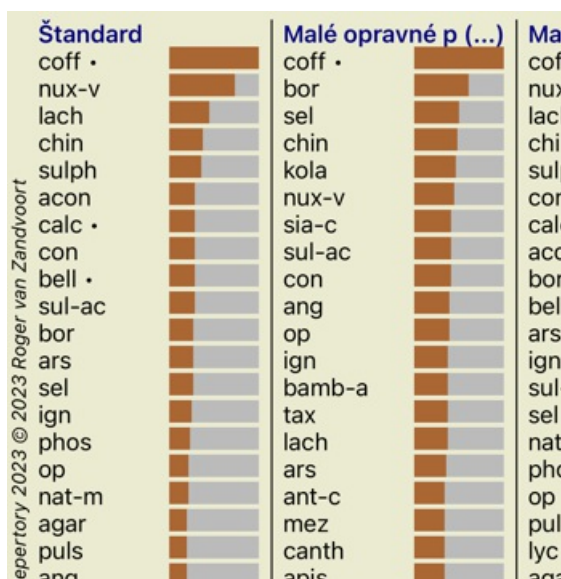

Štandardné metódy analýzy

Štandardné výsledky na tomto obrázku znamenajú nasledovné:

<i>Štandard</i>	Ide o štandardný výsledok analýzy založený na starostlivo vybraných parametroch.
<i>Malé lieky</i>	Je to výsledok toho, že menším liekom sa pripisuje väčší význam ako väčším liekom (polychrestom). Tým sa kompenzuje nerovnomerný výskyt prostriedkov v celom repertoári. Polychresty nie sú z analýzy vynechané, len ich dominancia je znížená.
<i>Malé rubriky</i>	V tomto výsledku sa rubrikám s malým počtom opravných prostriedkov pripisuje väčší význam ako rubrikám s veľkým počtom opravných prostriedkov. Takto majú charakteristickejšie rubriky väčší vplyv na výsledok ako veľmi bežné rubriky.
<i>Bönninghausen</i>	Pri tomto type analýzy sa prostriedok počíta na základe jeho výskytu v príbuzných rubrikách v repertoári. Bönninghausenova analýza sa používa najmä pri väčších a všeobecnejších rubrikách. Dôležitejšia je aj korekcia pre polárne rubriky. Viac informácií nájdete na <i>Analýza - Bönninghausen</i> .
<i>Jednoduché počítanie</i>	Ide o veľmi jednoduché počítanie, aké sa za starých čias robilo len s ceruzkou a papierom. Pri všetkých rubrikách v analýze sa stupňovanie všetkých nápravných opatrení jednoducho sčíta.

Výber metód analýzy

Možno nemáte vždy záujem o všetky štandardné metódy analýzy, ktoré vám *Complete Dynamics* ponúka.

Môžete sa rozhodnúť, ktoré analýzy sa majú zobrazit' a v akom poradí.

Môžete to zmeniť v nastaveniach *Preferences*. Viac informácií nájdete v časti *Preferencie*.

Podrobnosti o výsledkoch analýzy

Keď sa pozriete na výsledok na vyššie uvedenom obrázku, všimnete si, že nie sú vytlačené žiadne čísla. Za každým liekom sa nachádza lišta, ktorá ukazuje relatívnu dôležitosť lieku. Prostriedky sú zoradené podľa dôležitosti. Čím kratší je farebný pruh, tým menej dôležitý je daný prostriedok v danom výsledku.

Ak chcete vo výsledku vidieť čísla, môžete stlačiť tlačidlo na paneli nástrojov. (Tlačidlo na paneli nástrojov **1**).

Výsledok potom bude vyzeráť takto:

Štandard		Malé opravné p
coff •	100 / 12 / 3	coff • 100 /
nux-v	75 / 10 / 4	bor 61 /
lach	46 / 8 / 4	sel 51 /
chin	39 / 9 / 4	chin 49 /
sulph	36 / 6 / 4	kola 48 /
acon	30 / 5 / 4	nux-v 46 /
calc •	30 / 6 / 3	sia-c 42 /
con	30 / 5 / 3	sul-ac 42 /
bell •	29 / 6 / 3	con 41 /
sul-ac	29 / 5 / 4	ang 41 /
bor	28 / 6 / 4	op 40 /
ars	28 / 7 / 3	ign 39 /
sel	27 / 5 / 4	bamb-a 38 /
ign	26 / 6 / 3	tax 38 /
phos	24 / 6 / 4	lach 38 /
op	22 / 5 / 3	ars 36 /
nat-m	22 / 5 / 4	ant-c 35 /
agar	20 / 5 / 3	mez 35 /
puls	20 / 4 / 3	canth 35 /
ang	20 / 5 / 4	anis 34 /

V niektorých situáciách možno nebudete chcieť zoradiť výsledky podľa dôležitosti, ale podľa počtu symptómov a rubriky, v ktorých sa liek vyskytuje.

Potom môžete stlačiť tlačidlo na paneli nástrojov !, čo znamená "Zoradiť analýzu podľa počtu symptómov/rubrikov". (Tlačidlo na paneli nástrojov !).

Už predpísané lieky

Často je vhodné rýchlo rozpoznať, ktoré lieky už boli pacientovi predpísané. Všetky lieky, ktoré boli predtým predpísané, sú označené bodkou za názvom.

Zistenie vzťahu medzi rubrikami a opravnými prostriedkami

Vzťah medzi rubrikami a prostriedkami nápravy si môžete rýchlo pozrieť kliknutím na rubriku alebo na prostriedok nápravy vo výsledku.

Príslušné lieky alebo rubriky sú potom zvýraznené.

Príklad: Kliknutím na rubriku *Mind; sensitive, oversensitive; noise, to; painfull sensitivity to* sa v oblasti výsledkov zobrazí nasledovné:

Štandard		Malé opravné p (...)	Ma
coff •		coff •	cof
nux-v		bor	nux
lach		sel	lac
chin		chin	chi
sulph		kola	sul
acon		nux-v	con
calc •		sia-c	cal
con		sul-ac	acc
bell •		con	bor
sul-ac		ang	bel
bor		op	ars
ars		ign	ign
sel		bamb-a	sul
ign		tax	sel
phos		lach	nat
op		ars	pho
nat-m		ant-c	op
agar		mez	pul
puls		canth	lyc
ang		anis	ars

Na prvý pohľad vidíte, ktoré lieky sú v tejto rubrike!

Príklad: Kliknutím na liek *sulph* sa zobrazí nasledujúci prehľad symptómov a rubrik:


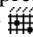
Demo case, Andrew
Analysis January 3, 2009, A simple analysis - us
 Analysis uses 15 rubrics in 4 symptoms.

- ▼ 523 **Mental activity**
 - 16 Mind; Activity; night
 - 1 Mind; Activity; midnight, until
 - 83 Mind; Activity; hyperactive
 - 488 Mind; Cheerfulness
 - 32 Mind; Restlessness, nervousness; se
 - 1 Mind; Theorizing; evening
 - 2 Mind; Theorizing; night
- ▼ 83 **Sensitive to noise**
 - 25 Mind; Noises; aversion to
 - 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise
 - 58 Sleep; Waking; noise, from
- ▼ 60 **Sleeplessness**
 - 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 - 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivaci
 - 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse,
- ▼ 192 **Generalities**

A v letmom pohľade vidíte, v ktorých rubrikách sa *sulph* vyskytuje. Okrem toho je vybraný liek zvýraznený aj vo výsledkoch ostatných analýz, takže okamžite vidíte jeho relatívne poradie v rôznych analýzach.

Zatiaľ pre prehľad viacnásobných analýz. Pozrime sa teraz na podrobný prehľad jedného výsledku analýzy...

Zobrazenie podrobného prehľadu jedného výsledku analýzy

Podrobnejší prehľad o jednej analýze môžete podľa svojich preferencií zobrazit' buď v zobrazení tabuľky, alebo v zobrazení mriežky. (Tlačidlo na paneli nástrojov , tlačidlo na paneli nástrojov .

Zobrazenie tabuľky vyzerá takto:

Demo case, Andrew
Analýza 3. januára 2009, A simple analysis - us
 Analýza používa 15 rubriky v 4 príznakoch.


- ▼ 523 **Mental activity**
 - 16 Mind; Activity; night
 - 1 Mind; Activity; midnight, until
 - 83 Mind; Activity; hyperactive
 - 488 Mind; Cheerfulness
 - 32 Mind; Restlessness, nervousness; se
 - 1 Mind; Theorizing; evening
 - 2 Mind; Theorizing; night
- ▼ 83 **Sensitive to noise**
 - 25 Mind; Noises; aversion to
 - 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise
 - 58 Sleep; Waking; noise, from
- ▼ 60 **Sleeplessness**
 - 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 - 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivaci
 - 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse,

Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Z.

	coff	nux-v	lach	chin	sulph	acon	calc	con	bell	sul-ac	bor	ars	sel	ign	phos	op
Mi Activ																
Mi Activ																
Mi Activ																
Mi Activ																
Mi Chee																
Mi Restl																
Mi Theor																
Mi Theo																
Mi Noise																
Mi Sens																
SI Wakin																
Mi Activ																

Štandard

Zobrazenie mriežky vyzerá takto:

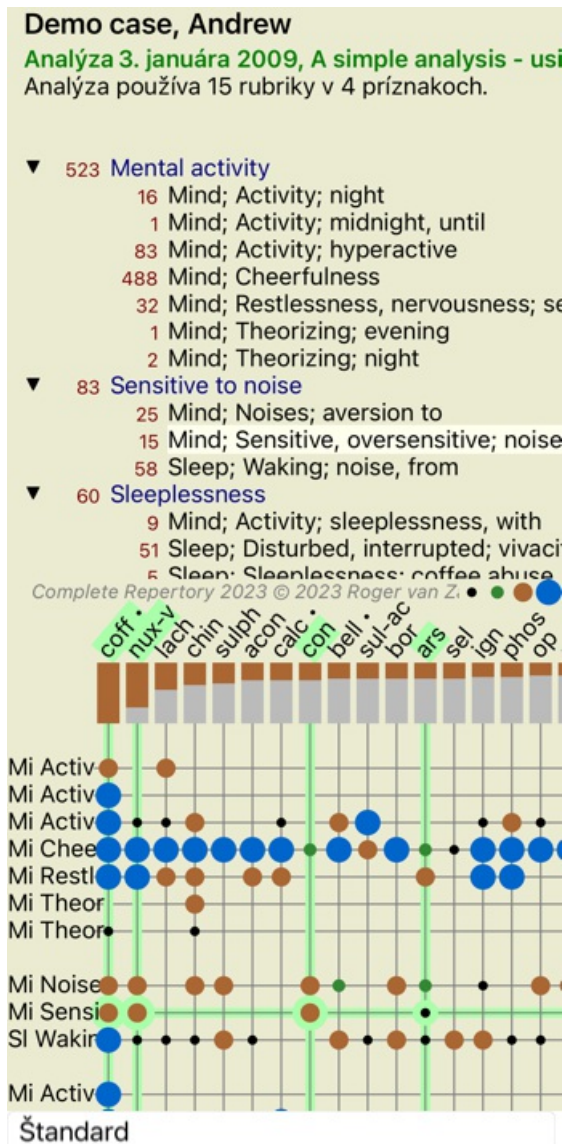

Takto môžete vidieť vzťah medzi rubrikami a opravnými prostriedkami na jednom obrázku. Samozrejme, že sa to dá urobiť len pre jednu analýzu.

Na iPhonee je vzťah medzi rubrikami a opravnými prostriedkami jasnejší, ak iPhone otočíte na šírku.

Bloky alebo body označujú, že sa liečivý prostriedok vyskytuje v rubrike:

- ◻ • Trieda 1
- ◼ • Trieda 2
- ◼ • Trieda 3
- ◼ • Trieda 4

Ak chcete získať viac informácií, stačí dvakrát kliknúť na odrážku, aby ste získali kompletne informácie o lieku:

Informácie o nápravnom prostriedku

Rubrika: MIND; CHEERFULNESS.

Skratka nápravného prostriedku: coff. stupeň 4.

Štandardný názov: Coffea cruda.

Taxonómia: kráľovstvo *Plantae*, subkráľovstvo *Viridiplantae*, inkráľovstvo *Streptophyta*, super divízia *Embryophyta*, divízia *Tracheophyta*, subdivízia *Spermatophytina*, trieda *Magnoliopsida*, super objednávka *Asteranae*, objednávka *Gentianales*, rodina *Rubiaceae*, rod *Coffea*, druh *Coffea arabica*.

Taxonómia APG II: angiosperms, eudicots, core eudicots, asterids, euasterids I, Gentianales, Rubiaceae.

Výskyt v súvisiacich rubrikách: 5, priemerná známka: 2.2.

Zatvorje.

Boissier J. *Systematisches alphabetisches Repertorium der europaischen und nicht europaischen*
C. M. von *Aracien mit handgezeichneten Abbildungen*, 1833.

Gallard J. *Repertoire of psychic medicines with Materia Medica*, 1897.

Hampe C. *Analytical Repertory of Symptoms of Mind*, 1881.

Hering C. *Guiding Symptoms of our Materia Medica*, 1879.

Hilg G. *Handbuch der Haupt Anzeigen für die richtige Wahl der homöopathischen Heilmittel*,
Hermann Bethmann, 1851.

Hilg G. *Systematisch-alphabetisches Repertorium der homöopathischen Arzneimittellehre*,
Hermann Bethmann (Leipzig), 1848.

Klein C. *Repertory of Hering's Guiding Symptoms*, 1866.


Levy S. *Keynotes and Red line symptoms of Materia Medica*, 1915.

Lind C. *Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III*, T.O. Weigel (Leipzig), 1847.

Veritas J. *Lexicon*, 1985.

Zatvorit

Kliknutím na rubriky alebo lieky ich môžete zvýrazniť:

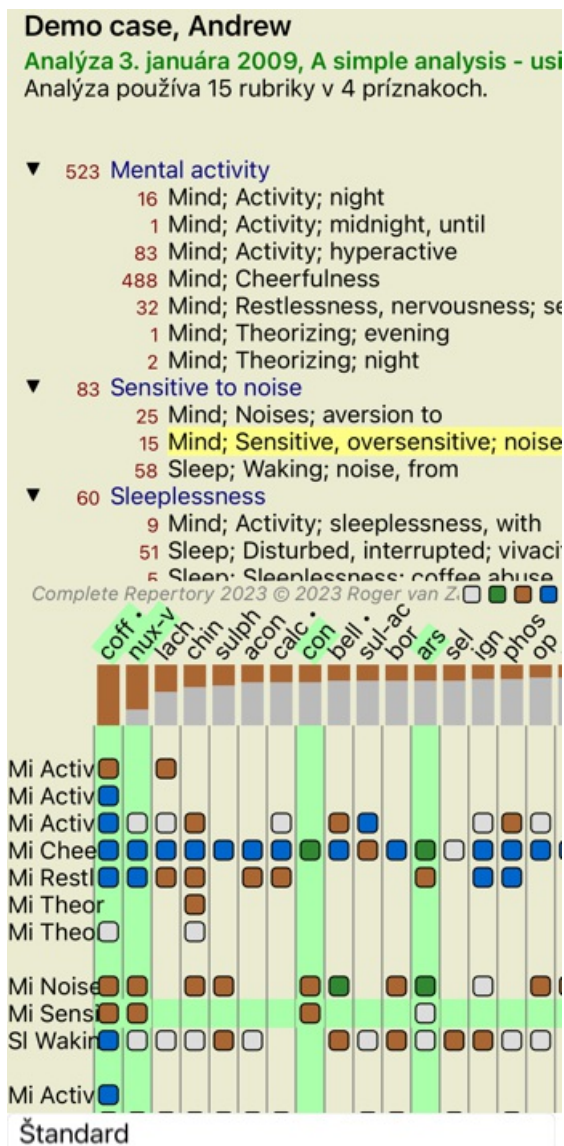

Na zobrazenie čísel alebo zmenu poradia triedenia možno samozrejme použiť tlačidlá na paneli nástrojov **1** a **!**.

Filtrovanie výsledkov analýzy

Pokročilé témy

Dolaďovanie analýzy

Teraz, keď ste prebrali základy tvorby analýzy a interpretácie výsledkov, je čas na niektoré pokročilé témy, ktoré vám umožnia doladiť analýzu v súlade s vašou interpretáciou informácií o pacientovi.

Budeme sa venovať týmto témam:

- Používanie závaží.
- Vyvažovanie príznakov.
- Polárne rubriky a kontra indikácie.
- Skupiny rubriek.
- Prehľad rubriek.

Mnohé akcie možno vykonávať na viacerých vybraných riadkoch naraz.

Používanie závaží

Každému symptómu a každej rubrike možno priradiť určitú váhu. Tak ako priradíte určitú dôležitosť symptómu pacienta alebo ako sa liek v repertóriu môže vyskytovať s rôznymi stupňami, môžete priradiť určitú dôležitosť každému zo symptómov a rubriek.

Priradením vyššej hodnoty sa symptóm alebo rubrika započítava do výsledku analýzy s väčšou dôležitosťou.

Priradením váhy 0 sa symptóm alebo rubrika z analýzy úplne vylúčia.


Ak chcete nastaviť váhu, najprv vyberte symptóm alebo rubriku kliknutím na ňu myšou.

Teraz existuje niekoľko spôsobov nastavenia hmotnosti:

- 0 (Možnosť kontextového menu *Hmotnosť / Ignorovať*).
- 1 (Možnosť kontextového menu *Hmotnosť / Hmotnosť normálna*).

- 2 (Možnosť kontextového menu *Hmotnosť* / *Hmotnosť x2*).
- 3 (Možnosť kontextového menu *Hmotnosť* / *Hmotnosť x3*).
- 4 (Možnosť kontextového menu *Hmotnosť* / *Hmotnosť x4*).

Nasledujúci príklad ukazuje analýzu, v ktorej sú nastavené váhy (len na ukážku)

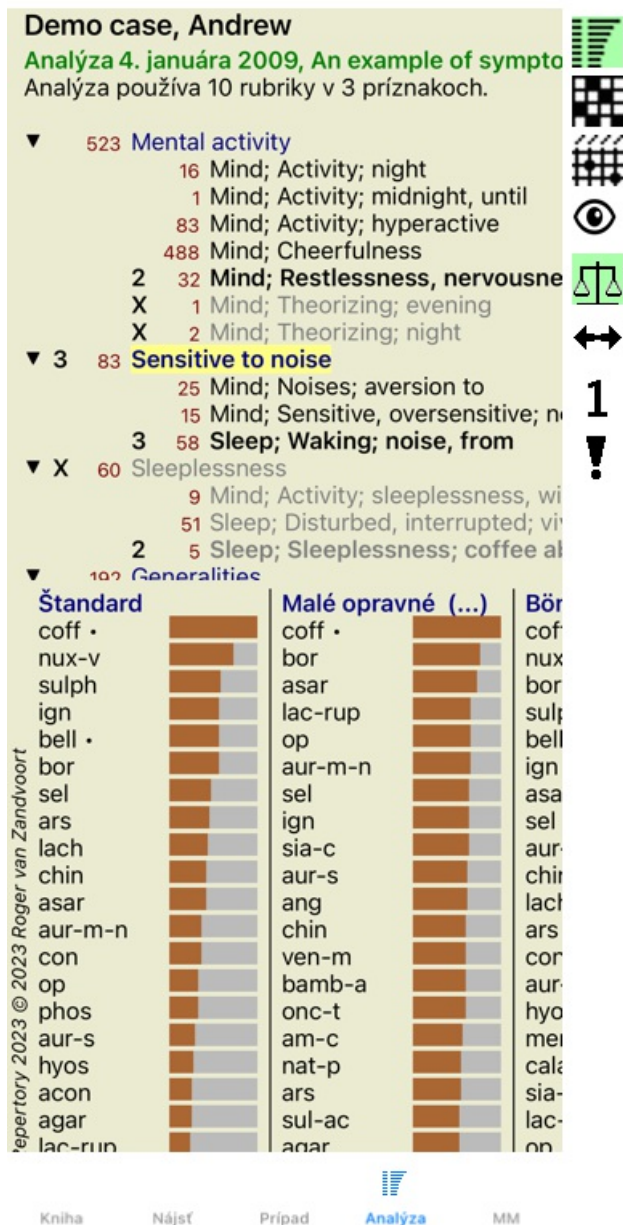

Na ľavej strane vidíte tlačidlá na paneli nástrojov. Tlačidlá na paneli nástrojov vždy zobrazujú aktuálnu hodnotu hmotnosti vybraného symptómu alebo rubriky.



X pred symptómom alebo rubrikou znamená váhu 0, je vylúčený z analýzy.

Vyváženie príznakov

Vyváženie príznakov je pokročilý mechanizmus analýzy, ktorý kompenzuje použitie mnohých/malých rubriek v príznaku. Keď je zapnuté vyvažovanie (čo je normálne), môžete pod symptóm umiestniť ľubovoľný počet rubriek bez toho, aby ste narušili analýzu.

V tradičných analýzach by ste museli v analýze starostlivo vyberať rubriky, pretože ak by ste na vyjadrenie určitého symptómu použili príliš veľa rubriek, v analýze by začali dominovať lieky zodpovedajúce tomuto jedinému symptómu. Podobne, ak by ste použili len jednu rubriku, lieky v tejto rubrike by dostatočne neprispeli k celkovej analýze v porovnaní s rubrikami použitými pre ostatné príznaky.

Ak je zapnuté Vyvažovanie príznakov, každý príznak sa započíta s Váhou (pozri vyššie *Používanie váh*), ktorá mu bola priradená, bez ohľadu na to, či pod neho umiestnite jeden Rubrik alebo povedzme 10 Rubrikov.

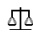Príznak vyváženia sa zapína/vypína pomocou tlačidla na paneli nástrojov , ktoré sa nachádza na pravej strane okna. (Tlačidlo na paneli nástrojov .

Pozrime sa na príklad. V nasledujúcej analýze sa na vyjadrenie bolesti hlavy používa mnoho rubriek. Ak sa nepoužije Balancing, vo výsledkoch dominuje *Glonoinum*, zatiaľ čo pri Balancing *Natrum Muriaticum* sa stáva výraznejším.

Demo case, Andrew

Analýza 1. februára 2009, Symptoms with many
Analýza používa 13 rubriky v 4 príznakoch.

▼ 954 Head pains

- 14 Head; Pain, headache; morning; agg
- 160 Head; Pain, headache; extending to;
- 188 Head; Pain, headache; extending to;
- 110 Head; Pain, headache; extending to;
- 119 Head; Pain, headache; extending to;
- 944 Head; Pain, headache; forehead
- 57 Head; Pain, headache; forehead; air;
- 48 Head; Pain, headache; forehead; eye
- 14 Head; Pain, headache; bursting; mer

▼ 84 Sadness

- 84 Mind; Sadness, depression; menses

▼ 163 Menses

- 127 Female; Menses; pale, watery
- 105 Female; Menses; thin, liquid

▼ 173 Aversions and desires

- 173 Generalities; Food and drinks; salt o

Výsledok analýzy:

Žiadne vyvažovanie

Štandard		Malé opravné p
glon	100 / 9	glon 100
sep	94 / 12	hell 85
lach	91 / 11	cimic 78
bell •	87 / 10	tritic-v 78
lyc	81 / 11	gink 77
nat-m	78 / 9	kali-p 75
calc •	76 / 10	sanic 71
nux-v	74 / 9	plat 69
phos	66 / 10	spig 67
caust	66 / 9	sang 67
thuj	61 / 9	kali-n 65
bry	60 / 9	cocc 65
cimic	59 / 8	alum 64
puls	57 / 8	lach 64
nit-ac	55 / 9	berb 63
sulph	54 / 9	nit-ac 63
spig	53 / 8	thuj 62
chin	47 / 7	aloe 62
carb-v	46 / 8	kali-bi 62
nat	42 / 8	arist-cl 61

S vyvažovaním


Štandard		Malé opravné p
nat-m	100 / 9 / 4	sanic 100
lyc	93 / 11 / 4	kali-p 99
calc •	78 / 10 / 4	gink 92
sep	78 / 12 / 4	cycl 90
puls	77 / 8 / 4	nat-s 89
nit-ac	74 / 9 / 4	arist-cl 87
carb-v	68 / 8 / 4	cocc 84
caust	63 / 9 / 4	tub 81
phos	63 / 10 / 4	nat-c 80
lach	55 / 11 / 4	sac-alb 80
bell •	53 / 10 / 3	manc 80
ferr	52 / 6 / 3	hell 79
con	52 / 6 / 4	lampr-s 79
verat	44 / 4 / 4	lac-d 76
stann	44 / 5 / 3	cimic 75
cimic	43 / 8 / 3	nit-ac 74
lac-c	41 / 6 / 3	emer 73
sulph	41 / 9 / 3	berb 73
kali-p	38 / 8 / 4	carb-v 72
nux-v	37 / 9 / 3	hov 70

Poznámka: Symptómy vyvažovania nemajú žiadny vplyv na základnú analýzu *Jednoduché počítanie*.

Polárne rubriky a kontraindikácie

Polárne rubriky sú dve rubriky, ktoré majú opačný význam.

Ako príklad si uveďme jednoduchý prípad, v ktorom bol pôvodne predpísaný liek *coff*:

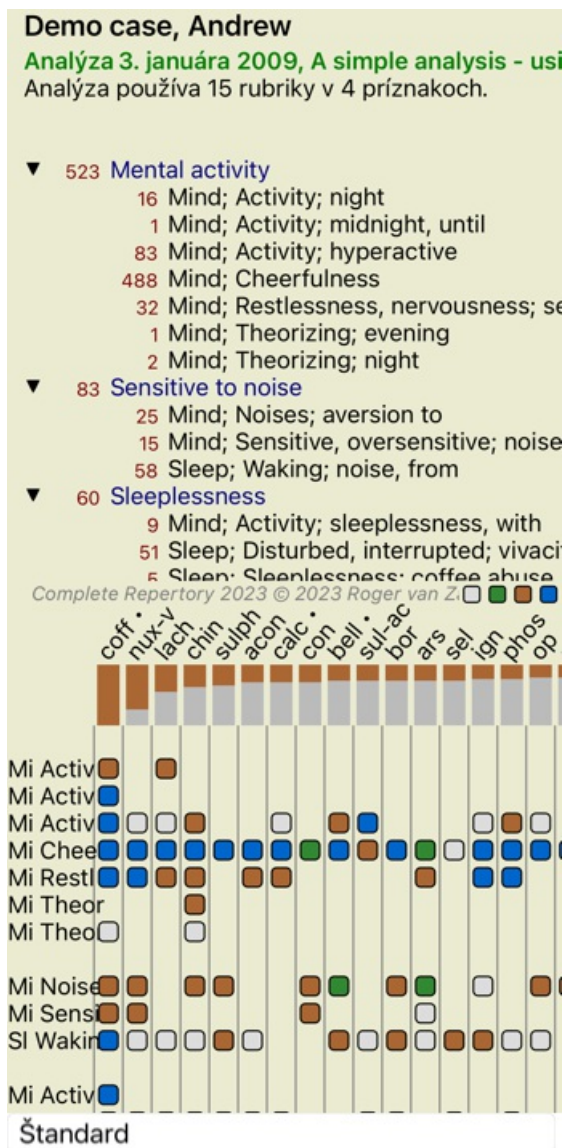


V časti *Generalities*, vidíme dve rubriky, ktoré majú obe polárnu rubriku:

- *amel* - *agg*.
- *túžby* - *averzia*.

Tieto polárne rubriky je možné použiť pri analýze stlačením tlačidla na paneli nástrojov ↔, ktoré sa nachádza na pravej strane okna. (Tlačidlo na paneli nástrojov ↔).

Teraz sú v rubrike *amel* aj *túžby* uvedené ich polárne rubriky.

Výsledok analýzy je tiež zmenený, pretože hodnoty nápravných opatrení sú teraz korigované hodnotami v polárnych rubrikách.

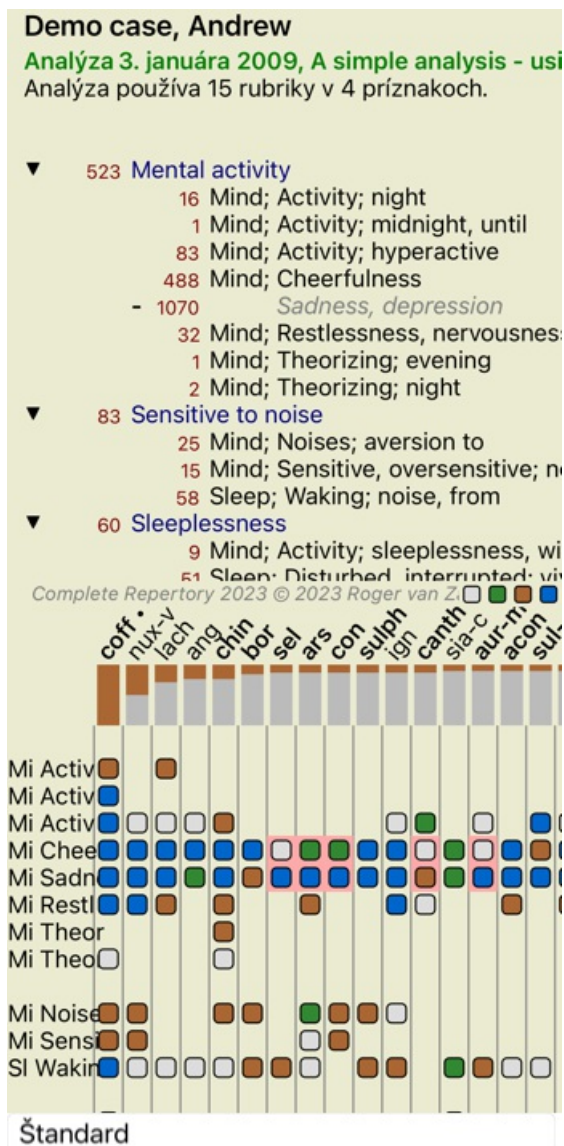

Nápravný prostriedok *coff* je teraz podfarbený červenou farbou, pretože v tejto analýze je kontra indikovaný.

Kontraindikácia je situácia, keď sa prostriedok vyskytuje v jednej rubrike v nízkom stupni (1, 2 alebo sa nevyskytuje vôbec), ale v polárnej rubrike vo vysokom stupni (3 alebo 4).

Zložitejší príklad je uvedený v ďalšej analýze v Bönninghausenovom štýle:

Demo case, Andrew

Analýza 25. januára 2011, Bönninghausen style

Analýza používa 10 rubriky.

- 762 Generalities; Exercise, exertion; agg.
- 74 Generalities; Hanging down limbs; amel.
- 930 Generalities; Motion, motions; during
- 650 Generalities; Pressure; agg.
- 187 Generalities; Raising; agg.; limbs
- 590 Generalities; Sit, sitting; agg.
- 179 Generalities; Stand, standing; amel.
- 759 Generalities; Touch; agg.
- 656 Generalities; Warmth; agg.
- 102 Generalities; Wrapping up; agg.

Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Z.


	bell	bry	sulph	puls	phos	calc	led	rhust	lach	ars	nat-m	nux-v	merc	con	chin	ferr
Ge Exer																
Ge Hang																
Ge Moti																
Ge Press																
Ge Raisi																
Ge Sit,																
Ge Stan																
Ge Touch																
Ge Warm																
Ge Wrap																

Štandard

Demo case, Andrew

Analýza 25. januára 2011, Bönninghausen style

Analýza používa 10 rubriky.

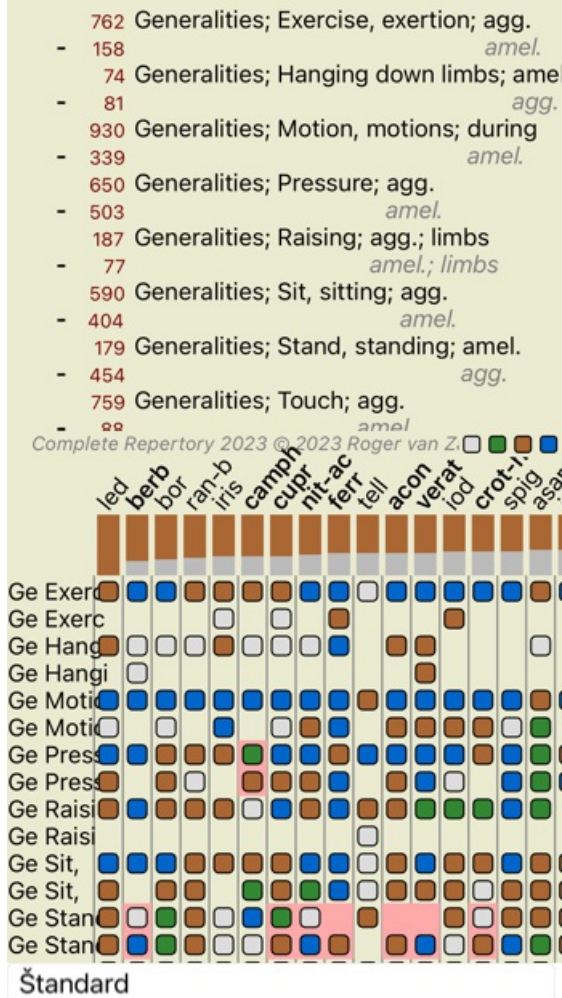

Skupiny rubriék

Zoskupovanie rubriék sa vykonáva vtedy, keď chcete, aby sa dve alebo viac rubriék počítalo, ako keby tvorili jednu rubriku.

Existujú dva spôsoby zoskupovania rubriék:

- Prechod. Používajú sa len tie prostriedky, ktoré sa vyskytujú vo VŠETKÝCH rubrikách.
- Kombinovanie. Používajú sa prostriedky z KTORÉHOKOLI z rubriék.

Príklady zoskupovania

Kríženie rubriék môže byť užitočné vtedy, keď v repertoári nie je rubrika, ktorá by presne opisovala symptóm pacienta, ale len všeobecnejšie rubriky.

Pacient vám napríklad povie, že počas horúčky má ráno v posteli úzkosť. Repertoár nemá rubriku *Mysel'; úzkosť; ráno; postel', v; horúčka, počas*. Namiesto toho však existujú dve všeobecnejšie rubriky *Mysel'; úzkosť; ráno; postel', v* a *Mysel'; úzkosť; horúčava teplo; počas*. Prekrižením týchto dvoch rubriék sa vytvorí nová skupinovú rubrika, ktorá obsahuje len tie lieky riedky, ktoré sa vyskytujú v oboch rubrikách.

Kombinácia rubriék môže byť užitočná, ak má pacient príznak, ktorý sa nenachádza presne, ale možno ho nájsť pod špecifickejšími príznakmi.

Napríklad chuť na pizzu. Prečo má pacient rád pizzu? Možno je to cesto (múčne jedlo), paradajky, šaláma, ančovičky, syr alebo olivy. Môže byť užitočné spojiť niekoľko takýchto špecifických rubriék do novej rubriky bez toho, aby sa narušili vzorce analýzy pridaním množstva špecifických rubriék, ktoré nemajú skutočný význam v porovnaní s hlavnými sťažnosťami pacienta.

Vytváranie skupín rubriék


Príkladom je prípad s bolesťami hlavy pri chôdzi a strachom z viacerých druhov zvierat:

Demo case, Andrew

Analýza 1. februára 2009, Grouping example

Analýza používa 5 rubriky.

57 Mind; Fear; dogs, of
12 Mind; Fear; rats
5 Mind; Fear; wolves, of
496 Head; Pain, headache; stitching
786 Generalities; Walk, walking; during

Chceme prekrížiť dve rubriky, ktoré spoločne opisujú bolesť hlavy. Vyberte rubriku *Head; pain; stitching* kliknutím na ňu a potom stlačte tlačidlo na paneli nástrojov . (Možnosť kontextového menu *Zoskupenie / Skupina s inými rubrikami...*). Zobrazí sa dialógové okno, v ktorom môžete vybrať rubriky, ktoré môžu byť prepojené s vybranou rubrikou. V hornej časti vyberte možnosť *Cross*. Vyberte rubriku *Generalities; walk, walking; during* a stlačte tlačidlo OK.

Pridanie rubriek do skupiny rubriek

Metóda zoskupovania

Štítok

Vyberte jednu alebo viac ru
do tejto skupiny:

Rubriky

Mind; Fear; dogs, of

Mind; Fear; rats

Mind; Fear; wolves, of

Head; Pain, headache; st

Generalities; Walk, walki

Zrušiť OK

Pre druhú skupinu použijeme inú metódu. Vyberte tri rubriky *Mind; fear* a ešte raz stlačte .

Demo case, Andrew

Analýza 1. februára 2009, Grouping example

Analýza používa 4 rubriky.

- 57 Mind; Fear; dogs, of
- 12 Mind; Fear; rats
- 5 Mind; Fear; wolves, of
- ▼ 408 **Prekrížené rubriky**
 - 496 Head; Pain, headache; stitching
 - 786 Generalities; Walk, walking; during

Teraz vyberte možnosť *Combine*, a stlačte tlačidlo OK.

Pridanie rubriék do skupiny rubriék

Metóda zoskupovania

Štítok

Vyberte jednu alebo viac ru
do tejto skupiny:

Rubriky

- Mind; Fear; dogs, of
- Mind; Fear; rats
- Mind; Fear; wolves, of

Zrušiť OK




Výsledný zoznam rubriék sa teraz stal:

Demo case, Andrew

Analýza 1. februára 2009, Grouping example

Analýza používa 2 rubriky.

- ▼ 66 *Kombinované rubriky*
 - 57 Mind; Fear; dogs, of
 - 12 Mind; Fear; rats
 - 5 Mind; Fear; wolves, of
- ▼ 408 *Prekrižené rubriky*
 - 496 Head; Pain, headache; stitching
 - 786 Generalities; Walk, walking; during

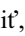Ak chcete zmeniť skupinu, kliknite na jej hlavnú rubriku a stlačte . V dialógovom okne zapínajte a vypínajte rubriky kliknutím na ne. Rubriku môžete zo skupiny odstrániť aj tak, že na ňu kliknete a stlačíte . (Možnosť kontextového menu *Zoskupenie / Odstránenie zoskupenia*). Ak chcete skupinu úplne odstrániť, kliknite na hlavnú rubriku skupiny a stlačte . (Možnosť kontextového menu *Zoskupenie / Odstránenie zoskupenia*).

V ponuke sú dve možnosti, ktoré vám umožnia rýchlo vytvoriť skupinu bez toho, aby ste museli vyberať rubriky v dialógovom okne, ako je uvedené vyššie.

Najprv môžete vybrať dve alebo viac rubriek a potom ich skombinovať. (Možnosť kontextového menu *Zoskupenie / Kombinácia vybraných rubriek*).

Najprv môžete vybrať dve alebo viac rubriek a potom ich prekrižiť. (Možnosť kontextového menu *Zoskupenie / Vybrané rubriky*).

Ako sa v analýze používajú rubriky

Pri krížení viacerých rubriek skupina obsahuje len tie lieky, ktoré sa vyskytujú na všetky rubriky v tejto skupine. Znamka z opravného prostriedku bude najnižšia známka z opravného prostriedku vo všetkých rubrikách.

Pri kombinácii viacerých rubriek skupina obsahuje lieky, ktoré sa vyskytujú na akejkoľvek rubriky v skupine. Znamka za opravu bude najvyššia známka nájdená pre opravu v ktorejkoľvek rubrike v skupine.

Prehľad rubriek

Niekedy je vhodné získať prehľad všetkých rubriek v analýze spolu s ich opravnými prostriedkami.

V prípade zoskupených rubriek môžete tiež chcieť zistiť, ktoré lieky sa vyskytujú vo výslednej skupine.

Ak chcete získať prehľad všetkých rubriek, stačí vybrať možnosť *Zobraziť prehľad rubriek*. (Možnosť kontextového menu *Viac na / Zobraziť prehľad rubriek*).

Otvorí sa modul *Find*, v ktorom sa zobrazia nasledujúce informácie:

COMBINED RUBRICS: MIND; FEAR; DOGS, OF / MIND; FEAR; RATS / MIND; FEAR; WOLVES, OF: absin acon agar **Alum** amph androc arn astac **BAC BELL** BOS-S BUFO CALC calc-ar carc **CAUST** cer chel **CHIN** choc **CIMIC** Con cupr-acet dor dpt dysp-n **Hydrog** HYOS insul **LAC-C** lac-d lac-f lac-h lach lycpr lyss mag-c **Manc** mand med **NAT-M** nat-p nit-ac op ory-c phos **Plac** plat **PLUT-N** polyst pras-c **PULS** **Sanic Scirr** SCORP sep sil sol-t **STRAM** sulph syc-co tax **TUB** tub-k verat **Xan**

MIND; FEAR; dogs, of: agar **Alum** amph androc astac **BAC BELL** BUFO CALC carc **CAUST** cer chel **CHIN** choc **Con** cupr-acet dor dpt dysp-n **Hydrog** HYOS insul **LAC-C** lac-d lac-f lac-h lach lycpr lyss mag-c **Manc** mand med **NAT-M** nat-p nit-ac ory-c phos plat **PLUT-N** polyst pras-c **PULS** **Sanic Scirr** SCORP sil sol-t **STRAM** sulph syc-co tax **TUB** tub-k verat **Xan**

MIND; FEAR; rats: absin acon arn bell **BOS-S** CALC calc-ar **CIMIC** op phos **Plac** sep

MIND; FEAR; wolves, of: amph bell cer chel dor

CROSSED RUBRICS: HEAD; PAIN, HEADACHE; STITCHING / GENERALITIES; WALK, WALKING; DURING: acan-p **ACON** act-sp adam **AESC AETH** AGAR **AGN** aids alch-v **ALL-C** allox **ALOE ALUM** **ALUM-P** ALUM-SIL ALUMN AM-C **AM-M AMBR** ammc **ANAC** anag **ANATH** ANG **ANT-C** ANT-T APIS apoc aq-des **ARAN** ARG **ARG-N** ARN **ARS** ARS-I ars-met ars-s-f **Ars-s-r** arum-t **ASAF** **Asar** asc-t astac aster **ATRO** AUR aur-ar aur-i **AUR-M-N** aur-s bacch-a **Bad** **BAMB-A** bapt **Bar-acet** **BAR-C** bar-i bar-m bar-s **BELL** bell-p **BERB** biti-g blatta **BOR** bos-s both-a **BOV** **BROM** Bros-g bruc **BRY** BUFO bux cadm-s cahin **Calad** **CALC** **Calc-acet** calc-ar calc-caust calc-f calc-i **CALC-P** **CALC-S** calc-sil calen **CAMPH** CANN-I cann-s **CANTH** **CAPS** caras carb-ac **CARB-AN**










Klasifikácia

Úvod do klasifikácie symptómov

Samuel Hahnemann's Organon a *Chronické choroby* nám ukazujú, že Hahnemann nevyberal svoje lieky na základe súhrnu všetkých symptómov, ktoré možno nájsť v pacientovej súčasnej alebo minulej situácii. Príznaky pacienta starostlivo rozdelil do niekoľkých kategórií a na základe tejto klasifikácie založil svoju liečbu.

K dispozícii je Hahnemannova klasifikácia, ako aj používateľom definované skupiny A, B, C, D a E pre vaše vlastné použitie.

Možnosti klasifikácie, ktoré sú k dispozícii na paneli nástrojov na ľavej strane obrazovky:

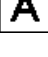Symbol	Názov	Význam
	Psora	Základné poruchy. Organon 6. vydanie § 80 (psorická miasma).
	Incident	Biografická udalosť, veci, ktoré sa pacientovi stali a mali na neho vplyv. Akútne ochorenie. Organon § 72 (škodlivé vplyvy).
	Epidémia	Choroby, ktoré sa prenášajú z vonkajšieho zdroja: chrípka, legionella, SARS, osýpky, mumps a iné. (Medzi-ochorenia). Organon § 73 (epidemické choroby).
	Akútne miasmatické	Choroba vychádza zvnútra, často ju spúšťa nejaká udalosť, podnet prichádzajúci zvonka. Ťažnosti sú závažné. Organon § 73 (prechodná explózia latentnej psory).
	Zdedená tendencia	Tie choroby, ktoré sa vyskytli u predkov a ktoré sa geneticky prenášajú na pacienta.
	Iatrogénne	Používanie liekov a očkovaní, ktoré niekto absolvoval. Organon § 74.
	Sykóza	Infekcia kvapavkou. Organon § 79 (sykotická miasma).
	Syfilis	Infekcia syfilisom. Organon § 79 (syfilitická miasma).
	Používateľ A	Bezplatne na vlastné použitie.

B	Používateľ B	Bezplatne na vlastné použitie.
C	Používateľ C	Bezplatne na vlastné použitie.
D	Používateľ D	Bezplatne na vlastné použitie.
E	Používateľ E	Bezplatne na vlastné použitie.

Klasifikáciu možno použiť na úrovni Symptómov alebo na jednotlivých rubrikách. Nastavenie klasifikácie na príznak sa použije na všetky rubriky v príznaku. Akékoľvek nastavenie, ktoré bolo použité pre rubriky, sa potom už nebude používať.

Pozrite si tiež ukážkový prípad *Jednoduchý príklad klasifikácie*.

Filter a klasifikácia nápravných opatrení

Ak sa v analýze použije klasifikácia symptómov alebo rubriky, lieky pre každú analýzu sa automaticky filtrujú. Toto filtrovanie sa vykonáva v súlade s informáciami, ktoré sa nachádzajú v Hahnemannových spisoch.

Pre *Psora*, lieky sú: všetky minerály a nosódy, plus Lach, Lyc, Sep, ale okrem Merc.

Pre *Incident*, *Akútny miasmatický*, *Epidemický*, lieky sú: všetky rastliny a zvieratá, plus Merc, Ars, Ant-c.

Pre *Iatrogénne*, lieky sú tie, ktoré sa nachádzajú v rubrikách *Intoxikácia po liekoch*, a *Ochorenia z očkovania*.

Pre *Zdedená tendencia*, lieky sú: všetky nosódy.

V prípade ostatných skupín sú uvedené všetky lieky.

Clipboardy

Triedy A-B-C-D-E možno použiť aj ako nástenky. Ich priradením k príznakom alebo jednotlivým rubrikám je možné veľmi jednoducho vytvoriť rôzne pohľady na výsledky analýzy.

Viac informácií

Vyššie uvedené informácie o klasifikácii sú obmedzené.

Vynikajúce informácie o používaní Hahnemannovej klasifikácie nájdete na webovej stránke <http://www.ewaldstoteler.com>

Viacere pohľady

Teraz viete, ako vytvoriť analýzu. Viete tiež, ako doladiť analýzu na základe vašej interpretácie symptómov v tomto konkrétnom prípade.

Príznakom alebo rubrikám ste mohli priradiť váhy. Možno ste im priradili klasifikácie. Vybrali ste vzorec analýzy na zváženie dôležitosti opravných prostriedkov pre použité rubriky. A možno ste filtrovali výsledky na základe daného kráľovstva liekov.

Všetky tieto nastavenia vám pomohli získať najlepší výsledok analýzy na základe vašej interpretácie prípadu.

Je to však vaša interpretácia, váš pohľad na pacientove príznaky. Tieto príznaky sú nemenné, sú to pozorované skutočnosti, ktoré ste zhromaždili. Bez ohľadu na to, aký máte názor, pozorované príznaky sú skutočnosťou, s ktorou musíte pracovať. (Organon §18)

Mohli by ste však zvážiť, či sa na tie isté príznaky pozrieť z inej perspektívy, iným pohľadom, interpretovať ich iným spôsobom. Môžete samozrejme zmeniť všetky nastavenia analýzy a zistiť, čo sa stane. Potom sa však vaša pôvodná analýza zmenila a ak ju chcete znovu zobraziť, musíte zmeniť všetky zmenené nastavenia.

Aby ste mohli upravovať nastavenia analýzy bez straty pôvodných nastavení, vytvorili sme viacnásobné zobrazenia.

Čo je to analytické zobrazenie?

Zobrazenie analýzy je súhrn všetkých nastavení, ktoré môžete použiť na analýzu.

Závažia	•0 •1 •2 •3 •4
Klasifikácia	○ ⚡ ⋯ ⌒ ⌒→⊗× A B C D E
Symptómy rovnováhy	⌚
Správne Polar	↔
Analytický vzorec	Napríklad "Malé lieky"
Filter Remedy	Napríklad "Rastliny"

Môžete vytvoriť viacero zobrazení, pričom každé z nich bude mať vlastnú kolekciu nastavení.

Ako príklad si pozrite *Ukážkový prípad Andrew*, analýzu *Viacere pohľady*.

Vytvorenie zobrazenia

Nové zobrazenie môžete vytvoriť prostredníctvom ponuky alebo panela nástrojov. (Možnosť kontextového menu *Zobraziť* / *Pridanie*

nového zobrazenia).

Nové zobrazenie je kópiou pôvodného zobrazenia s presne rovnakými nastaveniami. Všetky zmeny, ktoré vykonáte v nastaveniach v novom zobrazení, sa týkajú výlučne tohto zobrazenia. Všetky ostatné pohľady zostávajú rovnaké ako predtým. Ak chcete, môžete nové zobrazenie voliteľne pomenovať.

Všimnite si, že všetky pohľady používajú presne ten istý súbor príznakov a rubriík. Situácia pacienta je rovnaká, len vaša interpretácia je pri každom pohľade iná.

Z jedného zobrazenia na druhé môžete ľahko prepínať prostredníctvom ponuky. (Možnosť kontextového menu *Zobraziť / Standard*).

Ak už nechcete používať vybrané zobrazenie, môžete ho odstrániť. (Možnosť kontextového menu *Zobraziť / Odstránenie aktuálneho zobrazenia*).

Vždy môžete zmeniť názov, ktorý ste zobrazeniu prideliť. (Možnosť kontextového menu *Zobraziť / Premenovanie aktuálneho zobrazenia*).


Môžete tiež zmeniť poradie, v akom sa zobrazujú pohľady v ponuke alebo na paneli nástrojov. (Možnosť kontextového menu *Zobraziť / Presun aktuálneho zobrazenia doľava*).

Pri pohľade na výsledky analýzy jednotlivých zobrazení

V oblasti výsledkov analýzy v pravej časti obrazovky sa zobrazujú výsledky analýzy pre vybraný pohľad. Keď prepnete na iné zobrazenie, výsledky sa menia na výsledky pre toto zobrazenie.

Môžete si tiež pozrieť všetky výsledky zobrazenia súčasne. (Tlačidlo na paneli nástrojov ).

Bude to vyzerať takto:

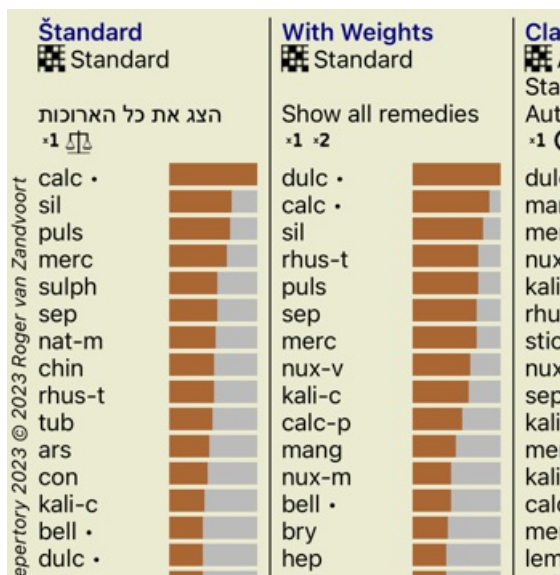

Je podobný prehľad zoznamu pre analýzu, ale zobrazuje jeden zoznam výsledkov na jedno zobrazenie.

V hornej časti sa zobrazí súhrn nastavení použitých pre jednotlivé zobrazenia.

- Analýza vybraná pre štýl výstupu tabuľky.
- Ak sa pri analýze používa klasifikácia, uvedie sa vzorec analýzy, ktorý sa používa.
- Použitý filter nápravných opatrení.
- Malý obrázok pre každé nastavenie analýzy v platnosti.

Bönnighausen

Niektoré informácie o Bönnighausenovej analýze

Metóda Bönnighausenovej analýzy nepoužíva iný repertoár, pracuje s *Complete Repertory* ako ostatné analýzy. Všetky rubriky v starých repertoároch Bönnighausenov sú uvedené na stránke *Complete Repertory*.

Bönnighausenov analytický systém je metodika, ktorú použijete, keď si to symptómy pacienta vyžadujú, nemá nič spoločné s konkrétnym druhom repertória, má do činenia s rubrikami, ktoré sú zovšeobecnené a ktoré možno nájsť v každom repertóriu.

Rozdiel je v spôsobe výpočtu.

Namiesto toho, aby sme sa pozerali len na to, ako je liek zastúpený v danej rubrike, kladieme veľký dôraz na jeho výskyt v príbuzných rubrikách v iných častiach repertória.

Výpočet sa vykonáva takto:

- Ignorujte známku z opravného prostriedku, ako je zobrazená v rubrike.
- Namiesto toho použite známku za lieky, ktorá sa vypočíta z výskytu opravného prostriedku v súvisiacich rubrikách.
- Pridajte lieku väčšiu váhu, ak sa vyskytuje vo viacerých príbuzných rubrikách v rôznych repertoárových sekciách (napr. Myseľ, Hlava, Generalita atď.).

- Vykonajte opravy pre výskyt v polárnych rubrikách (ako amel. - agg., alebo desire - averzia).

Pri Bönninghausenovom štýle analýzy sa vo všeobecnosti používajú všeobecnejšie a rozsiahlejšie rubriky. Kombinované používanie menších špecifických rubrik s väčšími všeobecnými rubrikami nie je vo všeobecnosti užitočné.

Kvalita analýzy

Umenie urobiť dobrú analýzu

Urobiť dobrú analýzu symptómov pacienta je umenie, ktorého zvládnutie nie je samozrejmé. Rôzne školy môžu vyučovať rôzne metódy. Jednotliví učitelia presadzujú svoje osobné štýly a teórie. A dobrá analýza je u každého pacienta iná.

Nástroj Kvalita analýzy sa vám snaží pomôcť predchádzať bežným chybám, čím zvyšuje šancu na úspech.

Ukazovateľ kvality

V module Analysis sa v hornej časti stránky zobrazí malé farebné tlačidlo.

Farba označuje kvalitu analýzy.


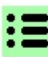
- Zelená: Zelená: len menšie odporúčania na zlepšenie.
- Žltá farba: Kvalita sa môže zlepšiť.
- Červená: S touto analýzou sú vážne problémy.

Kliknutím na ukazovateľ kvality zobrazíte správu s návrhmi na možné zlepšenie.

Modul Materia Medica

Otvorenie modulu Materia Medica

Prejdite do modulu Materia Medica kliknutím na kartu *MM*.



Complete

Allen, He

Keynote

The Mai

Allen, Tir

Clinical

The Enc

Anschut

New, ok

Boericke

Pocket

Boger, C

A synop

Bönningl

Charact

Clarke, J

Dictione

Cowpert

A Textb

Dewey, V

Essentie

Farringtc

Clinical

Hahnem

Materia

Organoi

Hansen,

A Text-É

Hering, C

The Gui

Hutchins

700 Rec

Kent, Jar

Boericke, William - Pocket Ma (...)


Arnica montana


Leopard's Bane


Produces conditions upon the system quite similar to those resulting from injuries, falls, blows, contusions. Tinnitus aurium. *Putrid phenomena*. Septic conditions; prophylactic of pus infection. Apoplexy, red, full face.


It is especially suited to cases when any injury, however remote, seems to have caused the present trouble. *After traumatic injuries*, overuse of any organ, strains. Arnica is disposed to cerebral congestion. Acts best in plethoric, feebly in debilitated with impoverished blood, cardiac dropsy with dyspnea. A muscular tonic. Traumatism of grief, remorse or sudden realization of financial loss. Limbs and body ache as if beaten; joints as if sprained. Bed feels too hard. Marked effect on the blood. Affects the venous system inducing stasis. Ecchymosis and hemorrhages. Relaxed blood vessels, black and blue spots. Tendency to hemorrhage and low-fever states. Tendency to tissue degeneration, septic conditions, abscesses that do not mature. *Sore, lame, bruised feeling*. Neuralgias originating in disturbances of pneumo-gastric. Rheumatism of muscular and tendinous tissue, especially of back and shoulders. Aversion to tobacco. *Influenza*. Thrombosis. Hematocele.


Mind. -Fears touch, or the approach of

 Index


 Kniha

 Nájsť

 Prípad

 MM


Výber nápravného prostriedku

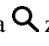Skratku lieku môžete zadať do poľa vyššie na paneli s nástrojmi. Ak skratku nepoznáte, môžete si liek vyhľadať stlačením tlačidla  za poľom.

Výber knihy

Po výbere lieku si môžete vybrať niektorý zo zdrojov Materia Medica uvedených na ľavej strane obrazovky. Ak sa vybraný liečivý prostriedok v knihe nevyskytuje, názov knihy sa vytlačí sivou farbou.

Complete
Allen, He
Keynote
The Ma
Allen, Tir
Clinical
The Enc
Anschut
New, ol
Boericke
Pocket
Boger, C
A synop
Bönningl
Charact
Clarke, J
Dictione
Cowpert
A Textbo
Dewey, V
Essentia
Farrington
Clinical
Hahnema
Materia
Organoi
Hansen,
A Text-b
Hering, C
The Gui
Hutchins
700 Rec
Kent, Jar

Ak chcete využiť maximum miesta na čítanie, môžete index skryť pomocou tlačidla na paneli nástrojov .

Boericke, William - Pocket Manual of (...)

Arnica montana

Leopard's Bane

Produces conditions upon the system quite similar to those resulting from injuries, falls, blows, contusions. Tinnitus aurium. *Putrid phenomena*. Septic conditions; prophylactic of pus infection. Apoplexy, red, full face.


It is especially suited to cases when any injury, however remote, seems to have caused the present trouble. *After traumatic injuries*, overuse of any organ, strains. Arnica is disposed to cerebral congestion. Acts best in plethoric, feebly in debilitated with impoverished blood, cardiac dropsy with dyspnea. A muscular tonic. Traumatism of grief, remorse or sudden realization of financial loss. Limbs and body ache as if beaten; joints as if sprained. Bed feels too hard. Marked effect on the blood. Affects the venous system inducing stasis. Ecchymosis and hemorrhages. Relaxed blood vessels, black and blue spots. Tendency to hemorrhage and low-fever states. Tendency to tissue degeneration, septic conditions, abscesses that do not mature. *Sore, lame, bruised feeling*. Neuralgias originating in disturbances of pneumo-gastric. Rheumatism of muscular and tendinous tissue, especially of back and shoulders. Aversion to tobacco. *Influenza*. Thrombosis. Hematocele.

Mind. -Fears touch, or the approach of anyone. Unconscious; when spoken to answers correctly, but relapses. Indifference; inability to perform continuous active work; morose, delirious. Nervous; cannot bear pain; whole body oversensitive. Says there is nothing the matter with him. Wants to be let alone. Agoraphobia (fear of space). After mental


[Index](#)
[Kniha](#)
[Nájsť](#)
[Prípad](#)
[MM](#)

Index nápravných opatrení

Ak chcete získať prehľad o všetkých opravných prostriedkoch, ktoré sú v knihe k dispozícii, otvorte kontextové menu na názve knihy. (Možnosť kontextového menu *Index*).

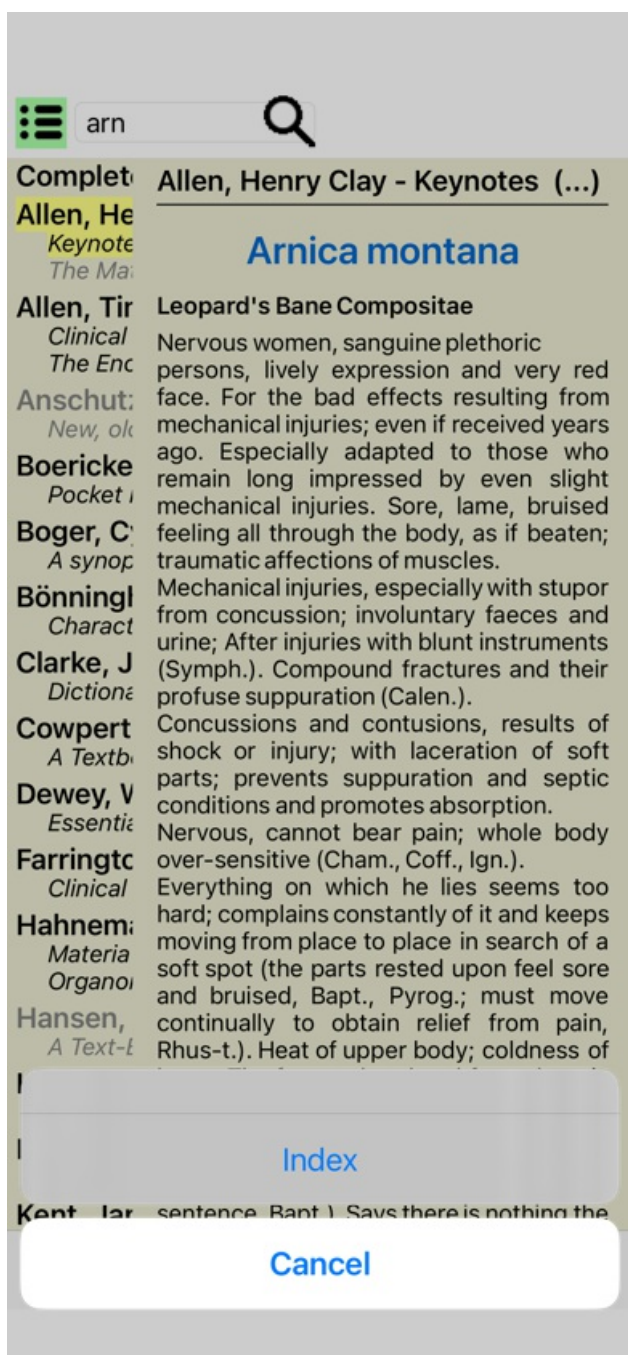

V knihe je uvedený zoznam všetkých liekov. Kliknutím na názov lieku môžete otvoriť knihu pre daný liek.

Allen, Henry Clay / Keynotes a

Abrotanum
Aceticum acidum
Aconitum napellus
Aesculus hippocastanum
Aethusa cynapium
Agaricus muscarius
Agnus castus
Allium cepa
Aloe socotrina
Alumina
Ambra grisea
Ammonium carbonicum
Ammonium muriaticum
Amylenum nitrosum
Anacardium orientale
Anthracinum
Antimonium crudum
Antimonium tartaricum
Apis mellifera
Apocynum cannabinum
Argentum metallicum
Argentum nitricum
Arnica montana
Arsenicum album
Arum triphyllum
Asarum europaeum
Asterias rubens
Aurum metallicum

Baptisia tinctoria
Baryta carbonica
Belladonna
Benzoicum acidum
Berberis vulgaris
Bismuthum oxidatum
Borax veneta
Bovista

Dostupné knihy a internetové stránky

V module Materia Medica je k dispozícii niekoľko kníh. Dostupnosť týchto kníh sa môže líšiť v závislosti od jazykových nastavení.

Modul Materia Medica integruje niekoľko internetových stránok, ktoré poskytujú informácie o liekoch. Dostupnosť týchto webových stránok závisí od nastavenia jazyka.

Upozorňujeme, že obsah internetových stránok nie je súčasťou *Complete Dynamics*, ale je zobrazený len v module Materia Medica pre vaše pohodlie.

Niektoré webové stránky môžu od vás požadovať platbu za prístup k informáciám. Ide výlučne o politiku vlastníka webovej lokality a nijako nesúvisí s vašou licenciou *Complete Dynamics*.

Reverzná Materia Medica

Na stránke *Reverse Materia Medica* nájdete najdôležitejšie symptómy z repertória pre daný liek tak, ako sa nachádzajú v repertóriu. Žiadny výklad nerobia ľudskí odborníci, ako je to bežne v bežnej Materia Medica, *Reverzná Materia Medica* je založená výlučne na odborných znalostiach uložených v repertoári.

Ak chcete prejsť na rubriku v module *Book*, jednoducho na ňu dvakrát kliknite.

Dôležitejšie príznaky sú vytlačené väčšou veľkosťou ako menej dôležité príznaky, takže môžete ľahko rozlíšiť relatívnu dôležitosť jednotlivých príznakov.

Výsledky môžete upraviť pomocou nasledujúcich tlačidiel:

Filter V rozbaľovacom zozname filtrov môžete vybrať kritériá pre rubriky, ktoré sa zobrazia v reverznom zozname *Materia Medica*:

<i>Automatické</i>	Automaticky sa vyberú najvhodnejšie rubriky.
<i>Potvrdené príznaky</i>	Používajú sa len lieky v stupni 3 alebo 4. Tieto príznaky sa potvrdzujú v praxi.
<i>Kompletné príznaky</i>	Používajú sa len úplné príznaky. Príznaky sú úplné, ak kombinujú aspoň 3 rôzne druhy informácií. Príklad: Príklad: Čas + miesto + predĺženie.
<i>Potvrdené a dokončené</i>	Zobrazené sú len <i>potvrdené</i> a <i>úplné</i> príznaky.
<i>Príznaky červenej čiary</i>	Uprednostňuje symptómy, ktoré sa vyskytujú príbuzným spôsobom vo viacerých častiach repertoáru.
<i>Kľúčové poznámky</i>	Tento liek má stupeň 3 alebo 4, ale všetky ostatné lieky majú nižší stupeň.
<i>Jedinečné rubriky</i>	Zobrazte len rubriky, v ktorých je tento prostriedok jediným vyskytujúcim sa prostriedkom.

Ďalšie *Materia Medica*

Ďalšie knihy *Materia Medica*, ktoré vytvorili iní používatelia, možno ľahko pridať do *Complete Dynamics*. Kniha *Materia Medica* je uložená v súbore, ktorý možno zdieľať s ostatnými používateľmi. Ak chcete nainštalovať novú knihu, skopírujte súbor do priečinka *Complete Dynamics*, ktorý sa nachádza v priečinku *Documents*. Potom zastavte a reštartujte *Complete Dynamics*. Nová kniha by potom mala byť automaticky viditeľná v sekcii *MM*.

Vytváranie nových kníh *Materia Medica* si vyžaduje licenciu pre *Master Edition*.

Materia Medica rýchle zobrazenie

Môže byť veľmi pohodlné rýchlo zobrazíť text *Materia Medica* z viacerých kníh súčasne.

Okno rýchleho zobrazenia *Materia Medica* zobrazuje text viacerých kompaktnejších kníh *Materia Medica* súčasne. (Možnosť kontextového menu *Materia Medica* rýchle zobrazenie).

Cyclamen Europaeum

Pharmacokinship - Remedy Relations (Nambison)

Followed well by: Phos., Puls., Rhus-t., Sep., Sulph.

Antidoted by: Camph., Coff., Puls.

Duration of action: 14 - 20 d

Dose: 3 attenuation

700 Red Line Symptoms (Hutchinson)

1. - Flickering before the eyes, as of various colours, glittering needles, fiery specks and sparks.

Keynotes of the homeopathic Materia Medica (Lippe)

Sow Bread

Pressing, drawing and tearing pain, principally in the periosteum.

Chilblains of the feet.

As long as he walks about he feels well with the exception of languor,

but as soon as he sits down, especially in the evening, he suffers various inconveniences.

Thirstlessness.

Menses too profuse.

Bad effects from eating much fat food (pork).

Aggravation in the evening and while at rest.

Amelioration whilst walking.

Keynotes and Characteristics (Allen)

Sow Bread Primulaceae

Best suited for leucophlegmatic persons with anaemic or chlorotic conditions; easily fatigued, and in consequence not inclined to any kind of labor; feeble or suspended functions of organs or special senses. *Pale, chlorotic; deranged menses* (Ferr., Puls.), accompanied by vertigo, headache, dim vision. Pains; pressive, drawing or tearing of parts where bone lie near the surface. Ailments: from suppressed grief and terrors of conscience; from duty not done or bad act committed. Great sadness and peevishness, irritable, morose, ill-humored; inclined to weep; desire for solitude; *aversion to open air* (reverse of Puls.). Headache in

Zatvorit

Informácie o nápravnom prostriedku

Podrobné informácie o opravnom prostriedku

Ako príklad uvidíme rubriku *Všeobecné informácie; Potraviny a nápoje; jablká; túžby*:

FOOD	GENERALITIES
FOOD and drinks; apples (cont.)	
desires: adam Adon ALOE aml-n ANT-T ap-g arge-p Asaf biti-at bros-g Cham cit-n cub dama-d fel GUAI Hafn helod-c kali-p lac-drom lsd lyss Manc menth merl meteo-a ory-c ozon phos polyst prun pyrus-c Ruta sabad sep stront-c SULPH tax TELL toxop-p Tritic-v vip	
• Food and drinks; cool things, like apples, desires (2)	
• Food and drinks; fruits; desires (233)	
• eleven thirty pm., on falling asleep: fel	
• Night, nine pm. - five am.; agg.; eleven thirty pm. (8)	
• water, with desire for cold: ANT-T	
• Food and drinks; cold; drinks; desires (342)	
• butter: lyss	
• cider	
• Food and drinks; cider; desires (6)	
• juice: Adon ozon	
• cold: Adon ozon	
• Food and drinks; cold; drinks; desires (342)	
• Food and drinks; fruits; desires; juicy, juices (47)	
• sour: Adon cit-n	
• Food and drinks; fruits; desires; sour, acid (26)	
• strudel: meteo-a	
aromatic food	
agg., smell of: ign puls	
• Food and drinks; food in general; agg.; smell of (109)	
• Odors, strong, agg. (169)	
desires	
• Food and drinks; herbs, desires (11)	
• drinks: anath	
• food: bufo meteo-a	
artichokes	
aversion: abies-c acon MAG-C sulph	
• Food and drinks; vegetables; aversion (95)	
desires: ABIES-C	
• Food and drinks; vegetables; desires (133)	
artificial agg.: ALUM ARS CALC calc-p gaert lyc	

Ak chcete získať ďalšie informácie, dvakrát kliknite na **ANT-T**.
Zobrazí sa okno Remedy Information:

Informácie o nápravnom prostriedku

Rubrika: GENERALITIES: FOOD and drinks; apples; desires.

Skratka nápravného prostriedku: ant-t, stupeň 3.

Štandardný názov: Antineosinum tartaricum.

Výskyty v súvisiacich rubrikách: 2, priemerná známka: 2.0.

Zdroje:

Allen T F *Encyclopedia of Pure Materia Medica*, 1874.

Allen T F *Index of Encyclopedia*, 1876.

Böttger J A M *Systematisches alphabetisches Repertorium der antiparischen und nicht antiparischen Arzneien nach handverlesenen Anweisungen*, 1833.

Klein C B *Repertory of Hering's Guiding Symptoms*, 1896.

Lizafal S *Homoeopathic Therapeutics*, Jan. B. (New Delhi), 1890.

Lyons A M *Known and Red line symptoms of Materia Medica*, 1915.

Smith A *Materia Medica Para Project*, 2018.

Wiegand T O *Handbuch der homöopathischen Arzneimittelehre III*. T.O. Weigel (Leipzig), 1847.

Zatvoriť

Výskyt v súvisiacich rubrikách

Súvisiace rubriky sú rubriky, ktoré majú určitý vzťah k rubrike, ktorú si prezeráte pre tento liečivý prostriedok.

V tomto príklade sú to tieto rubriky:

Všeobecné informácie; Jedlo a nápoje; chladné veci, ako sú jablká, túžby

Všeobecne; Jedlo a nápoje; jablká, túžby; voda, s túžbou po chlade

Obe tieto rubriky obsahujú aj *ant-t*.

Čím vyšší je počet výskytov v súvisiacich rubrikách a čím vyššia je priemerná váha v týchto rubrikách, tým väčší význam možno priradiť nápravnému opatreniu.

Zdroje

Uvádza všetky zdroje, z ktorých liek pochádza. To zahŕňa aspoň meno autora, názov knihy alebo časopisu a rok vydania.

Počet autorov

Ak ste predtým pracovali s *MacRepertory*, možno ste si zvykli používať čísla autorov namiesto ich mien.

V nastaveniach predvolieb môžete aktivovať možnosť *Autorské čísla*. Podrobnosti nájdete v časti *Preferences*.

V okne s informáciami o nápravnom prostriedku sa potom zobrazia aj čísla autorov:

Informácie o nápravnom prostriedku

Rubrika: GENERALITIES: FOOD and driaks; apples: desires.

Skratka nápravného prostriedku: ant-t, stupeň 3.

Štandardný názov: Antineosolium tartaricum.

Výskyty v súvisiacich rubrikách: 2, priemerná známka: 2.0.

Zdroje:

- Allen T F (1874) *Encyclopedia of Pure Materia Medica*, 1874.
- Allen T F (1876) *Index of Encyclopedia*, 1876.
- Bergström C M (1833) *Systematisches alphabetisches Repertorium der antiparischen und nicht-antiparischen Arzneien with handwriten annotations*, 1833.
- Kerr C B (1896) *Repertory of Hering's Guiding Symptoms*, 1896.
- Litfalvi S (1890) *Homoeopathic Therapeutics*, Jain, B. (New Delhi), 1890.
- Lippmann (1915) *Ke-motes and Red line symptoms of Materia Medica*, 1915.
- Smith A (2018) *Materia Medica Para Project*, 2018.
- Trojan T O (1847) *Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III*, T.O. Weigel (Leipzig), 1847.

Zatvoriť

Nájsť pole

Výkonné a ľahko použiteľné vyhľadávanie

Nájsť 

- Text** Fragmenty textu sa automaticky interpretujú ako text, ako keď ho zadávate do jednotlivých polí *Text*. Platí tu rovnaké použitie znakov /, + a - (pozri príklady v časti *Nájsť modul*). V uvedenom príklade sa vyhľadáva slovo *menses* v kombinácii s *pred* alebo *počas*.
- Lieky** Skratky liekov musia byť ukončené bodkou. V poli *Remedies* je to nepovinné, ale musíte ho ukončiť bodkou, aby nedošlo k zámene fragmentov textu a skratiek prostriedkov. (Príklad zámeny: *sep* môže znamenať buď *sepia* alebo *separácia*). Platí tu rovnaké použitie / a +, pozri príklady v časti *Nájsť modul*. V uvedenom príklade sa vyhľadávanie vykonáva buď na stránke *sepia* alebo *cimicifuga*. Poznámka: aj prostriedky, ktoré samy o sebe nie sú skratkou (napríklad *Apis* alebo *Bufo*), musia byť ukončené bodkou (apis. bufo.).
- Gradácia** Minimálne stupne nápravy 1 až 4 možno určiť zadaním *1, *2, *3 alebo *4. Tento výraz možno čítať ako: Všetky (*) požadované lieky musia mať tento alebo vyšší stupeň. Alternatívne sa čísla 1, 2, 3 a 4 bez * interpretujú aj ako minimálna gradácia nápravy. Takže 4 je to isté ako *4.
- Veľkosť rubriky** Minimálnu a maximálnu veľkosť rubriky možno určiť číslom, pred ktorým sa uvedie > alebo <. <50 znamená 50 alebo menej opravných prostriedkov. >10 znamená 10 alebo viac opravných prostriedkov. Prípadne sa akékoľvek číslo začínajúce číslom 5 a vyšším automaticky interpretuje ako maximálna veľkosť rubriky. Takže 50 je to isté ako <50.

Príklady

Rozšírime uvedený príklad o obmedzenie na rubriky, ktoré obsahujú najviac 50 opravných prostriedkov. Všetky nasledujúce spôsoby zadávania kritérií vedú k rovnakému výsledku:

sep. cimic. menses pred/počas *3 <50
sep. cimic. menses pred/počas 3 50
menses sep. pred / počas 3 <50 cimic.
50 menses+pred/počas sep./cimic. 3
menses pred /počas sep. 2 cimic. 200 50 3

V poslednom príklade vidíte, ako sa pôvodná gradácia 2 neskôr nahradí 3 a maximálna veľkosť rubriky 200 sa zmení na 50. V príklade sa to môže zdať máťúce, ale v skutočnosti je to veľmi efektívne, keď hľadáte a chcete zúžiť výsledky vyhľadávania. Nové kritérium môžete zadať bez toho, aby ste museli predtým zadané kritérium odstrániť; posledné kritérium jednoducho nahradí prvé.

Tip: Nezabudnite, že pri vyhľadávaní textu sa používajú aj špeciálne zápisy =, * a "":
=dog nájde *dog*, ale nie *dogmatic*.
*ation nájde *palpitácie*, ako aj *potenie* a *ovuláciu*.
"on je" nájde len *on* a *je*, ak sú presne v tomto poradí.

Nastavenia predvolieb

Niektoré možnosti programu je možné konfigurovať podľa vašich osobných preferencií. Tieto možnosti môžete zmeniť prostredníctvom tlačidla de *Preferences* v module *Index*.

Otvorí sa dialógové okno s niekoľkými časťami.

Všeobecné nastavenia

Predvoľby

Jazyk programu	<input type="text" value="Slovenská"/>
Animácie	<input type="checkbox"/>
Optimalizácia pre	<input type="text" value="Vyššia rýchlosť"/>
Zahrňte Kentov repertoár	<input type="checkbox"/>

Všeobecné

Kniha

Prípad

Analýza

MM

Zrušiť

OK

Jazyk programu Na výber máte niekoľko jazykových možností.

Dostupné jazyky sa môžu líšiť v závislosti od verzie *Complete Dynamics*; jazyky, ktoré nie sú k dispozícii, môžu byť pridané v novej verzii.

Animácie V niektorých častiach aplikácie *Complete Dynamics* sa používajú animácie, napríklad pri otváraní a zatváraní prípadu. Vyzerajú pekne, ale ich dokončenie trvá dlho. Ak tieto animácie nechcete, zrušte začiarknutie tejto možnosti.

Štandardný názov písma Tu si môžete vybrať preferované písmo, ktoré bude program používať.

Optimalizácia pre Toto nastavenie ovplyvňuje využitie pamäte aplikácie iPhone.
Vyššia rýchlosť. Ak je táto možnosť zvolená, program sa pokúša uchovávať údaje v pamäti, aby sa zvýšila rýchlosť. Táto možnosť sa odporúča, ak pracujete prevažne s programom *Complete Dynamics*.
Menšie využitie pamäte. Ak je táto možnosť zvolená, program pri prepnutí na iný program uvoľní čo najviac pamäte. Znižuje sa tým riziko ukončenia v zariadení iPhone, ale program je pomalší. Táto možnosť sa odporúča, ak pracujete s viacerými programami alebo ak máte starší iPhone.

Zahrňte Kentov repertoire Túto možnosť zaškrtnite, ak chcete, aby bol repertoire *Kent's Repertory*, 6. vydanie k dispozícii ako samostatný repertoire.
Celý obsah *Kent's Repertory* je už zahrnutý v *Complete Repertory*. Niektorí ľudia však dávajú prednosť konzultáciám na *Kent* bez všetkých dodatkov z iných materiálov.
Po zaškrtnutí tejto možnosti bude v module *Index* k dispozícii *Kent*.

Nastavenia knihy

Predvoľby

Jazyk repertoáru Angličtina

Počet autorov ☐

Zobraziť veľkosť rubriky ☐

Rubriky v abecednom poradí ☐

Všeobecné **Kniha** Prípady Analýza MM

Zrušiť OK

- Jazyk repertoáru** Jazyk, ktorý sa má používať v repertoári.
Druhou možnosťou je sekundárny jazyk, ktorý sa zobrazí za textom rubriky. Druhý jazyk je k dispozícii len v prípade, že ste si zakúpili repertoárový preklad.
- Počet autorov** Ak je táto možnosť začiarknutá, okrem mien autorov sa zobrazujú aj čísla autorov v štýle MacRepertory.
- Horizontálne posúvanie** Ak je táto možnosť začiarknutá, je povolená funkcia horizontálneho posúvania.
Táto funkcia môže byť k dispozícii len vtedy, ak myš alebo trackpad podporuje horizontálne posúvanie.
- Zobraziť veľkosť rubriky** Ak je začiarknuté, modul Kniha vždy zobrazuje počet opravných prostriedkov pre rubriku. Ak nie je začiarknuté, číslo sa zobrazí len vtedy, keď nie sú viditeľné lieky.
- Rubriky v abecednom poradí** Ak je začiarknuté, modul Kniha vždy zobrazuje rubriky v abecednom poradí. Ak nie je začiarknuté, použije sa štandardné poradie repertoáru, ako ho zaviedol Kent.


Nastavenia prípadu

Predvoľby

Minúty do automatické...

Automatické vymazanie archivovaných prípadov

Používanie cloudového servera

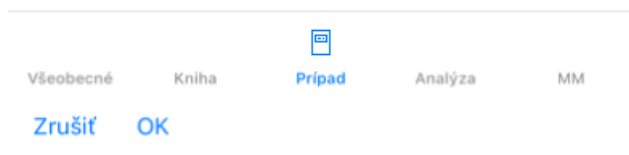

Minúty do automatického uzamknutia prípadov

V prípade, že ste nastavili heslo na ochranu informácií o pacientovi, táto možnosť nastavuje počet minút, po ktorých sa modul Prípad automaticky uzamkne. Ak tu zadáte 0, automatické uzamknutie sa nevykoná.

Automatické vymazanie archivovaných prípadov

Vyberte, po akom čase sa majú archivované prípady natrvalo vymazať. Ak vyberiete *Nikdy*, archivované prípady sa automaticky nevymažú.

Používanie cloudového servera

Ukladajte kópie svojich prípadov na cloudový server.

Nastavenia analýzy

Predvoľby

Remedy farbenie HFA






Zobrazte len relevantné rubriky



Analytické vzorce

Štandard	✓
Malé opravné prostriedky	✓
Malé rubriky	
Bönninghausen	✓
Jednoduché počítanie	✓



Všeobecné

Kniha


Pripad


Analýza

MM

Zrušiť

OK

Remedy farbenie HFA Ak je táto možnosť začiarknutá, analýza môže farebne opraviť podľa metódy analýzy tváre Granta Bentleyho. V module Analýza sa objaví nové tlačidlo na paneli nástrojov () , pomocou ktorého môžete zapínať a vypínať farbenie.

Zobrazte len relevantné rubriky Použitie tejto možnosti je užitočné len vtedy, ak ste úspešne absolvovali kurz tejto metódy. V module Analyis sa vzťah medzi rubrikami a opravnými prostriedkami zobrazuje vo výsledných tabuľkových grafoch.

Symptómy a rubriky s nastavením váhy 0 v skutočnosti neprispievajú k výsledkom analýzy.

Ak je táto možnosť zaškrtnutá, lieky z rubrik, ktoré neprispievajú k výsledkom analýzy, sa z grafu tabuľky výsledkov vynechajú. Takto môžete ľahšie zistiť, ako rubriky prispievajú k výsledku analýzy.

Analytické vzorce V module Analýza je možné použiť niekoľko analytických vzorcov.

Môžete si vybrať, ktoré z týchto vzorcov sa zobrazia a v akom poradí.

Ak chcete zmeniť poradie zobrazenia analýz, vyberte analýzu kliknutím na jej názov. Potom ho môžete presunúť nahor alebo nadol v zozname pomocou tlačidiel ↑ a ↓.

Ak chcete zahrnúť alebo vylúčiť analýzu, vyberte v a potom kliknite na začiarkavacie políčko *Zobraziť analýzu*.

Nastavenia Materia Medica

Predvoľby


- Angličtina ☒
- Portugalčina ☐
- Španielčina ☐
- Francúzsky ☐
- Nemčina ☐
- Ruský ☐

Všeobecné

Kniha

Případ

Analýza


MM

[Zrušiť](#) [OK](#)

Jazyky K dispozícii je niekoľko jazykov Materia Medica.

V predvolenom nastavení sa jazyky zobrazujú podľa nastavenia jazyka počítača a krajiny a podľa možností licencie. Môžete si vybrať, ktoré jazyky kníh sa zobrazia v module *Materia Medica*.

Nákup homeopatických liekov

Z programu si môžete ľahko objednať homeopatické lieky priamo z online lekárne.

Dostupnosť lekárne sa môže v jednotlivých krajinách líšiť v závislosti od miestnych a medzinárodných predpisov. Táto dostupnosť sa určuje pri spustení programu.

Ak chcete objednať liek, otvorte kontextové menu na názve lieku kdekoľvek v module Kniha alebo Analýza a vyberte možnosť *Kúpiť liek z lekárne*. (Možnosť kontextového menu *Kúpiť liek z lekárne*).



Ak táto možnosť nie je k dispozícii, vo vašej krajine nie je podporovaná žiadna lekárňa.

Po výbere možnosti budete automaticky presmerovaní na online lekárňu, ktorá je pre vás k dispozícii.

Upozorňujeme, že spoločnosť *Complete Dynamics* je nezávislá od lekárne. Naším zákazníkom ponúkame priamy prístup do lekárne ako službu.

Spätná väzba

Potrebuje vašu pomoc a vážime si vašu spätnú väzbu!

Tvorcovia *Complete Dynamics* sa zaviazali, že vám prinesú najlepšiu možnú kvalitu a použiteľnosť v kombinácii s miernymi cenami komerčných verzií.

Pokiaľ ide o kvalitu, pri vývoji softvéru uplatňujeme prístup nulovej tolerancie chýb. Chyby programu sú pre nás jednoducho neprijateľné a v prípade ich zistenia sa budú riešiť s najvyššou možnou prioritou.

Použiteľnosť je zložitejšia otázka, pretože použiteľnosť je veľmi osobná záležitosť. My a naša špecializovaná skupina profesionálnych hodnotiteľov neustále hľadáme najlepšiu možnú použiteľnosť a vždy vyhodnocujeme vašu spätnú väzbu.

S vašou pomocou môžeme *Complete Dynamics* neustále zlepšovať.

Ako poskytnúť spätnú väzbu

Ak nám chcete poslať svoju spätnú väzbu, navštívte našu webovú stránku www.completedynamics.com, sekciu *Kontakt*.

Môžete nám tiež poslať e-mail na adresu support@completedynamics.com.