

Complete Dynamics

Vydanie pre praktikov

pre macOS

Verzia 24.12

O tejto príručke

Je to pre vás tá správna príručka?

Dokumentácia *Complete Dynamics* je k dispozícii v mnohých variantoch.

Máme rôzne príručky pre rôzne konfigurácie programov.

- Vydanie programu: Prehliadač, Practitioner alebo Master.
- Typ počítača: Apple OS-X, Windows, iPad, iPhone, Android.
- Rôzne medzinárodné jazyky.

Správna príručka je presne prispôbena vašej situácii.

Ak si myslíte, že nečítate ideálnu príručku, prejdite na našu webovú stránku www.completedynamics.com, sekciu *Dokumentácia*, a stiahnite si príručku tam.

Preklady

Vždy, keď vydáme novú verziu *Complete Dynamics*, uistíme sa, že anglická príručka je aktuálna.

Preklady textov, ktoré sa zmenili, si môžu vyžadovať určitý čas navyše.

V častiach príručky, ktoré ešte nie sú preložené, je uvedený pôvodný anglický text, vytlačený ako tento text.

Vitajte na

Vitajte na stránke *Complete Dynamics* - Practitioner Edition.

Softvérový program *Complete Dynamics* vám ponúka dokonalý zážitok z čítania a štúdia na počítači *Complete Repertory*. Medzi homeopatickými odborníkmi je *Complete Repertory* celosvetovo známe svojou úplnosťou, presnosťou a pokrytím pôvodných zdrojov.

Softvér je k dispozícii pre Apple macOS®, Microsoft Windows®, Linux®, Apple iOS®, Android®.

S edíciou *Practitioner* budete môcť:

- Prečítajte si a preštudujte celú stránku *Complete Repertory*, a to vo viacerých jazykoch.
- Spravujte spisy pacientov.
- Vykonajte analýzy.
- Prečítajte si knihy *Materia Medica*.

Tieto stránky vám majú pomôcť zorientovať sa v programe.

Odporúčame vám začať s kapitolou *Začínáme*, ktorá vám poskytne prehľad možností.

Úprimne dúfame, že *Complete Dynamics* obohatí váš homeopatický život, či už ste profesionálny lekár, študent, učiteľ alebo výskumník.

Vývojový tím *Complete Dynamics*.

Začíname


Intuitívny dizajn

Complete Dynamics je navrhnutý tak, aby ho mohli intuitívne používať aj tí, ktorí majú profesionálne skúsenosti s homeopatiou. Niektoré funkcie programu môžete využívať oveľa efektívnejšie, ak sa naučíte niekoľko trikov.

Platí to najmä pre použitie poľa *Prejsť na* a poľa *Nájsť*. Stačí si prečítať časti nápovery k týmto predmetom, aby ste sa dozvedeli o ich výkonných možnostiach. Stojí to za pár minút vášho času...

Používanie myši

Počítačovou myš alebo trackpad môžete použiť na rýchle vykonávanie bežných úloh alebo vyvolanie informácií.

Keď kurzor myši zmení svoj tvar na malú ruku , kliknutím sa vykoná určitá akcia na položke, na ktorej sa kurzor nachádza. Napríklad: kliknutím na odkaz okamžite prejdete na rubriku, na ktorú sa odkazuje.

V niektorých situáciách možno dvojité kliknutie použiť na získanie podrobných informácií o položke, na ktorú sa kliklo. Napríklad: dvojitým kliknutím na skratku lieku v knihe sa zobrazí dialógové okno s podrobnými informáciami.

Koliesko na posúvanie sa používa na rýchly prechod medzi rubrikami knihy. Ak myš alebo trackpad podporuje horizontálne posúvanie, táto funkcia sa používa na rýchle listovanie stránkami knihy.

Používanie klávesnice

Klávesnicu možno použiť na rýchly prístup k najbežnejším funkciám, čím sa výrazne znižuje potreba prepínať medzi používaním myši a klávesnice.


Pomocou klávesnice môžete rýchlo prechádzať knihou alebo pristupovať k možnostiam ponuky pomocou klávesových skratiek. Ak otvoríte ponuku, popri možnostiach ponuky sa zobrazia klávesové skratky.

Prehľad klávesových skratiek nájdete na stránke *Klávesové skratky*.

Vyskakovacie ponuky

V mnohých situáciách poskytujú vyskakovacie ponuky rýchly prístup k funkciám. Stačí kliknúť pravým tlačidlom myši a otvorí sa ponuka (Mac: ctrl-Click).

Príklad:

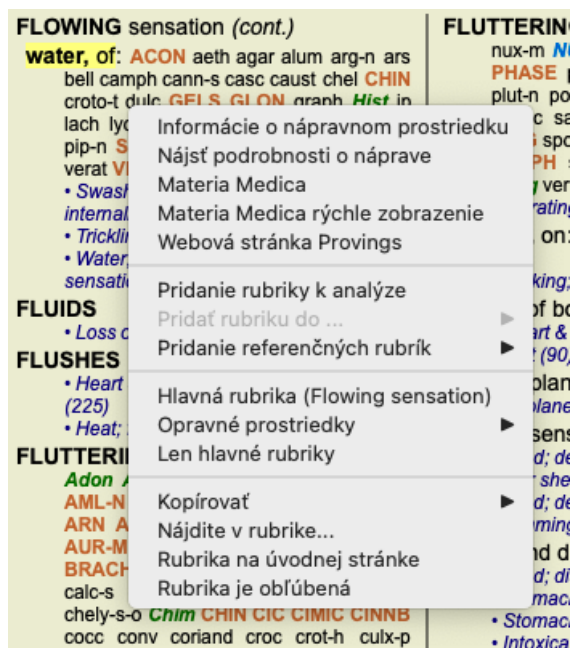


Viacnásobný výber

V mnohých situáciách môžete chcieť vykonať určitú úlohu na viacerých položkách súčasne, a nie iba na jednej vybranej položke. V týchto prípadoch môžete najprv vybrať viacero položiek a potom vykonať úlohu na všetkých vybraných.

Ako vybrať viacero položiek


Nižšie uvedené príklady ukazujú viacnásobný výber rubrik v module *Analysis*. Na iných miestach sú zásady rovnaké.

Ak chcete vybrať jeden riadok, kliknite naň myšou:

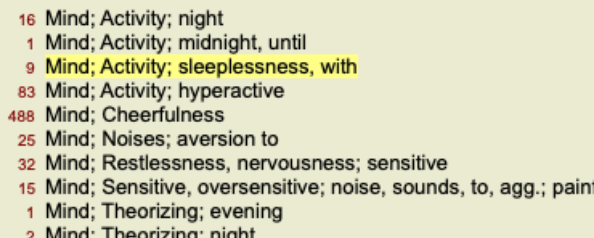


16 Mind; Activity; night
 1 Mind; Activity; midnight, until
 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 83 Mind; Activity; hyperactive
 488 Mind; Cheerfulness
 25 Mind; Noises; aversion to
 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
 1 Mind; Theorizing; evening
 2 Mind; Theorizing; night

Ak chcete vybrať rozsah riadkov, kliknite na prvý riadok, podržte kláves *shift* a kliknite na posledný riadok:

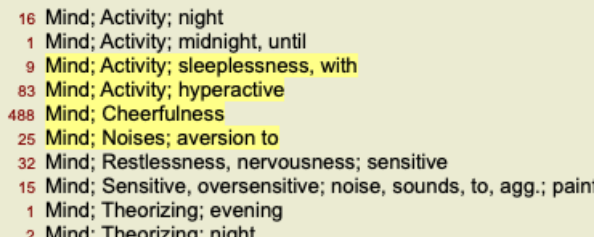


16 Mind; Activity; night
 1 Mind; Activity; midnight, until
 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 83 Mind; Activity; hyperactive
 488 Mind; Cheerfulness
 25 Mind; Noises; aversion to
 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
 1 Mind; Theorizing; evening
 2 Mind; Theorizing; night

Ak chcete zmeniť výber jedného riadku, podržte kláves *cmd* a kliknite na riadok. Výber jedného riadku môžete zmeniť aj kliknutím na ľavý okraj textu. (V moduloch *Book* a *Find* môžete kliknúť na ľavú stranu štítku rubriky)

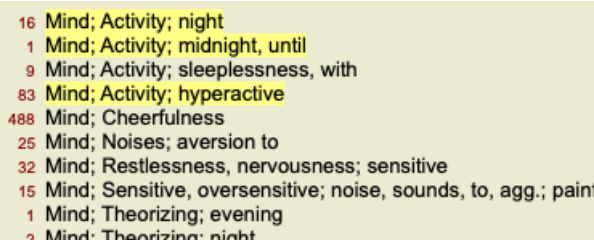

16 Mind; Activity; night
 1 Mind; Activity; midnight, until
 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 83 Mind; Activity; hyperactive
 488 Mind; Cheerfulness
 25 Mind; Noises; aversion to
 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
 1 Mind; Theorizing; evening
 2 Mind; Theorizing; night

Ak chcete vybrať všetky riadky, podržte kláves *cmd* aj kláves *shift* a kliknite na riadok.

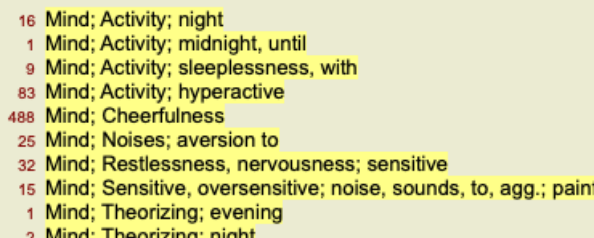

16 Mind; Activity; night
 1 Mind; Activity; midnight, until
 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 83 Mind; Activity; hyperactive
 488 Mind; Cheerfulness
 25 Mind; Noises; aversion to
 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
 1 Mind; Theorizing; evening
 2 Mind; Theorizing; night

Akcie, ktoré fungujú na viacerých vybraných položkách

Modul knihy

V module *Book* môžete vybrať viacero rubriík. Niektoré funkcie pracujú s viacerými rubrikami, iné len s jednou rubrikou.

Toto sú funkcie, ktoré pracujú s viacerými rubrikami:

- Pridajte do analýzy rubriky. (Možnosť ponuky *Prípad / Pridať rubriku, control-R*, možnosť kontextového menu *Pridanie rubriky k analýze*).
- Pridajte rubriky k danému príznaku v analýze. (Možnosť ponuky *Prípad / Pridať rubriku do ... / Nový príznak...*, možnosť kontextového menu *Pridať rubriku do ... / Nový príznak...*).
- Skopírujte štítky rubriík do schránky. (Možnosť ponuky *Kniha / Kopírovať / Skopírujte názov rubriky*, možnosť kontextového menu *Kopírovať / Skopírujte názov rubriky*).
- Skopírujte štítky rubriík s ich opravnými prostriedkami do schránky. (Možnosť ponuky *Kniha / Kopírovať / Kopírovanie rubriky a liekov*, možnosť kontextového menu *Kopírovať / Kopírovanie rubriky a liekov*).

Všetky ostatné funkcie pracujú v jednej rubrike. V prípade, že ste vybrali viac rubriík, použije sa tá, na ktorú ste klikli ako na poslednú.

Nájsť modul

V module *Nájsť* sú funkcie na viacerých rubrikách rovnaké ako v module *Kniha*.

Prípadový modul

V module *Case* sú to funkcie, ktoré pracujú s viacnásobným výberom:

- Odstránenie viacerých analýz. (Možnosť ponuky *Prípad / Vymazať analýzu*, možnosť kontextového menu *Vymazať analýzu*).

- Presunutie viacerých analýz do iného prípadu. (Možnosť ponuky *Prípad / Presun analýzy do prípadu...*, možnosť kontextového menu *Presun analýzy do prípadu...*).
- Vymazanie viacerých predpisov. (Možnosť ponuky *Prípad / Vymazať predpis*, možnosť kontextového menu *Vymazať predpis*).

Analytický modul

V module *Analysis* sú to funkcie, ktoré pracujú s viacnásobným výberom:

- Odstránenie viacerých rubriík alebo príznakov. (Možnosť ponuky *Prípad / Odstrániť vybrané*, možnosť kontextového menu *Odstrániť vybrané*).
- Priradenie váhového faktora. (Možnosť ponuky *Prípad / Hmotnosť / Hmotnosť x2*, tlačidlo na paneli nástrojov **x2**, možnosť kontextového menu *Hmotnosť / Hmotnosť x2*). Atď.
- Priradenie triedy klasifikácie príznakov. (Možnosť ponuky *Prípad / Klasifikácia príznakov / Psora*, tlačidlo na paneli nástrojov **O**, možnosť kontextového menu *Klasifikácia príznakov / Psora*). Atď.
- Všetky funkcie zoskupovania.
- Funkcie na kopírovanie štítkov rubriík s opravnými prostriedkami alebo bez nich.
- Kopírovanie vybraných rubriík s cieľom vložiť ich do inej analýzy. (Možnosť ponuky *Analýza / Kopírovanie vybraných riadkov, H-C*, možnosť kontextového menu *Viac na / Kopírovanie vybraných riadkov*, možnosť ponuky *Analýza / Vložiť skopírované riadky, H-V*, možnosť kontextového menu *Viac na / Vložiť skopírované riadky*).
- Presun vybraných rubriík nahor alebo nadol do iného príznaku. (Možnosť ponuky *Navigácia na stránke / Posunúť sa nahor*, tlačidlo na paneli nástrojov **↑**, možnosť kontextového menu *Viac na / Posunúť sa nahor*, možnosť ponuky *Navigácia na stránke / Posunúť sa nadol*, tlačidlo na paneli nástrojov **↓**, možnosť kontextového menu *Viac na / Posunúť sa nadol*).
- Výberom viacerých rubriík sa v oblasti výsledkov analýzy zvýraznia lieky týchto rubriík.
- Výberom viacerých nápravných opatrení v oblasti výsledkov analýzy sa zvýraznia rubriiky, v ktorých sa tieto lieky vyskytujú.

Modul MM

V časti *Repertórium* modulu *MM* sú funkcie na viacnásobné rubriiky rovnaké ako v module *Kniha*.

Indexové karty

Hlavné moduly *Complete Dynamics* sú prístupné prostredníctvom tzv. indexových kariet. Modul aktivujete kliknutím na kartu, výberom z ponuky (možnosť *View*) alebo pomocou klávesovej skratky.

V edícii *Practitioner* sú to *Index*, *Book*, *Find*, *Case*, *Analysis* a *Materia Medica*.



Modul *Index* poskytuje rýchly prístup ku kapitolám knihy pomocou textového aj grafického zobrazenia. Podrobnosti nájdete v časti nápovery *Indexový modul*.

Modul *Book* zobrazuje repertórium. Môžete ju čítať ako tlačенú knihu, ale aj prezerat' v skrátenej podobe. Podrobnosti nájdete v časti nápovery *Modul Book*.

Modul *Find* ponúka výkonnú funkciu na vyhľadávanie rubriík a opravných prostriedkov v knihe. Podrobnosti nájdete v časti nápovery *Nájst modul*.

Modul *Case* umožňuje vytvárať a organizovať súbory prípadov pacientov. Podrobnosti nájdete v časti nápovery *Modul Case*.

Modul *Analysis* slúži na analýzu vašich prípadov. Podrobnosti nájdete v časti nápovery *Modul analýzy*.

Modul *Materia Medica* poskytuje informácie o liekoch. Podrobnosti nájdete v časti nápovery *Modul Materia Medica*.

Panel tlačidiel

V hornej časti obrazovky sa nachádza lišta s tlačidlami, ktorá poskytuje rýchly prístup k bežne používaným funkciám.



Kliknutím na tlačidlo aktivujete funkciu, presunutím myši nad ňu sa zobrazí krátky popis jej funkcie.

Licencia

Ako si kúpiť licenciu

Ak si chcete zakúpiť jednu z našich komerčných licencií, môžete prejsť priamo do nášho internetového obchodu prostredníctvom možnosti ponuky:

- pre licenciu na *Practitioner Edition*. (Možnosť ponuky *Pomoc / Kúpiť licenciu*).
- pre preloženú verziu stránky *Complete Repertory*. (Možnosť ponuky *Pomoc / Kúpiť preklad Complete Repertory*).

Platby môžete uskutočniť bezpečne a jednoducho prostredníctvom služby *PayPal*, kreditnou kartou alebo bankovým prevodom (možnosti sa líšia v závislosti od krajiny).

Po objednaní vám budú e-mailom zaslané informácie o licencií a faktúra.

Licencie a ceny

Komerčné licencie *Complete Dynamics* je možné zakúpiť na základe predplatného.

Môžete si ho predplatiť na krátke obdobie, napríklad na mesiac, alebo na dlhšie obdobie. Čím dlhšie obdobie si kúpite, tým je cena atraktívnejšia.

Vaše predplatné zahŕňa:

- **Neobmedzené používanie *Complete Dynamics*** na jednom počítači. Používate počítač doma aj v praxi alebo máte ďalší notebook? Žiadny problém, je zahrnutá v cene. (pozri časť *Ďalšie licencie* nižšie).
- **Bezplatné aktualizácie** softvéru. Neustále pridávame nové funkcie. Žiadne dodatočné náklady, je to zahrnuté v cene.
- **Bezplatné aktualizácie** stránky *Complete Repertory*. Vždy, keď je k dispozícii nové vydanie *Complete Repertory*, získate ho ako prví bez ďalších nákladov.
- **Bezplatná technická podpora**. Veríme, že softvér by mal byť bezproblémový. To znamená, že naša technická podpora presahuje možnosti iných spoločností. Počúvame vás a skutočne riešime vaše problémy. V krátkom čase a bez nákladov. Všimnite si však, že naša podpora nezahŕňa podporu pre váš operačný systém, napríklad Windows. My podporujeme náš softvér, ale nechajte Microsoft, nech podporuje svoj vlastný. Ospravedlňujeme sa za to.

Aké vydanie potrebujem?

Záleží na vašich potrebách, či potrebujete bezplatnú verziu *Browser Edition*, alebo platenú verziu *Practitioner Edition* alebo *Master Edition*.

	Prehliadač	Praktický lekár	Majster	
Index	✓	✓	✓	Indexový modul na jednoduchý interaktívny výber.
Kniha	✓	✓	✓	Čítanie celej stránky <i>Complete Repertory</i> .
Prepnutie jazyka	✓	✓	✓	V jednom okamihu sa môže zobraziť jeden jazyk, ale môžete medzi nimi prepínať.
Viacero jazykov		✓	✓	Dva jazyky sa môžu zobrazovať súčasne.
Nájsť	✓	✓	✓	Vyhľadávanie textu a opravných prostriedkov v repertóriu.
Prípad		✓	✓	Správa prípadov, predpisy, tlač.
Analýza		✓	✓	Funkcia analýzy ("repertorizácie").
Materia Medica		✓	✓	Modul Materia Medica.
Editor repertória			✓	Doplňte repertórium o vlastné diela.
Výber repertória			✓	Definujte si vlastné filtre repertóriu, napríklad výber preferovaných autorov.
repertóriový index			✓	Rýchlejšie vyhľadávanie rubriek pomocou špeciálneho repertória ového indexu.
Grafický repertórium			✓	Grafické znázornenie vzťahov medzi repertoárovými rubrikami.
Navrhovateľ nápravných opatrení			✓	Navrhnete ďalšie prostriedky pre malé rubriky na základe prostriedkov pre súvisiace symptómy.
Zvýraznite nálezy			✓	Zvýraznite výsledky vyhľadávania v časti Repertorium alebo Materia Medica.
Nájsť v Materia Medica			✓	Vyhľadávanie v knihách Materia Medica.
Synonymá			✓	Vyhľadávanie pomocou slovných synonym.
Analytické vzorce			✓	Definujte vlastné vzorce pre analýzu.
Analytické filtre			✓	Pokročilé filtrovanie výsledkov analýzy.
Materia Medica Editor			✓	Upravte si vlastné Materia Medica.
Analýza kráľovstva			✓	Analýza založená na kráľovstvách a rodinách.
Diferenciálna diagnostika			✓	Výkonný modul, ktorý vám pomôže rozlíšiť lieky.

Pokročilé funkcie			✓	Mnoho ďalších možností pre skúsenejších a náročnejších profesionálov.
-------------------	--	--	---	---

Ceny

Ceny licencií nájdete na našej webovej stránke www.completedynamics.com, v časti *Cenník*.

Ďalšie licencie

Máte právo používať *Complete Dynamics* na viac ako jednom počítači, ktorý vlastníte.

Po zakúpení licencie vám môžeme poslať ďalšie licencie pre vaše ďalšie počítače. Na tento účel potrebujeme licenčné čísla ďalších počítačov. Číslo licencie nájdete v dialógovom okne *Menu / Help / User and license* na druhom počítači (počítačoch).

Stačí, ak nám pošlete ďalšie číslo licencie a my vám e-mailom zašleme ďalšie informácie o licencií. Môžete nás kontaktovať prostredníctvom menu, na *Menu / Pomoc / Všeobecná spätná väzba*.

Platia určité obmedzenia. Svoju licenciu môžete používať na:

- počítač vo vašej praxi,
- počítač doma,
- notebook.


Ak je vaša situácia iná, kontaktujte nás a my vám poskytneme riešenie.

Vaša licencia je osobná a môžete ju používať len vy, vaši zamestnanci alebo rodinní príslušníci, ktorí pre vás pracujú.

Indexový modul

Otvorenie modulu Index

Prejdite do modulu Index kliknutím na kartu *Index*. (Možnosť ponuky *Zobrazit' / Index, №1*).

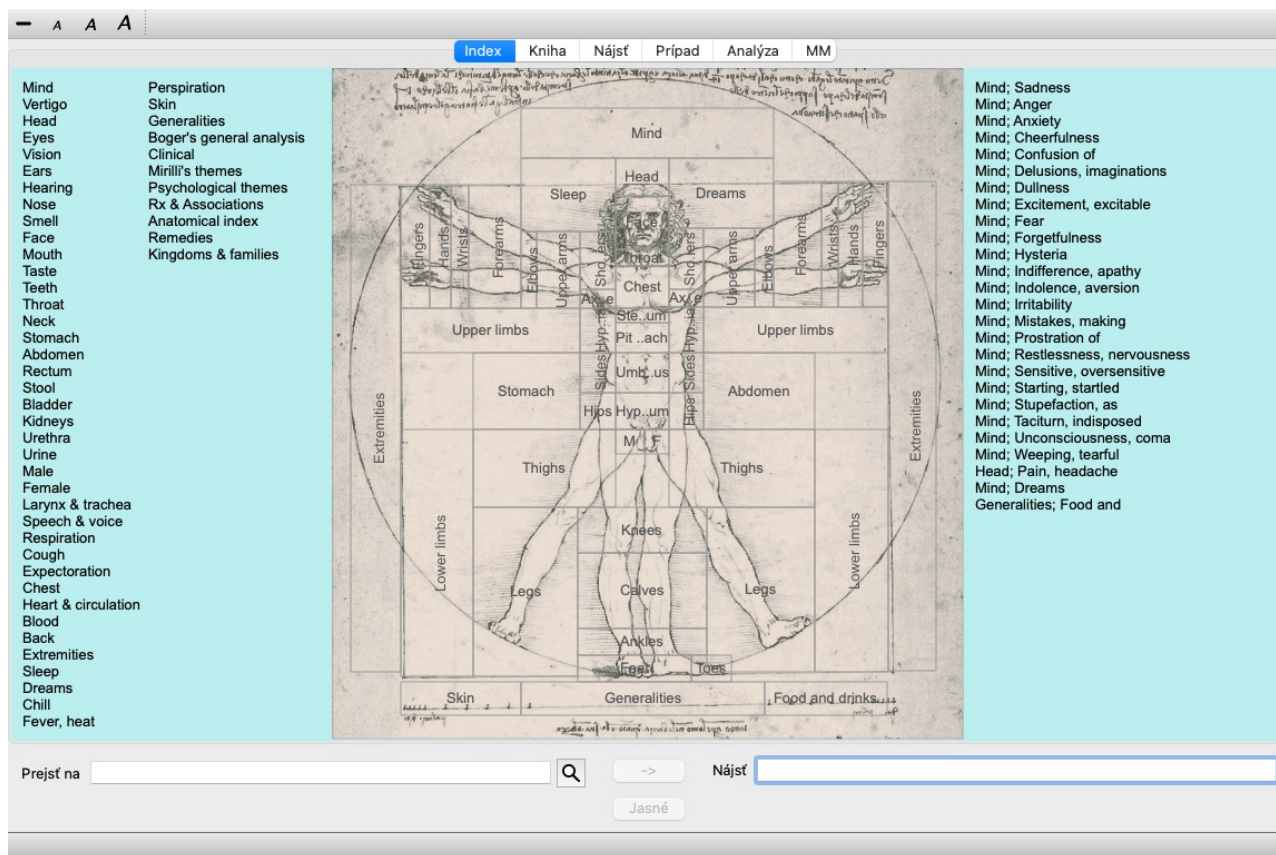

Používanie modulu Index

Indexový modul poskytuje rýchly prístup k obsahu repertoáru.

Je rozdelená do troch oblastí:

- na ľavej strane je index kapitol repertoáru,
- stredná časť je grafický index,
- na pravej strane je rýchly zoznam bežne používaných rubriek.

Presuňte myš nad text alebo obrázky. Ak je možné vykonať výber, kurzor sa zmení na ruku . Ak chcete vykonať akciu, stačí kliknúť na položku.

Používanie viacerých repertoárov

V prípade, že máte licenciu na ďalšie repertoáre, v indexe kapitol repertoárov sa zobrazí aj názov repertoáru.

Complete Repertory (...)

Po kliknutí na názov repertoáru sa vyberie ďalší repertoár a zobrazia sa jeho kapitoly.

Má tiež vyskakovacie menu, v ktorom si môžete vybrať jeden z dostupných repertoárov.

Modul knihy

Otvorenie modulu Kniha

Prejdite do modulu Kniha kliknutím na kartu *Book*. (Možnosť ponuky *Zobrazit' / Kniha, ⌘-B*).
V nasledujúcom priklade je kniha otvorená na rubrike *Mind; Anxiety; flushes of heat, with*.

The screenshot displays the 'Kniha' (Book) module in the Complete Dynamics software. The interface is organized into three main sections. The top section, labeled 'MIND', contains three columns of text. The left column, titled 'ANXIETY (cont.)', lists various symptoms and their associated remedies, such as 'flushes of heat, with: aesc agar aloe' and 'food, warm, hot, agg.: mag-c'. The middle column, titled 'ANXIETY; formication, crawling, with (cont.)', lists symptoms like 'fingers, of: acon verat' and 'fright, fear'. The right column, titled 'ANXIETY (cont.)', lists symptoms like 'headache, with: ACON AETH Alum ambr' and 'agg., lying down: SEP'. The bottom section features a search bar with the text 'mind anxiety flushes' and a search button. The search results show 'mind; anxiety; flushes of heat, with'.

Rozloženie knihy sa pri zmene veľkosti okna automaticky upraví.
Keď zväčšíte okno, kniha sa zobrazí v estetickom dvojstranovom rozložení:

— A A A 1 2 3 4 Všetky rubriky Všetky opravné prostriedky Žiadne puzdro

Index **Kniha** Nájst Pripad Analýza MM

ANXIETY	MIND	MIND	ANXIETY
ANXIETY (cont.) flushes of heat, with: (45) • Congestion, with (32) • Anxiety; heat; during; face, of (11) • Generalities; heat; flushes of (597) emphysema, in: (1) • Chest; emphysema (158) food, warm, hot, agg.: (1) • Anxiety; warmth; agg. (9) • Warmth; agg. (43) foot bath, after • Bathing, washing feet, after (2) • Bathing, washing; agg.; feet (6) formication, crawling, with: (7) • Anxiety (1100) fingers, of: (2) • Extremities; formication, crawling; fingers (89) fright, fear after: (19) • Mirilli's themes; fearful (830) • pregnancy, in seventh month of: (1) • Anxiety; pregnancy, in (6) • Pregnancy, in (90) fear of fright still remaining • Fright, fear agg., ailments from; fear of fright still remaining (24) fullness in abdomen, with: (1) • Abdominal complaints, in (108) • Abdomen; anxiety; with (93) green stripes, on seeing: (1) headache, with: (72) • Pain, with (225)	ANXIETY; headache, with (cont.) • Headache; during (422) • Head; internal; anxiety, with (82) agg., lying down: (1) • Anxiety; lying; agg.; down, on (16) • Head; internal; anxiety, with (82) gastric: (1) menses, before: (1) • Anxiety; menses; before (32) • Headache; before (172) • Menses; before (224) heart complaints, in: (261) • Heart, about his (15) • Heart complaints, in (307) • Mirilli's themes; disease (794) • Mirilli's themes; heart (355) heat before: (4) during: (92) • abdomen, in: (3) • Anxiety; abdominal complaints, in (108) • Abdomen; anxiety; with (93) • chest, in • Chest; heat; anxiety, with (12) • face, of: (11) • Anxiety (1100) • Anxiety; agg., ailments from (360) • Anxiety; flushes of heat, with (45) • Heat, with; face, of (35) • Face; anxious expression (153) • Chest; anxiety; heat, with; face, in (1) •• during and after: (1)	ANXIETY; heat; during (cont.) • flushes of • Anxiety; flushes of heat, with (45) • hands, of • Extremities; heat; hands; anxiety, with (3) • head, of • Head; heat; anxiety; with (11) • soup, after: (1) • Anxiety; soup, after (2) • sudden: (1) heaviness, with: (11) abdomen, in • Anxiety; abdominal complaints, in (108) • Abdomen; heaviness as from a load or weight; anxiety, with (7) chest, in: (5) • Chest; heaviness, weight (226) heart region, in: (2) • Anxiety; heart complaints, in (261) limbs, in: (3) feet, in: (2) • Anxiety (1100) • Anxiety; agg., ailments from (360) • Extremities; heaviness, weariness; lower limbs; anxiety, with (3) stomach, in: (1) • Stomach; heaviness (342) hemoptysis, in: (1) • Sleeplessness, with (95) hemorrhage, with: (15) intestinal: (3)	ANXIETY; hemorrhage, with (cont.) lungs, of: (3) • Expectoration; bloody, spitting of blood (359) hemorrhage, with uterine: (6) • Hemorrhage, with (15) • Hemorrhage, with uterine (42) hernia, in inguinal: (3) home, away from: (3) • Homesickness, nostalgia; ailments from, agg. (64) horrible things, after • Cruelties, after hearing of (5) • Horrible things, sad stories affect profoundly, agg.; mental and emotional consequences (201) house or room agg.: (28) • House; agg. (52) • Room, in; agg. (62) • entering, on: (3) • Generalities; room; agg.; entering, on (159) • closed: (6) • Fear; narrow, small place, in, claustrophobia (96) • Generalities; room; agg.; closed (97) • warm: (5) • Anxiety; warmth; agg. (9) • Fear; room, of warm (3) • Room, in; agg. (62) • Warmth; agg. (43) amel: (3) • House; amel. (7)

Prejst na mind anxiety flushes Nájst

mind; anxiety; flushes of heat, with Jasné

Keď dvakrát stlačíte medzerník, skryjú sa aj odkazy a zobrazia sa len názvy rubrik. Ak chcete skryť alebo zobrazit' všetky lieky a odkazy, dvakrát kliknite na ľubovoľné biele miesto na stránke. Môžete tiež dvakrát kliknúť na štítok rubriky.

— A A A 1 2 3 4 Všetky rubriky Všetky opravné prostriedky Žiadne puzdro

Index **Kniha** Nájst Pripad Analýza MM

ANXIETY	MIND	MIND	ANXIETY
ANXIETY (cont.) flushes of heat, with: (45) emphysema, in: (1) food, warm, hot, agg.: (1) foot bath, after formication, crawling, with: (7) fingers, of: (2) fright, fear after: (19) • pregnancy, in seventh month of: (1) fear of fright still remaining fullness in abdomen, with: (1) green stripes, on seeing: (1) headache, with: (72) agg., lying down: (1) gastric: (1) menses, before: (1) heart complaints, in: (261) heat before: (4) during: (92) • abdomen, in: (3) • chest, in • face, of: (11) • •• during and after: (1) • flushes of • hands, of • head, of • soup, after: (1)	ANXIETY; heat; during (cont.) • sudden: (1) heaviness, with: (11) abdomen, in chest, in: (5) heart region, in: (2) limbs, in: (3) • feet, in: (2) stomach, in: (1) hemoptysis, in: (1) hemorrhage, with: (15) intestinal: (3) lungs, of: (3) hemorrhage, with uterine: (6) hernia, in inguinal: (3) home, away from: (3) horrible things, after house or room agg.: (28) • entering, on: (3) • closed: (6) • warm: (5) amel.: (3) humming in ears, with: (1) hunger, fasting, during: (6) hurry, with: (18) hydrothorax, in: (2) impatience, with: (5) inactivity, with: (5)	ANXIETY (cont.) indigestion, in: (6) inflammation of endocard, after: (3) inflammation, with larynx, of: (1) uterus, of, or ovarian inflammation: (1) injuries, after: (4) inspiration, deep agg. •: (7) amel.: (8) must: (4) irritability, in journey, before: (5) joyful things, by most: (2) lameness, with: (1) lascivious impulses, from: (1) laughing and crying, ending in profuse perspiration, with: (1) lemonade amel.: (1) leucorrhea, with: (2) looking downward out of window, from: (1) steadily: (1) lump sensation in throat, with: (3) lunch, after: (2) lying agg.: (38) • back, on: (1)	ANXIETY; lying; agg. (cont.) • down, on: (16) • side, on: (12) •• left: (11) •• right, from flatulence: (1) amel.: (5) amel., with head high: (1) lie down with anguish, must: (3) manual work masturbation, from: (3) meditating, while: (11) menses before: (32) during: (47) • anger, with: (9) • dysmenorrhea: (1) • fainting, before: (1) • faintness, with: (1) • paroxysms: (1) • profuse: (1) after: (10) • sleep, preventing: (1) amel.: (2) suppressed, from: (6) mental exertion agg.: (27) mind ceased to be active, after: (1) moaning, groaning, with: (110) motion agg.: (24)


Prejst na mind anxiety flushes Nájst

mind; anxiety; flushes of heat, with Jasné

Skrytie čiastkových rubrik

Je tiež možné skryť všetky vedľajšie rubriky, čím sa zobrazia len rubriky najvyššej úrovne repertoáru. (Možnosť ponuky *Kniha* / *Len hlavné rubriky*, možnosť kontextového menu *Len hlavné rubriky*).

Táto možnosť je mimoriadne užitočná pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť štruktúru repertoáru.

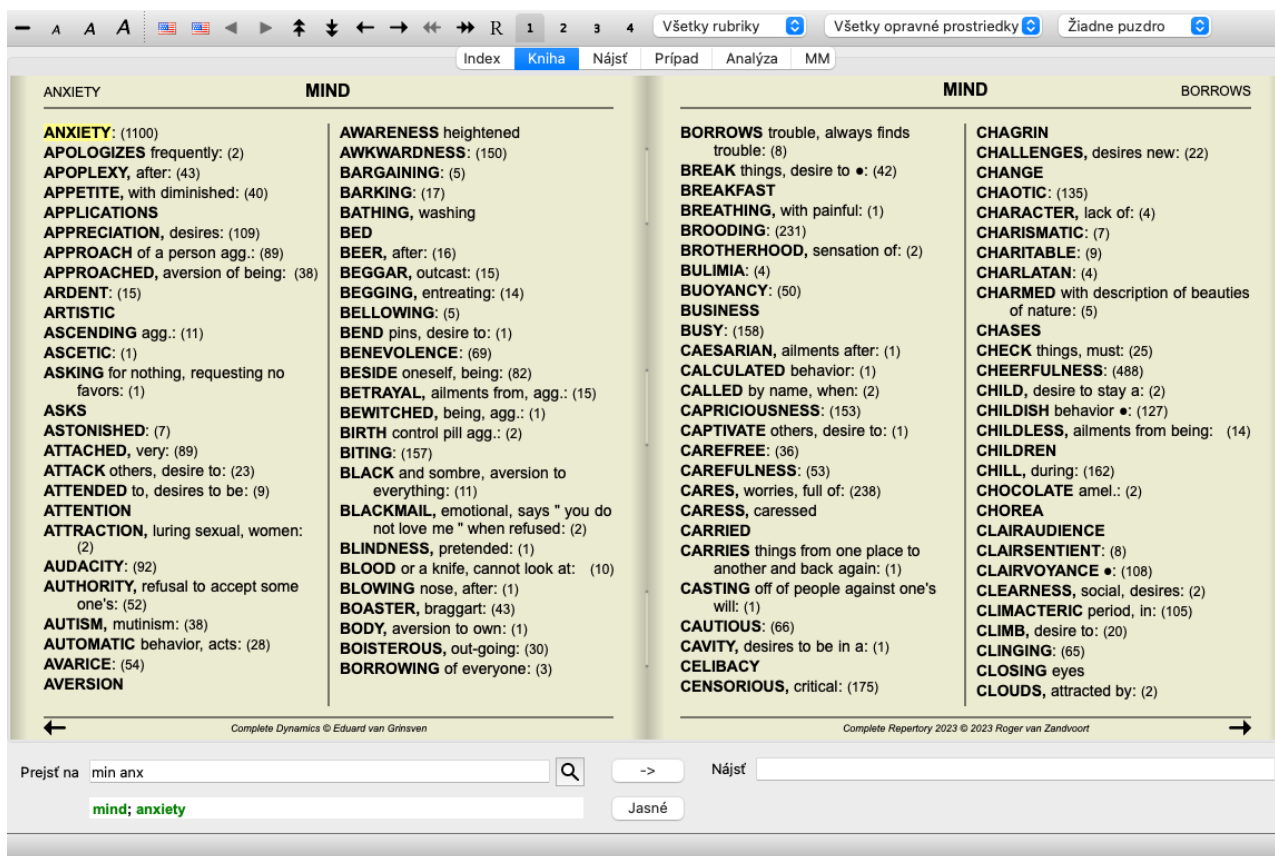

Lahko sa môžete vrátiť k zobrazeniu všetkých rubriík. (Možnosť ponuky *Kniha / Len hlavné rubriiky*, možnosť kontextového menu *Len hlavné rubriiky*).
Kliknutím na rubriiku sa môžete vrátiť do normálneho zobrazenia repertoáru.

Poradie triedenia nápravných opatrení

Predvolené poradie, v akom sú lieky vytlačené, je abecedné.

Lieky môžete zobraziť v poradí podľa dôležitosti. (Možnosť ponuky *Zobraziť / Lieky / Zoradiť podľa dôležitosti*, možnosť kontextového menu *Lieky / Zoradiť podľa dôležitosti*). (Shift+medzerník).

Abecedné poradie triedenia

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON
acon-f agath-a agki-p **Alco** aloe **AM-C**
am-m **ANAC ANDROC** aran-ix am ars
ars-s-f **Astac** atro **AUR** aur-m-n aur-s
BELL beryl-n **Biti-a** bor bov bufo **Bung-f**
bute-j calc-i **CAMPH** canth carc **CAUST**
cere-s **CHAM** chin cic **CON** cor-r coriand
CROC cub culx cupr-ar der **Dulc** elae
falco-p **FERR** fic **GALL-AC** gels gink
granit-m **Hafn** harp helx-t hema-h **HEP**
hist hydr hydr-ac **HYOS** ign iod **Ip**
KALI-AR kali-c **KALI-I** **LAC-C** lac-d lach
lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r **LYC** **LYSS**
m-aust mag-c mangi med **MERC**

Zoradené podľa dôležitosti

ABUSIVE, insulting: NUX-V VERAT
CHAM **LYC** **MOSCH** **THUJ** **CON** **HYOS**
CAMPH **GALL-AC** **MERC** **SCORP**
CROC **KALI-I** **PLAT** **STRAM** **URAN**
AUR **LYSS** **PETR** **AM-C** **HEP** **BELL**
ABIES-N **ANAC** **ANDROC** **CAUST** **IGN**
KALI-AR **PALL** **SULPH** **ACON** **FERR**
LAC-C **PHYSALA-P** **SENEG** **SEP**
TARENT **TUB** **Nit-ac** **Ip** **Bung-f** **Dulc**
Astac **Sanic** **Alco** **Sarr** **Sil** **Staph** **Biti-a**
Hafn **Raja-s** **Tritic-v** **Xeno** am-m lava-e
cor-r lach hydr agath-a aur-m-n bov
calc-i carc falco-p gels helx-t nat-c nat-m
ran-b acon-f agki-p aloe aran-ix am ars

Ďalšie informácie

Pri umiestnení kurzora myši na ľubovoľný text v knihe sa v prípade potreby zobrazia ďalšie informácie o danom texte. Tieto informácie sa zobrazujú v oblasti správ v ľavom dolnom rohu okna.

Vo vyššie uvedenom príklade sa pohybom myši zobrazia tieto informácie:

Kurzor myši nad textom rubriky ABUSIVE **Kent p.1; Synthetic p.1-7; Generale p.1**

Táto rubrika pochádza z troch pôvodných zdrojov:

- Kentov repertoár, strana 1
- Barthel & Klunker's Synthetic Repertory, zväzok 1, strana 7
- Künzliho Repertorium Generale, strana 1.

Myšou prejdite na skratku lieku **LYC**

lyc = Lycopodium clavatum (Bönninghausen, Gallavardin, Jahr, Knerr)

Kód lieku **lyc** znamená *Lycopodium clavatum*.

Ako zdroje sú použité tieto autori: *Bönninghausen, Gallavardin, Jahr a Knerr*.

Dvojklikom na liek získate podrobné informácie v samostatnom okne.

Obmedzenie zobrazovaných informácií

Okrem prepínania medzi úplným a kompaktným zobrazením je možné obmedziť počet zobrazených opravných prostriedkov. Toto sa vykonáva stlačením tlačidla 1, 2, 3 alebo 4 na klávesnici. Tým sa zobrazené lieky obmedzia len na tie, ktoré majú aspoň danú gradáciu 1, 2, 3 alebo 4. (Možnosť ponuky *Zobraziť / Lieky / Všetky triedy*, tlačidlo na paneli nástrojov ¹, možnosť ponuky *Zobraziť / Lieky / Trieda 2+*, tlačidlo na paneli nástrojov ², možnosť ponuky *Zobraziť / Lieky / Trieda 3+*, tlačidlo na paneli nástrojov ³, možnosť ponuky *Zobraziť / Lieky / Trieda 4*, tlačidlo na paneli nástrojov ⁴, možnosť kontextového menu *Lieky / Všetky triedy*, možnosť kontextového menu *Lieky / Trieda 2+*, možnosť kontextového menu *Lieky / Trieda 3+*, možnosť kontextového menu *Lieky / Trieda 4*). Príklad, opäť s rubrikou *Mind; Abusive*:

Stlačte kláves 4.
Iba prostriedky triedy 4.

ABUSIVE, insulting: CHAM LYC NUX-V
VERAT (+120)

Stlačte kláves 3.
Trieda 3 a 4.

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON
AM-C ANAC ANDROC AUR BELL
CAMP H CAUST CHAM CON CROC
FERR GALL-AC HEP HYOS IGN
KALI-AR KALI-I LAC-C LYC LYSS
MERC MOSCH NUX-V PALL PETR
PHYSALA-P PLAT SCORP SENEG
SEP STRAM SULPH TARENT THUJ

Stlačte kláves 2.
Trieda 2, 3 a 4.

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON *Alco*
AM-C ANAC ANDROC *Astac* AUR
BELL *Biti-a Bung-f* CAMP H CAUST
CHAM CON CROC *Dulc* FERR
GALL-AC *Hafn* HEP HYOS IGN *Ip*
KALI-AR KALI-I LAC-C LYC LYSS
MERC MOSCH *Nit-ac* NUX-V PALL
PETR PHYSALA-P PLAT *Raja-s Sanic*
Sarr SCORP SENEG SEP *Sil Staph*

Stlačte kláves 1.
Zobrazené sú všetky lieky.

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON
acon-f agath-a agki-p *Alco* aloe AM-C
am-m ANAC ANDROC aran-ix am ars
ars-s-f *Astac* atro AUR aur-m-n aur-s
BELL beryl-n *Biti-a* bor bov bufo *Bung-f*
bute-j calc-i CAMP H canth carc CAUST
cere-s CHAM chin cic CON cor-r coriand
CROC cub culx cupr-ar der *Dulc* elae
falco-p FERR fic GALL-AC gels gink
granit-m *Hafn* harp helx-t hema-h HEP
hist hydr hydr-ac HYOS IGN iod *Ip*
KALI-AR kali-c KALI-I LAC-C lac-d lach
lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r LYC LYSS
m-aust mag-c mangi med MERC

Veľkosť textu

Text je možné zmenšiť alebo zväčšiť. (Možnosť ponuky *Zobraziť / Menší text*, tlačidlo na paneli nástrojov ^A, možnosť ponuky *Zobraziť / Štandardná veľkosť textu*, tlačidlo na paneli nástrojov ^A, možnosť ponuky *Zobraziť / Väčší text*, tlačidlo na paneli nástrojov ^A, možnosť kontextového menu *Menší text*, možnosť kontextového menu *Štandardná veľkosť textu*, možnosť kontextového menu *Väčší text*).

Tlačidlo Akcia

- A** Zmenšíte text.
- A** Pôvodná veľkosť textu.
- A** Zväčšíte text.

Navigácia, používanie klávesnice a myši

Navigáciu v knihe môžete vykonávať pomocou klávesnice, myši, lišty s tlačidlami alebo ponuky (*Menu / Navigovať*). Posúvanie myšou sa vykonáva pomocou malého kolieska na myši alebo pomocou trackpadu zabudovaného v notebookoch. Niektoré myši majú rolovacie koliesko, ktoré dokáže rolovať len nahor a nadol, moderné myši často dokážu rolovať aj doľava a doprava. Ak vám rolovanie vľavo/vpravo nevyhovuje, môžete ho vypnúť v ponuke *Preferences*.

Tlačidlo	Klávesnica	Myš	Akcia
	Nahor	Posuňte sa nahor	Predchádzajúca rubrika.
	Dole	Prejdite nadol	Ďalšia rubrika.
⬆	Zmena-Nahoru	Posun-Posun nahor	Predchádzajúca hlavná rubrika.

↓	Posun-nadol	Posun-Scroll down	Ďalšia hlavná rubrika.
	Alt-Up	Alt- Posun nahor	Predchádzajúca rubrika na rovnakej úrovni.
	Alt-Down	Alt- Posunúť sa nadol	Ďalšia rubrika na rovnakej úrovni.
←	Vľavo Stránka hore	Posuňte sa doľava	Predchádzajúca stránka.
→	Vpravo Strana dole	Posuňte sa doprava	Nasledujúca stránka.
⇐	Posun-Vľavo	Posun-Posun doľava	Predchádzajúca kapitola.
⇒	Posun-vpravo	Posun-Posun doprava	Nasledujúca kapitola.
◀	Alt-Vľavo		Skok späť do histórie. Použite ju po odkaze na inú rubriku, aby ste sa vrátili tam, odkiaľ ste prišli.
▶	Alt-Vpravo		Skok do histórie. Používa sa v kombinácii s predchádzajúcou možnosťou. Tieto dve funkcie fungujú podobne ako tlačidlá bežne používané vo webových prehliadačoch na prechod medzi webovými stránkami.
	Shift-Cmd-(kľúč)		Rýchle otvorenie kapitoly: M - Myseľ G - Generácie atď., ďalšie klávesové skratky nájdete v ponuke na lište menu (<i>Book menu</i>).

Kopírovanie rubriky do schránky


Niekedy je užitočné skopírovať rubriku do schránky a vložiť ju do inej aplikácie, napríklad do textového editora. (Možnosť kontextového menu *Kopírovať* / *Skopírujte názov rubriky*, možnosť kontextového menu *Kopírovať* / *Kopírovanie rubriky a liekov*).

Názov rubriky môžete skopírovať do schránky pomocou *Cmd-C* (*Control-C*).

Ak dvakrát (v priebehu sekundy) stlačíte *Cmd-C*, názov rubriky sa skopíruje spolu so všetkými opravnými prostriedkami v rubrike.

Výber jazyka

V závislosti od vydania programu a licencie môže byť k dispozícii niekoľko jazykových možností pre *Complete Repertory*.

Dostupné jazykové možnosti môžete vybrať z ponuky alebo pomocou lišty s tlačidlami. (Možnosť ponuky *Kniha* / *Jazyk* / *Kniha Angličtina*, možnosť kontextového menu *Jazyk* / *Kniha Angličtina*). (Tlačidlo vlajky, )

V edícii *Practitioner*, je možné vybrať druhý jazyk (možnosti závisia od vašej licencie) a zobrazit' text rubriky v inom jazyku.

Napríklad francúzština: (Možnosť ponuky *Kniha* / *Jazyk* / *Kniha navyše Francúzština*, možnosť kontextového menu *Jazyk* / *Kniha navyše Francúzština*).

— A A A 🇺🇸 🇫🇷 ⏪ ⏩ ⏴ ⏵ ⏶ ⏷ ⏸ ⏹ 1 2 3 4 All rubrics All remedies No case

Index Book Find Case Analysis MM

ABUSIVE

ABUSIVE, insulting (*injurieux*, *grossier*): **ABIES-N** **ACON** acon-f agath-a agki-p **Alco** aloec **AM-C** am-m **ANAC** **ANDROC** aran-lx am ars ars-s-f **Astac** atro **AUR** aur-m-n aur-s **BELL** beryl-n **Biti-a** bor bov bufo **Bung-f** bute-j calc-i **CAMPH** canth carc **CAUST** cere-s **CHAM** chin cic **CON** cor-r coriand **CROC** cub culx cupr-ar der **Dulc** elae falco-p **FERR** fic **GALL-AC** gels gink granit-m **Hafn** harp helx-t hema-h **HEP** hist hydr hydr-ac **HYOS** IGN iod **Ip** **KALI-AR** kali-c **KALI-H** **LAC-C** lac-d lach lava-e lava-f lava-h **Ill-t** **lox-c** **LYC** **LYSS** m-aust mag-c mangi me **MERC** **MOSCH** nat-c nat-m **Nit-ac** **NUX-V** ozon **PALL** **PETR** **PHYSALA-P** **PLAT** plb **Raja-s** ran-b rhus-g sac-i **Sanic** **Sarr** **SCORP** **SENEG** SEP **Sil** spong **Staph** **STRAM** stron-t **SULPH** H syph **TARENT** thiaspi **THUJ** thu-f trich-d **Tritic-v** **TUB** **URAN** **VERAT** verbe-h viol-t vip **Xeno** (1)

- Answer, answering, answers; offensive (1)
- Contemptuous (119)
- Cursing, swearing, desires (141)
- Insolence, impertinence (51)
- Nipping at everyone (1)
- Quarrelsomeness, scolding (284)
- Rudeness (92)
- Mirilli's themes; offensive (458)
- Psychological themes; aggression (975)

forenoon (*matinée*): ran-b

- Forenoon (118)

MIND

ABUSIVE, insulting (*cont.*)

evening (*soir, le*): am-c am-m

- Evening; agg. (436)

acts, after indecent (*actes indécents, après des*): bung-f

angry, without being (*colère, sans être en*): **Bell** dulc

crying, with (*pleurs, avec*): **STRAM**

drunkards, in (*ivrognes, alcooliques, chez les*): hep nux-v **PETR**

- Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (63)

fever, during (*fièvre, pendant la*)

- Fever; during (327)

intermittent (*intermittents*): **FERR**

- Fever; during (327)
- Fever; heat; intermittent, malarial (360)

typhoid (*typhoïde*): lyc

- Fever; heat; continued, typhoid (251)

irritability, with (*irritabilité, avec*): bung-f gels **Ip**

- Irritability (878)

jealousy, out of (*jalousie, en dehors de toute*): gall-ac hyos **NUX-V**

- Jealousy (157)

menses, before (*règles, avant les*): bov **CHAM**

- Menses; before (224)

molestation, after (*molestation, après*): **Bung-f**

mamma molested (*sein molesté*): bung-f

MIND

ABUSIVE, insulting (*cont.*)

opposition, from (*opposition, par*): falco-p helx-t hydr

- Mirilli's themes; offensive (458)

pain, with (*douleur, avec une*): cor-r lava-e

- Cursing, swearing, desires; pains, at (5)

associates, to (*associés, avec ses*): **MERC**

calling names and scolding, irritation agg. (*appelant des noms et réprimandant, si irrité*): **VERAT**

- Mirilli's themes; offensive (458)

cares not what she says (*soucie pas de ce qu'il dit, ne se*): agath-a

children insult parents (*enfants insultent les parents, les*): am-m aur-m-n calc-i cham hyos lach lyc nat-m **PLAT** **SCORP** uran

- Children; complaints in (381)
- Mirilli's themes; offensive (458)
- Psychological themes; aggression (975)

children, towards her (*enfants, envers ses*): **Astac**

exhausted, until (*épuisément, jusqu'à*): mosch nat-c

- Mirilli's themes; offensive (458)

family and children, to (*famille et ses enfants, vers sa*): carc gall-ac **KALI-H** lava-e **SCORP** **Thuj**

- Mirilli's themes; child (436)

ABUSIVE

ABUSIVE, insulting; family and children, to (*cont.*)

- Mirilli's themes; offensive (458)

friends, even to his best (*amis, même ses meilleurs*): **CROC** gall-ac

- Mirilli's themes; offensive (458)

husband, to (*mari, son*): hyos lava-e **THUJ** uran

- Mirilli's themes; family (553)
- Mirilli's themes; offensive (458)

imaginary persons, at (*personnes imaginaires, à des*): **LYC**

indecent language, in puerperal mania (*langage indécent, dans la manie puerpérale*): **CAMPH** **NUX-v**

- Insanity, madness; delivery, parturition; after, puerperal (39)

passers-by (*passant, un*): **CON** **Sanic**

scolds until the lips are blue and eyes stare and she faints (*jure, crie jusqu'à ce que ses lèvres soient bleues et que ses yeux soient fixes et elle tombe en s'évanouissant*): **MOSCH**

- Faintness, fainting, with (81)
- Face; bluish; lips (139)
- Generalities; faintness, fainting; blueness of face, with (10)
- Generalities; faintness, fainting; scolding, from (1)
- Mirilli's themes; offensive (458)

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort

Jump to Find

mind; abusive, insulting

Obľúbené rubriky

Niektoré rubriky môžete považovať za dôležité a iné za menej dôležité. Platí to najmä vtedy, keď na vyhľadávanie rubriek použijete modul *Find*.

Ak chcete klásť väčší dôraz na rubriky, ktoré sú pre vás dôležité, môžete ich označiť ako obľúbené.

Ak chcete rubriku označiť ako obľúbenú, kliknite na rubriku a potom ju označte. (Možnosť ponuky *Kniha / Rubrika je obľúbená*, možnosť kontextového menu *Rubrika je obľúbená*).

Každá rubrika, ktorá je označená ako obľúbená, bude podčiarknutá.

Keď označíte niektorý z rubriek ako obľúbený, v module *Find* sa objaví ďalšie pole, ktoré vám umožní obmedziť vyhľadávanie len na obľúbené rubriky.

Filter Remedy

Zobrazené lieky je možné obmedziť.

Na paneli nástrojov je k dispozícii možnosť, pomocou ktorej môžete vybrať skupinu nápravných opatrení.

Preddefinovaných je niekoľko často používaných skupín (minerály, rastliny, živočíchy, nozódý). Ak chcete vybrať inú skupinu, jednoducho vyberte možnosť *Other...* a zobrazí sa dialógové okno, v ktorom môžete vybrať jednu zo skupín v časti *Kingdoms & Families*.

> Acids (72)

Agents & toxins (56)

Alkaloids (85)

Amides (9)

Amino acids (22)

> Anaerobes (27)

> Animals (322)

> APG II taxonomy

> Bacteria (62)

Bloods (37)

Body products (84)

Building stones (3)

Cell constituents (8)

Cosmic bodies (3)

Cosmos (23)

Disease cultures (67)

Diseased material (35)

Drugs (26)

Dyes (19)

Electromagnetism (18)

> Elements (722)

Enzymes (5)

Filter

Trvalo pridať do zoznamu ☐

KINGDOMS & FAMILIES; ACIDS: acet-ac acon-ac agarin ami-sal-ac amp amyg-am asc-ac benz-ac betin bor-ac brom-ac but-ac camph-ac carb-ac chr-ac chrys-ac cit-ac coenz-a cortico cystin d-phenyl des-ac fl-ac form-ac fumar-ac gaba gall-ac guan hemog hip-ac histid hydr-ac hydrobr-ac i-leuc iod-ac kali-ar kali-x keto-ac l-leuc l-phenyl lac-ac lanol mal-ac methion mur-ac n-leuc nit-ac nit-m-ac ol-suc oro-ac ox-ac ph-ac pic-ac prol pyro-ac rib-ac sal-ac salol sarcol-ac succ-ac sul-ac sulo-ac tann-ac tart-ac tell-ac thio-ac threnin trypt tyrin ur-ac vali

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Zrušiť

OK

Pomocou možnosti filtrovania môžete rýchlo nájsť správnu skupinu nápravných opatrení:

Australian funnelweb spiders (1)

Burrowing spiders (1)

Cellar spiders (1)

Daddylongleg spiders (1)

Funnel web spiders (3)

Hunting spiders (10)

Jumping spiders (2)

Orb web spiders (2)

Recluse spiders (3)

Sand recluse spiders (2)

Sixeyed sicariid spiders (5)

Spiders (22)

Spiders (23)

Tangle web spiders (6)

Web spiders (11)

Whitetailed spiders (1)

Widow spiders (5)

Wolf spiders (1)

Filter

Trvalo pridať do zoznamu ☐

KINGDOMS & FAMILIES; TAXONOMY; common names; **English; Australian funnelweb spiders:** atra-r

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Zrušiť

OK

Štandardné repertoárové filtre modulu Kniha

Za normálnych okolností sa v module *Book* zobrazuje kompletný obsah stránky *Complete Repertory*.

K dispozícii je niekoľko štandardných filtrov. Môžete ich vybrať prostredníctvom panela ponúk alebo vyskakovacích ponúk na okrajoch

stránky. (Možnosť ponuky *Kniha / Výber kníh / Kompletne*, možnosť kontextového menu *Výber kníh / Kompletne*).

<i>Kompletne</i>	Zobrazenie celého repertoáru bez filtrovania.
<i>Klasické</i>	Zobrazte len rubriky a lieky od klasických autorov. Tým sa repertoár obmedzuje na rubriky, ktoré sa vyskytujú v hlavných klasických repertoároch, a na lieky z kníh s pred rokom 1930.
<i>Spoloční autori</i>	Zobrazte len autorov, ktorí sú podľa Georgea Vithoukasa považovaní za najspoločnejších.
<i>Rubriky spoločnosti Kent</i>	Repertoár je obmedzený na rubriky odvodené z Kentovho repertoáru.
<i>Rubriky z Allenovej terapeutickéj vreckovej knihy</i>	Repertoár je obmedzený na rubriky odvodené z Allenovej terapeutickéj vreckovej knihy.

Používateľom definovateľné filtre repertoáru možno vytvoriť v edícii *Master*.

Ak je vybraný filter, jeho názov sa zobrazí v záhlaví rozloženia repertoárovej knihy. Takto môžete ľahko zistiť, ktorú možnosť repertoáru používate.

Poznámka: Filtre repertoáru sa uplatňujú len na obsah *Complete Repertory*.

Ak vaša licencia podporuje používanie ďalších repertoárov alebo ak ste sami vytvorili ďalší repertoárový materiál, filtre sa na tento materiál nevzťahujú.

Nájst' modul

Otvorenie modulu Nájst'

Prejdite do modulu Nájst' kliknutím na kartu *Nájst'*. (Možnosť ponuky *Zobraziť / Nájst', H-S*).

The screenshot shows the Nájst' module interface. On the left, there are search filters: Text (four pm), Opravné prostriedky (lyc), Min. trieda (2), Min. veľkosť rubriky (0), Maximálna veľkosť rubriky (9999), Úplné príznaky (checkbox), Kapitoly (empty), and Typy rubrik (empty). Below these filters is a button labeled 'Jasné'. The main area on the right displays a list of results under the heading 'Nájst' 71 rubriky'. The results are organized into sections: MIND, HEAD, EYES, VISION, HEARING, NOSE, FACE, and THROAT. Each section contains a list of terms and their associated values, such as 'ANXIETY; afternoon; agg.; four pm.: LYC (+8)' and 'PAIN; afternoon; four pm.: LYC (+7)'. At the bottom, there is a search bar with the text 'mind delu lion' and a button labeled 'Jasné'.

Nájst' polia

Na ľavej strane obrazovky môžete vyplniť, čo chcete nájsť. (Alternatívnym spôsobom, ako zadať, čo chcete nájsť, je použiť výkonné pole *Find* v spodnej časti okna, podrobnosti o používaní tohto jediného poľa na výkonné vyhľadávanie nájdete v časti *Find field*)

This screenshot shows the search filters section of the Nájst' module. It includes fields for Text, Opravné prostriedky, Min. trieda, Min. veľkosť rubriky, Maximálna veľkosť rubriky, Úplné príznaky, Kapitoly, and Typy rubrik. Each field has a search icon (magnifying glass) next to it. Below the filters is a button labeled 'Jasné'.

Text

Zadajte fragmenty textu, ktoré chcete vyhľadať:

xyz	Akokoľvek slovo začínajúce na xyz.
=xyz	Slovo musí byť presne xyz.
*xyz	Slovo obsahuje xyz kdekoľvek v texte.
"abc xyz"	Kombinácia textov abc, za ktorou nasleduje xyz
abc + def	Musia sa vyskytovať oba texty abc A def.
abc+def	Rovnako ako vyššie, medzery sú nepovinné.
abc def	Rovnako ako vyššie, AND je predvolené nastavenie. (A + sa automaticky vloží pred def.)
-abc	Text abc sa v texte NESMIE vyskytovať. Túto možnosť možno kombinovať s =, * a "", ako je uvedené vyššie. Príklady: - =ráno - *ation - "z postele"
abc / def	Musí sa vyskytnúť buď abc ALEBO def (medzery nie sú povinné).
Možné sú aj ich kombinácie. Príklady:	
štyri/osem hodín večer	(štyri ALEBO osem), A pm.
pm štyri/osem	Rovnako ako vyššie, poradie nie je dôležité.
"vstávanie z postele" ráno	Sekvencia vstávanie z postele, A ráno.
strach / úzkosť dav/ľudia	(strach ALEBO úzkosť) A (dav ALEBO ľudia). (A + sa automaticky vloží pred dav)

Liek

Zadajte skratky liekov, ktoré chcete vyhľadať. Stlačením tlačidla **Q**, ktoré sa nachádza v blízkosti pravej strany poľa, sa zobrazí vyhľadávacie okno, ktoré vám umožní interaktívne vybrať liek v prípade, že skratku nepoznate naspamäť.

sep	Náprava sep
sep.	Rovnako ako vyššie, bodkový zápis sa môže použiť, ale tu nie je potrebný (je potrebný v poli Find).
-sep	Náprava sep sa v rubrike NESMIE vyskytovať.
sep / nat-m	Buď náprava sep ALEBO nat-m
sep nat-m	Rovnako ako vyššie, predvolené je OR. (A / sa automaticky vloží pred nat-m)
sep/staph+nat-m/mag-m	(sep ALEBO staph) A (nat-m ALEBO mag-m)
sep. staph. + nat-m. mag-m.	To isté ako vyššie. (A / sa automaticky vkladá pred staph a pred mag-m)

Min. stupeň

Zadajte minimálne odstupňovanie nápravných opatrení (1 až 4).

Min. veľkosť rubriky

Zadajte minimálny počet opravných prostriedkov v rubrike.

Maximálna veľkosť rubriky

Zadajte maximálny počet opravných prostriedkov v rubrike.

Kompletné príznaky

Obmedzte vyhľadávanie na úplné príznaky.

Úplný symptóm je príznak, ktorý pozostáva z miesta, pocitu a modalít alebo sprievodných znakov. Táto možnosť sa používa výlučne pri vyhľadávaní na stránke *Complete Repertory*. Ostatné repertoáre tieto informácie spravidla neobsahujú.

Typy rubrik

Stlačením tlačidla **Q**, ktoré sa nachádza v blízkosti pravej strany poľa, sa zobrazí okno umožňujúce interaktívny výber typov rubrik, ako sú Times, Sides, Location atď.

V prípade, že vaša licencia podporuje používanie ďalších repertoárov, upozorňujeme, že ďalšie repertoáre často nemajú označené rubriky ako Times, Sides, Location atď. Každý výber, ktorý tu vykonáte, možno použiť len na repertoáre, ktoré boli na to riadne pripravené, ako napríklad *Complete Repertory*.

Kapitoly

Stlačením tlačidla **Q**, ktoré sa nachádza v blízkosti pravej strany poľa, sa zobrazí okno umožňujúce interaktívny výber kapitoly.

Vyhľadávanie sa spustí automaticky po zadaní kritérií vyhľadávania, nie je potrebné stlačiť žiadne tlačidlo.

Všimnite si, že pre text je predvolená hodnota pre viacnásobné fragmenty AND, ale pre lieky je to OR.

Dôvodom je, že pri zadávaní viacerých textových fragmentov pravdepodobne zamýšľate obmedziť výsledok vyhľadávania, zatiaľ čo pri

viacerych liekoch môžete chcieť vykonať diferenciálnu diagnostiku.

Vyhľadávanie výsledkov

Výsledky požiadavky na vyhľadanie sa zobrazia v pravej časti okna.

Úroveň podrobnosti závisí od toho, čo sa hľadalo. Ak sa hľadali lieky, vybrané lieky sa zahrnú do výsledku vyhľadávania. Ak sa hľadal len text, nezobrazia sa žiadne lieky.

Skrátka, výsledok vyhľadávania sa zameriava na to, čo ste požadovali, a nie na podrobnosti, ktoré sa nepožadovali.

Oblasť výsledkov vyhľadávania má mnoho podobností s modulom *Book*.

Navigácia sa vykonáva pomocou rovnakej klávesnice, myši, panela tlačidiel alebo funkcií ponuky.

Rozloženie sa tiež automaticky prispôsobí veľkosti okna.

Tip: prepínajte medzi zobrazením alebo skrytím opravných prostriedkov stlačením medzery, rovnako ako v module *Book*.


V module *Find* je zobrazovanie opravných prostriedkov obmedzené na trochu menšie rubriky. Rubriky s mnohými liekmi zobrazujú len počet liekov.

Okrem možností navigácie v module *Book* ponúka výsledok vyhľadávania možnosť prejsť priamo na rubriku v knihe, a to jednoduchým dvojitým kliknutím myšou na rubriku.

Ďalšie príklady

Medzi zadaním kritérií vyhľadávania do vyššie uvedených polí a použitím poľa *Find* v spodnej časti okna existuje vzťah jedna k jednej. Ďalšie príklady použitia modulu *find* sú uvedené v časti *Pole Find*.

Diferenciálna diagnostika v module *Nájst'*

V module *Find* (*Nájst'*), Differential Diagnosis (Diferenciálna diagnostika) sa zobrazí zoznam príslušných nápravných opatrení pre všetky nájdené rubriky, podobne ako pri analýze. (Možnosť ponuky *Zobrazit' / Lieky / Zobrazit' lieky DD*, tlačidlo na paneli nástrojov , možnosť kontextového menu *Lieky / Zobrazit' lieky DD*).

V tomto príklade po vyhľadaní stránky *počas krčov*:

MIND	
ACTIVITY; aversion to activity around her, during convulsions: (1)	cupr
ANGER; convulsions; during epileptic: (1)	cic
ANXIETY; convulsions; during: (27)	bell
ANXIETY; heart region; convulsions, during: (3)	hyos
ANXIETY; heart region; convulsions, during; epileptic: (1)	op
BARKING; convulsions; during: (4)	lach
BITING; convulsions, during: (32)	stram
CLINGING; children, of; convulsions, during: (1)	nux-v
COMPANY; aversion to; convulsions, during epileptic: (1)	ign
CONFUSION of mind; convulsions; during: (18)	caust
CONFUSION of mind; convulsions; during; epileptic: (6)	camp
CONFUSION of mind; convulsions; during; puerperal: (1)	oena
CONVULSIONS; during: (173)	ars
CONVULSIONS; during and after: (44)	sec
CURSING, swearing, desires; convulsions, during: (2)	mosch
CUT, mutilate, slit, desire to; oneself; convulsions, during: (1)	calc
DANCE, desires to; convulsions, during: (1)	cham
DEATH; desires; convulsions, during: (1)	absin
DEATH; presentiment of; convulsions, spasms, during: (1)	sulph
DELIRIUM; convulsions; during: (24)	bufo
DELIRIUM; convulsions; during; epileptic: (8)	plb
DELIRIUM; convulsions; during; lead colic, in: (2)	verat
DELIRIUM; raging, raving; convulsions; during: (1)	sil
DELUSIONS, imaginations; convulsions; during: (10)	cina
DELUSIONS, imaginations; head; forehead is swelling suddenly, during headache, before convulsions: (1)	verat-v
DELUSIONS, imaginations; images, phantoms, sees; frightful; convulsions; during: (3)	plat
DELUSIONS, imaginations; man; huge, drunk, lies down beside her, begs him to retire; convulsions, during: (1)	art-v
DESPAIR; convulsions, during: (1)	lyc
	ip
	glon
	hydr-ac
	cocc
	merc
	sep
	zinc
	stry
	puls
	acon
	canth


Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort



Prípadový modul

Otvorenie modulu Case

Prejdite do modulu Prípad kliknutím na kartu *Prípad*. (Možnosť ponuky *Zobraziť / Prípad*, -D).

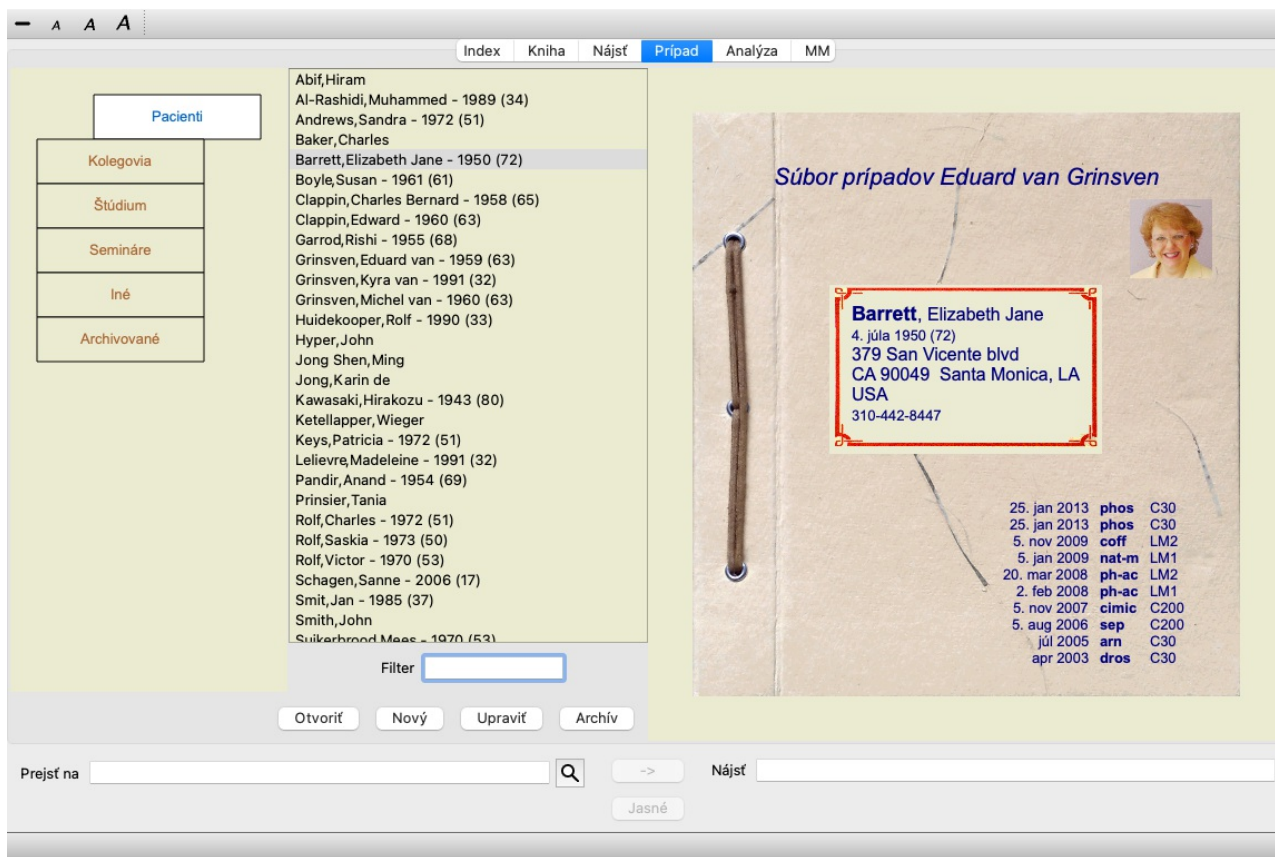

Modul Prípad vám umožňuje vytvárať a organizovať súbory prípadov pacientov, registrovať recepty, ktoré ste vystavili, a vytvárať a organizovať analýzy.

Práca s modulom Case je ako práca so skutočnými spismi.

Prípady sú usporiadané do skupín, podobne ako by ste v reálnom živote usporiadali svoje spisy do rôznych kartoték alebo zásuviek.

Najprv si vyberte skupinu alebo skupiny, v ktorých chcete pracovať.

Prípady vo vybraných skupinách sa zobrazia v zozname, pričom sa zobrazí len súhrn informácií o pacientovi: Meno a rok narodenia.


Prípady možno filtrovať zadaním jednej alebo viacerých častí názvu pacienta do poľa *Filter* pod zoznamom.

Po výbere prípadu v zozname sa súbor prípadu zobrazí na pravej strane obrazovky.

Ďalším krokom by malo byť otvorenie spisu, ale najprv sa budeme venovať niekoľkým podrobnostiam o tejto časti správy prípadov.

Výber skupín a vytváranie vlastných skupín

Výber skupín si môžete predstaviť ako druh zásuvkovej skrinky.

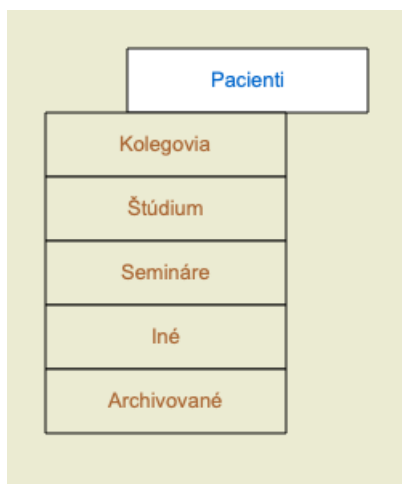

Na tomto obrázku je zásuvka *Patients* otvorená.

Štandardné skupiny sú:

Pacienti Všetky súbory prípadov, ktoré sú v opise prípadu označené ako *Patient* (viac informácií nižšie) a ktorých ste autorom.

Kolegovia Všetky spisy, ktoré sú v opise prípadu označené ako *Patient* a ktorých autorom je niekto iný.


Štúdia Všetky spisy, ktoré sú označené ako *Štúdia*. Ide o prípady, ktoré sa priamo netýkajú žiadneho z vašich pacientov, ale slúžia len na vaše osobné štúdium.

Seminára Všetky spisy, ktoré sú označené ako *Seminár*. V tejto skupine vytvárate prípady pre všetky prípady, ktoré sa vyskytnú na seminároch a školeniach.

Iné Všetky prípady, ktoré nepatria do žiadnej inej skupiny.

Archivované Všetky prípady, ktoré ste archivovali.
Archivované prípady sa už neobjavujú v žiadnej z ostatných skupín.


Môžete otvoriť jednu alebo viac zásuviek súčasne. Kliknutím na zásuvku ju otvoríte alebo zatvoríte. Dvojitým kliknutím na jednu zo zásuviek ju otvoríte a zároveň zatvoríte všetky ostatné.

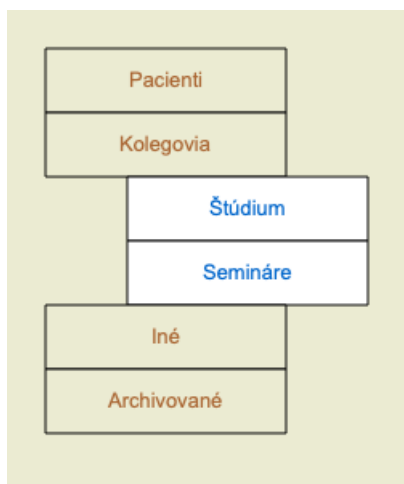

Otvoria sa dve zásuvky.

V zozname s prípadmi sa zobrazia všetky prípady, ktoré sú označené ako "Study" (Štúdium) alebo ako "Seminars" (Semináre).

Samozrejme, že tieto skupiny nezodpovedajú vašim osobným želaniam. Vytváranie nových zásuviek s vlastnými skupinami je jednoduché. Pri úprave informácií o prípade môžete určiť, v ktorých skupinách má byť prípad zaradený. Môžete použiť tri štandardné skupiny "Pacient", "Štúdia" a "Seminár", ale môžete zadať aj vlastné názvy skupín. Nové zásuvky sa do zoznamu pridávajú automaticky:

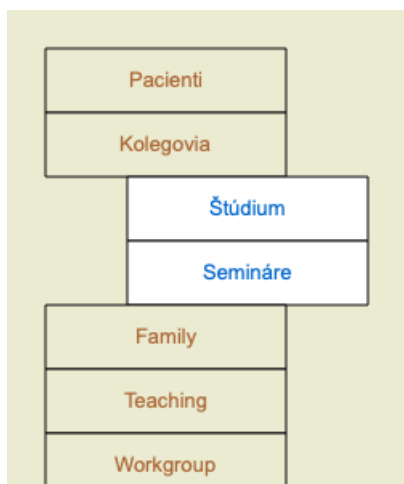

Zásuvky *Rodina*, *Vyučovanie* a *Pracovná skupina* sa do zoznamu pridávajú automaticky, pretože v niektorých prípadoch boli tieto názvy skupín použité v informáciách o prípade.

Výber správneho spisu

V zozname sa zobrazia všetky prípady, ktoré zodpovedajú vybranej skupine alebo skupinám. Ak do poľa *Filter* vyplníte nejaký text, zoznam sa obmedzí na tie prípady, ktoré zodpovedajú textu filtra.

Príklad použitia filtra:



Filter má niekoľko veľmi výkonných možností na výber správneho prípadu. Používa rovnaké kritériá filtrovania ako pole *Find* pre text a lieky.

V module *Case (Prípad)*, text je meno, ako je uvedené v zozname, a lieky sú všetky lieky, ktoré boli pacientovi predpísané (alebo NEBOLI predpísané).

Podrobnosti nájdete v časti "*Vyhľadávanie*" na stránke.

Príklad: *John* alebo *Joseph*, ktorému bol predpísaný *nux-v*, ale nikdy *sulph*, stačí zadať:

john / joseph nux-v. -sulph.
(Všimnite si bodku za názvom lieku!).


Zhrnutie spisu

Po výbere spisu sa časť informácií o prípade zobrazí na pravej strane.

Informácie zahŕňajú:

- Meno autora prípadu.
- Informácie o pacientovi (meno, adresa, dátum narodenia).
- Fotografia (ak je k dispozícii).
- Zoznam posledných predpisov.

Príklad:

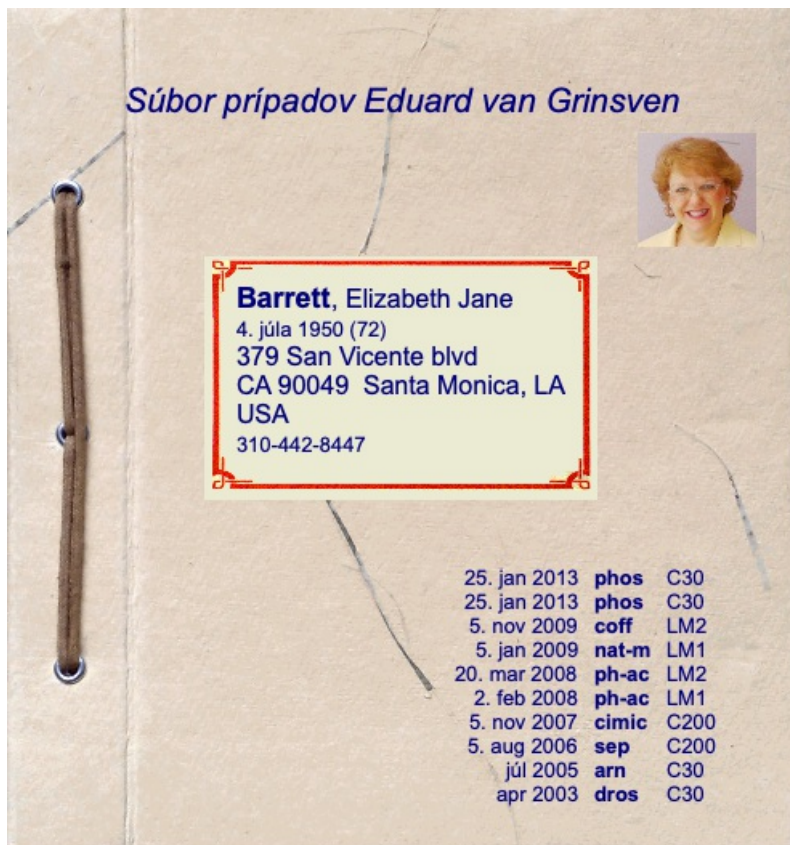

Vytvorenie súboru prípadu

Nový súbor prípadu môžete vytvoriť kliknutím na tlačidlo *New*. (Možnosť ponuky *Prípad / Nový prípad, control-N*). Zobrazí sa dialógové okno, v ktorom môžete zadať informácie o pacientovi, ako aj základné informácie o prípade.

Úprava údajov o prípadoch

V časti *Pacient* môžete vyplniť všetky osobné údaje, ktoré chcete o pacientovi uložiť. Stlačením tlačidla *Photo* vyberte obrazový súbor s fotografiou (*gif, jpeg* alebo *png* formát). Veľkosť fotografie sa automaticky zmení. Odstráňte existujúcu fotografiu pomocou tlačidla *Vyčistiť*.

Ak rok, mesiac alebo deň narodenia pacienta nie sú známe, jednoducho vyplňte 0.

V prípade, že nie je známy presný deň narodenia, ale pacient uvedie len aktuálny vek, môžete ho zadať do poľa Rok narodenia.

Ak vyplníte e-mailovú adresu pacienta, môžete jednoducho odoslať e-mail. (Možnosť ponuky *Prípad / E-mail pacienta*).

Pacient
Prípád

Osobné informácie

Rodinné meno

Krstné meno

Stredné meno

Iniciály

Pohlavie Ženy

Rok narodenia

Mesiac narodenia

Deň narodenia


Foto 

Foto
Jasné
Otočiť

Informácie o adrese

Ulica

PSČ

Mesto

Krajina

Telefón domov

Telefónna kancelária

Mobilný telefón

E-mail

Informácie o rodine

Manžel

Deti

Zrušiť
OK

V časti *Case* môžete zadať niektoré základné informácie o prípade, ktoré sa netýkajú samotného pacienta.

V skupine *Informácie o autorovi* môžete zadať meno osoby, ktorá tento prípad vytvorila. Vo väčšine prípadov ste to vy, takže vaše údaje sú už vyplnené automaticky (alebo stlačte tlačidlo *Me*, ak ste prípad dostali od niekoho iného a chcete ho prevziať). Informácie o autorovi sa používajú na zaradenie prípadov pacientov do výberu skupiny *Pacient* alebo *Kolegovia*.

V skupine *Case groups* môžete vybrať jednu zo štandardných skupín a/alebo vyplniť vlastné názvy skupín oddelené medzerami alebo bodkočiarkami.

Skupina *Case background* je užitočná, ak tento prípad pochádza zo seminára, časopisu atď. a chcete si zapamätať, odkiaľ prípad pochádza.

Pacient

Prípád

Informácie o autorovi

Rodinné meno

Grinsven

Krstné meno

Eduard

Stredné meno

van

Iniciály

Ja

Skupiny prípadov

Pacient

☒

Štúdia

☐

Seminár

☐

Ostatné skupiny

Pozadie prípadu

Pôvod prípadu

Complete Dynamics documentation centre.

Poznámky

This is an example case, for use in the documentation.

The information entered here will appear on the case background sheet in the opened case file.

Zrušiť

OK

Otvorenie prípadu

Existujúci súbor prípadu môžete otvoriť tak, že ho vyberiete v zozname a potom kliknete na tlačidlo *Open*. (Možnosť ponuky *Prípád / Otvorený prípad, control-O*).

Na položku v zozname môžete kliknúť aj dvakrát.

Keď vytvoríte nový prípad, automaticky sa otvorí.

Po otvorení súboru prípadu sa zobrazí obsah, ktorý by ste bežne očakávali aj v skutočnom súbore prípadu:


- papier s informáciami o pacientovi,
- formulár s predpismi,
- formulár s prehľadom všetkých analýz v spise,
- list papiera pre každú analýzu,
- list papiera s informáciami o prípade.

Príklad:

Index Kniha Nájst **Prípad** Analýza MM

Informácie pre pacientov

Názov: Barrett, Elizabeth Jane (E.J.M.)
 Pohlavie: Žena
 Dátum narodenia: 4. júla 1950 (72)
 Adresa: 379 San Vicente blvd
 CA 90049 Santa Monica, LA
 USA
 Tel. domov: 310-442-8447
 Tel. kancelária:
 Tel. mobil:
 E-mail: lisabarret50@gmail.com
 Manžel: Bill
 Deti: Jane, Peter



Autor prípadu: Eduard van Grinsven

Základné informácie o prípade:
 Complete Dynamics documentation centre.
 This is an example case, for use in the documentation.
 The information entered here will appear on the case background sheet in the opened case file.

Dátum	Rx	Hrniec.	Poznámky
25. jan 2013	phos	C30	
25. jan 2013	phos	C30	
5. nov 2009	coff	LM2	
5. jan 2009	nat-m	LM1	
20. mar 2008	ph-ac	LM2	Only when grief reappears.
2. feb 2008	ph-ac	LM1	
5. nov 2007	cimic	C200	
5. aug 2006	sep	C200	
júl 2005	arn	C30	Repeat until bruises gone.
apr 2003	dros	C30	

Dostupné analýzy

Dátum	Popis
5. jan 2009	Grief remains, eczema from youth gets back
2. feb 2008	Grief after death mother
3. nov 2007	
5. aug 2006	

Prejsť na

Ak chcete zatvoriť otvorený prípad, kliknite na malú šípku ◀ v ľavom hornom rohu. (Možnosť ponuky *Prípad* / *Zatvoriť prípad*, *control-C*, možnosť kontextového menu *Zatvoriť prípad*).

Správa predpisov

Ak chcete pridať nový recept, dvakrát kliknite na prázdny riadok v hornej časti receptov. (Možnosť ponuky *Prípad* / *Pridať predpis*, *control-X*, možnosť kontextového menu *Pridať predpis*).

Zobrazí sa nové dialógové okno, v ktorom môžete zadať niektoré informácie o predpise:

Náprava

Phosphoricum acidum

Potencia

Reakcie

Pokyny

Poznámky

Rok

Mesiac

Deň

Ak mesiac alebo deň nie sú známe, jednoducho zadajte 0.

Odstráňte predpis tak, že ho vyberiete v zozname a potom Odstrániť predpis. (Možnosť ponuky *Prípad / Vymazať predpis*, možnosť kontextového menu *Vymazať predpis*).

Predpis upravíte dvojitým kliknutím na položku v zozname. (Možnosť ponuky *Prípad / Upraviť predpis*, možnosť kontextového menu *Upraviť predpis*).

Riadenie analýz

Novú analýzu môžete pridať pomocou možnosti v ponuke alebo dvakrát kliknúť na prázdny riadok v hornej časti indexu analýz. (Možnosť ponuky *Prípad / Pridať analýzu, control-A*, možnosť kontextového menu *Pridať analýzu*).

Zobrazí sa nové dialógové okno, v ktorom môžete zadať niektoré informácie o analýze:

Popis

Diagnóza

Poznámky

Rok

Mesiac

Deň

Ak mesiac alebo deň nie sú známe, jednoducho zadajte 0.

Analýzu odstránite tak, že ju vyberiete v zozname a potom Odstrániť analýzu. (Možnosť ponuky *Prípad / Vymazať analýzu*, možnosť kontextového menu *Vymazať analýzu*).

Analýzu upravíte dvojitém kliknutím na položku v zozname. (Možnosť ponuky *Prípad / Analýza úprav*, možnosť kontextového menu *Analýza úprav*).

Ak chcete skopírovať analýzu ako základ pre novú analýzu, použijete položku Duplikovať analýzu. (Možnosť ponuky *Prípad / Duplicitná analýza, control-D*, možnosť kontextového menu *Duplicitná analýza*).

Ak chcete analýzu presunúť do iného prípadu, použijete možnosť ponuky Presunúť analýzu do prípadu. (Možnosť ponuky *Prípad / Presun analýzy do prípadu...*, možnosť kontextového menu *Presun analýzy do prípadu...*).

Ak kliknete na jednu z analýz v zozname, táto analýza sa stane analýzou, ktorá sa používa v module *Analysis* (pozri časť *Analysis*).

Tlač

Môžete si vytlačiť svoj prípad alebo jeho časti. (Možnosť ponuky *Prípad / Tlač, ⌘-P*, možnosť kontextového menu *Tlač*).

Tlač prípadu je možná až po jeho otvorení.

V dialógovom okne môžete vybrať, čo chcete vytlačiť:

Čo vytlačiť?

Kryt puzdra ☐

Analýzy ☒ Aktuálna analýza
☐ Všetky analýzy
☐ Žiadne analýzy

Podrobnosti o analýze ☐

Rubriky a opravné prostriedky ☐

Možnosti tlače

Farba ☒

Tlač na ☒ Tlačiareň
☐ Zápis do súboru PDF
☐ Write to HTML file
☐ Schránka
☐ Súbor s obrázkom

Vysoké rozlíšenie ☐


Kryt puzdra Ak túto možnosť zaškrtnete, prvá strana výtlačku bude obsahovať informácie o pacientovi, ako aj prehľad receptov.

Aktuálna analýza Túto možnosť vyberte, ak chcete vytlačiť iba aktuálne vybranú analýzu s nastaveniami, ktoré sa používajú v module *Analysis* (Analýza).

Všetky analýzy Túto možnosť vyberte, ak chcete vytlačiť všetky analýzy.

<i>Žiadne analýzy</i>	Túto možnosť vyberte, ak nechcete vytlačiť žiadnu z analýz (len obal prípadu).
<i>Podrobnosti o analýze</i>	Ak zaškrtnete túto možnosť, vytlačia sa informácie, ktoré ste zadali pre každú analýzu (diagnóza, poznámky).
<i>Rubriky a lieky</i>	Ak túto možnosť zaškrtnete, každá tlač analýzy bude obsahovať prehľad všetkých opravných prostriedkov v rubrikách, ktoré sa v analýze používajú. Upozorňujeme, že z dôvodu obmedzenia autorských práv bude vytlačených najviac 20 rubrik so všetkými opravnými prostriedkami. Ak vytlačíte viac ako 20 rubrik, rubriky s najväčším počtom opravných prostriedkov nebudú uvedené.
<i>Farba</i>	Tlačte farebne. Ak nie je začiarknuté, tlač je optimalizovaná pre čiernobiele tlačiarne.
<i>Tlač na tlačiarňu</i>	Túto možnosť vyberte, ak chcete tlačiť priamo na tlačiarňu.
<i>Zápis do súboru PDF</i>	Túto možnosť vyberte, ak chcete zapisovať do súboru PDF.
<i>Zápis do súboru HTML</i>	Túto možnosť vyberte, ak chcete zapisovať do súboru HTML. Tento formát je vhodný, ak chcete časti výstupu kopírovať do iných dokumentov.
<i>Schránka</i>	Výberom tejto možnosti vytvoríte obrázok analýzy v schránke počítača, ktorý môžete zahrnúť do inej aplikácie.
<i>Súbor s obrázkom</i>	Túto možnosť vyberte, ak chcete zapísať obrázok analýzy do súboru.

Tlač prehľadu viacerých prípadov

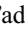Ak ste prípad neotvorili, môžete vytlačiť prehľad viacerých prípadov. (Možnosť ponuky *Prípad / Tlač*, -P, možnosť kontextového menu *Tlač*).


To môže byť praktické napríklad vtedy, ak chcete vytvoriť zoznam pre kolegu, ktorý monitoruje vašich pacientov. Potom by ste mohli vytvoriť zoznam s menami a dátumami narodenia pacientov, ktorých ste navštívili za posledných 6 mesiacov, so zoznamom receptov na lieky.

Možnosti v dialógovom okne tlače si nevyžadujú ďalšie vysvetlenie.

Ochrana heslom

Informácie o vašom pacientovi môžu byť chránené pred neželaným prístupom iných osôb, aj keď ste mimo svojho počítača.

Na tento účel môžete nastaviť heslo. (Možnosť ponuky *Prípad / Databáza prípadov / Zmena hesla*).

Ak bolo nastavené heslo, v module *Case sa zobrazí nové tlačidlo* .

Po stlačení tohto tlačidla sa modul kufra okamžite uzamkne a na jeho otvorenie je potrebné zadať heslo.

Informácie o prípade je možné automaticky uzamknúť aj po určitom čase, keď ste program nepoužívali.

Čas pred automatickým uzamknutím môžete nakonfigurovať sami v nastaveniach *Preferences*. (Možnosť ponuky *Všeobecné / Predvoľby*).

Ak nastavíte čas na 0 minút, automatické uzamknutie sa nevykoná.

Pri nastavovaní hesla buďte veľmi opatrní. Okrem vás nikto iný vaše heslo nepozná. Ak zabudnete heslo, je to ako keby ste stratili kľúče od domu - už nemáte prístup.

Archivácia a vymazávanie

Archivácia prípadov

Ak už nechcete, aby sa prípad zobrazoval v zozname vašich prípadov, môžete ho archivovať. (Možnosť ponuky *Prípad / Archivný prípad*).

Po archivácii prípadu sa tento zobrazí v skupine *Archivované*.

Aj keď je prípad archivovaný, môžete ho otvoriť. Ak v prípade vykonáte akékoľvek zmeny, automaticky sa odstráni zo skupiny *Archivované* a zaradí sa späť medzi ostatné aktívne prípady.

Môžete archivovať viacero starších prípadov. (Možnosť ponuky *Prípad / Archivácia starých prípadov*, možnosť kontextového menu *Archivácia starých prípadov*).

V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, môžete zadať počet mesiacov. V zozname sa zobrazia všetky prípady, ktoré neboli upravované počas daného počtu mesiacov. Ďalej môžete archivovať všetky prípady, ktoré sú vybrané v zozname.

Odstránenie súboru prípadu

Ak si už nechcete ponechať súbor prípadu, môžete ho vymazať. (Možnosť ponuky *Prípad / Odstrániť prípad*).

Prípad je možné vymazať až po jeho archivácii.

Je tiež možné, aby sa staršie archivované prípady automaticky vymazali. Táto možnosť je k dispozícii v nastaveniach *Preferences*. V predvolenom nastavení sa archivované prípady automaticky neodstraňujú.

Automatické zálohovanie

Ak ste neúmyselne vymazali súbor prípadu, môžete ho obnoviť zo zálohy. (Možnosť ponuky *Prípad / Databáza prípadov / Obnovenie prípadu zo zálohy*).

Zálohovanie sa vykonáva automaticky.

- Posledný mesiac každý deň.
- Každý mesiac za posledný rok.
- Po jednom roku sa záloha odstráni natrvalo.
- Upozorňujeme, že zálohy sa ukladajú lokálne v počítači.

Cloudový server

Úvod

V prípade, že pre svoju prax používate viac ako jeden počítač, možno budete chcieť, aby sa informácie o vašich prípadoch synchronizovali medzi nimi.

Takto budete mať vždy k dispozícii aktuálne informácie o prípadoch, nech pracujete kdekoľvek. Aj keď ste na cestách a máte telefón alebo tablet.

Náš cloudový server ponúka flexibilný a jednoduchý mechanizmus na automatickú synchronizáciu vašich prípadov.

Na rozdiel od mnohých iných cloudových riešení môžete *Complete Dynamics* používať s internetovým pripojením aj bez neho. Bez pripojenia na internet sú všetky prípady uložené lokálne v zariadení. Všetky vykonané zmeny sa ukladajú lokálne.

Ak je k dispozícii internetové pripojenie, vaše prípady sa môžu automaticky synchronizovať prostredníctvom cloudového servera.

Ak vykonáte zmeny v prípadoch na rôznych zariadeniach, pričom nie ste pripojení k internetu, nemá to žiadny význam. Keď je k dispozícii pripojenie k serveru Cloud Server, všetky zmeny vykonané v rôznych zariadeniach sa môžu zlúčiť. Aj keď ste pracovali na tom istom prípade.

Čo robí cloudový server?

Cieľom cloudového servera je zachovať rovnaké prípady vo všetkých zariadeniach, ktoré túto službu používajú.

To, čo pridáte do jedného zariadenia, sa pridá aj do ostatných zariadení.

To, čo zmeníte na jednom zariadení, sa zmení aj na ostatných zariadeniach.

To, čo vymažete v jednom zariadení, sa vymaže aj v ostatných zariadeniach.

Archivácia prípadu znamená, že bude archivovaný aj na ostatných zariadeniach.

Výhody používania cloudového servera

- Po automatickej synchronizácii sú vaše prípady aktuálne bez ohľadu na to, aké zariadenie používate.
- Funguje so všetkými zariadeniami, ktoré sú vo vašej licencií.
- Môžete pracovať bez pripojenia na internet.
- Synchronizácia je automatická, keď je k dispozícii internet.
- Vždy máte k dispozícii kópiu svojich prípadov pre prípad, že sa váš počítač vybije.

Pre ktoré zariadenia by som mal používať Cloud Server?

Je to vaša vlastná voľba.

Ak používate jeden počítač, na zabezpečenie kópie vašich prípadov môžete použiť cloudový server. V prípade, že váš počítač zomrie, prípady sa môžu automaticky preniesť do nového počítača.

Ak používate dve alebo viac zariadení, Cloud Server môže aplikovať zmeny vykonané v jednom zariadení na ostatné zariadenia.

Pre každé zariadenie, ktoré používate, sa môžete rozhodnúť, či má používať cloudový server alebo nie. Cloudový server môžete používať napríklad pre počítače doma a v kancelárii, ale nie pre telefón.

Bezpečnosť a ochrana súkromia

Sme si vedomí, že bezpečnosť a ochrana osobných údajov sú mimoriadne dôležité.

Zabezpečenie

Údaje o vašom prípade sú veľmi dobre chránené.

- Prístup k serveru Cloud Server je možný len zo zariadenia, ktoré má platnú licenciu na vaše meno.
- Žiadne iné zariadenie nemá prístup k vašim prípadom.
- Vyžaduje sa ďalšie heslo, ktoré poznáte len vy.
- Pripojenie k serveru je šifrované.

Ochrana osobných údajov

Nie ste povinní používať náš cloudový server. Veľmi dobre chápeme, že možno nechcete, aby boli informácie o vašom pacientovi uložené niekde na vzdialenom počítači.

Je len na vašom rozhodnutí, či budete cloudový server používať, alebo nie.

Plne rešpektujeme súkromie vás a vašich pacientov.

Vaše údaje nebudeme nijakým spôsobom používať ani spracovávať. Cloudový server ju len kopíruje do vašich zariadení a z nich.

Nastavenie cloudového servera

Ak chcete začať používať zariadenie so serverom Cloud Server, musíte ho najprv aktivovať.

Aktivácia sa vykonáva na stránke *Preferences*, v časti *Case*. (Možnosť ponuky *Všeobecné / Predvolby*). Tu môžete vybrať možnosť *Use Cloud Server*.

Ak aktivujete cloudový server prvýkrát, automaticky sa zobrazí pokyn na vytvorenie kódu PIN, ktorý chráni údaje o vašom prípade. Tento kód PIN môžete kedykoľvek neskôr zmeniť. (Možnosť ponuky *Prípady / Databáza prípadov / Zmena kódu PIN služby Cloud*). Nezabudnite na kód PIN do cloudu, budete ho potrebovať pri aktivácii ďalšieho zariadenia.

Stav cloudového servera

V hornej časti stránky v module *Case* sa nachádza ikona označujúca stav pripojenia k serveru.

☁ Cloudový server je k dispozícii.

☁ Prebiehajúca komunikácia.

✖ Nie je k dispozícii internetové pripojenie alebo je server dočasne vypnutý.
ak sa nezobrazuje žiadna ikona, cloudový server ešte nie je nakonfigurovaný.

Po kliknutí na ikonu sa synchronizácia vykoná okamžite.

Obmedzenia

Cieľom cloudového servera je aplikovať všetky zmeny vykonané v jednom zariadení na všetky ostatné zariadenia. Nie vždy je to však možné.

Pomôže vám to pochopiť, aké sú obmedzenia.

Najmä pri práci v režime off-line sa môže stať, že zmeny v tom istom prípade sa vykonávajú na rôznych zariadeniach skôr, ako sa obnoví pripojenie ku cloudovému serveru. Za normálnych okolností by to zriedkavo predstavovalo problém.

Informácie v prípade sa skladajú z niekoľkých nezávislých prvkov:

- Informácie o pacientovi.
- Informácie o prípade.
- Každá analýza.
- Každý predpis lieku.

Môžete vykonať zmeny v jednom z týchto prvkov a zmeny v inom prvku na inom zariadení.

Ak však napríklad zmeníte tú istú analýzu na dvoch zariadeniach, uloží sa len posledná zmena.

Ak zmeníte jednu analýzu na jednom zariadení a inú analýzu na inom zariadení, nebude to problém.

Alebo ak pridáte predpis lieku na jednom zariadení a iný predpis lieku na inom zariadení, nebude to problém.

Zálohovanie

Prípady uložené na cloudovom serveri sú kópiou prípadov vo vašom zariadení. Pôvodné údaje sú vo vašom zariadení.

Za zálohovanie počítača ste vždy zodpovední sami.

Zdieľanie prípadov

Zdieľanie vašich prípadov s kolegami

V mnohých situáciách budete chcieť jeden zo svojich prípadov a/alebo analýz poskytnúť kolegovi, spolužiakovi, učiteľovi alebo ho možno zverejniť na internetovom fóre.

Complete Dynamics vám ponúka možnosť exportovať celý prípad alebo len jeho časť do súboru. Tento súbor potom môžete odovzdať svojmu kolegovi a importovať ho do jeho počítača. Váš kolega na to nepotrebuje licenciu *Practitioner Edition*, pomocou bezplatnej *Browser Edition* je možné súbor aj importovať a prezerat.

Zdieľanie prípadov sa môže uskutočniť aj anonymne, čím sa zabezpečí osobné súkromie pacienta a vás.

Spôsob exportu a importu je opísaný nižšie. Najprv sa pozrieme na ďalšiu dôležitú funkciu zdieľania prípadov.

Synchronizácia vašich prípadov medzi viacerými počítačmi

Manuálna synchronizácia je relevantná len vtedy, ak ste sa rozhodli nepoužívať automatickú synchronizáciu prostredníctvom cloudového servera.

Pomocou zdieľania kufríkov získate dve výkonné možnosti prenášania kufríkov z jedného počítača do druhého.

Najjednoduchšie je exportovať úplnú kópiu databázy prípadov do jedného počítača a importovať ju do druhého počítača. Tým sa nahradia všetky informácie o prípadoch uložené v druhom počítači. Túto možnosť môžete použiť aj na pravidelné vytváranie zálohy databázy prípadov.

Pokročilejším spôsobom je exportovať iba prípady, ktoré sú upravené v jednom počítači, a importovať ich do druhého počítača. V tejto situácii sa do databázy v druhom počítači skopírujú a zlúčia len zmenené informácie. Tento výkonný synchronizačný mechanizmus funguje dokonca aj vtedy, keď bol prípad upravený na oboch počítačoch!

Exportovanie jedného prípadu

Ak chcete exportovať jeden prípad, otvorte modul *Case* a vyberte prípad, ktorý chcete exportovať. Potom použite možnosť *Exportovať aktuálny prípad...* (Možnosť ponuky *Prípad / Zdieľanie / Export aktuálneho prípadu...*, *control-Y*, možnosť kontextového menu *Zdieľanie / Export aktuálneho prípadu...*). Otvorí sa dialógové okno, v ktorom môžete vybrať časti prípadu, ktoré chcete exportovať:

The screenshot shows a dialog box titled 'Export Case'. It contains a list of checkboxes for selecting data to export: 'Informácie o autorovi' (checked), 'Informácie pre pacienta' (checked), 'Poznámky k prípadu' (checked), 'Predpisy' (checked), and 'Analýzy' (unchecked). Below the 'Analýzy' checkbox is a scrollable list of analysis titles, including '1.jan 2009-A simple analysis', '2.jan 2009-A simple analysis - with Group', '3.jan 2009-A simple analysis - using Sym', '4.jan 2009-An example of symptom and', '1.feb 2009-Symptoms with many or few', '1.feb 2009-Grouping example', '1.mar 2009-Simple classification example', '25.jan 2011-Bönnighausen style analysis', '1.sep 2015-Family analysis', and '1.mar 2016-DD example - Ferrum case'. Below the list is a text field labeled 'Heslo (voliteľné)'. At the bottom are four buttons: 'Všetky', 'Žiadne', 'Zrušiť', and 'OK'.

<i>Informácie o autorovi</i>	Ak zrušíte začiarknutie tejto možnosti, vaše meno sa do exportu nezahrnie.
<i>Informácie pre pacienta</i>	Ak zrušíte začiarknutie tejto možnosti, pacient bude anonymný. Používa sa len pohlavie a rok narodenia pacienta. Ak je táto možnosť začiarknutá, do exportu sa zahrnú všetky osobné údaje pacienta.
<i>Poznámky k prípadu</i>	Ak je táto možnosť začiarknutá, do exportu sa zahrnú aj základné informácie o vašom prípade. (Pozadie prípadu, poznámky a skupiny).
<i>Predpisy</i>	Ak je táto možnosť začiarknutá, do exportu sa zahrnú aj vykonané predpisy.
<i>Analýzy</i>	Pre každú analýzu v prípade sa môžete rozhodnúť, či ju chcete exportovať alebo nie. Kliknutím na riadok zapnete/vypnete výber. Tlačidlá <i>All (Všetky)</i> a <i>None (Žiadne)</i> môžete použiť na výber všetkých alebo žiadnych analýz, aby ste uľahčili výber.
<i>Heslo</i>	Ak tu zadáte hodnotu, exportný súbor bude chránený heslom. Aby ho niekto mohol importovať, musí poznať heslo. Odporúčame používať heslo pre všetky informácie, ktoré zdieľate, s výnimkou anonymných prípadov, ktoré chcete zverejniť pre všetkých na internete.

Keď ste pripravení, stlačte tlačidlo *OK* a zobrazí sa výzva na zadanie názvu a umiestnenia súboru podľa vášho výberu. Predvolený názov súboru je už vyplnený, ale môžete si vybrať ľubovoľný názov.

Exportovanie jednej analýzy

Ak chcete exportovať jednu analýzu, otvorte prípad, ktorý obsahuje analýzu, a vyberte analýzu, ktorú chcete exportovať. Potom použite možnosť *Exportovať aktuálnu analýzu...* (Možnosť ponuky *Prípad / Zdieľanie / Analýza exportu prípadu...*, možnosť kontextového menu *Zdieľanie / Analýza exportu prípadu...*). Otvorí sa dialógové okno, v ktorom môžete vybrať časti prípadu, ktoré chcete exportovať spolu s analýzou:

Informácie o autorovi ☒
 Informácie pre pacienta ☒
 Poznámky k prípadu ☒
 Heslo (voliteľné)
 Zrušiť OK

Význam polí nájdete vo vyššie uvedených informáciách.

Exportovanie viacerých prípadov

Do jedného súboru môžete exportovať viacero prípadov. (Možnosť ponuky *Prípad / Zdieľanie / Export viacerých prípadov...*, možnosť kontextového menu *Zdieľanie / Export viacerých prípadov...*).

Pacienti

Kolegovia

Štúdium

Semináre

Iné

Archivované

Abif, Hiram
Al-Rashidi, Muhammed - 1989 (34)
Andrews, Sandra - 1972 (51)
Baker, Charles
Barrett, Elizabeth Jane - 1950 (72)
Boyle, Susan - 1961 (61)
Clappin, Charles Bernard - 1958 (65)
Clappin, Edward - 1960 (63)
Garrod, Rishi - 1955 (68)
Grinsven, Eduard van - 1959 (63)
Grinsven, Kyra van - 1991 (32)
Grinsven, Michel van - 1960 (63)
Huidekooper, Rolf - 1990 (33)
Hyper, John
Jong Shen, Ming
Jong, Karin de
Kawasaki, Hirakozu - 1943 (80)
Ketellapper, Wieger
Keys, Patricia - 1972 (51)
Lelievre, Madeleine - 1991 (32)

Filter

Informácie o autorovi ☒
Informácie pre pacienta ☒
Poznámky k prípadu ☒
Predpisy ☒
Na ochranu súkromia používajte heslo.
Heslo
Zrušiť OK

V zozname prípadov vyberte tie, ktoré chcete exportovať, kliknutím na ne.

Rozsah prípadov môžete vybrať potiahnutím myši nad položky.

Importovanie prípadu alebo analýzy

Ak vám niekto iný poskytol exportný súbor prípadu alebo analýzy, môžete ho jednoducho importovať pomocou možnosti Importovať. (Možnosť ponuky *Prípad / Zdieľanie / Import...*, *control-I*, možnosť kontextového menu *Zdieľanie / Import...*).

Zobrazí sa výzva na zadanie súboru, ktorý chcete importovať.


Po výbere súboru sa súbor importuje do databázy prípadov. V prípade, že je súbor chránený heslom, budete najprv požiadaní o zadanie hesla.

Importovaný prípad nájdete v skupine *Kolegovia*, ak bolo v súbore uvedené meno autora, inak ho nájdete v skupine *Iné*. Po otvorení prípadu môžete sami ľahko zmeniť informácie o prípade alebo presunúť analýzu do niektorého z vašich ďalších prípadov. (Možnosť ponuky *Prípad / Presun analýzy do prípadu...*).

Export celej databázy prípadov

Keď exportujete celú databázu prípadov, je možné ju importovať len do počítača, ktorý má licenciu registrovanú na vaše meno.

Ak chcete exportovať celú databázu prípadov, použite možnosť *Export complete Case Database...* (Možnosť ponuky *Prípad / Zdieľanie / Export kompletnej databázy prípadov...*, možnosť kontextového menu *Zdieľanie / Export kompletnej databázy prípadov...*). Otvorí sa dialógové okno, v ktorom môžete zadať heslo na ochranu tohto súboru (dôrazne odporúčame).

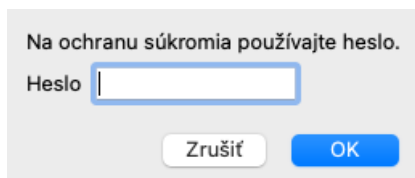

Po stlačení tlačidla *OK* budete požiadaní o zadanie názvu a umiestnenia súboru.


Preneste súbor do iného počítača a tam vykonajte *Import*. (Možnosť ponuky *Prípad / Zdieľanie / Import...*, *control-I*).

Exportovanie upravených prípadov

Export upravených prípadov je najflexibilnejší spôsob synchronizácie informácií o prípadoch medzi viacerými počítačmi.

Ak chcete exportovať úpravy, použite možnosť *Exportovať upravené prípady*. (Možnosť ponuky *Prípad / Zdieľanie / Export upravených prípadov...*, možnosť kontextového menu *Zdieľanie / Export upravených prípadov...*).

Otvorí sa dialógové okno, v ktorom môžete zadať, čo sa má synchronizovať:

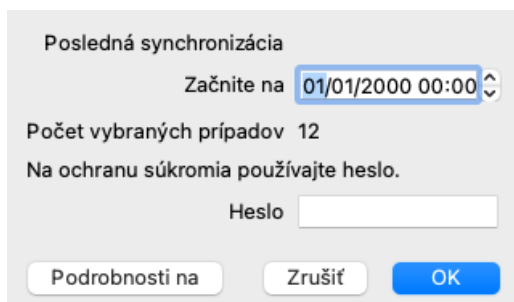

V predvolenom nastavení je vyplnený dátum poslednej synchronizácie. Ak chcete synchronizovať všetky zmeny po inom dátume a čase, stačí zmeniť hodnotu.

Ak chcete získať prehľad o tom, ktoré prípady budú zahrnuté do exportu, stlačte tlačidlo *Details...*, čím získate zoznam prípadov a časy ich posledných úprav.

Import upravených prípadov

Upravené prípady možno importovať do iného počítača. (Možnosť ponuky *Prípad / Zdieľanie / Import...*, *control-I*, možnosť kontextového menu *Zdieľanie / Import...*).

Po výbere súboru sa otvorí dialógové okno s informáciami o potrebných synchronizačných činnostiach:

Akcia	Dátum	Pacient
Nový	5.jan 2014	Holiday, Jimmy - 1942
Zlúčiť	6.jan 2014	St. Clair, Bonnie - 1970
Nahradiť	6.jan 2014	Eastwood, Herny - 1992
Nový	6.jan 2014	Baker, Charles - 1950
Nový	7.jan 2014	Smarting, All - 1962
Zlúčiť	7.jan 2014	Williams, Charita - 1970
Ignorovať	20.jan 2014	Underwood, Sam - 2013

Dôležitý je tu stĺpec úplne vľavo. Tento stĺpec môže mať štyri rôzne hodnoty:

Nový Prípád sa nenachádza v miestnej databáze. Bude novo vytvorená.

Vymeňte stránku Prípád sa v miestnej databáze nenašiel, ale verzia v exportnom súbore je novšia. Prepíše sa novými informáciami.

Zlúčenie Puzdro bolo na oboch počítačoch upravené. Informácie v exportných súboroch sa zlúčia s informáciami v miestnej databáze. Žiadne existujúce informácie sa neprepíšu, ale skopírujú sa nové informácie.

Ignorovať Zdá sa, že tento prípad nie je upravený na žiadnom z oboch počítačov. Nič sa nedeje.

Akciu môžete upraviť pre ktorýkoľvek z prípadov v zozname. Vyberte niekoľko prípadov kliknutím na ne a potom stlačte niektoré z tlačidiel *Ignorovať*, *Nový*, *Nahradiť* alebo *Zlúčiť*. Stlačením tlačidla *Reset* obnovíte všetky činnosti na ich pôvodné nastavenie. Všetky upravené nastavenia sú zvýraznené farbou, aby bolo jasné, že ich hodnota sa líši od pôvodného nastavenia:

Akcia	Dátum
Ignorovať	5.jan 2014
Nahradiť	6.jan 2014
Nahradiť	6.jan 2014
Nový	6.jan 2014

Ak je akcia explicitne nastavená na *New*, prípad sa skopíruje ako nový prípad, aj keď sa podobný prípad už nachádza v miestnej databáze. Môžete to urobiť, keď máte pochybnosti, po importe sa vám zobrazia dva prípady s rovnakým názvom, ktoré si môžete sami overiť. Za normálnych okolností to nikdy nie je potrebné, možnosť *Merge* nevyhodí žiadne informácie.

Automatické zálohovanie

Na uľahčenie zálohovania program automaticky vytvára export celej databázy prípadov raz denne. Tieto zálohy sa uchovávajú za posledných 7 dní. Pomocou neho môžete vytvárať vlastné zálohy bez toho, aby ste museli vedieť, kde program ukladá svoje interné databázy. Ak potrebujete vedieť viac o tom, kde sa nachádzajú zálohy a ako ich v prípade núdze obnoviť, obráťte sa na oddelenie podpory. (Možnosť ponuky *Pomoc* / *Všeobecná spätná väzba*).

Analytický modul

Rýchly štart

Pre netrpezlivých z vás...

Odporúčame vám, aby ste si prečítali časti nápovery o analýze, pretože trochu základných informácií vám uľahčí prácu. Ak si ju chcete prečítať neskôr a začať hneď, toto zhrnutie by vám malo stačiť na začiatok.

Začať s prípadom alebo nie?

V mnohých prípadoch sa analýza vykonáva preto, že sa týka pacienta a možno si ju budete chcieť uchovať na neskoršie použitie. V takejto situácii sa odporúča najprv vytvoriť prípad alebo otvoriť existujúci prípad, pretože vaša analýza sa potom uloží na správne miesto.

Po otvorení prípadu k nemu možno ľahko pridať novú analýzu.

Podrobné informácie o organizácii prípadov a analýz nájdete v časti *Modul prípadov*.

Ak chcete vykonať len rýchlu analýzu bez kontextu skutočného prípadu, jednoducho neotvárajte ani nevytvárajte prípad a automaticky sa vytvorí predvolený prípad (s názvom *Unnamed case*) a analýza sa uloží do neho. Analýzu nájdete v tomto prípade označenú dnešným dátumom.

Pridávanie rubriky

Pridanie rubriky do analýzy je jednoduché.

Najprv vyberte rubriku v module *Book*. Rubrika je vybraná, keď je označená jasne žltou farbou.

Potom stlačte tlačidlo Enter. (Možnosť ponuky *Prípad / Pridať rubriku, control-R*).

Pri hľadaní správnej rubriky vám pomôže modul *Find*.

Zhrnutie

Možnosť ponuky

(Možnosť ponuky *Prípad / Nový prípad, control-N*).

(Možnosť ponuky *Prípad / Pridať analýzu, control-A*). Pridanie analýzy k otvorenému prípadu.

(Možnosť ponuky *Prípad / Pridať príznak, control-S*). Pridajte do analýzy symptóm.

(Možnosť ponuky *Prípad / Pridať rubriku, control-R*). K analýze pridajte rubriku o repertoári.

Akcia

Vytvorte nový prípad bez akejkoľvek analýzy.

Pridanie analýzy k otvorenému prípadu.

Pridajte do analýzy symptóm.

K analýze pridajte rubriku o repertoári.


Urobte to v module *Book* alebo *Find* po výbere rubriky.

Vytvorenie analýzy

Otvorenie modulu Analýza

Prejdite do modulu Analýza kliknutím na kartu *Analýza*. (Možnosť ponuky *Zobraziť / Analýza, ⌘-R*).

Za predpokladu, že ste už otvorili prípad a vybrali analýzu, bude obrazovka vyzeráť takto:

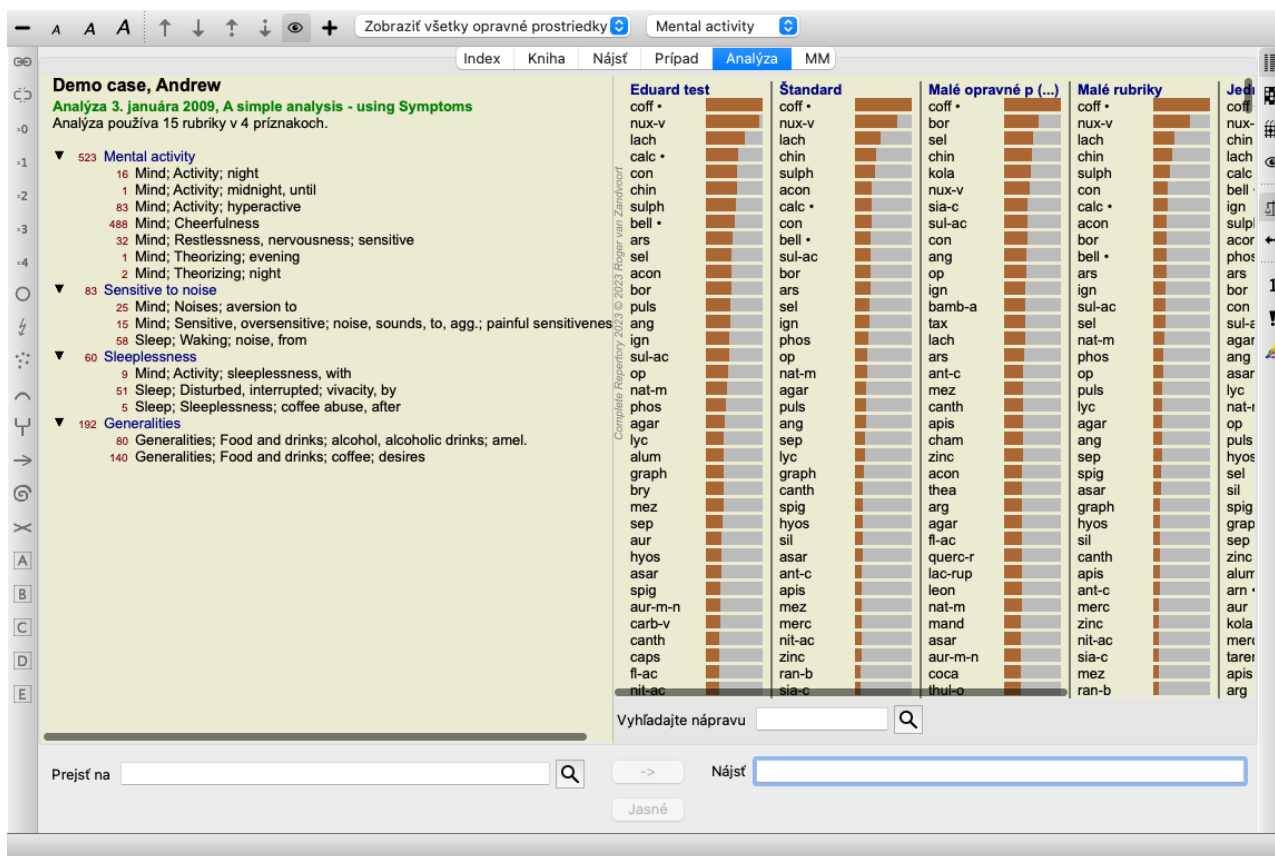

Okno je rozdelené na dve časti:

- príznaky a rubriky použité na túto analýzu,
- výsledky analýzy.

Podrobne sa im budeme venovať, pričom začneme prvým z nich.

Všimnite si, že príklady použité v tomto dokumente sú súčasťou demonštračných prípadov, ktoré nájdete v skupine "Iné" modulu Case. S týmito príkladmi sa môžete voľne hrať. Pri každom spustení programu *Complete Dynamics* sa pôvodné demonštračné prípady vrátia do skupiny "Ostatné".

Symptómy verzus rubriky

Po zozbieraní informácií o pacientovi je tradičným prístupom vyhľadať v repertoári rubriky, ktoré zodpovedajú situácii pacienta. Veľkou nevýhodou tohto prístupu je, že pre niektoré symptómy pacienta je potrebná jedna repertoárová rubrika, zatiaľ čo pre iné symptómy možno nájsť niekoľko rubrik, ktoré spoločne vyjadrujú sťažnosť. Vždy, keď sa na vyjadrenie jedného symptómu použije viacero rubrik, lieky, ktoré zodpovedajú tomuto symptómu, sa automaticky započítavajú silnejšie, takže symptóm dostane v porovnaní s ostatnými symptómami zvýšenú hodnotu.

Pacient tiež nevyjadruje svoje symptómy v zmysle repertoárového jazyka. Zbierka repertoárových rubrik preto nie je skutočným zobrazením pacientových ťažkostí, najmä ak sa nedajú nájsť rubriky, ktoré by vyjadrovali pacientove symptómy 100 % doslovne.

Complete Dynamics rieši tieto problémy tým, že rozlišuje medzi príznakmi a rubrikami.

Najprv je možné zadať analyzované príznaky pacienta. Po druhé, repertoárové rubriky môžu byť viazané na tieto príznaky.

Modul Analýza môže automaticky kompenzovať výsledky analýzy vzhľadom na skutočnosť, že niektoré príznaky sú vyjadrené malým počtom rubrik, zatiaľ čo iné príznaky sú vyjadrené veľkým počtom rubrik. Môžete si teda slobodne vybrať, koľko rubrik potrebujete na adekvátne vyjadrenie symptómov pacienta do repertoárových rubrik bez toho, aby ste narušili rovnováhu výsledkov analýzy!

Symptómy sú jazykom Pacient - Rubriky sú jazykom Repertoár.

Používanie aplikácie Symptoms má viac výhod. Keďže symptómy sú jazykom pacienta, je ľahké priradiť symptómom poradie dôležitosti bez toho, aby bolo potrebné explicitne manipulovať s poradím jednotlivých rubrik (nazývame ich Váha symptómu a Váha rubriky, sú vysvetlené na inom mieste). Výhod je viac, ale o tom sa presvedčíte sami.

Samozrejme, pre rýchlu a jednoduchú analýzu spôsobuje vytvorenie Symptómov určitú réžiu, ktorú by ste možno nechceli. V tomto prípade jednoducho nevytvárajte Symptómy. Všetky rubriky sa potom automaticky umiestnia pod "všeobecný príznak", ktorý je pre vás neviditeľný.

Príklad. Nižšie sú uvedené dva zábery obrazovky z prípadu *Demo Andrew*, jeden bez a jeden s použitím príznakov:

- 16 Mind; Activity; night
- 1 Mind; Activity; midnight, until
- 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
- 83 Mind; Activity; hyperactive
- 488 Mind; Cheerfulness
- 25 Mind; Noises; aversion to
- 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
- 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitiveness to
- 1 Mind; Theorizing; evening
- 2 Mind; Theorizing; night
- 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
- 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after
- 58 Sleep; Waking; noise, from
- 80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.
- 140 Generalities; Food and drinks; coffee; desires

- ▼ 523 Mental activity
 - 16 Mind; Activity; night
 - 1 Mind; Activity; midnight, until
 - 83 Mind; Activity; hyperactive
 - 488 Mind; Cheerfulness
 - 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
 - 1 Mind; Theorizing; evening
 - 2 Mind; Theorizing; night
- ▼ 83 Sensitive to noise
 - 25 Mind; Noises; aversion to
 - 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitiveness to
 - 58 Sleep; Waking; noise, from
- ▼ 60 Sleeplessness
 - 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 - 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
 - 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after
- ▼ 192 Generalities
 - 80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.
 - 140 Generalities; Food and drinks; coffee; desires

Variant s Symptómy je oveľa jasnejší!

Vytváranie symptómov a pridávanie rubriík

Po otvorení prípadu a výbere analýzy možno do analýzy pridať nový symptóm. (Možnosť ponuky *Prípad / Pridať príznak*, *control-S*, možnosť kontextového menu *Pridať príznak*).

Ak chcete odstrániť symptóm (a všetky rubriky, ktoré sú s ním spojené), vyberte ho v zozname myšou alebo klávesnicou a potom stlačte tlačidlo Delete. (Možnosť ponuky *Prípad / Odstrániť vybrané*, možnosť kontextového menu *Odstrániť vybrané*).

Podrobnosti o príznaku môžete upraviť dvojitém kliknutím naň. (Možnosť ponuky *Prípad / Upraviť príznak*, možnosť kontextového menu *Upraviť príznak*).

Rubrika sa vždy pridáva z modulu *Book* alebo *Find*. (Možnosť ponuky *Prípad / Pridať rubriku*, *control-R*, možnosť kontextového menu *Pridanie rubriky k analýze*). Vyberte rubriku a stlačte tlačidlo Enter. (Možnosť ponuky *Prípad / Pridať rubriku*, *control-R*).

Rubrika sa potom pridá k príznaku, ktorý bol vybraný ako "aktuálny" príznak v zozname príznakov.



Ktorý symptóm to je, môžete vidieť na paneli nástrojov v hornej časti obrazovky:

Mental activity 

Na paneli s nástrojmi môžete jednoducho vybrať iný symptóm, ku ktorému chcete pridať rubriku. Ak nie sú definované žiadne príznaky, zobrazí sa text "Všeobecné príznaky".

Odstránenie rubriky z analýzy sa vykoná tak, že ju vyberiete v zozname a potom stlačíte tlačidlo Delete. (Možnosť ponuky *Prípad / Odstrániť vybrané*).

Usporiadanie príznakov a rubriík

Poradie usporiadania príznakov je možné zmeniť. Keď je vybraný symptóm, je možné ho presunúť. (Možnosť ponuky *Navigácia na stránke / Posunúť sa nahor*, tlačidlo na paneli nástrojov , možnosť ponuky *Navigácia na stránke / Posunúť sa nadol*, tlačidlo na paneli nástrojov ).

Symptómy je možné triediť automaticky pomocou niekoľkých možností vo vyskakovacej ponuke:

Demo case, Andrew
Analýza 1. marca 2009, Simple classification example
 Analýza používa 14 rubriky v 5 príznakoch.

▼ ○ 574 Generalities; Food and drinks; eggs; desires
 544 Generalities; Food and drinks; eggs; desires
 111 Generalities; Food and drinks; eggs; desires; hard boiled
 ▼ ○ 186 Mental conditions; Food and drinks; eggs; desires; hard boiled
 186 Mental conditions; Food and drinks; eggs; desires; hard boiled
 ▼ ○ 422 Perspiration; Night
 48 Perspiration; Night
 415 Perspiration; Night
 ▼ ○ 96 Food & Drinks
 63 Generalities; Food and drinks; eggs; desires
 3 Generalities; Food and drinks; eggs; desires; hard boiled
 43 Generalities; Food and drinks; inedible things; desires, pica
 ▼ ○ 562 Taken a cold
 39 Nose; Coryza; air; cold; agg.
 42 Nose; Damp, wet agg.
 10 Nose; Obstruction, stopped sensation; weather; cold, agg.
 555 Generalities; Cold taking, becoming
 53 Generalities; Cold taking, becoming; heated, after becoming
 11 Generalities; Cold taking, becoming; sitting on cold stones, steps

Pridať príznak
 Zobrazíť
 Viac na
 Triediť
 Vybraná analýza

Zoradiť príznaky podľa abecedy
 Triedenie symptómov podľa poradia repertoáru
 Zoradiť príznaky podľa klasifikácie

calc •
 sil
 puls
 merc
 sulph
 sep
 nat-m
 chin
 rhus-t
 tub
 ars
 con

Rubriku možno presunúť na ďalší alebo predchádzajúci príznak pomocou rovnakých možností ponuky a tlačidiel na paneli nástrojov. V rámci príznaku sú rubriky vždy zoradené podľa ich poradia v knihe.

Výsledky


Výsledok analýzy

Po pridaní symptómov a rubriky do analýzy je čas pozrieť sa na výsledky. Tieto výsledky sa zobrazia na pravej strane okna.

V zásade existujú dva spôsoby zobrazenia výsledku analýzy:

- prehľad viacerých výsledkov na základe rovnakej analýzy.
- podrobný prehľad jedného výsledku analýzy.

Zobrazenie výsledkov viacnásobnej analýzy

Môžete si vybrať prehľad viacerých výsledkov. (Možnosť ponuky *Analýza / Jednoduchý zoznam*, tlačidlo na paneli nástrojov ). Bude to vyzeráť takto:

Eduard test	Štandard	Malé opravné p (...)	Malé rubriky	Jednoduché po (...)	Bönningh
coff •	coff •	coff •	coff •	coff •	coff •
nux-v	nux-v	bor	nux-v	nux-v	nux-v
lach	lach	sel	lach	chin	lach
calc •	chin	chin	chin	lach	calc •
con	sulph	kola	sulph	calc •	con
chin	acon	nux-v	con	bell •	chin
sulph	calc •	sia-c	calc •	ign	sulph
bell •	con	sul-ac	acon	sulph	puls
ars	bell •	con	bor	acon	ars
sel	sul-ac	ang	bell •	phos	bor
acon	bor	op	ars	ars	acon
bor	ars	ign	ign	bor	sel
puls	sel	bamb-a	sul-ac	con	ang
ang	ign	tax	sel	sul-ac	ign
ign	phos	lach	nat-m	agar	sul-ac

Štandardné metódy analýzy

Štandardné výsledky na tomto obrázku znamenajú nasledovné:

Štandard

Ide o štandardný výsledok analýzy založený na starostlivo vybraných parametroch.

Malé lieky

Je to výsledok toho, že menším liekom sa pripisuje väčší význam ako väčším liekom (polychrestom). Tým sa kompenzuje nerovnomerný výskyt prostriedkov v celom repertoári. Polychresty nie sú z analýzy vynechané, len ich dominancia je znížená.

Malé rubriky

V tomto výsledku sa rubrikám s malým počtom opravných prostriedkov pripisuje väčší význam ako rubrikám s veľkým počtom opravných prostriedkov. Takto majú charakteristickejšie rubriky väčší vplyv na výsledok ako veľmi bežné rubriky.

Bönninghausen Pri tomto type analýzy sa prostriedok počíta na základe jeho výskytu v príbuzných rubrikách v repertoári. Bönninghausenova analýza sa používa najmä pri väčších a všeobecnejších rubrikách. Dôležitejšia je aj korekcia pre polárne rubriky. Viac informácií nájdete na *Analýza - Bönninghausen*.

Jednoduché počítanie Ide o veľmi jednoduché počítanie, aké sa za starých čias robilo len s ceruzkou a papierom. Pri všetkých rubrikách v analýze sa stupňovanie všetkých nápravných opatrení jednoducho sčíta.

Výber metód analýzy

Možno nemáte vždy záujem o všetky štandardné metódy analýzy, ktoré vám *Complete Dynamics* ponúka. Môžete sa rozhodnúť, ktoré analýzy sa majú zobrazit' a v akom poradí. Môžete to zmeniť v nastaveniach *Preferences*. Viac informácií nájdete v časti *Preferencie*.

Podrobnosti o výsledkoch analýzy

Keď sa pozriete na výsledok na vyššie uvedenom obrázku, všimnete si, že nie sú vytlačené žiadne čísla. Za každým liekom sa nachádza lišta, ktorá ukazuje relatívnu dôležitosť lieku. Prostriedky sú zoradené podľa dôležitosti. Čím kratší je farebný pruh, tým menej dôležitý je daný prostriedok v danom výsledku.

Ak presuniete kurzor myši nad názov lieku, v spodnej časti okna sa v oblasti správ zobrazia podrobnejšie informácie. Ak sa myšou presuniete napríklad na stránku *chin*, zobrazí sa oblasť so správami:

4: chin = China officinalis. Relative score 45, from 8 rubrics in 3 symptoms

To znamená, že ide o položku číslo 4, *chin* znamená liek *China officinalis*, má relatívny význam 45 % v porovnaní s najvyšším liekom (*coff*) a že liek sa vyskytoval v 8 z počítaných rubriek v 3 symptómoch. Všimnite si, že v prípade výsledku analýzy "Jednoduché počítanie" je relatívne skóre súčtom známok pre daný liečivý prostriedok. Vo všetkých ostatných výsledkoch analýzy má najvyšší nápravný prostriedok relatívnu hodnotu 100 a všetky ostatné hodnoty sa vzťahujú na túto najvyššiu hodnotu.

Ak chcete vo výsledku vidieť čísla, môžete stlačiť tlačidlo na paneli nástrojov. (Možnosť ponuky *Analýza / Zobrazit' čísla*, tlačidlo na paneli nástrojov **1**).

Výsledok potom bude vyzerat' takto:

Eduard test	Štandard	Malé oprav
coff • 100 / 12 / 3	coff • 100 / 12 / 3	coff •
nux-v 95 / 10 / 4	nux-v 75 / 10 / 4	bor
lach 69 / 8 / 4	lach 46 / 8 / 4	sel
calc • 57 / 6 / 3	chin 39 / 9 / 4	chin
con 56 / 5 / 3	sulph 36 / 6 / 4	kola
chin 55 / 9 / 4	acon 30 / 5 / 4	nux-v
sulph 53 / 6 / 4	calc • 30 / 6 / 3	sia-c
bell • 51 / 6 / 3	con 30 / 5 / 3	sul-ac
ars 49 / 7 / 3	bell • 29 / 6 / 3	con
sel 47 / 5 / 4	sul-ac 29 / 5 / 4	ang
acon 47 / 5 / 4	bor 28 / 6 / 4	op
bor 45 / 6 / 4	ars 28 / 7 / 3	ign
puls 45 / 4 / 3	sel 27 / 5 / 4	bamb-a
ang 43 / 5 / 4	ign 26 / 6 / 3	tax
ign 42 / 6 / 3	phos 24 / 6 / 4	lach
sul-ac 42 / 5 / 4	op 22 / 5 / 3	ars
op 40 / 5 / 3	nat-m 22 / 5 / 4	ant-c
nat-m 37 / 5 / 4	agar 20 / 5 / 3	mez
phos 36 / 6 / 4	puls 20 / 4 / 3	canth

V niektorých situáciách možno nebudete chcieť zoradiť výsledky podľa dôležitosti, ale podľa počtu symptómov a rubriek, v ktorých sa liek vyskytuje.

Potom môžete stlačiť tlačidlo na paneli nástrojov **!**, čo znamená "Zoradiť analýzu podľa počtu symptómov/rubrikov". (Možnosť ponuky *Analýza / Triediť podľa počtu*, tlačidlo na paneli nástrojov **!**).

Už predpísané lieky

Často je vhodné rýchlo rozpoznať, ktoré lieky už boli pacientovi predpísané. Všetky lieky, ktoré boli predtým predpísané, sú označené bodkou za názvom.

Zistenie vzťahu medzi rubrikami a opravnými prostriedkami

Vzťah medzi rubrikami a prostriedkami nápravy si môžete rýchlo pozrieť kliknutím na rubriku alebo na prostriedok nápravy vo výsledku. Príslušné lieky alebo rubriky sú potom zvýraznené.

Príklad: Kliknutím na rubriku *Mind; sensitive, oversensitive; noise, to; painfull sensitivity to* sa v oblasti výsledkov zobrazí nasledovné:

Life Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort

Eduard test	Štandard	Malé opravné p (...)	Malé rubriky
coff •	coff •	coff •	coff •
nux-v	nux-v	bor	nux-v
lach	lach	sel	lach
calc •	chin	chin	chin
con	sulph	kola	sulph
chin	acon	nux-v	con
sulph	calc •	sia-c	calc •
bell •	con	sul-ac	acon
ars	bell •	con	bor
sel	sul-ac	ang	bell •
acon	bor	op	ars
bor	ars	ign	ign
puls	sel	bamb-a	sul-ac
ang	ign	tax	sel
ign	phos	lach	nat-m
sul-ac	op	ars	phos
op	nat-m	ant-c	op
nat-m	agar	mez	puls
phos	puls	canth	livc

Na prvý pohľad vidíte, ktoré lieky sú v tejto rubrike!



Príklad: Kliknutím na liek *sulph* sa zobrazí nasledujúci prehľad symptómov a rubrik:

▼	523	Mental activity
16		Mind; Activity; night
1		Mind; Activity; midnight, until
83		Mind; Activity; hyperactive
488		Mind; Cheerfulness
32		Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
1		Mind; Theorizing; evening
2		Mind; Theorizing; night
▼	83	Sensitive to noise
25		Mind; Noises; aversion to
15		Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitiveness to
58		Sleep; Waking; noise, from
▼	60	Sleeplessness
9		Mind; Activity; sleeplessness, with
51		Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
5		Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after
▼	192	Generalities
80		Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.
140		Generalities; Food and drinks; coffee; desires


A v letmom pohľade vidíte, v ktorých rubrikách sa *sulph* vyskytuje. Okrem toho je vybraný liek zvýraznený aj vo výsledkoch ostatných analýz, takže okamžite vidíte jeho relatívne poradie v rôznych analýzach.

Zatiaľ pre prehľad viacnásobných analýz. Pozrime sa teraz na podrobný prehľad jedného výsledku analýzy...


Zobrazenie podrobného prehľadu jedného výsledku analýzy

Podrobnejší prehľad o jednej analýze môžete podľa svojich preferencií zobrazit' buď v zobrazení tabuľky, alebo v zobrazení mriežky. (Možnosť ponuky *Analýza / Tabuľka*, tlačidlo na paneli nástrojov , možnosť ponuky *Analýza / Sieť*, tlačidlo na paneli nástrojov .

Zobrazenie tabuľky vyzerá takto:

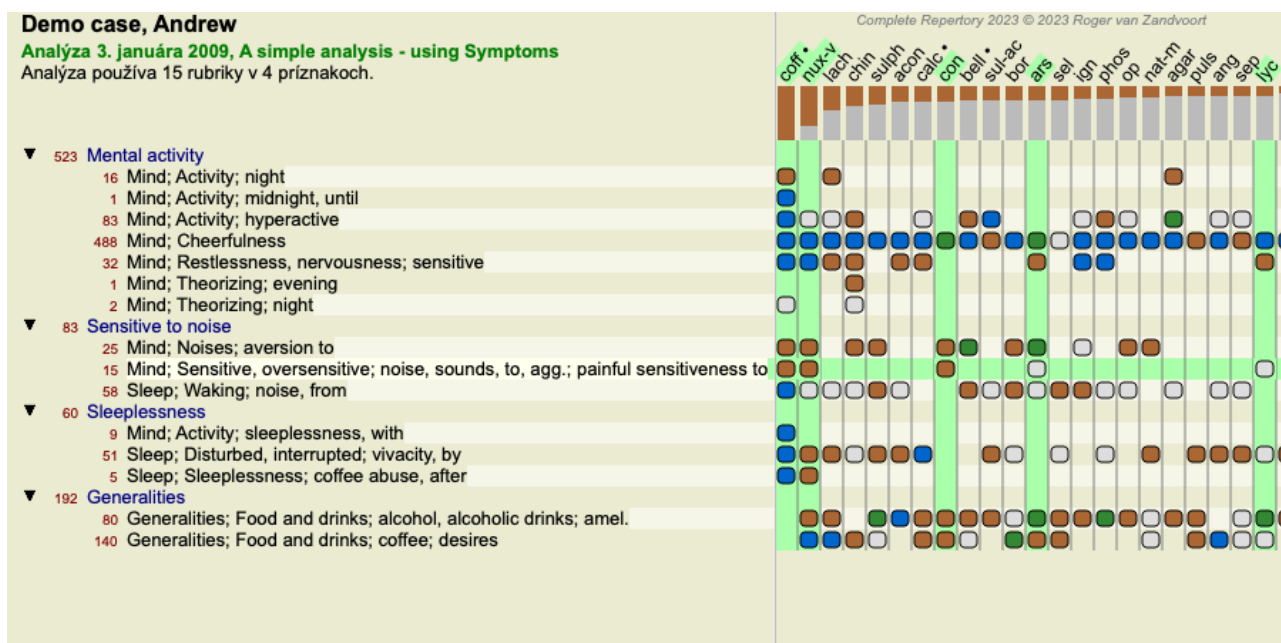

Zobrazenie mriežky vyzerá takto:

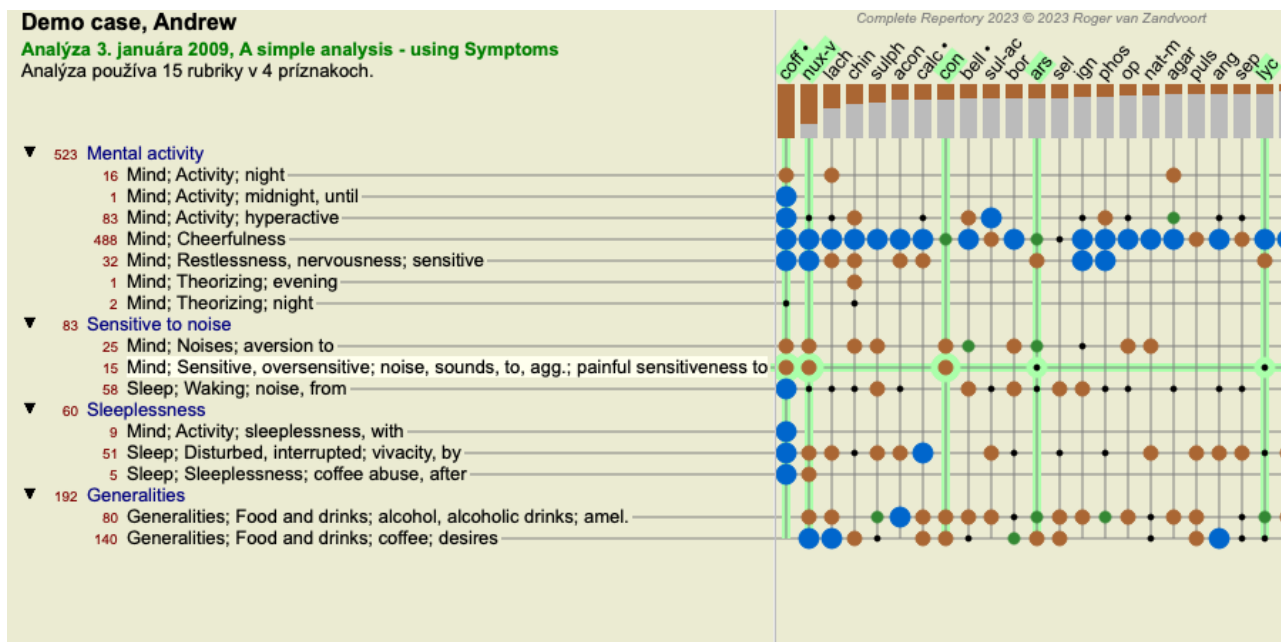

Takto môžete vidieť vzťah medzi rubrikami a opravnými prostriedkami na jednom obrázku. Samozrejme, že sa to dá urobiť len pre jednu analýzu.

Pod rastrom sa zobrazí výberové pole, v ktorom môžete prepínať medzi dostupnými výsledkami analýzy.

Bloky alebo body označujú, že sa liečivý prostriedok vyskytuje v rubrike:

- ☐ • Trieda 1
- ☒ • Trieda 2
- ☒ • Trieda 3
- ☒ • Trieda 4

Po prejení myšou na odrážku sa zobrazia podrobné informácie o opravnom prostriedku v tejto konkrétnej rubrike vrátane informácií o autorovi. Tieto informácie sa opäť zobrazia v oblasti správ v dolnej časti. Po prejení myšou nad modrú guľôčku na križovatke *coff* a *Mind; cheerfulness* sa zobrazia nasledujúce informácie:

coff = Coffea cruda (Bönninghausen, Gallavardin, Hering, Jahr, Knerr, Lippe, Vithoulkas)

Ak chcete získať viac informácií, stačí dvakrát kliknúť na odrážku, aby ste získali kompletne informácie o lieku:

Rubrika: MIND; CHEERFULNESS.

Skratka nápravného prostriedku: coff, stupeň 4.

Štandardný názov: Coffea cruda.

Taxonómia: kráľovstvo *Plantae*, subkráľovstvo *Viridiplantae*, infrakráľovstvo *Streptophyta*, super divízia *Embryophyta*, divízia *Tracheophyta*, subdivízia *Spermatophytina*, trieda *Magnoliopsida*, super objednávka *Asteranae*, objednávka *Gentianales*, rodina *Rubiaceae*, rod *Coffea*, druhy *Coffea arabica*.

Taxonómia APG II: angiosperms, eudicots, core eudicots, asterids, euasterids I, Gentianales, Rubiaceae.

Výskyty v súvisiacich rubrikách: 5, priemerná známka: 2.2.

Zdroje.

Bönninghausen C M von *Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht-antipsorischen Arzneien with handwritten annotations*, 1833.

Gallavardin J P *Repertory of psychic medicines with Materia Medica*, 1897.

Hering C *Analytical Repertory of Symptoms of Mind*, 1881.

Hering C *Guiding Symptoms of our Materia Medica*, 1879.


Jahr G H G *Handbuch der Haupt-Anzeigen für die richtige Wahl der homöopathischen Heilmittel*, Herrmann Bethmann, 1851.

Jahr G H G *Systematisch-alphabetisches Repertorium der homöopathischen Arzneimittellehre*, Herrmann Bethman (Leipzig), 1848.

Knerr C B *Repertory of Hering's Guiding Symptoms*, 1896.

Zatvoriť

Ak chcete zobrazit' viac informácií, môžete myšou prejsť na názov lieku v hornej časti oblasti výsledkov, podobne ako v predchádzajúcom prehľade viacerých výsledkov. Kliknutím na rubriky alebo lieky ich môžete zvýrazniť:

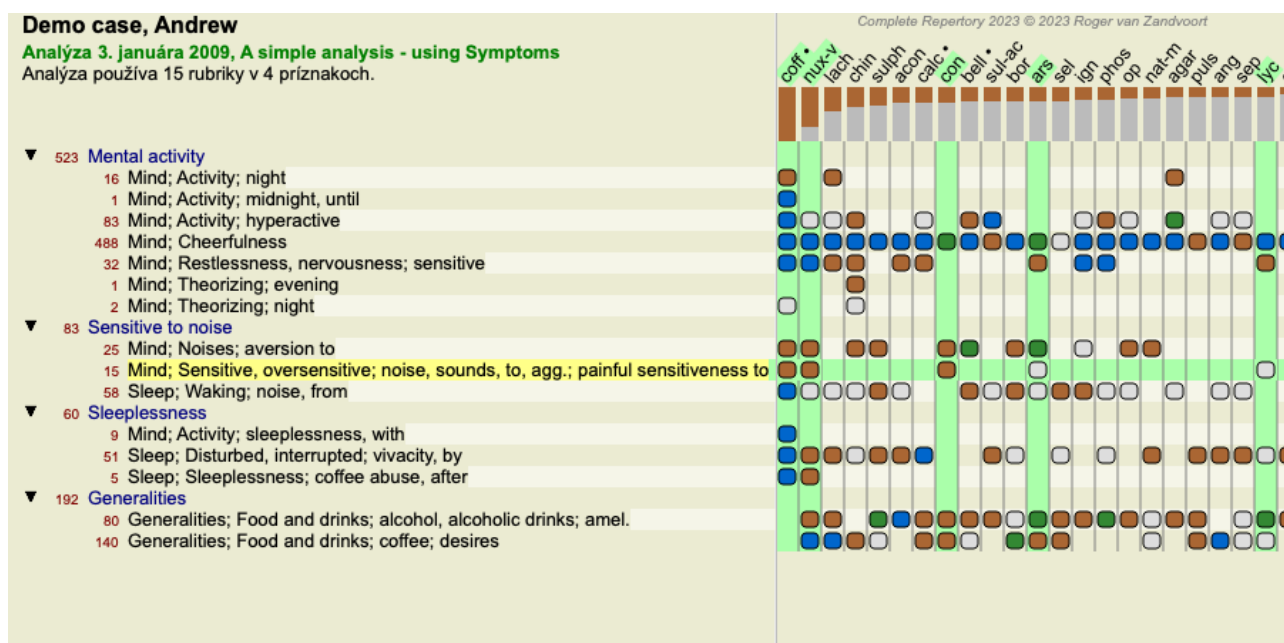

Na zobrazenie čísel alebo zmenu poradia triedenia možno samozrejme použiť tlačidlá na paneli nástrojov **1** a **!**.

Vyhľadanie nápravného opatrenia vo výsledkoch analýzy

V niektorých situáciách nechcete vidieť len najlepšie výsledky analýzy, ale chcete presne vedieť, kde sa daný liek v týchto výsledkoch nachádza.


Stačí, ak do poľa *Locate remedy* pod výsledkami analýzy zadáte skratku lieku.

Analýza sa v prípade potreby prekreslí a časť výsledkov sa preskočí, aby sa zabezpečilo zobrazenie vášho nápravného prostriedku.

Hľadaný liek sa automaticky zvýrazní, aby bol pre vás lepšie viditeľný.

Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort

Eduard test	Štandard	Malé opravné p (...)	Malé rubriky
coff •	coff •	coff •	coff •
nux-v	nux-v	bor	nux-v
lach	lach	sel	lach
calc •	chin	chin	chin
con	sulph	kola	sulph
chin	acon	nux-v	con
sulph	calc •	sia-c	calc •
bell •	con	sul-ac	acon
ars	bell •	con	bor
sel	sul-ac	ang	bell •
acon	bor	op	ars
bor	ars	ign	ign
puls	sel	bamb-a	sul-ac
ang	ign	tax	sel
ign	phos	lach	nat-m
sul-ac	op	ars	phos
op	nat-m	ant-c	op
nat-m	agar	mez	puls
phos	puls	canth	lyc
agar	ang	apis	agar
lyc	sep	cham	ang
... +34 +42 +29 +47 ...
chel	chel	chel	chel
hep	rhus-t	cygn-c	cypr
cham	kreos	aur	teucr
brachy-s	bamb-a	calc •	kali-bi
ferr	ran-s	hyos	prun
carb-ac	tarent	cocc	tarent
ther	mosch	ven-m	onc-t
cur	sang	onc-t	agav-t
leon	cypr	sang	leon
kreos	teucr	caps	nat-p
arn •	prun	crat	brom
tarent	kali-bi	am-c	crat
thea	nat-p	staph	cygn-c

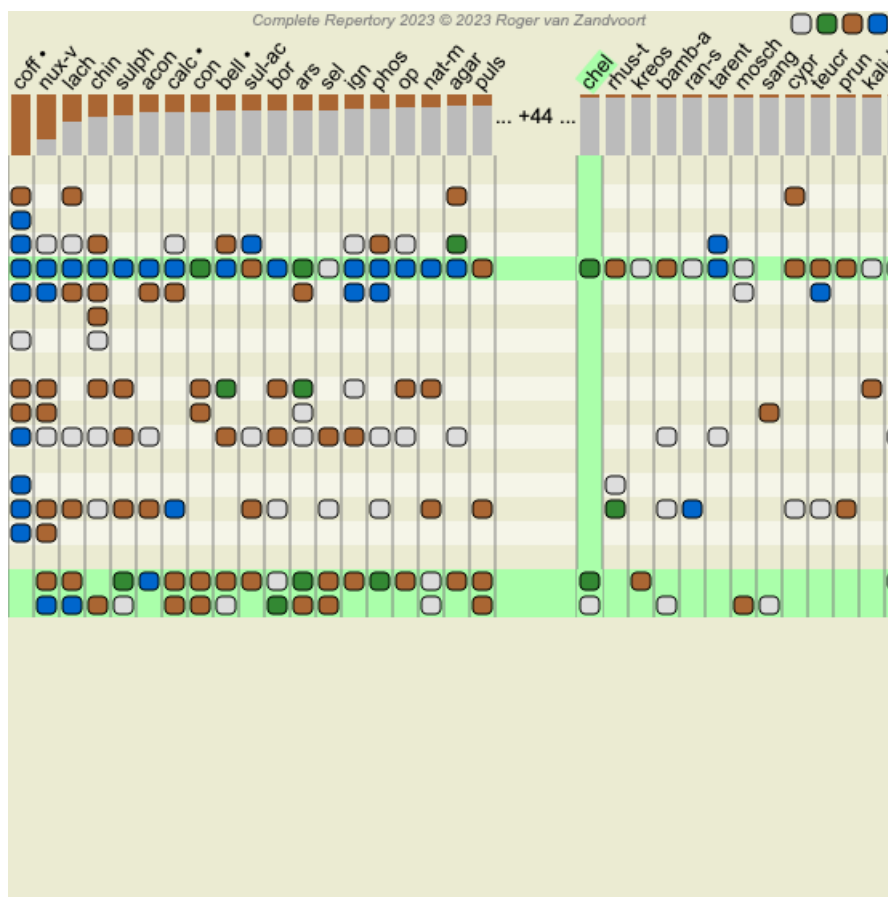

Namiesto zadávania lieku do poľa *Locate remedy* môžete tiež kliknúť na graf výsledkov a jednoducho ho tam zadať. Ak v tejto situácii stlačíte kláves Escape, výber sa zruší.

Filtrovanie výsledkov analýzy


Filtrovanie výsledkov na základe rodiny opravných prostriedkov

Za normálnych okolností sa vo výsledkoch analýzy zobrazia všetky lieky.

Výsledky môžete obmedziť len na tie lieky, ktoré sú súčasťou daného kráľovstva, rodiny alebo inej skupiny. Ak to chcete urobiť, jednoducho vyberte z rozbaľovacieho zoznamu na paneli nástrojov:



Preddefinovaných je niekoľko často používaných skupín (minerály, rastliny, živočíchy, nozódý). Ak chcete vybrať inú skupinu, jednoducho vyberte možnosť *Other...* a zobrazí sa dialógové okno, v ktorom môžete vybrať jednu zo skupín v časti *Kingdoms & Families*.

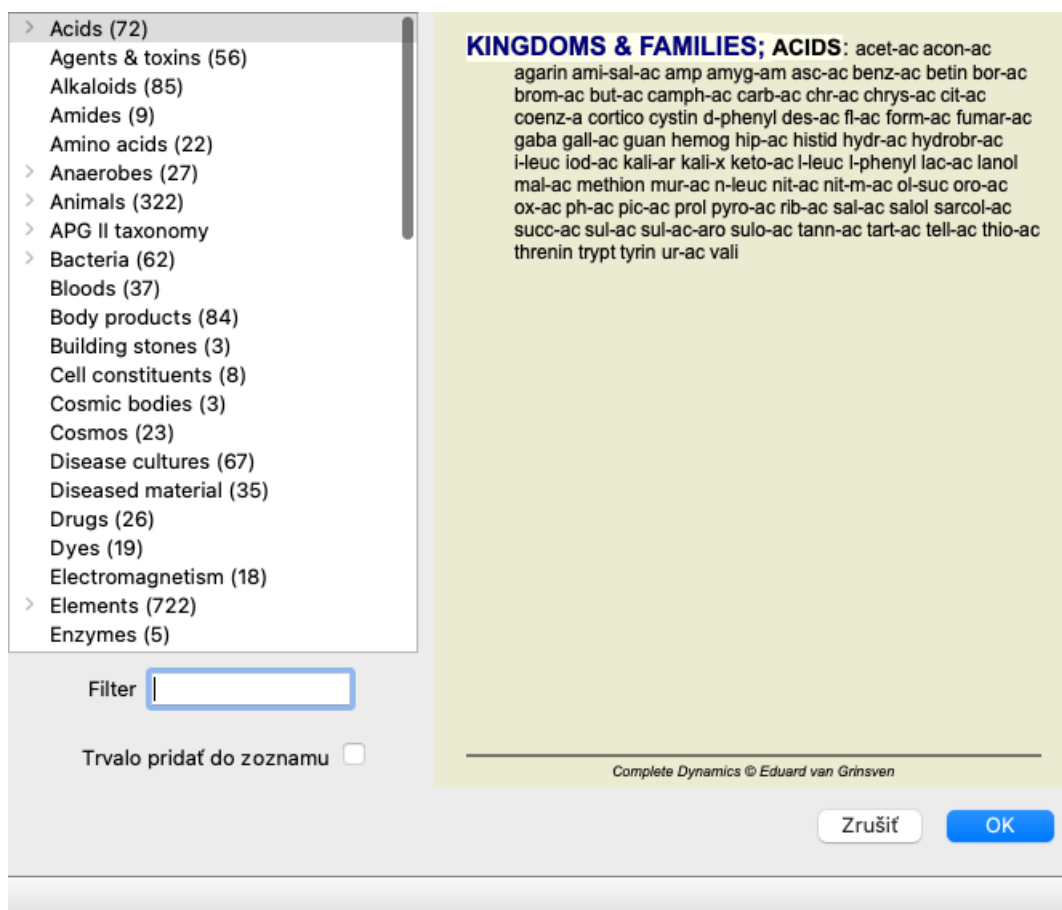

Ak začiariknete možnosť *Trvalo pridať do zoznamu*, vybraná skupina sa natrvalo pridá do štandardných skupín v zozname. Pri ďalšom spustení programu bude táto skupina stále v zozname. Ak ju chcete neskôr odstrániť, vyberte tú istú skupinu znova prostredníctvom možnosti *Other...* a zrušte výber tejto možnosti.

Pokročilé témy

Dolad'ovanie analýzy

Teraz, keď ste prebrali základy tvorby analýzy a interpretácie výsledkov, je čas na niektoré pokročilé témy, ktoré vám umožnia doladiť analýzu v súlade s vašou interpretáciou informácií o pacientovi.

Budeme sa venovať týmto témam:

- Používanie závaží.
- Vyvažovanie príznakov.
- Polárne rubriky a kontra indikácie.
- Skupiny rubriek.
- Prehľad rubriek.
- Filtrovanie výsledkov podľa rodín liekov.

Mnohé akcie možno vykonávať na viacerých vybraných riadkoch naraz.

Používanie závaží

Každému symptómu a každej rubrike možno priradiť určitú váhu. Tak ako priradíte určitú dôležitosť symptómom pacienta alebo ako

sa liek v repertóriu môže vyskytovať s rôznymi stupňami, môžete priradiť určitú dôležitosť každému zo symptómov a rubrik.


Priradením vyššej hodnoty sa symptóm alebo rubrika započítava do výsledku analýzy s väčšou dôležitosťou. Priradením váhy 0 sa symptóm alebo rubrika z analýzy úplne vylúčia.

Ak chcete nastaviť váhu, najprv vyberte symptóm alebo rubriku kliknutím na ňu myšou.

Teraz existuje niekoľko spôsobov nastavenia hmotnosti:

- kľúč 0 (Možnosť ponuky *Prípad / Hmotnosť / Ignorovať*, tlačidlo na paneli nástrojov ^{*0}).
- kľúč 1 (Možnosť ponuky *Prípad / Hmotnosť / Hmotnosť normálna*, tlačidlo na paneli nástrojov ^{*1}).
- kľúč 2 (Možnosť ponuky *Prípad / Hmotnosť / Hmotnosť x2*, tlačidlo na paneli nástrojov ^{*2}).
- kľúč 3 (Možnosť ponuky *Prípad / Hmotnosť / Hmotnosť x3*, tlačidlo na paneli nástrojov ^{*3}).
- kľúč 4 (Možnosť ponuky *Prípad / Hmotnosť / Hmotnosť x4*, tlačidlo na paneli nástrojov ^{*4}).

Nasledujúci príklad ukazuje analýzu, v ktorej sú nastavené váhy (len na ukážku)

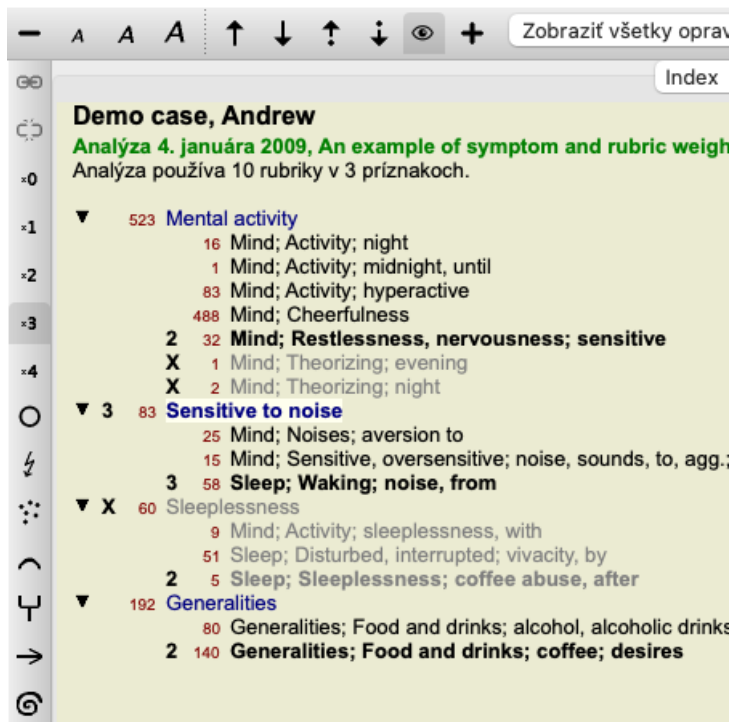

Na ľavej strane vidíte tlačidlá na paneli nástrojov. Tlačidlá na paneli nástrojov vždy zobrazujú aktuálnu hodnotu hmotnosti vybraného symptómu alebo rubriky.



X pred symptómom alebo rubrikou znamená váhu 0, je vylúčený z analýzy.

Vyváženie príznakov

Vyváženie príznakov je pokročilý mechanizmus analýzy, ktorý kompenzuje použitie mnohých/malých rubriek v príznaku. Keď je zapnuté vyvažovanie (čo je normálne), môžete pod symptóm umiestniť ľubovoľný počet rubriek bez toho, aby ste narušili analýzu.

V tradičných analýzach by ste museli v analýze starostlivo vyberať rubriky, pretože ak by ste na vyjadrenie určitého symptómu použili príliš veľa rubriek, v analýze by začali dominovať lieky zodpovedajúce tomuto jedinému symptómu. Podobne, ak by ste použili len jednu rubriku, lieky v tejto rubrike by dostatočne neprispeli k celkovej analýze v porovnaní s rubrikami použitými pre ostatné príznaky.

Ak je zapnuté Vyvažovanie príznakov, každý príznak sa započíta s Váhou (pozri vyššie *Používanie váh*), ktorá mu bola priradená, bez ohľadu na to, či pod neho umiestnite jeden Rubrik alebo povedzme 10 Rubrikov.

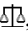Príznak vyváženia sa zapína/vypína pomocou tlačidla na paneli nástrojov , ktoré sa nachádza na pravej strane okna. (Možnosť ponuky *Analýza / Príznaky rovnováhy*, tlačidlo na paneli nástrojov ).

Pozrime sa na príklad. V nasledujúcej analýze sa na vyjadrenie bolesti hlavy používa mnoho rubriek. Ak sa nepoužije Balancing, vo výsledkoch dominuje *Glonoinum*, zatiaľ čo pri Balancing *Natrum Muriaticum* sa stáva výraznejším.

Demo case, Andrew

Analýza 1. februára 2009, Symptoms with many or few rubrics.

Analýza používa 13 rubriky v 4 príznakoch.

▼ 954 Head pains

- 14 Head; Pain, headache; morning; agg.; six am.
- 160 Head; Pain, headache; extending to; backward
- 188 Head; Pain, headache; extending to; occiput
- 110 Head; Pain, headache; extending to; temples
- 119 Head; Pain, headache; extending to; upward
- 944 Head; Pain, headache; forehead
- 57 Head; Pain, headache; forehead; air; open; agg.
- 48 Head; Pain, headache; forehead; eyes; above; morning
- 14 Head; Pain, headache; bursting; menses; during

▼ 84 Sadness

- 84 Mind; Sadness, depression; menses; before

▼ 163 Menses


- 127 Female; Menses; pale, watery
- 105 Female; Menses; thin, liquid

▼ 173 Aversions and desires


- 173 Generalities; Food and drinks; salt or salty food; desires

Výsledok analýzy:

Žiadne vyvažovanie

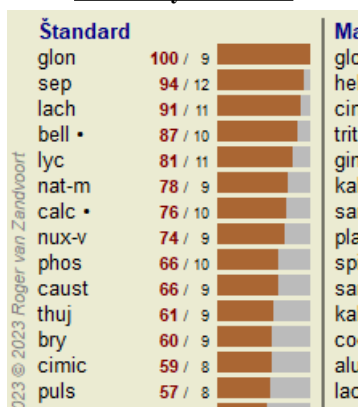

S vyvažovaním

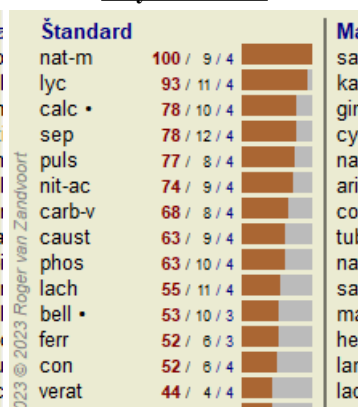

Poznámka: Symptómy vyvažovania nemajú žiadny vplyv na základnú analýzu *Jednoduché počítanie*.

Polárne rubriky a kontraindikácie

Polárne rubriky sú dve rubriky, ktoré majú opačný význam.

Ako príklad si uveďme jednoduchý prípad, v ktorom bol pôvodne predpísaný liek *coff*:

Demo case, Andrew

Analýza 3. januára 2009, A simple analysis - using Symptoms

Analýza používa 15 rubriky v 4 príznakoch.

▼ 523 Mental activity

- 16 Mind; Activity; night
- 1 Mind; Activity; midnight, until
- 83 Mind; Activity; hyperactive
- 488 Mind; Cheerfulness
- 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
- 1 Mind; Theorizing; evening
- 2 Mind; Theorizing; night

▼ 83 Sensitive to noise


- 25 Mind; Noises; aversion to
- 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitive
- 58 Sleep; Waking; noise, from

▼ 60 Sleeplessness

- 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
- 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
- 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after

▼ 192 Generalities


- 80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.
- 140 Generalities; Food and drinks; coffee; desires

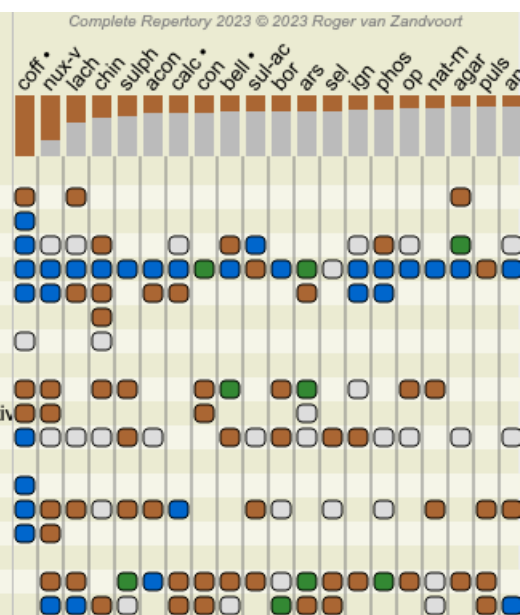

V časti *Generalities*, vidíme dve rubriky, ktoré majú obe polárnu rubriku:


- *amel* - *agg.*
- *túžby* - *aversion*.

Tieto polárne rubriky je možné použiť pri analýze stlačením tlačidla na paneli nástrojov ↔, ktoré sa nachádza na pravej strane okna. (Možnosť ponuky *Analýza / Polárne rubriky*, tlačidlo na paneli nástrojov ↔). Teraz sú v rubrike *amel* aj *túžby* uvedené ich polárne rubriky. Výsledok analýzy je tiež zmenený, pretože hodnoty nápravných opatrení sú teraz korigované hodnotami v polárnych rubrikách.

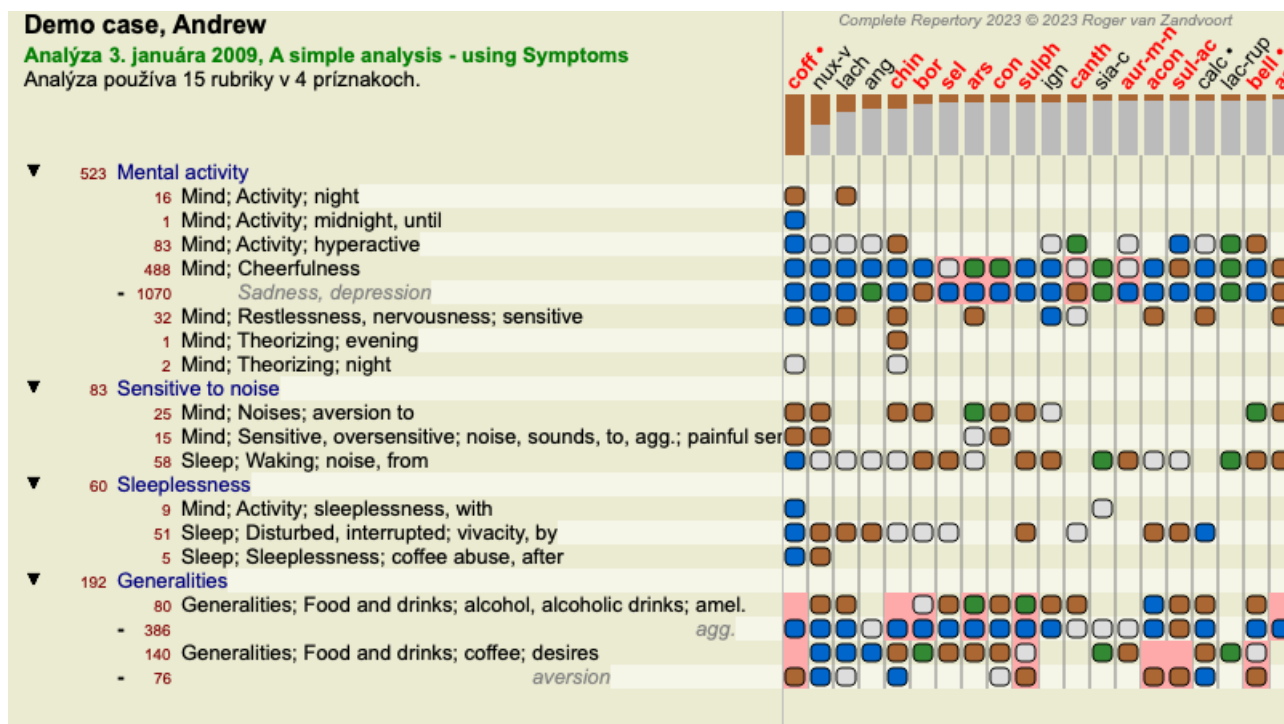

Nápravný prostriedok *coff* je teraz podfarbený červenou farbou, pretože v tejto analýze je kontra indikovaný. Kontraindikácia je situácia, keď sa prostriedok vyskytuje v jednej rubrike v nízkom stupni (1, 2 alebo sa nevyskytuje vôbec), ale v polárnej rubrike vo vysokom stupni (3 alebo 4).

Zložitejší príklad je uvedený v ďalšej analýze v Bönninghausenovom štýle:

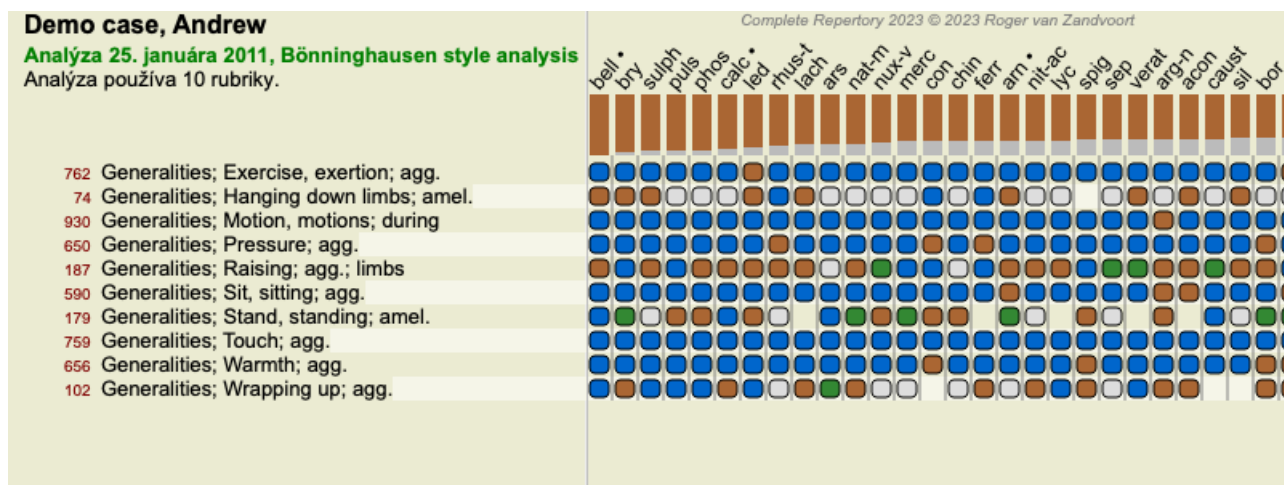

Demo case, Andrew

Analýza 25. januára 2011, Bönninghausen style analysis

Analýza používa 10 rubriky.

762

Generalities; Exercise, exertion; agg.

- 158

amel.

74

Generalities; Hanging down limbs; amel.

- 81

agg.

930

Generalities; Motion, motions; during

- 339

amel.

650

Generalities; Pressure; agg.

- 503

amel.

187

Generalities; Raising; agg.; limbs

- 77

amel.; limbs

590

Generalities; Sit, sitting; agg.

- 404

amel.

179

Generalities; Stand, standing; amel.

- 454

agg.

759

Generalities; Touch; agg.

- 88

amel.

656

Generalities; Warmth; agg.

- 788

Cold; agg.

102

Generalities; Wrapping up; agg.

- 115

amel.

led

berb

bor

ran-b

iris

camph

cupr

nit-ac

ferr

tell

acon

verat

iod

crot-h

spig

asar

ip

teucr

lach

colch

sel

hyper

chin-s

prun

neon

sec

tab

Skupiny rubriék

Zoskupovanie rubriék sa vykonáva vtedy, keď chcete, aby sa dve alebo viac rubriék počítalo, ako keby tvorili jednu rubriku.

Existujú dva spôsoby zoskupovania rubriék:

- Prechod. Používajú sa len tie prostriedky, ktoré sa vyskytujú vo VŠETKÝCH rubrikách.
- Kombinovanie. Používajú sa prostriedky z KTORÉHOKOLI z rubriék.

Príklady zoskupovania

Kríženie rubriék môže byť užitočné vtedy, keď v repertoári nie je rubrika, ktorá by presne opisovala symptóm pacienta, ale len všeobecnejšie rubriky.

Pacient vám napríklad povie, že počas horúčky má ráno v posteli úzkosť. Repertoár nemá rubriku *Myseľ; úzkosť; ráno; postel', v; horúčka, počas*. Namiesto toho však existujú dve všeobecnejšie rubriky *Myseľ; úzkosť; ráno; postel', v* a *Myseľ; úzkosť; horúčava teplo; počas*. Prekrižením týchto dvoch rubriék sa vytvorí nová skupinová rubrika, ktorá obsahuje len tie lieky riedky, ktoré sa vyskytujú v oboch rubrikách.

Kombinácia rubriék môže byť užitočná, ak má pacient príznak, ktorý sa nenachádza presne, ale možno ho nájsť pod špecifickejšími príznakmi.

Napríklad chuť na pizzu. Prečo má pacient rád pizzu? Možno je to cesto (múčne jedlo), paradajky, šaláma, ančovičky, syr alebo olivy. Môže byť užitočné spojiť niekoľko takýchto špecifických rubriék do novej rubriky bez toho, aby sa narušili vzorce analýzy pridaním množstva špecifických rubriék, ktoré nemajú skutočný význam v porovnaní s hlavnými sťažnosťami pacienta.

Vytváranie skupín rubriék

Príkladom je prípad s bolesťami hlavy pri chôdzi a strachom z viacerých druhov zvierat:

Demo case, Andrew	
Analýza 1. februára 2009, Grouping example	
Analýza používa 5 rubriky.	
57	Mind; Fear; dogs, of
12	Mind; Fear; rats
5	Mind; Fear; wolves, of
496	Head; Pain, headache; stitching
786	Generalities; Walk, walking; during

Chceme prekrižiť dve rubriky, ktoré spoločne opisujú bolesť hlavy. Vyberte rubriku *Head; pain; stitching* kliknutím na ňu a potom stlačte tlačidlo na paneli nástrojov . (Možnosť ponuky *Prípad / Zoskupenie / Skupina s inými rubrikami...*, tlačidlo na paneli nástrojov , možnosť kontextového menu *Zoskupenie / Skupina s inými rubrikami...*).

Zobrazí sa dialógové okno, v ktorom môžete vybrať rubriky, ktoré môžu byť prepojené s vybranou rubrikou.

V hornej časti vyberte možnosť *Cross*. Vyberte rubriku *Generalities; walk, walking; during* a stlačte tlačidlo OK.

Metóda zoskupovania ☒ Kríž (len prostriedky, ktoré sú vo VŠETKÝCH rubrikách)
☐ Kombinujte (všetky prostriedky z KTOREJKOLÍVEK rubriky)


Štítok

Vyberte jednu alebo viac rubrik, ktoré chcete pridať do tejto skupiny:

Rubriky

- Mind; Fear; dogs, of
- Mind; Fear; rats
- Mind; Fear; wolves, of
- Head; Pain, headache; stitching
- Generalities; Walk, walking; during

Zrušiť OK

Pre druhú skupinu použijeme inú metódu. Vyberte tri rubriky *Mind; fear* a ešte raz stlačte .

Demo case, Andrew
Analýza 1. februára 2009, Grouping example
 Analýza používa 4 rubriky.

- 57 Mind; Fear; dogs, of
- 12 Mind; Fear; rats
- 5 Mind; Fear; wolves, of
- ▼ 408 Prekrížené rubriky
 - 496 Head; Pain, headache; stitching
 - 786 Generalities; Walk, walking; during

Teraz vyberte možnosť *Combine*, a stlačte tlačidlo OK.

Metóda zoskupovania ☐ Kríž (len prostriedky, ktoré sú vo VŠETKÝCH rubrikách)
☒ Kombinujte (všetky prostriedky z KTOREJKOLÍVEK rubriky)

Štítok

Vyberte jednu alebo viac rubrik, ktoré chcete pridať do tejto skupiny:

Rubriky

- Mind; Fear; dogs, of
- Mind; Fear; rats
- Mind; Fear; wolves, of

Zrušiť OK


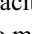

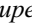
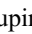
Výsledný zoznam rubrik sa teraz stal:

Demo case, Andrew

Analýza 1. februára 2009, Grouping example

Analýza používa 2 rubriky.

- ▼ 66 *Kombinované rubriky*
 - 57 Mind; Fear; dogs, of
 - 12 Mind; Fear; rats
 - 5 Mind; Fear; wolves, of
- ▼ 408 *Prekrížené rubriky*
 - 496 Head; Pain, headache; stitching
 - 786 Generalities; Walk, walking; during

Ak chcete zmeniť skupinu, kliknite na jej hlavnú rubriku a stlačte . V dialógovom okne zapínajte a vypínajte rubriky kliknutím na ne. Rubriku môžete zo skupiny odstrániť aj tak, že na ňu kliknete a stlačíte . (Možnosť ponuky *Prípad / Zoskupenie / Odstránenie zoskupenia*, tlačidlo na paneli nástrojov , možnosť kontextového menu *Zoskupenie / Odstránenie zoskupenia*). Ak chcete skupinu úplne odstrániť, kliknite na hlavnú rubriku skupiny a stlačte . (Možnosť ponuky *Prípad / Zoskupenie / Odstránenie zoskupenia*, tlačidlo na paneli nástrojov , možnosť kontextového menu *Zoskupenie / Odstránenie zoskupenia*).

V ponuke sú dve možnosti, ktoré vám umožnia rýchlo vytvoriť skupinu bez toho, aby ste museli vyberať rubriky v dialógovom okne, ako je uvedené vyššie.

Najprv môžete vybrať dve alebo viac rubriek a potom ich skombinovať. (Možnosť ponuky *Prípad / Zoskupenie / Kombinácia vybraných rubriek*, možnosť kontextového menu *Zoskupenie / Kombinácia vybraných rubriek*).

Najprv môžete vybrať dve alebo viac rubriek a potom ich prekrížiť. (Možnosť ponuky *Prípad / Zoskupenie / Vybrané rubriky*, možnosť kontextového menu *Zoskupenie / Vybrané rubriky*).

Ako sa v analýze používajú rubriky

Pri krížení viacerých rubriek skupina obsahuje len tie lieky, ktoré sa vyskytujú na všetky rubriky v tejto skupine. Znamka z opravného prostriedku bude najnižšia známka z opravného prostriedku vo všetkých rubrikách.

Pri kombinácii viacerých rubriek skupina obsahuje lieky, ktoré sa vyskytujú na akejkoľvek rubriky v skupine. Znamka za opravu bude najvyššia známka nájdená pre opravu v ktorejkoľvek rubrike v skupine.

Prehľad rubriek

Niekedy je vhodné získať prehľad všetkých rubriek v analýze spolu s ich opravnými prostriedkami.

V prípade zoskupených rubriek môžete tiež chcieť zistiť, ktoré lieky sa vyskytujú vo výslednej skupine.

Ak chcete získať prehľad všetkých rubriek, stačí vybrať možnosť *Zobraziť prehľad rubriek*. (Možnosť ponuky *Prípad / Zobraziť prehľad rubriek*, *control-V*, možnosť kontextového menu *Viac na / Zobraziť prehľad rubriek*).

Otvorí sa modul *Find*, v ktorom sa zobrazia nasledujúce informácie:

COMBINED RUBRICS: MIND; FEAR; DOGS, OF / MIND; FEAR; RATS / MIND; FEAR; WOLVES,

OF: absin acon agar **Alum** amph androc arm astac **BAC BELL BOS-S BUFO CALC** calc-ar carc **CAUST** cer chel **CHIN** choc **CIMIC** Con cupr-acet dor dpt dysp-n **Hydrog HYOS** insul **LAC-C** lac-d lac-f lac-h lach lycpr lyss mag-c **Manc** mand med **NAT-M** nat-p nit-ac op ory-c phos **Plac** plat **PLUT-N** polyst pras-c **PULS** **Sanic Scirr SCORP** sep sil sol-t **STRAM** sulph syc-co tax **TUB** tub-k verat **Xan**

MIND; FEAR; dogs, of: agar **Alum** amph androc astac **BAC BELL BUFO CALC** carc **CAUST** cer chel **CHIN** choc **Con** cupr-acet dor dpt dysp-n **Hydrog HYOS** insul **LAC-C** lac-d lac-f lac-h lach lycpr lyss mag-c **Manc** mand med **NAT-M** nat-p nit-ac ory-c phos plat **PLUT-N** polyst pras-c **PULS** **Sanic Scirr SCORP** sil sol-t **STRAM** sulph syc-co tax **TUB** tub-k verat **Xan**

MIND; FEAR; rats: absin acon arm bell **BOS-S CALC** calc-ar **CIMIC** op phos **Plac** sep

MIND; FEAR; wolves, of: amph bell cer chel dor

CROSSED RUBRICS: HEAD; PAIN, HEADACHE; STITCHING / GENERALITIES; WALK,

WALKING; DURING: acan-p **ACON** act-sp adam **AESC AETH AGAR AGN** aids alch-v **ALL-C** allox **ALOE ALUM** **ALUM-P** **ALUM-SIL** **ALUMN** **AM-C** **AM-M** **AMBR** ammc **ANAC** anag **ANATH** **ANG** **ANT-C** **ANT-T** **APIS** apoc aq-des **ARAN** **ARG** **ARG-N** **ARN** **ARS** **ARS-I** ars-met ars-s-f **Ars-s-r** arum-t **ASAF** **Asar** asc-t astac aster **ATRO** **AUR** aur-ar aur-i **AUR-M-N** aur-s bacch-a **Bad** **BAMB-A** bapt **Bar-acet** **BAR-C** bar-i bar-m bar-s **BELL** bell-p **BERB** biti-g blatta **BOR** bos-s both-a **BOV** **BROM** **Bros-g** bruc **BRY** **BUFO** bux cadm-s cahin **Calad** **CALC** **Calc-acet** calc-ar calc-caust calc-f calc-i **CALC-P** **CALC-S** calc-sil calen **CAMPH** **CANN-I** cann-s **CANTH** **CAPS** caras carb-ac **CARB-AN** **CARB-V** carbn-o **CARBN-S** **CARC** card-b carl **Cassi-s** cast caul **CAUST** cedr cere-b **CHAM** **CHEL** **CHIN** chin-ar **Chin-s** choc **CIC** **CIMIC** **CINA** cinnb cist **CLEM** cob **COC-C** **COCC** coff **COLCH** **COLOC** colocin com **CON** cop com **CROC** crot-c **CROT-H** **Croto-t** **Cund** **CUPR** cupr-ar cupr-s **CUR** **Curc** **CYCL** **Cyt-I** daph der **DIG** **Dios** diox dirc **DROS** **DULC** echi-a **ELAPS** emer epip equis ery-a eug euon eup-per **EUPH** **EUPHR** eupi **Fago** falco-p **FERR** **Ferr-acet** ferr-ar **FERR-I** **FERR-P** fic-i fic-m **Fl-ac** **Flor-p** form galeoc-c gall **Gamb** **GELS** gent-c gink gins **GLON** **Gran** **GRAPH** **GRAT** **GUAI** harp **HELL** **Helo** helod-c hema-h **HEP** her-s hipp hom hydr **Hydr-ac** **HYOS** hyosin hyper **IGN** ind indg insul inul **IOD** iodof **IP** irid-m iris jatr **JUG-C** kali-ar **KALI-BI** **KALI-C** kali-chl kali-cy **KALI-I** **KALI-N** **KALI-P** kali-s kali-sil **KALM** **Kola** **KREOS** kurch **LAC-C** lac-h lac-m **LACH** lachn **LACT** **Lam** lap-laz lappa **Laur** lec **LED** **LIL-T** lipp **Lith-c** **Lob** lob-c lol loxo-r **LYC** lycpr **LYSS** **M-ARCT** **M-art** **M-AUST** **MAG-C** **MAG-M** **MAG-P** mag-s magn-gr **MANC** **MANG** **Mang-acet** meli-a menth **MENY** **MERC** **MERC-C** merc-i-f merc-s **MERL** methyl-p-h **MEZ** **Mill** **Mim-p** morpho-m **Mosch** **MUR-AC** naja naja-m nat-ar **NAT-C** nat-glt nat-hchl **NAT-M** **NAT-P** **NAT-S** nat-sil nept-m **NICC** **NIT-AC** nit-m-ac nuph **NUX-M** **NUX-V** **Ol-an** ol-j olea **OInd** onc-t **Op** **OZON** paeon **Par** paraf paul-p perl **PETR** **PH-AC** **Phel** **PHOS** phyl-a phys phyt **PIC-AC** pier-b **Pimp** **Pip-m** pitu-a plan **PLAT** **PLB** **Plb-acet** plect pras-s **PRUN** **PSOR** **PTEL** **PULS** pyrog pyrus-c rad-br **RAN-B** **RAN-S** raph **Rat** rheum **RHOD** **RHUS-T** ros-d **RUTA** **SABAD** **SABIN** sac-l sal-ac **Samb** **SANG** **SANIC** **SARS** scan sec **SEL** senec **Seneg** **SEP** **SIL** sol-n **SPIG** **SPONG** **SQUIL** **STANN** **STAPH** stel still **STRAM** **STRONT-C** **STRY** **SUL-AC** sul-i **SULPH** **Syph** **TAB** **TARAX** **TARENT** **TARENT-C** **Tax** teg-a tell telo-s **Ter** **Teucr** **THER** **THUJ** **Til** **Tong** toxop-p **Tritic-v** **Trom** **TUB** tung upa **URAN** vac **VALER** **VERAT** **VERB** vesp vib vinc **Vince** viol-o **VIOL-T** vip visc with-s **X-ray** **ZINC** zinc-acet zinc-p **Zing** ziz

HEAD; PAIN, headache; stitching: **ACAN-P** acher-a **ACON** acon-ac act-sp adam aego-p **AESC AETH AGAR** agath-a **AGN** **AIDS** alch-v **Alco** **ALL-C** allox **ALOE** **ALUM** **ALUM-P** **ALUM-SIL** **ALUMN** **AM-C** **AM-M** **AMBR** **Amet** ammc **ANAC** **Anac-oc** anag **ANATH** ander andri-q androg-p **ANG** **ANT-C** **ANT-O** **ANT-T** aphis **APIS** apoc aq-des **ARAN** **ARAN-IX** **ARG** **ARG-N** **Argo**

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort

**Klasifikácia****Úvod do klasifikácie symptómov**

Samuel Hahnemann's Organon a Chronické choroby nám ukazujú, že Hahnemann nevyberal svoje lieky na základe súhrnu všetkých symptómov, ktoré možno nájsť v pacientovej súčasnej alebo minulej situácii. Príznaky pacienta starostlivo rozdelil do niekoľkých kategórií a na základe tejto klasifikácie založil svoju liečbu.

K dispozícii je Hahnemannova klasifikácia, ako aj používateľom definované skupiny A, B, C, D a E pre vaše vlastné použitie.

Možnosti klasifikácie, ktoré sú k dispozícii na paneli nástrojov na ľavej strane obrazovky:

Symbol	Názov	Význam
	Psora	Základné poruchy. Organon 6. vydanie § 80 (psorická miasma).
	Incident	Biografická udalosť, veci, ktoré sa pacientovi stali a mali na neho vplyv. Akútne ochorenie. Organon § 72 (škodlivé vplyvy).
	Epidémia	Choroby, ktoré sa prenášajú z vonkajšieho zdroja: chrípka, legionella, SARS, osýpky, mumps a iné. (Medzi-ochorenia). Organon § 73 (epidemické choroby).
	Akútne miasmatické	Choroba vychádza zvnútra, často ju spúšťa nejaká udalosť, podnet prichádzajúci zvonka. Sťažnosti sú závažné. Organon § 73 (prechodná explózia latentnej psory).
	Zdedená tendencia	Tie choroby, ktoré sa vyskytli u predkov a ktoré sa geneticky prenášajú na pacienta.
	Iatrogénne	Používanie liekov a očkovania, ktoré niekto absolvoval. Organon § 74.
	Sykóza	Infekcia kvapavkou. Organon § 79 (sykotická miasma).
	Syfilis	Infekcia syfilisom. Organon § 79 (syfilitická miasma).
	Používateľ A	Bezplatne na vlastné použitie.
	Používateľ B	Bezplatne na vlastné použitie.

C	Používateľ C	Bezplatne na vlastné použitie.
D	Používateľ D	Bezplatne na vlastné použitie.
E	Používateľ E	Bezplatne na vlastné použitie.

Klasifikáciu možno použiť na úrovni Symptómov alebo na jednotlivých rubrikách.

Nastavenie klasifikácie na príznak sa použije na všetky rubriky v príznaku. Akékoľvek nastavenie, ktoré bolo použité pre rubriky, sa potom už nebude používať.

Pozrite si tiež ukážkový prípad *Jednoduchý príklad klasifikácie*.

Filter a klasifikácia nápravných opatrení

Ak sa v analýze použije klasifikácia symptómov alebo rubriek, lieky pre každú analýzu sa automaticky filtrujú. Toto filtrovanie sa vykonáva v súlade s informáciami, ktoré sa nachádzajú v Hahnemannových spisoch.

Pre *Psora*, lieky sú: všetky minerály a nosódy, plus Lach, Lyc, Sep, ale okrem Merc.

Pre *Incident, Akútny miasmatický, Epidemický*, lieky sú: všetky rastliny a zvieratá, plus Merc, Ars, Ant-c.

Pre *Iatrogénne*, lieky sú tie, ktoré sa nachádzajú v rubrikách *Intoxikácia po liekoch*, a *Ochorenia z očkovania*.

Pre *Zdedená tendencia*, lieky sú: všetky nosódy.

V prípade ostatných skupín sú uvedené všetky lieky.

Clipboardy

Triedy A-B-C-D-E možno použiť aj ako nástenky. Ich priradením k príznakom alebo jednotlivým rubrikám je možné veľmi jednoducho vytvoriť rôzne pohľady na výsledky analýzy.

Viac informácií

Vyššie uvedené informácie o klasifikácii sú obmedzené.

Vynikajúce informácie o používaní Hahnemannovej klasifikácie nájdete na webovej stránke <http://www.ewaldstoteler.com>

Viacere pohľady

Teraz viete, ako vytvoriť analýzu. Viete tiež, ako doladiť analýzu na základe vašej interpretácie symptómov v tomto konkrétnom prípade.

Príznakom alebo rubrikám ste mohli priradiť váhy. Možno ste im priradili klasifikácie. Vybrali ste vzorec analýzy na zváženie dôležitosti opravných prostriedkov pre použité rubriky. A možno ste filtrovali výsledky na základe daného kráľovstva liekov.

Všetky tieto nastavenia vám pomohli získať najlepší výsledok analýzy na základe vašej interpretácie prípadu.

Je to však vaša interpretácia, váš pohľad na pacientove príznaky. Tieto príznaky sú nemenné, sú to pozorované skutočnosti, ktoré ste zhromaždili. Bez ohľadu na to, aký máte názor, pozorované príznaky sú skutočnosťou, s ktorou musíte pracovať. (Organon §18)

Mohli by ste však zvážiť, či sa na tie isté príznaky pozrieť z inej perspektívy, iným pohľadom, interpretovať ich iným spôsobom. Môžete samozrejme zmeniť všetky nastavenia analýzy a zistiť, čo sa stane. Potom sa však vaša pôvodná analýza zmenila a ak ju chcete znova zobraziť, musíte zmeniť všetky zmenené nastavenia.

Aby ste mohli upravovať nastavenia analýzy bez straty pôvodných nastavení, vytvorili sme viacnásobné zobrazenia.

Čo je to analytické zobrazenie?

Zobrazenie analýzy je súhrn všetkých nastavení, ktoré môžete použiť na analýzu.

Závažia	×0 ×1 ×2 ×3 ×4
Klasifikácia	○ ⚡ ⋯ ⌒ ⌒→⊗× [A] [B] [C] [D] [E]
Symptómy rovnováhy	⌚
Správne Polar	↔
Analytický vzorec	Napríklad "Malé lieky"
Filter Remedy	Napríklad "Rastliny"

Môžete vytvoriť viacero zobrazení, pričom každé z nich bude mať vlastnú kolekciu nastavení.


Ako príklad si pozrite *Ukážkový prípad Andrew*, analýzu *Viacere pohľady*.

Vytvorenie zobrazenia

Nové zobrazenie môžete vytvoriť prostredníctvom ponuky alebo panela nástrojov. (Možnosť ponuky *Analýza / Zobraziť / Pridanie nového zobrazenia*, tlačidlo na paneli nástrojov **+**, možnosť kontextového menu *Zobraziť / Pridanie nového zobrazenia*).

Nové zobrazenie je kópiou pôvodného zobrazenia s presne rovnakými nastaveniami. Všetky zmeny, ktoré vykonáte v nastaveniach v novom zobrazení, sa týkajú výlučne tohto zobrazenia. Všetky ostatné pohľady zostávajú rovnaké ako predtým. Ak chcete, môžete nové zobrazenie voliteľne pomenovať.

Všimnite si, že všetky pohľady používajú presne ten istý súbor príznakov a rubriík. Situácia pacienta je rovnaká, len vaša interpretácia je pri každom pohľade iná.

Z jedného zobrazenia na druhé môžete ľahko prepínať prostredníctvom ponuky. (Možnosť ponuky *Analýza / Zobrazit' / Standard*, tlačidlo na paneli nástrojov , možnosť kontextového menu *Zobrazit' / Standard*). Zobrazenie môžete vybrať aj na paneli nástrojov.

Ak už nechcete používať vybrané zobrazenie, môžete ho odstrániť. (Možnosť ponuky *Analýza / Zobrazit' / Odstránenie aktuálneho zobrazenia*, možnosť kontextového menu *Zobrazit' / Odstránenie aktuálneho zobrazenia*).

Vždy môžete zmeniť názov, ktorý ste zobrazeniu prideliť. (Možnosť ponuky *Analýza / Zobrazit' / Premenovanie aktuálneho zobrazenia*, možnosť kontextového menu *Zobrazit' / Premenovanie aktuálneho zobrazenia*).


Môžete tiež zmeniť poradie, v akom sa zobrazujú pohľady v ponuke alebo na paneli nástrojov. (Možnosť ponuky *Analýza / Zobrazit' / Presun aktuálneho zobrazenia doľava*, možnosť kontextového menu *Zobrazit' / Presun aktuálneho zobrazenia doľava*).

Pri pohľade na výsledky analýzy jednotlivých zobrazení

V oblasti výsledkov analýzy v pravej časti obrazovky sa zobrazujú výsledky analýzy pre vybraný pohľad. Keď prepnete na iné zobrazenie, výsledky sa zmenia na výsledky pre toto zobrazenie.

Môžete si tiež pozrieť všetky výsledky zobrazenia súčasne. (Možnosť ponuky *Analýza / Viacnásobné zobrazenie*, tlačidlo na paneli nástrojov ).

Bude to vyzeráť takto:

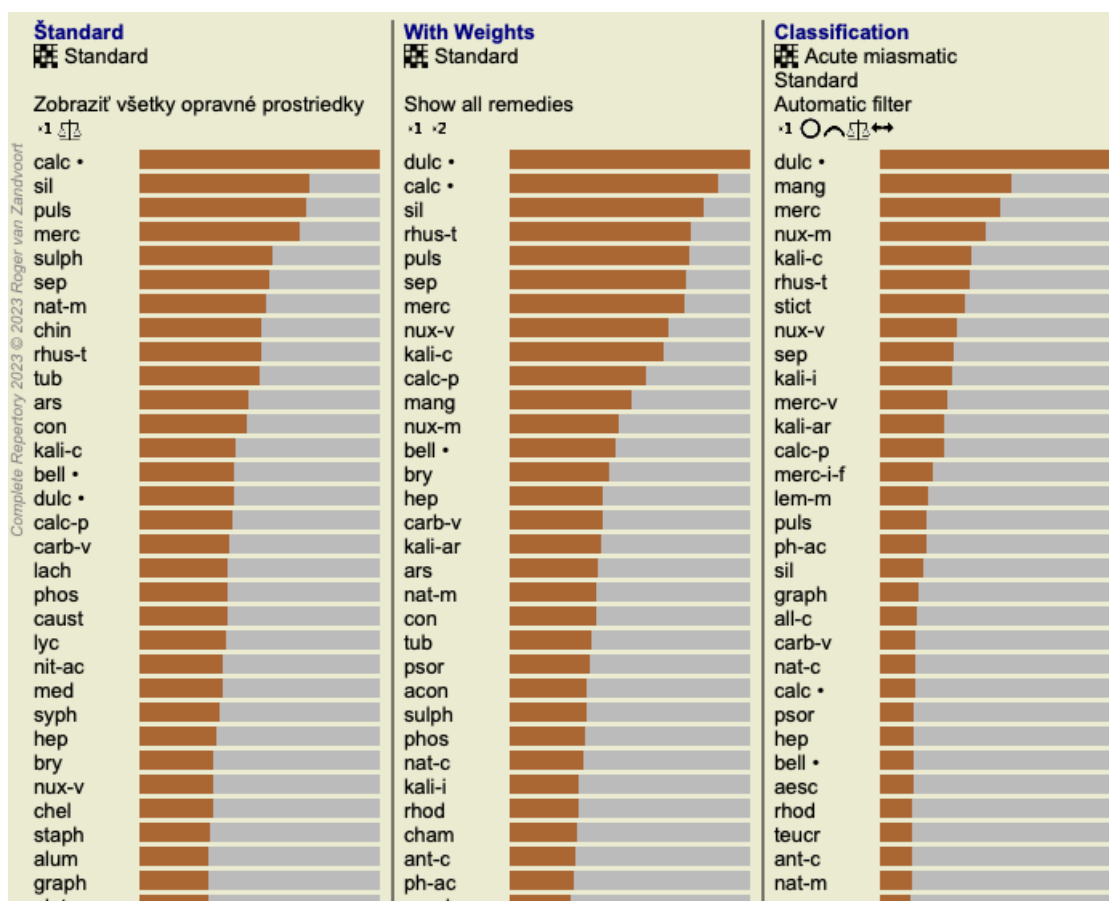

Je podobný prehľad zoznamu pre analýzu, ale zobrazuje jeden zoznam výsledkov na jedno zobrazenie.

V hornej časti sa zobrazí súhrn nastavení použitých pre jednotlivé zobrazenia.

- Analýza vybraná pre štýl výstupu tabuľky.
- Ak sa pri analýze používa klasifikácia, uvedie sa vzorec analýzy, ktorý sa používa.
- Použitý filter nápravných opatrení.
- Malý obrázok pre každé nastavenie analýzy v platnosti.

Bönnigshausen

Niektoré informácie o Bönnigshausenovej analýze

Metóda Bönnigshausenovej analýzy nepoužíva iný repertoár, pracuje s *Complete Repertory* ako ostatné analýzy. Všetky rubriky v starých repertoároch Bönnigshausov sú uvedené na stránke *Complete Repertory*.

Böninghausenov analytický systém je metodika, ktorú použijete, keď si to symptómy pacienta vyžadujú, nemá nič spoločné s konkrétnym druhom repertória, má do činenia s rubrikami, ktoré sú zovšeobecnené a ktoré možno nájsť v každom repertóriu.

Rozdiel je v spôsobe výpočtu.

Namiesto toho, aby sme sa pozerali len na to, ako je liek zastúpený v danej rubrike, kladieme veľký dôraz na jeho výskyt v príbuzných rubrikách v iných častiach repertória.

Výpočet sa vykonáva takto:

- Ignorujte známku z opravného prostriedku, ako je zobrazená v rubrike.
- Namiesto toho použite známku za lieky, ktorá sa vypočíta z výskytu opravného prostriedku v súvisiacich rubrikách.
- Pridajte lieku väčšiu váhu, ak sa vyskytuje vo viacerých príbuzných rubrikách v rôznych repertoárových sekciách (napr. Myseľ, Hlava, Generalita atď.).
- Vykonajte opravy pre výskyt v polárnych rubrikách (ako amel. - agg., alebo desire - averzia).

Pri Böninghausenovom štýle analýzy sa vo všeobecnosti používajú všeobecnejšie a rozsiahlejšie rubriky.

Kombinované používanie menších špecifických rubrik s väčšími všeobecnými rubrikami nie je vo všeobecnosti užitočné.

Šablóny analýzy

Keď vytvoríte novú analýzu, neobsahuje žiadne príznaky ani rubriky.

V mnohých situáciách však pravdepodobne použijete podobné príznaky pre podobné prípady.


Aby ste si to uľahčili, môžete si vytvoriť šablóny analýzy. Šablóna analýzy je východiskovým bodom pre novú analýzu, ktorá už obsahuje niekoľko preddefinovaných prvkov. Môžu to byť Symptómy, ako aj často používané repertoárové rubriky.

Vytvorenie analýzy zo šablóny

Ak chcete vytvoriť novú analýzu, musíte najprv vytvoriť nový prípad alebo otvoriť už existujúci prípad. Pozri *Vytvorenie spisu* a *Otvorenie spisu*.

Vytvoríte novú analýzu zo šablóny. (Možnosť ponuky *Prípad / Pridanie analýzy zo šablóny, control-T*).

Zobrazí sa dialógové okno, v ktorom môžete vybrať šablónu:

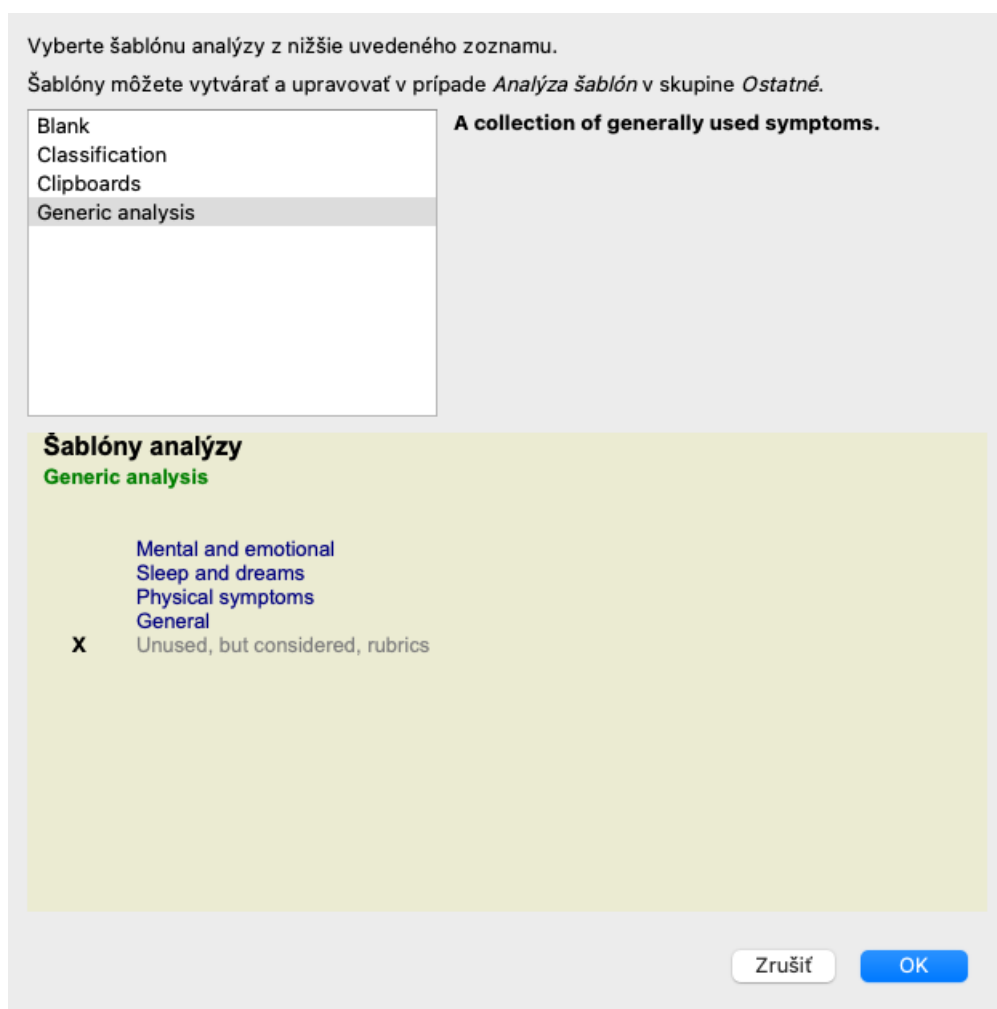

Po výbere šablóny sa v dolnej polovici obrazovky zobrazí príklad jej obsahu.

Vytváranie vlastných šablón analýzy

Vytvorenie vlastných šablón je veľmi jednoduché.

Všetky šablóny sú uložené v špeciálnom súbore s názvom *Analysis templates*. Nájdete ho v skupine prípadov *Other*, spolu so súborom *Demo case - Andrew*.

V tomto súbore môžete vytvárať nové analýzy rovnako ako bežné analýzy v iných súboroch prípadov. Poznámky, ktoré pridáte k tejto analýze, sa použijú ako opis šablóny. Stačí otvoriť súbor s prípadom *Analysis templates* a rýchlo zistíte, ako to funguje!

Ak už máte analýzu niekde v súbore prípadu a chcete ju použiť ako novú šablónu, stačí túto analýzu duplikovať a potom ju preniesť do súboru prípadu *Šablóny analýz*. (Možnosť ponuky *Prípad / Duplicitná analýza, control-D*, možnosť ponuky *Prípad / Presun analýzy do prípadu...*).

Zdieľanie šablón s ostatnými

Šablóny analýz môžete zdieľať s kolegami rovnako ako iné analýzy. Podrobnosti nájdete v časti *Zdieľanie prípadov*. Exportované súbory môžete ľahko zdieľať aj na internete!

Kvalita analýzy

Umenie urobiť dobrú analýzu

Urobiť dobrú analýzu symptómov pacienta je umenie, ktorého zvládnutie nie je samozrejmé. Rôzne školy môžu vyučovať rôzne metódy. Jednotliví učitelia presadzujú svoje osobné štýly a teórie. A dobrá analýza je u každého pacienta iná.

Nástroj Kvalita analýzy sa vám snaží pomôcť predchádzať bežným chybám, čím zvyšuje šancu na úspech.

Ukazovateľ kvality

V module Analysis sa v hornej časti stránky zobrazí malé farebné tlačidlo.

Farba označuje kvalitu analýzy.


- Zelená: Zelená: len menšie odporúčania na zlepšenie.
- Žltá farba: Kvalita sa môže zlepšiť.
- Červená: S touto analýzou sú vážne problémy.

Kliknutím na ukazovateľ kvality zobrazíte správu s návrhmi na možné zlepšenie.


Modul Materia Medica

Otvorenie modulu Materia Medica

Prejdite do modulu Materia Medica kliknutím na kartu *MM*. (Možnosť ponuky *Zobraziť / Materia Medica, ℹ-MM*).

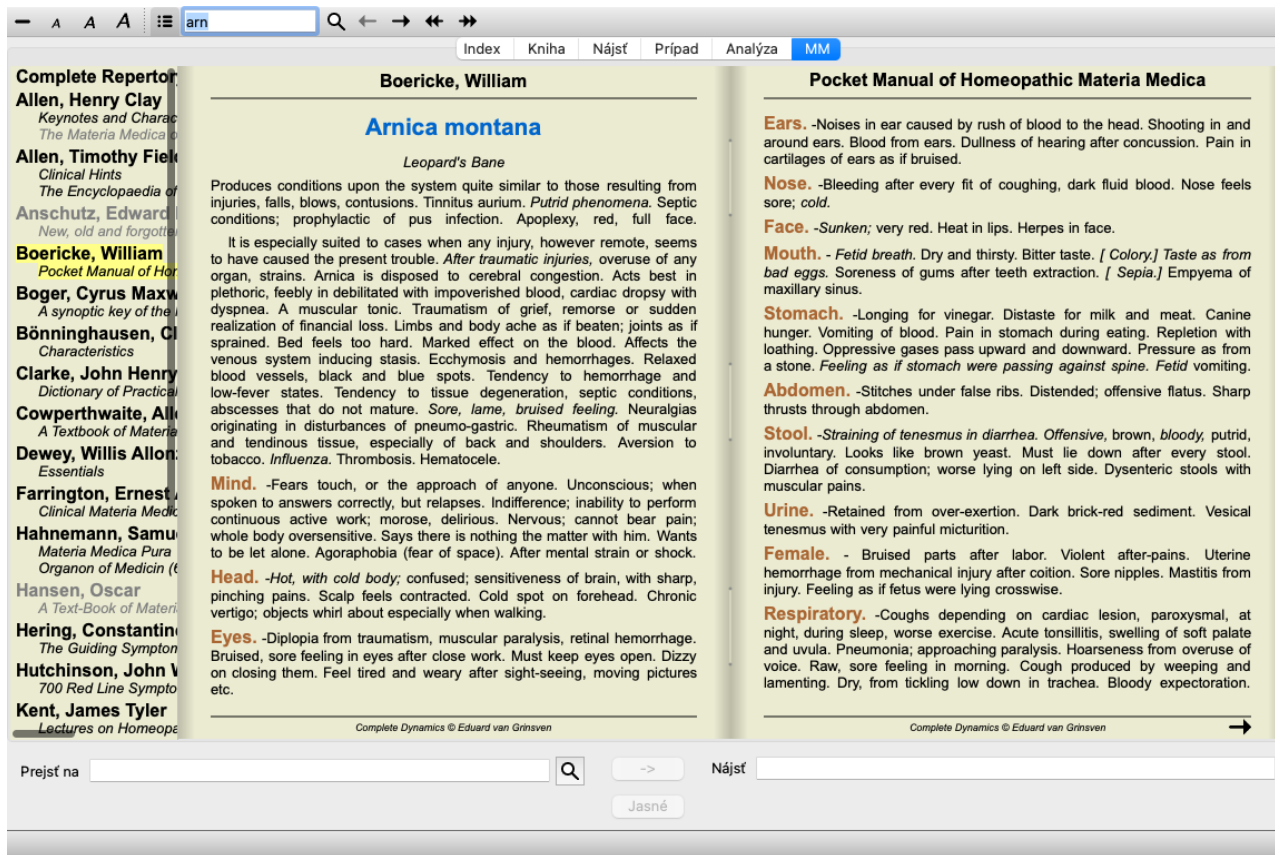



Výber nápravného prostriedku

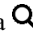
Skratku lieku môžete zadať do poľa vyššie na paneli s nástrojmi. Ak skratku nepoznáte, môžete si liek vyhľadať stlačením tlačidla  za poľom.

Výber knihy

Po výbere lieku si môžete vybrať niektorý zo zdrojov Materia Medica uvedených na ľavej strane obrazovky. Ak sa vybraný liečivý prostriedok v knihe nevyskytuje, názov knihy sa vytlačí sivou farbou.

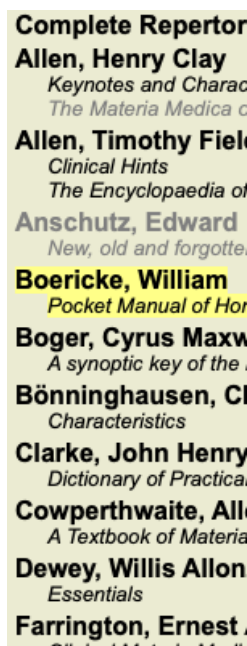


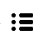Ak chcete využiť maximum miesta na čítanie, môžete index skryť pomocou tlačidla na paneli nástrojov .

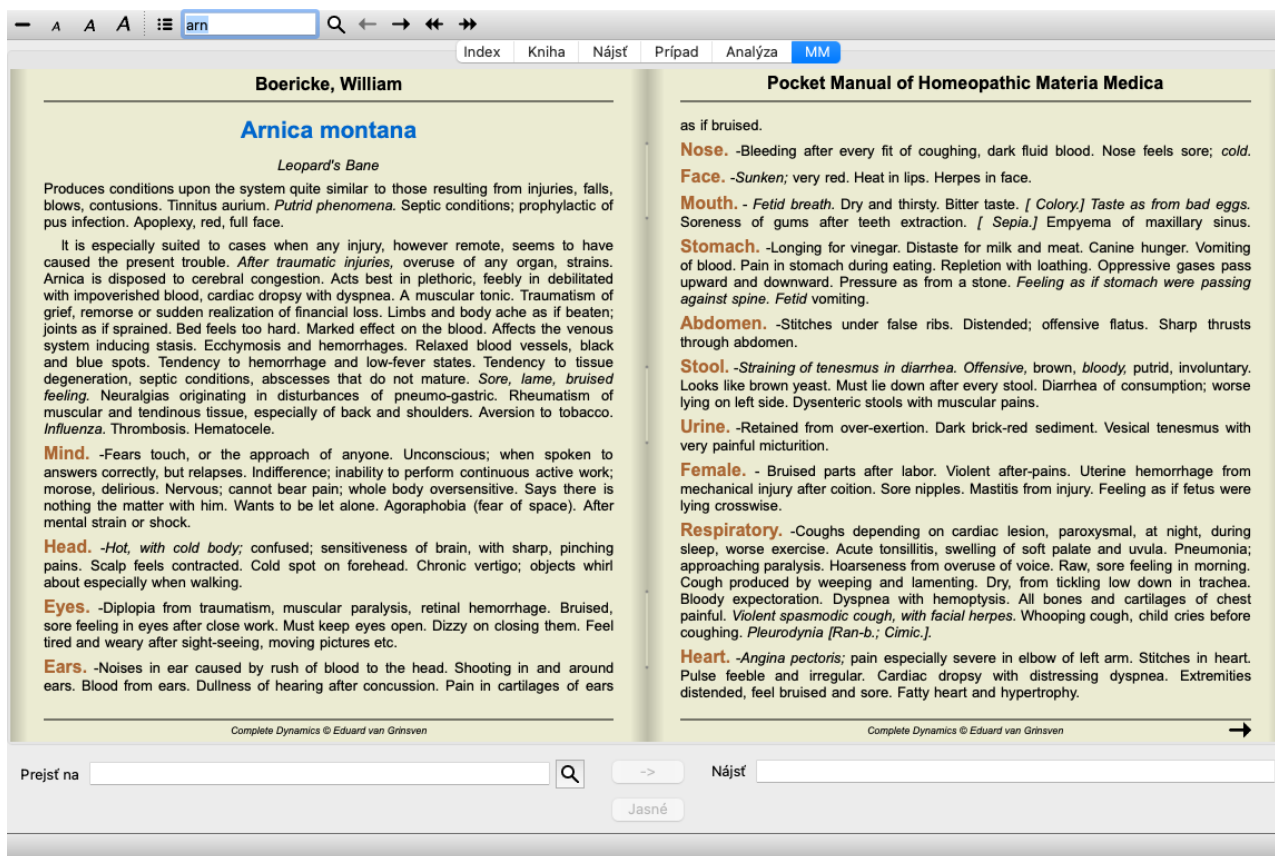

Index nápravných opatrení

Ak chcete získať prehľad o všetkých opravných prostriedkoch, ktoré sú v knihe k dispozícii, otvorte kontextové menu na názve knihy. (Možnosť kontextového menu *Index*).

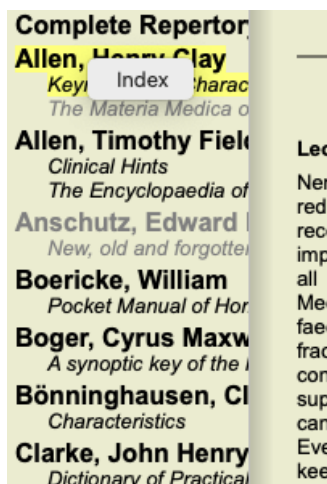

V knihe je uvedený zoznam všetkých liekov. Kliknutím na názov lieku môžete otvoriť knihu pre daný liek.

Allen, Henry Clay / Keynotes and Characteristics

Abrotanum
Aceticum acidum
Aconitum napellus
Aesculus hippocastanum
Aethusa cynapium
Agaricus muscarius
Agnus castus
Allium cepa
Aloe socotrina
Alumina
Ambra grisea
Ammonium carbonicum
Ammonium muriaticum
Amylenum nitrosum
Anacardium orientale
Anthracinum
Antimonium crudum
Antimonium tartaricum
Apis mellifera
Apocynum cannabinum
Argentum metallicum
Argentum nitricum
Arnica montana
Arsenicum album
Arum triphyllum
Asarum europaeum
Asterias rubens
Aurum metallicum

Baptisia tinctoria
Barvta carbonica

Dostupné knihy a internetové stránky

V module Materia Medica je k dispozícii niekoľko kníh. Dostupnosť týchto kníh sa môže líšiť v závislosti od jazykových nastavení.

Modul Materia Medica integruje niekoľko internetových stránok, ktoré poskytujú informácie o liekoch. Dostupnosť týchto webových stránok závisí od nastavenia jazyka.

Upozorňujeme, že obsah internetových stránok nie je súčasťou *Complete Dynamics*, ale je zobrazený len v module Materia Medica pre vaše pohodlie.

Niektoré webové stránky môžu od vás požadovať platbu za prístup k informáciám. Ide výlučne o politiku vlastníka webovej lokality a nijako nesúvisí s vašou licenciou *Complete Dynamics*.

Reverzná Materia Medica

Na stránke *Reverse Materia Medica* nájdete najdôležitejšie symptómy z repertória pre daný liek tak, ako sa nachádzajú v repertóriu. Žiadny výklad nerobia ľudskí odborníci, ako je to bežne v bežnej *Materia Medica*, *Reverzná Materia Medica* je založená výlučne na odborných znalostiach uložených v repertoári.

Ak chcete prejsť na rubriku v module *Book*, jednoducho na ňu dvakrát kliknite.

Dôležitejšie príznaky sú vytlačené väčšou veľkosťou ako menej dôležité príznaky, takže môžete ľahko rozlíšiť relatívnu dôležitosť jednotlivých príznakov.

Výsledky môžete upraviť pomocou nasledujúcich tlačidiel:

– Menej príznakov.

+ Ďalšie príznaky.

Filter V rozbaľovacom zozname filtrov môžete vybrať kritériá pre rubriky, ktoré sa zobrazia v reverznom zozname *Materia Medica*:

Automatické Automaticky sa vyberú najvhodnejšie rubriky.

Potvrdené príznaky Používajú sa len lieky v stupni 3 alebo 4. Tieto príznaky sa potvrdzujú v praxi.

Kompletné príznaky Používajú sa len úplné príznaky. Príznaky sú úplné, ak kombinujú aspoň 3 rôzne druhy informácií. Príklad: Čas + miesto + predĺženie.

Potvrdené a dokončené Zobrazené sú len potvrdené a úplné príznaky.

Príznaky červenej čiary Uprednostňuje symptómy, ktoré sa vyskytujú príbuzným spôsobom vo viacerých častiach repertoáru.



Kľúčové poznámky Tento liek má stupeň 3 alebo 4, ale všetky ostatné lieky majú nižší stupeň.

Jedinečné rubriky Zobrazte len rubriky, v ktorých je tento prostriedok jediným vyskytujúcim sa prostriedkom.



Diferenciálna diagnostika zapnutá/vypnutá. Ak je zapnutý, zobrazuje ďalšie dôležité prostriedky na odstránenie príznaku.

Alternatívne prostriedky v Reverse Materia Medica

Po stlačení tlačidla  na paneli s nástrojmi sa zobrazí niekoľko ďalších nápravných opatrení pre dané príznaky: (Možnosť ponuky *Zobrazit' / Lieky / Zobrazit' lieky DD*, tlačidlo na paneli nástrojov , možnosť kontextového menu *Lieky / Zobrazit' lieky DD*).

MIND ANGUISH ; heart complaints, in; angina pectoris , in: ARN (+1) dd: aml-n ANSWER , answering, answers; stupor returns quickly after: ARN (+26) dd: BAPT HYOS DESPAIR ; concussion, after: ARN DULLNESS ; injuries of head, after: ARN (+9) FEAR ; touch, of; gout , in: ARN (+1) dd: colch FORGETFULNESS ; injuries, after: ARN (+8) dd: HYPER INDIFFERENCE , apathy; fever ; during: ARN (+39) dd: CHIN CON OP PH-AC PHOS SEP INDIFFERENCE , apathy; heat; during: ARN (+10) dd: PH-AC PULS Op Phos Sep INDIFFERENCE , apathy; stool; after: ARN (+1) dd: cycl RESTLESSNESS , nervousness; perspiration; during: ARN (+39) STUPEFACTION , as if intoxicated; concussion of brain, after: ARN STUPEFACTION , as if intoxicated; injury, after: ARN (+5) dd: clic con hell puls rhus-t STUPEFACTION , as if intoxicated; perspiration; during: ARN (+14) dd: HYOS OP PH-AC PHOS RHUS-T UNCONSCIOUSNESS , coma; brain complaints, in: ARN (+46) dd: APIS OP UNCONSCIOUSNESS , coma; fever, during: ARN (+71) UNCONSCIOUSNESS , coma; injury, after: ARN (+11) dd: CALEN WEeping , tearful mood; cough; before: ARN (+7) dd: BELL BRY HEP ant-t ars bor phos WEeping , tearful mood; cough; during: ARN (+32) dd: BELL HEP NAT-M HEAD CONGESTION , hyperemia; chill; during: ARN (+26) dd: CHIN ARS CEDR MERC SEP M-arct M-aust CONGESTION , hyperemia; thirst, with: ARN (+3) dd: Mang Thuj bov HEAT ; chilliness; during: ARN (+24) dd: BELL BRY HEAT ; coldness, with; body, of: ARN (+42) INFLAMMATION ; meninges, meningitis; injuries, after: ARN (+5) dd: HEP HYPER NAT-S OP bell PAIN , headache; brain complaints, in: ARN (+23) dd: ACON PAIN , headache; injuries, after: ARN (+40) dd: ACON NAT-S	HEAD (cont.) PAIN , headache; injuries, after; concussion: ARN (+20) dd: ACON BELL CHIN CIC HYPER KALI-BR Hell PAIN , headache; injuries, after; fall, after a: ARN (+7) dd: CIC HYOS Thiosin hyper nat-s rhus-t sul-ac PAIN , headache; forehead; warmth; agg.: ARN (+14) dd: APIS PAIN , headache; burning, smarting; coldness of body, with: ARN (+1) dd: coff-t PAIN , headache; stitching; cough; during: ARN (+43) dd: BRY SABAD SULPH SWELLING ; children: ARN (+2) dd: RHUS-T Sil EYES CATARACT , opacity of lens; injuries, after: ARN (+17) dd: ACON CATARACT , opacity of lens; operations, after: ARN (+5) dd: ACON ALUMN SENEG STAPH rhus-t DUST ; agg.: ARN (+32) dd: ACON CALC HEP SIL STAPH SULPH HEMORRHAGE ; coughing agg.: ARN (+5) dd: HAM LED NUX-V carb-v cham HEMORRHAGE ; injuries, after: ARN (+5) dd: LED NUX-V bry erig sul-ac INFLAMMATION ; injuries, after: ARN (+28) dd: ACON CALC HEP SIL STAPH SULPH INFLAMMATION ; injuries, after; foreign bodies, from: ARN (+7) dd: ACON HEP SIL CALC PULS ham sulph INJECTED ; cough, during: ARN PAIN ; injuries, after: ARN (+6) dd: SYMPH BRY LED SULPH asar hyper EARS INJURIES , after: ARN (+13) dd: CAPS CHIN-S TELL Arist-cl Lach Nat-m HEARING IMPAIRED , difficult; injuries or blows, after: ARN (+5) dd: CHIN-S TELL carb-v croc thiosin NOSE EPISTAXIS , hemorrhage; morning; agg.; blowing nose agg.: ARN (+34) dd: CHIN LACH AGAR BOV CAUST PULS EPISTAXIS , hemorrhage; bathing, washing; agg.: ARN (+23) dd: AM-C ANT-S EPISTAXIS , hemorrhage; bathing, washing; agg.; face: ARN (+21) dd: AM-C EPISTAXIS , hemorrhage; cough; during: ARN (+44) dd: DROS IP
--	---

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort



Pre každý symptóm je uvedených najviac 7 alternatívnych liekov.

V príklade uvidíte, že niekedy sa zobrazí 7 prostriedkov, ale niekedy aj menej. Je to preto, že lieky určitého stupňa sa zobrazujú len vtedy, ak sa dajú zobrazit' VŠETKY.

Ak teda vidíte prostriedky so stupňom 4 a 3, znamená to, že v danej rubrike nie sú žiadne iné prostriedky so stupňom 4 alebo 3, ale môžu tam byť prostriedky so stupňom 2 alebo 1, ktoré nie sú zobrazené.

Ak nevidíte žiadny liek, rubrika pravdepodobne obsahuje 8 alebo viac liekov rovnakého významu, alebo nie sú k dispozícii žiadne alternatívy.

Ďalšie Materia Medica

Ďalšie knihy Materia Medica, ktoré vytvorili iní používatelia, možno ľahko pridať do *Complete Dynamics*. Kniha Materia Medica je uložená v súbore, ktorý možno zdieľať s ostatnými používateľmi. Ak chcete nainštalovať novú knihu, skopírujte súbor do priečinka *Complete Dynamics*, ktorý sa nachádza v priečinku *Documents*. Potom zastavte a reštartujte *Complete Dynamics*. Nová kniha by potom mala byť automaticky viditeľná v sekcii *MM*.

Vytváranie nových kníh Materia Medica si vyžaduje licenciu pre *Master Edition*.

Materia Medica rýchle zobrazenie

Môže byť veľmi pohodlné rýchlo zobraziť text Materia Medica z viacerých kníh súčasne.

Okno rýchleho zobrazenia *Materia Medica* zobrazuje text viacerých kompaktnejších kníh Materia Medica súčasne. (Možnosť ponuky *Zobrazit' / Materia Medica rýchle zobrazenie*, možnosť kontextového menu *Materia Medica rýchle zobrazenie*).

Cyclamen Europaeum

Pharmacokinship - Remedy Relations (Nambison)

Followed well by: Phos., Puls., Rhus-t., Sep., Sulph.

Antidoted by: Camph., Coff., Puls.

Duration of action: 14 - 20 d

Dose: 3 attenuation

700 Red Line Symptoms (Hutchinson)

1. - Flickering before the eyes, as of various colours, glittering needles, fiery specks and sparks.

Keynotes of the homeopathic Materia Medica (Lippe)

Sow Bread

Pressing, drawing and tearing pain, principally in the periosteum. Chilblains of the feet.

As long as he walks about he feels well with the exception of languor,

but as soon as he sits down, especially in the evening, he suffers various inconveniences.

Thirstlessness.

Menses too profuse.

Bad effects from eating much fat food (pork).

Aggravation in the evening and while at rest.

Amelioration whilst walking.

Keynotes and Characteristics (Allen)

Sow Bread Primulaceae

Best suited for leucophlegmatic persons with anaemic or chlorotic conditions; easily fatigued, and in consequence not inclined to any kind of labor; feeble or suspended functions of organs or special senses. *Pale, chlorotic; deranged menses* (Ferr., Puls.), accompanied by vertigo, headache, dim vision. Pains; pressive, drawing or tearing of parts where bone lie near the surface. Ailments: from suppressed grief and terrors of conscience; from duty not done or bad act committed. Great sadness and peevishness. irritable.

Zatvoriť

Okno zostane otvorené, kým ho výslovne nezatvoríte. Takto budete môcť rýchlo porovnať lieky. Ďalší liek sa vyberie jednoduchým kliknutím na názov lieku kdekoľvek v moduloch *Book*, *Find* alebo *Analysis*.

Informácie o nápravnom prostriedku

Podrobné informácie o opravnom prostriedku

Ako príklad uvidíme rubriku *Všeobecné informácie; Potraviny a nápoje; jablká; túžby*:

FOOD	GENER.
FOOD and drinks; apples (cont.)	
desires: adam Adon ALOE aml-n ANT-T ap-g arge-p Asaf bitl-at bro-g Cham cit-n cub dama-d fel GUAI Hafn helod-c kali-p lac-drom lsd lyss Manc menth merl meteo-a ory-c ozon phos polyst prun pyrus-c Ruta sabad sep stront-c SULPH tax TELL toxop-p Tritic-v vip • Food and drinks; cool things, like apples, desires (2) • Food and drinks; fruits; desires (233) • eleven thirty pm., on falling asleep: fel	

Ak sa chcete dozvedieť viac o lieku v rubrike, najjednoduchšie je presunúť myš nad názov lieku a pozrieť sa na oblasť so správami v ľavom dolnom rohu okna.

Ak sa myšou presuniete nad položku **ANT-T**, zobrazí sa správa:

ant-t = Antimonium tartaricum (Allen, Bönninghausen, Lilienthal, Lippe)

Teraz už viete nielen to, že Antimonium je v treťom stupni (podľa toho, ako je vytlačené), ale aj to, že jeho úplný názov je *Antimonium tartaricum*, a že je v tejto rubrike preto, lebo k tejto informácii prispeli štyria uvedení autori.

Ak chcete získať ďalšie informácie, dvakrát kliknite na **ANT-T**.

Zobrazí sa okno Remedy Information:

Rubrika: GENERALITIES; FOOD and drinks; apples; desires.	
Skratka nápravného prostriedku: ant-t, stupeň 3.	
Štandardný názov: Antimonium tartaricum.	
Výskyty v súvisiacich rubrikách: 2, priemerná známka: 2.0.	
Zdroje.	
Allen T F	<i>Encyclopedia of Pure Materia Medica</i> , 1874.
Allen T F	<i>Index of Encyclopedia</i> , 1876.
Bönninghausen C M von	<i>Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht-antipsorischen Arzneien with handwritten annotations</i> , 1833.
Knerr C B	<i>Repertory of Hering's Guiding Symptoms</i> , 1896.
Lilienthal S	<i>Homoeopathic Therapeutics</i> , Jain.B. (New Dehli), 1890.
Lippe A von	<i>Keynotes and Red line symptoms of Materia Medica</i> , 1915.
Saine A	<i>Materia Medica Pura Project</i> , 2018.
Trinks C F & Müller C	<i>Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III</i> , T.O. Weigel (Leipzig), 1847.

Zatvoriť

Výskyt v súvisiacich rubrikách

Súvisiace rubriky sú rubriky, ktoré majú určitý vzťah k rubrike, ktorú si prezeráte pre tento liečivý prostriedok.

V tomto prípade sú to tieto rubriky:

Všeobecné informácie; Jedlo a nápoje; chladné veci, ako sú jablká, túžby

Všeobecne; Jedlo a nápoje; jablká, túžby; voda, s túžbou po chlade

Obe tieto rubriky obsahujú aj *ant-t*.

Čím vyšší je počet výskytov v súvisiacich rubrikách a čím vyššia je priemerná váha v týchto rubrikách, tým väčší význam možno priradiť nápravnému opatreniu.

Zdroje

Uvádza všetky zdroje, z ktorých liek pochádza. To zahŕňa aspoň meno autora, názov knihy alebo časopisu a rok vydania.

Počet autorov

Ak ste predtým pracovali s *MacRepertory*, možno ste si zvykli používať čísla autorov namiesto ich mien. V nastaveniach predvolieb môžete aktivovať možnosť *Autorské čísla*. Podrobnosti nájdete v časti *Preferences*.

V okne s informáciami o opravnom prostriedku sa potom zobrazia aj čísla autorov:

Rubrika: GENERALITIES; FOOD and drinks; apples; desires.

Skratka nápravného prostriedku: ant-t, stupeň 3.

Štandardný názov: Antimonium tartaricum.

Výskyty v súvisiacich rubrikách: 2, **priemerná známka:** 2.0.

Zdroje.

Allen T F (36) *Encyclopedia of Pure Materia Medica*, 1874.

Allen T F (36) *Index of Encyclopedia*, 1876.

Bönninghausen C M von (5) *Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht-antipsorischen Arzneien with handwritten annotations*, 1833.

Knerr C B (54) *Repertory of Hering's Guiding Symptoms*, 1896.

Lilienthal S (11) *Homoeopathic Therapeutics*, Jain.B. (New Dehli), 1890.

Lippe A von (22) *Keynotes and Red line symptoms of Materia Medica*, 1915.

Saine A (809) *Materia Medica Pura Project*, 2018.

Trinks C F & Müller C (4) *Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III*, T.O. Weigel (Leipzig), 1847.

Zatvoriť

Pole Jump-to

Účel

Pole *Jump to* v ľavej dolnej časti okna slúži na rýchly prechod na danú rubriku v repertoári.

Pomocou nej môžete rýchlo prejsť na známe rubriky.

Ak si nie ste istí, čo hľadáte, použite namiesto toho pole *Nájsť*; pole *Prejsť na* vám pomôže rýchlo sa orientovať, ak viete, kam chcete ísť.

Presunutie zaostrenia na klávesnici


Aby pole *Jump to* akceptovalo ťahy klávesnice, je potrebné ho najprv vybrať.

Stlačením klávesu Tab raz alebo dvakrát sa presunie fokus na pole *Jump to*. (Možnosť ponuky *Zobraziť* / pole *"Prejsť na, ⌘-J*).


Ak chcete okamžite prejsť späť do knihy, stlačte tlačidlo Enter.

Na pole môžete samozrejme kliknúť aj myšou.

Pole ma zameranie klávesnice

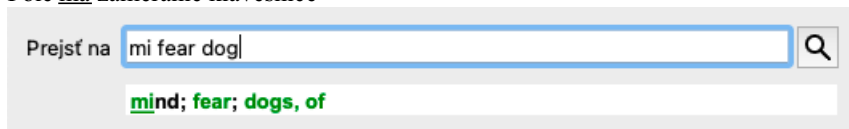

Pole nie má zameranie

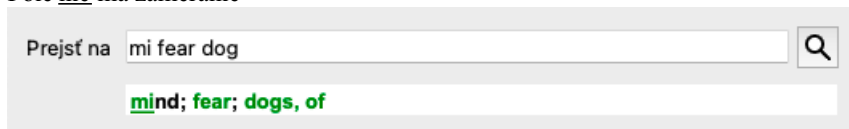

Používanie poľa

Do poľa *Jump to* jednoducho zadajte prvé písmená rubriky, na ktorú chcete prejsť. Časti rubriky sú oddelené medzerou.

Vo vyššie uvedenom príklade sa prechádza na rubriku *Mind; Fear, dogs of*.

Stačí zadať minimálny počet písmen potrebných na identifikáciu každého fragmentu rubriky. V tomto príklade by stačilo zadať *m fe dog*.

Počas písania sa zobrazuje spätná väzba o výklade, ktorá sa zobrazuje bezprostredne pod poľom *Jump to*.

Pri písaní sa kniha pri každom stlačení klávesu okamžite prepne do novej rubriky.

Stručne povedané: Ak sa sústreďíte na knihu, stlačte Tab, zadajte niekoľko písmen, aby ste prešli na rubriku, a stlačte Enter, aby ste sa vrátili späť na knihu. S trochou cviku je táto navigácia mimoriadne výkonná.


Vezmime si ako príklad rubriku *Mind; Fear; dogs, of* a pozrime sa, čo sa stane počas písania.

Prvý *m* sa interpretuje ako *myslí*. V zátvorke sú uvedené 3 alternatívy, ktoré sa tiež začínajú na *m*.

Všimnite si, že časť slova, ktorá sa interpretuje ako pravdepodobne správna, je vytlačená zelenou farbou (*m* v *mysli*, *ústa*, *mužské*, *mirilli témy*).



Po stlačení medzerníka je táto časť dokončená. *Mind* je potvrdená možnosť zo 4 možností.

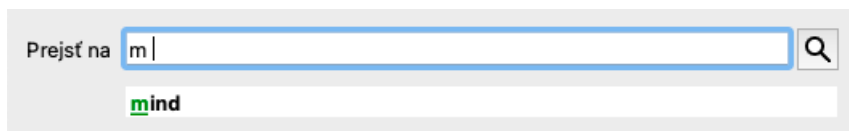


Teraz sa začína druhá časť názvu rubriky. *f* sa interpretuje ako *predpoludním*, čo je prvá možná možnosť.



Nehľadáme *forenoon*, takže napíšte ešte jedno písmeno. Teraz je vybraná stránka *fear*, pričom zostáva pomerne málo alternatív.

Bodky za slovami (napr. *kŕmený*..., *pocit*...) naznačujú, že text rubriky je v skutočnosti dlhší (*kŕmený, túži byť / pocit, strata*), ale slová navyše boli vynechané, aby zostalo viac miesta pre iné alternatívy.

Prejsť na 

mind; fear (*fe*arlessness / *fe*ces / *fe*d... / *fe*eling... / *fe*igning / *fe*ver)

Opätovný zásah do medzery potvrdzuje, že je to správne.

Prejsť na 


mind; fear

d vedie k *len počas dňa*.

Prejsť na 


mind; fear; daytime only (*d*ay... / *d*elirium... / *d*elirium... / *d*elivery... / *d*elt

do vás zavedie na stránku *doctors*.

Prejsť na 

mind; fear; doctor, physician (*d*ogs... / *d*ominate... / *d*ominated... / *d*oor /

A *dog* vám dáva naozaj chuť. Kniha je otvorená na *Mysl; strach; psy*, z.

Prejsť na 

mind; fear; dogs, of

Stačí stlačiť Enter a ste tam, kam ste chceli ísť!

Poznámka: *psov*, z je vytlačená celá zelenou farbou. Je to preto, lebo to je jediný možný výklad *dog* v tomto kontexte.

mysli je vytlačený len prvý *m* zelenou farbou, pretože existujú aj alternatívy začínajúce *m*.

strach je vytlačený dvoma zelenými písmenami, pretože *fe* je jedinečný. Alternatívy *výkal, kŕmený, pocit, predstieranie* atď. sa tiež začínajú *fe*.

Robiť chyby je ľudské


Samozrejme, že nepoznáte celú štruktúru repertoáru naspamäť. To nevie nikto.

Je teda dosť pravdepodobné, že sa často dopustíte chyby a niečo zadáte nesprávne.

Napríklad by ste chceli prejsť na rubriku *Mysel; bludy; levy*.

Táto rubrika neexistuje, pretože správna rubrika je aktuálne *Mysel; bludy; mačky, kocúri, vidí; levy*.

Takže napíšete *m delu lion*

Prejsť na 

mind; delusions, imaginations; lion?

Teraz vidíte, že *lev* je vytlačený červenou farbou, pretože neexistuje žiadna zhoda.

Nemusíte sa obávať, stačí prepnúť na vyhľadávanie stlačením tlačidla ⇌ medzi poliami *Jump to* a *Find*.

Tým sa text z poľa *Prejsť na* skopíruje do poľa *Nájsť* a okamžite sa spustí vyhľadávanie za vás.

Modul *Find* vám teraz zobrazí rubriky, ktoré ste možno hľadali:

MIND
DELUSIONS, imaginations; **cats**, felines, sees; **lions**: (2)
DELUSIONS, imaginations; **hand**, hands; **paw** of a lioness, change into: (1)

Stačí dvakrát kliknúť na prvú rubriku a kniha sa otvorí priamo tam, kam ste chceli ísť.

Modul knihy

Keď vyberiete rubriku v module *Book*, pole *Jump to* automaticky vyplní krátky text danej rubriky za vás. Takto je možné ľahko nájsť

súvisiace rubriky.

Príklady:

Keď vyberiete rubriku *Mind; fear; dogs, of; attacking him, in delirium*, pole *Jump to* sa automaticky vyplní *min fear dog att.*

Keď vyberiete rubriku *Generalities; food and drinks; cold; drinks, water; agg.*, pole *Jump to* sa automaticky vyplní *gen foo cold dri agg.*


Pre každú časť názvu rubriky sa používajú najmenej 3 znaky. Často stačí 1 alebo 2, ale potom by mal byť text veľmi nečitateľný.

Ak 3 znaky nestačia, použije sa viac znakov na odlíšenie rubriky od iných rubrik.

Nájsť pole

Výkonné a ľahko použiteľné vyhľadávanie


Pole *Find* umožňuje veľmi efektívne, výkonné a rýchle vyhľadávanie.

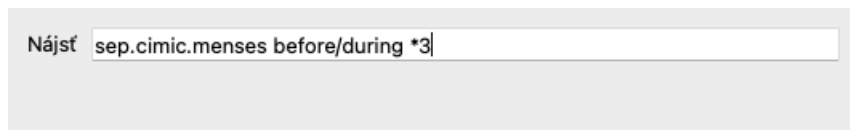

Do tohto poľa môžete zadať všetky kritériá vyhľadávania, ktoré môžete zadať aj do jednotlivých polí (pozri časť *Modul vyhľadávania*). Pole *Find* však môže byť efektívnejšie, pretože môžete zadať a upraviť to, čo chcete nájsť, bez toho, aby ste museli prepínať medzi jednotlivými poľami.

Môže to byť veľmi, veľmi rýchle.

Musíte vedieť niekoľko vecí. V skutočnosti je to veľmi jednoduché, pretože vždy, keď zadáte vyhľadávacie kritériá do jednotlivých polí modulu *Find*, správne naformátovaný reťazec sa automaticky vloží do poľa *Find*. Funguje to obojstranne; všetko, čo zadáte do poľa *Find*, sa zobrazí v jednotlivých poliach tak, ako sa interpretuje.

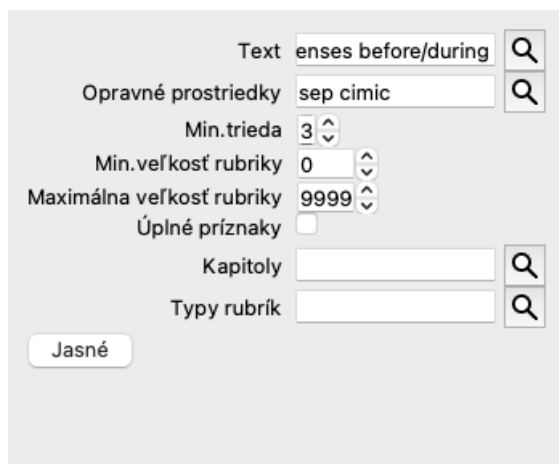

Pole *Find* je také výkonné preto, lebo doň môžete zadať hľadané údaje v ľubovoľnom poradí. Ak teda nájdete príliš veľa rubrik, jednoducho zadajte niekoľko ďalších výrazov, aby ste znížili výsledok. Môžete dokonca zopakovať kritériá, ktoré ste predtým zadali do poľa; prevezme sa posledná interpretácia (známka, veľkosť rubriky).

Môžete dokonca kombinovať používanie poľa *Find* s jednotlivými poľami. Čokoľvek zmeníte na jednom mieste, automaticky sa premietne do zmeny na druhom mieste.

Tu sú pravidlá:

- Text** Fragmenty textu sa automaticky interpretujú ako text, ako keď ho zadávate do jednotlivých polí *Text*. Platí tu rovnaké použitie znakov /, + a - (pozri príklady v časti *Nájsť modul*). V uvedenom príklade sa vyhľadáva slovo *menses* v kombinácii s *pred* alebo *počas*.
- Lieky** Skratky liekov musia byť ukončené bodkou. V poli *Remedies* je to nepovinné, ale musíte ho ukončiť bodkou, aby nedošlo k zámene fragmentov textu a skratiek prostriedkov. (Príklad zámene: *sep* môže znamenať buď *sepia* alebo *separácia*). Platí tu rovnaké použitie / a +, pozri príklady v časti *Nájsť modul*. V uvedenom príklade sa vyhľadávanie vykonáva buď na stránke *sepia* alebo *cimicifuga*. Poznámka: aj prostriedky, ktoré samy o sebe nie sú skratkou (napríklad *Apis* alebo *Bufo*), musia byť ukončené bodkou (apis. bufo.).
- Gradácia** Minimálne stupne nápravy 1 až 4 možno určiť zadaním *1, *2, *3 alebo *4. Tento výraz možno čítať ako: Všetky (*) požadované lieky musia mať tento alebo vyšší stupeň. Alternatívne sa čísla 1, 2, 3 a 4 bez * interpretujú aj ako minimálna gradácia nápravy. Takže 4 je to isté ako *4.
- Veľkosť rubriky** Minimálnu a maximálnu veľkosť rubriky možno určiť číslom, pred ktorým sa uvedie > alebo <. <50 znamená 50 alebo menej opravných prostriedkov. >10 znamená 10 alebo viac opravných prostriedkov. Prípadne sa akékoľvek číslo začínajúce číslom 5 a vyšším automaticky interpretuje ako maximálna veľkosť rubriky. Takže 50 je to isté ako <50.

Príklady

Rozšírime uvedený príklad o obmedzenie na rubriky, ktoré obsahujú najviac 50 opravných prostriedkov. Všetky nasledujúce spôsoby zadávania kritérií vedú k rovnakému výsledku:

sep. cimic. menses pred/počas *3 <50
sep. cimic. menses pred/počas 3 50

menses sep. pred / počas 3 <50 cimec.
50 menses+pred/počas sep./cimec. 3
menses pred /počas sep. 2 cimec. 200 50 3

V poslednom príklade vidíte, ako sa pôvodná gradácia 2 neskôr nahradí 3 a maximálna veľkosť rubriky 200 sa zmení na 50. V príklade sa to môže zdať máťúce, ale v skutočnosti je to veľmi efektívne, keď hľadáte a chcete zúžiť výsledky vyhľadávania. Nové kritérium môžete zadať bez toho, aby ste museli predtým zadané kritérium odstrániť; posledné kritérium jednoducho nahradí prvé.

Tip: Nezabudnite, že pri vyhľadávaní textu sa používajú aj špeciálne zápisy =, * a "":

=*dog* nájde *dog*, ale nie *dogmatic*.


**ation* nájde *palpitácie*, ako aj *potenie* a *ovuláciu*.

"*on je*" nájde len *on* a *je*, ak sú presne v tomto poradí.

Nastavenia predvolieb


Niektoré možnosti programu je možné konfigurovať podľa vašich osobných preferencií. Tieto možnosti môžete zmeniť prostredníctvom možnosti ponuky *Preferences*. (Možnosť ponuky *Všeobecné / Predvolby*). Otvorí sa dialógové okno s niekoľkými časťami.

Všeobecné nastavenia

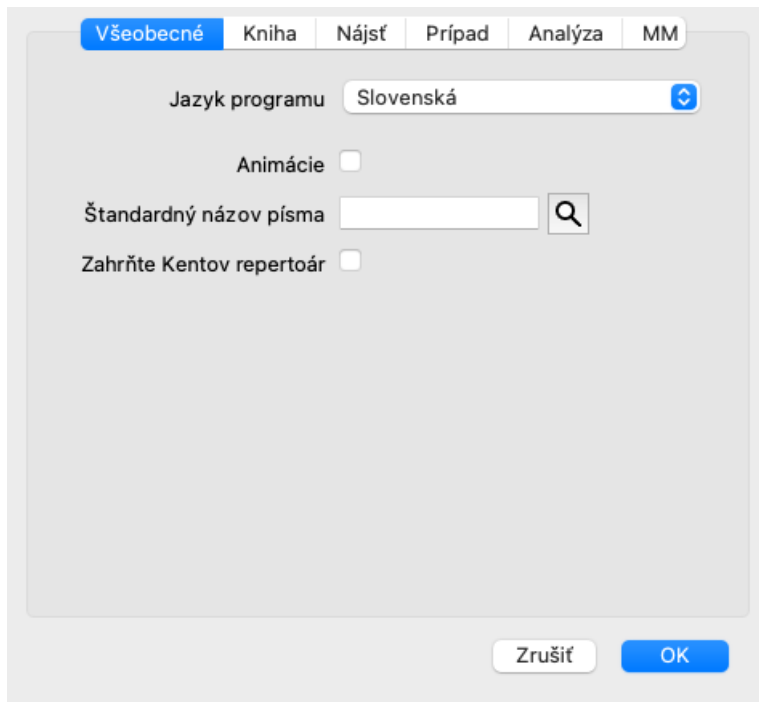


- Jazyk programu* Na výber máte niekoľko jazykových možností. Dostupné jazyky sa môžu líšiť v závislosti od verzie *Complete Dynamics*; jazyky, ktoré nie sú k dispozícii, môžu byť pridané v novšej verzii.
- Animácie* V niektorých častiach aplikácie *Complete Dynamics* sa používajú animácie, napríklad pri otváraní a zatváraní prípadu. Vyzerajú pekne, ale ich dokončenie trvá dlho. Ak tieto animácie nechcete, zrušte začiarknutie tejto možnosti.
- Štandardný názov písma* Tu si môžete vybrať preferované písmo, ktoré bude program používať.
- Zahrňte Kentov repertoár* Túto možnosť zaškrtnite, ak chcete, aby bol repertoár *Kent's Repertory*, 6. vydanie k dispozícii ako samostatný repertoár. Celý obsah *Kent's Repertory* je už zahrnutý v *Complete Repertory*. Niektorí ľudia však dávajú prednosť konzultáciám na *Kent* bez všetkých dodatkov z iných materiálov. Po zaškrtnutí tejto možnosti bude v module *Index* k dispozícii *Kent*.

Nastavenia knihy

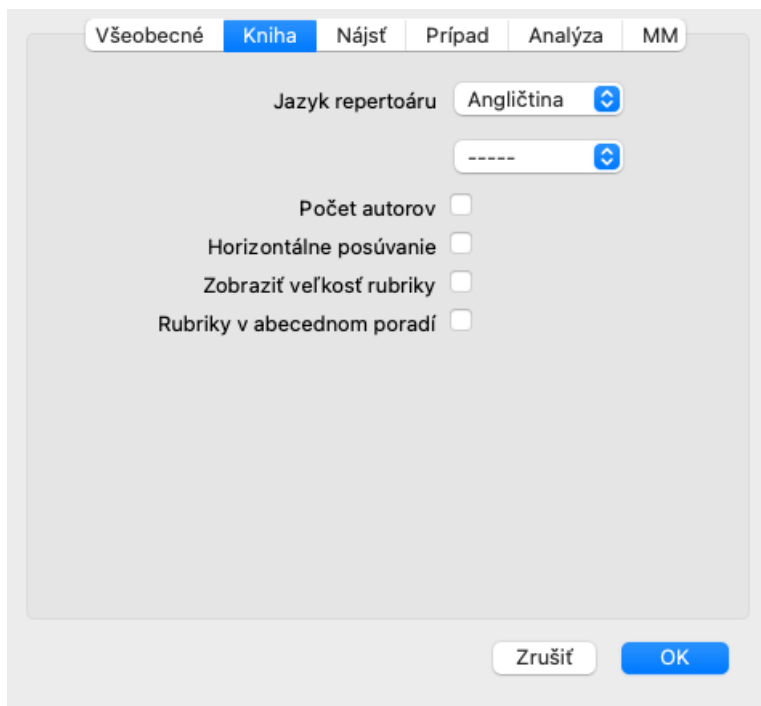

- Jazyk repertoáru* Jazyk, ktorý sa má používať v repertoári. Druhou možnosťou je sekundárny jazyk, ktorý sa zobrazí za textom rubriky. Druhý jazyk je k dispozícii len v prípade, že ste si zakúpili repertoárový preklad.
- Počet autorov* Ak je táto možnosť začiarknutá, okrem mien autorov sa zobrazujú aj čísla autorov v štýle MacRepertory.
- Horizontálne posúvanie* Ak je táto možnosť začiarknutá, je povolená funkcia horizontálneho posúvania. Táto funkcia môže byť k dispozícii len vtedy, ak myš alebo trackpad podporuje horizontálne posúvanie.
- Zobraziť veľkosť rubriky* Ak je začiarknuté, modul Kniha vždy zobrazuje počet opravných prostriedkov pre rubriku. Ak nie je začiarknuté, číslo sa zobrazí len vtedy, keď nie sú viditeľné lieky.
- Rubriky v abecednom poradí* Ak je začiarknuté, modul Kniha vždy zobrazuje rubriky v abecednom poradí. Ak nie je začiarknuté, použije sa štandardné poradie repertoáru, ako ho zaviedol Kent.

Nájsť nastavenia

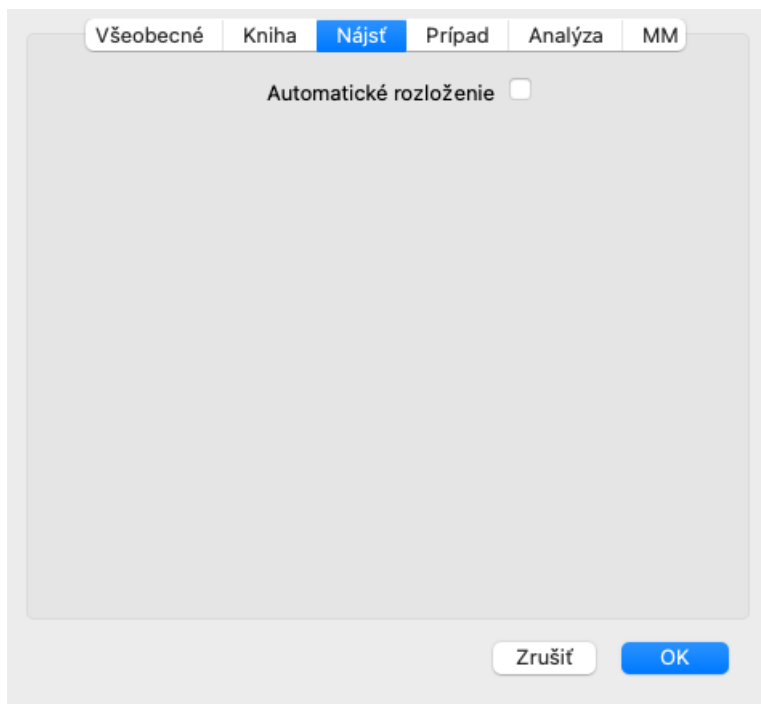

- Automatické rozloženie* Ak je táto možnosť začiarknutá, výsledky vyhľadávania sa automaticky vykreslia do viacerých stĺpcov, ak je na obrazovke dostatok miesta. Ak nie je začiarknuté, všetky rubriky sa vykreslia v jednom stĺpci.

Nastavenia prípadu

Minúty do automatického uzamknutia prípadov

V prípade, že ste nastavili heslo na ochranu informácií o pacientovi, táto možnosť nastavuje počet minút, po ktorých sa modul Prípad automaticky uzamkne. Ak tu zadáte 0, automatické uzamknutie sa nevykoná.

Automatické vymazanie archivovaných prípadov

Vyberte, po akom čase sa majú archivované prípady natrvalo vymazať. Ak vyberiete *Nikdy*, archivované prípady sa automaticky nevymažú.

Používanie cloudového servera

Ukladajte kópie svojich prípadov na cloudový server.

Nastavenia analýzy

Remedy farbenie HFA Ak je táto možnosť začiarknutá, analýza môže farebne opraviť podľa metódy analýzy tváre Granta Bentleyho. V module Analýza sa objaví nové tlačidlo na paneli nástrojov (🔧), pomocou ktorého môžete zapínať a vypínať farbenie.

Použitie tejto možnosti je užitočné len vtedy, ak ste úspešne absolvovali kurz tejto metódy.

Zobrazte len relevantné rubriky

V module Analysis sa vzťah medzi rubrikami a opravnými prostriedkami zobrazuje vo výsledných tabuľkových grafoch.

Symptómy a rubriky s nastavením váhy 0 v skutočnosti neprispievajú k výsledkom analýzy.

Ak je táto možnosť zaškrtnutá, lieky z rubrik, ktoré neprispievajú k výsledkom analýzy, sa z grafu tabuľky výsledkov vynechajú. Takto môžete ľahšie zistiť, ako rubriky prispievajú k výsledku analýzy.

Analytické vzorce

V module Analýza je možné použiť niekoľko analytických vzorcov.

Môžete si vybrať, ktoré z týchto vzorcov sa zobrazia a v akom poradí.

Ak chcete zmeniť poradie zobrazenia analýz, vyberte analýzu kliknutím na jej názov. Potom ho môžete presunúť nahor alebo nadol v zozname pomocou tlačidiel ↑ a ↓.

Ak chcete zahrnúť alebo vylúčiť analýzu, vyberte v a potom kliknite na začiarkavacie políčko *Zobraziť analýzu*.

Nastavenia Materia Medica

Všeobecné Kniha Nájsť Prípad Analýza **MM**

Zobraziť Materia Medica pre nasledujúce jazyky

Angličtina ☒

Portugalčina ☐

Španielčina ☐

Francúzsky ☐

Nemčina ☐

Ruský ☐

Zrušiť OK

Jazyky K dispozícii je niekoľko jazykov Materia Medica.

V predvolenom nastavení sa jazyky zobrazujú podľa nastavenia jazyka počítača a krajiny a podľa možností licencie.

Môžete si vybrať, ktoré jazyky kníh sa zobrazia v module *Materia Medica*.

Jazyky

Complete Repertory preklady

Complete Repertory bola preložená do rôznych jazykov. Pravidelne sa pridávajú nové preklady.

Complete Dynamics sa dodáva s angličtinou ako štandardným jazykom.

K dispozícii sú aj ďalšie jazyky, ktoré vám umožnia prezerať repertoár v inom jazyku alebo v dvoch jazykoch súčasne.

Funkcia *Find* vám tiež umožňuje nájsť rubriky vo vašom rodnom jazyku, ak nepoznáte správne slovo v angličtine!

Ak chcete používať ďalšie jazyky, musíte si zakúpiť licenčný kľúč.

V súčasnosti sú podporované tieto jazyky:

-  *Angličtina* Toto je štandardný jazyk.
-  *Nemčina*
-  *Holandský*
-  *Francúzsky*
-  *Španielčina*
-  *Portugalčina*
-  *Taliansky*
-  *Maďarský*
-  *Rumunský*
-  *Bulharský*
-  *Ruský*
-  *Hindčina*
- *Japonský*

Ak si chcete kúpiť licenčný kľúč, navštívte našu webovú stránku v ponuke *Menu / Pomoc / Kúpiť ďalší jazyk*.


Za ďalší jazyk je potrebné zaplatiť malý poplatok, aby sa prekladateľovi zaplatilo za prácu, ktorú pre vás vykonal.

Nákup homeopatických liekov

Z programu si môžete ľahko objednať homeopatické lieky priamo z online lekárne.

Dostupnosť lekárne sa môže v jednotlivých krajinách líšiť v závislosti od miestnych a medzinárodných predpisov. Táto dostupnosť sa určuje pri spustení programu.

Ak chcete objednať liek, otvorte kontextové menu na názve lieku kdekoľvek v module Kniha alebo Analýza a vyberte možnosť *Kúpiť liek z lekárne*. (Možnosť kontextového menu *Kúpiť liek z lekárne*).

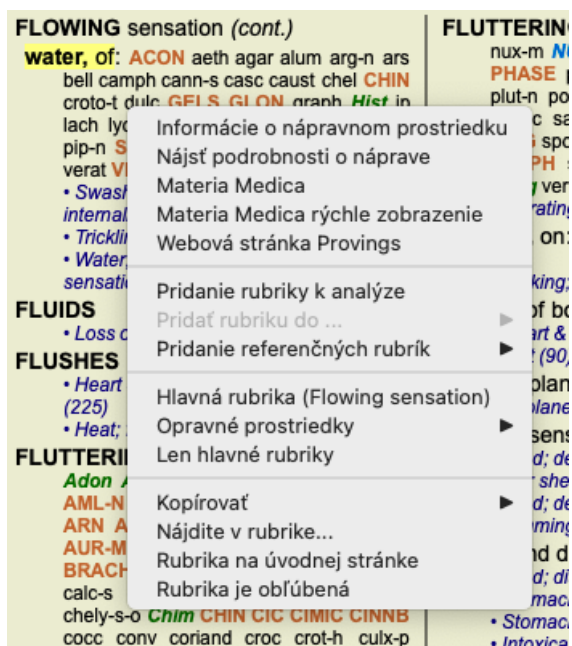

Ak táto možnosť nie je k dispozícii, vo vašej krajine nie je podporovaná žiadna lekárňa.

Po výbere možnosti budete automaticky presmerovaní na online lekárňu, ktorá je pre vás k dispozícii.

Upozorňujeme, že spoločnosť *Complete Dynamics* je nezávislá od lekárne. Naším zákazníkom ponúkame priamy prístup do lekárne ako službu.

Klávesové skratky

Výber modulu

command I Indexový modul
command B Modul knihy
command S Nájst' modul
command D Prípadový modul
command R Analytický modul
command M Modul Materia Medica
command J Prejst' na
command F Nájst'
command Y Zobrazit'/skryt' polia Skok na a Nájst'
F1 Dokumentácia

Modul knihy

→ Prejst' na ďalšiu stránku
← Prejst' na predchádzajúcu stránku
shift → Prejst' na ďalšiu kapitolu
shift ← Prejst' na predchádzajúcu kapitolu
↓ Prejst' na ďalšiu rubriku
↑ Prejst' na predchádzajúcu rubriku
shift ↓ Prejst' na ďalšiu hlavnú rubriku
shift ↑ Prejst' na predchádzajúcu hlavnú rubriku
control ↓ Prejst' na ďalšiu rubriku na rovnakej úrovni
control ↑ Prejst' na predchádzajúcu rubriku na rovnakej úrovni
control ← Skok späť na predchádzajúcu rubriku po nasledovaní odkazu
control → Skok dopredu (opak skoku dozadu)
priestor Zobrazit'/skryt' lieky
1 Všetky stupne nápravy
2 Prostriedky triedy 2-3-4
3 Prostriedky triedy 3-4
4 Lieky triedy 4

Kapitoly repertoáru

shift-command A Brucho
shift-command B Späť
shift-command C Klinické
shift-command E Končatiny
shift-command F Ženy
shift-command G Všeobecné informácie
shift-command H Hlava
shift-command L Hrtan a priedušnica
shift-command M Myseľ
shift-command P Potenie
shift-command R Respirácia
shift-command S Koža
shift-command T Hrdlo
shift-command U Uretra
shift-command V Vertigo
shift-command X Anatomický index

Prípad

control N Nový prípad
control O Otvoriť vybraný prípad
control C Zatvorte prípad a vyberte iný prípad

control E Úprava informácií o vybranom prípade
control A Pridať analýzu
control T Pridanie analýzy pomocou šablóny
control D Duplicitná vybraná analýza
control S Pridať príznak
control R Pridanie rubriky vybraného repertoáru do analýzy
control V Zobrazit' prehľad rubriík v analýze
control X Pridať predpis
command P Tlač

Analýza

command C Kopírovanie vybraných riadkov
command V Vložit' skopírované riadky
shift ↑ Presun vybraných riadkov nahor
shift ↓ Presun vybraných riadkov nadol
1 Nastavenie váhy vybraných riadkov na 1
2 Nastavenie váhy vybraných riadkov na 2
3 Nastavenie váhy vybraných riadkov na 3
4 Nastavenie váhy vybraných riadkov na 4
0 Nezapočítavať vybrané riadky do analýzy
← Skryť rubriky pre symptóm (zavrieť)
→ Zobrazit' rubriky pre symptóm (otvorené)
command 1 1
command 2 2
Etcetera...

Materia Medica

→ Prejsť na ďalšiu stránku
← Prejsť na predchádzajúcu stránku
shift → Prejsť na ďalšiu kapitolu
shift ← Prejsť na predchádzajúcu kapitolu

Spätná väzba

Potrebuje vásu pomoc a vážime si vašu spätnú väzbu!

Tvorcovia *Complete Dynamics* sa zaviazali, že vám prinesú najlepšiu možnú kvalitu a použiteľnosť v kombinácii s miernymi cenami komerčných verzií.

Pokiaľ ide o kvalitu, pri vývoji softvéru uplatňujeme prístup nulovej tolerancie chýb. Chyby programu sú pre nás jednoducho neprijateľné a v prípade ich zistenia sa budú riešiť s najvyššou možnou prioritou.

Použiteľnosť je zložitejšia otázka, pretože použiteľnosť je veľmi osobná záležitosť. My a naša špecializovaná skupina profesionálnych hodnotiteľov neustále hľadáme najlepšiu možnú použiteľnosť a vždy vyhodnocujeme vašu spätnú väzbu.

S vašou pomocou môžeme *Complete Dynamics* neustále zlepšovať.

Ako poskytnúť spätnú väzbu

Ak je váš počítač pripojený na internet, je poskytovanie spätnej väzby jednoduché.

Stačí otvoriť ponuku a vybrať možnosti *Všeobecná spätná väzba* alebo *Nahlásiť problém*. (Možnosť ponuky *Pomoc / Všeobecná spätná väzba*, možnosť ponuky *Pomoc / Nahlásiť problém*).

Ak váš "homeopatický počítač" nemá priamy prístup na internet, pošlite e-mail na adresu support@completedynamics.com