

Complete Dynamics

Izdaja za praktike

za iPhone

Različica 24.12

O tem priročniku

Je to pravi priročnik za vas?

Dokumentacija *Complete Dynamics* je na voljo v številnih različicah.

Za različne konfiguracije programov imamo različne priročnike.

- Izdaja programa: V tem primeru se lahko odločite za program: Browser, Practitioner ali Master.
- Vrsta računalnika: Apple OS-X, Windows, iPhone, iPad, Android.
- Različni mednarodni jeziki.

Pravi priročnik je natančno prilagojen vašim razmeram.

Če menite, da ne berete popolnega priročnika, obiščite naše spletno mesto www.completedynamics.com, razdelek *Dokumentacija*, in tam prenesite svoj priročnik.

Prevodi

Ko izdamo novo različico programa *Complete Dynamics*, poskrbimo, da je angleški priročnik posodobljen.

Prevodi spremenjenih besedil lahko zahtevajo nekaj več časa.

Deli priročnika, ki še niso prevedeni, prikazujejo izvirno angleško besedilo, natisnjeno kot to besedilo.

Dobrodošli

Dobrodošli v *Complete Dynamics* - Practitioner Edition.

Programska oprema *Complete Dynamics* vam ponuja vrhunsko izkušnjo računalniškega branja in preučevanja *Complete Repertory*. Med homeopatskimi strokovnjaki je spletna stran *Complete Repertory* znana po vsem svetu zaradi svoje popolnosti, natančnosti in obsega izvirnih virov.

Programska oprema je na voljo za Apple macOS®, Microsoft Windows®, Linux®, Apple iOS®, Android®.

Z izdajo *Practitioner Edition* boste lahko:

- Preberite in preučite celotno spletno stran *Complete Repertory* v več jezikih.
- Upravljajte dokumentacijo bolnikov.
- Izvajanje analiz.
- Preberite knjige *Materia Medica*.

Te strani so namenjene temu, da se lažje znajdete v programu.

Predlagamo, da začnete z razdelkom *Začetek*, ki vam bo omogočil pregled možnosti.

Iskreno upamo, da bo *Complete Dynamics* obogatil vaše homeopatsko življenje, ne glede na to, ali ste profesionalni zdravnik, študent, učitelj ali raziskovalec.

Ekipa razvijalcev programa *Complete Dynamics*.

Začetek


Intuitivna zasnova

Complete Dynamics je zasnovan tako, da ga lahko intuitivno uporabljajo tudi tisti, ki imajo strokovno znanje o homeopatiji. Nekatere funkcije programa lahko uporabite veliko učinkoviteje, če se naučite nekaj trikov.

Popup meniji

V številnih primerih pojavni meniji omogočajo hiter dostop do funkcij. Dotaknite se zaslona in ga pridržite 1 sekundo. Prikaže se meni, če je na voljo za element, na katerega ste kliknili.

Primer:

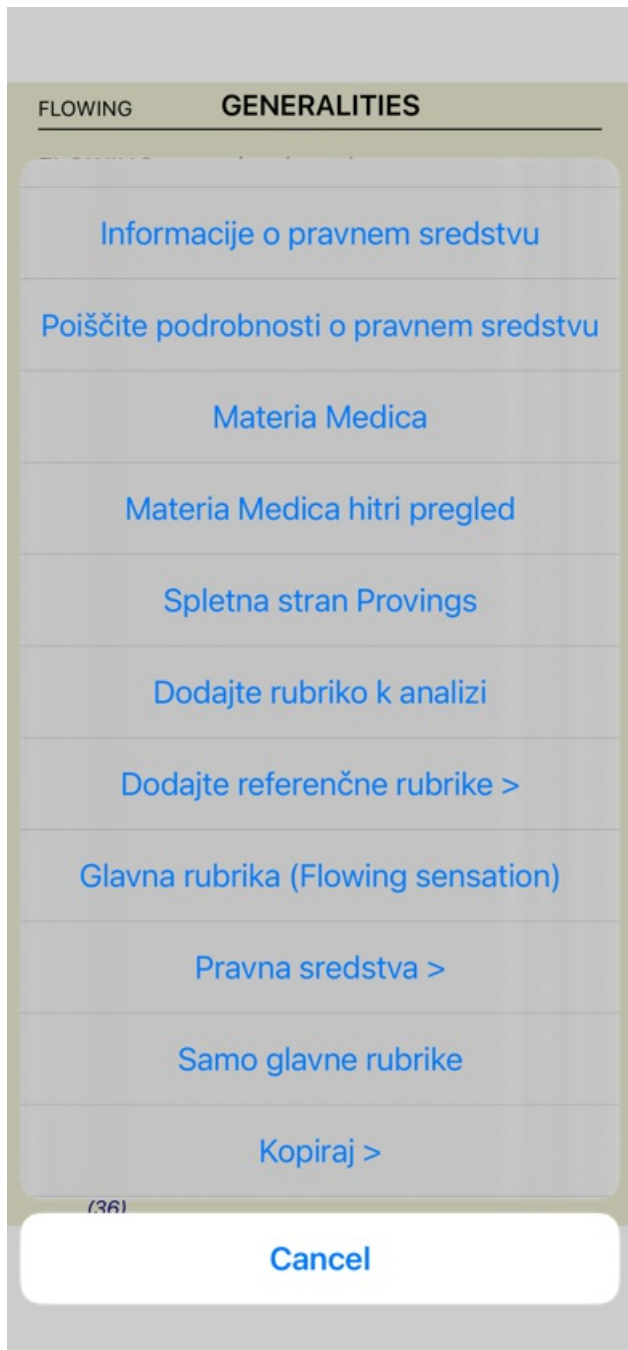

Večkratni izbor

V številnih primerih boste morda želeli opraviti določeno opravilo za več elementov hkrati, ne le za en element, ki ste ga izbrali. V teh primerih lahko najprej izberete več elementov, nato pa opravite opravilo za vse izbrane elemente.

Kako izbrati več elementov

Spodnja primera prikazujeta večkratni izbor rubrik v modulu *Analysis*. Na drugih mestih so načela enaka.

Če želite izbrati posamezno vrstico, jo kliknite z miško:

16 Mind; Activity; night
1 Mind; Activity; midnight, until
9 Mind; Activity; sleeplessness, with
83 Mind; Activity; hyperactive
488 Mind; Cheerfulness
25 Mind; Noises; aversion to
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
1 Mind; Theorizing; evening
2 Mind; Theorizing; night

Izbor posamezne vrstice lahko spremenite tudi tako, da kliknete levo od besedila. (V modulih *Book* in *Find* lahko kliknete levo od oznake rubrike)

16 Mind; Activity; night
1 Mind; Activity; midnight, until
9 Mind; Activity; sleeplessness, with
83 Mind; Activity; hyperactive
488 Mind; Cheerfulness
25 Mind; Noises; aversion to
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
1 Mind; Theorizing; evening
2 Mind; Theorizing; night

16 Mind; Activity; night
1 Mind; Activity; midnight, until
9 Mind; Activity; sleeplessness, with
83 Mind; Activity; hyperactive
488 Mind; Cheerfulness
25 Mind; Noises; aversion to
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
1 Mind; Theorizing; evening
2 Mind; Theorizing; night

Dejavnosti, ki delujejo na več izbranih elementov

Knjižni modul

V modulu *Book* lahko izberete več rubrik. Nekatere funkcije delujejo na več rubrikah, druge le na eni rubriki.

To so funkcije, ki delujejo na več rubrikah:

- Analizi dodajte rubrike. (Možnost priročnega menija *Dodajte rubriko k analizi*).
- Dodajte rubrike k določenemu simptomu v analizi. (Možnost priročnega menija *Dodajte rubriko v ... / Nov simptom...*).
- Kopirajte oznake rubrik v odložišče. (Možnost priročnega menija *Kopiraj / Kopiraj rubrično nalepko*).
- Kopirajte oznake rubrik z njihovimi pravnimi sredstvi v odložišče. (Možnost priročnega menija *Kopiraj / Kopiranje rubrike in pravnih sredstev*).

Vse druge funkcije delujejo na podlagi ene same rubrike. Če ste izbrali več rubrik, je uporabljena tista, na katero ste kliknili nazadnje.

Poiščite modul

V modulu *Najdi* so funkcije na več rubrikah enake kot v modulu *Knjiga*.

Modul primera

V modulu *Case* so te funkcije, ki delujejo z večkratnim izborom:

- Brisanje več analiz. (Možnost priročnega menija *Izbriši analizo*).
- Premaknite več analiz v drugo zadevo. (Možnost priročnega menija *Premaknite analizo na primer...*).
- Brisanje več receptov. (Možnost priročnega menija *Izbriši recept*).

Analizni modul

V modulu *Analysis* so te funkcije, ki delujejo z večkratnim izborom:

- Brisanje več rubrik ali simptomov. (Možnost priročnega menija *Izbriši izbrano*).
- Pripisite utežni faktor. (Možnost priročnega menija *Teža / Teža x2*). Itd.
- Pripisite klasifikacijski razred simptoma. (Možnost priročnega menija *Razvrstitev simptomov / Psora*). Itd.
- Vse funkcije razvrščanja v skupine.
- Funkcije za kopiranje etiket rubrik z ali brez pravnih sredstev.
- Kopiranje izbranih rubrik, da jih lahko prilepite v drugo analizo. (Možnost priročnega menija *Več / Kopiranje izbranih vrstic*, možnost priročnega menija *Več / Prilepi kopirane vrstice*).

- Premikanje izbranih rubrik navzgor ali navzdol v drug simptom. (Možnost priročnega menija *Več / Premaknite se navzgor*, možnost priročnega menija *Več / Premaknite se navzdol*).
- Če izberete več rubrik, so v območju rezultatov analize izpostavljena pravna sredstva teh rubrik.
- Če na področju rezultatov analize izberete več pravnih sredstev, so izpostavljene rubrike, v katerih se ta sredstva pojavljajo.

Modul MM

V razdelku *Repertorij* modula *MM* so funkcije na več rubrikah enake kot v modulu *Knjiga*.

Kazalo zavihkov

Glavni moduli programa *Complete Dynamics* so dostopni prek tako imenovanih kazalčnih zavihkov.

V izdaji *Practitioner* so to *Index*, *Book*, *Find*, *Case*, *Analysis* in *Materia Medica*.

Nastavitve Uporabnik in licenca O Pomoč

Mind	Fever, heat
Vertigo	Perspiration
Head	Skin
Eyes	Generalities
Vision	Boger's general analysis
Ears	Clinical
Hearing	Mirilli's themes
Nose	Psychological themes
Smell	Rx & Associations
Face	Anatomical index
Mouth	Remedies
Taste	Kingdoms & families
Teeth	
Throat	
Neck	
Stomach	
Abdomen	
Rectum	
Stool	
Bladder	
Kidneys	
Urethra	
Urine	
Male	
Female	
Larynx & trachea	
Speech & voice	
Respiration	
Cough	
Expectoration	
Chest	
Heart & circulation	
Blood	
Back	
Extremities	
Sleep	
Dreams	
Chill	



Indeks

Knjiga

Poišči

Primer

MM

Modul *Index* omogoča hiter dostop do poglavij v knjigi z besedilno in grafično predstavitevijo. Za podrobnosti glejte razdelek pomoči *Indeksni modul*.

Modul *Book* prikazuje repertoar. Lahko ga berete kot tiskano knjigo, vendar si ga lahko ogledate tudi v bolj zgoščeni obliki. Za podrobnosti glejte razdelek pomoči *Modul knjiga*.

Modul *Find* ponuja zmogljivo funkcionalnost za iskanje rubrik in pravnih sredstev v knjigi. Za podrobnosti glejte razdelek pomoči *Poiščite modul*.

Modul *Case* vam omogoča ustvarjanje in urejanje kartotek bolnikov. Za podrobnosti glejte razdelek pomoči *Modul za primere*.

Modul *Analysis* se uporablja za analizo vaših primerov. Za podrobnosti glejte razdelek pomoči *Modul za analizo*.

Modul *Materia Medica* vsebuje informacije o zdravilih. Za podrobnosti glejte razdelek pomoči *Modul Materia Medica*.

V telefonu iPhone je lahko prikazanih največ 5 zavihkov.
Zavihek *Analysis* se prikaže takoj, ko odprete datoteko primera.
Nato bomo začasno skrili zavihek *Indeks*.

različica za iOS

Uporaba sistema iOS

Apple iPhone® nima miške in tipkovnice, kot ju uporabljate na osebnem računalniku. Poleg tega iPhone nima menijske vrstice, kot jo imajo aplikacije v računalniku.

Namesto tega se pojavni meniji uporabljajo za ponujanje funkcij, ki so sicer na voljo prek tipk na tipkovnici in menijske vrstice.

Zaslon na dotik v iPhoneu ponuja več možnosti, ki niso na voljo v osebnem računalniku in se imenujejo geste.

Primeri teh gest, ki se uporabljajo v programu *Complete Dynamics*, so:

- Podrsajte. Postavite prst na zaslon in ga podrsajte levo, desno, navzgor ali navzdol. Pogosto se uporablja za obračanje strani v knjigi. Uporablja se tudi za pomikanje vsebine, ki je prevelika, da bi se prilegala zaslonu.
- Ščepec. Postavite dva prsta na zaslon in ju premikajte drug proti drugemu ali drug od drugega. Uporablja se v modulu *Knjiga* za zmanjšanje ali povečanje besedila.

Skupna raba datotek med iPhoneom in računalnikom deluje nekoliko drugače kot med dvema računalnikoma, saj je za kopiranje datotek v iPhone in iz njega potrebna uporaba programa iTunes v računalniku. Posebno poglavje o tem najdete pod naslovom *Modul Primeri, souporaba primerov*.

Usmeritev naprave

IPad lahko držite v dveh različnih položajih, in sicer v ležeči in pokončni orientaciji. Aplikacija *Complete Dynamics* samodejno prilagodi način prikazovanja informacij glede na to, kako držite iPhone.

Vse slike v tem priročniku so narejene z iPhoneom v pokončni orientaciji. To je bilo storjeno preprosto zato, ker tako običajno držite telefon.

Na vas je, da ugotovite, kako je vse videti, ko spremenite položaj, in se sami odločite, kaj vam najbolj ustreza.

Hitrost in pomnilnik

IPad ni velik računalnik kot pravi osebni računalnik s skoraj neomejeno hitrostjo in pomnilnikom.

Ker je *Complete Dynamics* zelo zapleten in obsežen program, so v različici za iPhone določene omejitve. Če te omejitve razumete, za vas ne bi smele predstavljati težav.

Complete Repertory vsebuje skoraj 250.000 rubrik, ki hranijo 2.500.000 vnosov pravnih sredstev!

Za iskanje določenih informacij v modulu *Find* je treba vse te informacije primerjati. Da bi bilo to učinkovitejše, poskuša program čim več informacij shraniti v pomnilniku. Če informacij ni v pomnilniku, jih je treba prebrati iz zbirke podatkov.

Pri prvem iskanju boste morda opazili, da je iskanje razmeroma počasno. Vendar je naslednje iskanje precej hitrejšo, pogosto le nekaj sekund (odvisno od zahtevnosti poizvedbe), saj so rubrike in sredstva že v pomnilniku.

Več kot 1 program

V iPhoneu običajno uporabljate več kot en program. Vsi ti programi morajo delovati z omejenim pomnilnikom iPhonea.

Ko je pomnilnika premalo za vse programe, iPhone od njih zahteva, da sprostijo pomnilnik. Ko se to zgodi, program *Complete Dynamics* sprostí čim več pomnilnika. Posledično lahko naslednje iskanje ponovno traja dlje časa.

Medtem ko delate z enim programom, drugi programi ne delajo ničesar. V tem času, ko je pomnilnik premajhen, iPhone brez opozorila preprosto zaključi druge programe. To ni tako, kot je to narejeno v osebnih računalnikih, vendar je bila programska oprema za iPhone zasnovana na takšen način.

Pri zaključevanju programa iPhone raje zaključi večje programe. V večini primerov je to *Complete Dynamics*, saj ne gre le za program za male igre.

To pomeni, da se lahko program *Complete Dynamics* med delom z drugim programom tiho zaključi in se mora ob naslednji izbiri začeti znova.

Da bi preprečili nepričakovano izgubo pomnilnika, program *Complete Dynamics* sprostí čim več pomnilnika, ko preklopíte na drugo aplikacijo.

Ko preklopíte nazaj, bo znova prebral podatke, ki jih je prej sprostil.

To je najboljše vidno v modulu *Find* in modulu *Reverse Materia Medica*. Ti moduli so veliko hitrejši, če so vsa besedila in zdravila že v pomnilniku.

Stanje pomnilnika je prikazano v orodni vrstici:



Vsa imena rubrik in sredstva so v spominu. Iskanje bo zdaj hitro. V telefonu ta smeškost ni prikazana, da se ohrani prostor na zaslonu.



Nekatere bistvene informacije še niso prebrane. Iskanje bo moralo nekaj trenutkov počakati.



Imena rubrik so v spominu, sredstva pa ne. Iskanje besedila bo hitro. Iskanje pravnih sredstev je lahko počasno.



Imena rubrik še niso prebrana. Iskanje je lahko počasno.



IPad je prisiljen sprostiti pomnilnik. Iskanje je lahko počasno.
Branje informacij se je ustavilo, kliknite gumb za ponovni začetek branja.

Sprostitev pomnilnika lahko omogočite in onemogočite z nastavitvijo Nastavitve.

Shranjevanje podatkov

Ker lahko iPhone program kadar koli tiho ugasne, poskuša v ustreznih trenutkih shraniti podatke o vašem primeru. Podatki o vašem primeru se samodejno shranijo, ko:

- nekaj sekund ne storite ničesar;
- preklopite na drugo aplikacijo;
- odprt primer je zaključen.

Nasveti za optimalno delovanje

Program *Complete Dynamics* bo najbolje deloval, če boste:

- ne preklaplajte na druge programe, razen kadar jih potrebujete;
- zaprite vse aplikacije, ki jih ne uporabljate zares.

Indeksni modul

Odpiranje modula Indeks

Pojdite v modul Indeks s klikom na zavihek *Indeks*.

Nastavitve Uporabnik in licenca O Pomoč

Mind	Fever, heat
Vertigo	Perspiration
Head	Skin
Eyes	Generalities
Vision	Boger's general analysis
Ears	Clinical
Hearing	Mirilli's themes
Nose	Psychological themes
Smell	Rx & Associations
Face	Anatomical index
Mouth	Remedies
Taste	Kingdoms & families
Teeth	
Throat	
Neck	
Stomach	
Abdomen	
Rectum	
Stool	
Bladder	
Kidneys	
Urethra	
Urine	
Male	
Female	
Larynx & trachea	
Speech & voice	
Respiration	
Cough	
Expectoration	
Chest	
Heart & circulation	
Blood	
Back	
Extremities	
Sleep	
Dreams	
Chill	



Indeks

Knjiga

Poišči

Primer

MM

Uporaba modula Indeks

Modul kazalo omogoča hiter dostop do vsebine repertoarja.

Če želite izvesti dejanje, kliknite na element.

Uporaba več repertoarjev

Če imate licenco za dodatne repertoarje, bo v kazalu poglavij repertoarja prikazano tudi ime repertoarja.

Complete Repertory (...)

Ko kliknete na ime repertoarja, se izbere naslednji repertoar in prikaže njegova poglavja. Na voljo je tudi pojavni meni, v katerem lahko izberete enega od razpoložljivih repertoarjev.

Knjižni modul

Odpiranje modula Knjiga

Pojdite v modul Knjiga tako, da kliknete zavihek *Knjiga*.

V naslednjem primeru je knjiga odprta pri rubriki *Um; tesnoba; vročinski oblivi, s.*

ANXIETY

MIND

ANXIETY (cont.)

flushes of heat, with: aesc agar aloe **Ambr** aml-n
Anac androc ang arn ars **Asaf Bar-c Bry CALC** camph
CARB-V CHAM Chin-ar Cimic coff cop croc cupr
cygn-c **DROS** electr glyc-g **Gran** graph **Hep** ign **Ip**
kali-bi lipp lsd **Merc** nat-c op phos **PLAT PULS Ruta**
SEP SPONG sul-i
• Congestion, with (32)
• Anxiety; heat; during; face, of (11)
• Generalities; heat; flushes of (597)
emphysema, in: **CARB-V**
• Chest; emphysema (158)
food, warm, hot, agg.: mag-c
• Anxiety; warmth; agg. (9)
• Warmth; agg. (43)
foot bath, after
• Bathing, washing feet, after (2)
• Bathing, washing; agg.; feet (6)
formication, crawling, with: acon bar-m **CIST** lat-h
Nat-m schis-g verat
• Anxiety (1100)
fingers, of: acon verat
• Extremities; formication, crawling; fingers (89)
fright, fear
after: **Acon** bell both-a **CUPR** gels hir **IGN KALI-BR** lach
lyc merc nat-m op **PLUT-N** rob sac-l samb **SIL VERAT**
• Mirilli's themes; fearful (830)
• pregnancy, in seventh month of: **IGN**
• Anxiety; pregnancy, in (6)
• Pregnancy, in (90)
fear of fright still remaining
• Fright, fear agg., ailments from; fear of fright still
remaining (24)
fullness in abdomen, with: **ARG-N**
• Abdominal complaints, in (108)
• Abdomen; anxiety; with (93)
green stripes, on seeing: **THUJ**
headache, with: **ACON AETH Alum** ambr ant-c ant-t
Argo ARN ARS ars-s-f **Atist** bell benz-ac bov **But-ac**

Indeks

Knjiga

Poišči

Primer

MM

Pravna sredstva in reference

V rubriki je prikazano njeno besedilo, sledijo pa ji sredstva in sklici.

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON acon-f agath-a agki-p *Alco* aloe **AM-C** am-m **ANAC ANDROC** aran-ix arn ars ars-s-f *Astac* atro **AUR** aur-m-n aur-s **BELL** beryl-n *Biti-a* bor bov bufo *Bung-f* bute-j calc-i **CAMPH** canth carc **CAUST** cere-s *CHAM* chin cic **CON** cor-r coriand **CROC** cub culx cupr-ar der *Dulc* elae falco-p **FERR** fic **GALL-AC** gels gink granit-m *Hafn* harp helx-t hema-h **HEP** hist hydr hydr-ac **HYOS** ign iod *Ip* **KALI-AR** kali-c **KALI-I** **LAC-C** lac-d lach lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r *LYC* **LYSS** m-aust mag-c mangi med **MERC MOSCH** nat-c nat-m *Nit-ac* **NUX-V** ozon **PALL PETR** **PHYSALA-P** **PLAT** plb *Raja-s* ran-b rhus-g sac-l *Sanic Sarr* **SCORP** **SENEG** **SEP** *Sil* spong *Staph* **STRAM** stront-c **SULPH** syph **TARENT** thlaspi **THUJ** thul-f trich-d *Tritic-v* **TUB** **URAN** **VERAT** verbe-h viol-t vip *Xeno*

• *General* (1769)

• *Answer, answering, answers; offensive* (1)

• *Contemptuous* (119)

• *Cursing, swearing, desires* (141)

• *Insolence, impertinence* (51)

• *Nipping at everyone* (1)

• *Quarrelsomeness, scolding* (284)

• *Rudeness* (92)

• *Mirilli's themes; offensive* (458)

• *Psychological themes; aggression* (975)

forenoon: ran-b

• *Forenoon* (118)

evening: am-c am-m

• *Evening; agg.* (436)

acts, after indecent: bung-f

angry, without being: *Bell* *dulc*

crying, with: **STRAM**

drunkards, in: hep nux-v **PETR**

• *Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from* (63)

fever, during

• *Fever; during* (327)

intermittent: **FERR**

• *Fever; during* (327)

• *Fever, heat; intermittent, malarial* (360)

Sredstva so lahko prikazana v 4 stopnjah.

Stopnje so razlikovane tako, da so prikazane v različnih slogih in barvah.

V tem primeru so to:

- 4: *CHAM, LYC, NUX-V.*

- 3: **ABIES-N, ACON, AM-C, ANAC, ANDROC, AUR ...**

- 2: *Alco, Bung-f, Dulc, Ip, Nit-ac, Sarr, Sil, Staph.*

- 1: acon-f, agath-a, agki-p, aloe, am-m ...

Seznamu pravnih sredstev sledijo sklici na druge rubrike. V tem primeru je 10 referenc.

S klikom na referenco preidete na rubriko, na katero se sklicuje.

Polni ali kompaktni pogled

Skrivanje pravnih sredstev in referenc

V kompaktnem pogledu so prikazane samo rubrike s številom pravnih sredstev, ki jih vsebujejo, pri čemer se pravna sredstva skrijejo, da se optimalno izkoristi razpoložljivi prostor na zaslonu.

Če želite skriti ali prikazati vsa pravna sredstva in sklice, dvakrat kliknite na katero koli belo mesto na strani. Dvakrat lahko kliknete tudi na oznako rubrike.

ANXIETY (cont.)**flushes of heat, with:** (45)

emphysema, in: (1)

food, warm, hot, agg.: (1)**foot bath, after****formication, crawling, with:** (7)

fingers, of: (2)

fright, fear

after: (19)

• pregnancy, in seventh month of: (1)

fear of fright still remaining

fullness in abdomen, with: (1)**green stripes, on seeing:** (1)**headache, with:** (72)

agg., lying down: (1)

gastric: (1)

menses, before: (1)

heart complaints, in: (261)**heat**

before: (4)

during: (92)

• abdomen, in: (3)

• chest, in

• face, of: (11)

•• during and after: (1)

• flushes of

• hands, of

• head, of

• soup, after: (1)

• sudden: (1)

heaviness, with: (11)

abdomen, in

[Indeks](#)[Knjiga](#)[Poišči](#)[Primer](#)[MM](#)**Skrivanje podrubrik**

Možno je tudi skriti vse podrubrike in tako prikazati samo rubrike najvišje ravni repertoarja. (Možnost priročnega menija *Samo glavne rubrike*).

Ta možnost je zelo uporabna za tiste, ki se želijo naučiti strukture repertoarja.

ANXIETY	MIND
ANXIETY: (1100) APOLOGIZES frequently: (2) APOPLEXY , after: (43) APPETITE , with diminished: (40) APPLICATIONS APPRECIATION , desires: (109) APPROACH of a person agg.: (89) APPROACHED , aversion of being: (38) ARDENT: (15) ARTISTIC ASCENDING agg.: (11) ASCETIC: (1) ASKING for nothing, requesting no favors: (1) ASKS ASTONISHED: (7) ATTACHED , very: (89) ATTACK others, desire to: (23) ATTENDED to, desires to be: (9) ATTENTION ATTRACTION , luring sexual, women: (2) AUDACITY: (92) AUTHORITY , refusal to accept some one's: (52) AUTISM , mutinism: (38) AUTOMATIC behavior, acts: (28) AVARICE: (54) AVERSION AWARENESS heightened AWKWARDNESS: (150) BARGAINING: (5) BARKING: (17) BATHING , washing BED	



Indeks

Knjiga

Poišči

Primer

MM

Enostavno se lahko vnete na prikaz vseh rubrik. (Možnost priročnega menija *Samo glavne rubrike*).
 S klikom na rubriko lahko preklopite nazaj na običajni pogled repertoarja.

Vrstni red razvrščanja pravnih sredstev

Privzeto je abecedni vrstni red tiskanja pravnih sredstev.

Pravna sredstva lahko prikažete po vrstnem redu pomembnosti. (Možnost priročnega menija *Pravna sredstva / Razvrsti po pomembnosti*).

Abecedni vrstni red razvrščanja

Razvrščeno po pomembnosti

ABUSIVE, insulting: **ABIES-N** **ACON** acon-f agath-a agki-p **Alco** aloe **AM-C** am-m **ANAC ANDROC** aran-ix arn ars ars-s-f **Astac** atro **AUR** aur-m-n aur-s **BELL** beryl-n **Biti-a** bor bov bufo **Bung-f** bute-j calc-i **CAMPH** canth carc **CAUST** cere-s **CHAM** chin cic **CON** cor-r coriand **CROC** cub culx cupr-ar der **Dulc** elae falco-p **FERR** fic **GALL-AC** gels gink granit-m **Hafn** harp helx-t hema-h **HEP** hist hydr hydr-ac **HYOS** ign iod **Ip** **KALI-AR** kali-c **KALI-I** **LAC-C** lac-d lach lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r **LYC** **LYSS** m-aust mag-c mangi med **MERC MOSCH** nat-c nat-m **Nit-ac** **NUX-V** ozon **PALL** **PETR** **PHYSALA-P** **PLAT** plb **Raja-s** ran-b rhus-g sac-l **Sanic Sarr** **SCORP** **SENEG** **SEP** **Sil** spong **Staph** **STRAM** stront-c **SULPH** syph **TARENT** **TUB** **Nit-ac** thlaspi **THUJ** thul-f trich-d **Tritic-v** **TUB** **URAN** **VERAT**

verbe-h viol-t vip **Xeno**

- General (1769)
- Answer, answering, answers; offensive (1)
- Contemptuous (119)
- Cursing, swearing, desires (141)
- Insolence, impertinence (51)
- Nipping at everyone (1)
- Quarrelsomeness, scolding (284)
- Rudeness (92)
- Mirilli's themes; offensive (458)
- Psychological themes; aggression (975)

forenoon: ran-b

- Forenoon (118)

evening: am-c am-m

- Evening; agg. (436)

acts, after indecent: bung-f

angry, without being: **Bell** dulc

crying, with: **STRAM**

drunkards, in: hep nux-v **PETR**

- Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (63)

fever, during

- Fever; during (327)

intermittent: **FERR**

- Fever; during (327)
- Fever, heat; intermittent, malarial (360)

ABUSIVE, insulting: **NUX-V** **VERAT** **CHAM** **LYC**

MOSCH **THUJ** **CON** **HYOS** **CAMPH** **GALL-AC** **MERC** **SCORP** **CROC** **KALI-I** **PLAT** **STRAM** **URAN** **AUR** **LYSS** **PETR** **AM-C** **HEP** **BELL** **ABIES-N** **ANAC** **ANDROC** **CAUST** **IGN** **KALI-AR** **PALL** **SULPH** **ACON** **FERR** **LAC-C** **PHYSALA-P** **SENEG** **SEP** **TARENT** **TUB** **Nit-ac** **Ip** **Bung-f** **Dulc** **Astac** **Sanic** **Alco** **Sarr** **Sil** **Staph** **Biti-a** **Hafn** **Raja-s** **Tritic-v** **Xeno** am-m lava-e cor-r lach hydr agath-a aur-m-n bov calc-i carc falco-p gels helx-t nat-c nat-m ran-b acon-f agki-p aloe aran-ix arn ars ars-s-f atro aur-s beryl-n bor bufo bute-j canth cere-s chin cic coriand cub culx cupr-ar der elae fic gink granit-m harp hema-h hist hydr-ac iod kali-c lac-d lava-f lava-h lil-t loxo-r m-aust mag-c mangi med ozon plb rhus-g sac-l spong stront-c syph thlaspi thul-f trich-d verbe-h viol-t vip

- General (1769)
- Answer, answering, answers; offensive (1)
- Contemptuous (119)
- Cursing, swearing, desires (141)
- Insolence, impertinence (51)
- Nipping at everyone (1)
- Quarrelsomeness, scolding (284)
- Rudeness (92)
- Mirilli's themes; offensive (458)
- Psychological themes; aggression (975)

forenoon: ran-b

- Forenoon (118)

evening: am-c am-m

- Evening; agg. (436)

acts, after indecent: bung-f

angry, without being: **Bell** dulc

crying, with: **STRAM**

drunkards, in: **PETR** hep nux-v

- Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (63)

fever, during

- Fever; during (327)

intermittent: **FERR**

- Fever; during (327)
- Fever, heat; intermittent, malarial (360)

Omejitev prikazanih informacij

Poleg preklapljanja med polnim in kompaktnim prikazom je mogoče omejiti število prikazanih pravnih sredstev.

To bo omejilo prikazana zdravila na tista, ki imajo vsaj določeno gradacijo 1, 2, 3 ali 4. (Možnost priročnega menija *Pravna sredstva / Vsi razredi*, možnost priročnega menija *Pravna sredstva / Razred 2+*, možnost priročnega menija *Pravna sredstva / Razred 3+*, možnost priročnega menija *Pravna sredstva / Razred 4*).

Primer, spet z rubriko *Mind; Abusive*:

ABUSIVE	MIND
ABUSIVE, insulting: <i>CHAM LYC NUX-V VERAT</i> (+120)	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>General</i> (538) • <i>Answer, answering, answers; offensive</i> • <i>Contemptuous</i> (5) • <i>Cursing, swearing, desires</i> (7) • <i>Insolence, impertinence</i> (3) • <i>Nipping at everyone</i> • <i>Quarrelsomeness, scolding</i> (21) • <i>Rudeness</i> (4) • <i>Mirilli's themes; offensive</i> (46) • <i>Psychological themes; aggression</i> (115) 	
forenoon: (+1)	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Forenoon</i> (2) 	
evening: (+2)	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Evening; agg.</i> (68) 	
acts, after indecent: (+1)	
angry, without being: (+2)	
crying, with: (+1)	
drunkards, in: (+3)	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from</i> (9) 	
fever, during	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Fever; during</i> (69) 	
intermittent: (+1)	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Fever; during</i> (69) • <i>Fever, heat; intermittent, malarial</i> (59) 	
typhoid: (+1)	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Fever, heat; continued, typhoid</i> (51) 	
irritability, with: (+3)	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Irritability</i> (155) 	
jealousy, out of: (+3)	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Jealousy</i> (7) 	
menses, before: (+2)	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Menses; before</i> (20) 	
molestation, after: (+1)	
mamma molested: (+1)	
opposition, from: (+3)	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Mirilli's themes; offensive</i> (46) 	

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON AM-C ANAC
 ANDROC AUR BELL CAMPH CAUST **CHAM** CON
 CROC FERR GALL-AC HEP HYOS IGN KALI-AR
 KALI-I LAC-C **LYC** LYSS MERC MOSCH **NUX-V** PALL
 PETR PHYSALA-P PLAT SCORP SENEG SEP STRAM
 SULPH TARENT THUJ TUB URAN **VERAT** (+85)

- General (980)
- Answer, answering, answers; offensive
- Contemptuous (20)
- Cursing, swearing, desires (35)
- Insolence, impertinence (19)
- Nipping at everyone
- Quarrelsomeness, scolding (67)
- Rudeness (17)
- Mirilli's themes; offensive (122)
- Psychological themes; aggression (336)

forenoon: (+1)

- Forenoon (21)

evening: (+2)

- Evening; agg. (146)

acts, after indecent: (+1)

angry, without being: (+2)

crying, with: **STRAM**

drunkards, in: **PETR** (+2)

- Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (20)

fever, during

- Fever; during (146)

intermittent: **FERR**

- Fever; during (146)
- Fever, heat; intermittent, malarial (159)

typhoid: (+1)

- Fever, heat; continued, typhoid (124)

irritability, with: (+3)

- Irritability (361)

jealousy, out of: **NUX-V** (+2)

- Jealousy (35)

menses, before: **CHAM** (+1)

- Menses; before (69)

molestation, after: (+1)

ABUSIVE	MIND
ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON <i>Alco</i> AM-C ANAC ANDROC <i>Astac</i> AUR BELL <i>Biti-a Bung-f</i> CAMPH CAUST <i>CHAM</i> CON CROC <i>Dulc</i> FERR GALL-AC <i>Hafn</i> HEP HYOS IGN <i>Ip</i> KALI-AR KALI-I LAC-C <i>LYC</i> LYSS MERC MOSCH <i>Nit-ac</i> <i>NUX-V</i> PALL PETR PHYSALA-P PLAT <i>Raja-s</i> <i>Sanic</i> Sarr SCORP SENEG SEP <i>Sil</i> <i>Staph</i> STRAM SULPH TARENT THUJ <i>Tritic-v</i> TUB URAN <i>VERAT</i> <i>Xeno</i> (+70)	
<ul style="list-style-type: none"> • General (1251) • Answer, answering, answers; offensive • Contemptuous (26) • Cursing, swearing, desires (50) • Insolence, impertinence (24) • Nipping at everyone • Quarrelsomeness, scolding (103) • Rudeness (26) • Mirilli's themes; offensive (200) • Psychological themes; aggression (481) 	
forenoon: (+1) <ul style="list-style-type: none"> • Forenoon (30) 	
evening: (+2) <ul style="list-style-type: none"> • Evening; agg. (214) 	
acts, after indecent: (+1)	
angry, without being: <i>Bell</i> (+1)	
crying, with: STRAM	
drunkards, in: PETR (+2) <ul style="list-style-type: none"> • Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (25) 	
fever, during <ul style="list-style-type: none"> • Fever; during (185) 	
intermittent: FERR <ul style="list-style-type: none"> • Fever; during (185) • Fever, heat; intermittent, malarial (203) 	
typhoid: (+1) <ul style="list-style-type: none"> • Fever, heat; continued, typhoid (145) 	
irritability, with: <i>Ip</i> (+2) <ul style="list-style-type: none"> • Irritability (488) 	
jealousy, out of: <i>NUX-V</i> (+2) <ul style="list-style-type: none"> • Jealousy (50) 	
menses, before: CHAM (+1)	

Prikazana so vsa pravna sredstva.

ABUSIVE, insulting: **ABIES-N** **ACON** acon-f agath-a agki-p **Alco** aloe **AM-C** am-m **ANAC ANDROC** aran-ix arn ars ars-s-f **Astac** atro **AUR** aur-m-n aur-s **BELL** beryl-n **Biti-a** bor bov bufo **Bung-f** bute-j calc-i **CAMPH** canth carc **CAUST** cere-s **CHAM** chin cic **CON** cor-r coriand **CROC** cub culx cupr-ar der **Dulc** elae falco-p **FERR** fic **GALL-AC** gels gink granit-m **Hafn** harp helx-t hema-h **HEP** hist hydr hydr-ac **HYOS** **IGN** iod **Ip** **KALI-AR** kali-c **KALI-I** **LAC-C** lac-d lach lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r **LYC** **LYSS** m-aust mag-c mangi med **MERC MOSCH** nat-c nat-m **Nit-ac** **NUX-V** ozon **PALL** **PETR** **PHYSALA-P** **PLAT** plb **Raja-s** ran-b rhus-g sac-l **Sanic Sarr** **SCORP** **SENEG** **SEP** **Sil** spong **Staph** **STRAM** stront-c **SULPH** syph **TARENT** thlaspi **THUJ** thul-f trich-d **Tritic-v** **TUB** **URAN** **VERAT** verbe-h viol-t vip **Xeno**

• *General* (1769)

• *Answer, answering, answers; offensive* (1)

• *Contemptuous* (119)

• *Cursing, swearing, desires* (141)

• *Insolence, impertinence* (51)

• *Nipping at everyone* (1)

• *Quarrelsomeness, scolding* (284)

• *Rudeness* (92)

• *Mirilli's themes; offensive* (458)

• *Psychological themes; aggression* (975)

forenoon: ran-b

• *Forenoon* (118)

evening: am-c am-m

• *Evening; agg.* (436)

acts, after indecent: bung-f

angry, without being: **Bell** dulc

crying, with: **STRAM**

drunkards, in: hep nux-v **PETR**

• *Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from* (63)

fever, during

• *Fever; during* (327)

intermittent: **FERR**

• *Fever; during* (327)

• *Fever, heat; intermittent, malarial* (360)

Velikost besedila

Besedilo lahko zmanjšate ali povečate. (Možnost priročnega menija *Manjše besedilo*, možnost priročnega menija *Standardna velikost besedila*, možnost priročnega menija *Večje besedilo*).


V napravi iPhone lahko besedilo zmanjšate ali povečate z gesto ščipanja. Postavite dva prsta na zaslon in ju premikajte drug od drugega ali drug proti drugemu, da spremenite velikost besedila.

Kopiranje rubrike v odložišče

Včasih je rubriko koristno kopirati v odložišče in jo prilepiti v drug program, na primer v urejevalnik besedil. (Možnost priročnega menija *Kopiraj / Kopiraj rubrično nalepko*, možnost priročnega menija *Kopiraj / Kopiranje rubrike in pravnih sredstev*).

Izbira jezika

Ovisno od izdaje programa in licence je na voljo več jezikovnih možnosti za *Complete Repertory*.

Razpoložljive jezikovne možnosti lahko izberete v meniju ali v vrstici z gumbi. (Možnost priročnega menija *Jezik / Knjiga v angleščini*). (gumb za zastavo, )

V izdaji *Practitioner* lahko izberete drugi jezik (možnosti so odvisne od vaše licence), da se besedilo rubrike prikaže v drugem jeziku. Na primer francosko: (Možnost priročnega menija *Jezik / Dodatna knjiga v francoščini*).

ABUSIVE, insulting: **ABIES-N** **ACON** acon-f agath-a agki-p **Alco** aloe **AM-C** am-m **ANAC** **ANDROC** aran-ix arn ars ars-s-f **Astac** atro **AUR** aur-m-n aur-s **BELL** beryl-n **Biti-a** bor bov bufo **Bung-f** bute-j calc-i **CAMPH** canth carc **CAUST** cere-s **CHAM** chin cic **CON** cor-r coriand **CROC** cub culx cupr-ar der **Dulc** elae falco-p **FERR** fic **GALL-AC** gels gink granit-m **Hafn** harp helx-t hema-h **HEP** hist hydr hydr-ac **HYOS** **IGN** iod **Ip** **KALI-AR** kali-c **KALI-I** **LAC-C** lac-d lach lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r **LYC** **LYSS** m-aust mag-c mangi med **MERC** **MOSCH** nat-c nat-m **Nit-ac** **NUX-V** ozon **PALL** **PETR** **PHYSALA-P** **PLAT** plb **Raja-s** ran-b rhus-g sac-l **Sanic** **Sarr** **SCORP** **SENEG** **SEP** **Sil** spong **Staph** **STRAM** stront-c **SULPH** syph **TARENT** thlaspi **THUJ** thul-f trich-d **Tritic-v** **TUB** **URAN** **VERAT** verbe-h viol-t vip **Xeno**

- General (1769)
- Answer, answering, answers; offensive (1)
- Contemptuous (119)
- Cursing, swearing, desires (141)
- Insolence, impertinence (51)
- Nipping at everyone (1)
- Quarrelsomeness, scolding (284)
- Rudeness (92)
- Mirilli's themes; offensive (458)
- Psychological themes; aggression (975)

forenoon: ran-b

- Forenoon (118)

evening: am-c am-m

- Evening; agg. (436)

acts, after indecent: bung-f

angry, without being: **Bell** dulc

crying, with: **STRAM**

drunkards, in: hep nux-v **PETR**

- Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (63)

fever, during

- Fever; during (327)

intermittent: **FERR**

- Fever; during (327)
- Fever, heat; intermittent, malarial (360)



Index

Book

Find

Case

MM

Najljubše rubrike

Nekatere rubrike se vam zdijo pomembne, druge pa ne tako pomembne. To še posebej velja, če za iskanje rubrik uporabljate modul *Find*. Če želite dodatno poudariti rubrike, ki so za vas pomembne, jih lahko označite kot priljubljene.

Če želite rubriko označiti kot priljubljeno, kliknite na rubriko in jo označite.

Vsaka rubrika, ki je označena kot priljubljena, bo podčrtana.

Ko boste rubrike označili kot priljubljene, se bo v modulu *Find* pojavilo dodatno polje, ki vam bo omogočilo, da iskanje omejite samo na priljubljene rubrike.

Standardni repertoarni filtri knjižnega modula

Običajno je v knjižnem modulu prikazana celotna vsebina *Complete Repertory*.

Na voljo je nekaj standardnih filtrov. Izberete jih lahko v menijski vrstici ali v priročnih menijih na robovih strani. (Možnost priročnega menija *Izbor knjig / Popolnoma*).

<i>Popolnoma</i>	Prikažite celoten repertoar brez filtriranja.
<i>Classic</i>	Prikažite samo rubrike in sredstva klasičnih avtorjev. To omejuje repertorij na rubrike, ki se pojavljajo v glavnih klasičnih repertoarjih, in na sredstva iz knjig pred letom 1930.
<i>Zanesljivi avtorji</i>	Pokažite samo avtorje, ki po mnenju Georgea Vithoulkasa veljajo za najbolj zanesljive.

<i>Rubrike za Kente</i>	Repertorij je omejen na rubrike, ki izhajajo iz Kentovega repertorija.
<i>Rubrike iz Allenove terapevtske žepne knjige</i>	Repertorij je omejen na rubrike iz Allenove terapevtske žepne knjige.

Če je filter izbran, je njegovo ime prikazano v glavi postavitve knjige repertorija. Tako boste zlahka videli, katero možnost repertoarja uporabljate.

Opomba: Filtri repertoarja se uporabljajo samo za vsebino *Complete Repertory*.

Če vaša licenca podpira uporabo dodatnih repertoarjev ali če ste sami ustvarili dodatno gradivo repertoarja, filtri za to gradivo ne veljajo.

Poiščite modul

Odpiranje modula Iskanje

Pojdite v modul Iskanje tako, da kliknete zavihek *Iskanje*.



Poišči Najdeno na spletni st

MIND

ANXIETY; afternoon; agg.; four pm.: **LYC** (+8)

CONSCIENTIOUS about trifles; four pm. -
eight pm.: **LYC**

WEeping, tearful mood; afternoon; agg.; four
pm.: **LYC** (+2)

WEeping, tearful mood; afternoon; agg.; four
pm.; eight pm., until: **LYC** (+1)

HEAD

PAIN, headache; afternoon; agg.; four pm.:
LYC (+54)

PAIN, headache; afternoon; agg.; four pm.;
eight pm., until: **LYC** (+4)

PAIN, headache; vertex; afternoon; four pm. -
eight pm.: **LYC**

PAIN, headache; pressing; vertex; afternoon;
four pm. - eight pm.: **LYC**

EYES

PAIN; afternoon; four pm.: **LYC** (+7)

PAIN; afternoon; four pm.; eight pm., until: **LYC**

VISION

AFTERNOON; three pm. or four pm.: **LYC** (+10)

LOSS of, blindness; afternoon; four pm.: **LYC**

HEARING

NOISES; afternoon; four pm.: **LYC** (+2)

REVERBERATING, echoes and reechoes; four
pm.: **LYC**

ROARING; afternoon; four pm.: **LYC**

NOSE



Indeks

Knjiga

Poišči

Primer

MM

Poiščite polja

Na majhnih zaslonih se polja za iskanje sprva ne prikažejo, da se prihrani prostor. Polja lahko prikažete s pritiskom na gumb za poljem Iskanje. Polja lahko odstranite zaslona tako, da pritisnete gumb *Hide*.

Besedilo

Pravna sredstva

Najmanjši razred

Min. velikost rubrike

Največja velikost rubrike

Popolni simptomi ☐

Poglavja

Vrste rubrik

[Jasno](#) [Skrij](#)

Besedilo Vnesite fragmente besedila, ki jih želite poiskati:

xyz	Vse besede, ki se začnejo s xyz.
=xyz	Beseda mora biti točno xyz.
*xyz	Beseda vsebuje xyz kjer koli v besedilu.
"abc xyz"	Besedilna kombinacija abc, ki ji sledi xyz
abc + def	Pojaviti se morata obe besedili abc IN def.
abc+def	Enako kot zgoraj, presledki niso obvezni.
abc def	Enako kot zgoraj, AND je privzeta vrednost. (Znak + se samodejno vstavi pred def.)
-abc	Besedilo abc NE sme biti prisotno v besedilu. To lahko kombinirate z =, * in "", kot je prikazano zgoraj. Primeri: -jutro -*ation -"iz postelje"
abc / def	Pojaviti se mora abc ALI def (presledki niso obvezni).
Možne so tudi kombinacije. Primeri:	
štiri/osem popoldne	(štiri ALI osem), IN pm.
pm štiri/osem	Enako kot zgoraj, vrstni red ni pomemben.
"vstajanje iz postelje" zjutraj	Zaporedje vstajanje iz postelje, IN jutro.
strah / tesnoba množica/ljudje	(strah ALI tesnoba) IN (množica ALI ljudje). (Pred množico se samodejno vstavi +)

Pravna sredstva Vnesite kratice zdravil, ki jih želite poiskati. S pritiskom na gumb **Q**, ki se nahaja ob desnem robu polja, se odpre iskalno okno, v katerem lahko interaktivno izberete zdravilo, če kratice ne poznate na pamet.

sep	Sredstvo sep
sep.	Enako kot zgoraj, zapis s piko lahko uporabite, vendar tukaj ni potreben (potreben je v polju Find).
-sep	Rešitev sep NE sme biti prisotna v rubriki.
sep / nat-m	Ali sredstvo sep ALI nat-m
sep nat-m	Enako kot zgoraj, privzeto je OR. (pred nat-m se samodejno vstavi /)
sep/staph+nat-m/mag-m	(sep ALI staph) IN (nat-m ALI mag-m)
sep. staph. + nat-m. mag-m.	Enako kot zgoraj. (Znak / se samodejno vstavi pred staph in pred mag-m)

Najmanjši razred Vnesite najmanjšo gradacijo za sredstva (od 1 do 4).

Min. velikost rubrike Vnesite najmanjše število pravnih sredstev v rubriki.

Največja velikost rubrike Vnesite največje število pravnih sredstev v rubriki.

<i>Popolni simptomi</i>	Omejite iskanje na popolne simptome. Popolni simptom je simptom, ki je sestavljen iz lokacije, občutka in modalitet ali spremljevalcev. Ta možnost se uporablja izključno pri iskanju v spletnem mestu <i>Complete Repertory</i> . Drugi repertoarji običajno ne vsebujejo teh informacij.
<i>Vrste rubrik</i>	S pritiskom na gumb Q , ki se nahaja ob desni strani polja, se odpre okno, v katerem lahko interaktivno izberete vrste rubrik, kot so Times, Sides, Location itd. Če vaša licenca podpira uporabo dodatnih repertorijev, upoštevajte, da dodatni repertoriji pogosto nimajo označenih rubrik, kot so Times, Sides, Location itd. Vsako izbiro, ki jo opravite tukaj, lahko uporabite samo za repertoarje, ki so bili za to ustrezno pripravljeni, kot je <i>Complete Repertory</i> .
<i>Poglavja</i>	S pritiskom na gumb Q , ki se nahaja ob desni strani polja, se odpre okno, v katerem lahko interaktivno izberete poglavja.

Iskanje se začne samodejno po vnosu iskalnih meril, zato ni treba pritisniti nobenega gumba.

Upoštevajte, da je za besedilo privzeta vrednost za več fragmentov AND, za sredstva pa OR.

Razlog za to je, da pri vnosu več besedilnih fragmentov najverjetneje nameravate omejiti rezultat iskanja, medtem ko boste pri več zdravilih morda želeli opraviti diferencialno diagnozo.

Iskanje rezultatov

V napravi iPhone se iskanje začne takoj, ko končate tipkanje v polje. Ko tipkate z zaslonsko tipkovnico, jo morate najprej skriti. Če uporabljate zunanjo tipkovnico, pritisnite tipko Enter.

Stopnja podrobnosti je odvisna od tega, kaj je bilo iskano. Če so bila iskana zdravila, so izbrana zdravila vključena v rezultat iskanja. Če je bilo iskano samo besedilo, se ne prikažejo nobena sredstva.

Skratka, rezultat iskanja se osredotoča na tisto, kar ste zahtevali, in ne na podrobnosti, ki niso bile zahtevane.

Območje z rezultati iskanja je zelo podobno modulu *Book*.

Navigacija poteka z isto tipkovnico, miško, gumbno vrstico ali funkcijami menija.

Poleg tega se postavitev samodejno prilagodi velikosti okna.

V modulu *Find* je prikazovanje pravnih sredstev omejeno na nekoliko manjše rubrike. V rubrikah z veliko sredstvi je prikazano samo število sredstev.

Poleg navigacijskih možnosti v modulu *Book* ponuja rezultat iskanja možnost skoka neposredno na rubriko v knjigi, tako da preprosto dvakrat kliknete rubriko z miško.

Modul primera

Odpiranje modula Primer

Pojdite v modul Case (Primer) tako, da kliknete zavihek *Case (Primer)*.

Pacienti

Sodelavci

Študija

Seminarji

Drugi

Arhivirano

Filter

Abif, Hiram

Al-Rashidi, Muhammed

Andrews, Sandra - 197.

Baker, Charles

Barrett, Elizabeth Jane..

Boyle, Susan - 1961 (61

Clappin, Charles Bernar

Clappin, Edward - 1960

Garrod, Rishi - 1955 (68

Grinsven, Eduard van -.

Grinsven, Kyra van - 19.

Grinsven, Michel van -..

Huidekooper, Rolf - 199

Hyper, John

Odpri

Novo

Uredi

Arhiv

Indeks

Knjiga

Poišči

Primer

MM

V modulu Case lahko ustvarjate in urejate datoteke primerov svojih pacientov, registrirate predpisane recepte ter ustvarjate in urejate analize.

Delo z modulom Case je podobno delu s praviimi datotekami primerov.

Zadeve so razvrščene v skupine, tako kot bi v resničnem življenju razporedili mape v različne omare ali predale. Najprej izberete skupino ali skupine, v katerih želite delati.

Primeri v izbranih skupinah so prikazani na seznamu, ki vsebuje le povzetek informacij o bolniku: Ime in leto rojstva. Zadeve lahko filtrirate tako, da v polje *Filter* pod seznamom vpišete enega ali več delov imena bolnika.

Ko na seznamu izberete zadevo, se na desni strani zaslona prikaže datoteka zadeve.

Naslednji korak je odprtje datoteke zadeve, vendar bomo najprej podrobneje predstavili ta del upravljanja zadev.

Izbira skupin in ustvarjanje lastnih skupin

Izbirnik skupin lahko vidite kot nekakšno omaro s predali.

Pacienti
Sodelavci
Študija
Seminarji
Drugi
Arhivirano

Na tej sliki je predal *Patients* odprt.

Standardne skupine so:

- Bolniki* Vse datoteke primerov, ki so v opisu primera označene kot *Patient* (več informacij spodaj) in katerih avtor ste vi.
- Sodelavci* Vse spise, ki so v opisu zadeve označeni kot *Patient* in katerih avtor je nekdo drug.
- Študija* Vse datoteke primerov, ki so označene kot *Študija*. To so primeri, ki niso neposredno povezani z nobenim od vaših bolnikov, ampak so namenjeni le vaši osebni študiji.
- Seminarji* Vsi spisi, ki so označeni kot *Seminar*. V tej skupini ustvarite primere za vse primere, ki se pojavijo na seminarjih in usposabljanjih.
- Drugo* Vsi primeri, ki ne spadajo v nobeno drugo skupino.
- Arhivirano* Vsi primeri, ki ste jih arhivirali.
Arhivirani primeri se ne pojavljajo več v nobeni od drugih skupin.

Hkrati lahko odprete enega ali več predalov. Če želite odpreti ali zapreti predal, kliknite nanj. Z dvojnim klikom na enega od predalov ga boste odprli in hkrati zaprli vse druge.

Pacienti
Sodelavci
Študija
Seminarji
Drugi
Arhivirano

Odpreta sta dva predala.

Na seznamu primerov bodo prikazani vsi primeri, ki so označeni kot "Study" (Študij) ali "Seminars" (Seminarji).

Seveda se te skupine ne ujemajo z vašimi osebnimi željami. Ustvarjanje novih predalov z lastnimi skupinami je enostavno. Pri urejanju informacij o zadevi lahko določite, v katere skupine naj bo zadeva uvrščena. Uporabite lahko tri standardne skupine "Bolnik", "Študij" in "Seminar", lahko pa vnesete tudi lastna imena skupin. Novi predali bodo na seznam dodani samodejno:

Pacienti
Sodelavci
Študija
Seminarji
Family
Teaching
Workgroup
Drugi
Arhivirano

Predali *Družina*, *Učenje* in *Delovna skupina* so na seznam dodani samodejno, ker so bila v nekaterih primerih ta imena skupin uporabljena v informacijah o primeru.

Izbira prave zadeve

Na seznamu so prikazani vsi primeri, ki ustrezajo izbrani skupini ali skupinam. Če v polje *Filter* vnesete besedilo, se seznam omeji na primere, ki ustrezajo besedilu filtra.

Primer uporabe filtra:

Pacienti
Sodelavci
Študija
Seminarji
Drugi
Arhivirano

Filter

Abif, Hiram
Al-Rashidi, Muhammed...
Andrews, Sandra - 197...
Baker, Charles
Barrett, Elizabeth Jane...
Boyle, Susan - 1961 (61)
Clappin, Charles Bernar...
Clappin, Edward - 1960...
Garrod, Rishi - 1955 (68)
Grinsven, Eduard van -...
Grinsven, Kyra van - 19...
Grinsven, Michel van -...
Huidekoooper, Rolf - 199...
Hyper, John

Pacienti
Sodelavci
Študija
Seminarji
Drugi
Arhivirano

Filter rolf

Huidekoooper, Rolf - 199...
Rolf, Charles - 1972 (51)
Rolf, Saskia - 1973 (50)
Rolf, Victor - 1970 (53)

Pacienti
Sodelavci
Študija
Seminarji
Drugi
Arhivirano

Filter vic rolf

Rolf, Victor - 1970 (53)

Odpri Novo Uredi Arhiv

Odpri Novo Uredi Arhiv

Odpri Novo Uredi Arhiv

Filter ima nekaj zelo zmogljivih možnosti za izbiro ustreznega primera. Uporablja enaka merila za filtriranje, kot jih polje *Poišči* uporablja za besedilo in sredstva.

V modulu *Case (Primer)* je besedilo ime, kot je prikazano na seznamu, zdravila pa so vsa zdravila, ki so bila bolniku predpisana (ali pa NISO bila predpisana).

Podrobnosti so na voljo v razdelku *"Iskanje", polje*.

Primer: *John* ali *Joseph*, ki mu je bil predpisan *nux-v*, nikoli pa *sulph*, preprosto vnesite:

john / joseph nux-v. -sulph.

(Upoštevajte piko za imeni zdravil!).

Ustvarjanje spisa zadeve

Novo datoteko zadeve lahko ustvarite tako, da kliknete gumb *New*.

Prikaže se pogovorno okno, v katerem lahko vnesete podatke o bolniku in informacije o ozadju primera.

Urejanje podatkov o primeru

V razdelku *Patient* lahko vnesete vse osebne podatke, ki jih želite shraniti o pacientu. Pritisnite gumb *Photo* in posnemite fotografijo.

Velikost fotografije se samodejno spremeni. Z gumbom *Clear* odstranite obstoječo fotografijo.

Če leto, mesec ali dan pacientovega rojstva niso znani, vpišite 0.

Če natančen dan rojstva ni znan, ampak pacient navede le trenutno starost, lahko starost vpišete v polje Leto rojstva.

Informacije o primeru

Družinsko ime	<input type="text" value="Barrett"/>
Ime in priimek	<input type="text" value="Elizab..."/>
Srednje ime	<input type="text" value="Jane"/>
Začetnice	<input type="text" value="E.J.M."/>
Spol	<input type="text" value="Ženske"/>
Leto rojstva	<input type="text" value="1950"/> <input type="button" value="−"/> <input type="button" value="+"/>
Mesec rojstva	<input type="text" value="7"/> <input type="button" value="−"/> <input type="button" value="+"/>
Dan rojstva	<input type="text" value="4"/> <input type="button" value="−"/> <input type="button" value="+"/>
Fotografija	

[Fotografija](#) [Jasno](#) [Obračanje](#)

[Osebnostne informacije](#) [Informacije o naslovu](#) [Družinske informacije](#) [Skupine primerov](#) [Ozadje primera](#)

[Prekliči](#) [V REDU](#)

V razdelku *Case* lahko vnesete nekaj informacij o ozadju primera, ki niso povezane s samim bolnikom.

V skupini *Skupine primerov* lahko izberete eno od standardnih skupin in/ali vpišete svoja imena skupin, ločena s presledki ali podpičji.

Skupina *Ozadje zadeve* je uporabna, če zadeva izvira iz seminarja, revije itd. in si želite zapomniti, od kod zadeva izvira.

Informacije o primeru

Pacient



Študija



Seminar



Druge skupine

Osebnostne informacije Informacije o naslovu Družinske informacije [Skupine primerov](#) Ozadje primera

[Prekliči](#) [V REDU](#)

Odpiranje zadeve

Obstoječo datoteko zadeve lahko odprete tako, da jo izberete na seznamu in nato kliknete gumb *Open*.

Na vnos na seznamu lahko tudi dvakrat kliknete.

Ko ustvarite nov primer, se ta samodejno odpre.

Ko odprete datoteko primera, se prikaže vsebina, ki bi jo običajno pričakovali tudi v resnični datoteki primera:

- list papirja s podatki o bolniku,
- obrazec z recepti,
- obrazec s pregledom vseh analiz v spisu zadeve,

Primer:

Informacije za bolnike

Ime

Barrett, Elizabeth Jane (E.J.M.)

Spol

Ženska

Datum rojstva

4. julij 1950 (72)

Naslov

379 San Vicente blvd
CA 90049 Santa Monica, LA
USA

Tel. dom

310-442-8447

Tel. urad

Tel. mobilni telefon

E-pošta

lisabarret50@gmail.com grie (...)

Zakonec

Bill

5. nov. 2007	cimic	C200	
5. avg. 2006	sep	C200	
jul. 2005	arn	C30	Repeat until br (...)
apr. 2003	dros	C30	

Razpoložljive analize

Datum	Opis
5. jan. 2009	Grief remains, eczema from youth g (...)
2. feb. 2008	Grief after death mother
3. nov. 2007	
5. avg. 2006	


Knjiga

Poišči

Primer

Analiza


MM

Če želite zapreti odprto zadevo, kliknite na majhno puščico  v zgornjem levem kotu. (Možnost priročnega menija *Zapri zadevo*).

Upravljanje receptov

Če želite dodati nov recept, dvakrat kliknite prazno vrstico na vrhu receptov. (Možnost priročnega menija *Dodajte recept*). Pojavilo se bo novo pogovorno okno, v katerem lahko vnesete nekaj informacij o receptu:

Predpis

Rešitev 
Phosphoricum acidum
Potenca
Reakcije

Navodila

Opombe

Leto	2023	<input type="button" value="−"/>	<input type="button" value="+"/>
Mesec	3	<input type="button" value="−"/>	<input type="button" value="+"/>
Dan	4	<input type="button" value="−"/>	<input type="button" value="+"/>

[Prekliči V REDU](#)

Če mesec ali dan nista znana, vpišite 0.

Recept izbrišite tako, da ga izberete na seznamu in nato izbrišete recept. (Možnost priročnega menija *Izbriši recept*).

Recept uredite tako, da dvakrat kliknete na vnos na seznamu. (Možnost priročnega menija *Predpis za urejanje*).

Upravljanje analiz

Novo analizo lahko dodate z možnostjo menija ali dvakrat kliknete na prazno vrstico na vrhu indeksa analiz. (Možnost priročnega menija *Dodajte analizo*).

Prikaže se novo pogovorno okno, v katerem lahko vnesete nekaj informacij o analizi:

Analiza

Opis

Diagnoza

Opombe

Leto	2023	−		+
Mesec	3	−		+
Dan	4	−		+

[Prekliči V REDU](#)

Če mesec ali dan nista znana, vpišite 0.

Analizo izbrišete tako, da jo izberete na seznamu in nato izbrišete. (Možnost priročnega menija *Izbriši analizo*).

Analizo uredite tako, da dvakrat kliknete na vnos na seznamu. (Možnost priročnega menija *Analiza urejanja*).

Če želite kopirati analizo kot osnovo za novo analizo, uporabite možnost Podvoji analizo. (Možnost priročnega menija *Analiza dvojnikov*).

Če želite analizo premakniti v drug primer, uporabite možnost menija Move analysis to case (Premakni analizo v primer). (Možnost priročnega menija *Premaknite analizo na primer...*).

Če kliknete na eno od analiz na seznamu, postane ta analiza tista, ki jo uporablja modul *Analiza* (glejte razdelek *Analiza*).

Tiskanje

Svojo zadevo ali njene dele lahko natisnete. (Možnost priročnega menija *Natisni*).

Tiskanje zadeve je mogoče šele, ko jo odprete.

V pogovornem oknu lahko izberete, kaj želite natisniti:

Možnosti tiskanja

Kaj natisniti?

- Pokrov ohišja ☐
- Analize ☒ Trenutna anali...
- Podrobnosti analize ☐
- Rubrike in pravna sredstva ☐

Možnosti tiskanja

- Barva ☒
- Visoka ločljivost ☐

[Prekliči](#) **V REDU**

<i>Pokrov ohišja</i>	Če označite to možnost, bo prva stran izpisa vsebovala podatke o bolniku in pregled receptov.
<i>Trenutna analiza</i>	To možnost izberite, če želite natisniti samo trenutno izbrano analizo z nastavitvami, kot so uporabljene v modulu <i>Analysis (Analiza)</i> .
<i>Brez analiz</i>	To možnost izberite, če ne želite natisniti nobene analize (samo ovitek zadeve).
<i>Podrobnosti analize</i>	Če označite to možnost, se natisnejo informacije, ki ste jih vnesli za vsako analizo (diagnoza, opombe).
<i>Rubrike in pravna sredstva</i>	Če označite to možnost, bo vsak izpis analize vseboval pregled vseh pravnih sredstev v rubrikah, ki se uporabljajo v analizi. Upoštevajte, da bo zaradi omejitev avtorskih pravic natisnjenih največ 20 rubrik z vsemi pravnimi sredstvi. Če natisnete več kot 20 rubrik, rubrike z največjim številom pravnih sredstev ne bodo navedene.
<i>Barva</i>	Natisnite v barvah. Če ni označeno, je tiskanje optimizirano za črno-bele tiskalnike.
<i>Napišite v datoteko HTML</i>	To možnost izberite, če želite zapisati v datoteko HTML. To je priročna oblika, če želite dele izpisa kopirati v druge dokumente.

Tiskanje pregleda več primerov

Če niste odprli zadeve, lahko natisnete pregled več zadev. (Možnost priročnega menija *Natisni*).


To je lahko na primer praktično, če želite ustvariti seznam za sodelavca, ki spremlja vaše bolnike. Nato lahko pripravite seznam z imeni in rojstnimi datumi pacientov, ki ste jih pregledali v zadnjih šestih mesecih, s seznamom receptov za zdravlila.

Možnosti v pogovornem oknu za tiskanje niso potrebne dodatne razlage.

Zaščita z geslom

Podatke o pacientu lahko zaščitite pred nezaželenim dostopom drugih oseb, medtem ko vas ni v računalniku.

V ta namen lahko nastavite geslo.

Če je bilo nastavljeno geslo, se v modulu *Case* pojavi nov gumb . Ko pritisnete ta gumb, se modul ohišja takoj zaklene in za njegovo odprtje je treba vnesti geslo.

Prav tako je mogoče samodejno zakleniti podatke o zadevi, če programa nekaj časa niste uporabljali. Čas pred samodejnim zaklepanjem lahko nastavite sami v nastavitvah *Preferences*. Če čas nastavite na 0 minut, se samodejno zaklepanje ne izvede.

Pri določanju gesla bodite zelo previdni. Poleg vas vašega gesla ne pozna nihče drug. Če pozabite geslo, je to enako, kot če bi izgubili ključke od hiše - dostopa ni več.

Arhiviranje in brisanje

Arhiviranje primerov

Če ne želite več, da je zadeva prikazana na seznamu vaših zadev, jo lahko arhivirate. Po arhiviranju primera bo ta prikazan v skupini *Arhivirani*.

Čeprav je zadeva arhivirana, jo lahko še vedno odprete. Če zadevo spremenite, se samodejno odstrani iz skupine *Arhivirano* in se vrne med druge aktivne zadeve.

Arhivirate lahko več starejših primerov. (Možnost priročnega menija *Arhiviranje starih primerov*). V pogovornem oknu, ki se odpre, lahko določite število mesecev. Na seznamu so prikazani vsi primeri, ki v danem številu mesecev niso bili spremenjeni. Nato lahko arhivirate vse primere, ki so izbrani na seznamu.

Brisanje zadeve

Če datoteke ne želite več hraniti, jo lahko izbrišete. Zadevo lahko izbrišete šele, ko je bila arhivirana.

Možno je tudi, da se starejši arhivirani primeri samodejno izbrišejo. Za to obstaja možnost v nastavitvah *Preferences*. Arhivirani primeri se privzeto ne izbrišejo samodejno.

Samodejno varnostno kopiranje

Če nehoti izbrišete datoteko zadeve, jo lahko obnovite iz varnostne kopije.

Varnostne kopije se naredijo samodejno.

- Zadnji mesec vsak dan.
- Zadnje leto vsak mesec.
- Po enem letu je varnostna kopija trajno odstranjena.
- Upoštevajte, da so varnostne kopije shranjene lokalno v računalniku.

Strežnik v oblaku

Uvod

Če za svojo prakso uporabljate več kot en računalnik, boste morda želeli sinhronizirati podatke o primerih med njimi. Tako boste imeli vedno na voljo najnovejše informacije o primerih, ne glede na to, kje delate. Tudi če ste na poti in uporabljate telefon ali tablični računalnik.

Naš strežnik v oblaku ponuja prilagodljiv in enostaven mehanizem za samodejno sinhronizacijo vaših primerov.

V nasprotju s številnimi drugimi rešitvami v oblaku lahko *Complete Dynamics* uporabljate tako z internetno povezavo kot brez nje. Brez internetne povezave so vsi primeri shranjeni lokalno v napravi. Vse opravljene spremembe so shranjene lokalno. Ko je na voljo internetna povezava, se lahko primeri samodejno sinhronizirajo prek strežnika v oblaku.

Če v različnih napravah spremenite zadeve, medtem ko niso povezane z internetom, to ne spremeni ničesar. Ko je povezava s strežnikom v oblaku na voljo, je mogoče združiti vse spremembe, ki ste jih opravili v različnih napravah. Tudi če ste delali na istem primeru.

Kaj počne strežnik v oblaku?

Namen strežnika v oblaku je zagotoviti, da so vaše zadeve enake v vseh napravah, ki uporabljajo to storitev.

Kar boste dodali v eno napravo, bo dodano tudi v druge naprave.
Kar spremenite v eni napravi, bo spremenjeno tudi v drugih napravah.
Kar izbrišete v eni napravi, bo izbrisano tudi v drugih napravah.
Arhiviranje primera pomeni, da bo arhiviran tudi v drugih napravah.

Prednosti uporabe strežnika v oblaku

- Po samodejni sinhronizaciji so vaši primeri posodobljeni, ne glede na to, katero napravo uporabljate.
- Deluje z vsemi napravami, ki so v vaši licenci.

- Delate lahko brez internetne povezave.
- Sinhronizacija je samodejna, ko je na voljo internet.
- Vedno je na voljo kopija vaših primerov za primer, če vaš računalnik umre.

Za katere naprave naj uporabljam strežnik v oblaku?

To je vaša lastna izbira.

Če uporabljate en računalnik, lahko strežnik v oblaku uporabite za zavarovanje kopije svojih primerov. Če računalnik umre, se lahko zadeve samodejno prenesejo v nov računalnik.

Če uporabljate dve ali več naprav, lahko strežnik v oblaku spremembe, ki ste jih naredili v eni napravi, uporabi v drugih napravah.

Za vsako napravo, ki jo uporabljate, določite, ali naj uporablja strežnik v oblaku ali ne. Strežnik v oblaku lahko na primer uporabljate za računalnike doma in v pisarni, ne pa tudi za telefon.

Varnost in zasebnost

Zavedamo se, da sta varnost in zasebnost izjemno pomembni.

Varnost

Vaši podatki o primeru so zelo dobro zaščiteni.

- Dostop do strežnika v oblaku je mogoč samo iz naprave, ki ima veljavno licenco na vaše ime.
- Nobena druga naprava nima dostopa do vaših primerov.
- Potrebno je dodatno geslo, ki ga poznate samo vi.
- Povezava s strežnikom je šifrirana.

Zasebnost

Strežnika v oblaku niste dolžni uporabljati. Zelo dobro razumemo, da morda ne želite, da bi bili podatki vašega pacienta shranjeni nekje na oddaljenem računalniku.

Odločitev o uporabi strežnika v oblaku je popolnoma vaša.

V celoti spoštujemo zasebnost vas in vaših pacientov.

Vaših podatkov ne bomo uporabljali ali obdelovali na noben način. Strežnik v oblaku ga le kopira v vaše naprave in iz njih.

Nastavitev strežnika v oblaku

Če želite napravo začeti uporabljati s strežnikom v oblaku, jo morate najprej aktivirati.

Aktivacija poteka v razdelku *Nastavitve*, v razdelku *Primer*. Tu lahko izberete možnost *Use Cloud Server*.

Če strežnik v oblaku aktivirate prvič, boste samodejno napoteni, da ustvarite kodo PIN, ki varuje vaše podatke o zadevah. PIN lahko pozneje vedno spremenite.

Ne pozabite kode PIN v oblaku, saj jo boste potrebovali pri aktivaciji druge naprave.

Stanje strežnika v oblaku

Na vrhu strani v modulu *Case* ikona označuje stanje povezave s strežnikom.

- ☁ Strežnik v oblaku je na voljo.
- ☁ Komunikacija v teku.
- ✖ Ni internetne povezave ali je strežnik začasno izključen iz omrežja.
če ikona ni prikazana, strežnik v oblaku še ni konfiguriran.

Ko kliknete ikono, se sinhronizacija izvede takoj.

Omejitve

Namen strežnika v oblaku je, da vse spremembe, opravljene v eni napravi, uporabi v vseh drugih napravah. Vendar to ni vedno mogoče. Tako boste lažje razumeli, kakšne so omejitve.

Zlasti pri delu brez povezave se lahko zgodi, da se spremembe iste zadeve izvedejo v različnih napravah, preden se ponovno vzpostavi povezava s strežnikom v oblaku. Običajno to le redko predstavlja težavo.

Informacije v zadevi so sestavljene iz več neodvisnih elementov:

- Informacije o bolniku.
- Informacije o primeru.
- Vsaka analiza.
- Vsak recept za zdravlilo.

Spremembe lahko opravite v enem od teh elementov in v drugem elementu v drugi napravi.
Če na primer spremenite isto analizo v dveh napravah, bo shranjena le zadnja sprememba.
Če v eni napravi spremenite eno analizo, v drugi pa drugo, to ne bo težava.
Če v eni napravi dodate recept za zdravilo, v drugi napravi pa drug recept za zdravilo, to ne bo težava.

Varnostne kopije

Primeri, shranjeni v strežniku v oblaku, so kopija primerov v vaši napravi. Izvirni podatki so v vaši napravi.

Za izdelavo varnostnih kopij računalnika ste vedno odgovorni sami.

Skupna raba primerov

Deljenje primerov s sodelavci

V številnih primerih boste morda želeli enega od svojih primerov in/ali analiz posredovati kolegu, sošolcu, učitelju ali ga morda objaviti na spletnem forumu.

Complete Dynamics vam ponuja možnost izvoza celotnega ali le delnega primera v datoteko. To datoteko lahko posredujete sodelavcu in jo uvozite v njegov računalnik. Vaš sodelavec za to ne potrebuje licence *Practitioner Edition*, z brezplačno *Browser Edition* lahko datoteko tudi uvozite in si jo ogledate.

Skupna raba primerov je lahko tudi anonimna, s čimer je zagotovljena zasebnost vašega pacienta in vas.

V nadaljevanju je opisan način izvoza in uvoza. Najprej si bomo ogledali še eno pomembno funkcijo souporabe primerov.

Sinhronizacija primerov med več računalniki

Ročna sinhronizacija je pomembna le, če se niste odločili za samodejno sinhronizacijo prek strežnika v oblaku.

S souporabo ohišja imate na voljo dve zmogljivi možnosti za prenos ohišij iz enega računalnika v drugega.

Najlažje je izvoziti celotno kopijo podatkovne zbirke primerov v enem računalniku in jo uvoziti v drugem računalniku.

To nadomesti vse informacije o primeru, shranjene v drugem računalniku.

To možnost lahko uporabite tudi za redno ustvarjanje varnostne kopije podatkovne zbirke primerov.

Bolj napreden način je, da izvozite samo primere, ki so spremenjeni v enem računalniku, in jih uvozite v drugem. V tem primeru se v podatkovno zbirko v drugem računalniku kopirajo in združijo samo spremenjeni podatki. Ta zmogljiv mehanizem sinhronizacije deluje tudi, če je bila zadeva spremenjena v obeh računalnikih!

Sinhronizacija ohišij med iPhoneom in računalnikom

Pri sinhronizaciji primerov med iPhoneom in računalnikom se uporablja popolnoma enak mehanizem kot pri sinhronizaciji med več računalniki. Razlika je v načinu prenosa izvoznih datotek v iPhone in iz njega.


Med dvema računalnikoma lahko na primer prenesete datoteko s ključkom USB. V iPhoneu lahko datoteke prenašate s programom iTunes v računalniku.

V iTunes lahko datoteke kopirate v program *Complete Dynamics* v iPhoneu in iz njega.

To storite tako, da v iTunes izberete iPhone in odprete razdelek Aplikacije. Pod seznamom aplikacij boste videli seznam aplikacij, ki omogočajo izmenjavo datotek. Na seznamu morate videti *Complete Dynamics*. S klikom na aplikacijo *Complete Dynamics App* jo izberite. Na desni strani aplikacije je območje, kjer lahko dodajate ali brišete datoteke. Tam boste našli datoteko za izvoz zadeve, ustvarjeno v iPhoneu, ki jo lahko kopirate v računalnik in uvozite v računalnik. Tu lahko dodate izvozno datoteko, ustvarjeno v računalniku, ki bo na voljo za uvoz v iPhone.

Več informacij najdete v razdelku Pomoč v programu iTunes.

V iPhoneu lahko priročni meni z možnostmi, opisanimi v naslednjih razdelkih, odprete v modulu *Case*, na levi strani zaslona.

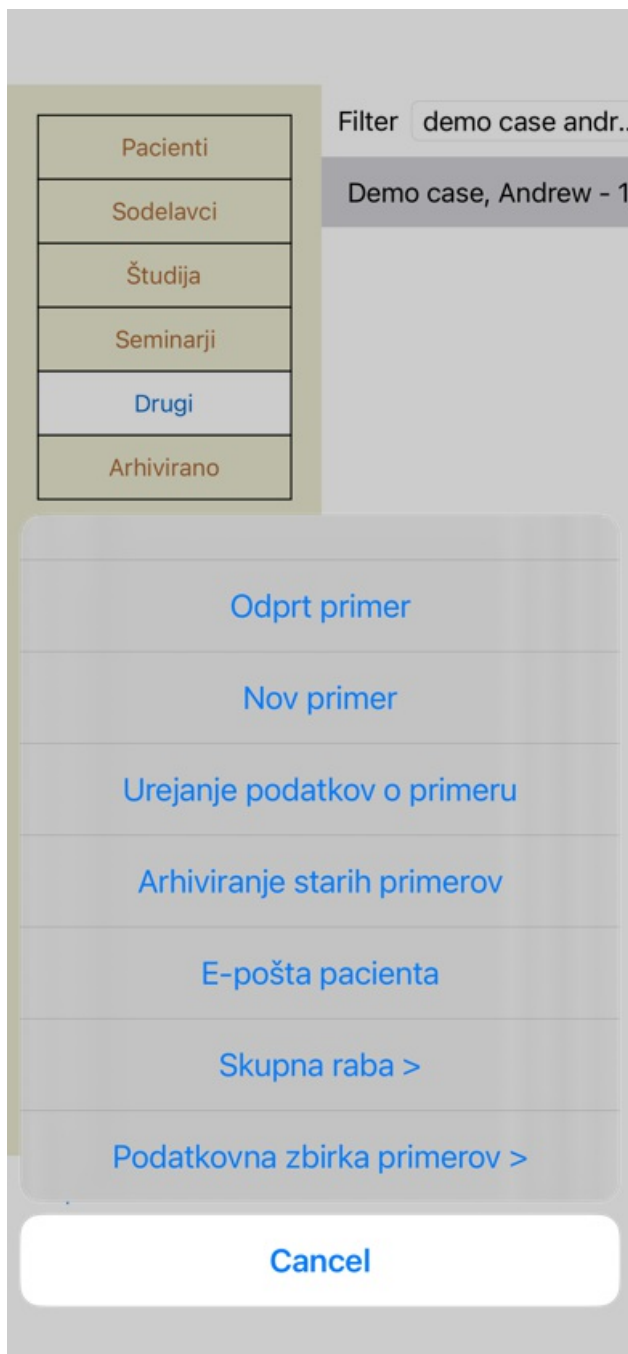

Izvoz posameznega primera

Če želite izvoziti posamezen primer, odprite modul *Case (Primer)* in izberite primer, ki ga želite izvoziti. Nato uporabite možnost Izvozi trenutni primer... (Možnost priročnega menija *Skupna raba / Izvozite trenutni primer...*). Odpre se pogovorno okno, v katerem lahko izberete dele zadeve, ki jih želite izvoziti:

Možnosti izvoza primera

Podatki o avtorju



Informacije za bolnike



Opombe o primerih



Predpisi



Analize

1. jan. 2009-A si...

2. jan. 2009-A si...

3. jan. 2009-A si...

4. jan. 2009-An...

1. feb. 2009-Sym...

1. feb. 2009-Gro...

1. mar. 2009-Sim...

25. jan. 2011-Bö...

1. sep. 2015-Fam...

1. mar. 2016-DD...

3. mar. 2016-DD...

Geslo (neobvezno)

Vse

Ni

Prekliči V REDU

Podatki o avtorju

Če te možnosti ne označite, vaše ime ne bo vključeno v izvoz.

Informacije za bolnike

Če odključate to možnost, bo pacient anonimen. Uporabljata se samo spol in letnica rojstva pacienta.

Če je ta možnost označena, so v izvoz vključeni vsi bolnikovi osebni podatki.

Opombe o primerih

Če je ta možnost označena, so v izvoz vključene informacije o ozadju vašega primera. (Ozadje primera, opombe in skupine).

Predpisi

Če je ta možnost označena, so v izvoz vključeni tudi recepti, ki ste jih izdali.

Analize

Za vsako analizo v primeru se lahko odločite, ali jo želite izvoziti ali ne. S klikom na vrstico vklopite ali izklopite izbiro. Z gumboma *Vse* in *Nobena* lahko za lažjo izbiro izberete vse ali nobene analize.

Geslo

Če tukaj vnesete vrednost, je izvozna datoteka zaščitena z geslom. Da bi ga lahko uvozili, mora nekdo poznati geslo. Priporočamo, da uporabite geslo za vse podatke, ki jih delite, razen za anonimne primere, ki jih želite objaviti za vse na internetu.

Ko ste pripravljeni, pritisnite gumb *OK*, nato pa boste morali izbrati ime in lokacijo datoteke.

Privzeto ime datoteke je že vneseno, vendar lahko izberete poljubno ime.

Izvoz posamezne analize

Če želite izvoziti posamezno analizo, odprite primer, ki vsebuje analizo, in izberite analizo, ki jo želite izvoziti.

Nato v meniju uporabite možnost Izvozi trenutno analizo... (Možnost priročnega menija *Skupna raba / Analiza izvoznega toka...*).

Odpre se pogovorno okno, v katerem lahko izberete dele zadeve, ki jih želite izvoziti skupaj z analizo:

Možnosti izvoza primera

Podatki o avtorju



Informacije za bolnike



Opombe o primerih



Geslo (neobvezno)

[Prekliči V REDU](#)

Za pomen polj glejte zgornje informacije.

Izvoz več primerov

V eno datoteko lahko izvozite več primerov. (Možnost priročnega menija *Skupna raba / Izvozite več primerov...*).

Možnosti izvoza primera

Pacienti	Abif, Hiram
Sodelavci	Al-Rashidi, M...
Študija	Andrews, San...
Seminarji	Baker, Charles
Drugi	Barrett, Eliza...
Arhivirano	Boyle, Susan...
	Clappin, Char...
	Clappin, Edw...
	Garrod, Rishi...
	Grinsven, Ed...

Podatki o avtorju

Informacije za bolnike

Opombe o primerih

Predpisi

Za zaščito zasebnosti upor:

Geslo

Prekliči V REDU

Na seznamu primerov izberite tiste, ki jih želite izvoziti, tako da jih kliknete.

Uvoz primera ali analize

Če vam je nekdo drug dal datoteko za izvoz primera ali analize, jo lahko preprosto uvozite z možnostjo Uvoz. (Možnost priročnega menija *Skupna raba / Uvoz...*).

Poizvedeni boste za datoteko, ki jo želite uvoziti.

Ko izberete datoteko, jo uvozite v podatkovno zbirko primerov. Če je datoteka zaščitena z geslom, vas najprej vpraša za geslo.

Uvoženo zadevo lahko najdete v skupini *Colleagues*, če je bilo ime avtorja v datoteki, sicer jo boste našli v skupini *Other*. Po odprtju primera lahko sami preprosto spremenite podatke o primeru ali prenesete analizo v enega od svojih drugih primerov.

Izvoz celotne zbirke podatkov o primerih

Ko izvozite celotno zbirko podatkov o zadevah, jo lahko uvozite samo v računalnik z licenco, ki je registrirana na vaše ime.

Če želite izvoziti celotno zbirko podatkov o zadevah, uporabite možnost v meniju Izvoz celotne zbirke podatkov o zadevah... (Možnost priročnega menija *Skupna raba / Izvozite celotno podatkovno zbirko primerov...*).

Odpre se pogovorno okno, v katerem lahko določite geslo za zaščito te datoteke (zelo priporočljivo).

Možnosti izvoza primera

Za zaščito zasebnosti uporabite geslo.

Geslo

[Prekliči V REDU](#)

Po pritisku na gumb *OK* boste morali navesti ime in lokacijo datoteke.
Datoteko prenesite v drug računalnik in tam naredite Import.

Izvoz spremenjenih primerov

Izvoz spremenjenih primerov je najprilagodljivejši način za sinhronizacijo informacij o primerih med več računalniki.

Če želite izvoziti spremembe, uporabite možnost menija Izvozi spremenjene primere. (Možnost priročnega menija *Skupna raba / Izvozite spremenjene primere...*).

Odpri se pogovorno okno, v katerem lahko določite, kaj je treba sinhronizirati:

Možnosti izvoza primera

Zadnja sinhronizacija

Začnite pri

3/4/23

4:22 AM

Število izbranih primerov 12

Za zaščito zasebnosti up

Geslo

Podrobnosti [Prekliči](#) [V REDU](#)

Privzeto je vnesen datum zadnje sinhronizacije. Če želite sinhronizirati vse spremembe po drugem datumu in času, spremenite vrednost. Za pregled nad tem, kateri primeri bodo vključeni v izvoz, pritisnite gumb *Podrobnosti...*, da dobite seznam primerov in čas njihove zadnje spremembe.

Uvoz spremenjenih primerov

Spremenjene primere lahko uvozite v drug računalnik. (Možnost priročnega menija *Skupna raba / Uvoz...*). Ko izberete datoteko, se odpre pogovorno okno z informacijami o potrebnih ukrepih sinhronizacije:

Možnosti za uvoz spremenjenih primerov

Novo - 5. jan. 2014 - Holiday, Jimmy - 1942

Združitev - 6. jan. 2014 - St.Clair, Bonnie - 1...

Zamenjajte - 6. jan. 2014 - Eastwood, Herny...

Novo - 6. jan. 2014 - Baker, Charles - 1950

Novo - 7. jan. 2014 - Smarting, All - 1962

Združitev - 7. jan. 2014 - Williams, Charita - ...

Prezreti - 20. jan. 2014 - Underwood, Sam - ...

[Ignoriraj](#) [Novo](#) [Zamenjava](#) [Združitev](#) [Ponastavitev](#)

[Prekliči](#) [V REDU](#)

Pomemben je skrajni levi stolpec. Ta stolpec ima lahko štiri različne vrednosti:

Novo Primera ni v lokalni zbirki podatkov. Ustvarjen bo na novo.

Zamenjava Primer v lokalni zbirki podatkov ni spremenjen, vendar je različica v izvozni datoteki novejša. Prepisana bo z novimi podatki.

Združitev Ohišje je bilo spremenjeno v obeh računalnikih. Informacije v izvoznih datotekah se združijo z informacijami v lokalni zbirki podatkov. Obstoječe informacije se ne prepišejo, temveč se kopirajo nove.

Ignoriraj Zdi se, da ta zadeva ni spremenjena v nobenem od obeh računalnikov. Nič ni narejeno.

Ukrep lahko spremenite za vse primere na seznamu. Izberite več primerov tako, da jih kliknete, nato pa pritisnite katerega od gumbov *Ignore*, *New*, *Replace* ali *Merge*. S pritiskom na gumb *Reset* se vsa dejanja povrnejo na prvotno nastavitvev.

Če je dejanje izrecno nastavljeno na *New*, bo primer kopiran kot nov primer, tudi če je podoben primer že prisoten v lokalni zbirki podatkov. To lahko storite, kadar ste v dvomih, saj bosta po uvozu prikazana dva primera z istim imenom, ki ju lahko sami preverite. Običajno to nikoli ni potrebno, saj možnost *Merge* ne bo zavrgla nobenih informacij.

Samodejno varnostno kopiranje

Da bi olajšali izdelavo varnostnih kopij, program enkrat na dan samodejno ustvari izvoz celotne podatkovne zbirke primerov. Te varnostne kopije se hranijo za zadnjih 7 dni. S tem lahko izdelate lastne varnostne kopije, ne da bi vedeli, kje program hrani svoje notranje podatkovne zbirke. Če želite izvedeti več o tem, kje so varnostne kopije in kako jih obnoviti v nujnih primerih, se obrnite na oddelek za podporo.

Analizni modul

Hitri začetek

Za nestrpneže med vami...

Svetujemo vam, da preberete poglavja pomoči o analizi, saj boste z malo osnovnih informacij svoje delo opravili veliko učinkoviteje. Če želite knjigo prebrati pozneje in takoj začeti, boste s tem povzetkom začeli v minuti.

Začeti s primerom ali ne?

V mnogih primerih je analiza narejena, ker je povezana z bolnikom in jo boste morda želeli shraniti za poznejšo uporabo. V tem primeru je priporočljivo najprej ustvariti primer ali odpreti obstoječi primer, saj bo vaša analiza shranjena na pravem mestu. Ko je zadeva odprta, ji lahko preprosto dodate novo analizo. Podrobne informacije o tem, kako organizirati primere in analize, najdete v razdelku *Modul za primere*.

Če želite opraviti samo hitro analizo brez konteksta pravega primera, preprosto ne odprite ali ustvarite primera in samodejno se bo ustvaril privzeti primer (z imenom *Neimenovani primer*), v katerega bo shranjena analiza. Analizo najdete v tej zadevi, označeno z današnjim datumom.

Dodajanje rubrik

Dodajanje rubrik v analizo je preprosto. Najprej izberite rubriko v modulu *Book*. Rubrika je izbrana, ko je označena s svetlo rumeno barvo. Nato kliknite in pridržite rubriko, da se odpre priročni meni. (Možnost priročnega menija *Dodajte rubriko k analizi*). Pri iskanju ustreznega rubrike vam lahko pomaga modul *Find*.

Ustvarjanje analize

Odpiranje modula Analiza

Pojdite v modul Analiza tako, da kliknete zavihek *Analiza*. Če ste že odprli primer in izbrali analizo, bo zaslon videti približno takole:

Demo case, Andrew
Analiza 3. januar 2009, A simple analysis - using
 Analiza uporablja 15 rubrike v 4 simptomih.

- ▼ **523 Mental activity**
 - 16 Mind; Activity; night
 - 1 Mind; Activity; midnight, until
 - 83 Mind; Activity; hyperactive
 - 488 Mind; Cheerfulness
 - 32 Mind; Restlessness, nervousness; se
 - 1 Mind; Theorizing; evening
 - 2 Mind; Theorizing; night
- ▼ **83 Sensitive to noise**
 - 25 Mind; Noises; aversion to
 - 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise
 - 58 Sleep; Waking; noise, from
- ▼ **60 Sleeplessness**
 - 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 - 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivaci
 - 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse,
- ▼ **102 Generalities**

Standard	Majhna pravna (...)	Ma
coff .	coff .	cof
nux-v	bor	nux
lach	sel	lac
chin	chin	chi
sulph	kola	sul
acon	nux-v	cor
calc .	sia-c	cal
con	sul-ac	acc
bell .	con	bor
sul-ac	ang	bel
bor	op	ars
ars	ign	ign
sel	bamb-a	sul
ign	tax	sel
phos	lach	nat
op	ars	pho
nat-m	ant-c	op
agar	mez	pul
puls	canth	lyc
ang	anis	ang

repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort

Knjiga Poišči Primer **Analiza** MM

Okno je razdeljeno na dva dela:

- simptome in rubrike, uporabljene za to analizo,
- rezultate analize.

Podrobno jih bomo obravnavali, začenši s prvim.

Upoštevajte, da so tukaj uporabljeni primeri del demo primerov, ki jih najdete v skupini "Drugo" v modulu Case. S temi primeri se lahko prosto igrate. Ob vsakem zagonu programa *Complete Dynamics* se prvotni demo primeri ponovno uvrstijo v skupino "Drugo".

Simptomi v primerjavi z rubrikami

Ko zberete podatke o bolniku, poiščete v repertoriju rubrike, ki ustrezajo bolnikovi situaciji.

Velika pomanjkljivost tega pristopa je, da je za nekatere simptome bolnika potrebna ena sama rubrika repertorija, medtem ko je za druge simptome mogoče najti več rubrik, ki skupaj izražajo pritožbo. Kadar za izražanje enega simptoma uporabimo več rubrik, se zdravila, ki ustrezajo temu simptomu, samodejno štejejo močnejše, zato bo simptom dobil pretirano vrednost v primerjavi z drugimi simptomi. Prav tako bolnik ne izraža svojih simptomov z repertorijskim jezikom. Zbirka repertorijskih rubrik zato ni pravi prikaz bolnikovih pritožb, zlasti če ni mogoče najti rubrik, ki bi bolnikove simptome izrazile 100-odstotno dobesedno.

Complete Dynamics te težave rešuje z razlikovanjem med simptomi in rubrikami.

Najprej lahko vnesete analizirane simptome bolnika. Drugič, na te simptome se lahko vežejo rubrike repertoarja.



Modul za analizo lahko samodejno izravna rezultate analize glede na dejstvo, da so nekateri simptomi izraženi z malo rubrikami, medtem ko so drugi simptomi izraženi z velikim številom rubrik. Tako lahko svobodno izberete, koliko rubrik potrebujete za ustrezno izražanje bolnikovih simptomov v repertorijskih rubrikah, ne da bi pri tem porušili ravnovesje rezultatov analize!

Simptomi so jezik Pacient - Rubrike so jezik Repertorij.

Simptomi imajo še več prednosti. Ker so simptomi jezik bolnika, je simptomu enostavno dodeliti rang pomembnosti, ne da bi bilo treba izrecno manipulirati z rangom posameznih rubrik (imenujemo ju utež simptoma in utež rubrike, razložena sta drugje). Prednosti je še več, vendar se boste o njih prepričali sami.

Seveda je za hitro in preprosto analizo ustvarjanje Simptomov povezano z nekaterimi režijskimi stroški, ki jih morda ne želite. V tem primeru preprosto ne ustvarjajte Simptomov. Vse rubrike se nato samodejno uvrstijo pod "splošni simptom", ki vam ni viden.

Primer. Spodaj sta dva posnetka zaslona iz primera *Demo Andrew*, eden brez in drugi z uporabo Simptomov:

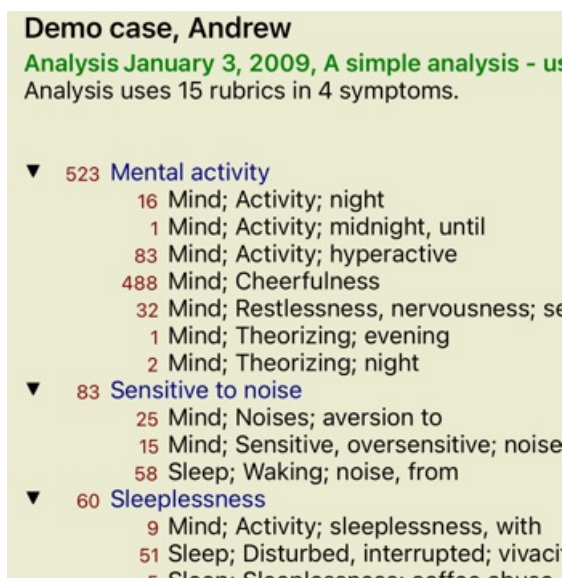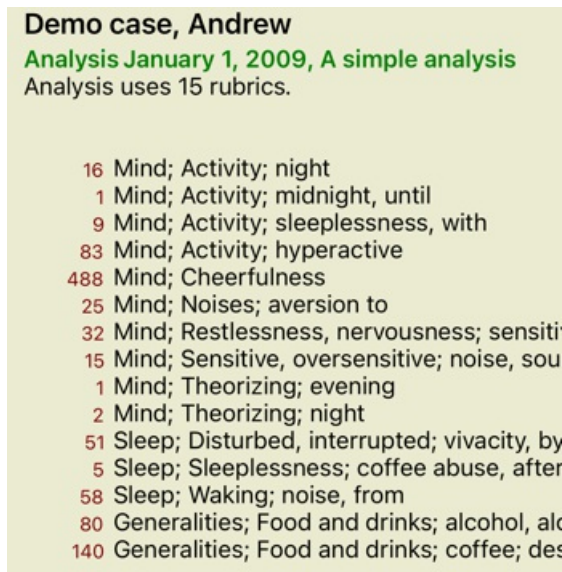

Varianta s Simptomi je veliko bolj jasna!

Ustvarjanje simptomov in dodajanje rubrik

Ko imate odprt primer in izbrano analizo, lahko analizi dodate nov simptom. (Možnost priročnega menija *Dodajte simptom*).

Če želite izbrisati simptom (in vse rubrike, vezane nanj), ga na seznamu izberite z miško ali tipkovnico, nato pa pritisnite tipko Delete. (Možnost priročnega menija *Izbriši izbrano*).

Podrobnosti simptoma lahko urejate tako, da dvakrat kliknete nanj. (Možnost priročnega menija *Simptom urejanja*).

Rubrika se vedno doda iz modula *Book* ali *Find*. (Možnost priročnega menija *Dodajte rubriko k analizi*).

Rubrika se nato doda simptomu, ki je bil izbran kot "trenutni" simptom na seznamu simptomov.

Rezultati

Rezultat analize


Ko analizi dodamo simptome in rubrike, je čas, da si ogledamo rezultate.


Ti rezultati so prikazani na desni strani okna.

Rezultate analize si lahko ogledate na dva načina:

- pregled več rezultatov, ki temeljijo na isti analizi.
- podroben pregled posameznega rezultata analize.

Prikaz rezultatov več analiz

Izberete lahko pregled več rezultatov. (Gumb orodne vrstice ). Videti bo takole:

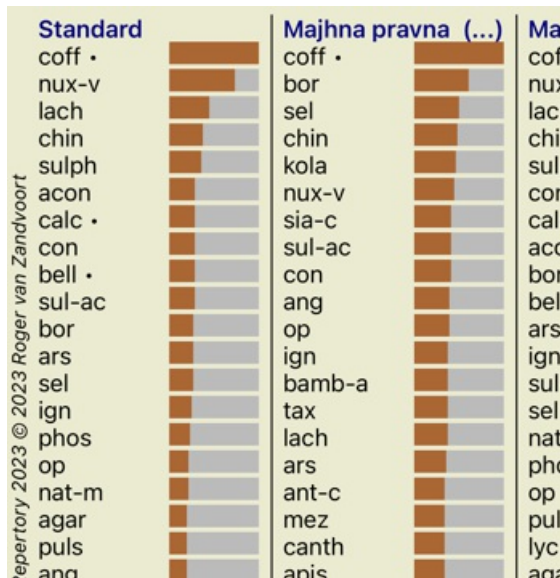

Standardne metode analize

Standardni rezultati na tej sliki pomenijo naslednje:

<i>Standard</i>	To je standardni rezultat analize, ki temelji na skrbno izbranih parametrih.
<i>Majhna pravna sredstva</i>	To pomeni, da so manjša zdravila pomembnejša od večjih (polihrestni). S tem se izravna neenakomerna pojavnost zdravil v celotnem repertoarju. Polihrestni niso izpuščeni iz analize, le njihova prevlada je manjša.
<i>Majhne rubrike</i>	Pri tem so rubrike z malo sredstvi bolj pomembne kot rubrike z veliko sredstvi. Tako imajo bolj značilne rubrike večji vpliv na rezultat kot zelo pogoste rubrike.
<i>Bönninghausen</i>	Pri tej vrsti analize se sredstvo šteje na podlagi njegovega pojavljanja v sorodnih rubrikah v repertoarju. Bönninghausenova analiza se uporablja predvsem pri večjih in bolj splošnih rubrikah. Pomembnejši je tudi popravek za polarne rubrike. Za več informacij glejte <i>Analiza - Bönninghausen</i> .
<i>Enostavno štetje</i>	To je zelo preprosto štetje, kot so ga v starih časih izvajali s svinčnikom in papirjem. Za vse rubrike v analizi se stopnjevanje vseh pravnih sredstev preprosto sešteje.

Izbira uporabljenih metod analize

Morda vas ne zanimajo vse standardne metode analize, ki jih ponuja *Complete Dynamics*. Določite lahko, katere analize se bodo prikazale in v kakšnem vrstnem redu bodo prikazane. To lahko spremenite v nastavitvah *Preferences*. Za več informacij glejte razdelek *Prednastavitve*.

Podrobnosti o rezultatih analize

Ko si ogledate rezultat na zgornji sliki, boste opazili, da ni natisnjenih nobenih števil. Za vsakim zdravilom je prikazana le vrstica, ki prikazuje relativno pomembnost zdravila. Pravna sredstva so razvrščena po pomembnosti. Čim krajša je barvna vrstica, tem manj pomembno je zdravilo pri danem rezultatu.

Če želite, da so v rezultatu prikazane številke, lahko pritisnete gumb v orodni vrstici. (Gumb orodne vrstice **1**). Rezultat bo videti takole:

Standard			Majhna pravna s
coff •	100 / 12 / 3		coff • 100 /
nux-v	75 / 10 / 4		bor 61 /
lach	46 / 8 / 4		sel 51 /
chin	39 / 9 / 4		chin 49 /
sulph	36 / 6 / 4		kola 48 /
acon	30 / 5 / 4		nux-v 46 /
calc •	30 / 6 / 3		sia-c 42 /
con	30 / 5 / 3		sul-ac 42 /
bell •	29 / 6 / 3		con 41 /
sul-ac	29 / 5 / 4		ang 41 /
bor	28 / 6 / 4		op 40 /
ars	28 / 7 / 3		ign 39 /
sel	27 / 5 / 4		bamb-a 38 /
ign	26 / 6 / 3		tax 38 /
phos	24 / 6 / 4		lach 38 /
op	22 / 5 / 3		ars 36 /
nat-m	22 / 5 / 4		ant-c 35 /
agar	20 / 5 / 3		mez 35 /
puls	20 / 4 / 3		canth 35 /
ang	20 / 5 / 4		anis 34 /

V nekaterih primerih morda ne boste želeli razvrstiti rezultatov po pomembnosti, temveč glede na število simptomov in rubrik, v katerih se zdravilo pojavlja.

Nato lahko pritisnete gumb v orodni vrstici ! , kar pomeni "Razvrsti analizo po številu simptomov/rubrik". (Gumb orodne vrstice !).

Že predpisana zdravila

Pogosto je priročno hitro prepoznati, katera zdravila so bila bolniku že predpisana.

Vsa zdravila, ki so bila predhodno predpisana, so za imenom označena s piko.

Iskanje povezave med rubrikami in pravnimi sredstvi

S klikom na rubriko ali sredstvo v rezultatu lahko hitro preverite povezavo med rubrikami in sredstvi.

Nato so poudarjena ustrezna pravna sredstva ali rubrike.

Primer: Ob kliku na rubriko *Um; občutljiv, preobčutljiv; hrup, na; boleča občutljivost na se* v območju rezultatov prikaže naslednje:

Standard		Majhna pravna (...)	Ma
coff •		coff •	cof
nux-v		bor	nux
lach		sel	lac
chin		chin	chi
sulph		kola	sul
acon		nux-v	cor
calc •		sia-c	cal
con		sul-ac	acc
bell •		con	bor
sul-ac		ang	bel
bor		op	ars
ars		ign	ign
sel		bamb-a	sul
ign		tax	sel
phos		lach	nat
op		ars	pho
nat-m		ant-c	op
agar		mez	pul
puls		canth	lyc
ang		anis	ars

V trenutku vidite, katera sredstva so v tej rubriki!

Primer: Klik na zdravilo *sulph* prikaže naslednji pregled simptomov in rubrik:



Demo case, Andrew
Analysis January 3, 2009, A simple analysis - using
 Analysis uses 15 rubrics in 4 symptoms.

- ▼ 523 **Mental activity**
 - 16 Mind; Activity; night
 - 1 Mind; Activity; midnight, until
 - 83 Mind; Activity; hyperactive
 - 488 Mind; Cheerfulness
 - 32 Mind; Restlessness, nervousness; se
 - 1 Mind; Theorizing; evening
 - 2 Mind; Theorizing; night
- ▼ 83 **Sensitive to noise**
 - 25 Mind; Noises; aversion to
 - 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise
 - 58 Sleep; Waking; noise, from
- ▼ 60 **Sleeplessness**
 - 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 - 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivaci
 - 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse,
- ▼ 192 **Generalities**

In v preblisku si oglejte, v katerih rubrikah se pojavlja *sulph*. Poleg tega je izbrano zdravilo poudarjeno tudi v rezultatih drugih analiz, tako da takoj vidite relativno razvrstitev v različnih analizah.

Doslej za pregled več analiz. Oglejmo si podroben pregled posameznega rezultata analize...

Prikaz podrobnega pregleda posameznega rezultata analize

Podrobnejši pregled posamezne analize lahko po želji prikažete v pogledu tabele ali v pogledu mreže. (Gumb orodne vrstice , gumb orodne vrstice ).

Pogled tabele je videti takole:

Demo case, Andrew
Analiza 3. januar 2009, A simple analysis - using
 Analiza uporablja 15 rubrike v 4 simptomih.


- ▼ 523 **Mental activity**
 - 16 Mind; Activity; night
 - 1 Mind; Activity; midnight, until
 - 83 Mind; Activity; hyperactive
 - 488 Mind; Cheerfulness
 - 32 Mind; Restlessness, nervousness; se
 - 1 Mind; Theorizing; evening
 - 2 Mind; Theorizing; night
- ▼ 83 **Sensitive to noise**
 - 25 Mind; Noises; aversion to
 - 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise
 - 58 Sleep; Waking; noise, from
- ▼ 60 **Sleeplessness**
 - 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 - 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivaci
 - 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse,

Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Z.

	coff	nux-v	lach	chin	sulph	acon	calc	con	bell	sul-ac	bor	ars	sel	ign	phos	op
Mi Activ																
Mi Activ																
Mi Activ																
Mi Chee																
Mi Restl																
Mi Theor																
Mi Theo																
Mi Noise																
Mi Sens																
SI Wakin																
Mi Activ																

Standard

Pogled Mreža je videti takole:

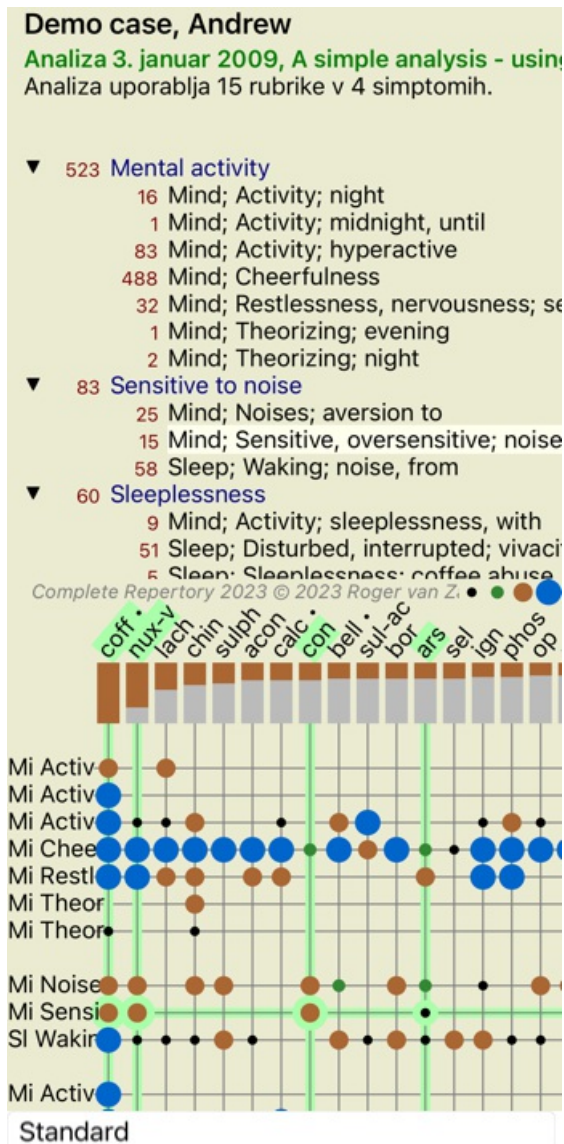

Na ta način boste v eni sliki videli povezavo med rubrikami in sredstvi. Seveda je to mogoče narediti le za eno analizo. Na iPhoneu je razmerje med rubrikami in sredstvi jasnejše, če ga obrnete v ležečo orientacijo.

Bloki ali pike označujejo, da se sredstvo pojavlja v rubriki:

- ◻ • Razred 1
- ◼ • Razred 2
- ◼ • Razred 3
- ◼ • Razred 4

Če želite več podrobnosti, dvakrat kliknite na kroglico, da dobite popolne informacije o sredstvu:

Informacije o pravnem sredstvu

Rubrika: MIND; CHEERFULNESS.

Okrajšava za pravno sredstvo: coff. **razred** 4.

Standardno ime: *Coffea cruda*.

Taksonomija: kraljestvo *Plantae*, podkraljestvo *Tracheobionta*, infra kraljestvo *Streptophyta*, super divizija *Embryophyta*, oddelek *Tracheophyta*, pododdelek *Spermatophytina*, razred *Magnoliopsida*, super natečilo *Asteranae*, natečilo na *Gentianales*, družina *Rubiaceae*, rod *Coffea*, vrste *Coffea arabica*.

Taksonomija APG II: angiosperms, eudicots, core eudicots, asterids, euasterids I, Gentianales, Rubiaceae.


Pojavljanje v sorodnih rubrikah: 5. **povprečna ocena:** 2.2.

Viri

- Boenigk W.** *Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht antipsorischen Arzneien mit handschriftlichen Anmerkungen*, 1833.
- Gellard J.F.** *Repertory of psychic medicines with Materia Medica*, 1897.
- Hering C.** *Analphabetical Repertory of Symptoms of Miasm*, 1881.
- Hering C.** *Guiding Symptoms of our Materia Medica*, 1879.
- Hilg G.H.** *Handbuch der Haupt Anzeigen für die richtige Wahl der homöopathischen Heilmittel*, Hermann Bethmann, 1851.
- Hilg G.H.** *Systematisch-alphabetisches Repertorium der homöopathischen Arzneimittellehre*, Hermann Bethmann (Leipzig), 1848.
- Klein C.B.** *Repertory of Hering's Guiding Symptoms*, 1866.
- Lippman A.** *Keynotes and Red line symptoms of Materia Medica*, 1915.
- Türk C.F. & Söğüt C.** *Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III*, T.O. Weigel (Leipzig), 1847.
- Veritas C.** *Lexicon*, 1985.

Zapri

Prav tako lahko rubrike ali sredstva označite s klikom nanje:

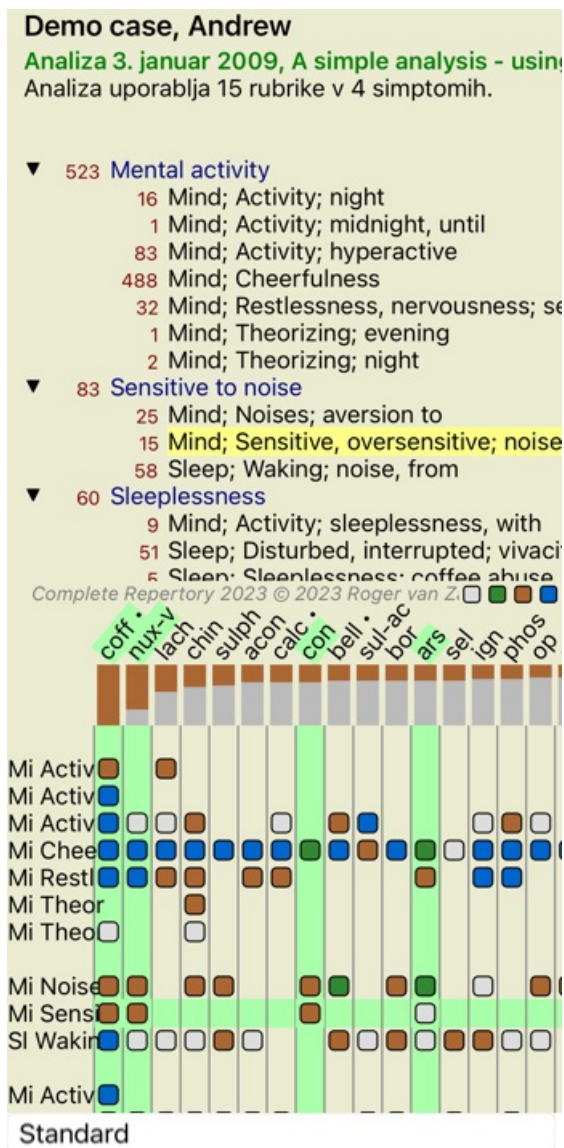

Za prikaz števil ali spremembo vrstnega reda razvrščanja lahko seveda uporabite gumba orodne vrstice **1** in **!**.

Filtriranje rezultatov analize

Napredne teme

Natančna prilagoditev analize

Zdaj, ko ste se seznanili z osnovami oblikovanja analize in interpretacije rezultatov, je čas za nekaj naprednih tem, ki vam omogočajo natančno prilagoditev analize v skladu z vašo interpretacijo bolnikovih informacij.

Obravnavali bomo naslednje teme:

- Uporaba uteži.
- Uravnoteženje simptomov.
- Polarne rubrike in kontra indikacije.
- Rubrične skupine.
- Pregled rubrik.

Številne akcije lahko izvedete za več izbranih vrstic hkrati.

Uporaba uteži

Vsakemu simptomu in vsakemu rubriku lahko dodelite določeno utež. Tako kot pripisujete določeno pomembnost simptomom pacienta ali tako kot se zdravilo v repertoriju lahko pojavi z različnimi ocenami, lahko pripisujete določeno pomembnost vsakemu od simptomov in rubrik.

Z dodelitvijo višje vrednosti je simptom ali rubrika v rezultatu analize pomembnejša.
 Z dodelitvijo uteži 0 je simptom ali rubrika popolnoma izključena iz analize.

Če želite nastaviti utež, najprej izberite simptom ali rubriko tako, da jo kliknete z miško.

Težo lahko nastavite na več načinov:

- 0 (Možnost priročnega menija *Teža / Ignoriraj*).

- 1 (Možnost priročnega menija *Teža / Normalna teža*).
- 2 (Možnost priročnega menija *Teža / Teža x2*).
- 3 (Možnost priročnega menija *Teža / Teža x3*).
- 4 (Možnost priročnega menija *Teža / Teža x4*).

Naslednji primer prikazuje analizo, v kateri so določene uteži (samo za prikaz)

Demo case, Andrew
Analiza 4. januar 2009, An example of symptom
 Analiza uporablja 10 rubrike v 3 simptomih.

▼ **523 Mental activity**
 16 Mind; Activity; night
 1 Mind; Activity; midnight, until
 83 Mind; Activity; hyperactive
 488 Mind; Cheerfulness
 2 32 Mind; Restlessness, nervousne
 X 1 Mind; Theorizing; evening
 X 2 Mind; Theorizing; night

▼ **3 83 Sensitive to noise**
 25 Mind; Noises; aversion to
 15 Mind; Sensitive, oversensitive; n
 3 58 Sleep; Waking; noise, from

▼ **X 60 Sleeplessness**
 9 Mind; Activity; sleeplessness, wi
 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vi
 2 5 Sleep; Sleeplessness; coffee al

▼ **102 Generalities**

Standard	Majhna pravna (...)	Bör
coff •	coff •	cof
nux-v	bor	nux
sulph	asar	bor
ign	lac-rup	sulph
bell •	op	bell
bor	aur-m-n	ign
sel	sel	asa
ars	ign	sel
lach	sia-c	aur
chin	aur-s	chir
asar	ang	lach
aur-m-n	chin	ars
con	ven-m	cor
op	bamb-a	aur
phos	onc-t	hyo
aur-s	am-c	mei
hyos	nat-p	cal
acon	ars	sia-
agar	sul-ac	lac-
lac-rup	agar	on

Knjiga Poišči Primer **Analiza** MM

Na levi strani so prikazani gumbi orodne vrstice. Gumbi v orodni vrstici vedno prikazujejo dejansko vrednost teže izbranega simptoma ali rubrike.



Znak X pred simptomom ali rubriko označuje utež 0 in je izključen iz analize.

Uravnoteženje simptomov

Izravnava simptomov je napreden mehanizem analize, ki izravnava uporabo več/manj rubrik v simptomu. Ko je izravnava vklopljena (kar je običajno), lahko pod simptom postavite poljubno število rubrik, ne da bi pri tem motili analizo.

Pri tradicionalnih analizah bi morali v analizi skrbno izbirati rubrike, saj bi v primeru uporabe prevelikega števila rubrik za izražanje določenega simptoma v analizi začela prevladovati zdravila, ki bi ustrezala temu enemu samemu simptomu. Prav tako, če bi uporabili samo eno rubriko, sredstva iz te rubrike ne bi v zadostni meri prispevala k splošni analizi v primerjavi z rubrikami, uporabljenimi za druge simptome.

Če je vklopljena funkcija Uravnoteženje simptomov, se vsak simptom šteje z utežjo (glejte *Uporaba uteži* zgoraj), ki mu je dodeljena, ne glede na to, ali pod njega postavite en Rubriko ali, recimo, 10 Rubrik.

Simptom uravnoteženja vklopite/izklopite z gumbom v orodni vrstici , ki se nahaja na desni strani okna. (Gumb orodne vrstice .


Oglejmo si primer. V naslednji analizi so za izražanje bolečin v glavi uporabljene številne rubrike. Če ne uporabljamo uravnoteženja, v

rezultatih prevladuje *Glonoinum*, medtem ko z uravnoteženjem *Natrum Muriaticum* postane bolj opazen.

Demo case, Andrew
Analiza 1. februar 2009, Symptoms with many c
 Analiza uporablja 13 rubrike v 4 simptomih.

- ▼ **954 Head pains**
 - 14 Head; Pain, headache; morning; agg
 - 160 Head; Pain, headache; extending to;
 - 188 Head; Pain, headache; extending to;
 - 110 Head; Pain, headache; extending to;
 - 119 Head; Pain, headache; extending to;
 - 944 Head; Pain, headache; forehead
 - 57 Head; Pain, headache; forehead; air;
 - 48 Head; Pain, headache; forehead; eye
 - 14 Head; Pain, headache; bursting; mer
- ▼ **84 Sadness**
 - 84 Mind; Sadness, depression; menses
- ▼ **163 Menses**
 - 127 Female; Menses; pale, watery
 - 105 Female; Menses; thin, liquid
- ▼ **173 Aversions and desires**
 - 173 Generalities; Food and drinks; salt o

Rezultat analize:

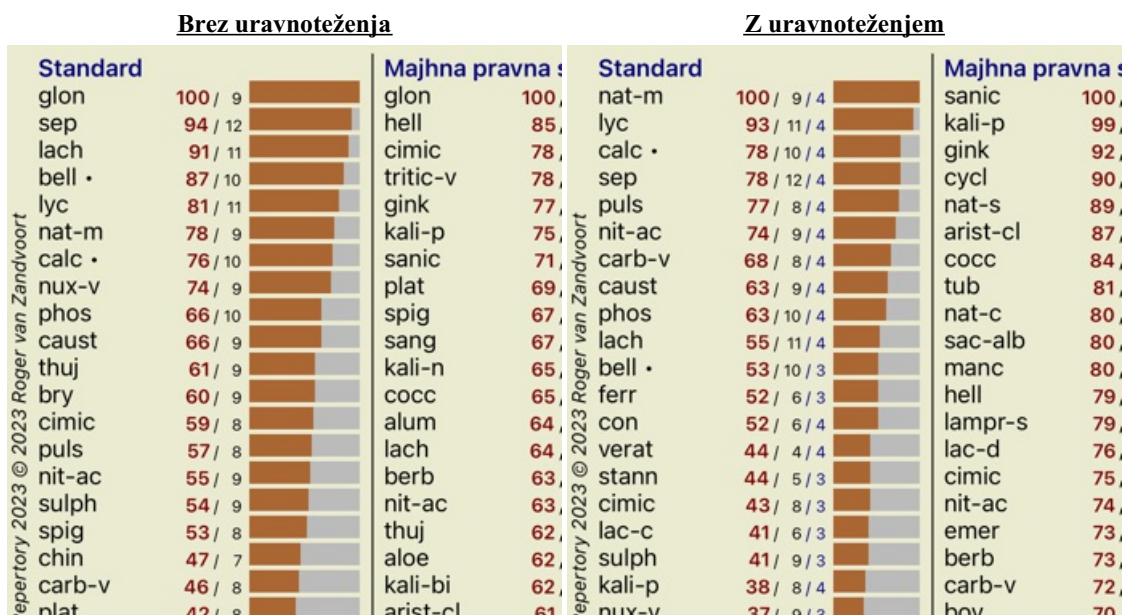


Opomba: Simptomi uravnoteženja ne vplivajo na osnovno analizo *Enostavno štetje*.

Polarne rubrike in kontra indikacije

Polarni rubriki sta dve rubriki, ki imata nasprotni pomen.

Kot primer si oglejmo preprost primer, v katerem je bilo sprva predpisano zdravilo *coff*:

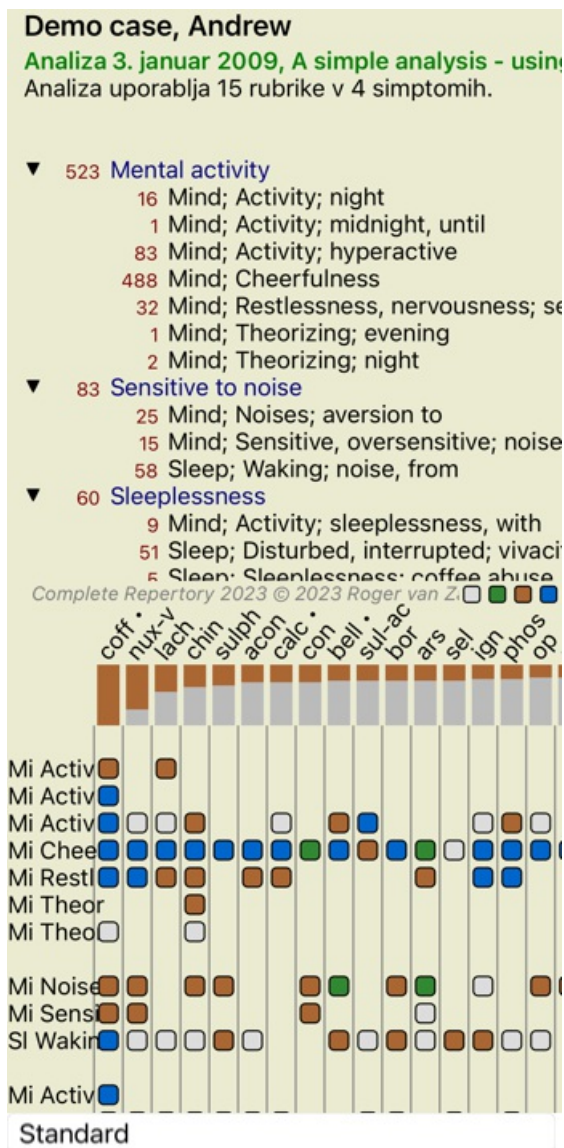


V razdelku *Generalities (Splošnosti)* sta prikazani dve rubriki, ki imata obe polarno rubriko:

- *amel* - agg.
- *želje* - averzija.

Te polarne rubrike je mogoče uporabiti pri analizi s pritiskom na gumb v orodni vrstici ↔ na desni strani okna. (Gumb orodne vrstice ↔).

Zdaj sta pod rubriko *amel* in *želi* prikazana njuna polarna rubrika.

Spremeni se tudi rezultat analize, saj so vrednosti pravnih sredstev zdaj popravljene z vrednostmi v polarnih rubrikah.

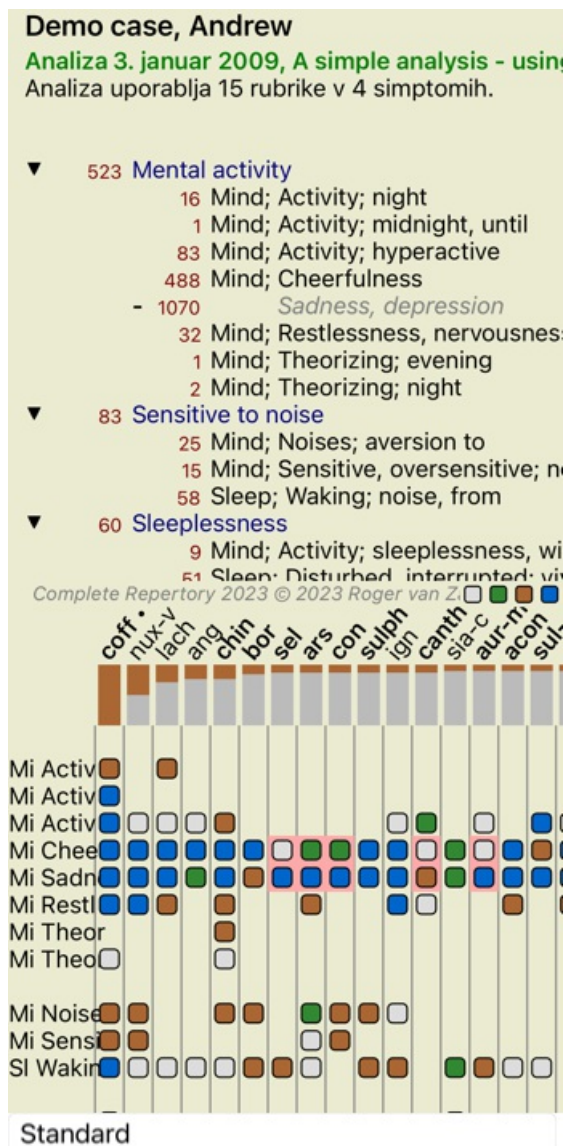

Zdravilo *coff* je zdaj obarvano rdeče, ker je v tej analizi kontra indicirano.

Nasprotna indikacija je situacija, v kateri se sredstvo pojavi v eni rubriki z nizko oceno (1, 2 ali se sploh ne pojavi), v polarni rubriki pa z visoko oceno (3 ali 4).

Bolj zapleten primer je prikazan v naslednji analizi Bönninghausnovega sloga:

Demo case, Andrew

Analiza 25. januar 2011, Bönninghausen style ar
Analiza uporabljaj 10 rubrike.

- 762 Generalities; Exercise, exertion; agg.
- 74 Generalities; Hanging down limbs; amel.
- 930 Generalities; Motion, motions; during
- 650 Generalities; Pressure; agg.
- 187 Generalities; Raising; agg.; limbs
- 590 Generalities; Sit, sitting; agg.
- 179 Generalities; Stand, standing; amel.
- 759 Generalities; Touch; agg.
- 656 Generalities; Warmth; agg.
- 102 Generalities; Wrapping up; agg.


Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Z.

	bell	bry	sulph	puls	phos	calc	led	rhust	lach	ars	nat-m	nux-v	merc	con	chin	ferr
Ge Exer	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ge Hang	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ge Moti	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ge Press	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ge Raisi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ge Sit,	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ge Stan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ge Touch	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ge Warm	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ge Wrap	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Standard

Demo case, Andrew

Analiza 25. januar 2011, Bönninghausen style ar
Analiza uporablja 10 rubrike.

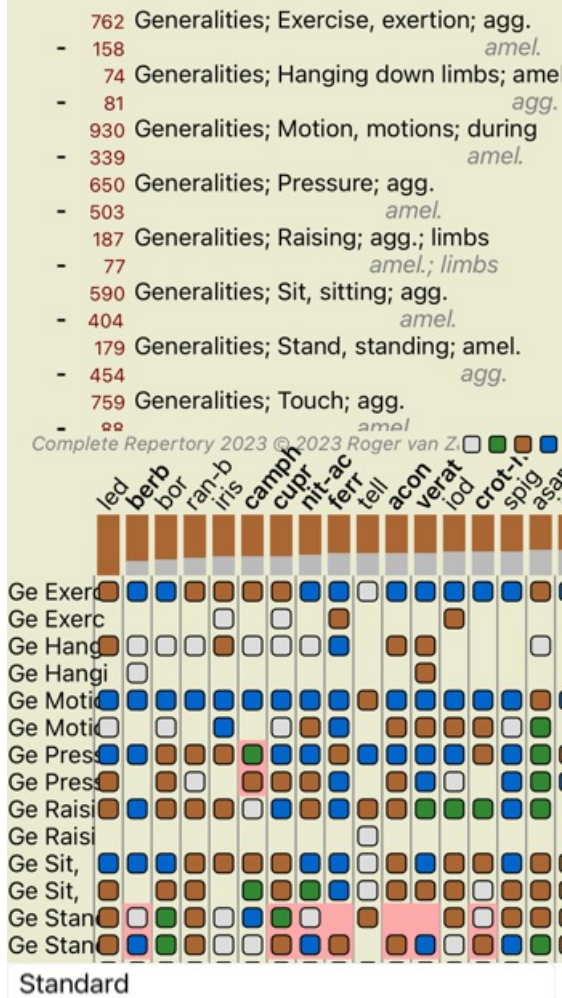

Skupine rubrik

Rubrike združite v skupine, kadar želite, da se dve ali več rubrik šteje, kot da bi bile skupaj ena sama rubrika.

Rubrike lahko razvrstite na dva načina:

- Prečkanje. Uporabljena so samo tista sredstva, ki se pojavljajo v VSEH rubrikah.
- Kombiniranje. Uporabljajo se zdravila iz KATERE koli rubrike.

Primeri razvrščanja v skupine

Križanje rubrik je lahko koristno, kadar v repertoriju ni rubrike, ki bi natančno opisovala bolnikov simptom, ampak so na voljo le bolj splošne rubrike.

Bolnik vam na primer pove, da je med vročino zjutraj v postelji tesnoben. Repertorij nima rubrike *Um; tesnoba; zjutraj; v postelji, v; vročina, med*. Toda namesto tega sta dve bolj splošni rubriki *Um; tesnoba; zjutraj; postelja, v* in *Um; tesnoba; vročina; med*. S križanjem teh dveh rubrik se ustvari nova skupinska rubrika, ki vsebuje samo tista sredstva, ki se pojavljajo v obeh rubrikah.

Združevanje rubrik je lahko koristno, kadar ima bolnik simptom, ki ga ne najdemo natančno, vendar ga lahko najdemo pod bolj specifičnimi simptomi.

Na primer želja po pici. Zakaj ima bolnik rad pico? Morda gre za testo (finačna hrana), paradižnik, salamo, sardele, sir ali olive. Več takšnih posebnih rubrik je lahko koristno združiti v novo rubriko, ne da bi z dodajanjem številnih posebnih rubrik, ki v primerjavi s pacientovimi glavnimi težavami niso pomembne, motili formule analize.

Ustvarjanje skupin rubrik


Na primer, primer z bolečinami v glavi med hojo in strahom pred več vrstami živali:

Demo case, Andrew

Analiza 1. februar 2009, Grouping example

Analiza uporablja 5 rubrike.

- 57 Mind; Fear; dogs, of
- 12 Mind; Fear; rats
- 5 Mind; Fear; wolves, of
- 496 Head; Pain, headache; stitching
- 786 Generalities; Walk, walking; during

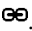Želimo prečkati dve rubriki, ki skupaj opisujeta bolečino v glavi. Izberite rubriko *Glava; bolečina; šivanje* s klikom nanjo in pritisnite gumb v orodni vrstici . (Možnost priročnega menija *Združevanje v skupine / Skupina z drugimi rubrikami...*). Odpre se pogovorno okno, v katerem lahko izberete rubrike, ki jih je mogoče povezati z izbrano rubriko. Na vrhu izberite možnost *Cross*. Izberite rubriko *Generalities; walk, walking; during* in pritisnite gumb OK.

Dodajanje rubrik v skupino rubrik

Metoda razvrščanja v skupine

Oznaka

Izberite eno ali več
to skupino:

Rubrike

Mind; Fear; dogs

Mind; Fear; rats

Mind; Fear; wolves

Head; Pain, headache; stitching

Generalities; Walk, walking; during

[Prekliči V REDU](#)

Za drugo skupino bomo uporabili drugo metodo. Izberite tri rubrike *Um; strah* in še enkrat pritisnite .

Demo case, Andrew

Analiza 1. februar 2009, Grouping example

Analiza uporablja 4 rubrike.

- 57 Mind; Fear; dogs, of
- 12 Mind; Fear; rats
- 5 Mind; Fear; wolves, of
- ▼ 408 *Prekrižane rubrike*
 - 496 Head; Pain, headache; stitching
 - 786 Generalities; Walk, walking; during

Zdaj izberite možnost *Combine* in pritisnite gumb V redu.

Dodajanje rubrik v skupino rubrik

Metoda razvrščanja v skupine

Oznaka

Izberite eno ali več
to skupino:

Rubrike

Mind; Fear; dogs
Mind; Fear; rats
Mind; Fear; wolv

[Prekliči V REDU](#)


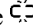
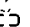
Seznam rubrik, ki je nastal, je zdaj naslednji:

Demo case, Andrew

Analiza 1. februar 2009, Grouping example

Analiza uporablja 2 rubrike.

- ▼ 66 *Kombinirane rubrike*
 - 57 Mind; Fear; dogs, of
 - 12 Mind; Fear; rats
 - 5 Mind; Fear; wolves, of
- ▼ 408 *Prekrižane rubrike*
 - 496 Head; Pain, headache; stitching
 - 786 Generalities; Walk, walking; during

Če želite spremeniti skupino, preprosto kliknite glavno rubriko skupine in pritisnite . V pogovornem oknu vklopite in izklopite rubrike s klikom nanje. Rubriko lahko odstranite iz skupine tudi tako, da jo kliknete in pritisnete . (Možnost priročnega menija *Združevanje v skupine / Odstranitev združevanja v skupine*). Če želite skupino popolnoma odstraniti, kliknite na glavno rubriko skupine in pritisnite . (Možnost priročnega menija *Združevanje v skupine / Odstranitev združevanja v skupine*).

V meniju sta dve možnosti, ki vam omogočata hitro ustvarjanje skupine, ne da bi vam bilo treba izbrati rubrike v pogovornem oknu, kot je prikazano zgoraj.

Najprej lahko izberete dve ali več rubrik in jih nato združite. (Možnost priročnega menija *Združevanje v skupine / Združite izbrane rubrike*).

Najprej lahko izberete dve ali več rubrik in jih nato prekrižate. (Možnost priročnega menija *Združevanje v skupine / Navzkrižno izbrane rubrike*).

Kako se rubrične skupine uporabljajo pri analizi

Če se križa več rubrik, skupina vsebuje samo tista sredstva, ki se pojavljajo v vseh rubrikah v tej skupini. Ocena pravnega sredstva bo najnižja ocena pravnega sredstva v vseh rubrikah.

Pri združevanju več rubrik skupina vsebuje popravke, ki se pojavijo v katerikoli rubriki v skupini. Ocena pravnega sredstva bo najvišja ocena, najdena za pravno sredstvo v katerikoli rubriki v skupini.

Pregled rubrik

Včasih je priročno dobiti pregled vseh rubrik v analizi skupaj z njihovimi sredstvi.

Pri skupinskih rubrikah boste morda želeli preveriti, katera sredstva se pojavljajo v dobljeni skupini.

Če želite prikazati pregled vseh rubrik, izberite *Prikaži pregled rubrik*. (Možnost priročnega menija *Več / Prikaži pregled rubrik*). Odpre se modul *Find*, ki prikazuje naslednje:

COMBINED RUBRICS: MIND; FEAR; DOGS, OF / MIND; FEAR; RATS / MIND; FEAR; WOLVES, OF: absin acon agar **Alum** amph androc arn astac **BAC BELL BOS-S BUFO CALC** calc-ar carc **CAUST** cer chel **CHIN** choc **CIMIC Con** cupr-acet dor dpt dysp-n **Hydrog HYOS** insul **LAC-C** lac-d lac-f lac-h lach lycpr lyss mag-c **Manc** mand med **NAT-M** nat-p nit-ac op ory-c phos **Plac** plat **PLUT-N** polyst pras-c **PULS Sanic Scirr SCORP** sep sil sol-t **STRAM** sulph syc-co tax **TUB** tub-k verat **Xan**

MIND; FEAR; dogs, of: agar **Alum** amph androc astac **BAC BELL BUFO CALC** carc **CAUST** cer chel **CHIN** choc **Con** cupr-acet dor dpt dysp-n **Hydrog HYOS** insul **LAC-C** lac-d lac-f lac-h lach lycpr lyss mag-c **Manc** mand med **NAT-M** nat-p nit-ac ory-c phos plat **PLUT-N** polyst pras-c **PULS Sanic Scirr SCORP** sil sol-t **STRAM** sulph syc-co tax **TUB** tub-k verat **Xan**

MIND; FEAR; rats: absin acon arn bell **BOS-S CALC** calc-ar **CIMIC** op phos **Plac** sep

MIND; FEAR; wolves, of: amph bell cer chel dor

CROSSED RUBRICS: HEAD; PAIN, HEADACHE; STITCHING / GENERALITIES; WALK, WALKING; DURING: acan-p **ACON** act-sp adam **AESC AETH** **AGAR AGN** aids alch-v **ALL-C** allox **ALOE ALUM** **ALUM-P ALUM-SIL ALUMN AM-C AM-M AMBR** ammc **ANAC** anag **ANATH ANG ANT-C ANT-T APIS** apoc aq-des **ARAN ARG ARG-N ARN ARS ARS-I** ars-met ars-s-f **Ars-s-r** arum-t **ASAF Asar** asc-t astac aster **ATRO AUR** aur-ar aur-i **AUR-M-N** aur-s bacch-a **Bad BAMB-A** bapt **Bar-acet BAR-C** bar-i bar-m bar-s **BELL** bell-p **BERB** biti-g blatta **BOR** bos-s both-a **BOV** **BROM Bros-g** bruc **BRY BUFO** bux cadm-s cahin **Calad CALC Calc-acet** calc-ar calc-caust calc-f calc-i **CALC-P CALC-S** calc-sil calen **CAMPH CANN-I** cann-s **CANTH CAPS** caras carb-ac **CARB-AN**










Razvrstitev

Uvod v klasifikacijo simptomov

Samuel Hahnemann's Organon in Kronične bolezni nam pokaže, da Hahnemann svojih zdravil ni izbiral na podlagi celote vseh simptomov, ki jih je mogoče najti v trenutnih ali preteklih situacijah pacienta. Bolnikove simptome je skrbno razvrstil v več kategorij in na podlagi te razvrstitve je izvajal zdravljenje.

Na voljo je Hahnemannova klasifikacija ter skupine A, B, C, D in E, ki jih lahko določite sami.

Možnosti razvrščanja, ki so na voljo v orodni vrstici na levi strani zaslona:

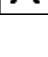Simbol	Ime	Pomen
	Psora	Osnovne motnje. Organon, 6. izdaja, § 80 (psorična miazma).
	Incident	Biografski dogodek, stvari, ki so se zgodile bolniku in so nanj vplivale. Akutna bolezen. Organon § 72 (škodljivi vplivi).
	Epidemija	Bolezni, ki se prenašajo iz zunanjega vira: gripa, legionela, SARS, ošpice, mumps in druge. (vmesne bolezni). Organon § 73 (epidemične bolezni).
	Akutni miasmatski	Bolezen prihaja od znotraj, pogosto jo sproži dogodek, spodbuda od zunaj. Pritožbe so hude. Organon § 73 (prehodna eksplozija latentne psore).
	Podedovana težnja	Tiste bolezni, ki so se pojavile v rodbini in so se genetsko prenesle na bolnika.
	Iatrogeni	Uporaba zdravil in cepljenja, ki jih je oseba prejela. Organon § 74.
	Sycosis	Okužba z gonorejo. Organon § 79 (sikotična miazma).
	Sifilis	Okužba s sifilisom. Organon § 79 (sifilitična miazma).
	Uporabnik A	Brezplačno za lastno uporabo.

B	Uporabnik B	Brezplačno za lastno uporabo.
C	Uporabnik C	Brezplačno za lastno uporabo.
D	Uporabnik D	Brezplačno za lastno uporabo.
E	Uporabnik E	Brezplačno za lastno uporabo.

Razvrstitev se lahko uporablja na ravni Simptomov ali na posameznih rubrikah.

Nastavitev razvrščanja na simptomu bo uporabljena za vse rubrike v simptomu. Vse nastavitve, ki so bile uporabljene za rubrike, se ne bodo več uporabljale.

Oglejte si tudi demonstracijski primer *Enostavni primer razvrščanja*.

Filtriranje in razvrščanje pravnih sredstev

Če se pri analizi uporablja razvrščanje simptomov ali rubrik, se sredstva za vsako analizo samodejno filtrirajo. To filtriranje poteka v skladu z informacijami, ki jih najdemo v Hahnemannovih spisih.

Za *Psora*, zdravila so: vsi minerali in nosode ter Lach, Lyc, Sep, vendar brez Merkurja.

Za *Incident*, *akutni miazmatični*, *epidemični*, so zdravila: vse rastline in živali ter Merc, Ars, Ant-c.

Za *Iatrogene* so zdravila tista, ki jih najdemo v rubrikah *Zastrupitve po zdravilih*, in *Bolezni zaradi cepljenja*.

Za *Podedovana nagnjenost*, zdravila so: vse nosode.

Za druge skupine so prikazana vsa zdravila.

Pripomočki

Razredi A-B-C-D-E se lahko uporabljajo tudi kot preglednice. Z dodeljevanjem le-teh simptomom ali posameznim rubrikam je zelo enostavno ustvariti različne poglede na rezultate analize.

Več informacij

Zgornje informacije o razvrstitvi so omejene.

Odlične informacije o uporabi Hahnemannove klasifikacije najdete na spletni strani <http://www.ewaldstoteler.com>

Več pogledov

Zdaj veste, kako ustvariti analizo. Prav tako veste, kako natančno prilagoditi analizo na podlagi svoje razlage simptomov v tem konkretnem primeru.

Simptomom ali rubrikam ste morda določili uteži. Morda ste jim dodelili klasifikacije. Izbrali ste analitično formulo za tehtanje pomembnosti pravnih sredstev za uporabljene rubrike. Morda ste rezultate filtrirali na podlagi določenega kraljestva zdravil.

Vse te nastavitve so vam pomagale pridobiti najboljši rezultat analize na podlagi vaše razlage primera.

Vendar je to vaša interpretacija, vaš pogled na bolnikove simptome. Ti simptomi so nespremenljivi, so opažena dejstva, ki ste jih zbrali. Ne glede na to, kakšno mnenje imate, so opaženi simptomi realnost, s katero morate delati. (Organon §18)

Vendar pa bi lahko razmislili o tem, da na iste simptome pogledate z druge perspektive, z drugačnim pogledom in si jih razlagate na drugačen način. Seveda lahko spremenite vse nastavitve analize in preverite, kaj se bo zgodilo. Vendar se je vaša prvotna analiza spremenila in če jo želite ponovno prikazati, morate spremeniti vse spremenjene nastavitve.

Da bi vam omogočili spreminjanje nastavitev analize, ne da bi pri tem izgubili prvotne nastavitve, smo ustvarili več pogledov.

Kaj je pogled analize?

Pogled analize je skupek vseh nastavitev, ki jih lahko uporabite za analizo.

Uteži	×0 ×1 ×2 ×3 ×4
Razvrstitev	○ ⚡ ⋯ ^ Y → Ⓖ × A B C D E
Simptomi ravnotežja	⚖
Pravilno Polar	↔
Formula za analizo	Na primer "Small Remedies"
Filter za odpravo napak	Na primer "Rastline"

Ustvarite lahko več pogledov, pri čemer ima vsak svojo zbirko nastavitev.

Kot primer si oglejte *Demonstracijski primer Andrew*, analizo *Več pogledov*.

Ustvarjanje pogleda

Nov pogled lahko ustvarite v meniju ali orodni vrstici. (Možnost priročnega menija *Oglejte si / Dodajanje novega pogleda*).

Novi pogled je kopija prvotnega pogleda s popolnoma enakimi nastavitvami. Vse spremembe, ki jih naredite v nastavitvah v novem pogledu, veljajo izključno za ta pogled. Vsi drugi pogledi ostanejo enaki kot prej. Če želite, lahko novemu pogledu po želji dodelite ime.

Upoštevajte, da vsi pogledi uporabljajo popolnoma enako zbirko simptomov in rubrik. Položaj bolnika je enak, le vaša interpretacija je pri vsakem pogledu drugačna.

V meniju lahko preprosto preklopite iz enega pogleda v drugega. (Možnost priročnega menija *Oglejte si / Standard*).

Če izbranega pogleda ne želite več uporabljati, ga lahko izbrisate. (Možnost priročnega menija *Oglejte si / Odstranitev trenutnega pogleda*).

Vedno lahko spremenite ime, ki ste ga dodelili pogledu. (Možnost priročnega menija *Oglejte si / Preimenovanje trenutnega pogleda*).


Spremenite lahko tudi vrstni red prikazovanja pogledov v meniju ali orodni vrstici. (Možnost priročnega menija *Oglejte si / Premaknite trenutni pogled na levo*).

Pregled rezultatov analize vsakega pogleda

V območju z rezultati analize na desni strani zaslona so prikazani rezultati analize za izbrani pogled. Ko preklopite na drug pogled, se rezultati spremenijo v rezultate za ta pogled.

Hkrati si lahko ogledate tudi vse rezultate ogledov. (Gumb orodne vrstice ☺).

Videti bo takole:

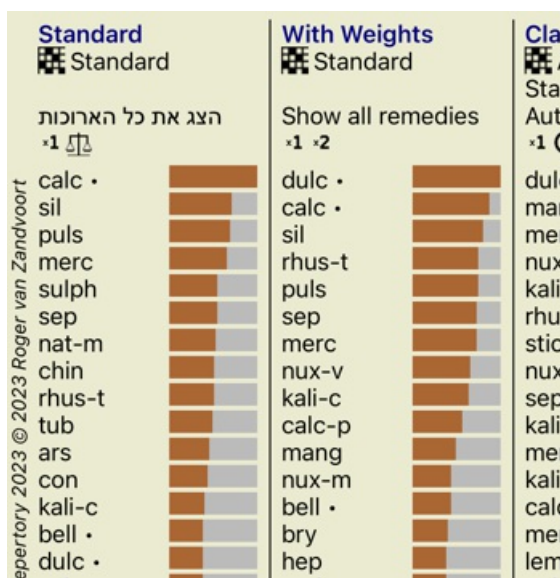

Je podoben pregledu seznama za analizo, vendar prikazuje en seznam rezultatov na pogled. Na vrhu je prikazan povzetek nastavitve, ki se uporabljajo za vsak pogled.

- Analiza, izbrana za slog izpisa tabele.
- Če se pri analizi uporablja klasifikacija, navedite formulo za analizo, ki se uporablja.
- Uporabljeni filter za odpravljanje nepravilnosti.
- Majhna slika za vsako veljavno nastavitve analize.

Bönninghausen

Nekaj informacij o Bönninghausenovi analizi

Metoda Bönninghausenove analize ne uporablja drugega repertorija, temveč dela s spletnim mestom *Complete Repertory* kot druge analize. Vse rubrike iz starih repertoarjev Bönninghausena so prisotne na spletni strani *Complete Repertory*.

Bönninghausenov analitični sistem je metodologija, ki jo uporabimo, ko to zahtevajo bolnikovi simptomi, in nima nobene zveze z določenim repertorijem, temveč z rubrikami, ki so posplošene in jih lahko najdemo v vsakem repertoriju.

Razlika je v načinu izračuna.

Namesto da bi se osredotočili samo na to, kako je zdravilo predstavljeno v določeni rubriki, je velik poudarek na njegovem pojavljanju v sorodnih rubrikah v drugih delih repertorija.

Izračun se opravi na naslednji način:

- Ne upoštevajte ocene sredstva, kot je prikazana v rubriki.
- Namesto tega uporabite oceno popravka, ki se izračuna na podlagi pojavljanja popravka v povezanih rubrikah.
- Večjo težo dajte zdravilu, če se pojavlja v več sorodnih rubrikah v različnih rubrikah repertorija (kot so Um, Glava, Splošnosti itd.).
- Popravite pojavljanje v polarnih rubrikah (npr. amel. - agg. ali desire - averzija).

Pri Bönninghausnovem slogu analize boste običajno uporabljali bolj splošne in obsežnejše rubrike.

Mešana uporaba manjših specifičnih rubrik z večjimi splošnimi rubrikami na splošno ni koristna.

Kakovost analize

Umetnost izdelave dobre analize

Dobra analiza bolnikovih simptomov je umetnost, katere obvladovanje ni samoumevno. V različnih šolah lahko poučujejo različne metode. Posamezni učitelji spodbujajo svoje osebne stile in teorije. Dobra analiza je za vsakega bolnika drugačna. Orodje Kakovost analize vam pomaga preprečiti pogoste napake in tako poveča možnost za uspeh.

Kazalnik kakovosti

V modulu Analysis je na vrhu strani majhen barvni gumb. Barva označuje kakovost analize.


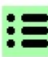
- Zelena barva: Zelena: le manjša priporočila za izboljšave.
- Rumena barva: Kakovost je mogoče izboljšati.
- Rdeča: Ta analiza ima resne težave.

S klikom na kazalnik kakovosti si lahko ogledate poročilo s predlogi za morebitne izboljšave.






Modul Materia Medica

Odpiranje modula Materia Medica


Pojdite v modul Materia Medica s klikom na zavihek MM.



Complete	Boericke, William - Pocket Ma (...)
Allen, He	Arnica montana
Keynote	
The Mai	
Allen, Tir	Leopard's Bane
Clinical	Produces conditions upon the system
The Enc	quite similar to those resulting from
Anschut:	injuries, falls, blows, contusions. Tinnitus
New, ok	aurium. <i>Putrid phenomena</i> . Septic
Boericke	conditions; prophylactic of pus infection.
Pocket i	Apoplexy, red, full face.
Boger, C:	It is especially suited to cases when any
A synop	injury, however remote, seems to have
Bönningl	caused the present trouble. <i>After</i>
Charact	<i>traumatic injuries</i> , overuse of any organ,
Clarke, J	strains. Arnica is disposed to cerebral
Dictione	congestion. Acts best in plethoric, feebly
Cowpert	in debilitated with impoverished blood,
A Textb	cardiac dropsy with dyspnea. A muscular
Dewey, V	tonic. Traumatism of grief, remorse or
Essentie	sudden realization of financial loss. Limbs
Farringtc	and body ache as if beaten; joints as if
Clinical	sprained. Bed feels too hard. Marked
Hahnem:	effect on the blood. Affects the venous
Materia	system inducing stasis. Ecchymosis and
Organoi	hemorrhages. Relaxed blood vessels,
Hansen,	black and blue spots. Tendency to
A Text-é	hemorrhage and low-fever states.
Hering, C	Tendency to tissue degeneration, septic
The Gui	conditions, abscesses that do not mature.
Hutchins	<i>Sore, lame, bruised feeling</i> . Neuralgias
700 Rec	originating in disturbances of
Kent, Jar	pneumo-gastric. Rheumatism of muscular
	and tendinous tissue, especially of back
	and shoulders. Aversion to tobacco.
	<i>Influenza</i> . Thrombosis. Hematocele.
	Mind. -Fears touch, or the approach of

 Indeks  Knjiga  Poišči  Primer  MM

Izbira pravnega sredstva

V zgornje polje v orodni vrstici lahko vnesete okrajšavo zdravila. Če kratice ne poznate, lahko poiščete zdravilo s pritiskom na  za poljem.

Izbira knjige

Ko izberete zdravilo, lahko izberete katerega koli od virov Materia Medica, ki so navedeni na levi strani zaslona. Če izbranega sredstva ni v knjigi, je naslov knjige natisnjen v sivi barvi.

Complete
Allen, He
Keynote
The Ma
Allen, Tir
Clinical
The Enc
Anschut
New, ol
Boericke
Pocket
Boger, C
A synop
Bönningl
Charact
Clarke, J
Dictione
Cowpert
A Textbo
Dewey, V
Essentie
Farrington
Clinical
Hahnema
Materia
Organoi
Hansen,
A Text-b
Hering, C
The Gui
Hutchins
700 Rec
Kent, Jar

Če želite za branje uporabiti čim več prostora, lahko kazalo skrijete z gumbom orodne vrstice ☰.

Boericke, William - Pocket Manual of (...)

Arnica montana

Leopard's Bane

Produces conditions upon the system quite similar to those resulting from injuries, falls, blows, contusions. Tinnitus aurium. *Putrid phenomena*. Septic conditions; prophylactic of pus infection. Apoplexy, red, full face.


It is especially suited to cases when any injury, however remote, seems to have caused the present trouble. *After traumatic injuries*, overuse of any organ, strains. Arnica is disposed to cerebral congestion. Acts best in plethoric, feebly in debilitated with impoverished blood, cardiac dropsy with dyspnea. A muscular tonic. Traumatism of grief, remorse or sudden realization of financial loss. Limbs and body ache as if beaten; joints as if sprained. Bed feels too hard. Marked effect on the blood. Affects the venous system inducing stasis. Ecchymosis and hemorrhages. Relaxed blood vessels, black and blue spots. Tendency to hemorrhage and low-fever states. Tendency to tissue degeneration, septic conditions, abscesses that do not mature. *Sore, lame, bruised feeling*. Neuralgias originating in disturbances of pneumo-gastric. Rheumatism of muscular and tendinous tissue, especially of back and shoulders. Aversion to tobacco. *Influenza*. Thrombosis. Hematocele.

Mind. -Fears touch, or the approach of anyone. Unconscious; when spoken to answers correctly, but relapses. Indifference; inability to perform continuous active work; morose, delirious. Nervous; cannot bear pain; whole body oversensitive. Says there is nothing the matter with him. Wants to be let alone. Agoraphobia (fear of space). After mental


[Indeks](#)
[Knjiga](#)
[Poišči](#)
[Primer](#)
[MM](#)

Indeks pravnih sredstev

Če si želite ogledati vsa sredstva, ki so na voljo v knjigi, odprite priročni meni na naslovu knjige. (Možnost priročnega menija *Indeks*).

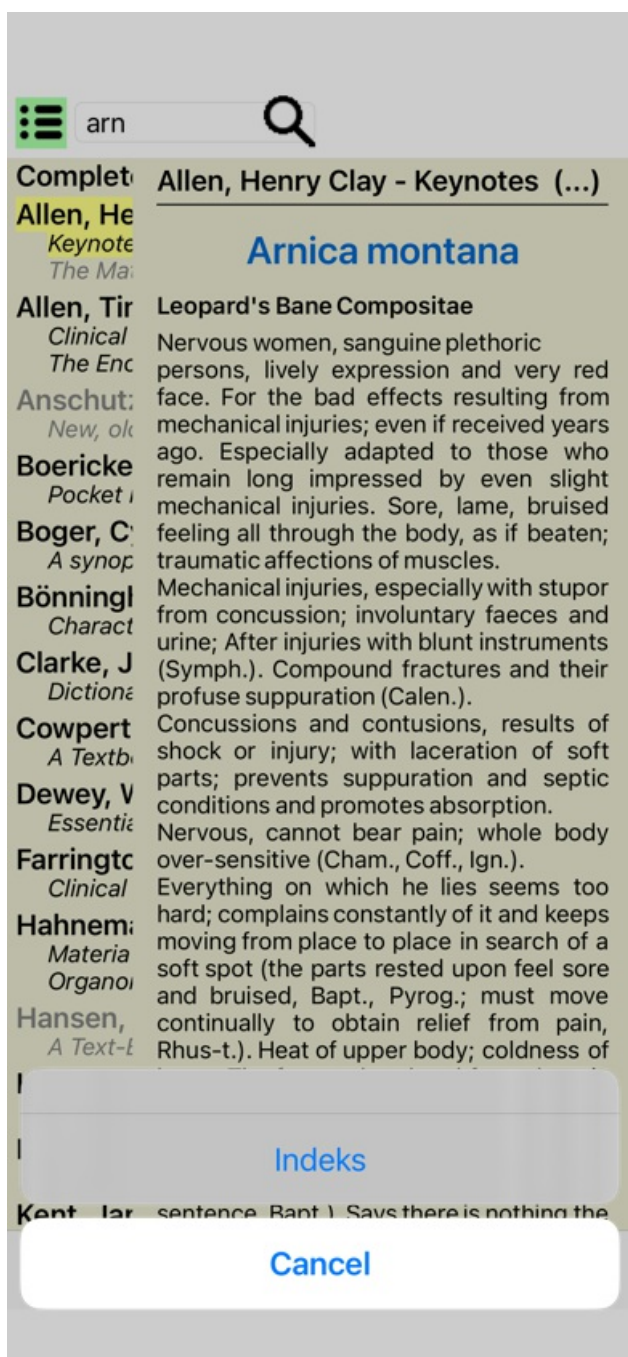

Prikazan je seznam vseh zdravil v knjigi. Knjigo za zdravilo lahko odprete tako, da kliknete na ime zdravila.

Allen, Henry Clay / Keynotes a

Abrotanum
Aceticum acidum
Aconitum napellus
Aesculus hippocastanum
Aethusa cynapium
Agaricus muscarius
Agnus castus
Allium cepa
Aloe socotrina
Alumina
Ambra grisea
Ammonium carbonicum
Ammonium muriaticum
Amylenum nitrosum
Anacardium orientale
Anthracinum
Antimonium crudum
Antimonium tartaricum
Apis mellifera
Apocynum cannabinum
Argentum metallicum
Argentum nitricum
Arnica montana
Arsenicum album
Arum triphyllum
Asarum europaeum
Asterias rubens
Aurum metallicum

Baptisia tinctoria
Baryta carbonica
Belladonna
Benzoicum acidum
Berberis vulgaris
Bismuthum oxidatum
Borax veneta
Bovista

Razpoložljive knjige in spletna mesta

V modulu Materia Medica je na voljo več knjig. Razpoložljivost teh knjig se lahko razlikuje glede na jezikovne nastavitve.

Modul Materia Medica vključuje več spletnih strani, ki zagotavljajo informacije o zdravilih. Razpoložljivost teh spletnih mest je odvisna od vaših jezikovnih nastavitvev.

Upoštevajte, da vsebina spletnih strani ni del programa *Complete Dynamics*, temveč je za vaše udobje prikazana le v modulu Materia Medica.

Nekatera spletna mesta lahko zahtevajo plačilo za dostop do informacij. To je izključno pravilo lastnika spletnega mesta in nikakor ni povezano z vašo licenco *Complete Dynamics*.

Obratna Materia Medica

Na spletni strani *Reverse Materia Medica* so prikazani najpomembnejši simptomi iz repertorija za določeno zdravilo, kot jih najdemo v repertoriju.

Človeški strokovnjaki ne razlagajo, kot je to običajno v običajnih Materia Medica, temveč *Reverse Materia Medica* v celoti temelji na strokovnem znanju, shranjenem v repertoriju.

Če želite odpreti rubriko v modulu *Book*, preprosto dvakrat kliknite nanjo.

Pomembnejši simptomi so natisnjeni bolj kot manj pomembni, tako da lahko zlahka ločite relativno pomembnost različnih simptomov.

Rezultate lahko spremenite z naslednjimi gumbi:

Filter V spustnem seznamu za filtriranje lahko izberete merila za rubrike, ki bodo prikazane v *Reverse Materia Medica*:

<i>Samodejno</i>	Samodejno se izberejo najustrežnejše rubrike.
<i>Potrjeni simptomi</i>	Uporabljajo se samo sredstva razreda 3 ali 4. To so simptomi, ki so potrjeni v praksi.
<i>Popolni simptomi</i>	Uporabljajo se samo popolni simptomi. Simptomi so popolni, če združujejo vsaj 3 različne vrste informacij. Primer: Čas + lokacija + podaljšek.
<i>Potrjeno in dokončano</i>	Prikazani so samo <i>potrjeni in popolni</i> simptomi.
<i>Simptomi rdeče črte</i>	Prednost daje simptomom, ki se na povezan način pojavljajo v več delih repertoarja.
<i>Ključni prispevki</i>	Zdravilo ima oceno 3 ali 4, vsa druga zdravila pa imajo nižjo oceno.
<i>Edinstvene rubrike</i>	Prikažite samo rubrike, v katerih je sredstvo edino pojavljajoče se sredstvo.

Dodatna Materia Medica

Dodatne knjige Materia Medica, ki so jih ustvarili drugi uporabniki, lahko preprosto dodate v *Complete Dynamics*. Knjiga Materia Medica je shranjena v datoteki, ki jo lahko delite z drugimi uporabniki. Če želite namestiti novo knjigo, kopirajte datoteko v mapo *Complete Dynamics*, ki se nahaja v mapi *Documents*. Nato ustavite in znova zaženite program *Complete Dynamics*. Nova knjiga mora biti nato samodejno vidna v razdelku *MM*.

Za ustvarjanje novih knjig Materia Medica je potrebna licenca za *Master Edition*.

Materia Medica hitri pregled

To je lahko zelo priročno za hiter pregled besedila Materia Medica več knjig hkrati.

Okno *Materia Medica s hitrim pregledom* prikazuje besedilo več kompaktnejših knjig Materia Medica hkrati. (Možnost priročnega menija *Materia Medica hitri pregled*).

Cyclamen Europaeum

Pharmacokinship - Remedy Relations (Nambison)

Followed well by: Phos., Puls., Rhus-t., Sep., Sulph.

Antidoted by: Camph., Coff., Puls.

Duration of action: 14 - 20 d

Dose: 3 attenuation

700 Red Line Symptoms (Hutchinson)

1. - Flickering before the eyes, as of various colours, glittering needles, fiery specks and sparks.

Keynotes of the homeopathic Materia Medica (Lippe)

Sow Bread

Pressing, drawing and tearing pain, principally in the periosteum.

Chilblains of the feet.

As long as he walks about he feels well with the exception of languor,

but as soon as he sits down, especially in the evening, he suffers various inconveniences.

Thirstlessness.

Menses too profuse.

Bad effects from eating much fat food (pork).

Aggravation in the evening and while at rest.

Amelioration whilst walking.

Keynotes and Characteristics (Allen)

Sow Bread Primulaceae

Best suited for leucophlegmatic persons with anaemic or chlorotic conditions; easily fatigued, and in consequence not inclined to any kind of labor; feeble or suspended functions of organs or special senses. *Pale, chlorotic; deranged menses* (Ferr., Puls.), accompanied by vertigo, headache, dim vision. Pains; pressive, drawing or tearing of parts where bone lie near the surface. Ailments: from suppressed grief and terrors of conscience; from duty not done or bad act committed. Great sadness and peevishness, irritable, morose, ill-humored; inclined to weep; desire for solitude; *aversion to open air* (reverse of Puls.). Headache in

Zapri

Informacije o pravnem sredstvu

Podrobne informacije o pravnem sredstvu

Kot primer si oglejmo rubriko *Splošnosti; Hrana in pijača; jabolka; želje*.

FOOD	GENERALITIES
FOOD and drinks; apples (cont.)	
desires: adam Adon ALOE aml-n ANT-T ap-g arge-p Asaf biti-at bro-s-g Cham cit-n cub dama-d fel GUAI Hafn helod-c kali-p lac-drom lsd lyss Manc menth merl meteo-a ory-c ozon phos polyst prun pyrus-c Ruta sabad sep stront-c SULPH tax TELL toxop-p Tritic-v vip	
• Food and drinks; cool things, like apples, desires (2)	
• Food and drinks; fruits; desires (233)	
• eleven thirty pm., on falling asleep: fel	
• Night, nine pm. - five am.; agg.; eleven thirty pm. (8)	
• water, with desire for cold: ANT-T	
• Food and drinks; cold; drinks; desires (342)	
• butter: lyss	
• cider	
• Food and drinks; cider; desires (6)	
• juice: Adon ozon	
• cold: Adon ozon	
• Food and drinks; cold; drinks; desires (342)	
• Food and drinks; fruits; desires; juicy, juices (47)	
• sour: Adon cit-n	
• Food and drinks; fruits; desires; sour, acid (26)	
• strudel: meteo-a	
aromatic food	
agg., smell of: ign puls	
• Food and drinks; food in general; agg.; smell of (109)	
• Odors, strong, agg. (169)	
desires	
• Food and drinks; herbs, desires (11)	
• drinks: anath	
• food: bufo meteo-a	
artichokes	
aversion: abies-c acon MAG-C sulph	
• Food and drinks; vegetables; aversion (95)	
desires: ABIES-C	
• Food and drinks; vegetables; desires (133)	
artificial agg.: ALUM ARS CALC calc-p gaert lyc	

Če želite več informacij, dvakrat kliknite **ANT-T**.

Prikaže se okno Remedy Information:

Informacije o pravnem sredstvu

Rubrika: GENERALITIES: FOOD and drinks; apples; desires.

Okranjšava za pravno sredstvo: ant-t, razred 5.

Standardno ime: Antimaculano tartaricum.

Pojavljanje v sorodnih rubrikah: 2, povprečna ocena: 2.0.

Viri

Allen T F	<i>Encyclopedia of Pure Materia Medica</i> , 1874.
Allen T F	<i>Index of Encyclopedia</i> , 1876.
Böttger J J A M	<i>Systematisches alphabetisches Repertorium der antipathischen und nicht antipathischen Arzneien nach handverriebenen Anordnungen</i> , 1833.
Klein C B	<i>Repertory of Hering's Guiding Symptoms</i> , 1896.
Lizafal S	<i>Homoeopathic Therapeutics</i> , Jan. B. (New Delhi), 1890.
Lipson A M	<i>Known and Red line symptoms of Materia Medica</i> , 1915.
Smith A	<i>Materia Medica Para Project</i> , 2018.
Trojan C F S	<i>Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III</i> . T.O. Weigel (Leipzig), 1847.

Zapri

Pojavljanje v sorodnih rubrikah

Sorodne rubrike so rubrike, ki so nekako povezane z rubriko, ki jo pregledujete za to sredstvo.

V tem primeru so te rubrike:

Splošnosti; hrana in pijača; kul stvari, kot so jabolka, želje

Splošno; Hrana in pijača; jabolka, želje; voda, z željo po hladnem

Obe rubriki vsebujeta tudi *ant t*.

Večje kot je število pojavitev v sorodnih rubrikah in večja kot je povprečna teža v teh rubrikah, večjo pomembnost lahko pripišemo sredstvu.

Viri

Našteje vse vire, iz katerih izvira pravno sredstvo. To vključuje vsaj ime avtorja, naslov knjige ali revije in leto izida.

Avtorske številke

Če ste že prej delali s spletno stranjo *MacRepertory*, ste morda navajeni, da namesto imen avtorjev uporabljate številke avtorjev. V nastavitvah preferenc lahko aktivirate možnost *Številke avtorjev*. Za podrobnosti glejte razdelek *Preferences*.

V oknu z informacijami o pravnem sredstvu bodo nato prikazane tudi številke avtorjev:

Informacije o pravnem sredstvu

Rubrika: GENERALITIES: FOOD and drinks; apples; desires.

Okrajšava za pravno sredstvo: nut-t, razred 5.

Standardno ime: Antimacium tartaricum.

Pojavljanje v sorodnih rubrikah: 2, povprečna ocena: 2.0.


Viri.

- Allen T F 369 *Encyclopedia of Pure Materia Medica*, 1874.
Allen T F 369 *Index of Encyclopedia*, 1876.
Böttgermann S 372 *Systematisches alphabetisches Repertorium der ausparischen und nicht-
ausparischen Arzneien with handwriten annotations*, 1833.
Kerr C B 373 *Repertory of Hering's Guiding Symptoms*, 1896.
Littell S 374 *Homoeopathic Therapeutics*, Jain, B. (New Delhi), 1890.
Lippmann 375 *Keynotes and Red line symptoms of Materia Medica*, 1915.
Sims A 369 *Materia Medica Para Praxi*, 2018.
Trotter C F S 375 *Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III*, T.O. Weigel (Leipzig), 1847.
Vetter C

Zapri

Poiščite polje

Zmogljivo in enostavno iskanje

Poišči 

- Besedilo** Fragmenti besedila se samodejno interpretirajo kot besedilo, kot ga vnesete v posamezno polje *Besedilo*. Pri tem velja enaka uporaba /, + in - (glej primere v razdelku . *Najdi modul*). V zgornjem primeru se išče beseda *menses* v kombinaciji z *pred* ali *med*.
- Pravna sredstva** Okrajšave zdravil se morajo končati s piko. V polju *Remedies* to ni obvezno, vendar se mora končati s piko, da ne pride do zmede med delčki besedila in okrajšavami pravnih sredstev. (Primer zmede: *sep* lahko pomeni *sepia* ali *ločitev*). Enako velja za uporabo / in +, glejte primere v razdelku . *Poiščite modul*. V zgornjem primeru je iskanje opravljeno na *sepia* ali *cimicifuga*. Opomba: tudi sredstva, ki sama po sebi niso okrajšava (kot so *Apis* ali *Bufo*), je treba končati s piko (apis. bufo.).
- Gradacija** Najmanjše stopnje odpravljanja napak od 1 do 4 lahko določite z vnosom *1, *2, *3 ali *4. Ta izraz lahko preberemo kot: Vsa (*) zahtevana sredstva morajo imeti to ali višjo oceno. Številke 1, 2, 3 in 4 brez * se prav tako razlagajo kot najmanjša stopnja zaščite. Tako je 4 enako kot *4.
- Velikost rubrike** Najmanjšo in največjo velikost rubrike lahko določite s številom, pred katerim je > ali <. <50 pomeni 50 pravnih sredstev ali manj. >10 pomeni 10 pravnih sredstev ali več. Druga možnost je, da se vsako število, ki se začne s 5 in več, samodejno razlaga kot največja velikost rubrike. Tako je 50 enako kot <50.

Primeri

Razširimo zgornji primer z omejitvijo na rubrike, ki vsebujejo največ 50 pravnih sredstev. Vsi naslednji načini vnosa meril vodijo do enakega rezultata:

sep. cemic. menstruacija pred/med *3 <50
sep. cemic. menstruacija pred/med 3 50
menstruacija ločeno pred / med 3 <50 cemic.
50 menstruacija+pred/med sep./cemic. 3
menstruacija pred/med sep. 2 cemic. 200 50 3

V zadnjem primeru vidite, kako se začetno stopnjevanje 2 kasneje nadomesti s 3, največja velikost rubrike 200 pa se spremeni v 50. V primeru se to morda zdi zmedeno, vendar je dejansko zelo učinkovito, ko iščete in želite med iskanjem zožiti rezultate. Novo merilo lahko vnesete, ne da bi prej odstranili predhodno vneseno merilo; zadnje preprosto prevlada nad prvim.

Nasvet: Ne pozabite, da se pri iskanju besedila uporabljajo tudi posebni zapisi =, * in "":
=dog bo našel dog, ne pa tudi *dogmatic*.
*acija bo našla *palpitacijo* ter *potenje* in *ovulacijo*.
"on je" bo našel samo on in je, če sta v točno takšnem vrstnem redu.

Nastavitve prednostnih nastavitev

Več možnosti programa je mogoče nastaviti glede na vaše osebne želje. Te možnosti lahko spremenite z gumbom de *Preferences* v modulu *Index*.

Odpri se pogovorno okno z več razdelki.

Splošne nastavitve

Nastavitve

Programski jezik	<input type="text" value="Slovanski"/>
Animacije	<input type="checkbox"/>
Optimizacija za	<input type="text" value="Večja hitrost"/>
Vključite Kentov repertoar	<input type="checkbox"/>

Splošno

Knjiga

Primer

Analiza

MM

Prekliči V REDU

Programski jezik Na voljo je več jezikovnih možnosti.

Jeziki, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na različico *Complete Dynamics*; jeziki, ki niso na voljo, bodo morda dodani v novejši različici.

Animacije

V nekaterih delih programa *Complete Dynamics* se uporabljajo animacije, na primer pri odpiranju in zapiranju zadeve. Ti so videti lepo, vendar je za dokončanje potreben čas. Če teh animacij ne želite, odkljukajte to možnost.

Standardno ime pisave Tu lahko izberete željeno pisavo, ki jo bo uporabljal program.

Optimizacija za Ta nastavek vpliva na porabo pomnilnika aplikacije za iPhone.

Večja hitrost. Če je ta možnost izbrana, program poskuša ohraniti podatke v pomnilniku, da bi povečal hitrost. Ta možnost je priporočljiva, če večinoma delate s programom *Complete Dynamics*.

Manjša poraba pomnilnika. Ko je ta možnost izbrana, program ob preklopu na drug program sprostí čim več pomnilnika. To zmanjša tveganje, da bi ga iPhone prekinil, vendar je program počasnejši. Ta možnost je priporočljiva, če delate z več programi ali če imate starejši iPhone.

Vključite Kentov repertoar Označite to možnost, če želite, da je *Kent's Repertory, 6th edition* na voljo kot ločen repertoar.

Celotna vsebina *Kentovega repertorija* je že vključena v *Complete Repertory*. Vendar pa se nekateri ljudje raje posvetujejo s spletnim mestom *Kent* brez vseh dodatkov iz drugega gradiva.

Po potrditvi te možnosti bo v modulu na voljo *Kent Indeks*[/I].

Nastavitve knjige

Nastavitve

Repertorijski jezik	Angleščina -----
Avtorske številke	<input type="checkbox"/>
Prikaži velikost rubrike	<input type="checkbox"/>
Rubrike v abecednem vrstnem redu	<input type="checkbox"/>

Splošno	Knjiga	Primer	Analiza	MM
---------	---------------	--------	---------	----

[Prekliči V REDU](#)

<i>Repertorijski jezik</i>	Jezik, ki se uporablja za repertoar. Druga možnost je sekundarni jezik, ki je prikazan za besedilom rubrike. Drugi jezik je na voljo le, če ste kupili repertoarni prevod.
<i>Avtorske številke</i>	Če je ta možnost označena, so poleg imen avtorjev prikazane tudi številke avtorjev v slogu MacRepertory.
<i>Vodoravno pomikanje</i>	Če je ta možnost označena, je omogočena funkcija vodoravnega pomikanja. Ta funkcija je na voljo le, če miška ali sledilna ploščica podpira vodoravno pomikanje.
<i>Prikaži velikost rubrike</i>	Če je ta možnost označena, je v modulu Knjiga vedno prikazano število pravnih sredstev za rubriko. Če ta možnost ni označena, se številka prikaže le, če sredstva niso vidna.
<i>Rubrike po abecednem vrstnem redu</i>	Če je ta možnost označena, so v modulu Knjiga rubrike vedno prikazane po abecednem vrstnem redu. Če ni označeno, se uporabi standardni vrstni red repertoarja, kot ga je uvedel Kent.

Nastavitve primera

Nastavitve

Minute do samodejnega... 5

Samodejno brisanje arhiviranih primerov Nikoli

Uporaba strežnika v oblaku ☐

Splošno Knjiga **Primer** Analiza MM

Prekliči V REDU

Minute do samodejnega zaklepanja primerov

Če ste nastavili geslo za zaščito podatkov o pacientu, ta možnost določa število minut, po katerih se modul Case samodejno zaklene.

Če tukaj vnesete 0, se samodejno zaklepanje ne izvede.

Samodejno brisanje arhiviranih primerov

Izberite, po kolikšnem času naj se arhivirani primeri trajno izbrišejo.

Če izberete *Nikoli*, se arhivirani primeri ne bodo samodejno izbrisali.

Uporaba strežnika v oblaku

Kopijo svojih primerov shranite v strežnik v oblaku.

Nastavitve analize

Nastavitve

Remedy coloring HFA






Prikaži samo ustrezne rubrike



Analizne formule

Standard	✓
Majhna pravna sredstva	✓
Majhne rubrike	
Bönninghausen	✓
Preprosto štetje	✓



Splošno

Knjiga

Primer



Analiza

MM

Prekliči V REDU

Remedy coloring HFA Če je ta možnost označena, se lahko analiza barvno popravi v skladu z metodo analize obraza Granta Bentleyja.

V modulu Analiza se v orodni vrstici pojavi nov gumb (🎨), s katerim lahko vklopite ali izklopite barvanje.

Uporaba te možnosti je uporabna le, če ste uspešno zaključili tečaj te metode.

Prikaži samo ustrezne rubrike V modulu Analysis je povezava med rubrikami in popravki prikazana v tabelarnih grafih.

Simptomi in rubrike z nastavitvijo uteži 0 dejansko ne prispevajo k rezultatom analize.

Če je ta možnost označena, se popravki iz rubrik, ki ne prispevajo k rezultatom analize, ne vključijo v graf tabele rezultatov. Tako boste lažje videli, kako rubrike prispevajo k rezultatom analize.

Analizne formule V modulu Analiza lahko uporabite več formul za analizo.

Izberete lahko, katere od teh formul bodo prikazane in v kakšnem vrstnem redu.

Če želite spremeniti vrstni red prikaza analiz, izberite analizo s klikom na njeno ime. Z gumboma ↑ in ↓ ga lahko premaknete navzgor ali navzdol po seznamu.

Če želite vključiti ali izključiti analizo, jo izberite in nato kliknite potrditveno polje *Prikaži analizo*.

Nastavitve Materia Medica

Nastavitve

- Angleščina ☒
- Portugalska ☐
- Španščina ☐
- Francoski ☐
- Nemščina ☐
- Ruski ☐



Jeziki Na voljo je več jezikov *Materia Medica*.

Privzeto so jeziki prikazani v skladu z nastavitvami jezika in države računalnika ter licenčnimi možnostmi. Izberete lahko, kateri jeziki knjig so prikazani v modulu *Materia Medica*.

Nakup homeopatskih zdravil

V programu lahko enostavno naročite homeopatska zdravila neposredno iz spletne lekarne.

Dostopnost lekarne se lahko razlikuje po državah glede na lokalne in mednarodne predpise. Ta razpoložljivost se določi ob zagonu programa.

Če želite naročiti zdravilo, odprite priročni meni na imenu zdravila kjer koli v modulu Knjiga ali Analiza in izberite možnost *Kupi zdravilo iz lekarne*. (Možnost priročnega menija *Kupite zdravilo iz lekarne*).



Če ta možnost ni na voljo, pomeni, da v vaši državi lekarna ni podprta.

Po izbiri možnosti boste samodejno vođeni do spletne lekarne, ki vam je na voljo.

Upošteвайте, da je podjetje *Complete Dynamics* neodvisno od lekarne. Našim strankam nudimo neposreden dostop do lekarne kot storitev.

Povratne informacije

Potrebujeemo vašo pomoč in cenimo vaše povratne informacije!

Ustvarjalci programa *Complete Dynamics* so se zavezali, da vam bodo ponudili najboljšo možno kakovost in uporabnost ter zmerne cene za komercialne izdaje.

Kar zadeva kakovost, pri razvoju programske opreme uporabljamo pristop, ki ne dopušča napak. Programskih napak preprosto ne sprejemamo in če jih odkrijemo, jih bomo odpravili z najvišjo možno prioriteto.

Uporabnost je bolj zapleteno vprašanje, saj je uporabnost zelo osebna zadeva. Mi in naša predana skupina strokovnih ocenjevalcev nenehno iščemo najboljšo možno uporabnost in vedno ocenjujemo vaše povratne informacije.

Z vašo pomočjo lahko še naprej nenehno izboljšujemo *Complete Dynamics*.

Kako posredovati povratne informacije

Če nam želite poslati svoje povratne informacije, obiščite naše spletno mesto www.completedynamics.com, oddelek *Kontakt*. Pošljite nam lahko tudi e-poštno sporočilo na naslov support@completedynamics.com.