

Complete Dynamics

Glavna izdaja

za macOS

Različica 24.12

O tem priročniku

Je to pravi priročnik za vas?

Dokumentacija *Complete Dynamics* je na voljo v številnih različicah.

Za različne konfiguracije programov imamo različne priročnike.

- Izdaja programa: V tem primeru se lahko odločite za program: Browser, Practitioner ali Master.
- Vrsta računalnika: Apple OS-X, Windows, iPad, iPhone, Android.
- Različni mednarodni jeziki.

Pravi priročnik je natančno prilagojen vašim razmeram.

Če menite, da ne berete popolnega priročnika, obiščite naše spletno mesto www.completedynamics.com, razdelek *Dokumentacija*, in tam prenesite svoj priročnik.

Prevodi

Ko izdamo novo različico programa *Complete Dynamics*, poskrbimo, da je angleški priročnik posodobljen.

Prevodi spremenjenih besedil lahko zahtevajo nekaj več časa.

Deli priročnika, ki še niso prevedeni, prikazujejo izvirno angleško besedilo, natisnjeno kot to besedilo.

Dobrodošli

Dobrodošli v *Complete Dynamics* - Master Edition.

Programska oprema *Complete Dynamics* vam ponuja vrhunsko izkušnjo računalniškega branja in preučevanja *Complete Repertory*. Med homeopatskimi strokovnjaki je spletna stran *Complete Repertory* znana po vsem svetu zaradi svoje popolnosti, natančnosti in obsega izvirnih virov.

Programska oprema je na voljo za Apple macOS®, Microsoft Windows®, Linux®, Apple iOS®, Android®.

Z izdajo *Master Edition* boste lahko:

- Preberite in preučite celotno spletno stran *Complete Repertory* v več jezikih.
- Upravljajte dokumentacijo bolnikov.
- Izvajanje analiz.
- Preberite knjige *Materia Medica*.
- Uporabljajte številne funkcije, ustvarjene izključno za bolj izkušene in zahtevne profesionalne homeopate.

Te strani so namenjene temu, da se lažje znajdete v programu.

Predlagamo, da začnete z razdelkom *Začetek*, ki vam bo omogočil pregled možnosti.

Iskreno upamo, da bo *Complete Dynamics* obogatil vaše homeopatsko življenje, ne glede na to, ali ste profesionalni zdravnik, študent, učitelj ali raziskovalec.

Ekipa razvijalcev programa *Complete Dynamics*.

Začetek

Intuitivna zasnova


Complete Dynamics je zasnovan tako, da ga lahko intuitivno uporabljajo tudi tisti, ki imajo strokovno znanje o homeopatiji.

Nekatere funkcije programa lahko uporabite veliko učinkoviteje, če se naučite nekaj trikov.

To še posebej velja za uporabo polja *Jump to* in polja *Find*. Preberi poglavja pomoči o teh poljih, da se seznaniš z njihovimi močnimi možnostmi. To je vredno nekaj minut vašega časa...

Uporaba miške

Z računalniško miško ali sledilno ploščico lahko hitro opravite običajna opravila ali prikličete informacije.

Ko mišji kazalec spremeni obliko v majhno roko , se s klikom izvede določeno dejanje na predmetu, na katerem je kazalec. Na primer: s klikom na referenco boste takoj preskočili na rubriko, na katero se sklicuje.

V nekaterih primerih lahko z dvojnimi klikom pridobite podrobne informacije o elementu, na katerega ste kliknili. Na primer: z dvojnimi klikom na kratko zdravlila v knjigi se odpre pogovorno okno s podrobnimi informacijami.

S kolescem za pomikanje se hitro premikate med rubrikami v knjigi. Če miška ali sledilna ploščica podpira vodoravno pomikanje, se ta funkcija uporablja za hitro listanje po straneh knjige.

Uporaba tipkovnice


S tipkovnico lahko hitro dostopate do najpogostejših funkcij, kar močno zmanjša potrebo po preklapljanju med uporabo miške in tipkovnice.

S tipkovnico lahko hitro krmarite po knjigi ali dostopate do menijskih možnosti z bližnjicami na tipkovnici. Če odprete meni, bodo poleg možnosti menija prikazane tudi bližnjice na tipkovnici.

Za pregled bližnjic na tipkovnici glejte *Bližnjice na tipkovnici*.

Popup meniji

V številnih primerih pojavni meniji omogočajo hiter dostop do funkcij. Kliknite z desno tipko miške in odpre se meni (Mac: ctrl-Click). Primer:

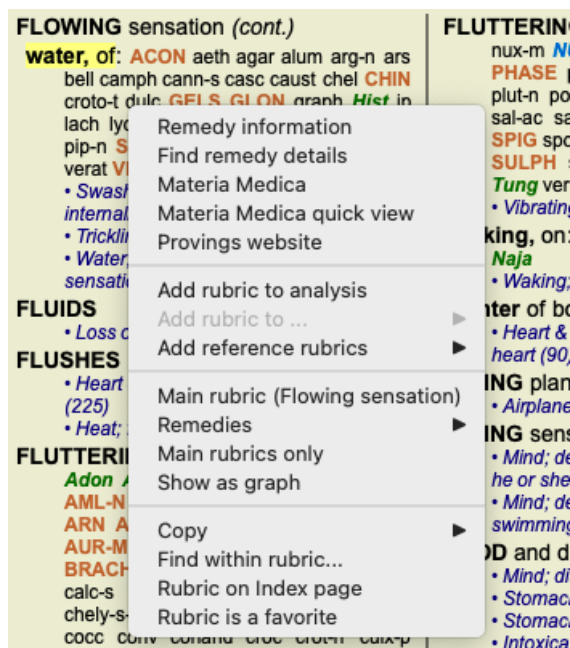

Večkratni izbor

V številnih primerih boste morda želeli opraviti določeno opravilo za več elementov hkrati, ne le za en element, ki ste ga izbrali.

V teh primerih lahko najprej izberete več elementov, nato pa opravite opravilo za vse izbrane elemente.

Kako izbrati več elementov

Spodnja primera prikazujeta večkratni izbor rubrik v modulu *Analysis*.

Na drugih mestih so načela enaka.

Če želite izbrati posamezno vrstico, jo kliknite z miško:


```

16 Mind; Activity; night
1 Mind; Activity; midnight, until
9 Mind; Activity; sleeplessness, with
83 Mind; Activity; hyperactive
488 Mind; Cheerfulness
25 Mind; Noises; aversion to
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
1 Mind; Theorizing; evening
2 Mind; Theorizing; night

```

Če želite izbrati niz vrstic, kliknite prvo vrstico, pridržite tipko *shift* in kliknite zadnjo vrstico:

```

16 Mind; Activity; night
1 Mind; Activity; midnight, until
9 Mind; Activity; sleeplessness, with
83 Mind; Activity; hyperactive
488 Mind; Cheerfulness
25 Mind; Noises; aversion to
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
1 Mind; Theorizing; evening
2 Mind; Theorizing; night

```

Če želite spremeniti izbiro posamezne vrstice, pridržite tipko *cmd* in kliknite na vrstico. Izbor posamezne vrstice lahko spremenite tudi tako, da kliknete levo od besedila. (V modulih *Book* in *Find* lahko kliknete levo od oznake rubrike)

```

16 Mind; Activity; night
1 Mind; Activity; midnight, until
9 Mind; Activity; sleeplessness, with
83 Mind; Activity; hyperactive
488 Mind; Cheerfulness
25 Mind; Noises; aversion to
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
1 Mind; Theorizing; evening
2 Mind; Theorizing; night

```

Če želite izbrati vse vrstice, pridržite tipko *cmd* in tipko *shift* ter kliknite vrstico.

```

16 Mind; Activity; night
1 Mind; Activity; midnight, until
9 Mind; Activity; sleeplessness, with
83 Mind; Activity; hyperactive
488 Mind; Cheerfulness
25 Mind; Noises; aversion to
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
1 Mind; Theorizing; evening
2 Mind; Theorizing; night

```

Dejavnosti, ki delujejo na več izbranih elementov

Knjižni modul

V modulu *Book* lahko izberete več rubrik. Nekatere funkcije delujejo na več rubrikah, druge le na eni rubriki.

To so funkcije, ki delujejo na več rubrikah:

- Analizi dodajte rubrike. (Možnost menija *Primer / Dodajte rubriko, control-R*, možnost priročnega menija *Dodajte rubriko k analizi*).
- Dodajte rubrike k določenemu simptomu v analizi. (Možnost menija *Primer / Dodajte rubriko v ... / Nov simptom...*, možnost priročnega menija *Dodajte rubriko v ... / Nov simptom...*).
- Kopirajte oznake rubrik v odložišče. (Možnost menija *Knjiga / Kopiraj / Kopiraj rubrično nalepko*, možnost priročnega menija *Kopiraj / Kopiraj rubrično nalepko*).
- Kopirajte oznake rubrik z njihovimi pravnimi sredstvi v odložišče. (Možnost menija *Knjiga / Kopiraj / Kopiranje rubrike in pravnih sredstev*, možnost priročnega menija *Kopiraj / Kopiranje rubrike in pravnih sredstev*).

Vse druge funkcije delujejo na podlagi ene same rubrike. Če ste izbrali več rubrik, je uporabljena tista, na katero ste kliknili nazadnje.

Poiščite modul

V modulu *Najdi* so funkcije na več rubrikah enake kot v modulu *Knjiga*.

Modul primera

V modulu *Case* so te funkcije, ki delujejo z večkratnim izborom:

- Brisanje več analiz. (Možnost menija *Primer / Izbrši analizo*, možnost priročnega menija *Izbrši analizo*).

- Premaknite več analiz v drugo zadevo. (Možnost menija *Primer / Premaknite analizo na primer...*, možnost priročnega menija *Premaknite analizo na primer...*).
- Brisanje več receptov. (Možnost menija *Primer / Izbriši recept*, možnost priročnega menija *Izbriši recept*).

Analizni modul

V modulu *Analysis* so te funkcije, ki delujejo z večkratnim izborom:

- Brisanje več rubrik ali simptomov. (Možnost menija *Primer / Izbriši izbrano*, možnost priročnega menija *Izbriši izbrano*).
- Pripisite utežni faktor. (Možnost menija *Primer / Teža / Teža x2*, gumb orodne vrstice $\times 2$, možnost priročnega menija *Teža / Teža x2*). Itd.
- Pripisite klasifikacijski razred simptoma. (Možnost menija *Primer / Razvrstitev simptomov / Psora*, gumb orodne vrstice **O**, možnost priročnega menija *Razvrstitev simptomov / Psora*). Itd.
- Vse funkcije razvrščanja v skupine.
- Vse funkcije filtriranja.
- Funkcije za kopiranje etiket rubrik z ali brez pravnih sredstev.
- Kopiranje izbranih rubrik, da jih lahko prilepite v drugo analizo. (Možnost menija *Analiza / Kopiranje izbranih vrstic*, \mathbb{H} -C, možnost priročnega menija *Več / Kopiranje izbranih vrstic*, možnost menija *Analiza / Prilepi kopirane vrstice*, \mathbb{H} -V, možnost priročnega menija *Več / Prilepi kopirane vrstice*).
- Premikanje izbranih rubrik navzgor ali navzdol v drug simptom. (Možnost menija *Navigacija po spletni strani / Premaknite se navzgor*, gumb orodne vrstice \uparrow , možnost priročnega menija *Več / Premaknite se navzgor*, možnost menija *Navigacija po spletni strani / Premaknite se navzdol*, gumb orodne vrstice \downarrow , možnost priročnega menija *Več / Premaknite se navzdol*).
- Če izberete več rubrik, so v območju rezultatov analize izpostavljena pravna sredstva teh rubrik.
- Če na področju rezultatov analize izberete več pravnih sredstev, so izpostavljene rubrike, v katerih se ta sredstva pojavljajo.

Modul MM

V razdelku *Repertorij* modula *MM* so funkcije na več rubrikah enake kot v modulu *Knjiga*.

Kazalo zavihkov

Glavni moduli programa *Complete Dynamics* so dostopni prek tako imenovanih kazalčnih zavihkov. Modul aktivirate tako, da kliknete na zavihke, ga izberete v meniju (možnost *View*) ali z bližnjico na tipkovnici.

V izdaji *Practitioner* so to *Index*, *Book*, *Find*, *Case*, *Analysis* in *Materia Medica*.



Modul *Index* omogoča hiter dostop do poglavij v knjigi z besedilno in grafično predstavitvijo. Za podrobnosti glejte razdelek pomoči *Indeksni modul*.

Modul *Book* prikazuje repertoar. Lahko ga berete kot tiskano knjigo, vendar si ga lahko ogledate tudi v bolj zgoščeni obliki. Za podrobnosti glejte razdelek pomoči *Modul knjiga*.

Modul *Find* ponuja zmogljivo funkcionalnost za iskanje rubrik in pravnih sredstev v knjigi. Za podrobnosti glejte razdelek pomoči *Poiščite modul*.


Modul *Case* vam omogoča ustvarjanje in urejanje kartotek bolnikov. Za podrobnosti glejte razdelek pomoči *Modul za primere*.

Modul *Analysis* se uporablja za analizo vaših primerov. Za podrobnosti glejte razdelek pomoči *Modul za analizo*.

Modul *Materia Medica* vsebuje informacije o zdravilih. Za podrobnosti glejte razdelek pomoči *Modul Materia Medica*.

Vrstica z gumbi

Na vrhu zaslona je vrstica z gumbi, ki omogoča hiter dostop do pogosto uporabljenih funkcij.

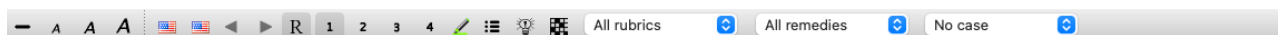

Če želite aktivirati funkcijo, kliknite na gumb, če se z miško premaknete nad njo, se prikaže kratek opis njene funkcije.

Licenca

Kako kupiti licenco

Če želite kupiti eno od naših komercialnih licenc, lahko prek možnosti menija neposredno obiščete našo spletno trgovino:

- za licenco za *Practitioner Edition*. (Možnost menija *Pomoč / Nakup licence*).
- za prevedeno različico spletne strani *Complete Repertory*. (Možnost menija *Pomoč / Kupi prevod Complete Repertory*).

Plačila lahko varno in enostavno opravite s spletno stranjo *PayPal*, s kreditno kartico ali z bančnimi prenosi (možnosti se razlikujejo glede na državo).

Po naročilu vam bomo po e-pošti poslali podatke o licenci in račun.

Licence in cene

Komercialne licence *Complete Dynamics* je mogoče kupiti na podlagi naročnine.

Naročite se lahko za krajše obdobje, na primer za en mesec, ali za daljše obdobje. Daljše kot je obdobje, za katerega kupujete, bolj privlačna je cena.

Vaša naročnina vključuje:

- **Neomejena uporaba programa *Complete Dynamics*** na enem računalniku. Uporabljate računalnik tako doma kot v praksi ali imate dodaten prenosni računalnik? Ni problema, vključena je v ceno. (glejte poglavje *Dodatne licence* spodaj).
- **Brezplačne nadgradnje** programske opreme. Nenehno dodajamo nove funkcije. Brez dodatnih stroškov, vključeno je v ceno.
- **Brezplačne nadgradnje** spletne strani *Complete Repertory*. Ko je na voljo nova izdaja *Complete Repertory*, ste prvi, ki jo dobite brez dodatnih stroškov.
- **Brezplačna tehnična podpora**. Menimo, da mora biti programska oprema brez težav. To pomeni, da naša tehnična podpora presega vse, kar ste doživeli pri drugih podjetjih. Prisluhnemo vam in resnično rešimo vaše težave. V kratkem času in brez stroškov.
Upoštevajte, da naša podpora ne vključuje podpore za vaš operacijski sistem, kot je Windows. Mi podpiramo svojo programsko opremo, Microsoft pa naj podpira svojo. Žal mi je za to.

Katero izdajo potrebujem?

Od vaših potreb je odvisno, ali potrebujete brezplačno *Browser Edition* ali plačljivo *Practitioner Edition* ali *Master Edition*.

	Brskalnik	Strokovnjak	Mojster	
Indeks	✓	✓	✓	Indeksni modul za enostavno interaktivno izbiranje.
Knjiga	✓	✓	✓	Branje celotne zbirke <i>Complete Repertory</i> .
Preklop jezika	✓	✓	✓	Naenkrat je lahko prikazan en jezik, vendar lahko med jeziki preklapljate.
Več jezikov		✓	✓	Hkrati lahko prikažete dva jezika.
Poišči	✓	✓	✓	Iskanje besedila in pravnih sredstev v repertoarju.
Primer		✓	✓	Upravljanje primerov, recepti, tiskanje.
Analiza		✓	✓	Funkcija analize ("repertorizacije").
Materia Medica		✓	✓	Modul Materia Medica.
Urednik repertorija			✓	Repertoar lahko dopolnite z lastnimi prispevki.
Izbor repertoarja			✓	Določite svoje filtre repertoarja, na primer izberite zelene avtorje.
Indeks repertorija			✓	Hitrejšje iskanje rubrik s posebnim repertoarnim kazalom.
Grafični repertoar			✓	Grafični prikaz odnosov med repertoarnimi rubrikami.
Predlagatelj pravnega sredstva			✓	Predlagajte dodatna zdravila za majhne rubrike na podlagi zdravil za sorodne simptome.
Poudarite najdbe			✓	Označite rezultate iskanja v Repertoriju ali Materia Medica.
Najdi v Materia Medica			✓	Iskanje v knjigah Materia Medica.
Sinonimi			✓	Iskanje z besednimi sopomenkami.
Analizne formule			✓	Določite svoje formule za analizo.
Filtri za analizo			✓	Napredno filtriranje rezultatov analize.
Materia Medica Editor			✓	Uredite svojo Materia Medica.
Analiza kraljestva			✓	Analiza na podlagi Kraljestev in družin.
Diferencialna diagnoza			✓	Zmogljiv modul za lažje razlikovanje pravnih sredstev.
Napredne funkcije			✓	Številne druge možnosti za bolj izkušene in zahtevne strokovnjake.

Cene

Za cene licenc obiščite naše spletno mesto www.completedynamics.com, razdelek *Določanje cen*.

Dodatne licence

Program *Complete Dynamics* lahko uporabljate na več kot enem računalniku, ki ga imate v lasti.

Po nakupu licence vam lahko pošljemo dodatne licence za druge računalnike. Za to potrebujemo licenčne številke drugih računalnikov. Številko licence najdete v pogovornem oknu *Menu / Help / User and license* na drugem(-ih) računalniku(-ih).

Pošljite nam številko(-e) dodatne licence in poslali vam bomo dodatne informacije o licenci po e-pošti. Z nami se lahko povežete prek menija, in sicer s *Meni / Pomoč / Splošne povratne informacije*.

Veljajo določene omejitve. Licenco lahko uporabljate na:


- računalnik v svoji ordinaciji,
- računalnik doma,
- prenosni računalnik.


Če je vaš položaj drugačen, se obrnite na nas in ponudili vam bomo rešitev.

Vaša licenca je osebna in jo lahko uporabljate samo vi, vaše osebje ali družinski člani, ki delajo za vas.

Indeksni modul

Odpiranje modula Indeks

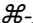Pojdite v modul Indeks s klikom na zavihek *Indeks*. (Možnost menija *Oglejte si / Indeks*, .

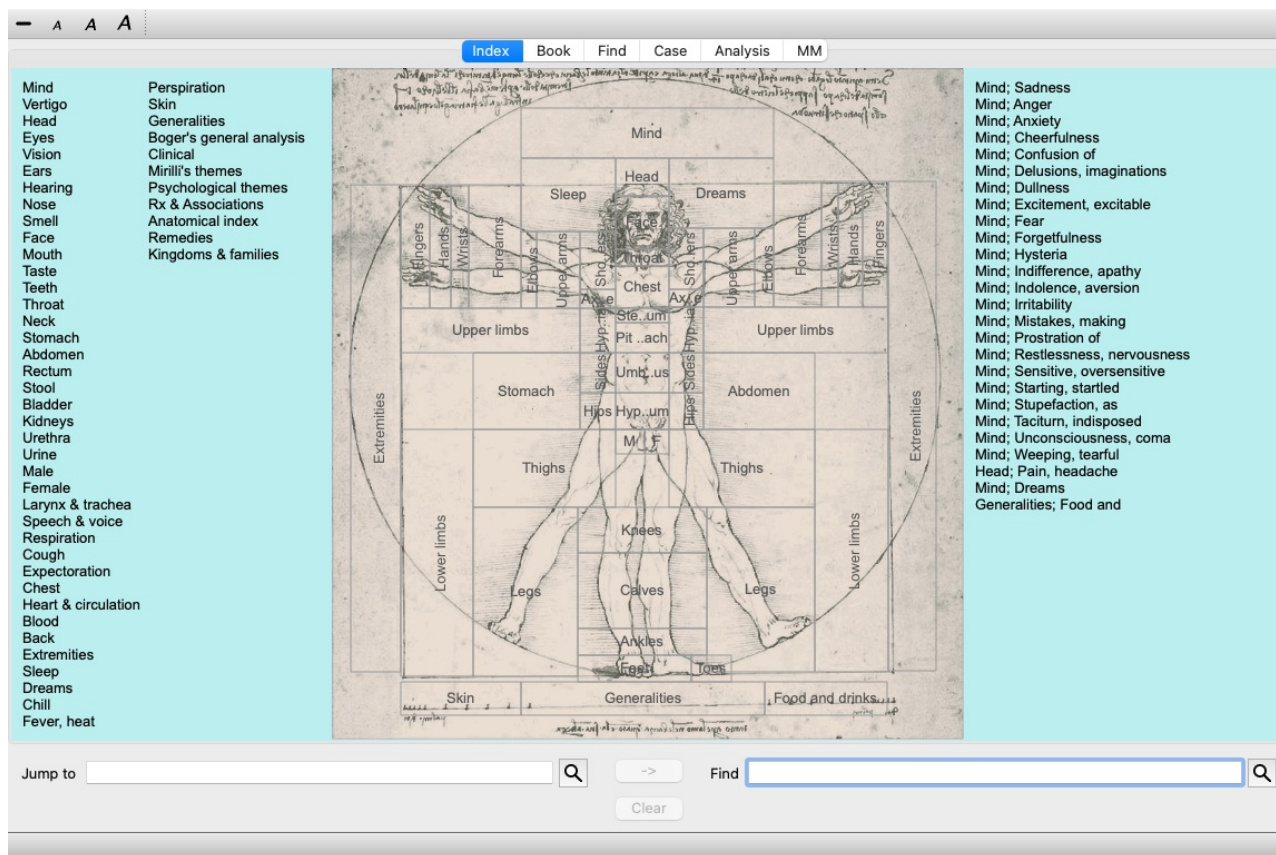

Uporaba modula Indeks

Modul kazalo omogoča hiter dostop do vsebine repertoarja.

Razdeljena je na tri področja:

- na levi strani je kazalo poglavij repertoarja,
- srednji del je grafično kazalo,
- na desni strani je hitro kazalo pogosto uporabljenih rubrik.

Premaknite miško nad besedilo ali slike. Če lahko izberete, se kurzor spremeni v roko . Če želite izvesti dejanje, kliknite na element.

Uporaba več repertoarjev

Če imate licenco za dodatne repertoarje, bo v kazalu poglavij repertoarja prikazano tudi ime repertoarja.

Complete Repertory (...)


Ko kliknete na ime repertoarja, se izbere naslednji repertoar in prikaže njegova poglavja.

Na voljo je tudi pojavni meni, v katerem lahko izberete enega od razpoložljivih repertoarjev.

Knjižni modul

Odpiranje modula Knjiga

Pojdite v modul Knjiga tako, da kliknete zavihek *Knjiga*. (Možnost menija *Oglejte si / Knjiga*, *⌘-B*). V naslednjem primeru je knjiga odprta pri rubriki *Um; tesnoba; vročinski oblivi*, s.

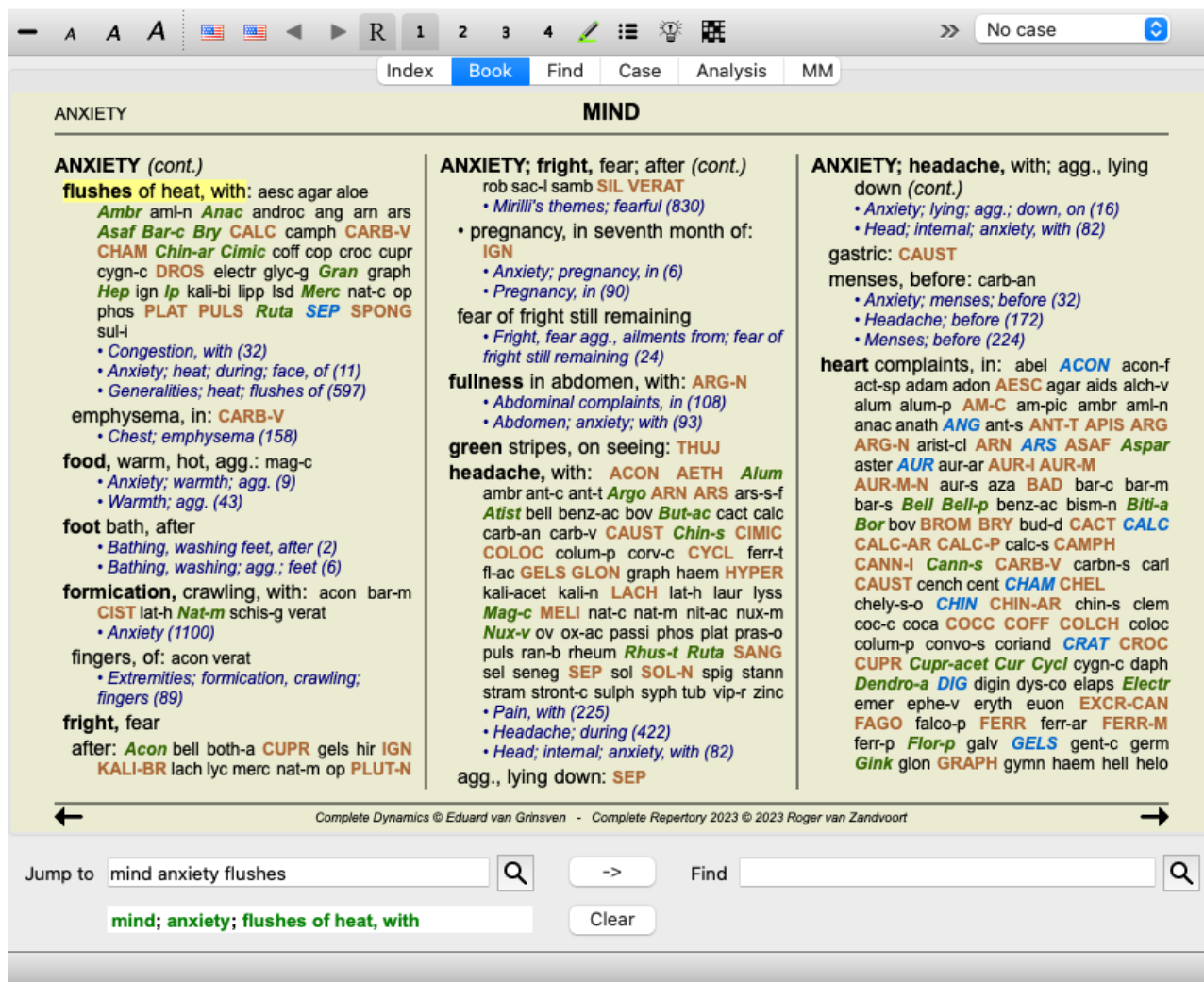

ANXIETY

ANXIETY (cont.)

flushes of heat, with: aesc agar aloe
Ambr aml-n Anac androc ang am ars
Asaf Bar-c Bry CALC camph CARB-V
CHAM Chin-ar Cimic coff cop croc cupr
cygn-c DROS electr glyc-g Gran graph
Hep ign Ip kali-bi lipp lsd Merc nat-c op
phos PLAT PULS Ruta SEP SPONG
sul-i
• Congestion, with (32)
• Anxiety; heat; during; face, of (11)
• Generalities; heat; flushes of (597)

emphysema, in: CARB-V
• Chest; emphysema (158)

food, warm, hot, agg.: mag-c
• Anxiety; warmth; agg. (9)
• Warmth; agg. (43)

foot bath, after
• Bathing, washing feet, after (2)
• Bathing, washing; agg.; feet (6)

formication, crawling, with: acon bar-m
CIST lat-h Nat-m schis-g verat
• Anxiety (1100)

fingers, of: acon verat
• Extremities; formication, crawling;
fingers (89)

fright, fear
after: Acon bell both-a CUPR gels hir IGN
KALI-BR lach lyc merc nat-m op PLUT-N

ANXIETY; fright, fear; after (cont.)
rob sac-l samb SIL VERAT
• Mirilli's themes; fearful (830)
• pregnancy, in seventh month of:
IGN
• Anxiety; pregnancy, in (6)
• Pregnancy, in (90)
fear of fright still remaining
• Fright, fear agg., ailments from; fear of
fright still remaining (24)
fullness in abdomen, with: ARG-N
• Abdominal complaints, in (108)
• Abdomen; anxiety; with (93)
green stripes, on seeing: THUJ
headache, with: ACON AETH Alum
ambr ant-c ant-t Argo ARN ARS ars-s-f
Atist bell benz-ac bov But-ac cact calc
carb-an carb-v CAUST Chin-s CIMIC
COLOC colum-p corv-c CYCL ferr-t
fl-ac GELS GLON graph haem HYPER
kali-acet kali-n LACH lat-h laur lyss
Mag-c MELI nat-c nat-m nit-ac nux-m
Nux-v ov ox-ac passi phos plat pras-o
puls ran-b rheum Rhus-t Ruta SANG
sel seneg SEP sol SOL-N spig stann
stram stront-c sulph syph tub vip-r zinc
• Pain, with (225)
• Headache; during (422)
• Head; internal; anxiety, with (82)
agg., lying down: SEP

ANXIETY; headache, with; agg., lying down (cont.)
• Anxiety; lying; agg.; down, on (16)
• Head; internal; anxiety, with (82)
gastric: CAUST
menses, before: carb-an
• Anxiety; menses; before (32)
• Headache; before (172)
• Menses; before (224)
heart complaints, in: abel ACON acon-f
act-sp adam adon AESC agar aids aich-v
alum alum-p AM-C am-pic ambr aml-n
anac anath ANG ant-s ANT-T APIS ARG
ARG-N arist-cl ARN ARS ASAF Aspar
aster AUR aur-ar AUR-I AUR-M
AUR-M-N aur-s aza BAD bar-c bar-m
bar-s Bell Bell-p benz-ac bism-n Biti-a
Bor bov BROM BRY bud-d CACT CALC
CALC-AR CALC-P calc-s CAMPH
CANN-I Cann-s CARB-V carb-n carl
CAUST cench cent CHAM CHEL
chely-s-o CHIN CHIN-AR chin-s clem
coc-c coca COCC COFF COLCH coloc
colum-p convo-s coriand CRAT CROC
CUPR Cupr-acet Cur Cycl cygn-c daph
Dendro-a DIG digin dys-co elaps Electr
emer ephe-v eryth euon EXCR-CAN
FAGO falco-p FERR ferr-ar FERR-M
ferr-p Flor-p galv GELS gent-c germ
Gink glon GRAPH gymn haem hell helo

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort

Jump to mind anxiety flushes

mind; anxiety; flushes of heat, with

Find

Clear

Postavitev knjige se samodejno prilagodi, ko spremenite velikost okna. Ko okno povečate, bo knjiga prikazana v estetski dvostranski postavitvi:

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort

Jump to: mind anxiety flushes

Find: mind; anxiety; flushes of heat, with

Clear

Pravna sredstva in reference

V rubriki je prikazano njeno besedilo, sledijo pa ji sredstva in sklici.

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON

acon-f agath-a agki-p **Alco** aloe **AM-C** am-m **ANAC ANDROC** aran-ix am ars ars-s-f **Astac** atro **AUR** aur-m-n aur-s **BELL** beryl-n **Biti-a** bor bov bufo **Bung-f** bute-j **calc-i** **CAMP** canth carc **CAUST** cere-s **CHAM** chin cic **CON** cor-r coriand **CROC** cub culx cupr-ar der **Dulc** elae falco-p **FERR** fic **GALL-AC** gels gink granit-m **Hafn** harp helx-t hema-h **HEP** hist hydr hydr-ac **HYOS** ign iod **IP** **KALI-AR** kali-c **KALI-H** **LAC-C** lac-d lach lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r **LYC** **LYSS** m-aust mag-c mangi med **MERC** **MOSCH** nat-c nat-m **Nit-ac** **NUX-V** ozon **PALL** **PETR** **PHYSALA-P** **PLAT** plb **Raja-s** ran-b rhus-g sac-l **Sanic** **Sarr** **SCORP** **SENEG** **SEP** **Sil** spong **Staph** **STRAM** stront-c **SULPH** syph **TARENT** thlaspi **THUJ** thul-f trich-d **Tritic-v** **TUB** **URAN** **VERAT** verbe-h viol-t vip **Xeno**

- General (1769)
- Answer, answering, answers; offensive (1)
- Contemptuous (119)
- Cursing, swearing, desires (141)
- Insolence, impertinence (51)
- Nipping at everyone (1)
- Quarrelsomeness, scolding (284)
- Rudeness (92)
- Mirilli's themes; offensive (458)
- Psychological themes; aggression (305)

Sredstva so lahko prikazana v 4 stopnjah.

Stopnje so razlikovane tako, da so prikazane v različnih slogih in barvah.

V tem primeru so to:

- 4: **CHAM, LYC, NUX-V.**
- 3: **ABIES-N, ACON, AM-C, ANAC, ANDROC, AUR ...**
- 2: **Alco, Bung-f, Dulc, Ip, Nit-ac, Sarr, Sil, Staph.**
- 1: acon-f, agath-a, agki-p, aloe, am-m ...

Seznamu pravnih sredstev sledijo sklici na druge rubrike. V tem primeru je 10 referenc.

S klikom na referenco preidete na rubriko, na katero se sklicuje.

Polni ali kompaktni pogled

Skrivanje pravnih sredstev in referenc

V kompaktnem pogledu so prikazane samo rubrike s številom pravnih sredstev, ki jih vsebujejo, pri čemer se pravna sredstva skrijejo, da se optimalno izkoristi razpoložljivi prostor na zaslonu. (Možnost menija *Oglejte si / Pravna sredstva / Prikaži sredstva za odpravo napak*, gumb orodne vrstice **R**). S preslednico preklpite med polnim in kompaktnim pogledom.

— A A A R 1 2 3 4 All rubrics All remedies No case

Index Book Find Case Analysis MM

ANXIETY	MIND	MIND	ANXIETY
ANXIETY (cont.) flushes of heat, with: (45) • Congestion, with (32) • Anxiety; heat; during; face, of (11) • Generalities; heat; flushes of (597) emphysema, in: (1) • Chest; emphysema (158) food, warm, hot, agg.: (1) • Anxiety; warmth; agg. (9) • Warmth; agg. (43) foot bath, after • Bathing, washing feet, after (2) • Bathing, washing; agg.; feet (6) formication, crawling, with: (7) • Anxiety (1100) fingers, of: (2) • Extremities; formication, crawling; fingers (89) fright, fear after: (19) • Mirilli's themes; fearful (830) • pregnancy, in seventh month of: (1) • Anxiety; pregnancy, in (6) • Pregnancy, in (90) fear of fright still remaining • Fright, fear agg., ailments from; fear of fright still remaining (24) fullness in abdomen, with: (1) • Abdominal complaints, in (108) • Abdomen; anxiety; with (93) green stripes, on seeing: (1) headache, with: (72) • Pain, with (225)	ANXIETY; headache, with (cont.) • Headache; during (422) • Head; internal; anxiety, with (82) agg., lying down: (1) • Anxiety; lying; agg.; down, on (16) • Head; internal; anxiety, with (82) gastric: (1) menses, before: (1) • Anxiety; menses; before (32) • Headache; before (172) • Menses; before (224) heart complaints, in: (261) • Heart, about his (15) • Heart complaints, in (307) • Mirilli's themes; disease (794) • Mirilli's themes; heart (355) heat before: (4) during: (92) • abdomen, in: (3) • Anxiety; abdominal complaints, in (108) • Abdomen; anxiety; with (93) • chest, in • Chest; heat; anxiety, with (12) • face, of: (11) • Anxiety (1100) • Anxiety; agg., ailments from (360) • Anxiety; flushes of heat, with (45) • Heat, with; face, of (35) • Face; anxious expression (153) • Chest; anxiety; heat, with; face, in (1) • during and after: (1)	ANXIETY; heat; during (cont.) • flushes of • Anxiety; flushes of heat, with (45) • hands, of • Extremities; heat; hands; anxiety, with (3) • head, of • Head; heat; anxiety; with (11) • soup, after: (1) • Anxiety; soup, after (2) • sudden: (1) heaviness, with: (11) abdomen, in • Anxiety; abdominal complaints, in (108) • Abdomen; heaviness as from a load or weight; anxiety, with (7) chest, in: (5) • Chest; heaviness, weight (226) heart region, in: (2) • Anxiety; heart complaints, in (261) limbs, in: (3) feet, in: (2) • Anxiety (1100) • Anxiety; agg., ailments from (360) • Extremities; heaviness, weariness; lower limbs; anxiety, with (3) stomach, in: (1) • Stomach; heaviness (342) hemoptysis, in: (1) • Sleeplessness, with (95) hemorrhage, with: (15) intestinal: (3)	ANXIETY; hemorrhage, with (cont.) lungs, of: (3) • Expectoration; bloody, spitting of blood (359) hemorrhage, with uterine: (6) • Hemorrhage, with (15) • Hemorrhage, with uterine (42) hernia, in inguinal: (3) home, away from: (3) • Homesickness, nostalgia; ailments from, agg. (64) horrible things, after • Cruelties, after hearing of (5) • Horrible things, sad stories affect profoundly, agg.; mental and emotional consequences (201) house or room agg.: (28) • House; agg. (52) • Room, in; agg. (62) • entering, on: (3) • Generalities; room; agg.; entering, on (159) • closed: (6) • Fear; narrow, small place, in, claustrophobia (96) • Generalities; room; agg.; closed (97) • warm: (5) • Anxiety; warmth; agg. (9) • Fear; room, of warm (3) • Room, in; agg. (62) • Warmth; agg. (43) amel.: (3) • House; amel. (7)

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort

Jump to mind anxiety flushes Find

mind; anxiety; flushes of heat, with Clear

Ko dvakrat pritisnete preslednico, se skrijeta tudi referenca, tako da so vidna samo imena rubrik. Če želite skriti ali prikazati vsa pravna sredstva in sklice, dvakrat kliknite na katero koli belo mesto na strani. Dvakrat lahko kliknete tudi na oznako rubrike.

— A A A R 1 2 3 4 All rubrics All remedies No case

Index Book Find Case Analysis MM

ANXIETY	MIND	MIND	ANXIETY
ANXIETY (cont.) flushes of heat, with: (45) emphysema, in: (1) food, warm, hot, agg.: (1) foot bath, after formication, crawling, with: (7) fingers, of: (2) fright, fear after: (19) • pregnancy, in seventh month of: (1) fear of fright still remaining fullness in abdomen, with: (1) green stripes, on seeing: (1) headache, with: (72) agg., lying down: (1) gastric: (1) menses, before: (1) heart complaints, in: (261) heat before: (4) during: (92) • abdomen, in: (3) • chest, in • face, of: (11) • during and after: (1) • flushes of • hands, of • head, of • soup, after: (1)	ANXIETY; heat; during (cont.) • sudden: (1) heaviness, with: (11) abdomen, in chest, in: (5) heart region, in: (2) limbs, in: (3) • feet, in: (2) stomach, in: (1) hemoptysis, in: (1) hemorrhage, with: (15) intestinal: (3) lungs, of: (3) hemorrhage, with uterine: (6) hernia, in inguinal: (3) home, away from: (3) horrible things, after house or room agg.: (28) • entering, on: (3) • closed: (6) • warm: (5) amel.: (3) humming in ears, with: (1) hunger, fasting, during: (6) hurry, with: (18) hydrothorax, in: (2) impatience, with: (5) inactivity, with: (5)	ANXIETY (cont.) indigestion, in: (6) inflammation of endocard, after: (3) inflammation, with larynx, of: (1) uterus, of, or ovarian inflammation: (1) injuries, after: (4) inspiration, deep agg. •: (7) amel.: (8) must: (4) irritability, in journey, before: (5) joyful things, by most: (2) lameness, with: (1) lascivious impulses, from: (1) laughing and crying, ending in profuse perspiration, with: (1) lemonade amel.: (1) leucorrhea, with: (2) looking downward out of window, from: (1) steadily: (1) lump sensation in throat, with: (3) lunch, after: (2) lying agg.: (38) • back, on: (1)	ANXIETY; lying; agg. (cont.) • down, on: (16) • side, on: (12) • left: (11) • right, from flatulence: (1) amel.: (5) amel., with head high: (1) lie down with anguish, must: (3) manual work masturbation, from: (3) meditating, while: (11) menses before: (32) during: (47) • anger, with: (9) • dysmenorrhea: (1) • fainting, before: (1) • faintness, with: (1) • paroxysms: (1) • profuse: (1) after: (10) • sleep, preventing: (1) amel.: (2) suppressed, from: (6) mental exertion agg.: (27) mind ceased to be active, after: (1) moaning, groaning, with: (110) motion agg.: (24)


Complete Dynamics © Eduard van Grinsven Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort

Jump to mind anxiety flushes Find

mind; anxiety; flushes of heat, with Clear

Skrivanje podrubrik

Možno je tudi skriti vse podrubrike in tako prikazati samo rubrike najvišje ravni repertoarja. (Možnost menija *Knjiga / Samo glavne rubrike*, možnost priročnega menija *Samo glavne rubrike*). Ta možnost je zelo uporabna za tiste, ki se želijo naučiti strukture repertoarja.

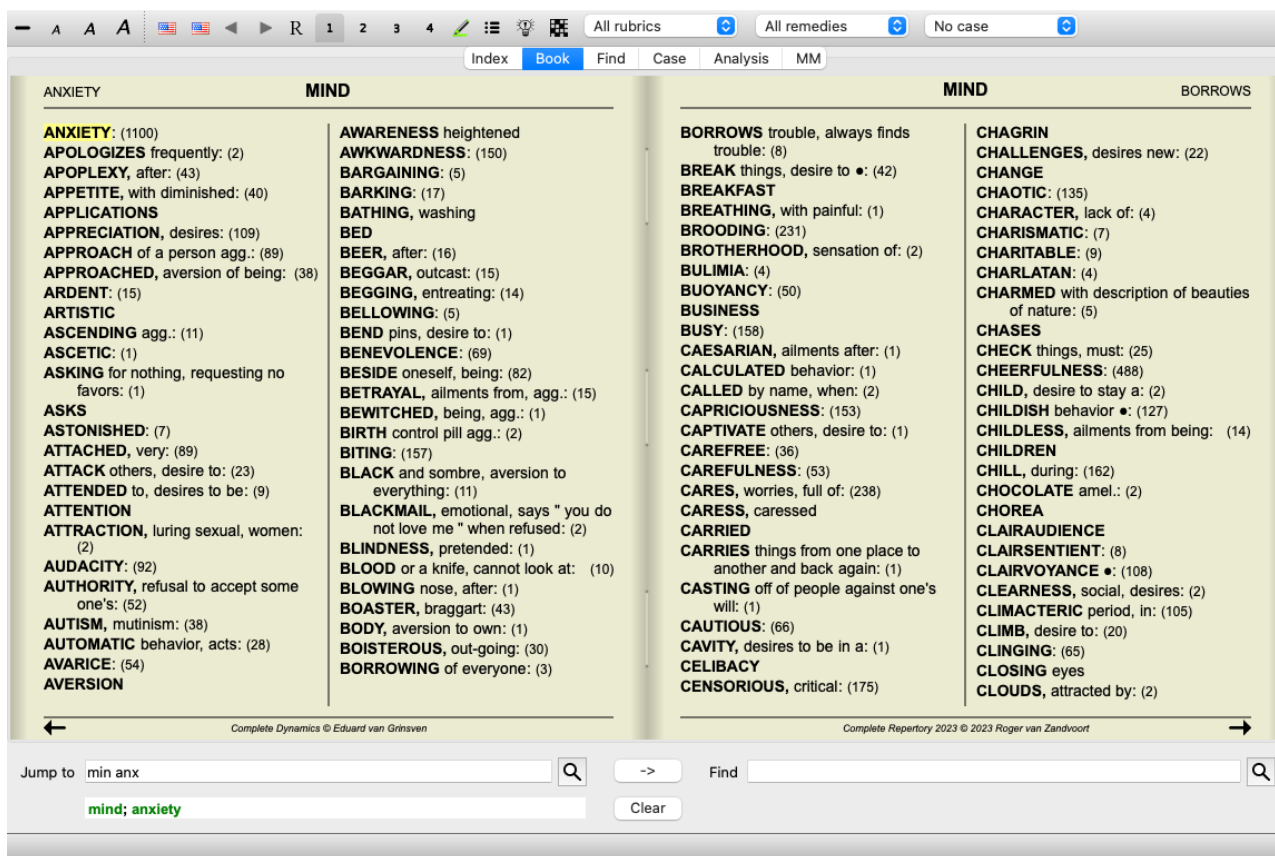

Enostavno se lahko vrnete na prikaz vseh rubrik. (Možnost menija *Knjiga / Samo glavne rubrike*, možnost priročnega menija *Samo glavne rubrike*).
S klikom na rubriko lahko preklopite nazaj na običajni pogled repertoarja.

Vrstni red razvrščanja pravnih sredstev

Privzeto je abecedni vrstni red tiskanja pravnih sredstev.

Pravna sredstva lahko prikažete po vrstnem redu pomembnosti. (Možnost menija *Oglejte si / Pravna sredstva / Razvrsti po pomembnosti*, možnost priročnega menija *Pravna sredstva / Razvrsti po pomembnosti*). (Shift + preslednica).

Abecedni vrstni red razvrščanja

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON
acon-f agath-a agki-p **Alco** aloe **AM-C**
am-m **ANAC ANDROC** aran-ix am ars
ars-s-f **Astac** atro **AUR** aur-m-n aur-s
BELL beryl-n **Biti-a** bor bov bufo **Bung-f**
bute-j calc-i **CAMPH** canth carc **CAUST**
cere-s **CHAM** chin cic **CON** cor-r coriand
CROC cub culx cupr-ar der **Dulc** elae
falco-p **FERR** fic **GALL-AC** gels gink
granit-m **Hafn** harp helx-t hema-h **HEP**
hist hydr hydr-ac **HYOS** **IGN** iod **Ip**
KALI-AR kali-c **KALI-I** **LAC-C** lac-d lach
lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r **LYC** **LYSS**
m-aust mag-c mangi med **MERC**

Razvrščeno po pomembnosti

ABUSIVE, insulting: NUX-V VERAT
CHAM **LYC** **MOSCH** **THUJ** **CON** **HYOS**
CAMPH **GALL-AC** **MERC** **SCORP**
CROC **KALI-I** **PLAT** **STRAM** **URAN**
AUR **LYSS** **PETR** **AM-C** **HEP** **BELL**
ABIES-N **ANAC** **ANDROC** **CAUST** **IGN**
KALI-AR **PALL** **SULPH** **ACON** **FERR**
LAC-C **PHYSALA-P** **SENEG** **SEP**
TARENT **TUB** **Nit-ac** **Ip** **Bung-f** **Dulc**
Astac **Sanic** **Alco** **Sarr** **Sil** **Staph** **Biti-a**
Hafn **Raja-s** **Tritic-v** **Xeno** am-m lava-e
cor-r lach hydr agath-a aur-m-n bov
calc-i carc falco-p gels helx-t nat-c nat-m
ran-b acon-f agki-p aloe aran-ix am ars

Dodatne informacije

Če se z miško pomaknete nad katero koli besedilo v knjigi, se po potrebi prikažejo dodatne informacije o tem besedilu. Te informacije so prikazane v območju za sporočila v spodnjem levem kotu okna.

V zgornjem primeru se s premikanjem miške prikažejo naslednje informacije:

Z miško kliknite na besedilo rubrike
ABUSIVE

Kent p.1; Synthetic p.I-7; Generale p.1

Ta rubrika izhaja iz treh izvirnih virov:

- Kentov repertoar, stran 1
- Barthel & Klunker's Synthetic Repertory, zvezek 1, stran 7
- Künzlijev Repertorium Generale, stran 1.

Z miško kliknite na kratico zdravila **LYC**

lyc = Lycopodium clavatum (Bönninghausen, Gallavardin, Jahr, Knerr)

Koda zdravila *lyc* pomeni *Lycopodium clavatum*.

Kot viri so uporabljeni naslednji avtorji: *Bönninghausen, Gallavardin, Jahr in Knerr*.

Če želite v ločenem oknu pridobiti podrobne informacije, dvakrat kliknite na zdravilo.

Omejitev prikazanih informacij

Poleg preklapljanja med polnim in kompaktnim prikazom je mogoče omejiti število prikazanih pravnih sredstev. To storite tako, da pritisnete tipke tipkovnice 1, 2, 3 ali 4. To bo omejilo prikazana zdravila na tista, ki imajo vsaj določeno gradacijo 1, 2, 3 ali 4. (Možnost menija *Oglejte si / Pravna sredstva / Vsi razredi*, gumb orodne vrstice ¹, možnost menija *Oglejte si / Pravna sredstva / Razred 2+*, gumb orodne vrstice ², možnost menija *Oglejte si / Pravna sredstva / Razred 3+*, gumb orodne vrstice ³, možnost menija *Oglejte si / Pravna sredstva / Razred 4*, gumb orodne vrstice ⁴, možnost priročnega menija *Pravna sredstva / Vsi razredi*, možnost priročnega menija *Pravna sredstva / Razred 2+*, možnost priročnega menija *Pravna sredstva / Razred 3+*, možnost priročnega menija *Pravna sredstva / Razred 4*).

Primer, spet z rubriko *Mind; Abusive*:

Pritisnite tipko 4.
Samo sredstva 4. stopnje.

ABUSIVE, insulting: CHAM LYC NUX-V
VERAT (+120)

Pritisnite tipko 3.
3. in 4. razred.

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON
AM-C ANAC ANDROC AUR BELL
CAMP CAUST CHAM CON CROC
FERR GALL-AC HEP HYOS IGN
KALI-AR KALI-I LAC-C LYC LYSS
MERC MOSCH NUX-V PALL PETR
PHYSALA-P PLAT SCORP SENEG
SEP STRAM SULPH TARENT THUJ

Pritisnite tipko 2.
2., 3. in 4. razred.

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON *Alco*
AM-C ANAC ANDROC *Astac* AUR
BELL *Biti-a* *Bung-f* CAMP CAUST
CHAM CON CROC *Dulc* FERR
GALL-AC *Hafn* HEP HYOS IGN *Ip*
KALI-AR KALI-I LAC-C LYC LYSS
MERC MOSCH *Nit-ac* NUX-V PALL
PETR PHYSALA-P PLAT *Raja-s* *Sanic*
Sarr SCORP SENEG SEP *Sil* *Staph*

Pritisnite tipko 1.
Prikazana so vsa pravna sredstva.

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON
acon-f agath-a agki-p *Alco* aloe AM-C
am-m ANAC ANDROC aran-ix am ars
ars-s-f *Astac* atro AUR aur-m-n aur-s
BELL beryl-n *Biti-a* bor bov bufo *Bung-f*
bute-j calc-i CAMP CAUST
cere-s CHAM chin cic CON cor-r coriand
CROC cub culx cupr-ar der *Dulc* elae
falco-p FERR fic GALL-AC gels gink
granit-m *Hafn* harp helx-t hema-h HEP
hist hydr hydr-ac HYOS IGN iod *Ip*
KALI-AR kali-c KALI-I LAC-C lac-d lach
lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r LYC LYSS
m-aust mag-c mangi med MERC

Velikost besedila

Besedilo lahko zmanjšate ali povečate. (Možnost menija *Oglejte si / Manjše besedilo*, gumb orodne vrstice ^A, možnost menija *Oglejte si / Standardna velikost besedila*, gumb orodne vrstice ^A, možnost menija *Oglejte si / Večje besedilo*, gumb orodne vrstice ^A, možnost priročnega menija *Manjše besedilo*, možnost priročnega menija *Standardna velikost besedila*, možnost priročnega menija *Večje besedilo*).

Gumb Akcija

- A** Besedilo je manjše.
- A** Velikost izvirnega besedila.
- A** Povečajte besedilo.

Navigacija, uporaba tipkovnice in miške

Navigacijo po knjigi lahko izvajate s tipkovnico, miško, gumbno vrstico ali menijem (*Menu / Navigate* menu). Pomikanje z miško se izvaja z majhnim kolescem na miški ali s sledilno ploščico, vgrajeno v prenosne računalnike. Nekatere miške imajo kolesce za pomikanje, s katerim se lahko pomikate le navzgor in navzdol, sodobne miške pa se lahko pogosto pomikajo tudi levo in desno. Če se vam zdi premikanje po levi/desni strani neprijetno, ga lahko onemogočite v meniju z nastavitvami *Preferences*.

Gumb	Tipkovnica	Miška	Akcija
	Do	Pomaknite se navzgor	Prejšnja rubrika.
	Navzdol	Pomaknite se navzdol	Naslednja rubrika.

Indeksno drevo vedno izpostavi rubriko, ki je trenutno izbrana v modulu Knjiga. Ko se premaknete na drugo rubriko v modulu Knjiga, se indeksno drevo samodejno prilagodi. Če izberete rubriko v drevesu kazal, se modul Knjiga premakne na isto rubriko.

Upoštevajte, da se tudi polje *Jump to* prilagodi tako, da prikaže trenutno izbrano rubriko. Te kombinirane možnosti vam dajejo največjo svobodo in moč pri krmarjenju po repertoarju.

Kopiranje rubrike v odložišče


Včasih je rubriko koristno kopirati v odložišče in jo prilepiti v drug program, na primer v urejevalnik besedil. (Možnost priročnega menija *Kopiraj / Kopiraj rubrično nalepko*, možnost priročnega menija *Kopiraj / Kopiranje rubrike in pravnih sredstev*).

Ime rubrike lahko kopirate v odložišče s *Cmd-C* (*Control-C*).


Če dvakrat (v eni sekundi) pritisnete *Cmd-C*, se ime rubrike kopira skupaj z vsemi pravnimi sredstvi v rubriki.

Izbira jezika

Ovisno od izdaje programa in licence je na voljo več jezikovnih možnosti za *Complete Repertory*.

Razpoložljive jezikovne možnosti lahko izberete v meniju ali v vrstici z gumbi. (Možnost menija *Knjiga / Jezik / Knjiga v angleščini*, možnost priročnega menija *Jezik / Knjiga v angleščini*). (gumb za zastavo, )

V izdaji *Practitioner* lahko izberete drugi jezik (možnosti so odvisne od vaše licence), da se besedilo rubrike prikaže v drugem jeziku. Na primer francosko: (Možnost menija *Knjiga / Jezik / Dodatna knjiga v francoščini*, možnost priročnega menija *Jezik / Dodatna knjiga v francoščini*).

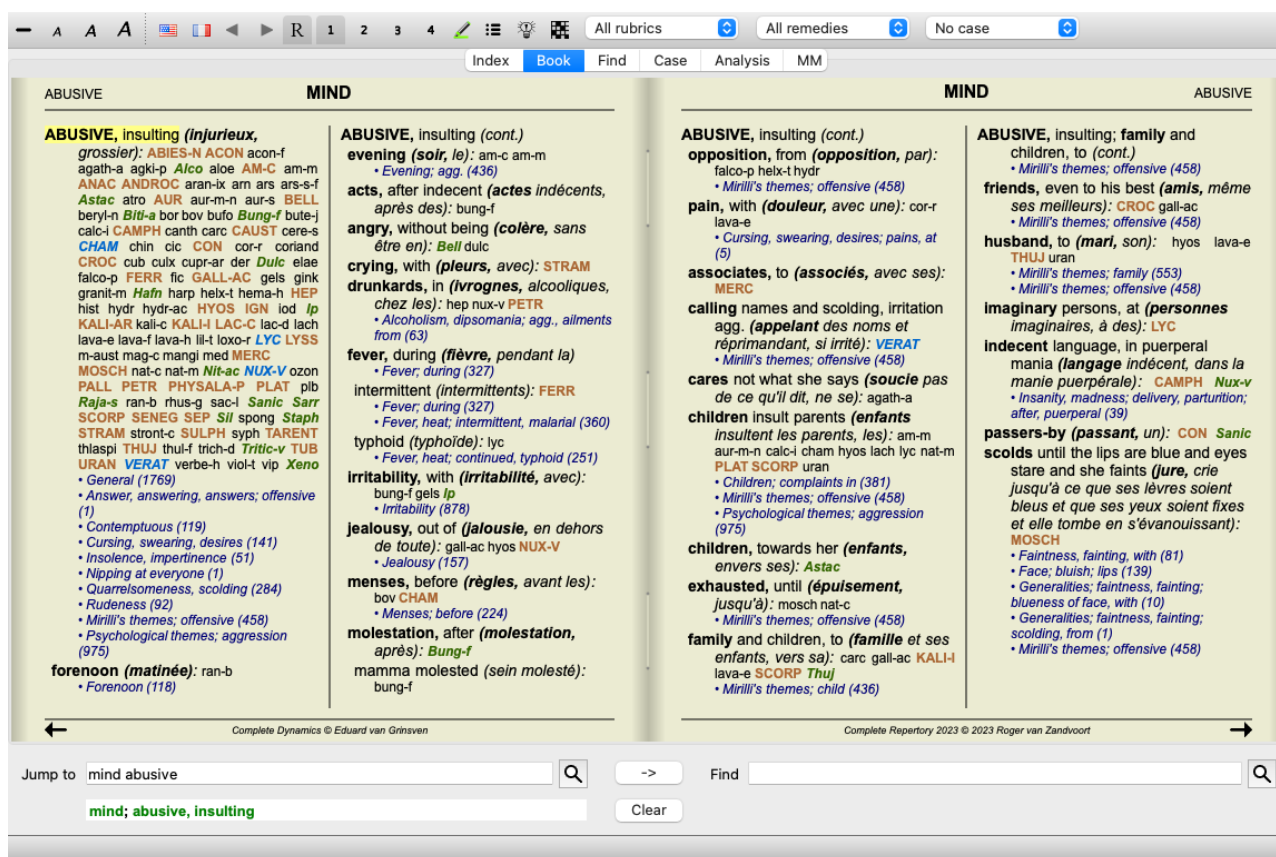

Najljubše rubrike

Nekatere rubrike se vam zdijo pomembne, druge pa ne tako pomembne. To še posebej velja, če za iskanje rubrik uporabljate modul *Find*. Če želite dodatno poudariti rubrike, ki so za vas pomembne, jih lahko označite kot priljubljene.

Če želite rubriko označiti kot priljubljeno, kliknite na rubriko in jo označite. (Možnost menija *Knjiga / Rubrika je priljubljena*, možnost priročnega menija *Rubrika je priljubljena*).

Vsaka rubrika, ki je označena kot priljubljena, bo podčrtana.

Ko boste rubrike označili kot priljubljene, se bo v modulu *Find* pojavilo dodatno polje, ki vam bo omogočilo, da iskanje omejite samo na priljubljene rubrike.

Grafični prikaz repertoarja

Repertoar je na splošno predstavljen v knjižni obliki. To je priročno za iskanje rubrik in sredstev, vendar le delno prikaže strukturo repertorija.

S pomočjo drevesa *Book Index* si je mogoče hierarhično strukturo repertoarja lažje predstavljati in po njej krmariti.

V nekaterih primerih vas bo morda zanimalo, kako se rubrike povezujejo z drugimi rubrikami na podlagi podobnosti njihovega pomena. V takih primerih je grafična predstavitev veliko lažja.

Za rubriko lahko odprete grafični prikaz repertoarja. (Možnost menija *Knjiga / Prikaži kot graf*, *ℳ-G*, možnost priročnega menija *Prikaži strukturo repertoarja*). Uporabite lahko tudi priročni meni modula *Knjižna stran*.

Kot primer si oglejmo rubriko *Um; jeza; večerno poslabšanje; tresenje z, po jedi*. Ta rubrika je sestavljena iz nekaj osnovnih elementov:

- duševni simptomi,
- jeza,
- s tresenjem,
- zvečer slabše,
- slabše po jedi.


Ker rubrika vsebuje le eno sredstvo, bi bilo zelo zanimivo razmisliti o podobnih rubrikah z manjšim številom teh elementov.

Grafični prikaz nam zlahka pokaže povezavo z drugimi rubrikami.

Na voljo so različni grafični prikazi, od katerih ima vsak drugačen namen.

- Struktura repertoarja (Možnost menija *Knjiga / Prikaži strukturo repertoarja*, možnost priročnega menija *Prikaži strukturo repertoarja*). Ta pogled je odlično orodje za preučevanje strukture repertoarja.
- Splošne rubrike (Možnost menija *Knjiga / Prikaži splošne rubrike*, možnost priročnega menija *Prikaži splošne rubrike*). Ta pogled vam pomaga hitro izbrati bolj splošne rubrike, kot je primer rubrike zgoraj.

Pogled na strukturo repertorija

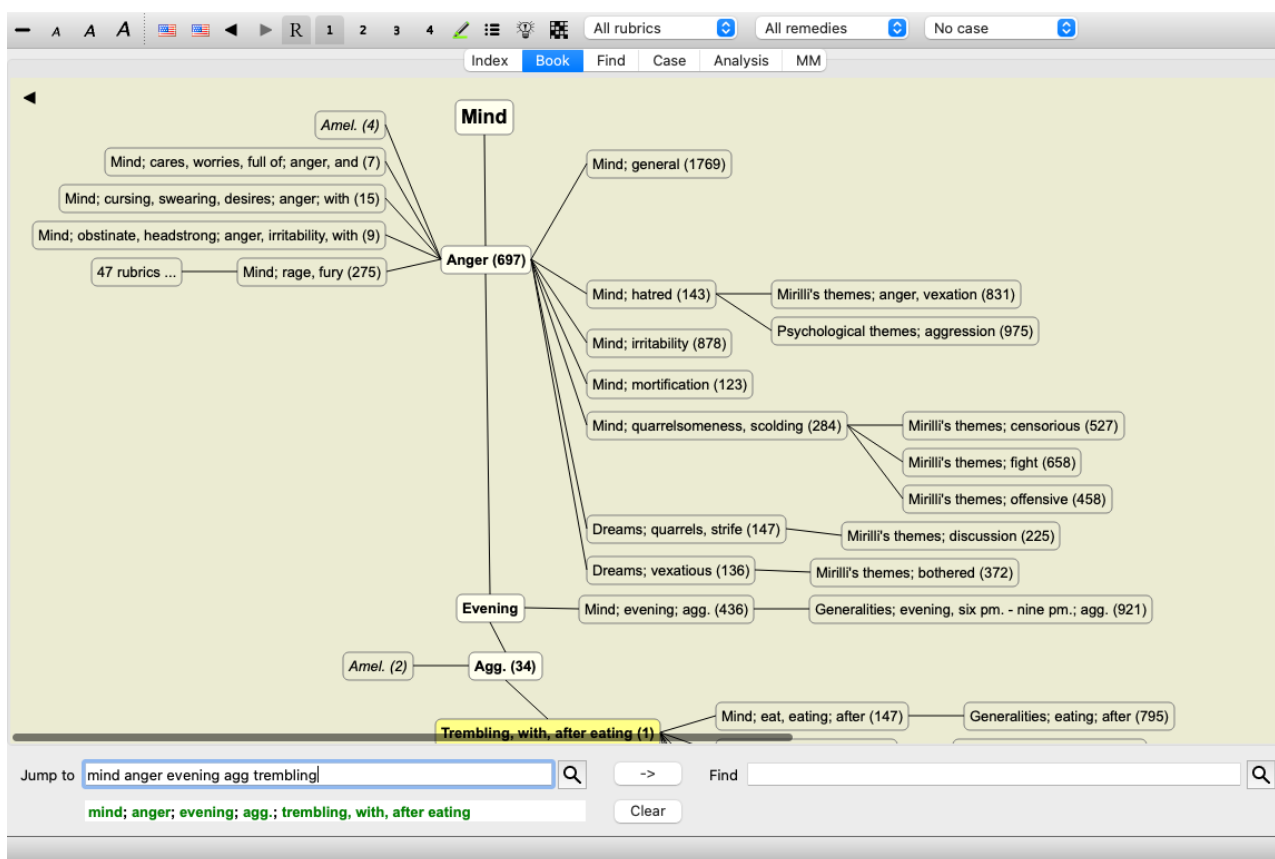

Navpična linija blokov prikazuje ravni rubrik, ki se začnejo pri *Um* in končajo pri *Trema, z, po jedi*.


Na levi strani boste našli polarne rubrike. V tem primeru je prikazan par *Amel.* - *Agg.*.

Na levi strani boste našli tudi rubrike s podrobnejšimi opisi simptomov.


Na desni strani so prikazane povezane rubrike.

Če dvakrat kliknete na eno od rubrik, bo ta postala nova izbrana rubrika.

V grafičnem prikazu lahko analizi dodate tudi rubrike. To lahko storite v priročnem meniju na rubriki.

Če se želite vrniti v običajni pogled knjige, kliknite  ali odstranite potrditev možnosti menija *Menu / Book / Show as graph*. Izskočni meni vsebuje tudi možnost *Prikaži kot besedilo*.

Pogled na splošne rubrike

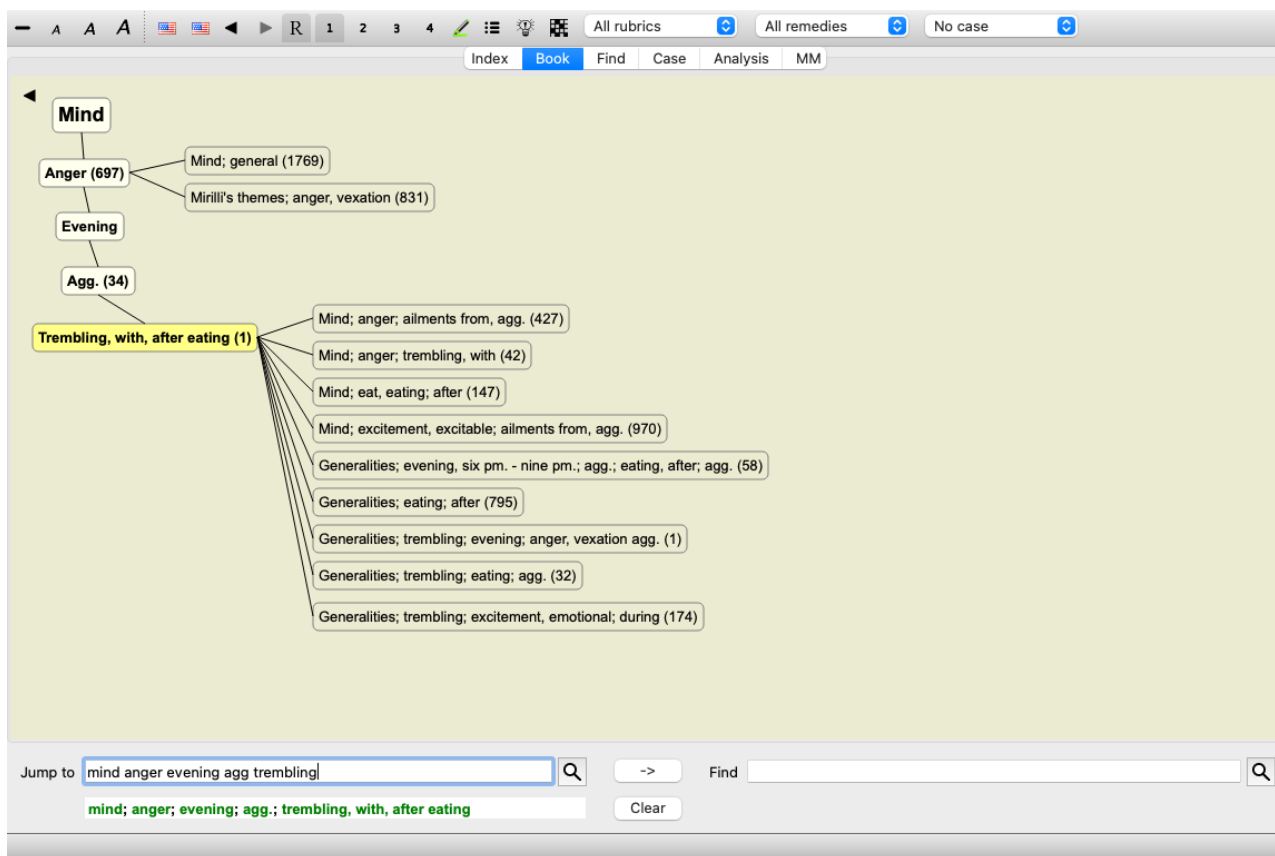

Ta pogled omejuje prikaz rubrik na rubrike, ki so podobne izbrani rubriki, vendar so bolj splošne. Pomaga vam hitro izbrati alternative za podrobne rubrike, ki vsebujejo le nekaj pravnih sredstev.

Enostavno lahko preklapljate med dvema različnima pogledoma. (Možnost menija *Knjiga / Prikaži strukturo repertoarja*, možnost priročnega menija *Prikaži strukturo repertoarja*, možnost menija *Knjiga / Prikaži splošne rubrike*, možnost priročnega menija *Prikaži splošne rubrike*).

Hitro lahko preklapljate med besedilnim in grafičnim prikazom repertoarja, ne da bi spremenili izbrani grafični prikaz. (Možnost menija *Knjiga / Prikaži kot graf, ⌘-G*).

Predlogi pravnih sredstev

Včasih ima bolnik popoln simptom, ki je v repertoriju z natančno enako stopnjo podrobnosti. Pogosteje pa simptom ni prisoten z enakimi podrobnostmi, le delno ali bolj splošno.

Kot primer si oglejmo rubriko *Um; jeza; večerno poslabšanje; tresenje z, po jedi*. Ta rubrika je sestavljena iz nekaj osnovnih elementov:

- duševni simptomi,
- jeza,
- s tresenjem,
- zvečer slabše,
- slabše po jedi.

Rubrika vsebuje le eno pravno sredstvo. Zelo verjetno je, da boste zdravilo, ki ga iščete, našli v eni od bolj splošnih rubrik ali pa bi ga lahko našli s kombinacijo nekaj bolj splošnih sestavin simptomov.

Na primer:

- *Um; jeza; tresenje, z*
- *Um; jeza; zvečer; obolevnost.*
- *Um; jesti, jesti; po*

Pritisnite gumb  za prikaz analize na podlagi povezanih rubrik. Analiza je prikazana na desni strani zaslona.

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven


Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort

Jump to: mind anger evening agg trembling

Find: during convulsions

mind; anger; evening; agg.; trembling, with, after eating

Za rubriko, ki nima povezanih rubrik, bo analiza preprosto prikazala seznam pravnih sredstev v rubriki po vrstnem redu pomembnosti, kot bi jih šteli v analizi. Seveda so lahko tudi te informacije zelo koristne, vendar je namen funkcije Predlogi sredstev pomagati pri razmišljanju o alternativah sredstvom, navedenim v rubriki.

Za pregled rubrik, uporabljenih v analizi, vključno s podrobnostmi o pravnih sredstvih za vsako rubriko, pritisnite gumb . Prikazana bo analiza v obliki tabele.

Unnamed case

Analysis July 5, 2021, (Rubrics from Remedy Suggester)

Analysis uses 10 rubrics.

Complete Repertory 2021 © 2021 Roger van Zandvoort

Locate remedy: Standard

Jump to: mind anger evening agg trembling

Find: during convulsions

mind; anger; evening; agg.; trembling, with, after eating

Ta začasna analiza je ustvarjena v trenutnem primeru in bo izbrisana, ko boste primer zaprli.

Filter za odpravo napak

Prikazana sredstva je mogoče omejiti.

V orodni vrstici je na voljo možnost, s katero lahko izberete skupino pravnih sredstev.

Številne pogosto uporabljene skupine so vnaprej določene (minerali, rastline, živali, nosode). Če želite izbrati drugo skupino, preprosto izberite možnost *Other...* in prikazalo se bo pogovorno okno, v katerem lahko izberete eno od skupin v razdelku *Kingdoms & Families*.

> Acids (72)
Agents & toxins (56)
Alkaloids (85)
Amides (9)
Amino acids (22)
> Anaerobes (27)
> Animals (322)
> APG II taxonomy
> Bacteria (62)
Bloods (37)
Body products (84)
Building stones (3)
Cell constituents (8)
Cosmic bodies (3)
Cosmos (23)
Disease cultures (67)
Diseased material (35)
Drugs (26)
Dyes (19)
Electromagnetism (18)
> Elements (722)
Enzymes (5)

Filter

Permanently add to list ☐

KINGDOMS & FAMILIES; ACIDS: acet-ac acon-ac
agarin ami-sal-ac amp amyg-am asc-ac benz-ac betin bor-ac
brom-ac but-ac camph-ac carb-ac chr-ac chrys-ac cit-ac
coenz-a cortico cystin d-phenyl des-ac fl-ac form-ac fumar-ac
gaba gall-ac guan hemog hip-ac histid hydr-ac hydrobr-ac
i-leuc iod-ac kali-ar kali-x keto-ac l-leuc l-phenyl lac-ac lanol
mal-ac methion mur-ac n-leuc nit-ac nit-m-ac ol-suc oro-ac
ox-ac ph-ac pic-ac prol pyro-ac rib-ac sal-ac salol sarcol-ac
succ-ac sul-ac sul-ac-aro sulo-ac tann-ac tart-ac tell-ac thio-ac
threnin trypt tyrin ur-ac vali

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Cancel OK

Z možnostjo filtriranja hitro poiščite pravo skupino zdravil:

Australian funnelweb spiders (1)
Burrowing spiders (1)
Cellar spiders (1)
Daddylongleg spiders (1)
Funnel web spiders (3)
Hunting spiders (10)
Jumping spiders (2)
Orb web spiders (2)
Recluse spiders (3)
Sand recluse spiders (2)
Sixeyed sicariid spiders (5)
Spiders (22)
Spiders (23)
Tangle web spiders (6)
Web spiders (11)
Whitetailed spiders (1)
Widow spiders (5)
Wolf spiders (1)

Filter

Permanently add to list ☐

KINGDOMS & FAMILIES; TAXONOMY; common names; English; Australian funnelweb spiders:
atra-r

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Cancel OK

Standardni repertoarni filtri knjižnega modula

Običajno je v knjižnem modulu prikazana celotna vsebina *Complete Repertory*.

Na voljo je nekaj standardnih filtrov. Izberete jih lahko v menijski vrstici ali v priročnih menijih na robovih strani. (Možnost menija *Knjiga / Izbor knjig / Popolnoma*, možnost priročnega menija *Izbor knjig / Popolnoma*).

<i>Popolnoma</i>	Prikažite celoten repertoar brez filtriranja.
<i>Classic</i>	Prikažite samo rubrike in sredstva klasičnih avtorjev. To omejuje repertorij na rubrike, ki se pojavljajo v glavnih klasičnih repertoarjih, in na sredstva iz knjig pred letom 1930.
<i>Zanesljivi avtorji</i>	Pokažite samo avtorje, ki po mnenju Georgea Vithoukasa veljajo za najbolj zanesljive.
<i>Rubrike za Kente</i>	Repertorij je omejen na rubrike, ki izhajajo iz Kentovega repertorija.
<i>Rubrike iz Allenove terapevtske žepne knjige</i>	Repertorij je omejen na rubrike iz Allenove terapevtske žepne knjige.
<i>CR 4,5 približno</i>	Omejuje se na rubrike in sredstva, kot so bila uporabljena v različici 4.5 <i>Complete Repertory</i> , objavljeni leta 1995.

Če je filter izbran, je njegovo ime prikazano v glavi postavitve knjige repertorija. Tako boste zlahka videli, katero možnost repertoarja uporabljate.


Opomba: Filtri repertoarja se uporabljajo samo za vsebino *Complete Repertory*.

Če vaša licenca podpira uporabo dodatnih repertoarjev ali če ste sami ustvarili dodatno gradivo repertoarja, filtri za to gradivo ne veljajo.

Osební filtri knjižnega modula

Zelo enostavno je ustvariti lastne repertoarne filtre.

Osební filtri so nastavljeni v razdelku *Nastavitve*, v razdelku *Knjiga*.

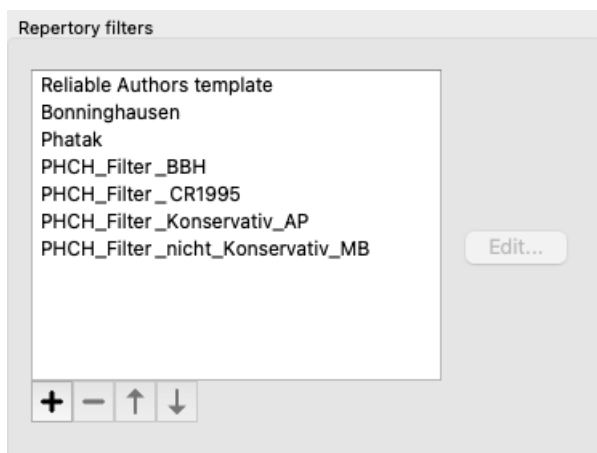

Če želite dodati nov filter, pritisnite gumb **+**.

Repertory filter name

Authors

Year from

Year up to

Remedies

Min.grade

Min.rubric size

Max.rubric size

Rubric types

Alternating ☒

Sides ☒

Time ☒

Extending ☒

Locations ☒

Modalities ☒

Phenomena ☒

Filtriranju dajte smiselno ime. To ime bo dodano filtrom repertoarja v razdelku *Menu / Book / Book selection*.

Privzeto so v filtru vsi avtorji. Če želite urediti seznam avtorjev, pritisnite gumb *Izberite avtorje*.

Izberite avtorje, ki jih želite vključiti v filter. Na seznamu so najpomembnejši avtorji. Če želite prikazati vse avtorje, uporabljene v repertoarju, odznačite možnost *Samo glavni avtorji*.

Filter

Major authors only ☒

Authors

Abermann C & Puschkarski M
Ahmad S
Alex P
Allen H C
Allen J V
Allen T F
Anshutz E P
Banerjea S K
Bay Area Homeopathic Study Group
Bellokossy F K
Berridge E W
Blackwood A L
Bocock R South Downs School of Homeopathy
Boericke O
Boericke W
Boger C M
Bond W K
Bonnet M S
Bönninghausen C M von
Boocock R
Borland D M
Bryant C P
Burgess Webster M
Burnett J C
Carr V T
Case E E
Central Council for Research in Homeopathy
Central Council for Research in Homoeopathy
Choudhuri N M

Cancel OK

Pod seznamom avtorjev lahko izberete razpon letnic. V filter so vključeni samo viri, objavljeni v določenem letnem razponu. Vrednost 0 pomeni, da se vrednost ne uporablja.

Drugih možnosti za filter ni treba dodatno pojasnjevati:

- Najnižji razred pravnega sredstva.
- Najmanjša velikost rubrike.
- Največja velikost rubrike.
- Vrsta simptomov.

Urednik repertoarja

Osebni dodatki k repertoarju

Repertoar lahko osebno dopolnite s pomočjo našega urejevalnika repertoarja .

Urejevalnik *Repertory Editor* omogoča ustvarjanje lastnih rubrik in dodajanje pravnih sredstev v rubrike. Ustvarite lahko tudi nova zdravila, ki jih v trenutnem repertoriju še ni.

Rubrikam lahko dodate osebne opombe, ki se prikažejo skupaj z rubriko.

Vsaka od teh funkcij je razložena v nadaljevanju.

Funkcije urejevalnika *Repertory Editor* so dostopne prek menijskih možnosti v menijski vrstici ter menijskih možnosti v priročnih menijih na rubrikah in pravnih sredstvih.

Za nekaj hitrih dodatkov so zelo učinkoviti. Če želite vnesti več dodatkov, lahko odprete pomočnika urednika *Repertorij*. Pomočnika bomo pojasnili, ko bomo razpravljali o različnih možnostih.


Dodajanje rubrik

Za dodajanje rubrik najprej odprite modul *Book* v poglavju, v katerem želite ustvariti rubriko.

Zdaj lahko ustvarite novo rubriko. (Možnost menija *Knjiga / Uredi / Dodajte rubriko*, možnost priročnega menija *Uredi / Dodajte rubriko*).

Če želite dodati podrubriko obstoječi rubriki, najprej izberite rubriko s klikom nanjo in nato ustvarite podrubriko.

Odrpelo se bo pogovorno okno.

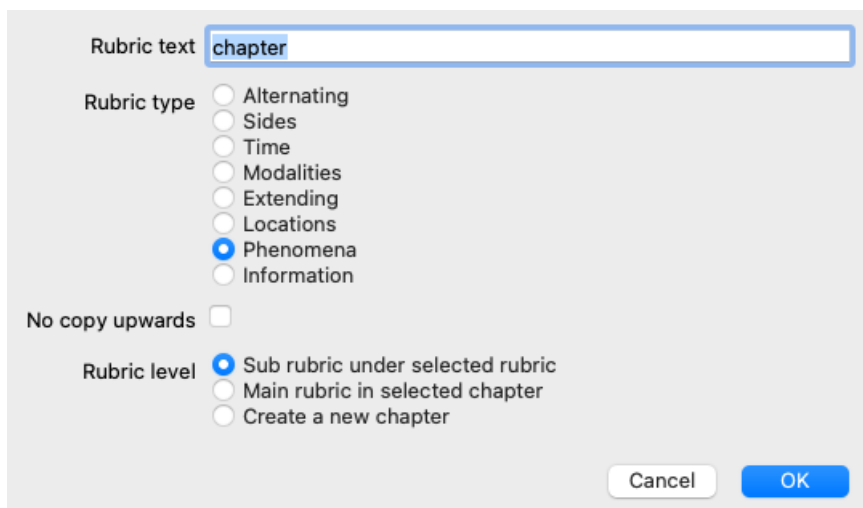

Vnesite besedilo rubrike, kot ga želite prikazati v repertoarju. Uporabljajte le male črke, razen kadar jezikovna pravila zahtevajo uporabo velike črke. Modul *Book* bo samodejno uporabil velike črke za oblikovanje besedila rubrik.

Izberite ustrezno vrsto rubrike. Tega vam ni treba storiti, vendar se bo vaša nova rubrika obnašala kot druge rubrike v repertoarju. Vrsto rubrike uporablja tudi modul za analizo , da bolje ovrednoti pravna sredstva v rubriki.

Možnost *Ni kopije navzgor* je treba preveriti za podrubriko, ki ima nasprotni pomen od višje rubrike. To običajno uporabljate za podrubriko, ki označuje izboljšanje določenega simptoma. Amelioracija spreminja pomen zgornje rubrike.

Če potrdite to možnost, bo onemogočeno samodejno kopiranje novih pravnih sredstev v višje in bolj splošne rubrike.

Uporablja ga tudi modul za analizo , da bi videl, kako se sredstvo pojavlja v sorodnih rubrikah.

Po ustvarjanju lahko vedno spremenite besedilo in vrsto rubrike. (Možnost menija *Knjiga / Uredi / Uredite rubriko*, možnost priročnega menija *Uredi / Uredite rubriko*).

Upoštevajte, da lahko urejate samo rubriko, ki ste jo ustvarili sami, ne pa tudi izvirnih repertoarnih rubrik.

Dodano rubriko lahko odstranite. (Možnost menija *Knjiga / Uredi / Odstranite rubriko*, možnost priročnega menija *Uredi / Odstranite rubriko*).

Upoštevajte, da lahko rubriko odstranite le, če ne vsebuje več nobenih pravnih sredstev ali podrubrik. S tem preprečite nenamerno odstranitev dragocenih informacij.

Dodajanje pravnih sredstev

Če želite dodati pravno sredstvo v rubriko, najprej odprite modul *Book* in izberite rubriko, v katero želite dodati pravno sredstvo.

Zdaj lahko v to rubriko dodate pravno sredstvo. (Možnost menija *Knjiga / Uredi / Dodajte zdravilo*, možnost priročnega menija *Uredi / Dodajte zdravilo*).

Odrpelo se bo pogovorno okno.

Vnesete lahko eno ali več kratic za zdravila. Pod poljem se prikažejo ustrezna polna imena pravnih sredstev. Gumb *OK* bo onemogočen, če ste vnesli napačno kratico.

Če je izbrana možnost *Kopiraj v splošne rubrike*, se sredstva samodejno dodajo v rubrike, ki so bolj splošne od izbrane rubrike. Te rubrike so navedene pod to možnostjo.

Če želite dodati zdravilo, ki še ne obstaja v repertoriju, ga lahko ustvarite z gumbom *Ustvari zdravilo*.

Pozvan bo k vnosu kratice in polnega imena zdravila. Skrajšano zdravilo, ki ga želite ustvariti, mora biti skrajšano zdravilo, ki še ni v standardnem repertoarju.

Ko ustvarite novo zdravilo, lahko pozneje vedno spremenite njegovo okrajšavo ali ime. (Možnost menija *Knjiga / Uredi / Uredite pravno sredstvo*, možnost priročnega menija *Uredi / Uredite pravno sredstvo*).

Če želite zvišati stopnjo zdravila v standardnem repertoriju, preprosto dodajte zdravilo z višjo stopnjo. Vaša višja ocena bo pomembnejša od prvotne ocene.

Odstranite lahko dodatek k sredstvu. (Možnost menija *Knjiga / Uredi / Odstranite pravno sredstvo*, možnost priročnega menija *Uredi / Odstranite pravno sredstvo*). Upoštevajte, da lahko odstranite samo sredstvo, ki ste ga dodali sami. Če odstranite pravno sredstvo, odstranite le sebe kot avtorja. Če za isto zdravilo obstajajo še drugi avtorji, samo zdravilo ne bo odstranjeno iz repertorija.

V rubriki lahko odstranite tudi vsa svoja dopolnila o pravnih sredstvih. (Možnost menija *Knjiga / Uredi / Odstranite vsa pravna sredstva*, možnost priročnega menija *Uredi / Odstranite vsa pravna sredstva*).

Določanje razredov pravnih sredstev

Namesto hitrega dodajanja številnih zdravil z izbrano oceno je mogoče izrecno navesti tudi ocene posameznih zdravil.

Izbrano privzeto oceno pravnega sredstva lahko spremenite na več načinov.

Naslednji primeri prikazujejo, kako dodati sredstvo *zvon* z razredom 2, *cham* z razredom 3 in *dig* z razredom 4.

- Uporaba velikih tiskanih črk.
Vnesite sredstva z velikimi in malimi črkami v slogu, ki se uporablja v modulu *Book*.
Primer: Bell CHAM
(4. razreda ni mogoče predstaviti na ta način, saj uporablja vse velike črke kot 3. razred)
- Okrajšavi za pravno sredstvo dodajte številko razreda.
Primer: bell2 cham3 dig4
- Sredstvu dodajte oceno, ki je zaprta v ().
Primer: bell(2) cham(3) dig(4)

Slednji način je oblika, ki se uporablja pri kopiranju rubrike in njenih pravnih sredstev v odložišče. Ta mehanizem vam omogoča hitro kopiranje pravnih sredstev iz drugega rubrike. V drugi rubriki kopirajte rubriko in pravna sredstva ter jih nato prilepite v polje za pravna sredstva. (Možnost menija *Knjiga / Kopiraj / Kopiranje rubrike in pravnih sredstev*, možnost priročnega menija *Kopiraj / Kopiranje rubrike in pravnih sredstev*).

Ti dodatni mehanizmi za določanje razredov pravnih sredstev so lahko izjemno učinkoviti pri uvozu pravnih sredstev, ki jih želite kopirati iz zunanjih virov.

Določanje avtorjev pravnih sredstev


Privzeto so vsa zdravila, ki jih dodate v repertorij, označena z vami kot avtorjem. Za osebne repertoarne dodatke je to najverjetneje tisto, kar želite. Če dodajate sredstva iz drugih virov, kot so knjige ali seminarji, boste morda želeli izrecno navesti avtorja.

Dodate lahko novega avtorja. (Možnost menija *Knjiga / Uredi / Vir / Ustvari nov vir*, možnost priročnega menija *Uredi / Vir / Ustvari nov vir*).

Izberete lahko enega od avtorjev. (Možnost menija *Knjiga / Uredi / Vir / Izberite vir*, možnost priročnega menija *Uredi / Vir / Izberite vir*). Ko izberete avtorja, bo ta samodejno postal avtor za nove dodatke k sredstvom.

Uredite lahko podrobnosti izbranega avtorja. (Možnost menija *Knjiga / Uredi / Vir / Urejanje informacij o viru*, možnost priročnega menija *Uredi / Vir / Urejanje informacij o viru*).


Vizualizacija vaših dodatkov v modulu Knjiga


Ko v orodni vrstici aktivirate gumb , bodo vaši osebni dodatki označeni s svetlo zeleno barvo. Tako boste lahko hitro videli, katera zdravila ste dodali.

Možno je tudi, da si ogledate samo svoje osebne dodatke brez vseh drugih pravnih sredstev. To lahko storite tako, da ustvarite osebni filter repertoarja in izberete sebe kot edinega avtorja.

Dodajanje opomb rubrik

Vsakemu rubriki lahko dodate osebno opombo. (Možnost menija *Knjiga / Uredi / Dodaj opombo o rubriki*, možnost priročnega menija *Uredi / Dodaj opombo o rubriki*).

Prisotnost opombe je prikazana z znakom , ki sledi besedilu rubrike.

Če si želite ogledati opombo, se z miško premaknete nad besedilo rubrike ali dvakrat kliknete na sliko .

Osebne opombe lahko uredite ali odstranite. (Možnost menija *Knjiga / Uredi / Uredite opombe rubrike*, možnost priročnega menija *Uredi / Uredite opombe rubrike*). Odprlo se bo pogovorno okno, ki ga ni treba dodatno pojasnjevati.

Dodajanje opomb o pravnih sredstvih

Tako kot lahko dodate opombe rubriki, jih lahko dodate tudi posameznim sredstvom. Za to so na voljo dodatne funkcije. (Možnost menija *Knjiga / Uredi / Dodajte opombo o pravnem sredstvu*, možnost priročnega menija *Uredi / Dodajte opombo o pravnem sredstvu*).

Dodajanje navzkrižnih referenc

Navzkrižno sklicevanje je sklicevanje iz ene rubrike na drugo rubriko. Če želite ustvariti navzkrižno referenco, morate najprej izbrati izvorno rubriko in nato ciljno rubriko.

S klikom na rubriko jo izberite in jo označite kot izvorno rubriko. (Možnost menija *Knjiga / Uredi / Navzkrižno sklicevanje / Izberite rubriko kot navzkrižno referenco*, možnost priročnega menija *Uredi / Navzkrižno sklicevanje / Izberite rubriko kot navzkrižno referenco*). Nato izberite ciljno rubriko in jo označite. (Možnost menija *Knjiga / Uredi / Navzkrižno sklicevanje / Izberite rubriko kot cilj navzkrižne reference*, možnost priročnega menija *Uredi / Navzkrižno sklicevanje / Izberite rubriko kot cilj navzkrižne reference*).

Odprlo se bo pogovorno okno, v katerem bosta prikazana rubrika izvora in ciljna rubrika ter gumb za dodajanje navzkrižne reference.

Če želite odstraniti navzkrižno referenco, uporabite enak postopek. V pogovornem oknu se nato prikaže gumb za odstranitev navzkrižne reference.

Navzkrižno referenco lahko tudi preprosto kliknete in jo nato odstranite. (Možnost menija *Knjiga / Uredi / Navzkrižno sklicevanje / Odstranitev navzkrižnega sklica*, možnost priročnega menija *Uredi / Navzkrižno sklicevanje / Odstranitev navzkrižnega sklica*).

Upoštevajte, da lahko navzkrižne reference ustvarite samo znotraj enega repertorija. Ne morete ustvariti navzkrižnih referenc iz rubrike v enem repertoriju na rubriko v drugem repertoriju.

Delo z več datotekami repertoarja

Vaši osebni dodatki repertorija so privzeto shranjeni v datoteki *repertory_additions.rep*.

Ta datoteka je shranjena v mapi *Complete Dynamics* v mapi *Documents*.

Ustvariti je mogoče več datotek repertoarja. Uporaba več repertoarnih datotek ima več prednosti.

- Podatke o repertoarju lahko dobro organizirate, tako da so med seboj povezani dodatki.
Na primer dodatki, ki jih naredite med določenim seminarjem.
Na primer dodatki, ki ste jih prepisali iz določene knjige *materia medica* ali drugega repertorija.
Na primer s svojimi kliničnimi opažanji.
- Zbirko dodatkov repertoarja lahko delite z drugimi.
Datoteko dajte drugi osebi in tudi ona bo lahko uporabila dodatke.

Deljenje dodatkov k repertoarju z drugimi

Če želite zbirko dodatkov repertorija deliti z drugo osebo, ji morate dati le kopijo svoje datoteke repertorija. Datoteko z dodatki lahko seveda objavite tudi na internetu, tako da jo lahko uporablja vsakdo.

Druga oseba lahko nato datoteko postavi v mapo *Complete Dynamics* in zažene *Complete Dynamics*. Vaši dodatki za repertoar se bodo nato samodejno pojavili v repertoarju.

Ustvarjanje nove datoteke repertoarja

Enostavno lahko ustvarite novo datoteko repertorija. (Možnost menija *Knjiga / Uredi / Repertorijska datoteka / Ustvarite novo datoteko repertoarja*, možnost priročnega menija *Uredi / Repertorijska datoteka / Ustvarite novo datoteko repertoarja*).

Pojavilo se bo pogovorno okno, v katerem lahko določite podrobnosti o dodatkih repertoarja.

Repertory

Author

Title

Version

Repertory type ☒ Merge additions into main repertory
☐ Independent repertory

Editor

Family name

First name

Middle name

V razdelku *Repertorij* lahko vnesete podatke o izvoru dodatkov repertorija.

Avtor je oseba, od katere izvirajo informacije. Privzeto je vaše ime že izpolnjeno. Če so informacije od druge osebe, uporabite njeno ime (na primer: *Kent, James Tyler*).

Naslov mora vsebovati opis, ki opredeljuje izvor informacij.

V razdelku *Editor*, vpišite podatke o osebi, ki je urejala dodatke k repertoarju. Privzeto je vaše ime izpolnjeno. V nekaterih primerih, ko uredniško delo nadaljuje druga oseba, je treba te podatke spremeniti.

Če želite ustvariti samostojni repertoar, ki bo obstajal poleg glavnega repertoarja, izberite možnost *Vrsta repertoarja: Samostojni repertoar*.

Pojavijo se nekatera dodatna polja, ki so značilna za neodvisne repertoarje.

- Predpona za poglavje. Ta predpona bo postavljena pred imena poglavij v repertoarju, da bi se ta poglavja razlikovala od poglavij v glavnem repertoarju (npr. TST-MIND namesto MIND).
- Informacije o avtorskih pravicah. To bo prikazano v modulu *Book* na dnu strani.

Repertory

Author

Title

Version

Repertory type ☐ Merge additions into main repertory
☒ Independent repertory

Chapter prefix

Editor

Family name

First name

Middle name

Copyright

Copyright holder name

Copyright year

Spreminjanje informacij o datoteki repertoarja

Informacije o datoteki repertoarja lahko spremenite. (Možnost menija *Knjiga / Uredi / Repertorijska datoteka / Urejanje informacij v datoteki repertoarja*, možnost priročnega menija *Uredi / Repertorijska datoteka / Urejanje informacij v datoteki repertoarja*).

Repertory

Author

Title

Version

Repertory type ☒ Merge additions into main repertory
☐ Independent repertory

Editor

Family name

First name


Middle name

Izbira datoteke repertoarja

Privzeto so vsi vaši dodatki shranjeni v datoteki *repertory_additions.rep*.

Če želite delati z eno od drugih obstoječih datotek, morate najprej izbrati to datoteko. (Možnost menija *Knjiga / Uredi / Repertorijska datoteka / Izberite datoteko z repertoarjem*, možnost priročnega menija *Uredi / Repertorijska datoteka / Izberite datoteko z repertoarjem*).

Odpre se pogovorno okno z razpoložljivimi datotekami repertorija.

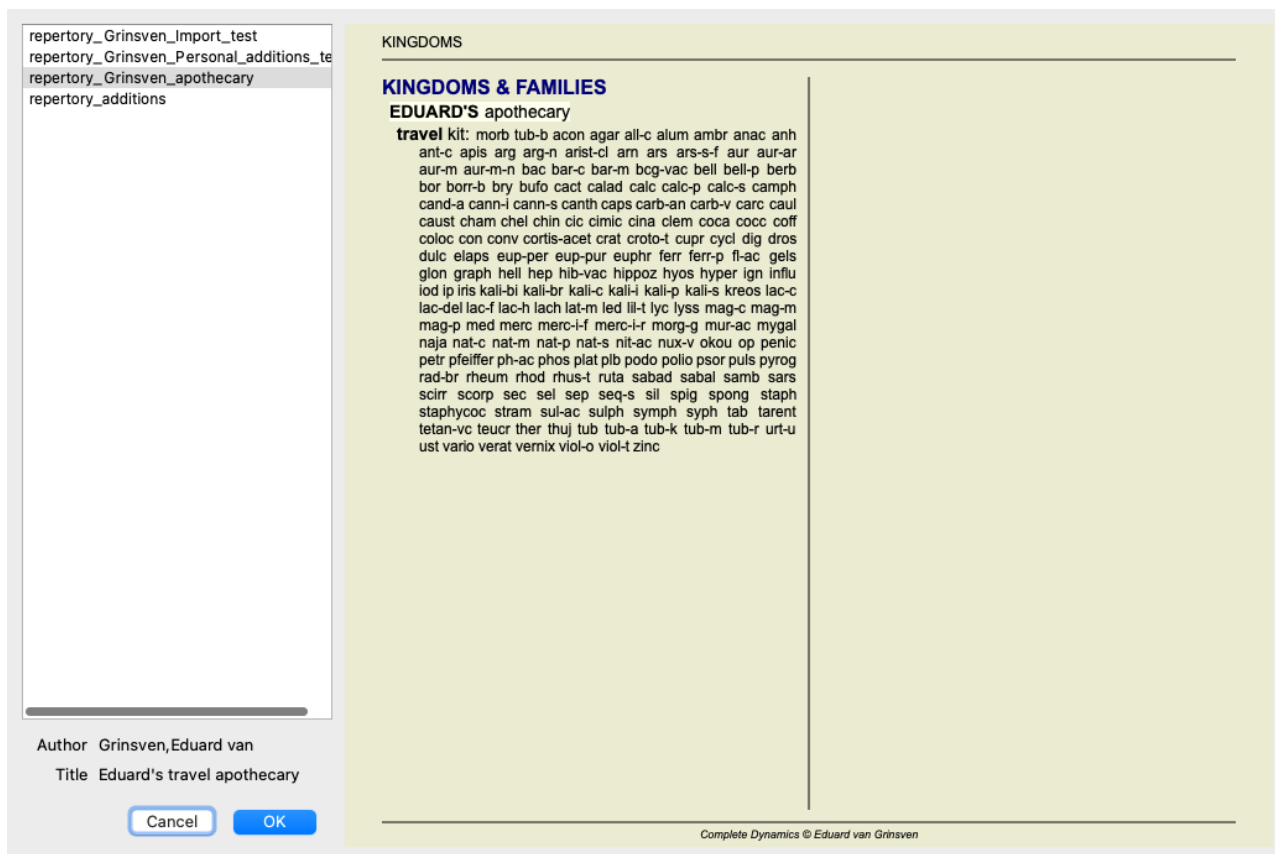

Na seznamu na levi strani lahko izberete datoteko repertorija. Na desni strani se nato prikaže predogled, kateri repertoarni dodatki so v datoteki.

Pomočnik urednika revije

Če želite dodati več repertorijev, je priročno uporabiti pomočnika za urejanje *Repertorij*. (Možnost menija *Knjiga / Uredi / Pomočnik urednika odprtega repertoarja*, možnost priročnega menija *Uredi / Pomočnik urednika odprtega repertoarja*).

Selection

Repertory

Grinsven, Eduard van

Personal additions

Source

Grinsven, Eduard van

Personal additions

Rubric

Mind

• Abusive, insulting

Remedy

staph

Staphisagria

Actions

Repertory

⋮

+

Source

⋮

+

Rubric

+

-

Notes

+

Remedy

+

-

Notes

+

Quick remedies add

1

+

Close

V razdelku *Izbira* je navedeno, kateri rubriki je bil izbran v modulu *Knjiga*, po potrebi pa tudi, katero pravno sredstvo je bilo kliknjeno.

Razdelek *Akcije* vsebuje gumbе za vse funkcije, do katerih sicer dostopate iz menija.

V razdelku *Hitro dodajanje pravnih sredstev* lahko izbrani rubriki hitro dodate več pravnih sredstev. Ta funkcija zahteva, da so vse okrajšave pravnih sredstev pravilne. Pravna sredstva bodo samodejno dodana vsem splošnejšim rubrikam. Za več informacij glejte *Dodajanje pravnih sredstev* (zgoraj).

Repertorij Uvoznik

Z modulom Uvoznik repertorija lahko vnose repertorija množično uvozite iz zunanje datoteke. Uvoznik repertorija prepozna več podatkovnih formatov, ki so opisani spodaj.

Preden zaženete uvoznika, morate ustvariti datoteko Repertory Additions in jo izbrati. (Možnost menija *Knjiga* / *Uredi* / *Repertorijska datoteka* / *Izberite datoteko z repertoarjem*, možnost priročnega menija *Uredi* / *Repertorijska datoteka* / *Izberite datoteko z repertoarjem*).

Ko izberete datoteko repertorija, v katero želite uvoziti zunanje podatke, lahko zaženete program Repertory Importer. (Možnost menija *Knjiga* / *Uredi* / *Repertorijska datoteka* / *Uvoz iz zunanje datoteke*, možnost priročnega menija *Uredi* / *Repertorijska datoteka* / *Uvoz iz zunanje datoteke*).

Odpre se modul Uvoznik.

Proving of *Calonectris Diomedea borealis* - Smorganson, Vitor

Input text format

☐ MacRep
 ☐ Excel-sheet
 ☒ Other formats

Maintain rubric order (no sorting) ☐

Grade formats

☐ ☐ ☐ ☒ abcd
 ☐ Abcd
 ☐ ABCD

☐ ☒ ☐ ☐ abcd
 ☒ Abcd
 ☐ ABCD

☐ ☐ ☐ ☐ abcd
 ☐ Abcd
 ☒ ABCD

☒ ☐ ☒ ☐ abcd
 ☐ Abcd
 ☒ ABCD

Rubric/remedies separator :-

Headache :- acon *Bell* CHAM DULC

V prvem koraku je treba opredeliti obliko vhodnega besedila. Vsak format je opredeljen v posebnem odstavku v nadaljevanju. Za vsak format so na voljo datoteke s primeri. Te datoteke najdete v mapi *Documents / Complete Dynamics / Examples*. Vse datoteke s primeri imajo različne formate, vendar določajo popolnoma enake rubrike repertoarja in pravna sredstva.

Naslednji korak je uvoz besedila v Uvoznik repertorija.

Vnosno besedilo, ki ga želite uvoziti, mora ustrezati določeni obliki. V datoteki izberite celotno besedilo in ga kopirajte v odložišče.

Nato v programu Repertory Importer pritisnite gumb *Paste*. Kopirano besedilo bo prikazano v velikem belem polju. Če imate težave z besedilom, ga spremenite v izvirnem dokumentu in znova kopirajte/prilepite.

Po uvozu besedila pritisnite gumb *Validate* in opravite nekaj prvih preizkusov. Če so bile ugotovljene napake, jih je treba najprej odpraviti, šele nato lahko nadaljujete.

Če vaš repertorij vsebuje kratice zdravil, ki jih ni na spletnem mestu *Complete Repertory*, lahko zdaj določite, za katera zdravila gre. Neznana pravna sredstva določite z gumbom *Remedies...*

Ko ni več napak in so vsa zdravila pravilno opredeljena, lahko repertorij uvozite z gumbom *Import*. Nato zaprite Repertory Importer z gumbom *Close*.

Upoštevajte, da se pri uvozu odstrani celotna vsebina, ki je bila prej v datoteki repertoarja.

Vnosni formati besedila

MacRep

To obliko uporablja program MacRepertory za opredelitev dodatkov. Če izberete to obliko, ni treba določiti nobenih drugih nastavitvev. Za podrobnosti si oglejte primere. Primerom je priložena tudi datoteka z več informacijami o formatih datotek.

Preglednica Excel

V tej obliki so v prvih stolpcih opredeljene rubrike. V zadnjem stolpcu so navedena pravna sredstva. Samo pogledajte primere, saj je to enostavno.

Drugi formati

V tej obliki so stopnje pravnih sredstev opredeljene s slogi besedila.

Določite lahko tudi del besedila, ki ločuje oznako rubrike od sredstev.

Za vsako oceno pravnega sredstva lahko določite obliko. Pod nastavitvami je prikazan primer, kako je oblikovano besedilo videti z izbranimi nastavitvami.

Hierarhija rubrik je opredeljena z odtiskovanjem besedila. To lahko storite na različne načine.

- Uporaba zavihkov. Vsak znak Tab v besedilu doda 1 stopnjo hierarhije.
- Uporaba prostorov. Vsako raven rubrike začnite s številom znakov presledka. Uporabiti morate dosledno alinejo, na primer 4-8-12-16 presledkov.
- Robovi odstavkov. V urejevalniku besedila lahko za sloge odstavkov določite leve robove. Preprosto določite slog odstavka za vsako raven hierarhije rubrik in ga uporabite za vsako rubriko iste ravni.
- Kombinacija zgoraj navedenega. V večini primerov bo to tudi delovalo, če pa je v besedilu uporabljena kombinacija, je verjetno slabo oblikovano.

Za vsako metodo odtiskovanja so na voljo datoteke s primeri.

Poiščite modul

Odpiranje modula Iskanje

Pojdite v modul Iskanje tako, da kliknete zavihek *Iskanje*. (Možnost menija *Oglejte si / Poišči*, *ℹ-S*).

The screenshot shows the 'Find' module in the Complete Dynamics software. The left sidebar has search filters: 'Find in: Repertory' (selected), 'Text: four pm', 'Remedies: lyc', 'Min. grade: 2', 'Max. rank: 9999', 'Rank is %', 'Min. rubric size: 0', 'Max. rubric size: 9999', 'Min. related rubrics: 0', 'Complete symptoms', 'Chapters', 'Rubric types', and 'Show rubrics: All found'. The main area displays a list of symptoms categorized by body part (MIND, HEAD, EYES, VISION, HEARING, NOSE, FACE, THROAT) with associated remedies and potency (e.g., ANXIETY; afternoon; agg.; four pm.: LYC (+8)). The bottom bar shows 'Jump to: mind delu lion' and 'Find: four pm lyc.2'.

Poiščite polja

Na levi strani zaslona lahko vpišete, kaj želite najti. (Alternativni način za vnos zelenega iskanja je uporaba zmogljivega polja *Find* na dnu okna; podrobnosti o uporabi tega enotnega polja za zmogljiva iskanja najdete v razdelku *Find field*.)


This is a close-up of the search filters sidebar. It includes: 'Find in: Repertory' (selected) and 'MM'; 'Text' input field; 'Use word synonyms' checkbox; 'Remedies' input field; 'Min. grade: 1', 'Max. rank: 9999', 'Rank is %'; 'Min. rubric size: 0', 'Max. rubric size: 9999', 'Min. related rubrics: 0'; 'Complete symptoms' checkbox; 'Chapters' and 'Rubric types' input fields; and 'Show rubrics: All found' (selected), 'Most relevant', and 'Differentiate remedies' options. There are 'Clear' and 'History...' buttons at the bottom.


Najdi v: Izberite, kje želite poiskati.
Repertoar bo iskal v repertoarju.
MM bo poiskal v Materia Medica. Pri iskanju v Materia Medica je večina drugih možnosti odstranjena, saj so pomembne le za repertorij.

Besedilo Vnesite fragmente besedila, ki jih želite poiskati:

xyz	Vse besede, ki se začnejo s xyz.
=xyz	Beseda mora biti točno xyz.
=Abçß	Beseda mora biti točno Abçß. Primerja znake brez popravkov, kot so a=A ali a=ä.
*xyz	Beseda vsebuje xyz kjer koli v besedilu.
"abc xyz"	Besedilna kombinacija abc, ki ji sledi xyz
abc + def	Pojaviti se morata obe besedili abc IN def.
abc+def	Enako kot zgoraj, presledki niso obvezni.
abc def	Enako kot zgoraj, AND je privzeta vrednost. (Znak + se samodejno vstavi pred def.)
-abc	Besedilo abc NE sme biti prisotno v besedilu. To lahko kombinirate z =, * in "", kot je prikazano zgoraj. Primeri: - =jutro - *ation - "iz postelje"
abc / def	Pojaviti se mora abc ALI def (presledki niso obvezni).
Možne so tudi kombinacije. Primeri:	
štiri/osem popoldne	(štiri ALI osem), IN pm.
pm štiri/osem	Enako kot zgoraj, vrstni red ni pomemben.
"vstajanje iz postelje" zjutraj	Zaporedje vstajanje iz postelje, IN jutro.
strah / tesnoba množica/ljudje	(strah ALI tesnoba) IN (množica ALI ljudje). (Pred množico se samodejno vstavi +)

Uporabite besedne sopomenke Če je ta možnost označena, se pri iskanju uporabljajo besedne sopomenke. Za več informacij glejte razdelek besedne sopomenke.

Pravna sredstva Vnesite kratice zdravil, ki jih želite poiskati. S pritiskom na gumb , ki se nahaja ob desnem robu polja, se odpre iskalno okno, v katerem lahko interaktivno izberete zdravilo, če kratice ne poznate na pamet.

sep	Sredstvo sep
sep.	Enako kot zgoraj, zapis s piko lahko uporabite, vendar tukaj ni potreben (potreben je v polju Find).
-sep	Rešitev sep NE sme biti prisotna v rubriki.
sep / nat-m	Ali sredstvo sep ALI nat-m
sep nat-m	Enako kot zgoraj, privzeto je OR. (pred nat-m se samodejno vstavi /)
sep/staph+nat-m/mag-m	(sep ALI staph) IN (nat-m ALI mag-m)
sep. staph. + nat-m. mag-m.	Enako kot zgoraj. (Znak / se samodejno vstavi pred staph in pred mag-m)
{spiders}	Pravna sredstva v kraljestvu pajkov. Ime, ki ga vpišete med {}, se mora ujemati z imenom ene od rubrik v poglavju Kraljestva in družine. Če želite poiskati ime, pritisnite gumb  in nato gumb Skupine...
{živali} - {pajaci}	Skupine zdravil lahko kombinirate tako kot posamezna zdravila. V tem primeru so to vse živali razen pajkov.

Najmanjši razred Vnesite najmanjšo gradacijo za sredstva (od 1 do 4).

Najvišji rang Iskano sredstvo mora biti v rubriki X najpomembnejših sredstev.
Primer: če vnesete 10, mora biti zdravilo pri razvrščanju zdravil po pomembnosti na mestih od 1 do 10.

Rang je % Če je to označeno, se vrednost ranga upošteva kot odstotek in ne kot absolutno število.
Primer: če vnesete 10, mora biti zdravilo znotraj prvih 10 %.

Min. velikost rubrike Vnesite najmanjše število pravnih sredstev v rubriki.

Največja velikost rubrike Vnesite največje število pravnih sredstev v rubriki.

Min. povezane rubrike Vnesite najmanjše število povezanih rubrik, v katerih se mora pojaviti določeno sredstvo.
Sorodne rubrike so rubrike, ki so bolj specifične od določene rubrike. Za več informacij glejte razdelek pomoči Modul za analizo / Formule.

<i>Popolni simptomi</i>	Omejite iskanje na popolne simptome. Popolni simptom je simptom, ki je sestavljen iz lokacije, občutka in modalitet ali spremljevalcev. Ta možnost se uporablja izključno pri iskanju v spletnem mestu <i>Complete Repertory</i> . Drugi repertoarji običajno ne vsebujejo teh informacij.
<i>Vrste rubrik</i>	S pritiskom na gumb Q , ki se nahaja ob desni strani polja, se odpre okno, v katerem lahko interaktivno izberete vrste rubrik, kot so Times, Sides, Location itd. Če vaša licenca podpira uporabo dodatnih repertorijev, upoštevajte, da dodatni repertoriji pogosto nimajo označenih rubrik, kot so Times, Sides, Location itd. Vsako izbiro, ki jo opravite tukaj, lahko uporabite samo za repertoarje, ki so bili za to ustrezno pripravljeni, kot je <i>Complete Repertory</i> .
<i>Poglavja</i>	S pritiskom na gumb Q , ki se nahaja ob desni strani polja, se odpre okno, v katerem lahko interaktivno izberete poglavja.
<i>Prikaži rubrike</i>	Izberite, katere vrste rubrik želite prikazati. <i>Vsi najdeni:</i> prikaže vse rubrike, ki ustrezajo kriterijem iskanja. <i>Najpomembnejši:</i> Prikažite le najpomembnejše rubrike za eno ali več pravnih sredstev za dana merila. <i>Razlikujte sredstva:</i> Prikažite rubrike, ki najbolje razlikujejo med dvema ali več sredstvi, glede na dana merila.

Iskanje se začne samodejno po vnosu iskalnih meril, zato ni treba pritisniti nobenega gumba.

Upoštevajte, da je za besedilo privzeta vrednost za več fragmentov AND, za sredstva pa OR.

Razlog za to je, da pri vnosu več besedilnih fragmentov najverjetneje nameravate omejiti rezultat iskanja, medtem ko boste pri več zdravilih morda želeli opraviti diferencialno diagnozo.

Spomnite se prejšnjih najdb

Prejšnjo najdbo lahko hitro prikličete s klikom na gumb *History....* To bo odprlo pogovorno okno s seznamom prejšnjih poizvedb za iskanje.

Poiščite rezultate za Repertory

Rezultati zahteve za iskanje so prikazani na desni strani okna.

Stopnja podrobnosti je odvisna od tega, kaj je bilo iskano. Če so bila iskana zdravila, so izbrana zdravila vključena v rezultat iskanja. Če je bilo iskano samo besedilo, se ne prikažejo nobena sredstva.

Skratka, rezultat iskanja se osredotoča na tisto, kar ste zahtevali, in ne na podrobnosti, ki niso bile zahtevane.

Območje z rezultati iskanja je zelo podobno modulu *Book*.

Navigacija poteka z isto tipkovnico, miško, gumbno vrstico ali funkcijami menija.

Poleg tega se postavitve samodejno prilagodi velikosti okna.

Nasvet: med prikazovanjem ali skrivanjem pravnih sredstev preklaplajte tako, da pritisnete *presledek*, tako kot v modulu *Knjiga*.


V modulu *Find* je prikazovanje pravnih sredstev omejeno na nekoliko manjše rubrike. V rubrikah z veliko sredstvi je prikazano samo število sredstev.

Poleg navigacijskih možnosti v modulu *Book* ponuja rezultat iskanja možnost skoka neposredno na rubriko v knjigi, tako da preprosto dvakrat kliknete rubriko z miško.

Najpomembnejši


Pri iskanju najpomembnejših rubrik za eno ali več sredstev so prikazani rezultati omejeni na najpomembnejše rubrike.

Če iščete posamezno zdravilo, bo rezultat popolnoma enak, kot če to zdravilo poiščete v obratni *Materia Medica*. To je smiselno, saj je prav to namen Reverzne materije medike. Kot primer si oglejmo najustreznejše rubrike za odpravljanje pomanjkljivosti *arn*.

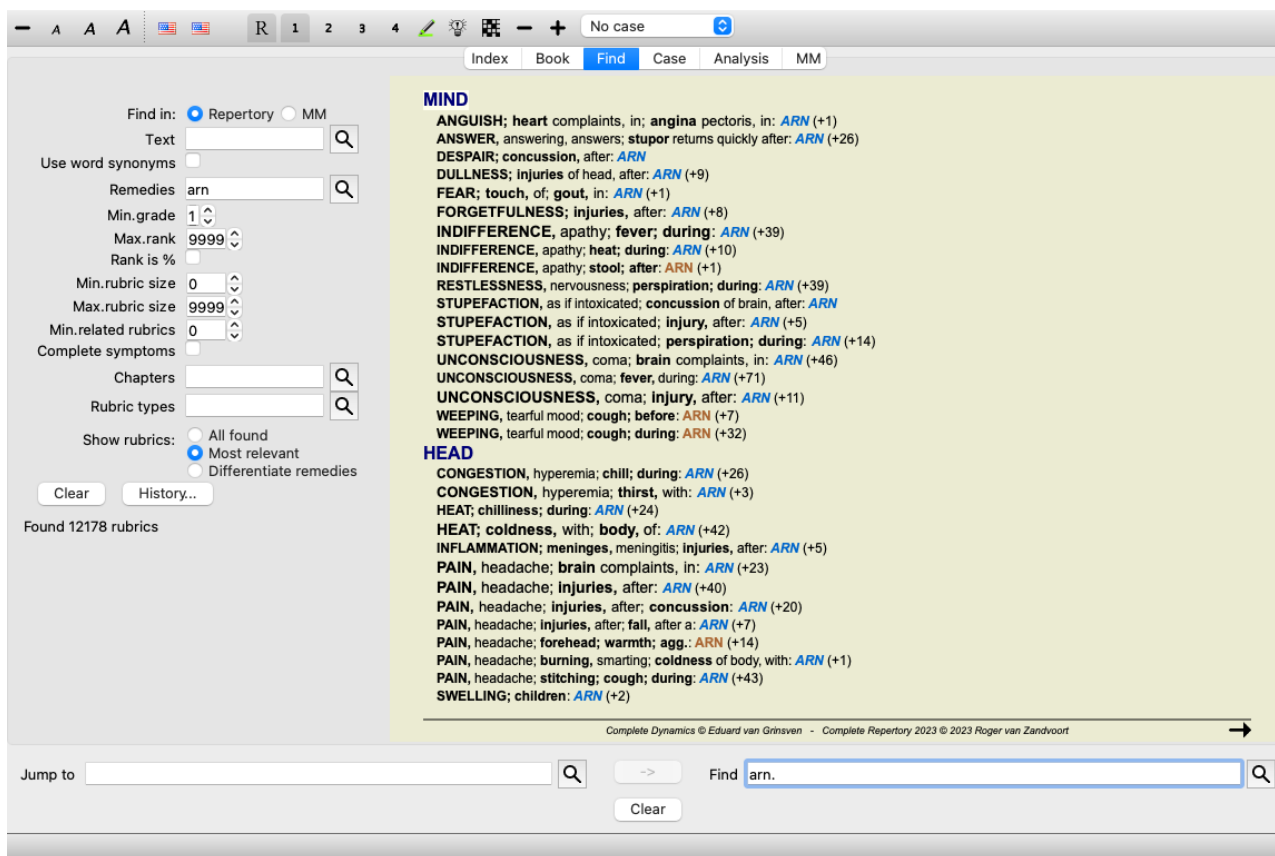

Če iščete več kot eno zdravilo, se prikažejo najpomembnejše rubrike za katero koli zdravilo. Ko iščete družino zdravil, kot so na primer pajki, rezultat ne bo enak, kot če odprete obratno Materia Medica za družino pajkov. Modul Reverse Materia Medica bo opravil analizo družine kot celote v primerjavi z drugimi družinami, medtem ko bo modul Find pregledal rezultate vsakega posameznega družinskega člana.

Uporabite lahko vse zmogljive možnosti Iskanje in poiščete določene ustrezne rubrike. Najpomembnejša časovna merila za Lycopodium so na primer.

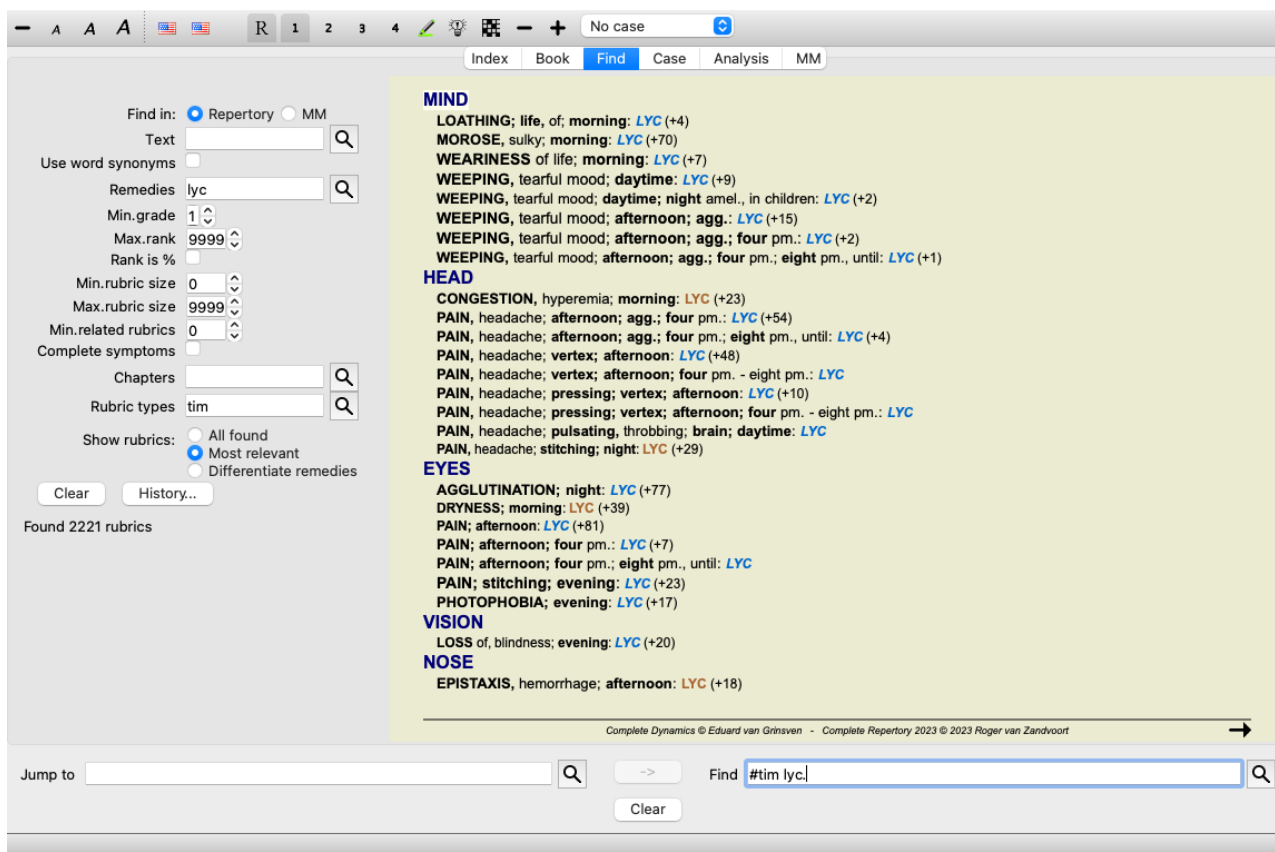

Z gumboma orodne vrstice **-** in **+** lahko prikažete manj ali več rubrik.


Razlikovanje pravnih sredstev

Ta izjemno zmogljiva funkcija vam omogoča iskanje simptomov, ki najbolj razlikujejo med dvema ali več zdravili. Uporablja se lahko za preučevanje razlik med dvema zdraviloma, pa tudi za iskanje pomembnih razlik znotraj večje skupine zdravil. Vsa močna merila modula Iskanje lahko uporabite za osredotočanje na določena področja, ki vas zanimajo.

Izbrane rubrike običajno spadajo v naslednje kategorije:

- Nasprotno vedenje, ko se eno sredstvo obnaša v nasprotju z drugim.
Primeri: poslabšanje/izboljšanje, toplo/hladno, levo/desno, averzije/želje itd.
Pri teh razlikah bosta pogosto navedeni dve nasprotni rubriki, na primer rubrika za poslabšanje, ki ji sledi rubrika za izboljšanje. Ali pa ena rubrika za levo, ki ji sledi rubrika za desno.
- Razlike v času za podoben simptom.
Primeri: jutro/večer, dan/noč.
- Druge razlike, kot so lokacije, razširitve, spremljajoči simptomi itd.
- Posebni simptomi.
To so simptomi, ki so značilni za določeno zdravilo, vendar se ne pojavljajo pri drugem zdravilu.

Kot primer si oglejmo najpomembnejše razlike med zdravili *merc-i-r* in *merc-i-f* pri simptomih grla.

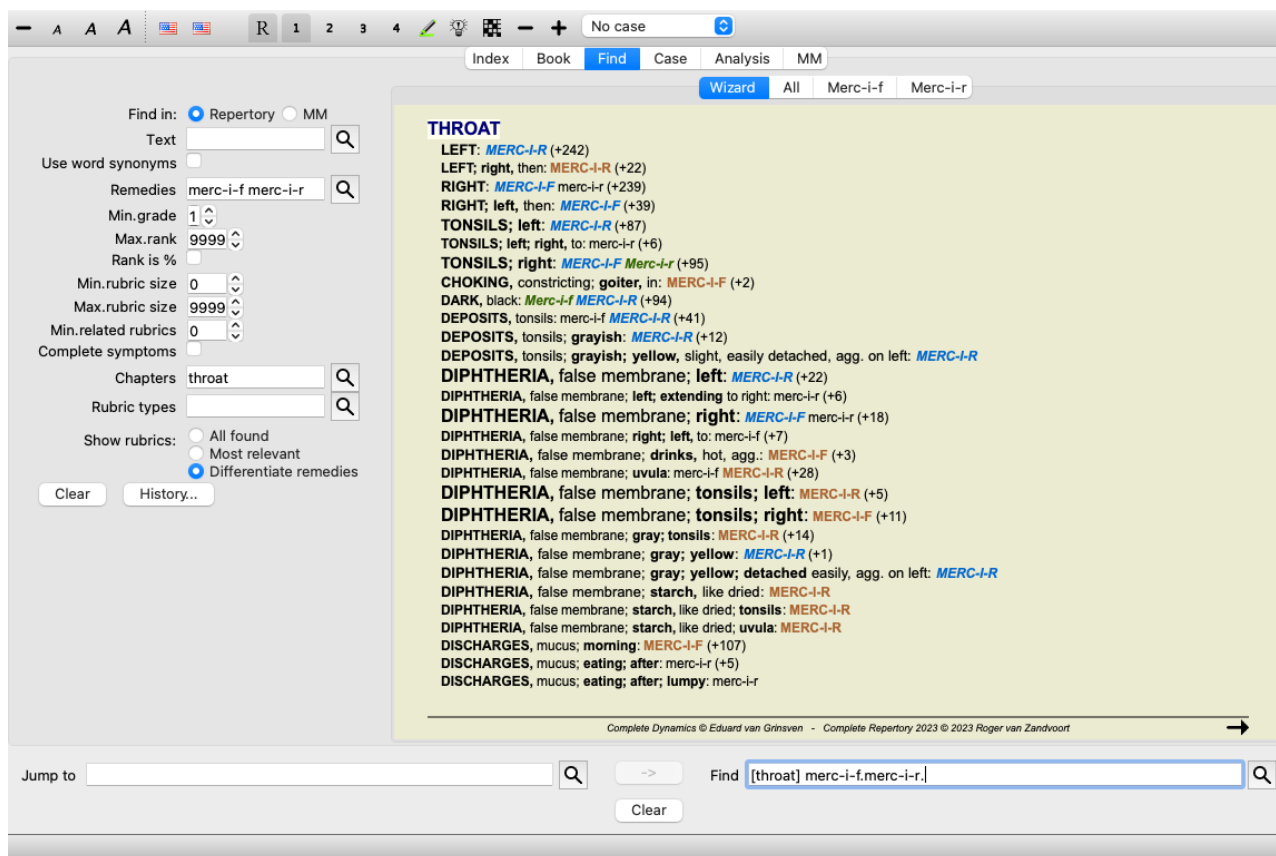

Z gumboma v rodni vrstici **-** in **+** lahko prikazete manj ali več rubrik.

Upoštevajte, da je pri razlikovanju med večjim številom pravnih sredstev rubrika pomembnejša, če vam pomaga bolje razdeliti sredstva v dve večji skupini.

Na primer, če želite razlikovati 10 zdravil, 5 agensov. / 5 amel. razlikuje bolje kot 1 agg. / 9 amel. Ali če je simptom znan pri petih od desetih zdravil, je to boljša razlika, kot če je znan pri osmih od desetih zdravil.

Kot primer razmejimo modalitete družine Ranunculacea.

Find in: ☒ Repertory ☐ MM

Text

Use word synonyms ☐

Remedies

Min. grade

Max. rank

Rank is %

Min. rubric size

Max. rubric size

Min. related rubrics

Complete symptoms ☐

Chapters

Rubric types

Show rubrics: ☐ All found ☐ Most relevant ☒ Differentiate remedies

Clear History...

Index Book Find Case Analysis MM

No case

MIND

ABSORBED, buried in thought; **sadness**, indulges in: **acon cemic CLEM HELL PULS** ran-b (+48)

ANGUISH; heart complaints, in: **ACON** adon **CIMIC PULS** (+69)

BED; agg.: **ACON** aconin **Act-sp CIMIC Clem HELL** hell-f hydr **PULS Ran-b RAN-S STAPH** (+351)

CONCENTRATION; difficult; attempting to, on: **acon PULS RAN-B STAPH** (+53)

DELIRIUM; fever; during: **ACON** act-sp **CIMIC HELL HYDR PULS** (+128)

DULLNESS; vertigo; during: **ACON CLEM HELL PULS Ran-b** ran-s staph (+116)

EAT, eating; while: **ACON** clem **HELL HYDR PULS** ran-b staph (+95)

EAT, eating; amel.: **clem** (+69)

EMBARRASSMENT; agg., ailments from: **ACON** act-sp **CIMIC CLEM HELL PULS RAN-B STAPH** (+296)

EXCITEMENT, excitable; ailments from, agg.; **mental** and emotional consequences of: **ACON** act-sp adon **CIMIC CLEM HELL** macrin **PULS RAN-B ran-s STAPH** (+739)

FORGETFULNESS; head complaints, in: **ACON HELL PULS STAPH** (+61)

INSANITY, madness; **women**, in: **ACON CIMIC HELL PULS** (+6)

LOVE; disappointment, unhappy, ailments from, agg.: **ACON** act-sp **CIMIC HELL PULS STAPH** (+125)

SADNESS, depression; fever; during: **ACON HELL PULS Staph** (+66)

SHRIEKING, screaming, shouting; pain, during: **ACON** act-sp **CIMIC HELL HYDR pul** **RAN-B RAN-S** (+146)

TOSSING about; sleep; during: **ACON Clem** hell hydr **PULS Ran-s Staph** (+83)

TOUCHED; being, agg.: **ACON cemic CLEM PULS STAPH** (+111)

TOUCHED; being, agg.; **genitals**, of: **acon cemic CLEM PULS STAPH** (+47)

TRIFLES; ailments from, agg.: **ACON Act-sp** adon **CIMIC Clem HELL HYDR PULS** pul-s-n **RAN-B STAPH** (+501)

UNCONSCIOUSNESS, coma; brain complaints, in: **ACON CIMIC CLEM HELL PULS** (+42)

UNCONSCIOUSNESS, coma; fever, during: **ACON CLEM HELL PULS** (+68)

WEeping, tearful mood; pains; with: **ACON PULS Ran-b STAPH** (+85)

WOMEN; mental, emotional complaints in: **ACON CIMIC HELL hydr PULS STAPH** (+133)

HEAD

HEAT; pain, with: **ACON Cimic PULS** (+16)

PAIN, headache; alcohol, alcoholic drinks; agg.: **Adon** apom cemic hell hydr **PULS RAN-B STAPH** (+94)

PAIN, headache; alcohol, alcoholic drinks; amel.: **hell** (+12)

PAIN, headache; excitement, emotional; agg.: **ACON CIMIC Hell PULS RAN-B STAPH** (+163)

PAIN, headache; fright, fear agg.: **ACON CIMIC PULS** staph (+25)

PAIN, headache; intoxication, after: **Adon** apom cemic hell hydr **PULS RAN-B STAPH** (+99)

PAIN, headache; room; agg.: **ACON CIMIC hydr PULS RAN-B** ran-s **STAPH** (+146)

PAIN, headache; room; amel.: **staph** (+41)

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort

Jump to

Find

Clear

Videli boste, da je simptom *Bolezni zaradi vznemirjenja* ocenjen zelo visoko, saj ločuje približno polovico družinskih članov od druge polovice.

Poiščite rezultate za Materia Medica

Naslednji primer prikazuje rezultat iskanja v Materia Medica za besede pes/psi.

Abrotanum Allen Encyclopaedia
Sleep: Frightful dreams of mad dogs, etc. (fourteenth day), .

Abrotanum Hering Guiding Symptoms
Sleep: Frightful dreams of mad dogs, etc. (fourteenth day), .

Aconitum napellus Allen Encyclopaedia
Throat: Fine stinging sensation in the back of the throat, as from the small pricking hairs of the seed of the dog rose (Rosa canina) (1 h.), . —

Aconitum napellus Hahnemann MM Pura
Fine shooting sensation at the back of the throat, as from the prickly hairs of the dog-hip (aft. 1h.).

Aconitum napellus Hering Guiding Symptoms
Throat: Fine stinging sensation in the back of the throat, as from the small pricking hairs of the seed of the dog rose (Rosa canina) (1 h.), . —

Aconitum napellus Kent Lectures
"Vertigo, turning and whirling." A woman out shopping runs up suddenly against a dog and becomes violently dizzy, she cannot even get to her carriage.

Aether Allen Encyclopaedia
Mind: In one case, the experimenter retained full possession of his faculties; while giving way to convulsive laughter, he himself compared it to the barking of a dog, and was quite aware that he was [...]

Aether Hering Guiding Symptoms
Mind: In one case, the experimenter retained full possession of his faculties; while giving way to convulsive laughter, he himself compared it to the barking of a dog, and was quite aware that he was [...]

Aethusa cynapium Allen Encyclopaedia
Mind: Delirium; he imagines he sees dogs and cats, . — *

Aethusa cynapium Boericke Pocket manual
Mind: Sees rats, cats, dogs, etc.

Aethusa cynapium Clarke Dictionary
Characteristics: Delirium; sees cats and dogs; wants to jump out of bed, or out of the window.
1. Mind: Delirium: sees cats and dogs; tries to jump out of the window.

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Iskanje besed poteka v celotnih stavkih. Ko iščete kombinacijo besed, ta kombinacija velja tudi za stavke in ne za celotno besedilo

pravnega sredstva. Ko na primer iščete tri besede: *postelja je pretežka*, morajo biti vse tri besede v istem stavku. Upoštevajte, da se struktura stavkov pogosto razlikuje glede na avtorja ali knjigo. Ne obstajajo pravila, ki bi določala, kje se stavek začne in konča. V večini primerov to ne bo povzročilo težav pri uporabi sedanjih knjig *Materia Medica*.


Iz rezultatov lahko preprosto preidete na ustrezno *Materia Medica*. Kliknite na besedilo in odprla se bo knjiga *Materia Medica*.

Če kjer koli kliknete na stavek "Strašljive sanje o norih psih itd. (štirinajsti dan)", se bo knjiga odprla na strani, kjer se ta stavek nahaja.

Če kliknete na ime poglavja "Spanje", se bo knjiga odprla na strani, kjer se nahaja to poglavje.

Če kliknete na naslov knjige "Abrotanum Allen Encyclopaedia", se bo knjiga preprosto odprla pri sredstvu Abrotanum.

Upoštevajte, da so stavki, ki ustrezajo iskalni poizvedbi, označeni s svetlo zeleno barvo.

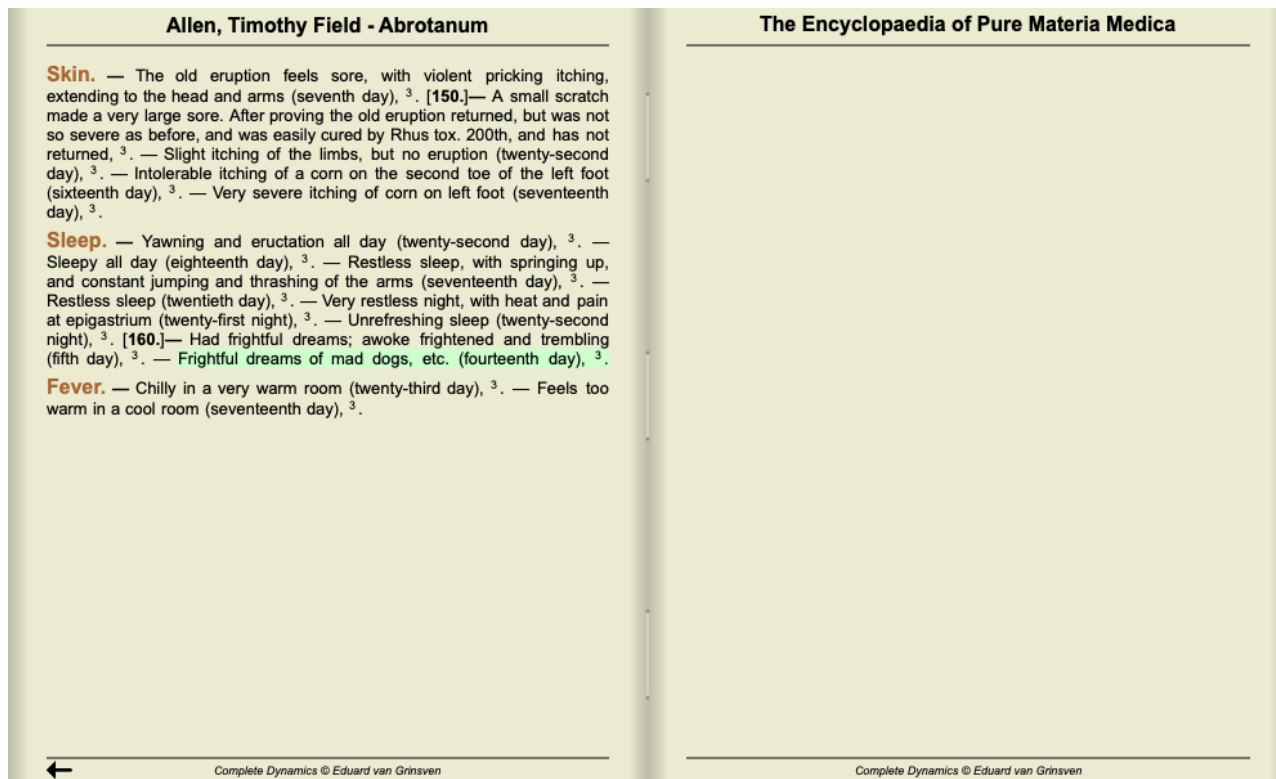


Iskanje po *Materia Medica* lahko omejite na več zdravil ali skupin zdravil. V polje *Remedies* vnesite zdravila in/ali skupine, na primer "ars bell acon", ali "{spiders}". Upoštevajte, da so kombinacije, kot so 'ars+bell+acon', nesmiselne, saj se stavek nikoli ne more pojaviti v več kot eni knjigi.

Več primerov

Med vnosom iskalnih meril v zgoraj navedena polja in uporabo polja *Find* na dnu okna obstaja razmerje ena proti ena. Več primerov uporabe modula *find* je navedenih v razdelku o *Polje Find*.

Diferencialna diagnoza v modulu Poišči

V modulu *Find (Najti)*, Diferencialna diagnoza prikaže seznam ustreznih pravnih sredstev za vse najdene rubrike, podobno kot analiza. (Možnost menija *Oglejte si / Pravna sredstva / Prikaži sredstva DD*, gumb orodne vrstice , možnost priročnega menija *Pravna sredstva / Prikaži sredstva DD*).


V tem primeru po iskanju *med konvulzijami*:

MIND

ACTIVITY; aversion to activity around her, during convulsions: (1)
ANGER; convulsions; during epileptic: (1)
ANXIETY; convulsions; during: (27)
ANXIETY; heart region; convulsions, during: (3)
ANXIETY; heart region; convulsions, during; epileptic: (1)
BARKING; convulsions; during: (4)
BITING; convulsions, during: (32)
CLINGING; children, of; convulsions, during: (1)
COMPANY; aversion to; convulsions, during epileptic: (1)
CONFUSION of mind; convulsions; during: (18)
CONFUSION of mind; convulsions; during; epileptic: (6)
CONFUSION of mind; convulsions; during; puerperal: (1)
CONVULSIONS; during: (173)
CONVULSIONS; during and after: (44)
CURSING, swearing, desires; convulsions, during: (2)
CUT, mutilate, slit, desire to; oneself; convulsions, during: (1)
DANCE, desires to; convulsions, during: (1)
DEATH; desires; convulsions, during: (1)
DEATH; presentiment of; convulsions, spasms, during: (1)
DELIRIUM; convulsions; during: (24)
DELIRIUM; convulsions; during; epileptic: (8)
DELIRIUM; convulsions; during; lead colic, in: (2)
DELIRIUM; raging, raving; convulsions; during: (1)
DELUSIONS, imaginations; convulsions; during: (10)
DELUSIONS, imaginations; head; forehead is swelling suddenly, during headache, before convulsions: (1)
DELUSIONS, imaginations; images, phantoms, sees; frightful; convulsions; during: (3)
DELUSIONS, imaginations; man; huge, drunk, lies down beside her, begs him to retire; convulsions, during: (1)
DESPAIR; convulsions, during: (1)

cupr	
cic	
bell	
hyos	
op	
lach	
stram	
nux-v	
ign	
caust	
camph	
oena	
ars	
sec	
mosch	
calc	
cham	
absin	
sulph	
bufo	
plb	
verat	
sil	
cina	
verat-v	
plat	
art-v	
lyc	
ip	
glon	
hydr-ac	
cocc	
merc	
sep	
zinc	
stry	
puls	
acon	
canth	

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort

Če želite dobiti vse podrobnosti o vseh rubrikah, uporabljenih pri analizi diferencialne diagnoze, pritisnite gumb . To bo ustvarilo začasno tabelo v slogu analize vseh rubrik, razvrščenih po repertoarnih oddelkih. Analiza je shranjena v vaši trenutni zadevi in bo izbrisana, ko zadevo zaprete.

— A A A ↑ ↓ ↑ ↓ 👁 + Show all remedies Mind

Index Book Find Case Analysis MM

Unnamed case
 Analysis March 3, 2023, (Rubrics from Find module)
 Analysis uses 794 rubrics in 39 symptoms.

174 Mind

- 1 Mind; Activity; aversion to activity around her, during convulsions
- 1 Mind; Anger; convulsions; during epileptic
- 27 Mind; Anxiety; convulsions; during
- 3 Mind; Anxiety; heart region; convulsions, during
- 1 Mind; Anxiety; heart region; convulsions, during; epileptic
- 4 Mind; Barking; convulsions; during
- 32 Mind; Biting; convulsions, during
- 1 Mind; Clinging; children, of; convulsions, during
- 1 Mind; Company; aversion to; convulsions, during epileptic
- 18 Mind; Confusion of mind; convulsions; during
- 6 Mind; Confusion of mind; convulsions; during; epileptic
- 1 Mind; Confusion of mind; convulsions; during; puerperal
- 173 Mind; Convulsions; during
- 44 Mind; Convulsions; during and after
- 2 Mind; Cursing, swearing, desires; convulsions, during
- 1 Mind; Cut, mutilate, slit, desire to; oneself; convulsions, during
- 1 Mind; Dance, desires to; convulsions, during
- 1 Mind; Death; desires; convulsions, during
- 1 Mind; Death; presentiment of; convulsions, spasms, during
- 24 Mind; Delirium; convulsions; during
- 8 Mind; Delirium; convulsions; during; epileptic
- 1 Mind; Delirium; convulsions; during; lead colic, in
- 1 Mind; Delirium; raging, raving; convulsions; during
- 10 Mind; Delusions, imaginations; convulsions; during
- 1 Mind; Delusions, imaginations; head; forehead is swelling suddenly, during headache, before convulsions
- 3 Mind; Delusions, imaginations; images, phantoms, sees; frightful; convulsions; during
- 1 Mind; Delusions, imaginations; man; huge, drunk, lies down beside her, begs him to retire; convulsions, during
- 1 Mind; Despair; convulsions, during
- 1 Mind; Dream, as in a; convulsions, during
- 3 Mind; Dullness; convulsions; during
- 2 Mind; Dullness; convulsions; during; epileptic
- 1 Mind; Estranged; convulsions, during
- 7 Mind; Excitement, excitable; convulsions; during

cupr bell hyos lach stram nux-v caust oena op mosch calc sulph plb ars ign cina absin hydr-ac sec cham art-v verat sil

Locate remedy Find during convulsions

Jump to Find Clear

Upoštevajte, da to ni preveč koristno, če je najdenih več kot 1000 rubrik.

Besedne sopomenke

Če je označena možnost *Uporabi sinonime besed*, je vsaka beseda v polju *besedilo* razširjena s sinonimi za to besedo.

Na primer: če iščete besedilo "otrok", so lahko sinonimi naslednji: dojenček, sin, hči, otrok, deček, deklica, mladostnik, potomec, novorojenček, najstnik.

Na ta način boste našli več rubrik kot tistih, ki se strogo ujemajo z besedami, ki ste jih vnesli. Včasih je to to, kar želite, v drugih primerih pa želite, da vaše iskanje deluje točno tako, kot ste zapisali.

Trenutno so besedne sopomenke na voljo samo za angleški jezik. Če imate predloge o manjkajočih ali nepravilnih sopomenkah, nam jih sporočite. Ustvarjanje pravih definicij sinonimov je stalen proces izboljševanja.

Ustvarjanje lastnih sinonimov

Complete Dynamics vam ponuja možnost, da določite lastne sezname besednih sinonimov.


Lastne besedne sopomenke so opredeljene v eni ali več (neformatiranih) besedilnih datotekah, ki jih hranite v posebni mapi. Mapa se imenuje *Complete Dynamics*. V operacijskem sistemu Windows je v mapi *Moji dokumenti*, v sistemu OS-X pa v mapi *Dokumenti*. V tej mapi je vnaprej nameščena datoteka s primerom *synonyms_example.txt*. V tej datoteki boste našli primere, kako se pripravljajo opredeljitve sinonimov.

Sinonime je mogoče oblikovati tudi za druge jezike, ne le za angleščino.

Deljenje sinonimov z drugimi

Če želite svoje opredelitve sinonimov deliti z drugimi uporabniki, jim morate le poslati datoteko z opredelitvami sinonimov. Ko drugi uporabnik namesti datoteko v omenjeno mapo, bodo sinonimi na voljo samodejno po ustavitvi in ponovnem zagonu programa.

Označevanje Iskanje besedila in pravnih sredstev

Besedila in zdravila, ki jih iščete v modulu Poišči, lahko preprosto označite. (Gumb orodne vrstice ) . Če so ta besedila in sredstva označena, jih lahko ob pogledu na zaslon zelo hitro najdete.

Poudarjanje lahko uporabite v modulih *Find*, *Book* in *Materia Medica*.

Najdi v repertoarju

Če je funkcija poudarjanja vklopljena, so besedilni elementi poizvedbe na seznamu rezultatov iskanja poudarjeni.

Kot primer lahko navedemo besedilo "strah". Upoštevajte, da beseda 'strah' v modulu Iskanje pomeni 'vsaka beseda, ki se začne s strah'. Zato najdemo tudi besede 'strah', 'strašen', 'strašnost'.

MIND

ANGER; ailments from, agg.; **fright**, **fear**, with: (24)
ANGER; **fright**, **fear** agg.: (20)
ANXIETY; **night**; agg.; **fright**, **fear** agg.: (1)
ANXIETY; **fear**, with: (154)
ANXIETY; **fear**, with; agg. until five am., with sleeplessness: (1)
ANXIETY; **fear**, with; **climacteric** period, in: (2)
ANXIETY; **fear**, with; **fever**, during: (1)
ANXIETY; **fear**, with; **stands**, when he, forehead becomes covered with cold perspiration, sick to vomiting: (1)
ANXIETY; **fright**, **fear**
ANXIETY; **fright**, **fear**; **after**: (19)
ANXIETY; **fright**, **fear**; **after**; **pregnancy**, in seventh month of: (1)
ANXIETY; **fright**, **fear**; **fear** of fright still remaining
ANXIETY; **sitting**; **bent** over, forward; **fear** of death, with: (1)
ANXIETY; **waking**, on or after; **shrieks**, screams and remains full of **fear**: (1)
ANXIETY; heart region; **fear**, with: (5)
ANXIETY; heart region; **pain** in heart, with; **extending** to cervical region, left shoulder and arm, with **fear** of death: (4)
ANXIETY; **health**, about; **fear** of society, people, with: (1)
ANXIETY; **health**, about; **timid**, **fearful**: (1)
BED; **get out of**, wants to; **fright**, **fear** agg.: (3)
BED; **remain in**, desires to; **fear**, from: (1)
BESIDE oneself, being; **fright**, **fear** agg.: (2)
CHEERFULNESS; **alternating** with; **fearfulness** due to retro-lateral version of uterus: (1)
CHEERFULNESS; **fearful**, but: (1)
COMPANY; **desire for**; **alone**, agg. being; **fear** of people, yet: (5)
CONTEMPTUOUS; **hard** for subordinates and agreeable or pleasant to superiors or people he has to **fear**: (4)
COURAGEOUS; **alternating** with; **fear**: (1)
DEATH; **desires**; **fear**, with: (18)
DEATH; **desires**; **fear**, with; **death**, of: (16)
DEATH; **presentiment** of; **fear**, without: (4)



Naslednji primer prikazuje iskanje besede 'fear' in katerega koli od zdravil 'bell' ali 'stram'.

MIND

ANGER; ailments from, agg.; **fright, fear**, with: **BELL STRAM** (+22)
ANGER; **fright, fear** agg.: **BELL** (+19)
ANXIETY; **fear**, with: **bell** (+153)
ANXIETY; **fright, fear**; **after**: **bell** (+18)
BED; get out of, wants to; **fright, fear** agg.: **BELL** (+2)
DEATH; desires; **fear**, with: **BELL Stram** (+16)
DEATH; desires; **fear**, with; **death**, of: **BELL Stram** (+14)
DELIRIUM; **fear** of men, with: **bell** (+1)
DELIRIUM; lively active, vivid, alternating with **fear** of monsters, shrieking for help: **stram**
DELIRIUM; raging, raving; **fright, fear** agg.: **bell stram**
DELUSIONS, imaginations; alternating with; **fright, fear**: **STRAM**
DELUSIONS, imaginations; gallows, of the, with **fear**: **BELL**
DELUSIONS, imaginations; **stranger**, strangers; **sees**; **night**; **every**, since six weeks, causing **fear**, had to leave bed, a old woman: **STRAM**
DESPAIR; **death**, with **fear** of: **bell** (+9)
FEAR: **BELL STRAM** (+929)
FEAR; alternating with; mania: **BELL** (+1)
FEAR; alternating with; rage: **bell** (+1)
FEAR; afternoon: **stram** (+25)
FEAR; evening; agg.: **STRAM** (+78)
FEAR; evening; agg.; sunset, after: **STRAM**
FEAR; evening; agg.; dark, in: **stram** (+4)
FEAR; night; agg.: **BELL STRAM** (+184)
FEAR; night; agg.; children, in, pavor nocturnus: **bell STRAM** (+27)
FEAR; abortion, in threatening: **bell** (+4)
FEAR; anger, vexation, after: **BELL STRAM** (+26)
FEAR; bed; in: **BELL** (+39)
FEAR; children, in: **bell STRAM** (+70)
FEAR; children, in; cholera infantum, in: **STRAM**

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort



Knjižni modul

Podobno kot v modulu Poišči lahko tudi v modulu Knjiga označite besedilo in sredstva poizvedbe Poišči.

FEAR	MIND	MIND	FEAR
FEAR (cont.) children , in: abel achy ACON ambr ant-c arg am ARS AUR-BR BAR-C bar-m bell BISM bism-met BOR brach BUFO CALC camph carb-v CARC CAUST cham chap CHEL CHLOL cic cimic CINA CUPR CUPR-ACET cypr DROS GELS HALIAE-LC hyos hyosin IGN lod KALI-BR kali-c KALI-P lac-c lach LI-I LYC med merc NAT-C OP PHOS Plac PLUT-N pras-f psor puls Rheum sac-alb SANIC santin scut sil sol-n STAPH STRAM SULPH SYPH thuj TUB tung valer zinc • Anxiety; children, in (46) • Children; complaints in (381) cholera infantum , in: STRAM • Rectum; cholera; infantum (123) everything it sees, of: calc pavor nocturnus • Fear; night; agg.; children, in, pavor nocturnus (29) chill , during: Ars CALC carb-an cycl gels hura Lam Puls sulph tub verat • Chill, during (162) bed , on going to: hura • Bed; agg. (363) • Fear; bed; going to, on (9) closing eyes , on: aeth CARB-AN CAUST • Closing eyes; agg. (83) coition , during • Coition; agg. (62) coldness , with: am-c calc carb-f diom-e op puls samb VERAT	FEAR ; coldness, with (cont.) • Generalities; coldness, lack of vital heat; fright, fear agg. (7) company amel.: agar ars BELL bism CALC fab fic-i gard-j GELS hyos LAC-C med rad-br ran-b ros-g STRAM • Alone, being (176) constipation , with: Bell lach OP • Constipation; with (52) • Mirilli's themes; constriction (87) convulsions before: agar ami-n arg-n cic CUPR nat-m • Anxiety; convulsions; before (9) • Convulsions; before (92) • Generalities; convulsions, spasms; fright, fear; from (44) • Mirilli's themes; fit (229) during: Absin acon agar ang apis arg-n ars bell bufo calc camph cann-i canth cimic cocc coff con convo-s cupr dros elaps gels glon hell hep hyos ign kali-br kali-c kali-p lach li-i lyc Morph MOSCH Nat-s nux-v phos phyt plat ran-b sec sep stram stry verat verat-n zinc • Anxiety; convulsions; during (27) • Convulsions; during (173) • Generalities; convulsions, spasms; anguish, with (14) • Mirilli's themes; death (658) • Mirilli's themes; fit (229) • delivery, parturition, after, puerperal: stram • Delivery, parturition; after, puerperal (85)	FEAR ; convulsions; during; delivery, parturition, after, puerperal (cont.) • Generalities; convulsions, spasms; delivery, parturition; after, puerperal (91) • intervals, at: cupr cough , during: ANAC BRY cham CINA dros KALI-BR Meph PHOS SPONG syph • Coughing; while (109) whooping cough: SPONG • Cough; whooping (225) crowd , in: abel ACON aloe Alum am-m AMBR Amet ARG-N am ars ars-s-f asaf AUR aur-ar aur-i AUR-M-N aur-s bamb-a bar-br bar-c bar-s BELL beryl beryl-n biatta bufo calc Cann-I carb-an CARC caust cic con dios dysp elaps fagu ferr ferr-ar ferr-p graph hep her-s hydr-ac irid KALI-AR kali-bl kali-c kali-p lac-cpr lac-del lac-eq led levo LYC manc merc morg morg-g nat-ar nat-c NAT-M nat-s nux-m NUX-V oxyg parth PETR phos Plac plat plb PLUT-N pter-a PULS rhus-t salv sam-s scan sel sil stann stram sulph tab taosc teg-a thuj til tritic-v ven-m • Crowd, in (120) • Fear; approaching; others, of (58) • Narrow, small place, in, claustrophobia (96) • Public places, of (35) • Streets, busy (8) • Generalities; crowded places agg. (146) • Mirilli's themes; crowd (186)	FEAR ; crowd, in (cont.) • Psychological themes; anxiety, fear (1072) delirium tremens , in: calc cimic scut • Delirium tremens, mania-a-potu (112) delirium , in: ACON AIL anac apis ARS ATRO AUR-M bapt bar-c BELL BROM bry Calc camph Cann-I canth carb-v caust chin cic cimic colch coloc CROC CUPR cypr dig HEP hydrog HYOS IGN LAC-C lach Lat-I lyc merc nat-m nicot nit-ac NUX-V OP phos PLAT PLB podo PULS rhod samb SEC SIL STRAM stry sulph TARENT-C THUJ VERAT zinc zinc-p • Delirium (397) delivery , parturition, during • Anxiety; delivery, parturition; during (21) delusions , from: Absin BELL falco-p HYPER KALI-C STRAM succ tax Tritic-v • Delusions, imaginations; anxious (28) diabetes , in: NAT-S • Clinical; diabetes; mellitus, type 2 (219) agg.: cod • Clinical; diabetes; mellitus, type 2 (219) diarrhea from: arg-n GELS ign KALI-P OP VERAT • Mirilli's themes; disease (794) suppressed, when: abrot • Generalities; diarrhea; agg., suppressed, checked (13) with: acon aeth ant-t arg-n coff CROTO-T

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort

V naslednjem primeru so bila iskana zdravila nosode. Zdaj lahko hitro vidite, katere nosnice so v katerih rubrikah.

CARES, worries, full of (cont.)

agg., ailments from: absin acal acet-ac
 act-sp agar **Agri** **ALF** alum **AMBR** amet
 ana-i ant-c apis aran-ix **ARG-N** am **ARS**
 aur aur-ar **AVEN** bacch-a bamb-a
BELL-P bit-i-a bor bov bud-d **CALC**
 calc-ar calc-f calc-sil carb-f **carc** **CAUST**
 cer cer-p cham chrysan cich cimic cinis-p
 clem **COCA** cocc **COFF** coff-t con cortico
Corv-c crot-h cygn-c-b diosp-k **dys-co**
 erb-p **ergot** eur-n **EXCR-CAN** ferr-i gala
 gall **GELS** germ **Graph** gymn **Haliae-Ic**
 heli hell helo **HELON** hep hist **HOCH**
 hydrog **HYOS** **IGN** impa-w kali-ar kali-bi
KALI-BR kali-i kali-m **KALI-P** kron
 lac-del lac-drom lac-leo lac-m **LACH**
 lat-m **LIL-T** lith-c **LYC** **MAG-C** mag-p
 mal-c mang **med** meny merc merc-i-r
 mur-ac nat-ar nat-hchis **NAT-M** nelu niob
 nit-ac nux-m **NUX-V** **PASSI** **PH-AC**
PHOS pic-ac plsc **PLAC** plb **PODO**
 por-m **PSOR** puls **Rhus-t** sanic senec
SEP **STAPH** **SULPH** sumb **syph** thlaspi
 thul-m thymu **tub** **Uran** uro-h urt-u vanad
 xan **ZINC-P**

Najdi v Materia Medica

Pri iskanju besedila v Materia Medica so najdene besede označene. V naslednjem primeru je bilo iskano besedilo "pretežka postelja". Upoštevajte, da je beseda 'zobobol' prav tako poudarjena, saj se prav tako začne na 'preveč'...

Aconitum napellus *Allen Encyclopaedia*

Extremities in general: Pain as from a contusion in shoulder and hip-joints, after sleeping, as if the bed had been too hard, .

Aconitum napellus *Hahnemann MM Pura*

330. After sleeping, a pain on moving in the shoulder (and hip) joint as from being crushed, of as if the bed had been too hard. After sleeping, a pain, on moving, in the hip (and shoulder) joint as from being crushed, or as if the bed had been too hard.

Aconitum napellus *Hering Guiding Symptoms*

Extremities in general: Pain as from a contusion in shoulder and hip-joints, after sleeping, as if the bed had been too hard, .

Antimonium crudum *Allen Encyclopaedia*

Conditions: [...] bed, toothache; thirst: pinching in abdomen begins; in bed, crawling, etc., of the hemorrhoids; hard [...] bed, [...]

Antimonium crudum *Hering Guiding Symptoms*

Conditions: [...] bed, toothache; thirst: pinching in abdomen begins; in bed, crawling, etc., of the hemorrhoids; hard [...] bed, [...]

Arnica montana *Boericke Pocket manual*

Bed feels too hard.

Arnica montana *Cowperthwaite Textbook*

Generalities: (Ars., Camph., Colch., Sec., Verat.) Weary, bruised (Ran-b.), sore (Bad., Ruta); great, weakness (Chin.); must lie down yet bed feels too hard.

Arnica montana *Dewey Essentials*

After traumatic injuries, over-use of any organ, strains; limbs and body ache as if beaten, bed feels too hard. [...] a bruised feeling all over the body; complain that the bed is too hard and toss about to find a soft spot; involuntary stools and urine; pete- chiaie all over the body; ecchymoses and bed [...]

Arnica montana *Kent Lectures*

"Weary, bruised, sore, great weakness, must lie down, yet bed feels too hard."

Arnica montana *Nash Leaders*

Bruised, sore feeling all over; bed feels too hard.

Both have feeling as if the bed were too hard.

Arnica montana *Farrington Clinical MM*

The patient complains of a bruised feeling all over the body, so that the bed feels too hard to him.

**Modul Materia Medica**

V modulu Materia Medica se poudarek ne uporablja le za besede, temveč tudi za stavke, na katerega ste kliknili v modulu Poišči. Stavki so označeni s svetlejšo barvo kot besede.

Complete Repertory
Allen, Henry Clay
Keynotes and Characters of the Materia Medica of the Homoeopathic Physicians
Allen, Timothy Field
Clinical Hints
The Encyclopaedia of the Materia Medica
Anschutz, Edward
New, old and forgotten remedies
Boericke, William
Pocket Manual of Homoeopathic Medicine
Boger, Cyrus Maxwell
A synoptic key of the Materia Medica
Bönnigghausen, Carl
Characteristics
Clarke, John Henry
Dictionary of Practical Homoeopathy
Cowperthwaite, Allan
A Textbook of Materia Medica
Dewey, Willis Allison
Essentials
Farrington, Ernest
Clinical Materia Medica
Hahnemann, Samuel
Materia Medica Pura
Organon of Medicine (6th ed.)
Hansen, Oscar
A Text-Book of Materia Medica
Hering, Constantine
The Guiding Symptoms
Hutchinson, John
700 Red Line Symptoms
Kent, James Tyler
Lectures on Homeopathy

MIND

ANGUISH; heart complaints, in; angina pectoris, in: [ARN](#) (+1)
ANSWER, answering, answers; stupor returns quickly after: [ARN](#) (+26)
DESPAIR; concussion, after: [ARN](#)
DULLNESS; injuries of head, after: [ARN](#) (+9)
FEAR; touch, of; gout, in: [ARN](#) (+1)
FORGETFULNESS; injuries, after: [ARN](#) (+8)
INDIFFERENCE, apathy; fever; during: [ARN](#) (+39)
INDIFFERENCE, apathy; heat; during: [ARN](#) (+10)
INDIFFERENCE, apathy; stool; after: [ARN](#) (+1)
RESTLESSNESS, nervousness; perspiration; during: [ARN](#) (+39)
STUPEFACTION, as if intoxicated; concussion of brain, after: [ARN](#)
STUPEFACTION, as if intoxicated; injury, after: [ARN](#) (+5)
STUPEFACTION, as if intoxicated; perspiration; during: [ARN](#) (+14)
UNCONSCIOUSNESS, coma; brain complaints, in: [ARN](#) (+46)
UNCONSCIOUSNESS, coma; fever, during: [ARN](#) (+71)
UNCONSCIOUSNESS, coma; injury, after: [ARN](#) (+11)
WEEPING, tearful mood; cough; before: [ARN](#) (+7)
WEEPING, tearful mood; cough; during: [ARN](#) (+32)

HEAD

CONGESTION, hyperemia; chill; during: [ARN](#) (+26)
CONGESTION, hyperemia; thirst, with: [ARN](#) (+3)
HEAT; chilliness; during: [ARN](#) (+24)
HEAT; coldness, with; body, of: [ARN](#) (+42)
INFLAMMATION; meninges, meningitis; injuries, after: [ARN](#) (+5)
PAIN, headache; brain complaints, in: [ARN](#) (+23)
PAIN, headache; injuries, after: [ARN](#) (+40)
PAIN, headache; injuries, after; concussion: [ARN](#) (+20)
PAIN, headache; injuries, after; fall, after a: [ARN](#) (+7)
PAIN, headache; forehead; warmth; agg.: [ARN](#) (+14)
PAIN, headache; burning, smarting; coldness of body, with: [ARN](#) (+1)
PAIN, headache; stitching; cough; during: [ARN](#) (+43)
SWELLING; children: [ARN](#) (+2)

EYES

CATARACT, opacity of lens; injuries, after: [ARN](#) (+17)
CATARACT, opacity of lens; operations, after: [ARN](#) (+5)
DUST; agg.: [ARN](#) (+32)
HEMORRHAGE; coughing agg.: [ARN](#) (+5)
HEMORRHAGE; injuries, after: [ARN](#) (+5)
INFLAMMATION; injuries, after: [ARN](#) (+28)
INFLAMMATION; injuries, after; foreign bodies, from: [ARN](#) (+7)
INJECTED; cough, during: [ARN](#)
PAIN; injuries, after: [ARN](#) (+6)

EARS

INJURIES, after: [ARN](#) (+13)

HEARING

IMPAIRED, difficult; injuries or blows, after: [ARN](#) (+5)

NOSE

EPISTAXIS, hemorrhage; morning; agg.; blowing nose agg.: [ARN](#) (+34)
EPISTAXIS, hemorrhage; bathing, washing; agg.: [ARN](#) (+23)
EPISTAXIS, hemorrhage; bathing, washing; agg.; face: [ARN](#) (+21)
EPISTAXIS, hemorrhage; cough; during: [ARN](#) (+44)
EPISTAXIS, hemorrhage; cough; during; whooping cough •: [ARN](#) (+14)
EPISTAXIS, hemorrhage; exertion, from: [ARN](#) (+12)
EPISTAXIS, hemorrhage; fever; during: [ARN](#) (+27)
EPISTAXIS, hemorrhage; injuries, after: [ARN](#) (+8)
EPISTAXIS, hemorrhage; injuries, after; blow: [ARN](#) (+4)
EPISTAXIS, hemorrhage; injuries, after; mechanical: [ARN](#)

FACE

HEAT; coldness, with; body, of: [ARN](#) (+29)
HEAT; coldness, with; limbs, of: [ARN](#) (+75)
SWELLING; one-sided: [ARN](#) (+36)
SWELLING; cheeks; one-sided: [ARN](#) (+14)

MOUTH


OFFENSIVE odor; perspiration, during: [ARN](#) (+10)



Modul primera

Odpiranje modula Primer

Pojdite v modul Case (Primer) tako, da kliknete zavihek *Case (Primer)*. (Možnost menija *Oglejte si / Primer, ⌘-D*).

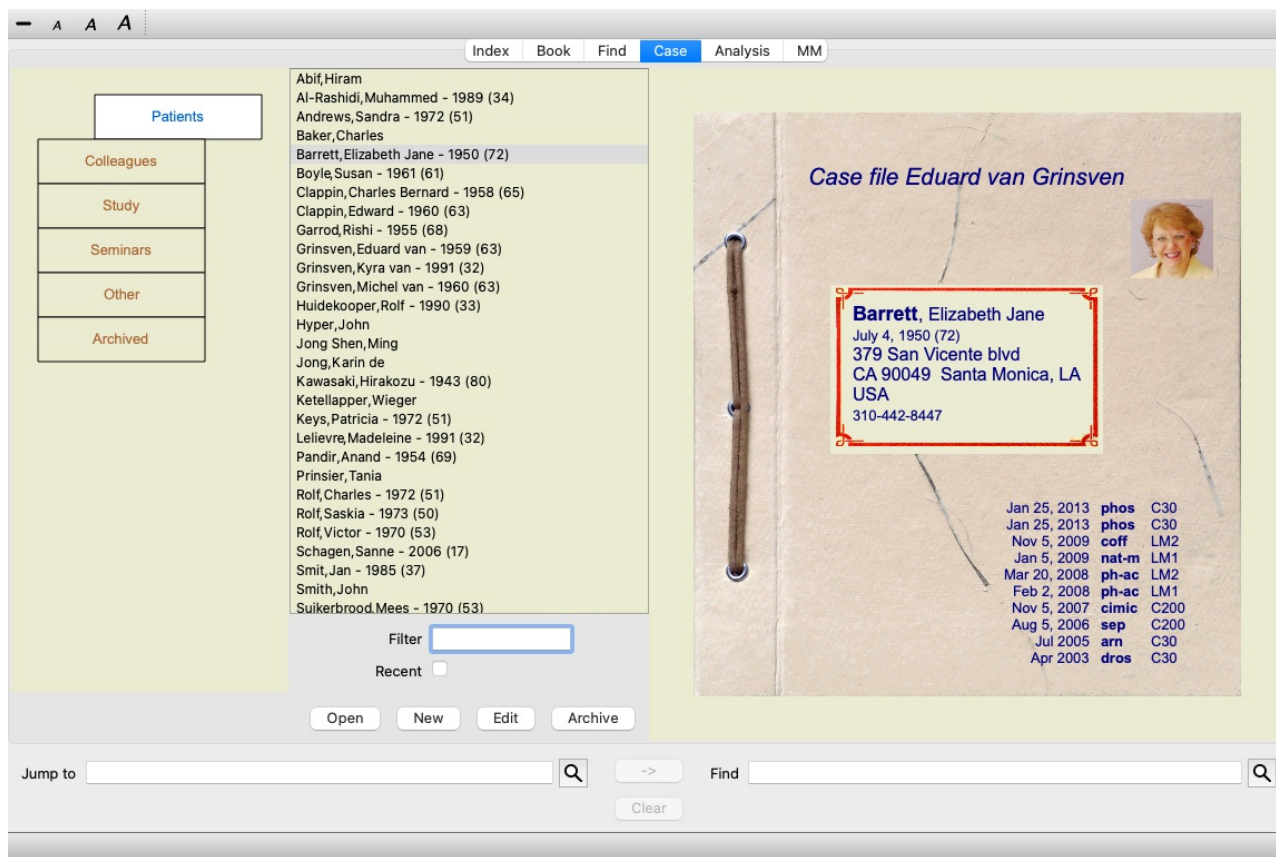

V modulu Case lahko ustvarjate in urejate datoteke primerov svojih pacientov, registrirate predpisane recepte ter ustvarjate in urejate analize.

Delo z modulom Case je podobno delu s praviimi datotekami primerov.

Zadeve so razvrščene v skupine, tako kot bi v resničnem življenju razporedili mape v različne omare ali predale. Najprej izberete skupino ali skupine, v katerih želite delati.


Primeri v izbranih skupinah so prikazani na seznamu, ki vsebuje le povzetek informacij o bolniku: Ime in leto rojstva. Zadeve lahko filtrirate tako, da v polje *Filter* pod seznamom vpišete enega ali več delov imena bolnika.

Ko na seznamu izberete zadevo, se na desni strani zaslona prikaže datoteka zadeve.

Naslednji korak je odprtje datoteke zadeve, vendar bomo najprej podrobneje predstavili ta del upravljanja zadev.

Izbira skupin in ustvarjanje lastnih skupin

Izbirnik skupin lahko vidite kot nekakšno omaro s predali.

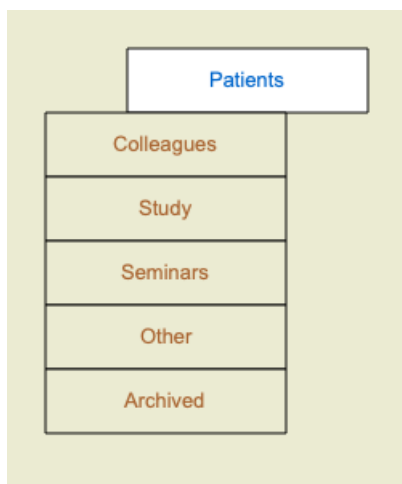

Na tej sliki je predal *Patients* odprt.

Standardne skupine so:

Bolniki Vse datoteke primerov, ki so v opisu primera označene kot *Patient* (več informacij spodaj) in katerih avtor ste vi.

Sodelavci Vse spise, ki so v opisu zadeve označeni kot *Patient* in katerih avtor je nekdo drug.

Študija Vse datoteke primerov, ki so označene kot *Študija*. To so primeri, ki niso neposredno povezani z nobenim od vaših bolnikov, ampak so namenjeni le vaši osebni študiji.

Seminarji Vsi spisi, ki so označeni kot *Seminar*. V tej skupini ustvarite primere za vse primere, ki se pojavijo na seminarjih in usposabljanjih.


Drugo Vsi primeri, ki ne spadajo v nobeno drugo skupino.

Arhivirano Vsi primeri, ki ste jih arhivirali.

Arhivirani primeri se ne pojavljajo več v nobeni od drugih skupin.

Hkrati lahko odprete enega ali več predalov. Če želite odpreti ali zapreti predal, kliknite nanj. Z dvojnim klikom na enega od predalov ga


boste odprli in hkrati zaprli vse druge.

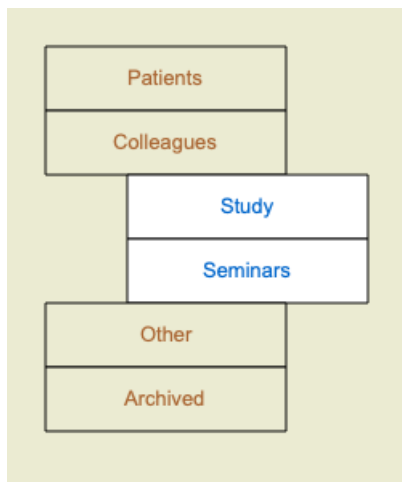

Odpreda sta dva predala.

Na seznamu primerov bodo prikazani vsi primeri, ki so označeni kot "Study" (Študij) ali "Seminars" (Seminarij).

Seveda se te skupine ne ujemajo z vašimi osebnimi željami. Ustvarjanje novih predalov z lastnimi skupinami je enostavno. Pri urejanju informacij o zadevi lahko določite, v katere skupine naj bo zadeva uvrščena. Uporabite lahko tri standardne skupine "Bolnik", "Študij" in "Seminar", lahko pa vnesete tudi lastna imena skupin. Novi predali bodo na seznam dodani samodejno:

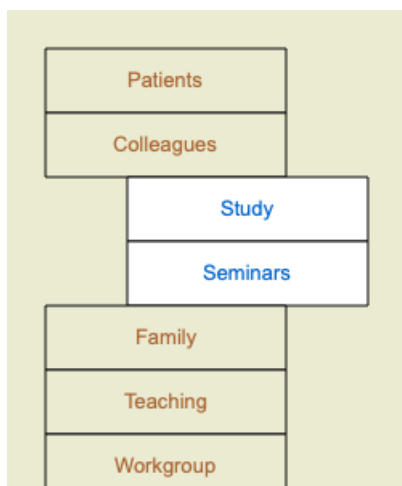

Predali *Družina*, *Učenje* in *Delovna skupina* so na seznam dodani samodejno, ker so bila v nekaterih primerih ta imena skupin uporabljena v informacijah o primeru.

Izbira prave zadeve

Na seznamu so prikazani vsi primeri, ki ustrezajo izbrani skupini ali skupinam. Če v polje *Filter* vnesete besedilo, se seznam omeji na primere, ki ustrezajo besedilu filtra.

Primer uporabe filtra:

Filter ima nekaj zelo zmogljivih možnosti za izbiro ustreznega primera. Uporablja enaka merila za filtriranje, kot jih polje *Poišči* uporablja za besedilo in sredstva.

V modulu *Case (Primer)* je besedilo ime, kot je prikazano na seznamu, zdravila pa so vsa zdravila, ki so bila bolniku predpisana (ali pa NISO bila predpisana).

Podrobnosti so na voljo v razdelku *"Iskanje", polje*.

Primer: *John* ali *Joseph*, ki mu je bil predpisan *nux-v*, nikoli pa *sulph*, preprosto vnesite: *john / joseph nux-v. -sulph*.

(Upoštevajte piko za imeni zdravil!).

Če označite možnost *Nedavni*, so prikazani samo primeri, ki so bili nedavno spremenjeni. Standardni rok za to je 7 dni. To nastavitev lahko spremenite v razdelku *Preferences Case*.


Povzetek spisa

Ko izberete datoteko, se na desni strani prikaže del informacij o zadevi.

Informacije vključujejo:

- Ime avtorja primera.
- Podatki o pacientu (ime, naslov, datum rojstva).
- Fotografija (če je na voljo).
- Seznam zadnjih receptov.

Primer:

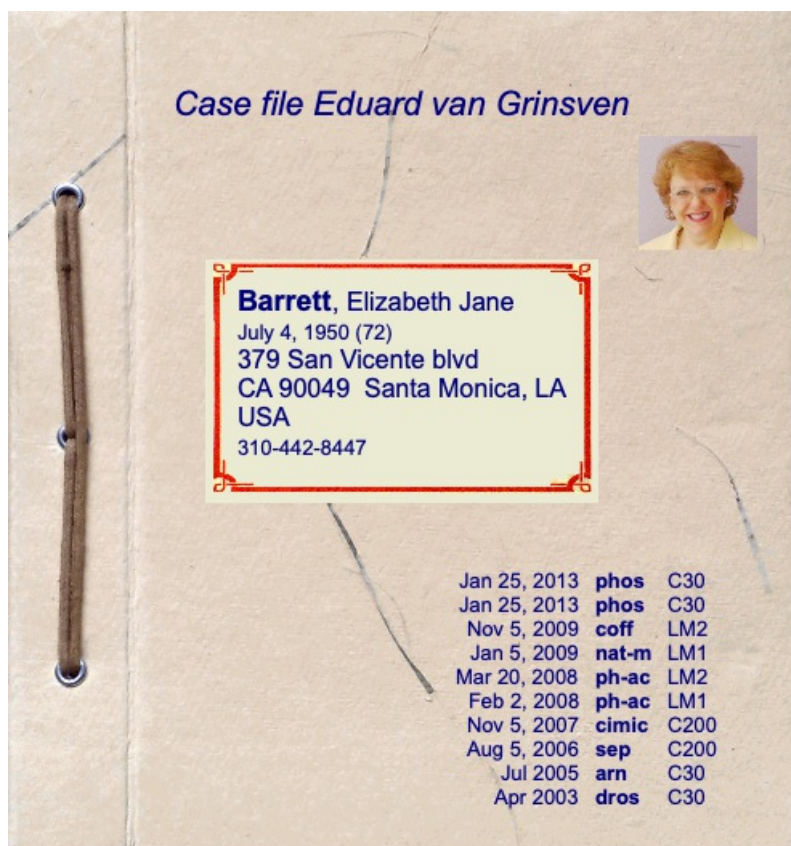

Ustvarjanje spisa zadeve

Novo datoteko zadeve lahko ustvarite tako, da kliknete gumb *New*. (Možnost menija *Primer / Nov primer, control-N*). Prikaže se pogovorno okno, v katerem lahko vnesete podatke o bolniku in informacije o ozadju primera.

Urejanje podatkov o primeru

V razdelku *Patient* lahko vnesete vse osebne podatke, ki jih želite shraniti o pacientu. Pritisnite gumb *Photo* in izberite slikovno datoteko s fotografijo (*gif*, *jpeg* ali *png* format). Velikost fotografije se samodejno spremeni. Z gumbom *Clear* odstranite obstoječo fotografijo.

Če leto, mesec ali dan pacientovega rojstva niso znani, vpišite 0.

Če natančen dan rojstva ni znan, ampak pacient navede le trenutno starost, lahko starost vpišete v polje Leto rojstva.

Če vnesete bolnikov e-poštni naslov, lahko preprosto pošljete e-poštno sporočilo. (Možnost menija *Primer / E-pošta pacienta*).

Patient

Case

Personal info

Family name

Barrett

First name

Elizabeth

Middle name

Jane

Initials

E.J.M.

Gender

Female

Birth year

1950


Birth month

7

Birth day

4

Photo



Photo

Clear

Rotate

Address info

Street

379 San Vicente blvd

+

Zip code

CA 90049

City

Santa Monica, LA

Country

USA

Phone home

310-442-8447

Phone office

Phone mobile

Email

lisabarret50@gmail.com

Family info

Spouse

Bill

Children

Jane, Peter

Cancel

OK

V razdelku *Case* lahko vnesete nekaj informacij o ozadju primera, ki niso povezane s samim bolnikom.

V skupini *Informacije o avtorju* lahko vnesete ime osebe, ki je ustvarila ta primer. V večini primerov ste to vi, zato so vaši podatki že samodejno izpolnjeni (ali pa pritisnete gumb *Me*, če ste zadevo prejeli od nekoga drugega in jo želite prevzeti). Informacije o avtorju se uporabljajo za uvrstitev primerov bolnikov v izbiro skupine *Bolnik* ali *Sodelavci*.

V skupini *Skupine primerov* lahko izberete eno od standardnih skupin in/ali vpišete svoja imena skupin, ločena s presledki ali podpičji. Skupina *Ozadje zadeve* je uporabna, če zadeva izvira iz seminarja, revije itd. in si želite zapomniti, od kod zadeva izvira.

Patient

Case

Author info

Family name

Grinsven

First name

Eduard

Middle name

van

Initials

Me

Case groups

Patient

☒

Study

☐

Seminar

☐

Other groups

Case background

Case origin

Complete Dynamics documentation centre.

Notes

This is an example case for use in the documentation.

The information entered here will appear on the case background sheet in the opened case file.


Cancel

OK

Dodajanje podatkovnih polj po meri

Če vam standardni podatki, ki jih lahko vnesete za bolnika, ne zadostujejo, lahko sami dodate dodatna polja. Na ta način lahko enostavno upravljate vse informacije v skladu s svojim osebnim načinom dela.

Če želite informacijam o primeru dodati nova polja, pritisnite gumb + na desni strani zaslona.

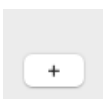

Zdaj lahko vnesete ime in vrednost za novo polje.

Create extra field

Label

Insurance nr.

Data type

☒ Text
 ☐ Number

Value

BX-1234567

Po dodajanju novih polj so ta polja samodejno prisotna vsakič, ko urejate podatke o bolniku. V tem primeru sta bili dodani dve novi polji.

Personal additions

Insurance nr. BX-1234567

Family doctor GrandHeal sr.

+

Nove informacije so prikazane tudi v razdelku z informacijami o bolniku v modulu Primer.

— A A A

Patient information

Name	Demo case, Andrew (A.)
Gender	Male
Birth date	January 1, 1971 (52)
Address	123 Lessmore drive
	54321 Metropolis
	Neverland
Tel. home	123-456-7890
Tel. office	
Tel. mobile	
Email	andrew@demoworld.tx
Spouse	Julia
Children	
Insurance nr.	BX-1234567
Family doctor	GrandHeal sr.

Vaša osebna polja samodejno izginejo, ko se ne uporabljajo več.

Odpiranje zadeve

Obstoječo datoteko zadeve lahko odprete tako, da jo izberete na seznamu in nato kliknete gumb *Open*. (Možnost menija *Primer / Odprt primer, control-O*).

Na vnos na seznamu lahko tudi dvakrat kliknete.

Ko ustvarite nov primer, se ta samodejno odpre.

Ko odprete datoteko primera, se prikaže vsebina, ki bi jo običajno pričakovali tudi v resnični datoteki primera:

- list papirja s podatki o bolniku,
- obrazec z recepti,
- obrazec s pregledom vseh analiz v spisu zadeve,
- list papirja za vsako analizo,
- list papirja z informacijami o ozadju primera.

Primer:

Remedy

Phosphoricum acidum

Potency

Reactions

Instructions

Notes

Year

Month

Day

Če mesec ali dan nista znana, vpišite 0.

Recept izbrišite tako, da ga izberete na seznamu in nato izbrišete recept. (Možnost menija *Primer / Izbriši recept*, možnost priročnega menija *Izbriši recept*).

Recept uredite tako, da dvakrat kliknete na vnos na seznamu. (Možnost menija *Primer / Predpis za urejanje*, možnost priročnega menija *Predpis za urejanje*).

Upravljanje analiz

Novo analizo lahko dodate z možnostjo menija ali dvakrat kliknete na prazno vrstico na vrhu indeksa analiz. (Možnost menija *Primer / Dodajte analizo, control-A*, možnost priročnega menija *Dodajte analizo*).

Prikaže se novo pogovorno okno, v katerem lahko vnesete nekaj informacij o analizi:

Description

Diagnosis

Notes

Year

Month

Day

Če mesec ali dan nista znana, vpišite 0.

Analizo izbrišete tako, da jo izberete na seznamu in nato izbrišete. (Možnost menija *Primer / Izbriši analizo*, možnost priročnega menija *Izbriši analizo*).

Analizo uredite tako, da dvakrat kliknete na vnos na seznamu. (Možnost menija *Primer / Analiza urejanja*, možnost priročnega menija *Analiza urejanja*).

Če želite kopirati analizo kot osnovo za novo analizo, uporabite možnost Podvoji analizo. (Možnost menija *Primer / Analiza dvojnikov, control-D*, možnost priročnega menija *Analiza dvojnikov*).

Če želite analizo premakniti v drug primer, uporabite možnost menija Move analysis to case (Premakni analizo v primer). (Možnost menija *Primer / Premaknite analizo na primer...*, možnost priročnega menija *Premaknite analizo na primer...*).

Če kliknete na eno od analiz na seznamu, postane ta analiza tista, ki jo uporablja modul *Analiza* (glejte razdelek *Analiza*).

Tiskanje

Svojo zadevo ali njene dele lahko natisnete. (Možnost menija *Primer / Natisni*, -P, možnost priročnega menija *Natisni*).

Tiskanje zadeve je mogoče šele, ko jo odprete.

V pogovornem oknu lahko izberete, kaj želite natisniti:

What to print?

Case cover ☒

Analyses ☒ Current analysis
☐ All analyses
☐ No analyses

Analysis details ☐

Rubrics and remedies ☐

Printing options

Color ☒

Print to ☒ Printer
☐ Write to PDF file
☐ Write to HTML file
☐ Clipboard
☐ Picture file

High resolution ☐

Pokrov ohišja

Trenutna analiza

Vse analize

Brez analiz

Če označite to možnost, bo prva stran izpisa vsebovala podatke o bolniku in pregled receptov.

To možnost izberite, če želite natisniti samo trenutno izbrano analizo z nastavitvami, kot so uporabljene v modulu *Analysis (Analiza)*.

To možnost izberite, če želite natisniti vse analize.

To možnost izberite, če ne želite natisniti nobene analize (samo ovitek zadeve).

<i>Podrobnosti analize</i>	Če označite to možnost, se natisnejo informacije, ki ste jih vnesli za vsako analizo (diagnoza, opombe).
<i>Rubrike in pravna sredstva</i>	Če označite to možnost, bo vsak izpis analize vseboval pregled vseh pravnih sredstev v rubrikah, ki se uporabljajo v analizi. Upoštevajte, da bo zaradi omejitev avtorskih pravic natisnjenih največ 20 rubrik z vsemi pravnimi sredstvi. Če natisnete več kot 20 rubrik, rubrike z največjim številom pravnih sredstev ne bodo navedene.
<i>Barva</i>	Natisnite v barvah. Če ni označeno, je tiskanje optimizirano za črno-bele tiskalnike.
<i>Tiskanje v tiskalnik</i>	To možnost izberite, če želite tiskati neposredno v tiskalnik.
<i>Pisanje v datoteko PDF</i>	To možnost izberite, če želite pisati v datoteko PDF.
<i>Napišite v datoteko HTML</i>	To možnost izberite, če želite zapisati v datoteko HTML. To je priročna oblika, če želite dele izpisa kopirati v druge dokumente.
<i>Pripomoček</i>	Izberite to možnost, če želite v računalniški odložišče shraniti sliko analize, ki jo lahko vključite v drugo aplikacijo.
<i>Slikovna datoteka</i>	To možnost izberite, če želite sliko analize zapisati v datoteko.


Tiskanje pregleda več primerov

Če niste odprli zadeve, lahko natisnete pregled več zadev. (Možnost menija *Primer / Natisni*, *H-P*, možnost priročnega menija *Natisni*). To je lahko na primer praktično, če želite ustvariti seznam za sodelavca, ki spremlja vaše bolnike. Nato lahko pripravite seznam z imeni in rojstnimi datumi pacientov, ki ste jih pregledali v zadnjih šestih mesecih, s seznamom receptov za zdravlila. Možnosti v pogovornem oknu za tiskanje niso potrebne dodatne razlage.

Zaščita z geslom

Podatke o pacientu lahko zaščitite pred nezaželenim dostopom drugih oseb, medtem ko vas ni v računalniku.

V ta namen lahko nastavite geslo. (Možnost menija *Primer / Podatkovna zbirka primerov / Sprememba gesla*).

Če je bilo nastavljeno geslo, se v modulu *Case* pojavi nov gumb .

Ko pritisnete ta gumb, se modul ohišja takoj zaklene in za njegovo odprtje je treba vnesti geslo.

Prav tako je mogoče samodejno zakleniti podatke o zadevi, če programa nekaj časa niste uporabljali.

Čas pred samodejnim zaklepanjem lahko nastavite sami v nastavitvah *Preferences*. (Možnost menija *Splošno / Nastavitve*).

Če čas nastavite na 0 minut, se samodejno zaklepanje ne izvede.

Pri določanju gesla bodite zelo previdni. Poleg vas vašega gesla ne pozna nihče drug. Če pozabite geslo, je to enako, kot če bi izgubili ključke od hiše - dostopa ni več.

Arhiviranje in brisanje

Arhiviranje primerov

Če ne želite več, da je zadeva prikazana na seznamu vaših zadev, jo lahko arhivirate. (Možnost menija *Primer / Arhivska zadeva*).

Po arhiviranju primera bo ta prikazan v skupini *Arhivirani*.

Čeprav je zadeva arhivirana, jo lahko še vedno odprete. Če zadevo spremenite, se samodejno odstrani iz skupine *Arhivirano* in se vrne med druge aktivne zadeve.

Arhivirate lahko več starejših primerov. (Možnost menija *Primer / Arhiviranje starih primerov*, možnost priročnega menija *Arhiviranje starih primerov*).

V pogovornem oknu, ki se odpre, lahko določite število mesecev. Na seznamu so prikazani vsi primeri, ki v danem številu mesecev niso bili spremenjeni. Nato lahko arhivirate vse primere, ki so izbrani na seznamu.

Brisanje zadeve

Če datoteke ne želite več hraniti, jo lahko izbrišete. (Možnost menija *Primer / Izbriši zadevo*).

Zadevo lahko izbrišete šele, ko je bila arhivirana.

Možno je tudi, da se starejši arhivirani primeri samodejno izbrišejo. Za to obstaja možnost v nastavitvah *Preferences*. Arhivirani primeri se privzeto ne izbrišejo samodejno.

Samodejno varnostno kopiranje

Če nehoti izbrišete datoteko zadeve, jo lahko obnovite iz varnostne kopije. (Možnost menija *Primer / Podatkovna zbirka primerov / Obnovitev primera iz varnostne kopije*).

Varnostne kopije se naredijo samodejno.

- Zadnji mesec vsak dan.
- Zadnje leto vsak mesec.
- Po enem letu je varnostna kopija trajno odstranjena.

- Upoštevajte, da so varnostne kopije shranjene lokalno v računalniku.

Strežnik v oblaku

Uvod

Če za svojo prakso uporabljate več kot en računalnik, boste morda želeli sinhronizirati podatke o primerih med njimi. Tako boste imeli vedno na voljo najnovejše informacije o primerih, ne glede na to, kje delate. Tudi če ste na poti in uporabljate telefon ali tablični računalnik.

Naš strežnik v oblaku ponuja prilagodljiv in enostaven mehanizem za samodejno sinhronizacijo vaših primerov.

V nasprotju s številnimi drugimi rešitvami v oblaku lahko *Complete Dynamics* uporabljate tako z internetno povezavo kot brez nje. Brez internetne povezave so vsi primeri shranjeni lokalno v napravi. Vse opravljene spremembe so shranjene lokalno. Ko je na voljo internetna povezava, se lahko primeri samodejno sinhronizirajo prek strežnika v oblaku.

Če v različnih napravah spremenite zadeve, medtem ko niso povezane z internetom, to ne spremeni ničesar. Ko je povezava s strežnikom v oblaku na voljo, je mogoče združiti vse spremembe, ki ste jih opravili v različnih napravah. Tudi če ste delali na istem primeru.

Kaj počne strežnik v oblaku?

Namen strežnika v oblaku je zagotoviti, da so vaše zadeve enake v vseh napravah, ki uporabljajo to storitev.

Kar boste dodali v eno napravo, bo dodano tudi v druge naprave.
Kar spremenite v eni napravi, bo spremenjeno tudi v drugih napravah.
Kar izbrišete v eni napravi, bo izbrisano tudi v drugih napravah.
Arhiviranje primera pomeni, da bo arhiviran tudi v drugih napravah.

Prednosti uporabe strežnika v oblaku

- Po samodejni sinhronizaciji so vaši primeri posodobljeni, ne glede na to, katero napravo uporabljate.
- Deluje z vsemi napravami, ki so v vaši licenci.
- Delate lahko brez internetne povezave.
- Sinhronizacija je samodejna, ko je na voljo internet.
- Vedno je na voljo kopija vaših primerov za primer, če vaš računalnik umre.

Za katere naprave naj uporabljam strežnik v oblaku?

To je vaša lastna izbira.

Če uporabljate en računalnik, lahko strežnik v oblaku uporabite za zavarovanje kopije svojih primerov. Če računalnik umre, se lahko zadeve samodejno prenesejo v nov računalnik.

Če uporabljate dve ali več naprav, lahko strežnik v oblaku spremembe, ki ste jih naredili v eni napravi, uporabi v drugih napravah.

Za vsako napravo, ki jo uporabljate, določite, ali naj uporablja strežnik v oblaku ali ne. Strežnik v oblaku lahko na primer uporabljate za računalnike doma in v pisarni, ne pa tudi za telefon.

Varnost in zasebnost

Zavedamo se, da sta varnost in zasebnost izjemno pomembni.

Varnost

Vaši podatki o primeru so zelo dobro zaščiteni.

- Dostop do strežnika v oblaku je mogoč samo iz naprave, ki ima veljavno licenco na vaše ime.
- Nobena druga naprava nima dostopa do vaših primerov.
- Potrebno je dodatno geslo, ki ga poznate samo vi.
- Povezava s strežnikom je šifrirana.

Zasebnost

Strežnika v oblaku niste dolžni uporabljati. Zelo dobro razumemo, da morda ne želite, da bi bili podatki vašega pacienta shranjeni nekje na oddaljenem računalniku.

Odločitev o uporabi strežnika v oblaku je popolnoma vaša.

V celoti spoštujemo zasebnost vas in vaših pacientov.

Vaših podatkov ne bomo uporabljali ali obdelovali na noben način. Strežnik v oblaku ga le kopira v vaše naprave in iz njih.

Nastavitev strežnika v oblaku

Če želite napravo začeti uporabljati s strežnikom v oblaku, jo morate najprej aktivirati. Aktivacija poteka v razdelku *Nastavitve*, v razdelku *Primer*. (Možnost menija *Splošno / Nastavitve*). Tu lahko izberete možnost *Use Cloud Server*.

Če strežnik v oblaku aktivirate prvič, boste samodejno napoteni, da ustvarite kodo PIN, ki varuje vaše podatke o zadevah. PIN lahko pozneje vedno spremenite. (Možnost menija *Primer / Podatkovna zbirka primerov / Spreminjanje kode PIN v oblaku*). Ne pozabite kode PIN v oblaku, saj jo boste potrebovali pri aktivaciji druge naprave.

Stanje strežnika v oblaku

Na vrhu strani v modulu *Case* ikona označuje stanje povezave s strežnikom.

- ☁ Strežnik v oblaku je na voljo.
- ☁ Komunikacija v teku.
- ✖ Ni internetne povezave ali je strežnik začasno izključen iz omrežja.
če ikona ni prikazana, strežnik v oblaku še ni konfiguriran.

Ko kliknete ikono, se sinhronizacija izvede takoj.

Omejitve

Namen strežnika v oblaku je, da vse spremembe, opravljene v eni napravi, uporabi v vseh drugih napravah. Vendar to ni vedno mogoče. Tako boste lažje razumeli, kakšne so omejitve.

Zlasti pri delu brez povezave se lahko zgodi, da se spremembe iste zadeve izvedejo v različnih napravah, preden se ponovno vzpostavi povezava s strežnikom v oblaku. Običajno to le redko predstavlja težavo.

Informacije v zadevi so sestavljene iz več neodvisnih elementov:

- Informacije o bolniku.
- Informacije o primeru.
- Vsaka analiza.
- Vsak recept za zdravilo.

Spremembe lahko opravite v enem od teh elementov in v drugem elementu v drugi napravi.

Če na primer spremenite isto analizo v dveh napravah, bo shranjena le zadnja sprememba.

Če v eni napravi spremenite eno analizo, v drugi pa drugo, to ne bo težava.

Če v eni napravi dodate recept za zdravilo, v drugi napravi pa drug recept za zdravilo, to ne bo težava.

Varnostne kopije

Primeri, shranjeni v strežniku v oblaku, so kopija primerov v vaši napravi. Izvirni podatki so v vaši napravi.

Za izdelavo varnostnih kopij računalnika ste vedno odgovorni sami.

Skupna raba primerov

Deljenje primerov s sodelavci

V številnih primerih boste morda želeli enega od svojih primerov in/ali analiz posredovati kolegu, sošolcu, učitelju ali ga morda objaviti na spletnem forumu.

Complete Dynamics vam ponuja možnost izvoza celotnega ali le delnega primera v datoteko. To datoteko lahko posredujete sodelavcu in jo uvozite v njegov računalnik. Vaš sodelavec za to ne potrebuje licence *Practitioner Edition*, z brezplačno *Browser Edition* lahko datoteko tudi uvozite in si jo ogledate.

Skupna raba primerov je lahko tudi anonimna, s čimer je zagotovljena zasebnost vašega pacienta in vas.

V nadaljevanju je opisan način izvoza in uvoza. Najprej si bomo ogledali še eno pomembno funkcijo souporabe primerov.

Sinhronizacija primerov med več računalniki

Ročna sinhronizacija je pomembna le, če se niste odločili za samodejno sinhronizacijo prek strežnika v oblaku.

S souporabo ohišja imate na voljo dve zmogljivi možnosti za prenos ohišij iz enega računalnika v drugega.

Najlažje je izvoziti celotno kopijo podatkovne zbirke primerov v enem računalniku in jo uvoziti v drugem računalniku.

To nadomesti vse informacije o primeru, shranjene v drugem računalniku.

To možnost lahko uporabite tudi za redno ustvarjanje varnostne kopije podatkovne zbirke primerov.

Bolj napreden način je, da izvozite samo primere, ki so spremenjeni v enem računalniku, in jih uvozite v drugem. V tem primeru se v podatkovno zbirko v drugem računalniku kopirajo in združijo samo spremenjeni podatki. Ta zmogljiv mehanizem sinhronizacije deluje tudi, če je bila zadeva spremenjena v obeh računalnikih!

Izvoz posameznega primera

Če želite izvoziti posamezen primer, odprite modul *Case (Primer)* in izberite primer, ki ga želite izvoziti.

Nato uporabite možnost Izvozi trenutni primer... (Možnost menija *Primer / Skupna raba / Izvozite trenutni primer...*, *control-Y*, možnost priročnega menija *Skupna raba / Izvozite trenutni primer...*).

Odpre se pogovorno okno, v katerem lahko izberete dele zadeve, ki jih želite izvoziti:

Podatki o avtorju Če te možnosti ne označite, vaše ime ne bo vključeno v izvoz.

Informacije za bolnike Če odkljukate to možnost, bo pacient anonimen. Uporabljata se samo spol in letnica rojstva pacienta. Če je ta možnost označena, so v izvoz vključeni vsi bolnikovi osebni podatki.

Opombe o primerih Če je ta možnost označena, so v izvoz vključene informacije o ozadju vašega primera. (Ozadje primera, opombe in skupine).

Predpisi Če je ta možnost označena, so v izvoz vključeni tudi recepti, ki ste jih izdali.

Analize Za vsako analizo v primeru se lahko odločite, ali jo želite izvoziti ali ne. S klikom na vrstico vklopите ali izklopите izbiro. Z gumboma *Vse* in *Nobena* lahko za lažjo izbiro izberete vse ali nobene analize.

Geslo Če tukaj vnesete vrednost, je izvozna datoteka zaščitena z geslom. Da bi ga lahko uvozili, mora nekdo poznati geslo. Priporočamo, da uporabite geslo za vse podatke, ki jih delite, razen za anonimne primere, ki jih želite objaviti za vse na internetu.

Ko ste pripravljeni, pritisnite gumb *OK*, nato pa boste morali izbrati ime in lokacijo datoteke.

Privzeto ime datoteke je že vneseno, vendar lahko izberete poljubno ime.

Izvoz posamezne analize

Če želite izvoziti posamezno analizo, odprite primer, ki vsebuje analizo, in izberite analizo, ki jo želite izvoziti.

Nato v meniju uporabite možnost Izvozi trenutno analizo... (Možnost menija *Primer / Skupna raba / Analiza izvoznega toka...*, možnost priročnega menija *Skupna raba / Analiza izvoznega toka...*).

Odpre se pogovorno okno, v katerem lahko izberete dele zadeve, ki jih želite izvoziti skupaj z analizo:

Za pomen polj glejte zgornje informacije.

Izvoz več primerov

V eno datoteko lahko izvozite več primerov. (Možnost menija *Primer / Skupna raba / Izvozite več primerov...*, možnost priročnega menija *Skupna raba / Izvozite več primerov...*).

The interface shows a sidebar on the left with categories: Patients (highlighted), Colleagues, Study, Seminars, Other, and Archived. The main area displays a list of patient names and birth years/ages, such as Abif, Hiram; Al-Rashidi, Muhammed - 1989 (34); Andrews, Sandra - 1972 (51); Baker, Charles; Barrett, Elizabeth Jane - 1950 (72); Boyle, Susan - 1961 (61); Clappin, Charles Bernard - 1958 (65); Clappin, Edward - 1960 (63); Garrod, Rishi - 1955 (68); Grinsven, Eduard van - 1959 (63); Grinsven, Kyra van - 1991 (32); Grinsven, Michel van - 1960 (63); Huidekooper, Rolf - 1990 (33); Hyper, John; Jong Shen, Ming; Jong, Karin de; Kawasaki, Hirakazu - 1943 (80); Ketellapper, Wieger; Keys, Patricia - 1972 (51); Lelievre, Madeleine - 1991 (32); and Pandir, Anand - 1954 (69). Below the list is a 'Filter' input field. At the bottom, there are checkboxes for 'Author information', 'Patient information', 'Case notes', and 'Prescriptions', all of which are checked. A message states: 'To protect the privacy, please use a password.' followed by a 'Password' input field. 'Cancel' and 'OK' buttons are at the bottom right.

Na seznamu primerov izberite tiste, ki jih želite izvoziti, tako da jih kliknete.

Razpon primerov lahko izberete tako, da povlečete miško nad vnose.

Uvoz primera ali analize

Če vam je nekdo drug dal datoteko za izvoz primera ali analize, jo lahko preprosto uvozite z možnostjo Uvoz. (Možnost menija *Primer / Skupna raba / Uvoz...*, *control-I*, možnost priročnega menija *Skupna raba / Uvoz...*).

Poizvedeni boste za datoteko, ki jo želite uvoziti.

Ko izberete datoteko, jo uvozite v podatkovno zbirko primerov. Če je datoteka zaščitena z geslom, vas najprej vpraša za geslo.

Uvoženo zadevo lahko najdete v skupini *Colleagues*, če je bilo ime avtorja v datoteki, sicer jo boste našli v skupini *Other*. Po odprtju primera lahko sami preprosto spremenite podatke o primeru ali prenesete analizo v enega od svojih drugih primerov. (Možnost menija *Primer / Premaknite analizo na primer...*).

Izvoz celotne zbirke podatkov o primerih

Ko izvozite celotno zbirko podatkov o zadevah, jo lahko uvozite samo v računalnik z licenco, ki je registrirana na vaše ime.

Če želite izvoziti celotno zbirko podatkov o zadevah, uporabite možnost v meniju Izvoz celotne zbirke podatkov o zadevah... (Možnost menija *Primer / Skupna raba / Izvozite celotno podatkovno zbirko primerov...*, možnost priročnega menija *Skupna raba / Izvozite celotno podatkovno zbirko primerov...*).

Odpre se pogovorno okno, v katerem lahko določite geslo za zaščito te datoteke (zelo priporočljivo).

The dialog box contains the text 'To protect the privacy, please use a password.' followed by a 'Password' input field. At the bottom are 'Cancel' and 'OK' buttons.

Po pritisku na gumb *OK* boste morali navesti ime in lokacijo datoteke.

Datoteko prenesite v drug računalnik in tam naredite Import. (Možnost menija *Primer / Skupna raba / Uvoz...*, *control-I*).

Izvoz spremenjenih primerov

Izvoz spremenjenih primerov je najprilagodljivejši način za sinhronizacijo informacij o primerih med več računalniki.

Če želite izvoziti spremembe, uporabite možnost menija Izvozi spremenjene primere. (Možnost menija *Primer / Skupna raba / Izvozite spremenjene primere...*, možnost priročnega menija *Skupna raba / Izvozite spremenjene primere...*).
 Odpre se pogovorno okno, v katerem lahko določite, kaj je treba sinhronizirati:

Privzeto je vnesen datum zadnje sinhronizacije. Če želite sinhronizirati vse spremembe po drugem datumu in času, spremenite vrednost. Za pregled nad tem, kateri primeri bodo vključeni v izvoz, pritisnite gumb *Podrobnosti...*, da dobite seznam primerov in čas njihove zadnje spremembe.

Uvoz spremenjenih primerov

Spremenjene primere lahko uvozite v drug računalnik. (Možnost menija *Primer / Skupna raba / Uvoz...*, *control-I*, možnost priročnega menija *Skupna raba / Uvoz...*).

Ko izberete datoteko, se odpre pogovorno okno z informacijami o potrebnih ukrepih sinhronizacije:

Action	Date	Patient
New	Jan 5, 2014	Holiday, Jimmy - 1942
Merge	Jan 6, 2014	St. Clair, Bonnie - 1970
Replace	Jan 6, 2014	Eastwood, Herny - 1992
New	Jan 6, 2014	Baker, Charles - 1950
New	Jan 7, 2014	Smarting, All - 1962
Merge	Jan 7, 2014	Williams, Charita - 1970
Ignore	Jan 20, 2014	Underwood, Sam - 2013

Pomemben je skrajni levi stolpec. Ta stolpec ima lahko štiri različne vrednosti:

- Novo* Primera ni v lokalni zbirki podatkov. Ustvarjen bo na novo.
- Zamenjava* Primer v lokalni zbirki podatkov ni spremenjen, vendar je različica v izvozni datoteki novejša. Prepisana bo z novimi podatki.
- Združitev* Ohišje je bilo spremenjeno v obeh računalnikih. Informacije v izvoznih datotekah se združijo z informacijami v lokalni zbirki podatkov. Obstoječe informacije se ne prepišejo, temveč se kopirajo nove.
- Ignoriraj* Zdi se, da ta zadeva ni spremenjena v nobenem od obeh računalnikov. Nič ni narejeno.

Ukrep lahko spremenite za vse primere na seznamu. Izberite več primerov tako, da jih kliknete, nato pa pritisnite katerega od gumbov *Ignore*, *New*, *Replace* ali *Merge*. S pritiskom na gumb *Reset* se vsa dejanja povrnejo na prvotno nastavitve. Vse spremenjene nastavitve so označene z barvo, ki označuje, da se njihova vrednost razlikuje od prvotne nastavitve:

Action	Date	
Ignore	Jan 5, 2014	1
Replace	Jan 6, 2014	5
Replace	Jan 6, 2014	1
New	Jan 6, 2014	1

Če je dejanje izrecno nastavljen na *New*, bo primer kopiran kot nov primer, tudi če je podoben primer že prisoten v lokalni zbirki podatkov. To lahko storite, kadar ste v dvomih, saj bosta po uvozu prikazana dva primera z istim imenom, ki ju lahko sami preverite. Običajno to nikoli ni potrebno, saj možnost *Merge* ne bo zavrnila nobenih informacij.

Samodejno varnostno kopiranje

Da bi olajšali izdelavo varnostnih kopij, program enkrat na dan samodejno ustvari izvoz celotne podatkovne zbirke primerov. Te varnostne kopije se hranijo za zadnjih 7 dni. S tem lahko izdelate lastne varnostne kopije, ne da bi vedeli, kje program hrani svoje notranje podatkovne zbirke. Če želite izvedeti več o tem, kje so varnostne kopije in kako jih obnoviti v nujnih primerih, se obrnite na oddelek za podporo. (Možnost menija *Pomoč / Splošne povratne informacije*).

Skupne zbirke podatkov o primerih

Običajno so vaši primeri shranjeni v podatkovni zbirki primerov, ki je na voljo samo na vašem računalniku. V nekaterih primerih želite nekatere svoje zadeve dati na voljo drugim.

S funkcijami *Case Sharing* lahko izvozite izbrane primere, ki jih lahko nato uvozi kdo drug. V tem primeru postanejo uvoženi primeri del podatkovne zbirke primerov drugega uporabnika.

V nekaterih primerih pa vaših primerov ne nameravamo vključiti v zasebno zbirko podatkov o primerih nekoga drugega. Tu je rešitev *Skupna zbirka podatkov o primerih*.

Podatkovna zbirka v skupni rabi je datoteka podatkovne zbirke zunaj vaše osebne podatkovne zbirke primerov. Vsebuje lahko primere, tako kot običajna zbirka podatkov o primerih.

Datoteka je shranjena v mapi *Complete Dynamics* v mapi *Documents*.

Datoteko lahko delite z drugimi, tako da jim jo podarite ali jo objavite na internetu. Ko drug uporabnik kopira datoteko v svoj računalnik, lahko odpre zbirko podatkov in ima dostop do vseh primerov.

Za zaščito podatkov pred nenamerno uporabo lahko datoteko zaščitite z geslom.

Kdaj uporabiti skupno podatkovno zbirko primerov.

- Študijska skupina s kolegi, v kateri razpravljate o primerih.
- Servisiranje skupine sodelavcev, medtem ko so njihove ordinacije zaprte.
- Objava zbirke primerov.
- Delo na primerih, ki jih obravnava več oseb.
- Zbirka primerov, ki jih uporablja inštitut za usposabljanje.

Ustvarjanje nove skupne zbirke podatkov o zadevah

Enostavno lahko ustvarite novo skupno podatkovno zbirko primerov. (Možnost menija *Primer / Podatkovna zbirka primerov / Ustvarite novo skupno zbirko podatkov o primerih*, možnost priročnega menija *Podatkovna zbirka primerov / Ustvarite novo skupno zbirko podatkov o primerih*).

Odpre se pogovorno okno:

Vnesete lahko kratek opis predvidene uporabe skupnih primerov.

Da bi se izognili nenamernemu dostopu do osebnih podatkov pacientov, priporočamo, da določite geslo.

Pritisnite *OK* in v mapi *Complete Dynamics* bo ustvarjena nova datoteka. Ime temelji na vašem imenu in besedilu, ki ste ga vnesli v pogovorno polje *Opis*.

Nova podatkovna zbirka primerov se samodejno odpre.


Odpiranje skupne podatkovne zbirke primerov

Odprete lahko zbirko podatkov o skupnih zadevah. (Možnost menija *Primer / Podatkovna zbirka primerov / Odprtje skupne zbirke podatkov o primerih*, možnost priročnega menija *Podatkovna zbirka primerov / Odprtje skupne zbirke podatkov o primerih*).

Odpri se bo pogovorno okno, v katerem bodo prikazana imena vseh skupnih podatkovnih zbirk primerov, nameščenih v mapi *Complete Dynamics*.

Izberite ustrezno datoteko in pritisnite *OK*.

Enostavno lahko vidite, katera podatkovna zbirka je odprta:

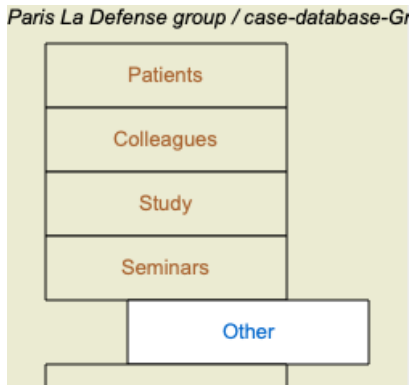

Ko je odprta skupna podatkovna zbirka primerov, lahko spremenite z njo povezane informacije. (Možnost menija *Primer / Podatkovna zbirka primerov / Urejanje podatkovne baze primerov*, možnost priročnega menija *Podatkovna zbirka primerov / Urejanje podatkovne baze primerov*).

Upoštevajte, da so v skupini *Pacienti*, v kateri so navedeni primeri, ki ste jih ustvarili vi. Ko uporabljate skupno zbirko podatkov o primerih nekoga drugega, jih boste najverjetneje našli v skupini *Colleagues*.

V vsakem trenutku se lahko vrnete v osebno zbirko podatkov o primerih. (Možnost menija *Primer / Podatkovna zbirka primerov / Uporaba standardne podatkovne zbirke primerov*, možnost priročnega menija *Podatkovna zbirka primerov / Uporaba standardne podatkovne zbirke primerov*).

Prenos primerov

Skupna zbirka podatkov o primerih deluje enako kot vaša osebna zbirka podatkov. To pomeni, da lahko ustvarjate primere, kot to počnete vedno.

Uporabljate lahko tudi vse funkcije *Case Sharing*, za izvoz in uvoz primerov ali sinhronizacijo sprememb z drugimi osebami, ki uporabljajo isto skupno zbirko podatkov o primerih.

Dodali smo zelo zmogljiv mehanizem za hitro premikanje primerov v osebno zbirko podatkov in iz nje. (Možnost menija *Primer / Podatkovna zbirka primerov / Prenosna ohišja*, možnost priročnega menija *Podatkovna zbirka primerov / Prenosna ohišja*).



Na levi strani so prikazani primeri v odprti skupni zbirki podatkov o primerih. Na desni strani so prikazani primeri v vaši osebni zbirki podatkov.

Z gumbi na dnu lahko izbrane primere hitro kopirate ali premaknete na drugo stran.

Izbira primerov deluje povsem običajno. V tem pogovornem oknu lahko izberete več primerov namesto enega.

S klikom na zadevo jo lahko izberete ali odstranite.

Razpon primerov lahko izberete tako, da povlečete miško nad vnose.

Pri kopiranju ohišja, ki je že prisotno na drugi strani, se drugo ohišje nadomesti s tistim, ki ga kopirate.

Analizni modul

Hitri začetek

Za nestrpneže med vami...

Svetujemo vam, da preberete poglavja pomoči o analizi, saj boste z malo osnovnih informacij svoje delo opravili veliko učinkoviteje. Če želite knjigo prebrati pozneje in takoj začeti, boste s tem povzetkom začeli v minuti.

Začeti s primerom ali ne?

V mnogih primerih je analiza narejena, ker je povezana z bolnikom in jo boste morda želeli shraniti za poznejšo uporabo. V tem primeru je priporočljivo najprej ustvariti primer ali odpreti obstoječi primer, saj bo vaša analiza shranjena na pravem mestu. Ko je zadeva odprta, ji lahko preprosto dodate novo analizo. Podrobne informacije o tem, kako organizirati primere in analize, najdete v razdelku *Modul za primere*.

Če želite opraviti samo hitro analizo brez konteksta pravega primera, preprosto ne odprite ali ustvarite primera in samodejno se bo ustvaril privzeti primer (z imenom *Neimenovani primer*), v katerega bo shranjena analiza. Analizo najdete v tej zadevi, označeno z današnjim datumom.

Dodajanje rubrik

Dodajanje rubrik v analizo je preprosto. Najprej izberite rubriko v modulu *Book*. Rubrika je izbrana, ko je označena s svetlo rumeno barvo. Nato pritisnite tipko Enter. (Možnost menija *Primer / Dodajte rubriko, control-R*). Pri iskanju ustreznega rubrike vam lahko pomaga modul *Find*.

Povzetek

Možnost menija

(Možnost menija *Primer / Nov primer, control-N*).

(Možnost menija *Primer / Dodajte analizo, control-A*). Dodajte analizo v odprt primer.

(Možnost menija *Primer / Dodajte simptom, control-S*). V analizo dodajte simptom.

(Možnost menija *Primer / Dodajte rubriko, control-R*). Analizi dodajte rubriko o repertoarju.

To storite v modulu *Book* ali *Find*, potem ko izberete rubriko.

Akcija

Ustvarite nov primer brez analize.

Dodajte analizo v odprt primer.

V analizo dodajte simptom.

Analizi dodajte rubriko o repertoarju.


To storite v modulu *Book* ali *Find*, potem ko izberete rubriko.

Ustvarjanje analize

Odpiranje modula Analiza

Pojdite v modul Analiza tako, da kliknete zavihek *Analiza*. (Možnost menija *Oglejte si / Analiza, ⌘-R*).

Če ste že odprli primer in izbrali analizo, bo zaslon videti približno takole:

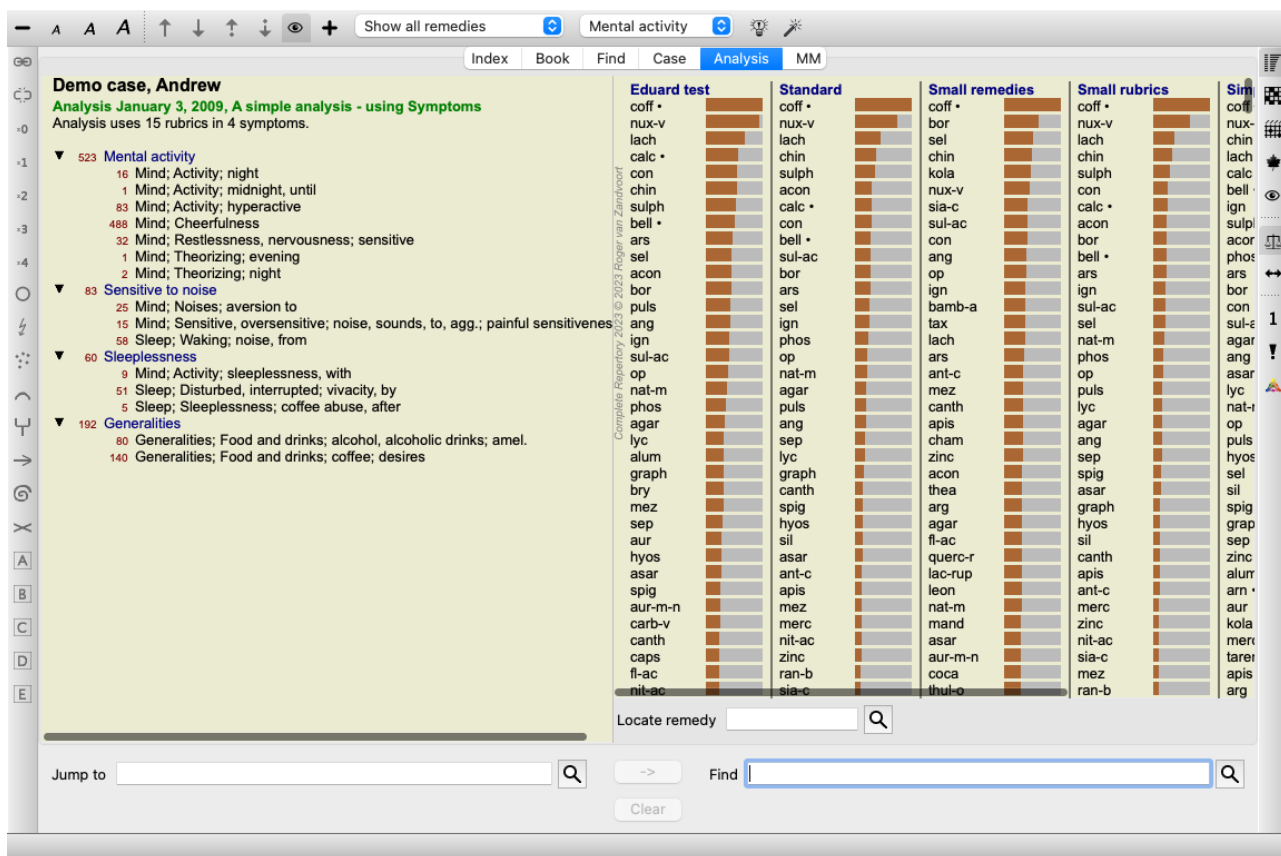

Okno je razdeljeno na dva dela:

- simptome in rubrike, uporabljene za to analizo,
- rezultate analize.

Podrobno jih bomo obravnavali, začenši s prvim.

Upoštevajte, da so tukaj uporabljeni primeri del demo primerov, ki jih najdete v skupini "Drugo" v modulu Case. S temi primeri se lahko prosto igrate. Ob vsakem zagonu programa *Complete Dynamics* se prvotni demo primeri ponovno uvrstijo v skupino "Drugo".

Simptomi v primerjavi z rubrikami

Ko zberete podatke o bolniku, poiščete v repertoriju rubrike, ki ustrezajo bolnikovi situaciji.

Velika pomanjkljivost tega pristopa je, da je za nekatere simptome bolnika potrebna ena sama rubrika repertorija, medtem ko je za druge simptome mogoče najti več rubrik, ki skupaj izražajo pritožbo. Kadar za izražanje enega simptoma uporabimo več rubrik, se zdravila, ki ustrezajo temu simptomu, samodejno štejejo močnejše, zato bo simptom dobil pretirano vrednost v primerjavi z drugimi simptomi. Prav tako bolnik ne izraža svojih simptomov z repertorijskim jezikom. Zbirka repertorijskih rubrik zato ni pravi prikaz bolnikovih pritožb, zlasti če ni mogoče najti rubrik, ki bi bolnikove simptome izrazile 100-odstotno dobesedno.

Complete Dynamics te težave rešuje z razlikovanjem med simptomi in rubrikami.

Najprej lahko vnesete analizirane simptome bolnika. Drugič, na te simptome se lahko vežejo rubrike repertoarja.

Modul za analizo lahko samodejno izravna rezultate analize glede na dejstvo, da so nekateri simptomi izraženi z malo rubrikami, medtem ko so drugi simptomi izraženi z velikim številom rubrik. Tako lahko svobodno izberete, koliko rubrik potrebujete za ustrezno izražanje bolnikovih simptomov v repertorijskih rubrikah, ne da bi pri tem porušili ravnovesje rezultatov analize!

Simptomi so jezik *Pacient* - *Rubrike* so jezik *Repertorij*.

Simptomi imajo še več prednosti. Ker so simptomi jezik bolnika, je simptomu enostavno dodeliti rang pomembnosti, ne da bi bilo treba izrecno manipulirati z rangom posameznih rubrik (imenujemo ju utež simptoma in utež rubrike, razložena sta drugje). Prednosti je še več, vendar se boste o njih prepirali sami.

Seveda je za hitro in preprosto analizo ustvarjanje Simptomov povezano z nekaterimi režijskimi stroški, ki jih morda ne želite. V tem primeru preprosto ne ustvarjajte Simptomov. Vse rubrike se nato samodejno uvrstijo pod "splošni simptom", ki vam ni viden.

Primer. Spodaj sta dva posnetka zaslona iz primera *Demo Andrew*, eden brez in drugi z uporabo Simptomov:

- 16 Mind; Activity; night
- 1 Mind; Activity; midnight, until
- 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
- 83 Mind; Activity; hyperactive
- 488 Mind; Cheerfulness
- 25 Mind; Noises; aversion to
- 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
- 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitiveness to
- 1 Mind; Theorizing; evening
- 2 Mind; Theorizing; night
- 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
- 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after
- 58 Sleep; Waking; noise, from
- 80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.
- 140 Generalities; Food and drinks; coffee; desires

- ▼ 523 Mental activity
 - 16 Mind; Activity; night
 - 1 Mind; Activity; midnight, until
 - 83 Mind; Activity; hyperactive
 - 488 Mind; Cheerfulness
 - 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
 - 1 Mind; Theorizing; evening
 - 2 Mind; Theorizing; night
- ▼ 83 Sensitive to noise
 - 25 Mind; Noises; aversion to
 - 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitiveness to
 - 58 Sleep; Waking; noise, from
- ▼ 60 Sleeplessness
 - 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 - 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
 - 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after
- ▼ 192 Generalities
 - 80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.
 - 140 Generalities; Food and drinks; coffee; desires

Varianta s Simptomi je veliko bolj jasna!

Ustvarjanje simptomov in dodajanje rubrik

Ko imate odprt primer in izbrano analizo, lahko analizi dodate nov simptom. (Možnost menija *Primer / Dodajte simptom, control-S*, možnost priročnega menija *Dodajte simptom*).

Če želite izbrisati simptom (in vse rubrike, vezane nanj), ga na seznamu izberite z miško ali tipkovnico, nato pa pritisnite tipko Delete. (Možnost menija *Primer / Izbriši izbrano*, možnost priročnega menija *Izbriši izbrano*).

Podrobnosti simptoma lahko urejate tako, da dvakrat kliknete nanj. (Možnost menija *Primer / Simptom urejanja*, možnost priročnega menija *Simptom urejanja*).

Rubrika se vedno doda iz modula *Book* ali *Find*. (Možnost menija *Primer / Dodajte rubriko, control-R*, možnost priročnega menija *Dodajte rubriko k analizi*). Izberite rubriko in pritisnite Enter. (Možnost menija *Primer / Dodajte rubriko, control-R*).

Rubrika se nato doda simptomu, ki je bil izbran kot "trenutni" simptom na seznamu simptomov.



V orodni vrstici na vrhu zaslona lahko vidite, za kateri simptom gre:

Mental activity

V orodni vrstici lahko preprosto izberete drug simptom, ki mu želite dodati rubriko. Če ni opredeljenih nobenih simptomov, se prikaže besedilo "Splošni simptomi".

Rubriko izbrišete iz analize tako, da jo izberete na seznamu in pritisnete tipko Delete. (Možnost menija *Primer / Izbriši izbrano*).

Organiziranje simptomov in rubrik

Spremeniti je mogoče vrstni red urejanja simbolov. Ko je simptom izbran, ga lahko premaknete. (Možnost menija *Navigacija po spletni strani / Premaknite se navzgor*, gumb orodne vrstice , možnost menija *Navigacija po spletni strani / Premaknite se navzdol*, gumb orodne vrstice ).

Simptome lahko samodejno razvrstite z nekaj možnostmi v priročnem meniju:

Demo case, Andrew
Analysis March 1, 2009, Simple classification example
 Analysis uses 14 rubrics in 5 symptoms.

▼ ○ 566 General
 540
 102
 ▼ ○ 173 Mental ch
 173
 ▼ ○ 411 Perspirat
 45
 404 Perspiration; Night
 ▼ ○ 92 Food & Drinks
 58 Generalities; Food and drinks; eggs; desires
 3 Generalities; Food and drinks; eggs; desires; hard boiled
 43 Generalities; Food and drinks; inedible things; desires
 ▼ ○ 555 Taken a cold
 36 Nose; Coryza; air; cold; agg.
 40 Nose; Damp, wet agg.
 10 Nose; Obstruction, stopped sensation; weather; cold, agg.
 548 Generalities; Cold taking, becoming
 51 Generalities; Cold taking, becoming; heated, after becoming
 11 Generalities; Cold taking, becoming; sitting on cold stones, steps

calc • sil puls merc sulph nat-m sep chin rhus-t tub ars calc

Sort symptoms alphabetically
 Sort symptoms on repertory order
 Sort symptoms by classification

Rubriko lahko premaknete na naslednji ali prejšnji simptom z enakimi možnostmi menija in gumbi orodne vrstice. Rubrike so znotraj simptoma vedno razvrščene glede na vrstni red v knjigi *Book*.

Rezultati


Rezultat analize

Ko analizi dodamo simptome in rubrike, je čas, da si ogledamo rezultate. Ti rezultati so prikazani na desni strani okna.

Rezultate analize si lahko ogledate na dva načina:
 - pregled več rezultatov, ki temeljijo na isti analizi.
 - podroben pregled posameznega rezultata analize.

Druge možnost je, da se analiza opravi za kraljestva in družine namesto za posamezna sredstva.

Prikaz rezultatov več analiz

Izberete lahko pregled več rezultatov. (Možnost menija *Analiza / Preprost seznam*, gumb orodne vrstice )
 Videti bo takole:

Eduard test	Standard	Small remedies	Small rubrics	Simple counting	Bönningh
coff •	coff •	coff •	coff •	coff •	coff •
nux-v	nux-v	bor	nux-v	nux-v	nux-v
lach	lach	sel	lach	chin	lach
calc •	chin	chin	chin	lach	calc •
con	sulph	kola	sulph	calc •	con
chin	acon	nux-v	con	bell •	chin
sulph	calc •	sia-c	calc •	ign	sulph
bell •	con	sul-ac	acon	sulph	puls
ars	bell •	con	bor	acon	ars
sel	sul-ac	ang	bell •	phos	bor
acon	bor	op	ars	bor	acon
bor	ars	ign	ign	con	sel
puls	sel	bamb-a	sul-ac	sul-ac	ang
ang	ign	tax	sel	agar	ign
ign	phos	lach	nat-m		sul-ac

Standardne metode analize

Standardni rezultati na tej sliki pomenijo naslednje:

<i>Standard</i>	To je standardni rezultat analize, ki temelji na skrbno izbranih parametrih.
<i>Majhna pravna sredstva</i>	To pomeni, da so manjša zdravila pomembnejša od večjih (polihrestih). S tem se izravna neenakomerna pojavnost zdravil v celotnem repertoarju. Polihrestih niso izpuščeni iz analize, le njihova prevlada je manjša.
<i>Majhne rubrike</i>	Pri tem so rubrike z malo sredstvi bolj pomembne kot rubrike z veliko sredstvi. Tako imajo bolj značilne rubrike večji vpliv na rezultat kot zelo pogoste rubrike.

<i>Bönninghausen</i>	Pri tej vrsti analize se sredstvo šteje na podlagi njegovega pojavljanja v sorodnih rubrikah v repertoarju. Bönninghausenova analiza se uporablja predvsem pri večjih in bolj splošnih rubrikah. Pomembnejši je tudi popravek za polarne rubrike. Za več informacij glejte <i>Analiza - Bönninghausen</i> .
<i>Enostavno štetje</i>	To je zelo preprosto štetje, kot so ga v starih časih izvajali s svinčnikom in papirjem. Za vse rubrike v analizi se stopnjevanje vseh pravnih sredstev preprosto sešteje.

Izbira uporabljenih metod analize

Morda vas ne zanimajo vse standardne metode analize, ki jih ponuja *Complete Dynamics*. Določite lahko, katere analize se bodo prikazale in v kakšnem vrstnem redu bodo prikazane. To lahko spremenite v nastavitvah *Preferences*. Za več informacij glejte razdelek *Prednastavitve*.

Podrobnosti o rezultatih analize

Ko si ogledate rezultat na zgornji sliki, boste opazili, da ni natisnjenih nobenih števil. Za vsakim zdravilom je prikazana le vrstica, ki prikazuje relativno pomembnost zdravila. Pravna sredstva so razvrščena po pomembnosti. Čim krajša je barvna vrstica, tem manj pomembno je zdravilo pri danem rezultatu.

Če se z miško premaknete nad ime zdravila, se v spodnjem delu okna v območju za sporočila prikažejo podrobnejše informacije. Če se z miško premaknete na primer nad *chin*, se prikaže območje za sporočila:

4: chin = China officinalis. Relative score 45, from 8 rubrics in 3 symptoms

To pomeni, da je to vnos številka 4, *chin* pomeni zdravilo *China officinalis*, da je njegov relativni pomen 45 % v primerjavi z najvišjim zdravilom (*coff*) in da se zdravilo pojavlja v 8 od prešteti rubrik pri 3 simptomih. Upoštevajte, da je za rezultat analize "Enostavno štetje" relativna ocena vsota ocen za dano pravno sredstvo. V vseh drugih rezultatih analize ima najvišje sredstvo relativno vrednost 100, vse druge vrednosti pa so relativne glede na to najvišjo vrednost.

Če želite, da so v rezultatu prikazane številke, lahko pritisnete gumb v orodni vrstici. (Možnost menija *Analiza / Prikaži številke*, gumb orodne vrstice **1**).

Rezultat bo videti takole:

Eduard test	Standard	Small reme
coff • 100 / 12 / 3	coff • 100 / 12 / 3	coff •
nux-v 95 / 10 / 4	nux-v 75 / 10 / 4	bor
lach 69 / 8 / 4	lach 46 / 8 / 4	sel
calc • 57 / 6 / 3	chin 39 / 9 / 4	chin
con 56 / 5 / 3	sulph 36 / 6 / 4	kola
chin 55 / 9 / 4	acon 30 / 5 / 4	nux-v
sulph 53 / 6 / 4	calc • 30 / 6 / 3	sia-c
bell • 51 / 6 / 3	con 30 / 5 / 3	sul-ac
ars 49 / 7 / 3	bell • 29 / 6 / 3	con
sel 47 / 5 / 4	sul-ac 29 / 5 / 4	ang
acon 47 / 5 / 4	bor 28 / 6 / 4	op
bor 45 / 6 / 4	ars 28 / 7 / 3	ign
puls 45 / 4 / 3	sel 27 / 5 / 4	bamb-a
ang 43 / 5 / 4	ign 26 / 6 / 3	tax
ign 42 / 6 / 3	phos 24 / 6 / 4	lach
sul-ac 42 / 5 / 4	op 22 / 5 / 3	ars
op 40 / 5 / 3	nat-m 22 / 5 / 4	ant-c
nat-m 37 / 5 / 4	agar 20 / 5 / 3	mez
phos 36 / 6 / 4	puls 20 / 4 / 3	canth

V nekaterih primerih morda ne boste želeli razvrstiti rezultatov po pomembnosti, temveč glede na število simptomov in rubrik, v katerih se zdravilo pojavlja.

Nato lahko pritisnete gumb v orodni vrstici **!**, kar pomeni "Razvrsti analizo po številu simptomov/rubrik". (Možnost menija *Analiza / Razvrsti po številu*, gumb orodne vrstice **!**).

Že predpisana zdravila

Pogosto je priročno hitro prepoznati, katera zdravila so bila bolniku že predpisana. Vsa zdravila, ki so bila predhodno predpisana, so za imenom označena s piko.

Iskanje povezave med rubrikami in pravnimi sredstvi

S klikom na rubriko ali sredstvo v rezultatu lahko hitro preverite povezavo med rubrikami in sredstvi. Nato so poudarjena ustrezna pravna sredstva ali rubrike.

Primer: Ob kliku na rubriko *Um; občutljiv, preobčutljiv; hrup, na; boleča občutljivost na se* v območju rezultatov prikaže naslednje:

Life Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort

Eduard test	Standard	Small remedies	Small rubrics
coff •		coff •	coff •
nux-v		bor	nux-v
lach		sel	lach
calc •		chin	chin
con		kola	sulph
chin		nux-v	con
sulph		sia-c	calc •
bell •		sul-ac	acon
ars		con	bor
sel		ang	bell •
acon		op	ars
bor		ign	ign
puls		bamb-a	sul-ac
ang		tax	sel
ign		lach	nat-m
sul-ac		ars	phos
op		ant-c	op
nat-m		mez	puls
phos		canth	liv

V trenutku vidite, katera sredstva so v tej rubriki!


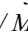
Primer: Klik na zdravilo *sulph* prikaže naslednji pregled simptomov in rubrik:

▼	523	Mental activity
16		Mind; Activity; night
1		Mind; Activity; midnight, until
83		Mind; Activity; hyperactive
488		Mind; Cheerfulness
32		Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
1		Mind; Theorizing; evening
2		Mind; Theorizing; night
▼	83	Sensitive to noise
25		Mind; Noises; aversion to
15		Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitiveness to
58		Sleep; Waking; noise, from
▼	60	Sleeplessness
9		Mind; Activity; sleeplessness, with
51		Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
5		Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after
▼	192	Generalities
80		Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.
140		Generalities; Food and drinks; coffee; desires


In v preblisku si oglejte, v katerih rubrikah se pojavlja *sulph*. Poleg tega je izbrano zdravilo poudarjeno tudi v rezultatih drugih analiz, tako da takoj vidite relativno razvrstitev v različnih analizah.

Doslej za pregled več analiz. Oglejmo si podroben pregled posameznega rezultata analize...


Prikaz podrobnega pregleda posameznega rezultata analize

Podrobnejši pregled posamezne analize lahko po želji prikažete v pogledu tabele ali v pogledu mreže. (Možnost menija *Analiza / Tabela*, gumb orodne vrstice , možnost menija *Analiza / Mreža*, gumb orodne vrstice .

Pogled tabele je videti takole:

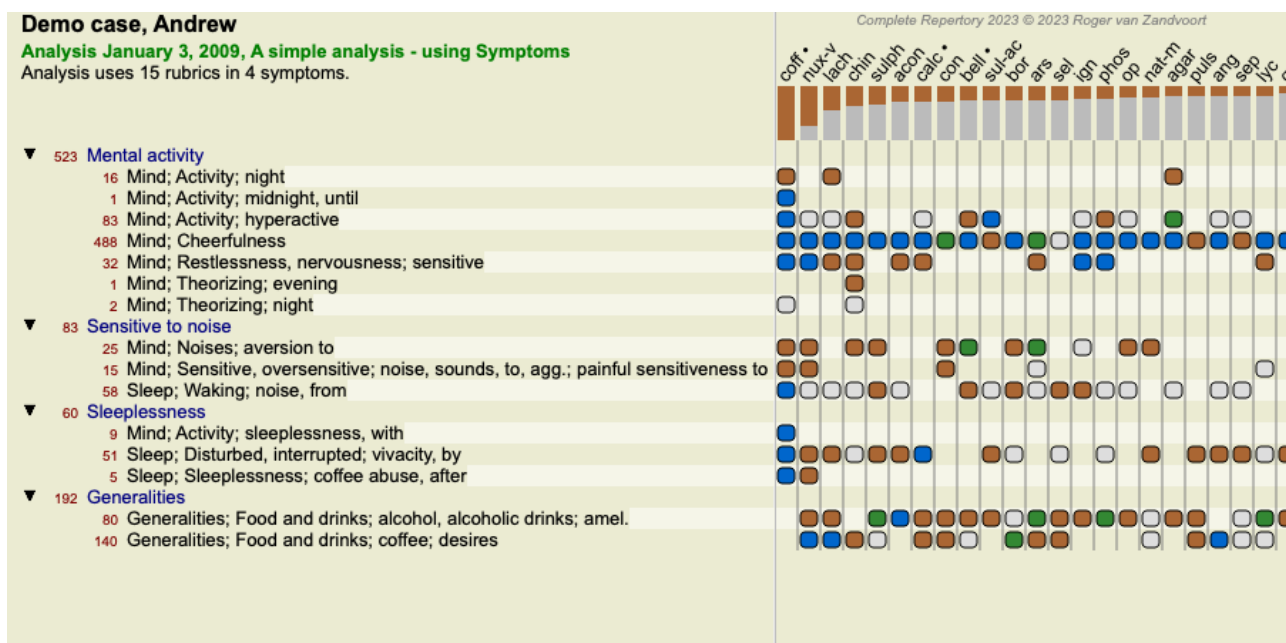

Pogled Mreža je videti takole:

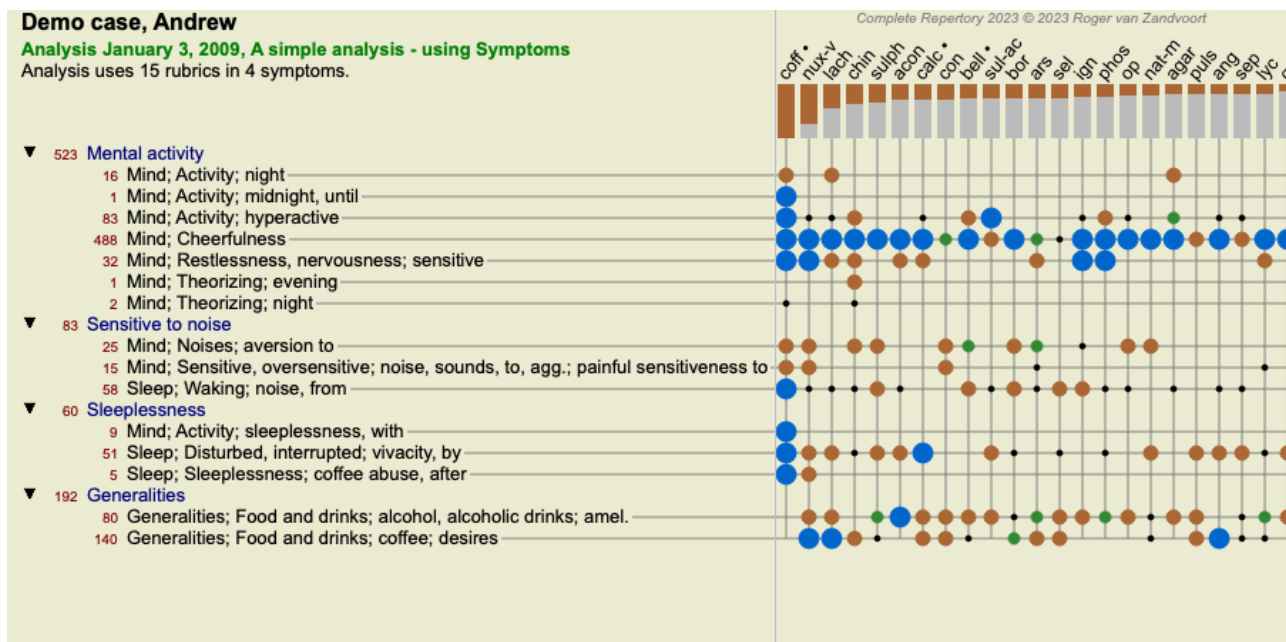

Na ta način boste v eni sliki videli povezavo med rubrikami in sredstvi. Seveda je to mogoče narediti le za eno analizo. Pod rasterjem je prikazano izbirno polje, v katerem lahko preklapljate med razpoložljivimi rezultati analize.

Bloki ali pike označujejo, da se sredstvo pojavlja v rubriki:

- Razred 1
- Razred 2
- Razred 3
- Razred 4

Če se z miško premaknete nad točko, se prikažejo podrobne informacije o pravnem sredstvu v tej rubriki, vključno z informacijami o avtorju. Informacije so ponovno prikazane v spodnjem delu območja za sporočila. Če se z miško premaknete nad modro kroglico na križišču *coff* in *Mind; cheerfulness*, se prikažejo naslednje informacije:

coff = Coffea cruda (Bönninghausen, Gallavardin, Hering, Jahr, Knerr, Lippe, Vithoulkas)

Če želite več podrobnosti, dvakrat kliknite na kroglico, da dobite popolne informacije o sredstvu:

Rubric: MIND; CHEERFULNESS.

Remedy abbreviation: coff, grade 4. Rank 20 out of 488 in rubric.

Standard name: Coffea cruda.

English name: Coffea cruda.

Taxonomy: kingdom *Plantae*, sub kingdom *Viridiplantae*, infra kingdom *Streptophyta*, super division *Embryophyta*, division *Tracheophyta*, sub division *Spermatophytina*, class *Magnoliopsida*, super order *Asteranae*, order *Gentianales*, family *Rubiaceae*, genus *Coffea*, species *Coffea arabica*.

APG II taxonomy: angiosperms, eudicots, core eudicots, asterids, euasterids I, Gentianales, Rubiaceae.

Occurrences in related rubrics: 5, **average grade:** 2.2.
(similar rubrics: 0, sub rubrics: 5, sections: 1).

Sources.

Bönninghausen C M von *Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht-antipsorischen Arzneien with handwritten annotations*, 1833.

Gallavardin J P *Repertory of psychic medicines with Materia Medica*, 1897.

Hering C *Analytical Repertory of Symptoms of Mind*, 1881.

Hering C *Guiding Symptoms of our Materia Medica*, 1879.

Jahr G H G *Handbuch der Haupt-Anzeigen für die richtige Wahl der homöopathischen Heilmittel*, Herrmann Bethmann, 1851.

Jahr G H G *Systematisch-alphabetisches Repertorium der homöopathischen Arzneimittellehre*,

[Close](#)

Z miško se lahko pomaknete nad ime zdravila na vrhu območja z rezultati, da si ogledate več informacij, tako kot v pregledu več rezultatov, ki je bil prikazan prej. Prav tako lahko rubrike ali sredstva označite s klikom nanje:

Demo case, Andrew
Analysis January 3, 2009, A simple analysis - using Symptoms
 Analysis uses 15 rubrics in 4 symptoms.

Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort

	coff	nux-v	lach	chin	sulph	acon	calc	con	bell	sul-ac	bor	ars	sel	ign	phos	op	nat-m	agar	puls	ang	sep	lyc	
523 Mental activity																							
16 Mind; Activity; night																							
1 Mind; Activity; midnight, until																							
83 Mind; Activity; hyperactive																							
488 Mind; Cheerfulness																							
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive																							
1 Mind; Theorizing; evening																							
2 Mind; Theorizing; night																							
83 Sensitive to noise																							
25 Mind; Noises; aversion to																							
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitiveness to																							
58 Sleep; Waking; noise, from																							
60 Sleeplessness																							
9 Mind; Activity; sleeplessness, with																							
51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by																							
5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after																							
192 Generalities																							
80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.																							
140 Generalities; Food and drinks; coffee; desires																							

Za prikaz števil ali spremembo vrstnega reda razvrščanja lahko seveda uporabite gumba orodne vrstice **1** in **!**.

Iskanje pravnega sredstva v rezultatih analize

V nekaterih primerih ne želite videti le najboljših rezultatov analize, temveč želite natančno vedeti, kje v teh rezultatih se nahaja določeno zdravilo.


Vse, kar morate storiti, je, da v polje *Locate remedy* pod rezultati analize vnesete kratico zdravila.

Analiza po potrebi ponovno izriše rezultate in preskoči del rezultatov, da se zagotovi prikaz vašega zdravila.

Sredstvo, ki ga iščete, je samodejno označeno, da je bolj vidno.

Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort

Eduard test	Standard	Small remedies	Small rubrics
coff •	coff •	coff •	coff •
nux-v	nux-v	bor	nux-v
lach	lach	sel	lach
calc •	chin	chin	chin
con	sulph	kola	sulph
chin	acon	nux-v	con
sulph	calc •	sia-c	calc •
bell •	con	sul-ac	acon
ars	bell •	con	bor
sel	sul-ac	ang	bell •
acon	bor	op	ars
bor	ars	ign	ign
puls	sel	bamb-a	sul-ac
ang	ign	tax	sel
ign	phos	lach	nat-m
sul-ac	op	ars	phos
op	nat-m	ant-c	op
nat-m	agar	mez	puls
phos	puls	canth	lyc
agar	ang	apis	agar
lyc	sep	cham	ang
... +34 +42 +29 +47 ...
chel	chel	chel	chel
hep	rhus-t	cygn-c	cypr
cham	kreos	aur	teucr
brachy-s	bamb-a	calc •	kali-bi
ferr	ran-s	hyos	prun
carb-ac	tarent	cocc	tarent
ther	mosch	ven-m	onc-t
cur	sang	onc-t	agav-t
leon	cypr	sang	leon
kreos	teucr	caps	nat-p
arn •	prun	crat	brom
tarent	kali-bi	am-c	crat
thea	nat-p	staph	cygn-c

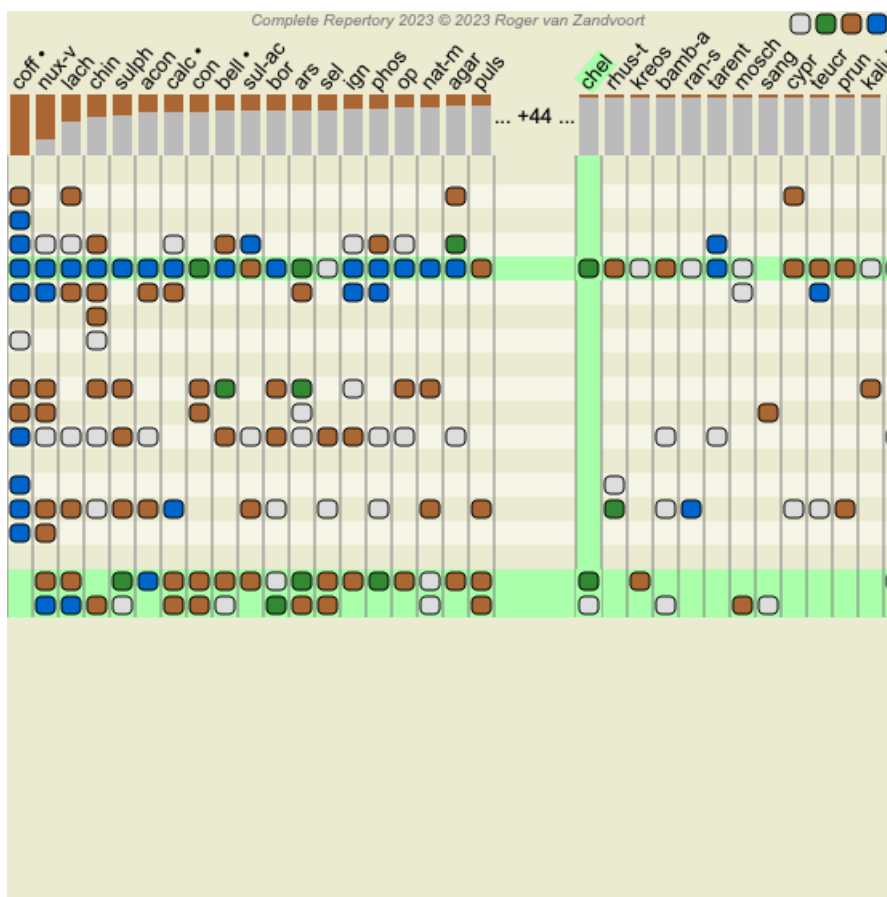

Namesto da zdravilo vnesete v polje *Locate remedy*, lahko tudi kliknete na graf rezultatov in ga preprosto vnesete. Če v tem primeru pritisnete tipko Escape, se izbira izbriše.

Analiza kraljestev in družin

Izberete lahko pogled analize za kraljestva in družine. (Možnost menija *Analiza / Kraljestva in družine*, gumb orodne vrstice 🌟).

Naslednji primer prikazuje primer, v katerem je bilo izbrano zdravilo Stramonium.

The screenshot displays the 'Complete Dynamics' software interface. On the left, a 'Demo case, Andrew' is shown with an analysis from September 1, 2015, based on 14 rubrics. A list of remedies is provided, including 'Mind; Company; desire for', 'Mind; Lamenting, bemoaning, wailing; night', 'Mind; Light; desire for', 'Mind; Light; desire for; sunshine; society, mankind, and', 'Mind; Shrieking, screaming, shouting', 'Mind; Shrieking, screaming, shouting; pain, during', 'Mind; Weeping, tearful mood; night', 'Extremities; Motion, motions; lost or diminished power of', 'Sleep; Sleeplessness; night', 'Sleep; Sleeplessness; total', 'Generalities; Pain; night; agg.', 'Generalities; Paralysis; hysterical', 'Generalities; Stiffness, rigidity', and 'Generalities; Stiffness, rigidity; consciousness, with'.


The main area features a taxonomic tree. The 'Taxonomy' branch includes 'Animalia' (Chordata: Mammalia, Carnivora, Reptilia, Squamata, Viperidae; Mollusca) and 'Plantae' (Magnoliopsida: Asterales, Asteraceae, Gentianales, Loganiaceae, Ranunculales, Ranunculaceae, Sapindales, Anacardiaceae; Solanales, Solanaceae). Other branches include 'Animals' (Molluscs, Spiders, Hunting spiders), 'Elements' (Arsenicums, Carbonicums, Nitrogens, Phosphoruses, Pure elements, Sulphurs), 'Metalloids', 'Non metals', and 'Periodic table' (Silicon series, Stage 10).

At the bottom, a search bar allows jumping to 'mind cheerful' or 'mind; cheerfulness', with a 'Find' button and a 'Clear' button.


Pri analizi družin so pomembnejše družine večje od manj pomembnih družin. Družine, ki se zdijo zelo nepomembne, sploh niso narisane.

Primerjava družin

V primeru vidite, da sta najpomembnejši družini Solanaceae in Loganiaceae. Solanaceae so očitne, saj je Stramonium član Solanaceae. Verjetno pa bi radi vedeli, zakaj se tudi Loganiaceae štejejo za pomembne. Dvakrat kliknite na Solanaceae in Loganiaceae. Za vsako družino so zdaj prikazane dodatne informacije v obliki rezultatov več analiz. Prvi seznam analiz je splošna analiza za vsa zdravila.

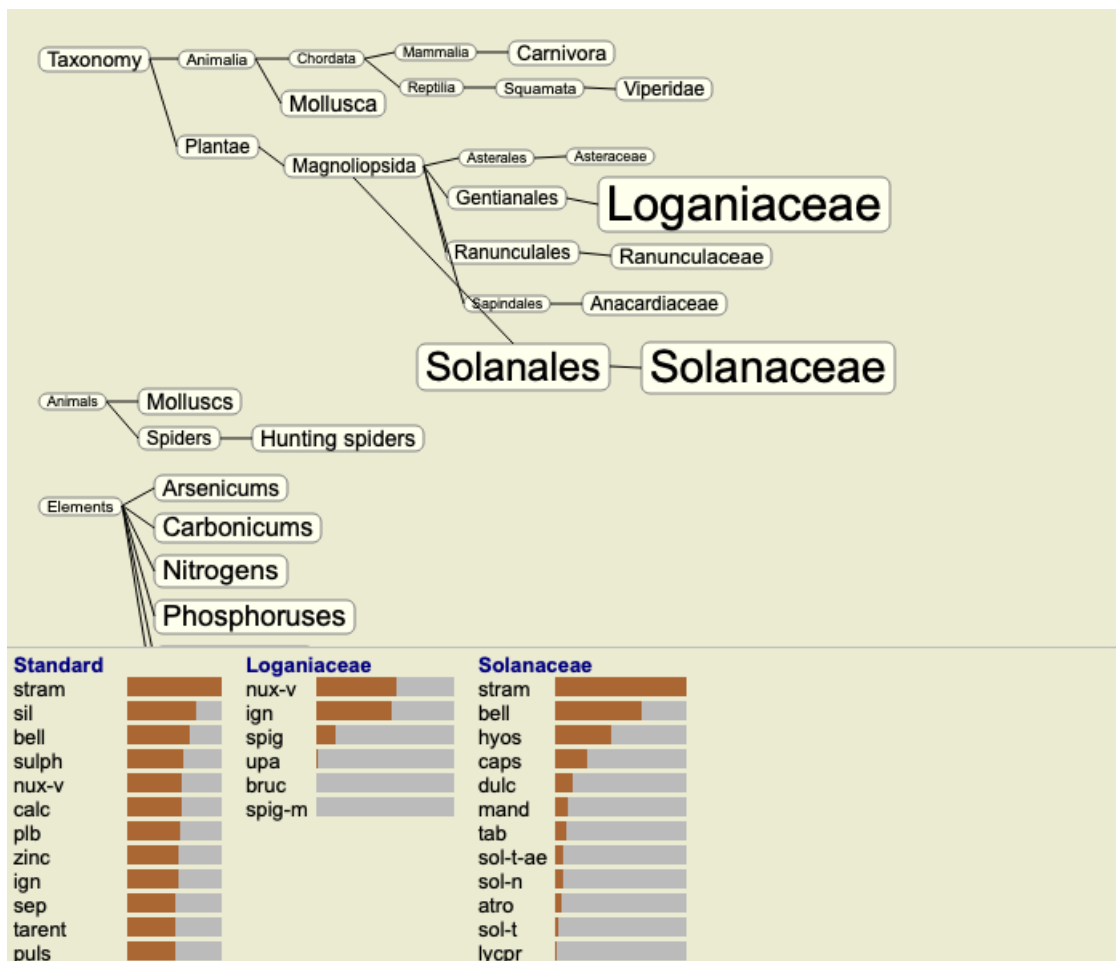

Ko dvakrat kliknete na družino v grafu, se ta postavi na levo stran dodanih družin. Če bi zdaj znova kliknili na Solanaceae, bi se uvrstili med Standard in Loganiaceae.

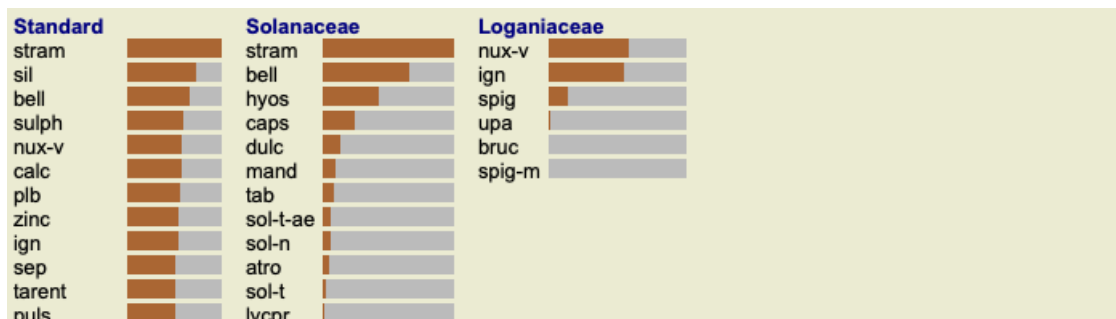


Te dodatne informacije lahko kadar koli prikažete ali skrijete. (Gumb orodne vrstice).


Prikaz odnosa med družinami in pravnimi sredstvi.

Pri preučevanju pomena družin v analizi morate biti sposobni videti odnose med družinami in pravnimi sredstvi.

Kliknite na družino v grafu, da si ogledate, kako so njena zdravila ocenjena v analizi. Opazili boste, da so v družinskem grafikonu označene tudi ustrezne družine. Tako lahko hitro preverite, kako so družine povezane.

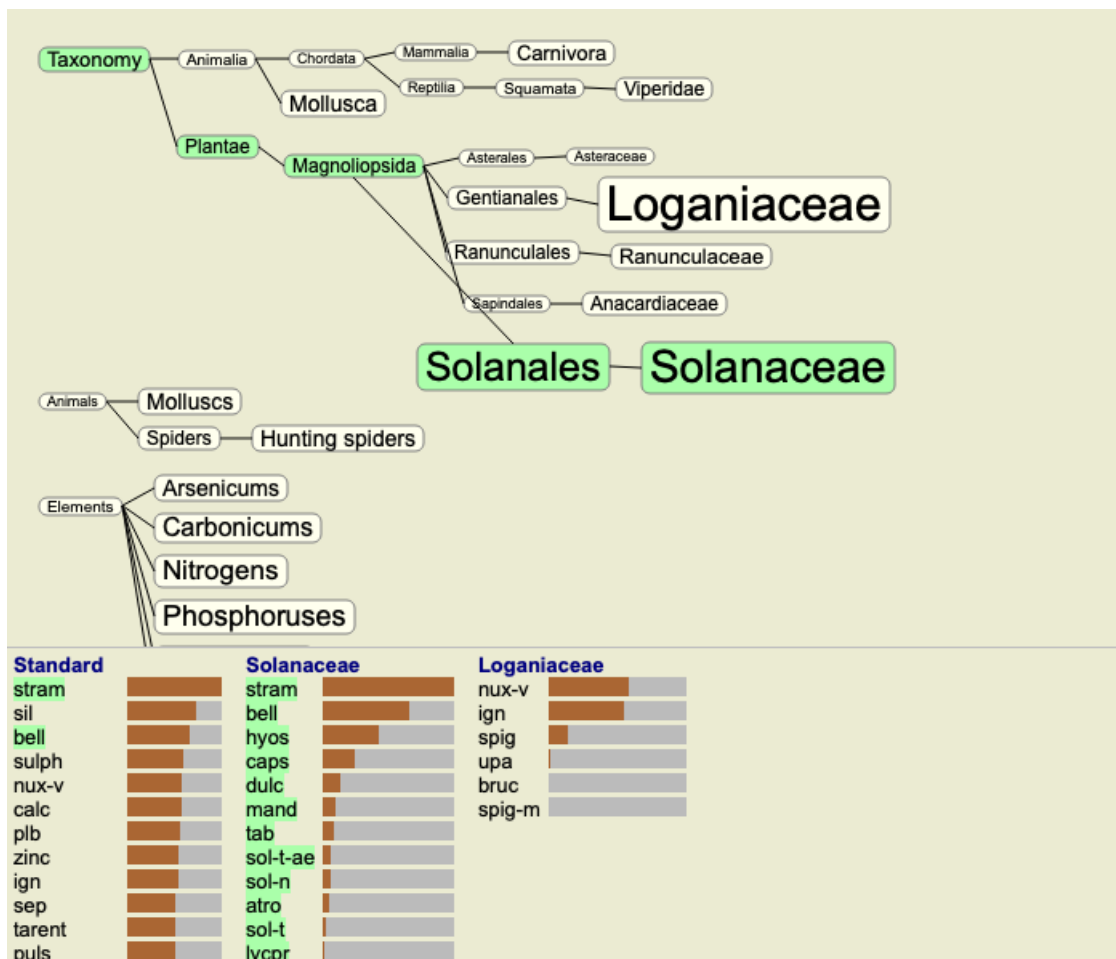

Če kliknete na ime zdravila, bo to zdravilo označeno v različnih analizah. Prav tako so v grafu označene vse družine, ki vsebujejo to zdravilo.

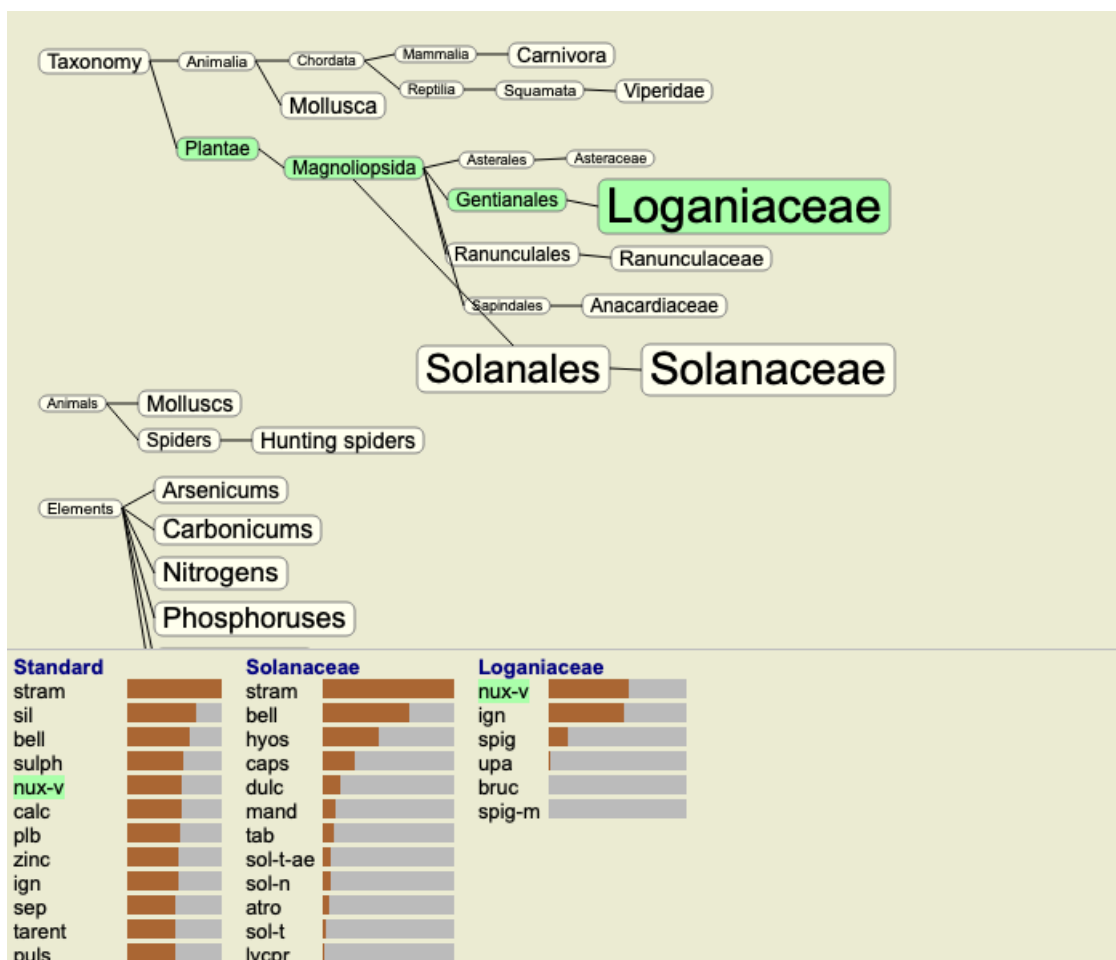


Filtriranje rezultatov analize

Filtriranje rezultatov glede na družino pravnih sredstev


Običajno so v rezultatih analize prikazana vsa pravna sredstva.

Rezultate lahko omejite samo na zdravila, ki so del določenega kraljestva, družine ali druge skupine.

To storite tako, da izberete s spustnega seznama v orodni vrstici:

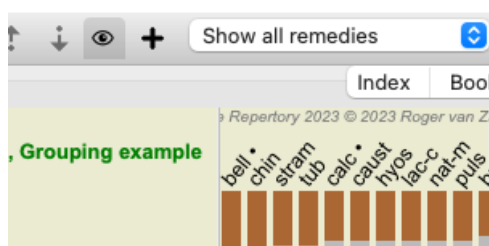

Številne pogosto uporabljene skupine so vnaprej določene (minerali, rastline, živali, nosode). Če želite izbrati drugo skupino, preprosto izberite možnost *Other...* in prikazalo se bo pogovorno okno, v katerem lahko izberete eno od skupin v razdelku *Kingdoms & Families*.

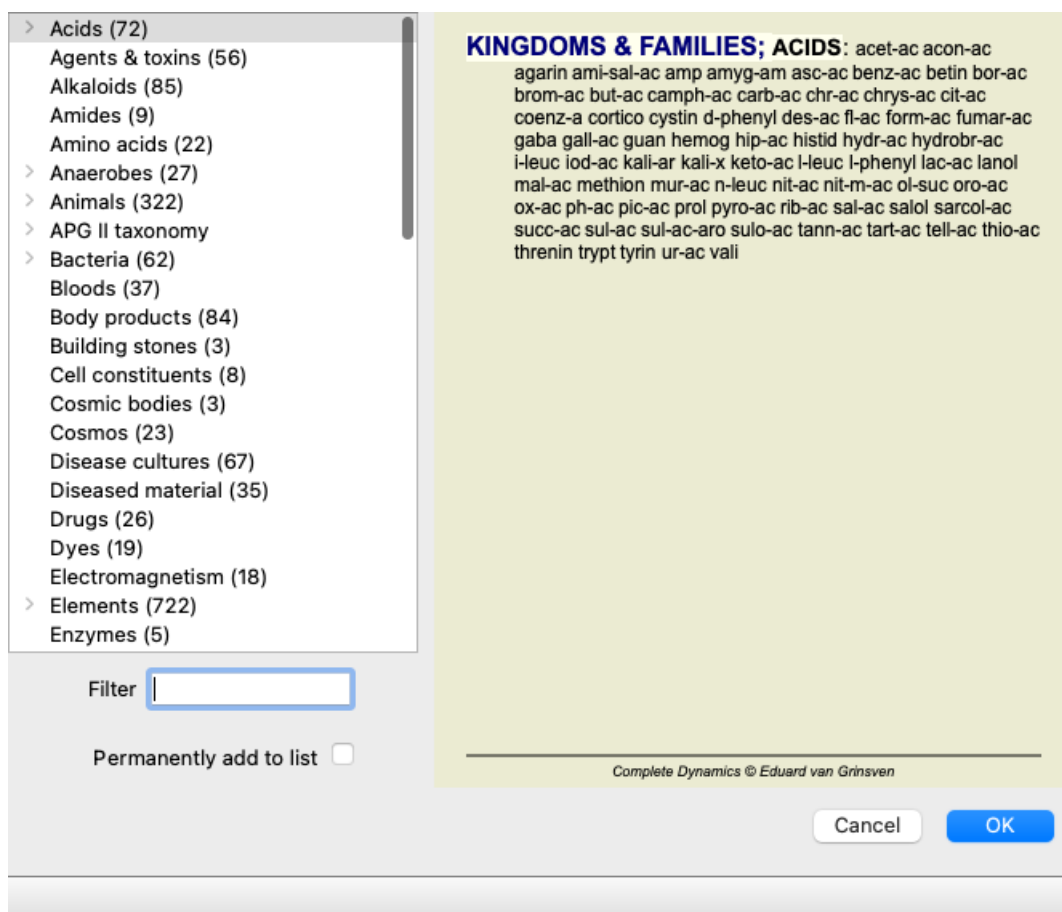

Če potrdite možnost *Trajno dodaj na seznam*, bo izbrana skupina trajno dodana standardnim skupinam na seznamu. Ob naslednjem zagonu programa bo ta skupina še vedno na seznamu. Če jo želite pozneje odstraniti, ponovno izberite isto skupino prek možnosti *Other...* in odpravite izbiro te možnosti.

Analizni modul, ki temelji na rubriki filter

Modul za analizo ponuja zmogljiv mehanizem filtriranja na podlagi pravnih sredstev v rubrikah.

S tem filtrom je mogoče preprosto omejiti pravna sredstva v analizi na pravna sredstva, ki se pojavljajo v določeni rubriki ("izločitev") ali kombinaciji rubrik.

Filter se konfigurira s številnimi možnostmi v menijski vrstici (*Menu / Analysis / Filter*) ali v priročnem meniju.

Na voljo so naslednje možnosti:

- Prikaži vsa zdravila. (Možnost menija *Analiza / Filter / Prikaži vsa zdravila, premik-control-C*).
Filter je onemogočen. Vsa sredstva so prikazana kot običajno.
- V rubriki nastavite na sredstva za odpravo pomanjkljivosti. (Možnost menija *Analiza / Filter / V rubriki nastavite na sredstva za odpravo napak, premik-control-S*).
Filter je nastavljen na sredstva, ki se pojavljajo v izbrani rubriki. Pravna sredstva, ki niso v rubriki, se izločijo ("eliminacija"). To možnost lahko uporabite samo, če je izbrana ena rubrika.
- Omejite se na pravna sredstva v rubriki. (Možnost menija *Analiza / Filter / Omejitev na sredstva v rubriki, premik-control-R*).
Izbrane rubrike se uporabijo za omejitev filtra. Pravna sredstva, ki niso vključena v nobeno od izbranih rubrik, se filtrirajo. Ta možnost dodatno omejuje že aktivni filter.

To možnost lahko uporabite, če je izbrana vsaj ena rubrika.

- Razširite s pravnimi sredstvi v rubriki. (Možnost menija *Analiza / Filter / Razširite s pravnimi sredstvi v rubriki, premik-control-E*).

Prikazana bodo vsa pravna sredstva, ki se pojavljajo v kateri koli od izbranih rubrik. Ta možnost razširi filter s pravnimi sredstvi, ki se pojavljajo v izbranih rubrikah, vendar so bila prej izločena.

To možnost lahko uporabite, če je izbrana vsaj ena rubrika.

- Nastavite na križanje rubrik. (Možnost menija *Analiza / Filter / Nastavljeno na križanje rubrik*).

To je priročna možnost za hitro nastavitev filtra na sredstva, ki se pojavljajo v vseh izbranih rubrikah.

To možnost lahko uporabite le, če sta izbrana vsaj 2 rubriki.

- Nastavite na kombinacijo rubrik. (Možnost menija *Analiza / Filter / Nastavitev na kombinacijo rubrik*).

To je priročna možnost za hitro nastavitev filtra na sredstva, ki se pojavljajo v kateri koli od izbranih rubrik.

To možnost lahko uporabite le, če sta izbrana vsaj 2 rubriki.

Filter običajno najprej nastavite na določeno rubriko, saj pričakujete, da se bo vaše zdravilo pojavilo v tej rubriki. Nato filter natančno prilagodite s *omejite* ("naj bo prisoten tudi tukaj, pokaži mi manj") ali *razširite* ("pravzaprav je v redu, če je tudi tukaj, pokaži mi več") filter.

Filtriranje družin

Filtriranje v grafu Analiza družin

V grafu za analizo družin lahko hitro spremenite filter za zdravila glede na družine. Možnosti filtriranja so na voljo v priročnem meniju družine. Možnosti so enake, kot so opisane zgoraj za filter, ki temelji na rubrikah.

Z uporabo teh možnosti filtriranja spremenite filter pravnih sredstev v drugih rezultatih analize. Sam graf družinske analize ni nikoli filtriran, saj ni sestavljen iz pravnih sredstev, temveč iz družin.

Filtriranje v drugih pogledih analize

Rezultate analize lahko preprosto filtrirate glede na katero koli družino, katere del je katero koli zdravilo. Družinski filter je na voljo v priročnem meniju sredstva.

Čarovnik za postavitev

S čarovnikom za postavitev analize lahko na rezultat analize s pritiskom na en sam gumb prenesete nekatere svoje nastavitve. (Možnost menija *Analiza / Čarovnik za postavitev, F2*, gumb orodne vrstice .

Te nastavitve lahko preprosto konfigurirate. (Možnost menija *Analiza / Konfiguracija čarovnika za postavitev, premik-F2*).

Napredne teme

Natančna prilagoditev analize

Zdaj, ko ste se seznanili z osnovami oblikovanja analize in interpretacije rezultatov, je čas za nekaj naprednih tem, ki vam omogočajo natančno prilagoditev analize v skladu z vašo interpretacijo bolnikovih informacij.

Obravnavali bomo naslednje teme:

- Uporaba uteži.
- Uravnoteženje simptomov.
- Polarne rubrike in kontra indikacije.
- Rubrične skupine.
- Pregled rubrik.
- Rezultate filtrirajte glede na družine pravnih sredstev.

Številne akcije lahko izvedete za več izbranih vrstic hkrati.

Uporaba uteži

Vsakemu simptomu in vsakemu rubriku lahko dodelite določeno utež. Tako kot pripisujete določeno pomembnost simptomom pacienta ali tako kot se zdravilo v repertoriju lahko pojavi z različnimi ocenami, lahko pripisujete določeno pomembnost vsakemu od simptomov in rubrik.

Z dodelitvijo višje vrednosti je simptom ali rubrika v rezultatu analize pomembnejša.

Z dodelitvijo uteži 0 je simptom ali rubrika popolnoma izključena iz analize.

Če želite nastaviti utež, najprej izberite simptom ali rubriko tako, da jo kliknete z miško.

Težo lahko nastavite na več načinov:

- tipka 0 (Možnost menija *Primer / Teža / Ignoriraj*, gumb orodne vrstice ***0**).
- ključ 1 (Možnost menija *Primer / Teža / Normalna teža*, gumb orodne vrstice ***1**).
- ključ 2 (Možnost menija *Primer / Teža / Teža x2*, gumb orodne vrstice ***2**).
- ključ 3 (Možnost menija *Primer / Teža / Teža x3*, gumb orodne vrstice ***3**).
- ključ 4 (Možnost menija *Primer / Teža / Teža x4*, gumb orodne vrstice ***4**).

Naslednji primer prikazuje analizo, v kateri so določene uteži (samo za prikaz)

Demo case, Andrew
Analysis January 4, 2009, An example of symptom and rubric weight
Analysis uses 10 rubrics in 3 symptoms.

- 523 Mental activity**
 - 16 Mind; Activity; night
 - 1 Mind; Activity; midnight, until
 - 83 Mind; Activity; hyperactive
 - 488 Mind; Cheerfulness
 - 2 32 **Mind; Restlessness, nervousness; sensitive**
 - X 1 Mind; Theorizing; evening
 - X 2 Mind; Theorizing; night
- 3 83 Sensitive to noise**
 - 25 Mind; Noises; aversion to
 - 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.,
 - 3 58 **Sleep; Waking; noise, from**
- X 60 Sleeplessness**
 - 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 - 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
 - 2 5 **Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after**
- 192 Generalities**
 - 80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks
 - 2 140 **Generalities; Food and drinks; coffee; desires**

Na levi strani so prikazani gumbi orodne vrstice. Gumbi v orodni vrstici vedno prikazujejo dejansko vrednost teže izbranega simptoma ali rubrike.



Znak X pred simptomom ali rubriko označuje utež 0 in je izključen iz analize.

Uravnoteženje simptomov

Izravnava simptomov je napreden mehanizem analize, ki izravnava uporabo več/manj rubrik v simptomu. Ko je izravnava vklopljena (kar je običajno), lahko pod simptom postavite poljubno število rubrik, ne da bi pri tem motili analizo.

Pri tradicionalnih analizah bi morali v analizi skrbno izbirati rubrike, saj bi v primeru uporabe prevelikega števila rubrik za izražanje določenega simptoma v analizi začela prevladovati zdravila, ki bi ustrezala temu enemu samemu simptomu. Prav tako, če bi uporabili samo eno rubriko, sredstva iz te rubrike ne bi v zadostni meri prispevala k splošni analizi v primerjavi z rubrikami, uporabljenimi za druge simptome.

Če je vklopljena funkcija Uravnoteženje simptomov, se vsak simptom šteje z utežjo (glejte *Uporaba uteži* zgoraj), ki mu je dodeljena, ne glede na to, ali pod njega postavite en Rubriko ali, recimo, 10 Rubrik.

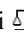Simptom uravnoteženja vklopite/izklopite z gumbom v orodni vrstici , ki se nahaja na desni strani okna. (Možnost menija *Analiza / Simptomi ravnotežja*, gumb orodne vrstice ).

Oglejmo si primer. V naslednji analizi so za izražanje bolečin v glavi uporabljene številne rubrike. Če ne uporabljamo uravnoteženja, v rezultatih prevladuje *Glonoinum*, medtem ko z uravnoteženjem *Natrum Muriaticum* postane bolj opazen.

Demo case, Andrew
Analiza February 1, 2009, Symptoms with many or few rubrics.
Analiza uporablja 13 rubrike v 4 simptomih.

- 954 Head pains**
 - 14 Head; Pain, headache; morning; agg.; six am.
 - 160 Head; Pain, headache; extending to; backward
 - 188 Head; Pain, headache; extending to; occiput
 - 110 Head; Pain, headache; extending to; temples
 - 119 Head; Pain, headache; extending to; upward
 - 944 Head; Pain, headache; forehead
 - 57 Head; Pain, headache; forehead; air; open; agg.
 - 48 Head; Pain, headache; forehead; eyes; above; morning
 - 14 Head; Pain, headache; bursting; menses; during
- 84 Sadness**
 - 84 Mind; Sadness, depression; menses; before
- 163 Menses**
 - 127 Female; Menses; pale, watery
 - 105 Female; Menses; thin, liquid
- 173 Aversions and desires**
 - 173 Generalities; Food and drinks; salt or salty food; desires

Rezultat analize:

Brez uravnoteženja

Z uravnoteženjem

Standard			Ma	Standard			Ma
glon	100 / 9		glo	nat-m	100 / 9 / 4		sa
sep	94 / 12		hel	lyc	93 / 11 / 4		kal
lach	91 / 11		cin	calc •	78 / 10 / 4		gin
bell •	87 / 10		trit	sep	78 / 12 / 4		cy
lyc	81 / 11		gin	puls	77 / 8 / 4		nat
nat-m	78 / 9		kal	nit-ac	74 / 9 / 4		ari
calc •	76 / 10		sa	carb-v	68 / 8 / 4		co
nux-v	74 / 9		pla	caust	63 / 9 / 4		tut
phos	66 / 10		spi	phos	63 / 10 / 4		nat
caust	66 / 9		sa	lach	55 / 11 / 4		sa
thuj	61 / 9		kal	bell •	53 / 10 / 3		ma
bry	60 / 9		co	ferr	52 / 8 / 3		hel
cimic	59 / 8		alu	con	52 / 8 / 4		lan
puls	57 / 8		lac	verat	44 / 4 / 4		lac

Opomba: Simptomi uravnoteženja ne vplivajo na osnovno analizo *Enostavno štetje*.

Polarne rubrike in kontra indikacije

Polarni rubriki sta dve rubriki, ki imata nasprotni pomen.

Kot primer si oglejmo preprost primer, v katerem je bilo sprva predpisano zdravilo *coff*:

Demo case, Andrew		Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort															
Analysis January 3, 2009, A simple analysis - using Symptoms																	
Analysis uses 15 rubrics in 4 symptoms.																	
▼ 523 Mental activity		coff •	nux-v	lach	chin	sulph	acon	calc •	con	bell •	sul-ac	bor	ars	sel	ign	phos	nat-m
16 Mind; Activity; night																	
1 Mind; Activity; midnight, until																	
83 Mind; Activity; hyperactive																	
488 Mind; Cheerfulness																	
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive																	
1 Mind; Theorizing; evening																	
2 Mind; Theorizing; night																	
▼ 83 Sensitive to noise		coff •	nux-v	lach	chin	sulph	acon	calc •	con	bell •	sul-ac	bor	ars	sel	ign	phos	nat-m
25 Mind; Noises; aversion to																	
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitiv																	
58 Sleep; Waking; noise, from																	
▼ 60 Sleeplessness		coff •	nux-v	lach	chin	sulph	acon	calc •	con	bell •	sul-ac	bor	ars	sel	ign	phos	nat-m
9 Mind; Activity; sleeplessness, with																	
51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by																	
5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after																	
▼ 192 Generalities		coff •	nux-v	lach	chin	sulph	acon	calc •	con	bell •	sul-ac	bor	ars	sel	ign	phos	nat-m
80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.																	
140 Generalities; Food and drinks; coffee; desires																	

V razdelku *Generalities (Splošnosti)* sta prikazani dve rubriki, ki imata obe polarno rubriko:

- *amel* - agg.

- želje - averzija.

Te polarne rubrike je mogoče uporabiti pri analizi s pritiskom na gumb v orodni vrstici ↔ na desni strani okna. (Možnost menija *Analiza / Polarne rubrike*, gumb orodne vrstice ↔).

Zdaj sta pod rubriko *amel* in *želi* prikazana njuna polarna rubrika.

Spremeni se tudi rezultat analize, saj so vrednosti pravnih sredstev zdaj popravljene z vrednostmi v polarnih rubrikah.

Demo case, Andrew		Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort																	
Analysis January 3, 2009, A simple analysis - using Symptoms		coff	nux-v	lach	ang	chin	bor	sel	ars	con	sulph	ign	canth	sia-c	aur-m-n	acon	sul-ac	calc	lac-rup
Analysis uses 15 rubrics in 4 symptoms.																			
▼	523 Mental activity																		
	16 Mind; Activity; night																		
	1 Mind; Activity; midnight, until																		
	83 Mind; Activity; hyperactive																		
	488 Mind; Cheerfulness																		
	- 1070 Sadness, depression																		
	32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive																		
	1 Mind; Theorizing; evening																		
	2 Mind; Theorizing; night																		
▼	83 Sensitive to noise																		
	25 Mind; Noises; aversion to																		
	15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful ser																		
	58 Sleep; Waking; noise, from																		
▼	60 Sleeplessness																		
	9 Mind; Activity; sleeplessness, with																		
	51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by																		
	5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after																		
▼	192 Generalities																		
	80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.																		
	- 386 agg.																		
	140 Generalities; Food and drinks; coffee; desires																		
	- 76 aversion																		

Zdravilo *coff* je zdaj obarvano rdeče, ker je v tej analizi kontra indicirano.

Nasprotna indikacija je situacija, v kateri se sredstvo pojavi v eni rubriki z nizko oceno (1, 2 ali se sploh ne pojavi), v polarni rubriki pa z visoko oceno (3 ali 4).

Bolj zapleten primer je prikazan v naslednji analizi Bönninghausnovega sloga:

Demo case, Andrew		Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort																	
Analysis January 25, 2011, Bönninghausen style analysis		bell	bry	sulph	puls	phos	calc	led	rhus-t	lach	ars	nat-m	nux-v	merc	con	chin	ferr	am	nit-ac
Analysis uses 10 rubrics.																			
	762 Generalities; Exercise, exertion; agg.																		
	74 Generalities; Hanging down limbs; amel.																		
	930 Generalities; Motion, motions; during																		
	650 Generalities; Pressure; agg.																		
	187 Generalities; Raising; agg.; limbs																		
	590 Generalities; Sit, sitting; agg.																		
	179 Generalities; Stand, standing; amel.																		
	759 Generalities; Touch; agg.																		
	656 Generalities; Warmth; agg.																		
	102 Generalities; Wrapping up; agg.																		

Grouping method ☒ Cross (only remedies that are in ALL the rubrics)
☐ Combine (all remedies from ANY of the rubrics)

Label

Select one or more rubrics to add to this group:

Rubrics

- Mind; Fear; dogs,of
- Mind; Fear; rats
- Mind; Fear; wolves,of
- Head; Pain,headache; stitching
- Generalities; Walk,walking; during

Cancel OK

Za drugo skupino bomo uporabili drugo metodo. Izberite tri rubrike *Um; strah* in še enkrat pritisnite .

Demo case, Andrew
Analiza February 1, 2009, Grouping example
 Analiza uporablja 4 rubrike.

- 57 Mind; Fear; dogs, of
- 12 Mind; Fear; rats
- 5 Mind; Fear; wolves, of
- ▼ 408 *Prekrižane rubrike*
 - 496 Head; Pain, headache; stitching
 - 786 Generalities; Walk, walking; during

Zdaj izberite možnost *Combine* in pritisnite gumb V redu.

Grouping method ☐ Cross (only remedies that are in ALL the rubrics)
☒ Combine (all remedies from ANY of the rubrics)

Label

Select one or more rubrics to add to this group:

Rubrics

- Mind; Fear; dogs,of
- Mind; Fear; rats
- Mind; Fear; wolves,of

Cancel OK




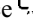

Seznam rubrik, ki je nastal, je zdaj naslednji:

Demo case, Andrew

Analiza February 1, 2009, Grouping example

Analiza uporablja 2 rubrike.

- ▼ 66 Kombinirane rubrike
 - 57 Mind; Fear; dogs, of
 - 12 Mind; Fear; rats
 - 5 Mind; Fear; wolves, of
- ▼ 408 Prekrižane rubrike
 - 496 Head; Pain, headache; stitching
 - 786 Generalities; Walk, walking; during

Če želite spremeniti skupino, preprosto kliknite glavno rubriko skupine in pritisnite . V pogovornem oknu vklopite in izklopite rubrike s klikom nanje. Rubriko lahko odstranite iz skupine tudi tako, da jo kliknete in pritisnete . (Možnost menija *Primer / Združevanje v skupine / Odstranitev združevanja v skupine*, gumb orodne vrstice , možnost priročnega menija *Združevanje v skupine / Odstranitev združevanja v skupine*). Če želite skupino popolnoma odstraniti, kliknite na glavno rubriko skupine in pritisnite . (Možnost menija *Primer / Združevanje v skupine / Odstranitev združevanja v skupine*, gumb orodne vrstice , možnost priročnega menija *Združevanje v skupine / Odstranitev združevanja v skupine*).

V meniju sta dve možnosti, ki vam omogočata hitro ustvarjanje skupine, ne da bi vam bilo treba izbrati rubrike v pogovornem oknu, kot je prikazano zgoraj.

Najprej lahko izberete dve ali več rubrik in jih nato združite. (Možnost menija *Primer / Združevanje v skupine / Združite izbrane rubrike*, možnost priročnega menija *Združevanje v skupine / Združite izbrane rubrike*).

Najprej lahko izberete dve ali več rubrik in jih nato prekrižate. (Možnost menija *Primer / Združevanje v skupine / Navzkrižno izbrane rubrike*, možnost priročnega menija *Združevanje v skupine / Navzkrižno izbrane rubrike*).

Kako se rubrične skupine uporabljajo pri analizi

Če se križa več rubrik, skupina vsebuje samo tista sredstva, ki se pojavljajo v vseh rubrikah v tej skupini. Ocena pravnega sredstva bo najnižja ocena pravnega sredstva v vseh rubrikah.

Pri združevanju več rubrik skupina vsebuje popravke, ki se pojavijo v katerikoli rubriki v skupini. Ocena pravnega sredstva bo najvišja ocena, najdena za pravno sredstvo v katerikoli rubriki v skupini.

Pregled rubrik

Včasih je priročno dobiti pregled vseh rubrik v analizi skupaj z njihovimi sredstvi.

Pri skupinskih rubrikah boste morda želeli preveriti, katera sredstva se pojavljajo v dobljeni skupini.

Če želite prikazati pregled vseh rubrik, izberite *Prikaži pregled rubrik*. (Možnost menija *Primer / Prikaži pregled rubrik, control-V*, možnost priročnega menija *Več / Prikaži pregled rubrik*).

Odpre se modul *Find*, ki prikazuje naslednje:

COMBINED RUBRICS: MIND; FEAR; DOGS, OF / MIND; FEAR; RATS / MIND; FEAR; WOLVES, OF:

absin acon agar **Alum** amph androc arm astac **BAC BELL** BOS-S BUFO **CALC** calc-ar carc **CAUST** cer chel **CHIN** choc **CIMIC** **Con** cupr-acet dor dpt dysp-n **Hydrog** **HYOS** insul **LAC-C** lac-d lac-f lac-h lach lycpr lyss mag-c **Manc** mand med **NAT-M** nat-p nit-ac op ory-c phos **Plac** plat **PLUT-N** polyst pras-c **PULS** **Sanic** **Scirr** **SCORP** sep sil sol-t **STRAM** sulph syc-co tax **TUB** tub-k verat **Xan**

MIND; FEAR; dogs, of: agar **Alum** amph androc astac **BAC BELL** BUFO **CALC** carc **CAUST** cer chel **CHIN** choc **Con** cupr-acet dor dpt dysp-n **Hydrog** **HYOS** insul **LAC-C** lac-d lac-f lac-h lach lycpr lyss mag-c **Manc** mand med **NAT-M** nat-p nit-ac ory-c phos plat **PLUT-N** polyst pras-c **PULS** **Sanic** **Scirr** **SCORP** sil sol-t **STRAM** sulph syc-co tax **TUB** tub-k verat **Xan**

MIND; FEAR; rats: absin acon arm bell **BOS-S** **CALC** calc-ar **CIMIC** op phos **Plac** sep

MIND; FEAR; wolves, of: amph bell cer chel dor

CROSSED RUBRICS: HEAD; PAIN, HEADACHE; STITCHING / GENERALITIES; WALK, WALKING;

DURING: acan-p **ACON** act-sp adam **AESC** **AETH** **AGAR** **AGN** aids alch-v **ALL-C** allox **ALOE** **ALUM** **ALUM-P** **ALUM-SIL** **ALUMN** **AM-C** **AM-M** **AMBR** ammc **ANAC** anag **ANATH** **ANG** **ANT-C** **ANT-T** **APIS** apoc aq-des **ARAN** **ARG** **ARG-N** **ARN** **ARS** **ARS-I** ars-met ars-s-f **Ars-s-r** arum-t **ASAF** **Asar** asc-t astac aster **ATRO** **AUR** aur-ar aur-i **AUR-M-N** aur-s bacch-a **Bad** **BAMB-A** bapt **Bar-acet** **BAR-C** bar-i bar-m bar-s **BELL** bell-p **BERB** biti-g blatta **BOR** bos-s both-a **BOV** **BROM** **Bros-g** bruc **BRY** BUFO bux cadm-s cahin **Calad** **CALC** **Calc-acet** calc-ar calc-caust calc-f calc-i **CALC-P** **CALC-S** calc-sil calen **CAMP** **CANN-I** cann-s **CANTH** **CAPS** caras carb-ac **CARB-AN** **CARB-V** carbn-o **CARBN-S** **CARC** card-b carl **Cassi-s** cast caul **CAUST** cedr cere-b **CHAM** **CHEL** **CHIN** chin-ar **Chin-s** choc **CIC** **CIMIC** **CINA** cinnb cist **CLEM** cob **COC-C** **COCC** coff **COLCH** **COLOC** colocin com **CON** cop corn **CROC** crot-c **CROT-H** **Croto-t** **Cund** **CUPR** cupr-ar cupr-s **CUR** **Cur** **CYCL** **Cyt-I** daph der **DIG** **Dios** diox dirc **DROS** **DULC** echl-a **ELAPS** emer epip equis ery-a eug euon eup-per **EUPH** **EUPHR** eupi **Fago** falco-p **FERR** **Ferr-acet** ferr-ar **FERR-I** **FERR-P** fic-i fic-m **Fl-ac** **Flor-p** form galeoc-c gall **Gamb** **GELS** gent-c gink gins **GLON** **Gran** **GRAPH** GRAT GUAI harp **HELL** **Helo** helod-c hema-h **HEP** her-s hipp hom hydr **Hydr-ac** **HYOS** hyosin hyper **IGN** ind indg insul inul **IOD** iodof **IP** irid-m iris jatr **JUG-C** kali-ar **KALI-BI** **KALI-C** kali-chl kali-cy **KALI-I** **KALI-N** **KALI-P** kali-s kali-sil **KALM** **Kola** **KREOS** kurch **LAC-C** lac-h lac-m **LACH** lachn **LACT** **Lam** lap-laz lappa **Laur** lec **LED** **LIL-T** lipp **Lith-c** **Lob** lob-c lol loxo-r **LYC** lycpr **LYSS** **M-ARCT** **M-art** **M-AUST** **MAG-C** **MAG-M** **MAG-P** mag-s magn-gr **MANC** **MANG** **Mang-acet** meli-a menth **MENY** **MERC** **MERC-C** merc-i-f merc-s **MERL** methyl-p-h **MEZ** **Mill** **Mim-p** morpho-m **Mosch** **MUR-AC** naja naja-m nat-ar **NAT-C** nat-glt nat-hchl **NAT-M** **NAT-P** **NAT-S** nat-sil nept-m **NICC** **NIT-AC** nit-m-ac nuph **NUX-M** **NUX-V** **Ol-an** ol-j olea **Olnd** onc-t **Op** **OZON** paeon **Par** paraf paul-p peri **PETR** **PH-AC** **Phel** **PHOS** phyl-a phys phyt **PIC-AC** pier-b **Pimp** **Pip-m** pitu-a plan **PLAT** **PLB** **Plb-acet** plect pras-s **PRUN** **PSOR** **PTEL** **PULS** pyrog pyrus-c rad-br **RAN-B** **RAN-S** raph **Rat** rheum **RHOD** **RHUS-T** ros-d **RUTA** **SABAD** **SABIN** sac-l sal-ac **Samb** **SANG** **SANIC** **SARS** scan sec **SEL** senec **Seneg** **SEP** **SIL** sol-n **SPIG** **SPONG** **SQUIL** **STANN** **STAPH** stel still **STRAM** **STRONT-C** **STRY** **SUL-AC** sul-i **SULPH** **Syph** **TAB** **TARAX** **TARENT** **TARENT-C** **Tax** teg-a tell telo-s **Ter** **Teucr** **THER** **THUJ** **Til** **Tong** toxop-p **Tritic-v** **Trom** **TUB** tung upa **URAN** vac **VALER** **VERAT** **VERB** vesp vib vinc **Vince** viol-o **VIOL-T** vip visc with-s **X-ray** **ZINC** zinc-acet zinc-p **Zing** ziz

HEAD; PAIN, headache; stitching: **ACAN-P** acher-a **ACON** acon-ac act-sp adam aego-p **AESC** **AETH** **AGAR** agath-a **AGN** **AIDS** alch-v **Alco** **ALL-C** allox **ALOE** **ALUM** **ALUM-P** **ALUM-SIL** **ALUMN** **AM-C** **AM-M** **AMBR** **Amet** ammc **ANAC** **Anac-oc** anag **ANATH** ander andri-q androg-p **ANG** **ANT-C** **ANT-O** **ANT-T** aphis **APIS** apoc aq-des **ARAN** **ARAN-IX** **ARG** **ARG-N** **Argo** **Arist-s** **ARN** **ARS** **ARS-I** ars-met **ARS-S-F** **Ars-s-r** art-v **ARUM-T** **ASAF** **Asar** **ASC-C** asc-t astac **ASTER** **ASTRA-E** **ATRO** atro-s **AUR** aur-ar aur-i **AUR-M-N** aur-s bacch-a **Bad** **BAMB-A** bapt **BAR-ACET** **BAR-C** bar-i **BAR-M** **BAR-S** **BELL** bell-p benz **BERB** biti-g **Blatta** **BOR** bos-s

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort

**Razvrstitev****Uvod v klasifikacijo simptomov**

Samuel Hahnemann's Organon in Kronične bolezni nam pokaže, da Hahnemann svojih zdravil ni izbiral na podlagi celote vseh simptomov, ki jih je mogoče najti v trenutnih ali preteklih situacijah pacienta. Bolnikove simptome je skrbno razvrstil v več kategorij in na podlagi te razvrstitve je izvajal zdravljenje.

Na voljo je Hahnemannova klasifikacija ter skupine A, B, C, D in E, ki jih lahko določite sami.

Možnosti razvrščanja, ki so na voljo v orodni vrstici na levi strani zaslona:

Simbol	Ime	Pomen
	Psora	Osnovne motnje. Organon, 6. izdaja, § 80 (psorična miazma).
	Incident	Biografski dogodek, stvari, ki so se zgodile bolniku in so nanj vplivale. Akutna bolezen. Organon § 72 (škodljivi vplivi).
	Epidemija	Bolezni, ki se prenašajo iz zunanjega vira: gripa, legionela, SARS, ošpice, mumps in druge. (vmesne bolezni). Organon § 73 (epidemične bolezni).
	Akutni miasmatski	Bolezen prihaja od znotraj, pogosto jo sproži dogodek, spodbuda od zunaj. Pritožbe so hude. Organon § 73 (prehodna eksplozija latentne psore).
	Podedovana težnja	Tiste bolezni, ki so se pojavile v rodbini in so se genetsko prenesle na bolnika.
	Iatrogeni	Uporaba zdravil in cepljenja, ki jih je oseba prejela. Organon § 74.
	Sycosis	Okužba z gonorejo. Organon § 79 (sikotična miazma).
	Sifilis	Okužba s sifilisom. Organon § 79 (sifilitična miazma).
	Uporabnik A	Brezplačno za lastno uporabo.
	Uporabnik B	Brezplačno za lastno uporabo.

C	Uporabnik C	Brezplačno za lastno uporabo.
D	Uporabnik D	Brezplačno za lastno uporabo.
E	Uporabnik E	Brezplačno za lastno uporabo.

Razvrstitev se lahko uporablja na ravni Simptomov ali na posameznih rubrikah.

Nastavitev razvrščanja na simptomu bo uporabljena za vse rubrike v simptomu. Vse nastavitve, ki so bile uporabljene za rubrike, se ne bodo več uporabljale.

Oglejte si tudi demonstracijski primer *Enostavni primer razvrščanja*.

Filtriranje in razvrščanje pravnih sredstev

Če se pri analizi uporablja razvrščanje simptomov ali rubrik, se sredstva za vsako analizo samodejno filtrirajo. To filtriranje poteka v skladu z informacijami, ki jih najdemo v Hahnemannovih spisih.

Za *Psora*, zdravila so: vsi minerali in nosode ter Lach, Lyc, Sep, vendar brez Merkurja.

Za *Incident, akutni miazmatični, epidemični*, so zdravila: vse rastline in živali ter Merc, Ars, Ant-c.

Za *latrogene* so zdravila tista, ki jih najdemo v rubrikah *Zastrupitve po zdravilih*, in *Bolezni zaradi cepljenja*.

Za *Podedovana nagnjenost*, zdravila so: vse nosode.

Za druge skupine so prikazana vsa zdravila.

Pripomočki

Razredi A-B-C-D-E se lahko uporabljajo tudi kot preglednice. Z dodeljevanjem le-teh simptomom ali posameznim rubrikam je zelo enostavno ustvariti različne poglede na rezultate analize.


Več informacij

Zgornje informacije o razvrstitvi so omejene.

Odlične informacije o uporabi Hahnemannove klasifikacije najdete na spletni strani <http://www.ewaldstoteler.com>


Prikaz relativne pomembnosti


V tabelah in mrežnih analitičnih grafih so zdravila prikazana glede na razrede v štirih različnih slogih. Pri izračunu formul za analizo se za vsako zdravilo uporabi bolj natančna vrednost kot le 1-2-3-4. Pomembno je preveriti, kako pomembno je posamezno pravno sredstvo v rezultatih analize. To je še posebej pomembno, če uporabljate lastne analitične formule.

Relativno pomembnost posameznega zdravila lahko prikažete s klikom na . (Možnost menija *Analiza / Prikaži relativno pomembnost*, gumb orodne vrstice ).



V pogledu tabele so zdravila prikazana kot kvadrat s svetlo ali temno barvo. Čim temnejša je barva, tem večjo relativno pomembnost ima sredstvo v analizi.

Primerjajte naslednji dve sliki iste analize. Prva slika prikazuje zdravila z ocenami od 1 do 4, druga slika pa zdravila glede na njihov relativni pomen za analizo.

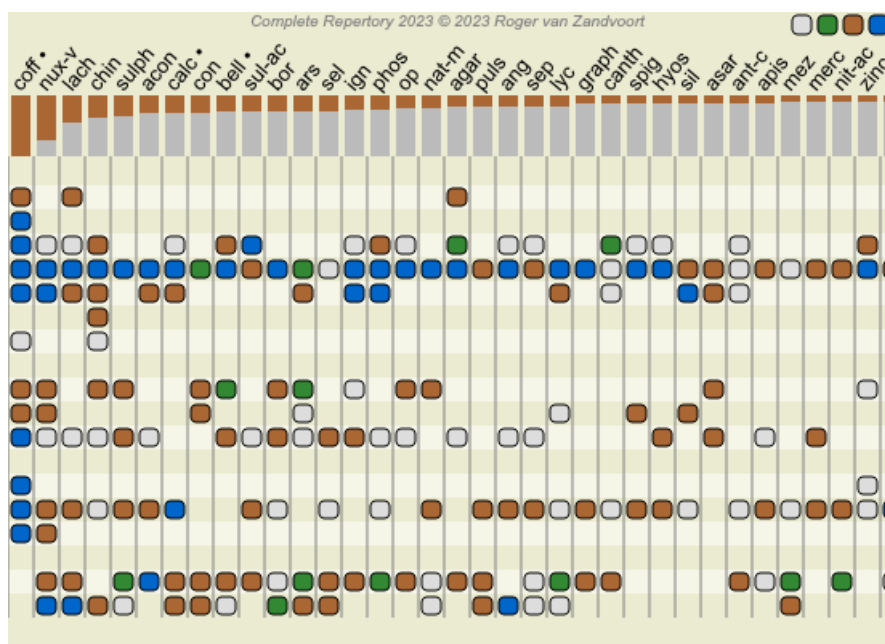

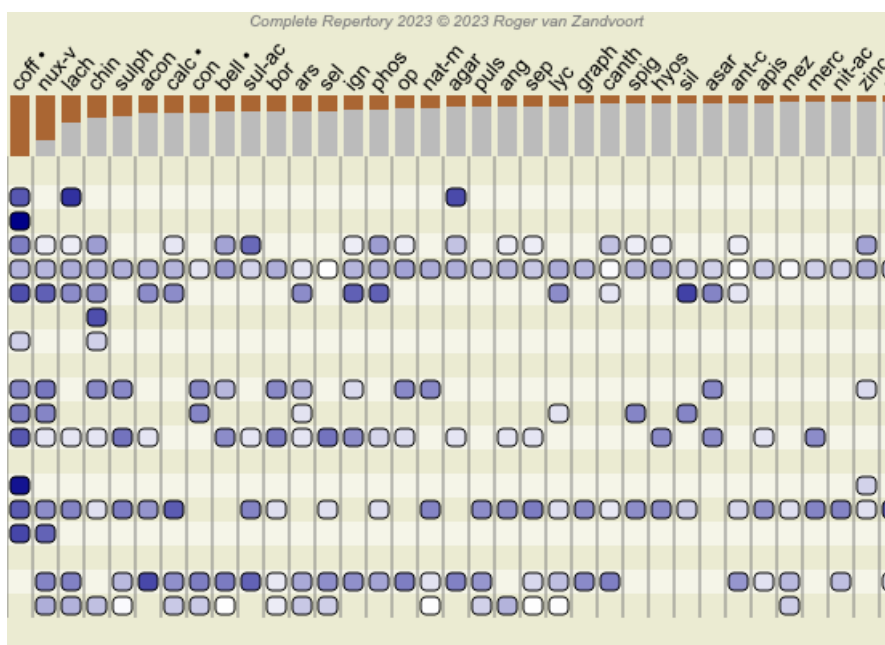

V pogledu Mreža so zdravila običajno prikazana v različnih barvah in velikostih. Pri prikazu relativne pomembnosti so vsa zdravila narisana s črnimi točkami spremenljive velikosti. Večja kot je pika, večji relativni pomen ima sredstvo v analizi.

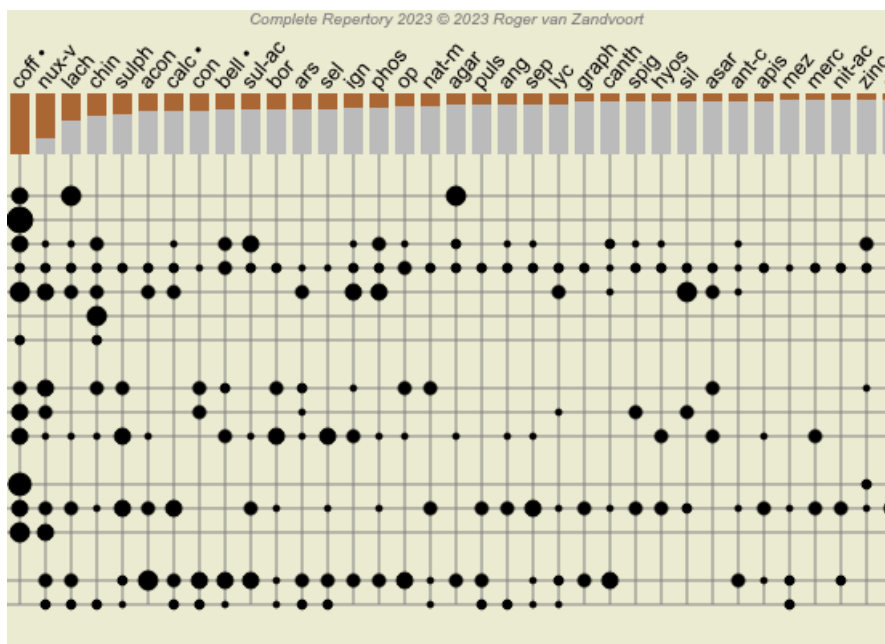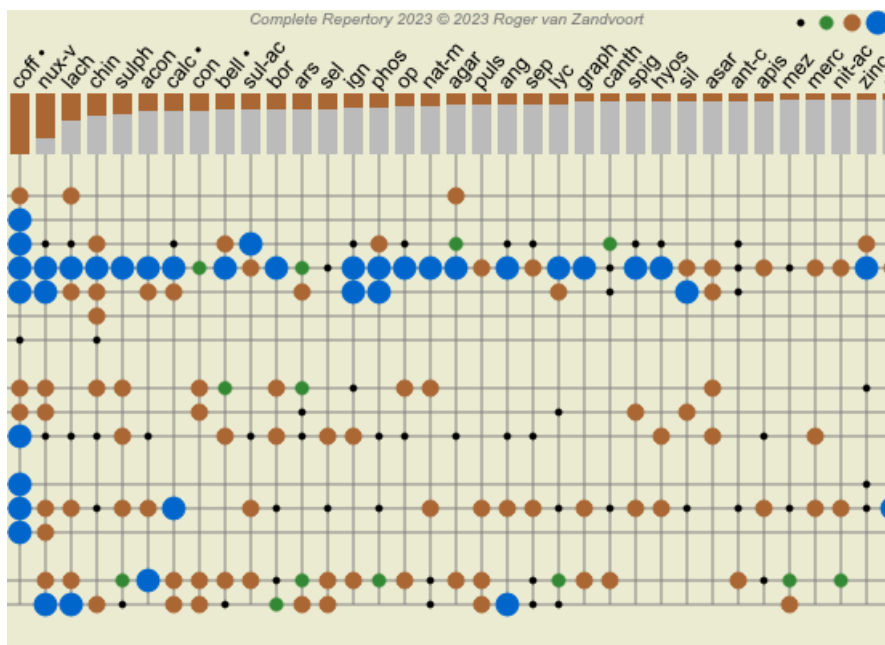

Več pogledov

Zdaj veste, kako ustvariti analizo. Prav tako veste, kako natančno prilagoditi analizo na podlagi svoje razlage simptomov v tem konkretnem primeru.

Simptomom ali rubrikam ste morda določili uteži. Morda ste jim dodelili klasifikacije. Izbrali ste analitično formulo za tehtanje pomembnosti pravnih sredstev za uporabljene rubrike. Morda ste rezultate filtrirali na podlagi določenega kraljestva zdravil.

Vse te nastavitve so vam pomagale pridobiti najboljši rezultat analize na podlagi vaše razlage primera.

Vendar je to vaša interpretacija, vaš pogled na bolnikove simptome. Ti simptomi so nespremenljivi, so opažena dejstva, ki ste jih zbrali. Ne glede na to, kakšno mnenje imate, so opaženi simptomi realnost, s katero morate delati. (Organon §18)

Vendar pa bi lahko razmislili o tem, da na iste simptome pogledate z druge perspektive, z drugačnim pogledom in si jih razlagate na drugačen način. Seveda lahko spremenite vse nastavitve analize in preverite, kaj se bo zgodilo. Vendar se je vaša prvotna analiza spremenila in če jo želite ponovno prikazati, morate spremeniti vse spremenjene nastavitve.

Da bi vam omogočili spreminjanje nastavitev analize, ne da bi pri tem izgubili prvotne nastavitve, smo ustvarili več pogledov.

Kaj je pogled analize?

Pogled analize je skupek vseh nastavitev, ki jih lahko uporabite za analizo.

Uteži	×0 ×1 ×2 ×3 ×4
Razvrstitev	○ ⚡ ⋮ ^ Y → ⊗ × A B C D E
Simptomi ravnotežja	⚖
Pravilno Polar	↔
Formula za analizo	Na primer "Small Remedies"
Filter za odpravo napak	Na primer "Rastline"

Ustvarite lahko več pogledov, pri čemer ima vsak svojo zbirko nastavitev.

Kot primer si oglejte *Demonstracijski primer Andrew*, analizo *Več pogledov*.

Ustvarjanje pogleda

Nov pogled lahko ustvarite v meniju ali orodni vrstici. (Možnost menija *Analiza / Oglejte si / Dodajanje novega pogleda*, gumb orodne vrstice **+**, možnost priročnega menija *Oglejte si / Dodajanje novega pogleda*).

Novi pogled je kopija prvotnega pogleda s popolnoma enakimi nastavitvami. Vse spremembe, ki jih naredite v nastavitvah v novem pogledu, veljajo izključno za ta pogled. Vsi drugi pogledi ostanejo enaki kot prej.

Če želite, lahko novemu pogledu po želji dodelite ime.

Upoštevajte, da vsi pogledi uporabljajo popolnoma enako zbirko simptomov in rubrik. Položaj bolnika je enak, le vaša interpretacija je pri vsakem pogledu drugačna.

V meniju lahko preprosto preklopite iz enega pogleda v drugega. (Možnost menija *Analiza / Oglejte si / Standard*, gumb orodne vrstice **☞**, možnost priročnega menija *Oglejte si / Standard*).

Pogled lahko izberete tudi v orodni vrstici.

Če izbranega pogleda ne želite več uporabljati, ga lahko izbrišete. (Možnost menija *Analiza / Oglejte si / Odstranitev trenutnega pogleda*, možnost priročnega menija *Oglejte si / Odstranitev trenutnega pogleda*).


Vedno lahko spremenite ime, ki ste ga dodelili pogledu. (Možnost menija *Analiza / Oglejte si / Preimenovanje trenutnega pogleda*, možnost priročnega menija *Oglejte si / Preimenovanje trenutnega pogleda*).

Spremenite lahko tudi vrstni red prikazovanja pogledov v meniju ali orodni vrstici. (Možnost menija *Analiza / Oglejte si / Premaknite trenutni pogled na levo*, možnost priročnega menija *Oglejte si / Premaknite trenutni pogled na levo*).

Pogled rezultatov analize vsakega pogleda

V območju z rezultati analize na desni strani zaslona so prikazani rezultati analize za izbrani pogled. Ko preklopite na drug pogled, se rezultati spremenijo v rezultate za ta pogled.

Hkrati si lahko ogledate tudi vse rezultate ogledov. (Možnost menija *Analiza / Večpredstavnostni pogled*, gumb orodne vrstice **☹**). Videti bo takole:

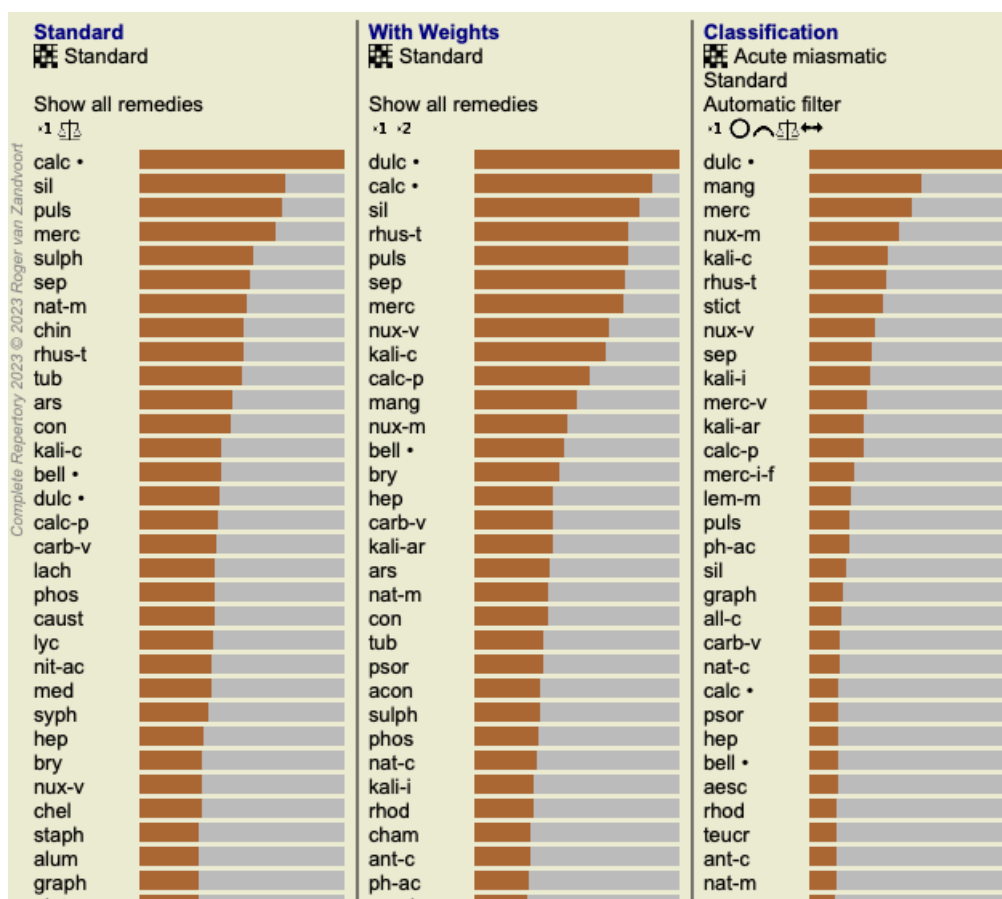

Je podoben pregledu seznama za analizo, vendar prikazuje en seznam rezultatov na pogled. Na vrhu je prikazan povzetek nastavitve, ki se uporabljajo za vsak pogled.

- Analiza, izbrana za slog izpisa tabele.
- Če se pri analizi uporablja klasifikacija, navedite formulo za analizo, ki se uporablja.
- Uporabljeni filter za odpravljanje nepravilnosti.
- Majhna slika za vsako veljavno nastavitve analize.

Diferencialna diagnoza

Naslednji korak po opravljeni analizi je običajno diferencialna diagnoza. Na podlagi rezultatov analize se šteje, da so ustrezna številna pravna sredstva, med katerimi je treba razlikovati.

Pri tem obstaja več različnih pristopov.

- Primerjajte zdravila za vse simptome v analizi, vključno s splošnimi.
- Preučite posebne razlike za določene simptome.
- Na splošno preučite razlike in raziskujte simptome, ki niso prisotni že v analizi.

Del te študije je treba opraviti s pomočjo Materia Medica.

Večino dela je mogoče opraviti z uporabo vsebine repertoarja.

Pri tem vam pomaga posebna funkcija diferencialne diagnoze v modulu *Analysis*. Oblikuje enostavno povezavo med analizo in modulom *Find's* sposobnostjo razlikovanja pravnih sredstev.

Delovanje bomo prikazali z nekaj primeri.

Primer: primer sepije

Naslednjo analizo lahko najdete v demo primeru *Andrew*, imenuje pa se *DD primer - primer Sepia*.

Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort

Index Book Find Case Analysis MM

Demo case, Andrew
 Analysis March 3, 2016, DD example - Sepia case
 Analysis uses 20 rubrics in 5 symptoms.

▼ 129 Mental
 89 Mind; Irritability; menses; before
 64 Mind; Irritability; menses; during

▼ 512 Headache
 104 Head; Pain, headache; blindness or visual complaints, precede or attend
 173 Head; Pain, headache; exertion; agg.
 164 Head; Pain, headache; light; agg.
 261 Head; Pain, headache; forehead; eyes; above; left
 29 Head; Pain, headache; cutting, darting, stabbing; forehead; eyes; above
 222 Head; Pain, headache; sudden, paroxysmal

▼ 89 Nausea
 57 Stomach; Nausea; food; smell of
 10 Stomach; Nausea; food; smell of; cooking
 40 Stomach; Nausea; menses; before

▼ 328 Leucorrhea and menses
 60 Female; Leucorrhea, discharge; bland, mild
 68 Female; Leucorrhea, discharge; brown
 26 Female; Leucorrhea, discharge; cream, like
 178 Female; Leucorrhea, discharge; white
 143 Female; Menses; early, too, frequent; profuse, and
 20 Back; Pain; sacral region; menses; before
 16 Generalities; Menses; amel.; after


▼ 261 Generic symptoms
 51 Face; Brown; spots

▼ 244 Crossed rubrics
 399 Generalities; Food and drinks; food in general; aversion to
 470 Generalities; Menses; before

Locate remedy Standard

Jump to Find

Čeprav je *Sepia* dosegla najvišje število točk, to še ne pomeni, da jo je treba nujno predpisati. V tem primeru smo želeli razlikovati med *Sepia* in *Nux Vomica*, saj se ti zdravili dopolnjujeta, obe pa sta v analizi dosegli razmeroma visoko število točk.

Začnite z diferencialno diagnozo. (Možnost menija *Analiza* / *Čarovnik za diferencialno diagnozo*, gumb orodne vrstice ).
 Odpre se pogovorno okno:

Remedies

Rubrics

mind; irritability
 head; pain, headache
 head; pain, headache; cutting, darting, stabbing
 stomach; nausea
 female; leucorrhea, discharge
 female; menses
 female; menses; early, too, frequent
 back; pain
 face; brown
 generalities; food and drinks
 generalities; food and drinks; food in general

Rubric types

Alternating ☒
 Sides ☒
 Time ☒
 Extending ☒
 Locations ☒
 Modalities ☒
 Phenomena ☒

Apply Close

V tem pogovornem oknu so trije razdelki.

- Pravna sredstva.
Tu lahko vnesete kratice za zdravila, ki jih želite razlikovati.
Standardno se za vas izpolnijo sredstva z relativno oceno vsaj 50 %, največ 10. V večini primerov boste ta seznam spremenili sami.
- Rubrike.
Ta seznam je sestavljen na podlagi rubrik v analizi. Vsebuje vse pojave za rubrike v analizi. Če želite, lahko na tem seznamu izberete določene simptome in ustvarite DD samo za te simptome.
- Vrste rubrik.
V tem razdelku lahko določite, za katere simptome naj se razlikuje.

V tem primeru bomo sredstva spremenili v *sep nux-v*, druge razdelke pa bomo pustili nespremenjene. Trenutno nameravamo izdelati splošno DD za vse simptome v analizi.

Remedies

Rubrics

mind; irritability
head; pain, headache
head; pain, headache; cutting, darting, stabbing
stomach; nausea
female; leucorrhea, discharge
female; menses
female; menses; early, too, frequent
back; pain
face; brown
generalities; food and drinks
generalities; food and drinks; food in genera

Rubric types

Alternating ☒

Sides ☒

Time ☒

Extending ☒

Locations ☒

Modalities ☒

Phenomena ☒

Apply

Close

To pogovorno okno lahko premaknete na primeren položaj na zaslonu in ga pustite odprtega za hitro spreminjanje meril DD. Kadar koli ga lahko zaprete z gumbom *Close*.

Kliknite gumb *Uporabi*, da začnete DD z izbranimi merili. Odprl se bo modul *Find*, v katerem so prikazani najbolj diferencirani rubriki za izbrana merila.

WizardAllNux-vSep

MIND

IRRITABILITY; anxiety; with; suicide, attempt to commit, afraid to die: **NUX-V**

IRRITABILITY; emissions, pollutions, seminal; after: **NUX-V** (+14)

HEAD

PAIN, headache; morning; agg.; opening eyes, on: **NUX-V** (+11)

PAIN, headache; morning; agg.; rising; amel.: **NUX-V** (+37)

PAIN, headache; evening; amel.; bed, in: **NUX-V** (+4)

PAIN, headache; alcohol, alcoholic drinks; agg.: **NUX-V** (+101)

PAIN, headache; alcohol, alcoholic drinks; amel.: sep (+12)

PAIN, headache; bathing, washing; agg.: **SEP** (+44)

PAIN, headache; bathing, washing; agg.; cold: **SEP** (+14)

PAIN, headache; bathing, washing; amel.: **NUX-V** (+69)

PAIN, headache; bathing, washing; amel.; cold: **NUX-V** (+51)

PAIN, headache; coffee; agg.: **NUX-V** (+33)

PAIN, headache; leucorrhea; during: **SEP** (+6)

PAIN, headache; lying; amel.; side, on; painless: **NUX-V** (+4)

PAIN, headache; room; agg.: **SEP** (+152)

PAIN, headache; room; amel.: **NUX-V** (+41)

PAIN, headache; sleep; loss of, from late hours: **NUX-V** (+34)

PAIN, headache; walk, walking; while; air, in open: **NUX-V** sep (+81)

PAIN, headache; walk, walking; amel.; air, in open: **NUX-V** **SEP** (+95)

PAIN, headache; forehead; left; extending to; occiput: **SEP** (+13)

PAIN, headache; forehead; morning; agg.; bed, in: **NUX-V** (+11)

PAIN, headache; forehead; morning; agg.; rising; agg.: sep (+39)

PAIN, headache; forehead; morning; agg.; rising; amel.: **NUX-V** (+11)

PAIN, headache; forehead; air; open; agg.: **NUX-V** sep (+55)


PAIN, headache; forehead; air; open; amel.: **SEP** (+71)

PAIN, headache; forehead; eating; agg.: **NUX-V** sep (+56)

PAIN, headache; forehead; eating; amel.: **SEP** (+23)

PAIN, headache; brain; morning; waking, on: **NUX-V** (+2)

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort

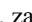Med prikazanimi rubrikami so zdaj večinoma simptomi glave, zato nekajkrat kliknemo gumb , da se prikaže manj rubrik.

WizardAllNux-vSep

HEAD

PAIN, headache; morning; agg.; rising; amel.: **NUX-V** (+37)

PAIN, headache; evening; amel.; bed, in: **NUX-V** (+4)

PAIN, headache; bathing, washing; agg.: **SEP** (+44)

PAIN, headache; bathing, washing; agg.; cold: **SEP** (+14)

PAIN, headache; bathing, washing; amel.: **NUX-V** (+69)

PAIN, headache; bathing, washing; amel.; cold: **NUX-V** (+51)

PAIN, headache; coffee; agg.: **NUX-V** (+33)

PAIN, headache; forehead; left; extending to; occiput: **SEP** (+13)

PAIN, headache; forehead; morning; agg.; rising; agg.: sep (+39)

PAIN, headache; forehead; morning; agg.; rising; amel.: **NUX-V** (+11)

PAIN, headache; forehead; eating; agg.: **NUX-V** sep (+56)

PAIN, headache; forehead; eating; amel.: **SEP** (+23)

PAIN, headache; brain; morning; waking, on: **NUX-V** (+2)

PAIN, headache; bursting; morning; rising; amel.: **NUX-V**

PAIN, headache; bursting; morning; waking, on: **NUX-V** (+7)

PAIN, headache; pressing; forehead; eyes; above; walking; agg.; air, in open: **NUX-V** sep (+105)

PAIN, headache; pressing; forehead; eyes; above; walking; amel., in open air: **SEP**

PAIN, headache; shooting; forehead; eyes; above; left; extending to; occiput: **SEP**

PAIN, headache; stunning, stupefying; morning; bed, in: **NUX-V** (+1)

PAIN, headache; stunning, stupefying; morning; rising, after; amel.: **NUX-V** (+2)

PAIN, headache; stunning, stupefying; morning; waking, on or after: **NUX-V** (+1)

PAIN, headache; tearing; temples; left; extending to left upper side: **SEP**

STOMACH

NAUSEA; morning; bed, in: **NUX-V** (+17)

NAUSEA; lying; agg.: **SEP** (+51)

NAUSEA; lying; amel.: **NUX-V** sep (+54)

FEMALE

LEUCORRHEA, discharge; daytime: **SEP** (+10)

LEUCORRHEA, discharge; daytime; only: **SEP** (+7)

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort

To vam daje dober vtis o pomembnih razlikah med obema zdraviloma za izbor simptomov, uporabljenih v analizi.

Complete Dynamics

90

Ker so rezultati prikazani v modulu *Find*, lahko analizi takoj dodate ustrezne rubrike in tako spremenite rezultat analize v skladu z novimi informacijami.

Primer: primer Ferrum

Naslednjo analizo lahko najdete v demo primeru *Andrew*, imenuje pa se *DD primer - primer Ferrum*.

The screenshot displays the 'Complete Dynamics' software interface. At the top, there are navigation tabs: 'Index', 'Book', 'Find', 'Case', 'Analysis', and 'MM'. The 'Analysis' tab is active. Below the tabs, the title 'Demo case, Andrew' is shown, followed by 'Analysis March 1, 2016, DD example - Ferrum case' and 'Analysis uses 30 rubrics.'.

The main area is divided into two columns. The left column lists symptoms and rubrics, such as '201 Mind; Anxiety; night; agg.', '238 Mind; Cares, worries, full of', '52 Mind; Cares, worries, full of; others, about', '127 Mind; Death; thoughts of', 'Mind; Irritability; easily', '267 Mind; Irritability; trifles, about', '42 Head; Congestion, hyperemia; coughing agg.', '65 Eyes; Lachrymation; cough, during', '127 Face; Earthy', '449 Throat; Choking, constricting', '5 Combined rubrics', '3 Throat; Compressed, feels', '5 Throat; Pain; pressing; extending to; inward', '375 Throat; Hawking', '90 Larynx & trachea; Foreign bodies, as of', '34 Crossed rubrics', '48 Larynx & trachea; Pain; talking agg.', '144 Larynx & trachea; Pain; burning, smarting', '61 Speech & voice; Whispering voice', '209 Cough; Irritation, from; larynx', '233 Cough; Itching, tickling; larynx, in', '248 Cough; Suffocative', '5 Chest; Congestion, hyperemia; night', '109 Heart & circulation; Palpitation heart; night', '4 Heart & circulation; Pulsation; bloodvessels; arteries; night', '78 Heart & circulation; Pulse, heartbeat; rapid, tachycardia; even', '8 Extremities; Pulsation; night', '187 Sleep; Falling asleep; difficult', '22 Sleep; Falling asleep; difficult; waking, after', '750 Sleep; Restless', '72 Sleep; Waking; perspiration, from', '238 Perspiration; Sleep; during', '75 Generalities; Weakness; cough, from', and '66 Generalities; Weakness; talking, from'.

The right column is a grid of colored dots (blue, orange, green, white) representing the presence of various remedies for each symptom. The remedies are listed at the top of the grid: ferr, phos, sulph, puls, nat-m, ars, lach, sep, sil, caust, nitrac, thus-t, lyc, calc, kal-c, mere, nux-v, ph-ac, bell, ign, aum, lod, accon, thu, dros, arg-n, graph, verat, hyos, carb-v, bar-c, zinc, chel, con, coc, by, fluor, and ip.

At the bottom, there is a search bar with the text 'Locate remedy' and a search button. Below it, there is a 'Jump to' field and a 'Find' button. The search results show 'and drinks/generalities; food and drinks; food in general] sep.nux-v.'.

Po aktiviranju DD smo izbrali sredstva *ferr phos puls ars nat-m* in kliknili gumb *Uporabi*.

Wizard

All

Ars

Ferr

Nat-m

Phos

Puls

MIND

ANXIETY; evening; agg.; twilight, at: **ARS PHOS** puls (+15)
ANXIETY; evening; agg.; bed, in: **ARS** nat-m phos **PULS** (+59)
ANXIETY; night; agg.; bed; in: **ARS** (+18)
ANXIETY; night; agg.; bed; driving out of: **ARS** (+3)
ANXIETY; night; agg.; children, in: **ARS** (+31)
ANXIETY; night; agg.; lying on; left: **PHOS**
ANXIETY; night; agg.; perspiration, with: **ARS Nat-m** (+6)
ANXIETY; midnight; after: **ARS** nat-m **PHOS PULS** (+40)
ANXIETY; midnight; after; three am.: **ARS** (+11)
ANXIETY; alone, while: **ARS PHOS** (+45)
ANXIETY; anger, vexation; during: **ARS** nat-m phos **PULS** (+41)
ANXIETY; asthmatic complaints, with: **ARS FERR** (+29)
ANXIETY; bed; driving out of: **ARS** nat-m **PULS** (+23)
ANXIETY; children, in: **ARS PHOS** (+44)
ANXIETY; cholera, in: **ARS** (+17)
ANXIETY; congestion, with: **PHOS PULS** (+30)
ANXIETY; congestion, with; head, in: **PHOS PULS** (+15)
ANXIETY; cough; during: **ARS PHOS** (+42)
ANXIETY; delivery, parturition; during: **ars NAT-M** (+19)
ANXIETY; excitement, emotional, agg. •: **NAT-M PHOS** (+16)
ANXIETY; faintness; with: **ARS** ferr **PULS** (+23)
ANXIETY; hurry, with: **ARS NAT-M** (+16)
ANXIETY; lying; agg.: **ARS NAT-M PHOS PULS** (+34)
ANXIETY; lying; agg.; down, on: **ARS PHOS PULS** (+13)
ANXIETY; lying; agg.; side, on: **NAT-M PHOS PULS** (+9)
ANXIETY; lying; agg.; side, on; left: **NAT-M PHOS PULS** (+8)
ANXIETY; menses; before: **NAT-M PULS** (+30)
ANXIETY; motion; amel.: **ARS PULS** (+17)
ANXIETY; nausea; with: **ARS NAT-M PULS** (+80)

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort

→

Zdaj vam prepuščamo, da sami preizkusite možnosti izbire določenih simptomov in vrst rubrik ter preverite, kako se bodo spremenili rezultati.

Bönninghausen

Nekaj informacij o Bönninghausenovi analizi

Metoda Bönninghausenove analize ne uporablja drugega repertorija, temveč dela s spletnim mestom *Complete Repertory* kot druge analize. Vse rubrike iz starih repertoarjev Bönninghausena so prisotne na spletni strani *Complete Repertory*.

Bönninghausenov analitični sistem je metodologija, ki jo uporabimo, ko to zahtevajo bolnikovi simptomi, in nima nobene zveze z določenim repertorijem, temveč z rubrikami, ki so posplošene in jih lahko najdemo v vsakem repertoriju.

Razlika je v načinu izračuna.

Namesto da bi se osredotočili samo na to, kako je zdravilo predstavljeno v določeni rubriki, je velik poudarek na njegovem pojavljanju v sorodnih rubrikah v drugih delih repertorija.

Izračun se opravi na naslednji način:

- Ne upoštevajte ocene sredstva, kot je prikazana v rubriki.
- Namesto tega uporabite oceno popravka, ki se izračuna na podlagi pojavljanja popravka v povezanih rubrikah.
- Večjo težo dajte zdravilu, če se pojavlja v več sorodnih rubrikah v različnih rubrikah repertorija (kot so Um, Glava, Splošnosti itd.).
- Popravite pojavljanje v polarnih rubrikah (npr. amel. - agg. ali desire - averzija).

Pri Bönninghausnovem slogu analize boste običajno uporabljali bolj splošne in obsežnejše rubrike.

Mešana uporaba manjših specifičnih rubrik z večjimi splošnimi rubrikami na splošno ni koristna.

Predloge za analizo

Ko ustvarite novo analizo, ta ne vsebuje nobenih simptomov ali rubrik.


V številnih primerih pa boste za podobne primere verjetno uporabili podobne Simptome.

Da bi to lažje opravili, lahko ustvarite predloge za analizo. Predloga analize je izhodišče za novo analizo, ki že vsebuje številne vnaprej določene elemente. Ti so lahko Simptomi, pa tudi pogosto uporabljeni repertoarji Rubrike.

Ustvarjanje analize iz predloge

Če želite ustvariti novo analizo, morate najprej ustvariti nov primer ali odpreti že obstoječi primer. Glejte *Ustvarjanje datoteke zadeve* in *Odpiranje datoteke zadeve*.

Novo analizo ustvarite iz predloge. (Možnost menija *Primer / Dodajanje analize iz predloge, control-T*). Prikaže se pogovorno okno, v katerem lahko izberete predlogo:

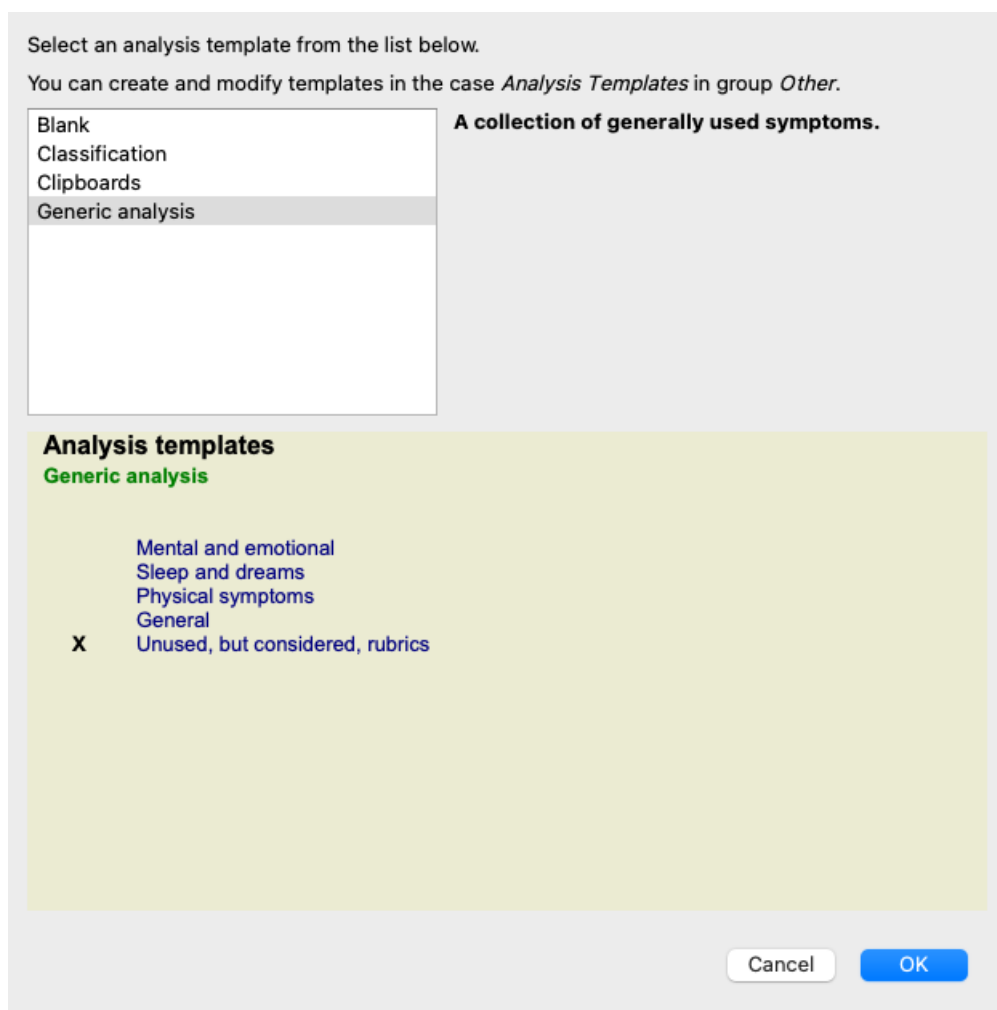

Ko izberete predlogo, se v spodnji polovici zaslona prikaže primer njene vsebine.

Ustvarjanje lastnih predlog za analizo

Ustvarjanje lastnih predlog je zelo enostavno.

Vse predloge so shranjene v datoteki za posebne primere, imenovani *Analysis templates*. Najdete jo v skupini primerov *Other*, skupaj s primerom *Demo case - Andrew*.

V tej datoteki primera lahko ustvarite nove analize, tako kot ustvarjate običajne analize v drugih datotekah primera. Opombe, ki jih dodate tej analizi, se uporabijo kot opis predloge. Samo odprite datoteko primera *Analysis templates* in hitro boste videli, kako deluje!

Če že imate analizo nekje v datoteki primera in jo želite uporabiti kot novo predlogo, podvojite to analizo in jo nato prenesite v datoteko primera *Analysis templates*. (Možnost menija *Primer / Analiza dvojnikov, control-D*, možnost menija *Primer / Premaknite analizo na primer...*).

Souporaba predlog z drugimi

Svoje predloge za analize lahko delite s sodelavci, tako kot delite druge analize. Za podrobnosti glejte razdelek *Skupna raba primerov*. Izvozne datoteke lahko preprosto delite tudi na internetu!

Formule

Uporaba lastnih analiznih formul

Najpogostejše metode analize so standardno vgrajene v sistem *Complete Dynamics*. Za večino uporabnikov so te formule vse, kar bodo kdajkoli uporabili.

Ustvarite in prilagodite lahko lastne formule glede na svoje želje in poklicne izkušnje.

Če želite ustvariti novo formulo za analizo, odprite spletno mesto *Nastavitve*, razdelek *Analiza*.

General Book Find Case Analysis MM

Remedy coloring HFA ☒

Show only relevant rubrics ☒

Analysis formulas

- ☒ Eduard test
- ☒ Standard
- ☒ Small remedies
- ☐ Small rubrics
- ☒ Simple counting
- ☒ Bönninghausen
- ☐ TestFormula

+ - ↑ ↓

Show analysis ☒

Formula...

Cancel OK

Izberite eno od obstoječih formul za analizo in pritisnite gumb **+**. Ustvarjena je nova formula za analizo, ki jo lahko sami spremenite. Ta nova formula se začne z nastavitvami analize, ki ste jo izbrali na seznamu.

Formula name My analysis

Remedy grade

Average grade in related rubrics ☐

Related rubrics

Number of sources

Small remedies

Small rubrics

Symptom completeness

Symptom coverage

Use weight factors ☐

Balance symptoms User selectable

Correct for polar rubrics User selectable

Polar compensation

Absent in polar bonus



Upoštevajte, da ni mogoče spreminjati nastavitve nobene od standardnih analizičnih formul. Spremenite lahko samo formule, ki ste jih dodali sami. V nastavitvah standardnih formul si lahko ogledate, kako so konfigurirane.

Z urejevalniki drsnikov lahko več dejavnikom v analitični formuli dodelite večjo težo. Bolj ko je drsniček pomaknjen v desno, večjo vrednost ima ta del formule.

V spodnjih opisih je v več možnostih uporabljena beseda *povezane rubrike*. Kadar je ena rubrika posplošitev bolj specifične rubrike, se bolj specifična rubrika imenuje *povezana rubrika* bolj posplošene rubrike.

Na primer: *Glava*; *bolečina*; *zjutraj*; *zatečeno stanje* je bolj specifičen kot *Splošnosti*; *bolečina*; *zjutraj*; *zatečeno stanje*.

Podobno je *Glava*; *bolečina*; *zjutraj*; *hujša* bolj specifičen kot *Glava*; *bolečina*.

<i>Ime formule</i>	Tu lahko vnesete ime, ki ga želite dati tej formuli, na primer Fred-1. To je ime, ki bo prikazano za analizo v modulu <i>Analysis</i> .
<i>Razred za odpravo napak</i>	Določa pomembnost, ki jo bo imela ocena sredstva v rubriki (od 1 do 4). V najnižji nastavitvi se vsa zdravila obravnavajo kot sredstva stopnje 1. Zaradi višje nastavitve je razlika med razredoma 1 in 4 pomembnejša.
<i>Povprečna ocena v povezanih rubrikah</i>	Če je ta možnost označena, se ocena pravnega sredstva popravi z ocenami istega pravnega sredstva v povezanih rubrikah. Če je zdravilo v rubriki ocenjeno z oceno 4, v večini sorodnih rubrik pa z nižjo oceno, se uporabi nižja povprečna vrednost. Če to ni označeno, se popravki vedno ocenijo z oceno, ki je za popravek navedena v danem rubriki.
<i>Sorodne rubrike</i>	Če se sredstvo pojavlja tudi v sorodnih rubrikah, se mu lahko dodeli dodatna pomembnost, če se pojavlja v več sorodnih rubrikah kot druga sredstva. Višja kot je ta nastavitve, bolj se pojavljanje v sorodnih rubrikah šteje za pomembno.
<i>Majhna pravna sredstva</i>	Majhna zdravila so zdravila, ki v repertoarju niso široko zajeta, kot so polihrestni. Polikrestni se v analizi običajno pokažejo kot razmeroma pomembni, saj se pojavljajo v številnih rubrikah in imajo pogosto višje ocene. S to nastavitvijo je mogoče dati večji pomen manjšim sredstvom.
<i>Majhne rubrike</i>	Rubrike s številnimi sredstvi so pogosto zelo splošne rubrike. Zelo specifične rubrike imajo pogosto le majhno število pravnih sredstev. Te manjše rubrike so lahko zelo pomembne za analizo, saj lahko pokažejo na pravno sredstvo, ki bi bilo sicer spregledano. S takšno nastavitvijo je mogoče dati večji pomen sredstvom v teh manjših rubrikah.
<i>Popolnost simptomov</i>	Vsaka rubrika v repertoriju je kombinacija več vrst informacij. Nekatere rubrike govorijo le o časovni modaliteti. Druge rubrike govorijo o določenem pojavu v povezavi s časovno modaliteto ali podaljškom itd. itd. Bolj ko rubrika zajema več teh vidikov, bolj specifično opisuje simptom. S to nastavitvijo je mogoče dati večji pomen popolnim simptomom v primerjavi z generičnimi simptomi.
<i>Pokritost simptomov</i>	Vsako sredstvo se pojavlja v številnih simptomih in rubrikah. Čim več simptomov in rubrik zajema pravno sredstvo, tem pomembnejše je lahko pravno sredstvo za analizo. S to nastavitvijo lahko damo večji pomen zdravilom, ki pokrivajo večje število bolnikovih simptomov.
<i>Uporaba utežnih faktorjev</i>	Pri analizi lahko nastavitve uteži dodelite simptomom in rubrikam. Če je ta možnost označena, se te uteži uporabijo v analitični formuli. Če ta možnost ni označena, se nastavitve teže ne upoštevajo.
<i>Simptomi ravnotežja</i>	Ta nastavev določa, kako se uporablja funkcija izravnave simptomov analize <i>Complete Dynamics</i> . <i>Vedno</i> : Izravnava se izvede vedno. <i>Nikoli</i> : Izravnava ni izvedena. <i>Uporabniška izbira</i> : Nastavev se upravlja z gumbom  v modulu <i>Analiza</i> .
<i>Pravilno za polarne rubrike</i>	Ta nastavev določa način popravljanja polarnih rubrik. <i>Vedno</i> : Vedno pravilno za polarne rubrike. <i>Nikoli</i> : Ne popravljajte polarnih rubrik. <i>Uporabniška izbira</i> : Nastavev se upravlja z gumbom  v modulu <i>Analiza</i> .
<i>Polarna kompenzacija</i>	Določa, kako močno se popravljajo polarne rubrike. Z najvišjo nastavitvijo je zdravilo v celoti kompenzirano za pojavljanje zdravila v polarni rubriki.
<i>Odsoten v polarnem bonusu</i>	Da bi dali večji pomen zdravilu, če ga ni v polarni rubriki.

Zelo preprosto je ustvariti analitično formulo, ki je popolnoma neuporabna. Te možnosti uporabite pametno. Standardne formule so bile izbrane zelo skrbno.

Natančno prilagajanje formul

Ko pripravljate lastne formule za analizo, se zdi težko prilagoditi vse nastavitve na optimalne vrednosti.

V modulu *Analiza* lahko rezultate prikažete glede na njihovo relativno pomembnost in ne samo glede na njihove ocene od 1 do 4.

To je lahko v veliko pomoč pri preverjanju, ali ima vaš analitični obrazec zelene nastavitve.

Za več podrobnosti glejte razdelek *Modul za analizo / Dodatne teme / Prikaži relativno pomembnost*.

Kakovost analize

Umetnost izdelave dobre analize

Dobra analiza bolnikovih simptomov je umetnost, katere obvladovanje ni samoumevno. V različnih šolah lahko poučujejo različne metode. Posamezni učitelji spodbujajo svoje osebne stile in teorije. Dobra analiza je za vsakega bolnika drugačna.

Orodje *Kakovost analize* vam pomaga preprečiti pogoste napake in tako poveča možnost za uspeh.

Kazalnik kakovosti

V modulu Analysis je na vrhu strani majhen barvni gumb.
Barva označuje kakovost analize.


- Zelena barva: Zelena: le manjša priporočila za izboljšave.
- Rumena barva: Kakovost je mogoče izboljšati.
- Rdeča: Ta analiza ima resne težave.

S klikom na kazalnik kakovosti si lahko ogledate poročilo s predlogi za morebitne izboljšave.

Modul Materia Medica

Odpiranje modula Materia Medica

Pojdite v modul Materia Medica s klikom na zavihek *MM*. (Možnost menija *Oglejte si / Materia Medica, H-M*).

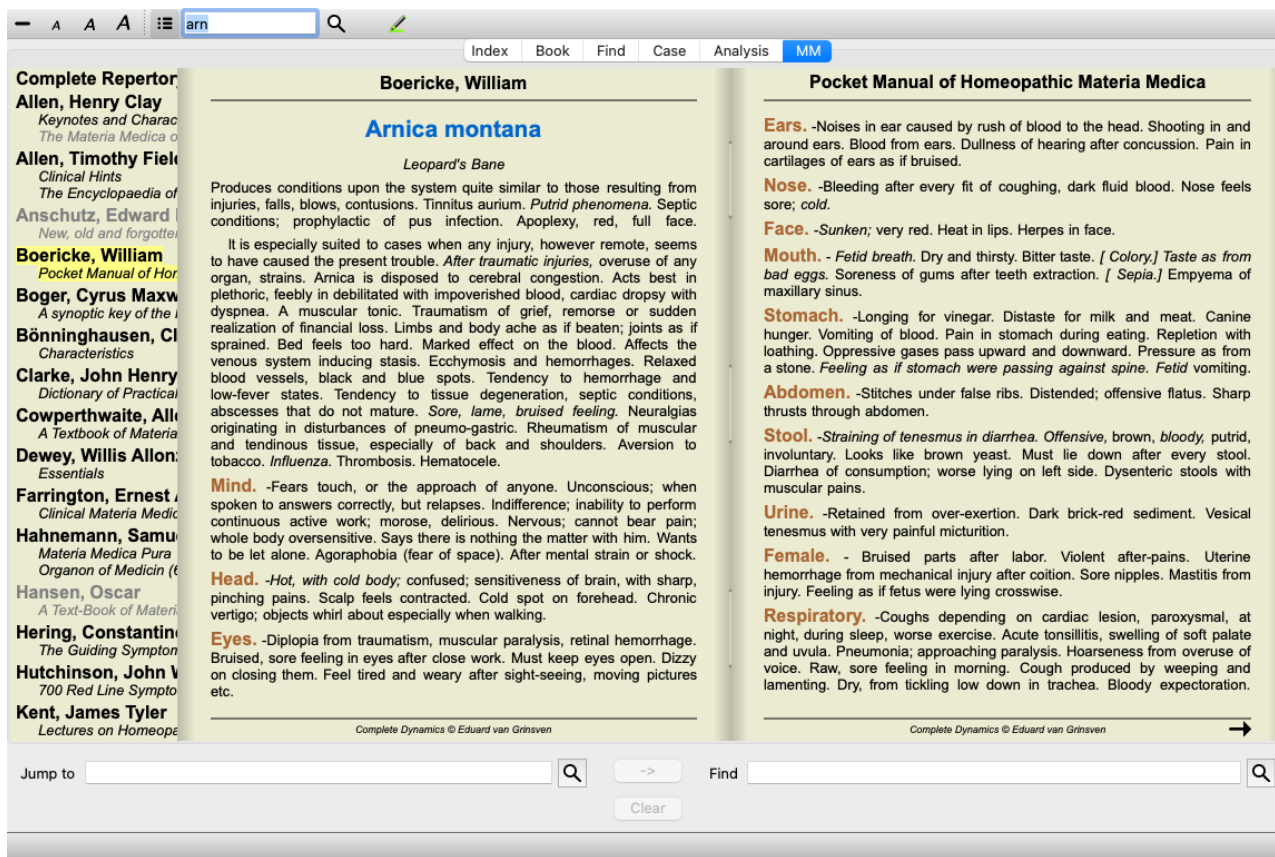


Izbira pravnega sredstva


V zgornje polje v orodni vrstici lahko vnesete okrajšavo zdravila. Če kratice ne poznate, lahko poiščete zdravilo s pritiskom na 🔍 za poljem.

Izbira knjige

Ko izberete zdravilo, lahko izberete katerega koli od virov Materia Medica, ki so navedeni na levi strani zaslona. Če izbranega sredstva ni v knjigi, je naslov knjige natisnjen v sivi barvi.

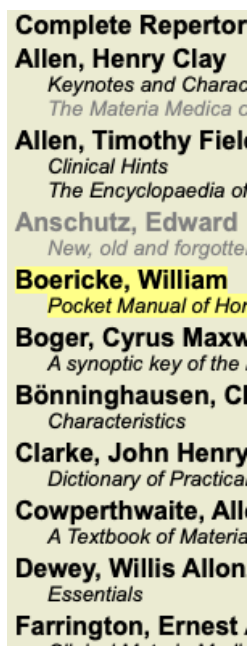


Če želite za branje uporabiti čim več prostora, lahko kazalo skrijete z gumbom orodne vrstice ☰.

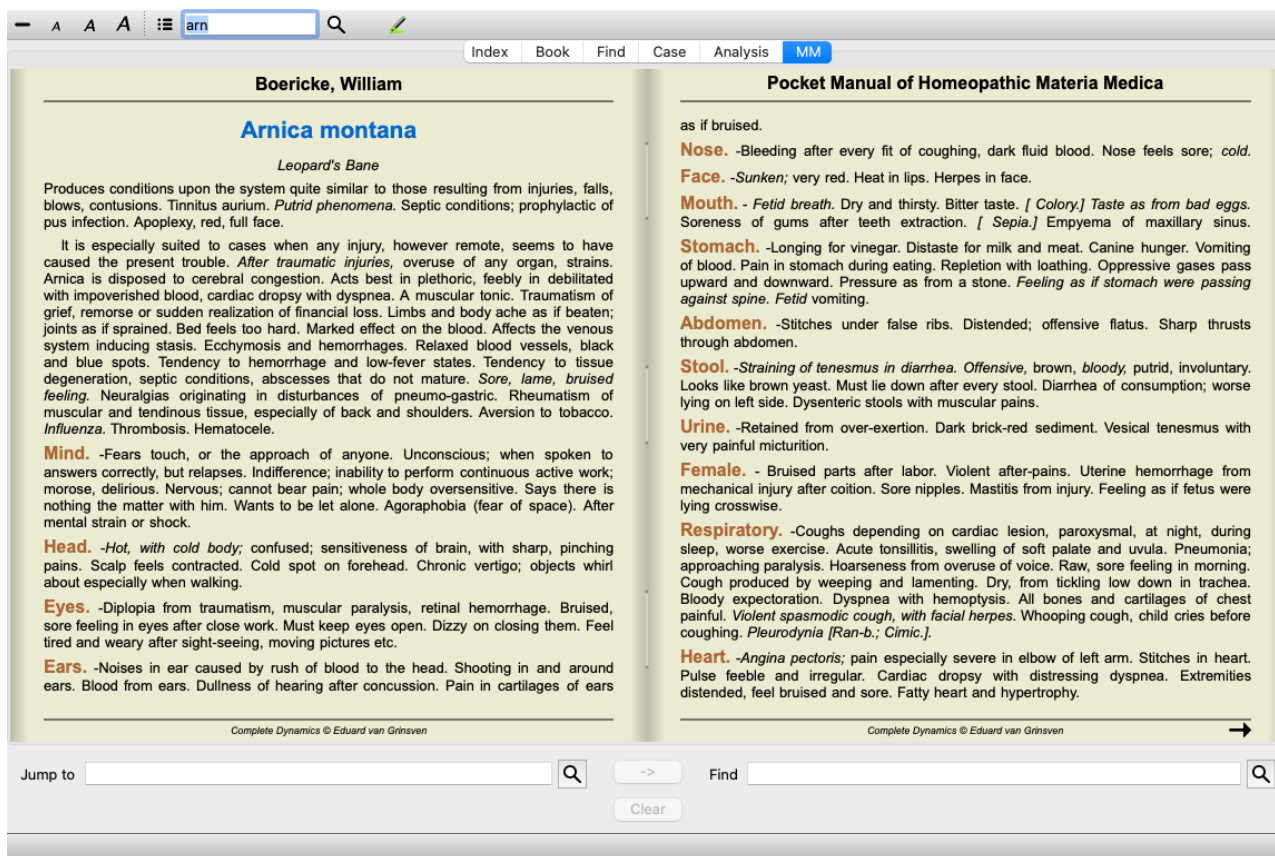

Indeks pravnih sredstev

Če si želite ogledati vsa sredstva, ki so na voljo v knjigi, odprite priročni meni na naslovu knjige. (Možnost priročnega menija *Indeks*).

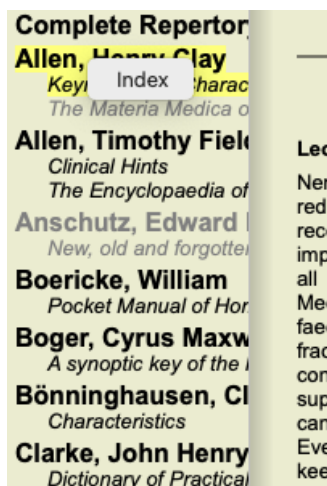

Prikazan je seznam vseh zdravil v knjigi. Knjigo za zdravilo lahko odprete tako, da kliknete na ime zdravila.

Allen, Henry Clay / Keynotes and Characteristics

Abrotanum
Aceticum acidum
Aconitum napellus
Aesculus hippocastanum
Aethusa cynapium
Agaricus muscarius
Agnus castus
Allium cepa
Aloe socotrina
Alumina
Ambra grisea
Ammonium carbonicum
Ammonium muriaticum
Amylenum nitrosum
Anacardium orientale
Anthracinum
Antimonium crudum
Antimonium tartaricum
Apis mellifera
Apocynum cannabinum
Argentum metallicum
Argentum nitricum
Arnica montana
Arsenicum album
Arum triphyllum
Asarum europaeum
Asterias rubens
Aurum metallicum

Baptisia tinctoria
Barvta carbonica

Razpoložljive knjige in spletna mesta

V modulu Materia Medica je na voljo več knjig. Razpoložljivost teh knjig se lahko razlikuje glede na jezikovne nastavitve.

Modul Materia Medica vključuje več spletnih strani, ki zagotavljajo informacije o zdravilih. Razpoložljivost teh spletnih mest je odvisna od vaših jezikovnih nastavitev.

Upoštevajte, da vsebina spletnih strani ni del programa *Complete Dynamics*, temveč je za vaše udobje prikazana le v modulu Materia Medica.

Nekatera spletna mesta lahko zahtevajo plačilo za dostop do informacij. To je izključno pravilo lastnika spletnega mesta in nikakor ni povezano z vašo licenco *Complete Dynamics*.

Obratna Materia Medica

Na spletni strani *Reverse Materia Medica* so prikazani najpomembnejši simptomi iz repertorija za določeno zdravilo, kot jih najdemo v repertoriju.

Človeški strokovnjaki ne razlagajo, kot je to običajno v običajnih Materia Medica, temveč *Reverse Materia Medica* v celoti temelji na strokovnem znanju, shranjenem v repertoriju.

Če želite odpreti rubriko v modulu *Book*, preprosto dvakrat kliknite nanjo.

Pomembnejši simptomi so natisnjeni bolj kot manj pomembni, tako da lahko zlahka ločite relativno pomembnost različnih simptomov.

Rezultate lahko spremenite z naslednjimi gumbi:

— Manj simptomov.

+ Več simptomov.

Filter V spustnem seznamu za filtriranje lahko izberete merila za rubrike, ki bodo prikazane v *Reverse Materia Medica*:

Samodejno Samodejno se izberejo najustreznejše rubrike.

Potrjeni simptomi Uporabljajo se samo sredstva razreda 3 ali 4. To so simptomi, ki so potrjeni v praksi.

Popolni simptomi Uporabljajo se samo popolni simptomi. Simptomi so popolni, če združujejo vsaj 3 različne vrste informacij. Primer: Primer: Čas + lokacija + podaljšek.

Potrjeno in dokončano Prikazani so samo *potrjeni in popolni* simptomi.



Simptomi rdeče črte Prednost daje simptomom, ki se na povezan način pojavljajo v več delih repertoarja.

Ključni prispevki Zdravilo ima oceno 3 ali 4, vsa druga zdravila pa imajo nižjo oceno.

Edinstvene rubrike Prikažite samo rubrike, v katerih je sredstvo edino pojavljajoče se sredstvo.

 Vkllop/izklop diferencialne diagnoze. Če je vklapljen, prikaže druga pomembna zdravila za ta simptom.

Alternativna zdravila v Reverse Materia Medica

Po pritisku na gumb  v orodni vrstici se prikaže več dodatnih sredstev za simptome: (Možnost menija *Oglejte si / Pravna sredstva / Prikaži sredstva DD*, gumb orodne vrstice , možnost priročnega menija *Pravna sredstva / Prikaži sredstva DD*).

MIND

ANGUISH; heart complaints, in; angina pectoris, in: **ARN** (+1) **dd:** aml-n
ANSWER, answering, answers; stupor returns quickly after: **ARN** (+26) **dd:** BAPT
HYOS
DESPAIR; concussion, after: **ARN**
DULLNESS; injuries of head, after: **ARN** (+9)
FEAR; touch, of; gout, in: **ARN** (+1) **dd:** colch
FORGETFULNESS; injuries, after: **ARN** (+8) **dd:** HYPER
INDIFFERENCE, apathy; fever; during: **ARN** (+39) **dd:** CHIN CON OP
PH-AC PHOS SEP
INDIFFERENCE, apathy; heat; during: **ARN** (+10) **dd:** PH-AC PULS Op Phos Sep
INDIFFERENCE, apathy; stool; after: **ARN** (+1) **dd:** cycl
RESTLESSNESS, nervousness; perspiration; during: **ARN** (+39)
STUPEFACTION, as if intoxicated; concussion of brain, after: **ARN**
STUPEFACTION, as if intoxicated; injury, after: **ARN** (+5) **dd:** cic con hell pul
rhus-t
STUPEFACTION, as if intoxicated; perspiration; during: **ARN** (+14) **dd:**
HYOS OP PH-AC PHOS RHUS-T
UNCONSCIOUSNESS, coma; brain complaints, in: **ARN** (+46) **dd:** APIS OP
UNCONSCIOUSNESS, coma; fever, during: **ARN** (+71)
UNCONSCIOUSNESS, coma; injury, after: **ARN** (+11) **dd:** CALEN
WEeping, tearful mood; cough; before: **ARN** (+7) **dd:** BELL BRY HEP ant-t ars
bor phos
WEeping, tearful mood; cough; during: **ARN** (+32) **dd:** BELL HEP NAT-M
HEAD
CONGESTION, hyperemia; chill; during: **ARN** (+26) **dd:** CHIN ARS CEDR MERC
SEP M-arct M-aust
CONGESTION, hyperemia; thirst, with: **ARN** (+3) **dd:** Mang Thuj bov
HEAT; chilliness; during: **ARN** (+24) **dd:** BELL BRY
HEAT; coldness, with; body, of: **ARN** (+42)
INFLAMMATION; meningitis; injuries, after: **ARN** (+5) **dd:** HEP HYPER
NAT-S OP bell
PAIN, headache; brain complaints, in: **ARN** (+23) **dd:** ACON
PAIN, headache; injuries, after: **ARN** (+40) **dd:** ACON NAT-S

HEAD (cont.)

PAIN, headache; injuries, after; concussion: **ARN** (+20) **dd:** ACON BELL
CHIN CIC HYPER KALI-BR Hell
PAIN, headache; injuries, after; fall, after a: **ARN** (+7) **dd:** CIC HYOS Thiosin
hyper nat-s rhus-t sul-ac
PAIN, headache; forehead; warmth; agg.: **ARN** (+14) **dd:** APIS
PAIN, headache; burning, smarting; coldness of body, with: **ARN** (+1) **dd:** coff-t
PAIN, headache; stitching; cough; during: **ARN** (+43) **dd:** BRY SABAD SULPH
SWELLING; children: **ARN** (+2) **dd:** RHUS-T Sil
EYES
CATARACT, opacity of lens; injuries, after: **ARN** (+17) **dd:** ACON
CATARACT, opacity of lens; operations, after: **ARN** (+5) **dd:** ACON ALUMN
SENEG STAPH rhus-t
DUST; agg.: **ARN** (+32) **dd:** ACON CALC HEP SIL STAPH SULPH
HEMORRHAGE; coughing agg.: **ARN** (+5) **dd:** HAM LED NUX-V carb-v cham
HEMORRHAGE; injuries, after: **ARN** (+5) **dd:** LED NUX-V bry erig sul-ac
INFLAMMATION; injuries, after: **ARN** (+28) **dd:** ACON CALC HEP SIL
STAPH SULPH
INFLAMMATION; injuries, after; foreign bodies, from: **ARN** (+7) **dd:** ACON HEP
SIL CALC PULS ham sulph
INJECTED; cough, during: **ARN**
PAIN; injuries, after: **ARN** (+6) **dd:** SYMPH BRY LED SULPH asar hyper
EARS
INJURIES, after: **ARN** (+13) **dd:** CAPS CHIN-S TELL Arist-cl Lach Nat-m
HEARING
IMPAIRED, difficult; injuries or blows, after: **ARN** (+5) **dd:** CHIN-S TELL carb-v
croc thiosin
NOSE
EPISTAXIS, hemorrhage; morning; agg.; blowing nose agg.: **ARN** (+34) **dd:** CHIN
LACH AGAR BOV CAUST PULS
EPISTAXIS, hemorrhage; bathing, washing; agg.: **ARN** (+23) **dd:** AM-C
ANT-S
EPISTAXIS, hemorrhage; bathing, washing; agg.; face: **ARN** (+21) **dd:** AM-C
EPISTAXIS, hemorrhage; cough; during: **ARN** (+44) **dd:** DROS IP

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort



Za vsak simptom je prikazanih največ 7 alternativnih zdravil.


V tem primeru boste videli, da je včasih prikazanih 7 sredstev, včasih pa manj. To je zato, ker se sredstva določene stopnje prikažejo le, če jih je mogoče prikazati VSE.

Če torej vidite sredstva z oceno 4 in oceno 3, to pomeni, da v tej rubriki ni drugih sredstev z oceno 4 ali 3, lahko pa obstajajo sredstva z oceno 2 ali 1, ki niso prikazana.

Če ne vidite nobenega zdravila, rubrika verjetno vsebuje 8 ali več enako pomembnih zdravil ali pa alternativnih zdravil sploh ni na voljo.

Podroben pregled rubrik


Če želite dobiti vse podrobnosti o vseh rubrikah, ki so prikazane v Reverzni Materiji zdravil, pritisnite gumb . (Možnost menija Analiza / Tabela, gumb orodne vrstice ). To bo ustvarilo začasno tabelo v slogu analize vseh rubrik, razvrščenih po repertoarnih oddelkih. Analiza je shranjena v vaši trenutni zadevi in bo izbrisana, ko zadevo zaprete.

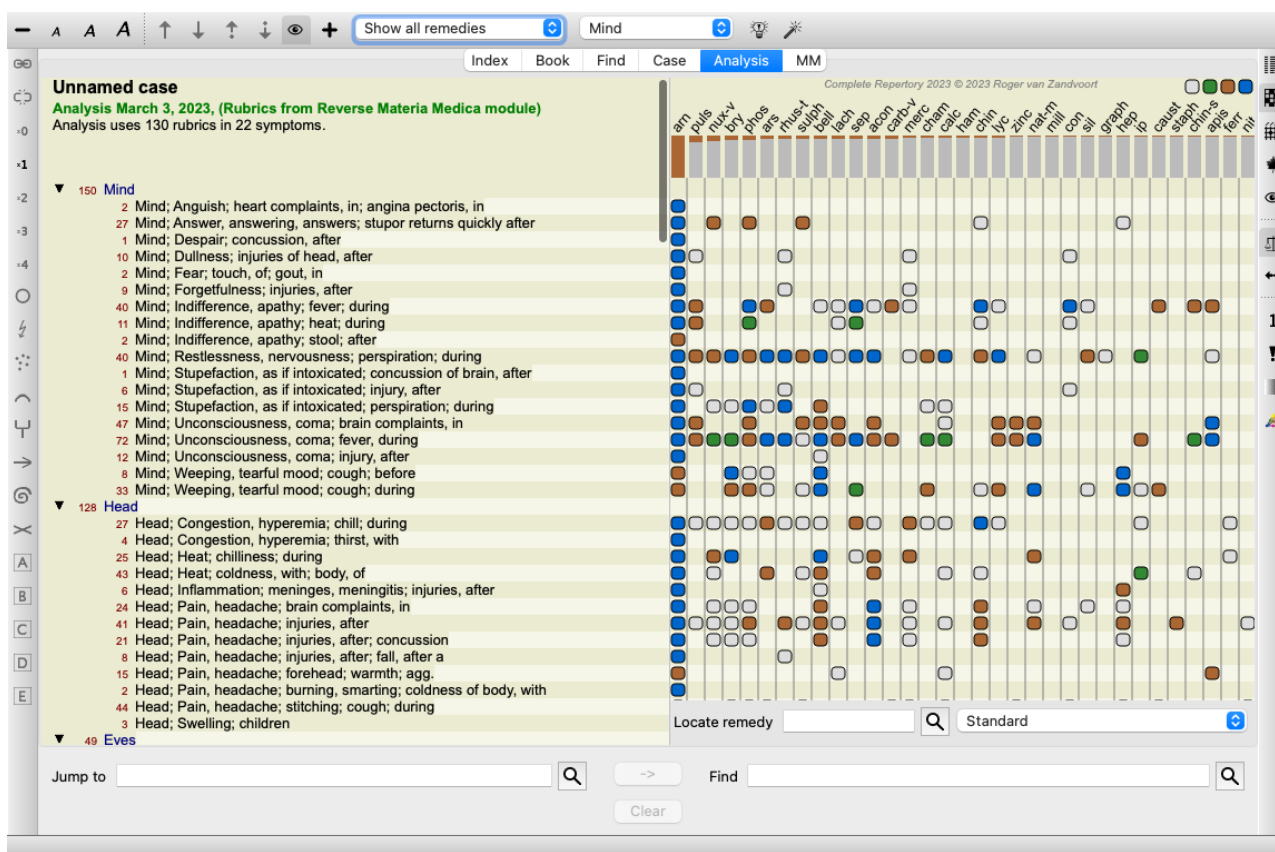


The screenshot displays the 'Complete Dynamics' software interface. At the top, there's a search bar and navigation tabs. The main window is divided into two panes. The left pane shows a list of symptoms under the heading 'Unnamed case'. The right pane shows a grid of remedies for these symptoms. The 'Mind' section lists 150 symptoms, and the 'Head' section lists 128 symptoms. The grid shows various remedies like ACON, BELL, CHIN, etc., with their corresponding potency and dosage. The interface is designed for detailed analysis of symptoms and remedies.

Obratna Materia Medica za kraljestva in družine

Poleg tega, da lahko za posamezno zdravilo sestavite obratno Materia Medica, lahko poiščete tudi najpomembnejše rubrike za določeno kraljestvo ali družino.

Če želite izbrati družino, vnesite ime med {}. Vneseno ime se mora ujemati z imenom ene od rubrik v poglavju Kraljestva in družine. Če želite poiskati ime, pritisnite gumb  in nato gumb *Skupine...*

Naslednji primer prikazuje obratno Materia Medica za {spiders}.

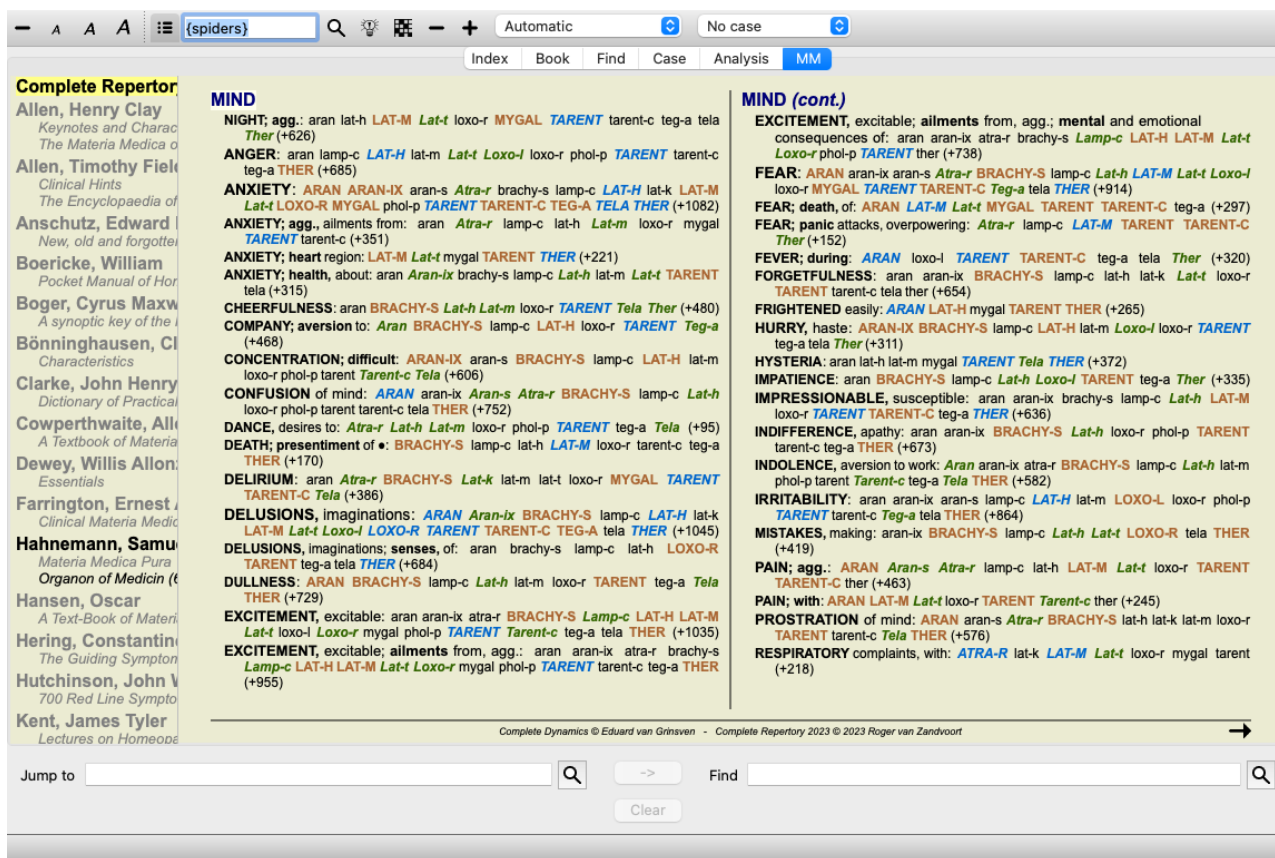

The screenshot shows the 'Complete Dynamics' software interface. At the top, there's a search bar with 'spiders' entered. Below it, there are tabs for 'Index', 'Book', 'Find', 'Case', 'Analysis', and 'MM' (selected). The main content area is divided into two columns. The left column lists authors like Allen, Henry Clay; Allen, Timothy Field; Anschutz, Edward; Boericke, William; Boger, Cyrus Maxw; Bönninghausen, Cl; Clarke, John Henry; Cowperthwaite, All; Dewey, Willis Allon; Farrington, Ernest; Hahnemann, Samu; Hansen, Oscar; Hering, Constantine; Hutchinson, John V; Kent, James Tyler. The right column shows the 'MIND' section with various symptoms and remedies listed in a structured format, including 'NIGHT; agg.: aran lat-h LAT-M Lat-t loxo-r MYGAL TARENT tarent-c teg-a tela THER (+626)', 'ANGER: aran lamp-c LAT-H lat-m Lat-t Loxo-l loxo-r phol-p TARENT tarent-c teg-a THER (+685)', etc. At the bottom, there's a 'Jump to' field and a 'Find' button.

Dodatna Materia Medica

Dodatne knjige Materia Medica, ki so jih ustvarili drugi uporabniki, lahko preprosto dodate v *Complete Dynamics*. Knjiga Materia Medica je shranjena v datoteki, ki jo lahko delite z drugimi uporabniki. Če želite namestiti novo knjigo, kopirajte datoteko v mapo *Complete Dynamics*, ki se nahaja v mapi *Documents*. Nato ustavite in znova zaženite program *Complete Dynamics*. Nova knjiga mora biti nato samodejno vidna v razdelku *MM*.

Za ustvarjanje novih knjig Materia Medica je potrebna licenca za *Master Edition*.

Materia Medica hitri pregled

To je lahko zelo priročno za hiter pregled besedila Materia Medica več knjig hkrati.

Okno *Materia Medica s hitrim pregledom* prikazuje besedilo več kompaktnejših knjig Materia Medica hkrati. (Možnost menija *Oglejte si / Materia Medica hitri pregled*, možnost priročnega menija *Materia Medica hitri pregled*).

Cyclamen Europaeum

Pharmacokinship - Remedy Relations (Nambison)

Followed well by: Phos., Puls., Rhus-t., Sep., Sulph.

Antidoted by: Camph., Coff., Puls.

Duration of action: 14 - 20 d

Dose: 3 attenuation

700 Red Line Symptoms (Hutchinson)

1. - Flickering before the eyes, as of various colours, glittering needles, fiery specks and sparks.

Keynotes of the homeopathic Materia Medica (Lippe)

Sow Bread

Pressing, drawing and tearing pain, principally in the periosteum. Chilblains of the feet.

As long as he walks about he feels well with the exception of languor,

but as soon as he sits down, especially in the evening, he suffers various inconveniences.

Thirstlessness.

Menses too profuse.

Bad effects from eating much fat food (pork).

Aggravation in the evening and while at rest.

Amelioration whilst walking.

Keynotes and Characteristics (Allen)

Sow Bread Primulaceae

Best suited for leucophlegmatic persons with anaemic or chlorotic conditions; easily fatigued, and in consequence not inclined to any kind of labor; feeble or suspended functions of organs or special senses. *Pale, chlorotic; deranged menses* (Ferr., Puls.), accompanied by vertigo, headache, dim vision. Pains; pressive, drawing or tearing of parts where bone lie near the surface. Ailments: from suppressed grief and terrors of conscience; from duty not done or bad act committed. Great sadness and peevishness. irritable.

Close

Okno ostane odprto, dokler ga izrecno ne zaprete. Tako boste lahko hitro primerjali sredstva. Drugo zdravilo izberete tako, da preprosto kliknete na ime zdravila kjer koli v modulih *Book*, *Find* ali *Analysis*.

Upravljanje lastne Materia Medica

Ustvarjanje nove knjige

Ustvarite lahko novo knjigo Materia Medica. (Možnost menija *MM / Ustvarite novo knjigo Materia Medica*).

Najprej morate vnesti ime za novo datoteko. Ta datoteka je shranjena v mapi *Complete Dynamics* v mapi *Documents*. Uporabite smiselno ime.

Nato morate vnesti podatke o svoji knjigi.

The screenshot shows a web form for entering book information, organized into three main sections:

- Author:** Contains four input fields: 'Family name' (with 'Feelgood' entered), 'First name' (with 'John' entered), 'Middle name' (empty), and 'Initials' (with 'J.W.' entered).
- Copyright:** Contains two input fields: 'Copyright holder name' (empty) and 'Copyright year' (with '0' entered and a small up/down arrow icon).
- Book info:** Contains three input fields: 'Book title' (with 'The Materia Medica of demonstrations' entered), 'Short name' (with 'Feelgood demonstration' entered), and 'Language' (a dropdown menu showing 'English' with a blue arrow icon).

At the bottom of the form are two buttons: 'Cancel' and 'OK'.

Za ime avtorja vnesite vsa polja, ki jih poznate, družinsko ime je obvezno.

Naslov knjige je uradni naslov knjige.

Kratko ime je kratko besedilo za hitro omembo knjige, ne da bi bilo treba navesti celotno ime avtorja in naslov. To kratko ime se uporablja v modulu *Find*, ko prikazuje rezultate iskanja v *Materia Medica*.

Če morate po ustvarjanju knjige te podatke spremeniti, odprite urejevalnik za katero koli sredstvo in kliknite gumb *Podrobnosti*.


Sredstva za urejanje

Če želite urediti pravno sredstvo, najprej izberite pravo knjigo in pravo pravno sredstvo. Nato lahko odprete urejevalnik. (Možnost menija *MM / Edit Materia Medica*). Če je možnost menija onemogočena, urejanje ni dovoljeno, ker niste lastnik knjige.


Urejevalnik podpira več elementov oblikovanja besedila.

- Odstavki.
- Prekinitve vrstic.
- Besedilni slogi krepko, poševno, podčrtano, zgornji in spodnji indeks.


Vsi drugi slogi, ki jih boste uporabili, ne bodo upoštevani. Besedilo lahko urejate neposredno v urejevalniku ali pa ga prilepite iz odložišča računalnika.

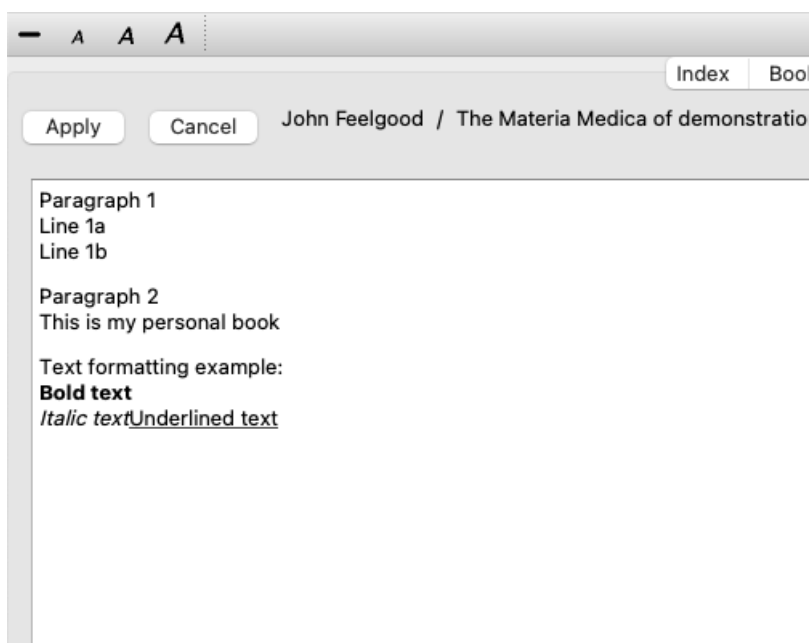


Ko ste pripravljeni, kliknite gumb *Uporabi*, da se vrnete v običajni pogled knjige.

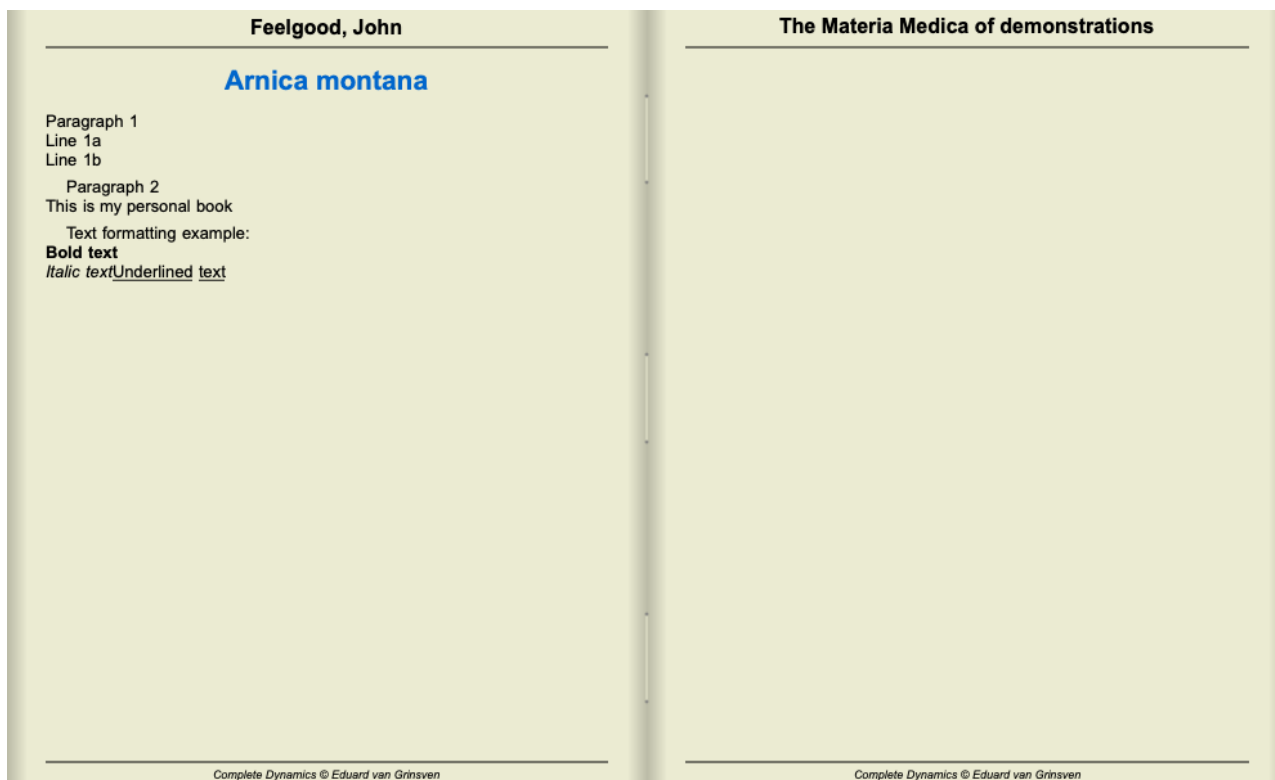

Če želite Materia Medica razvrstiti v posamezne razdelke, dodajte vrstice, ki se začnejo s #####, nato pa sledi oznaka.

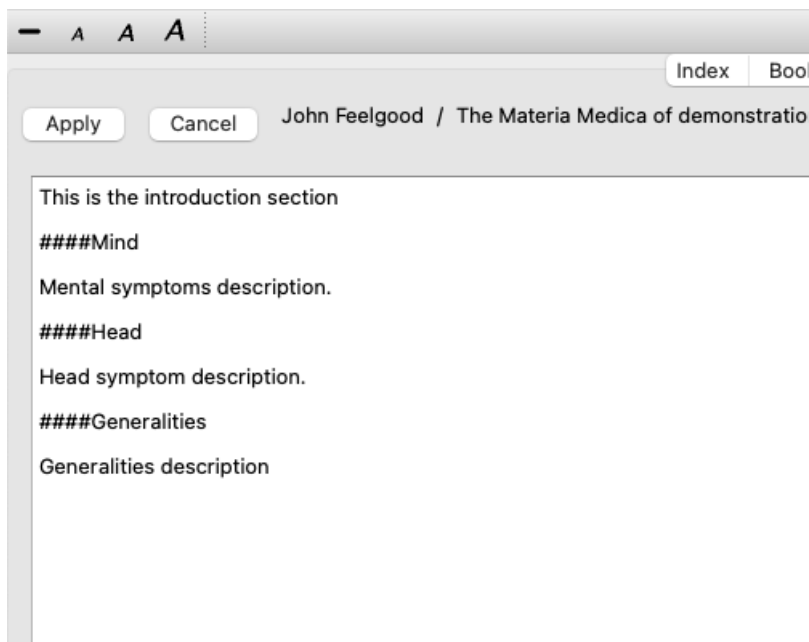

Ta primer ustvari tri posamezne razdelke.

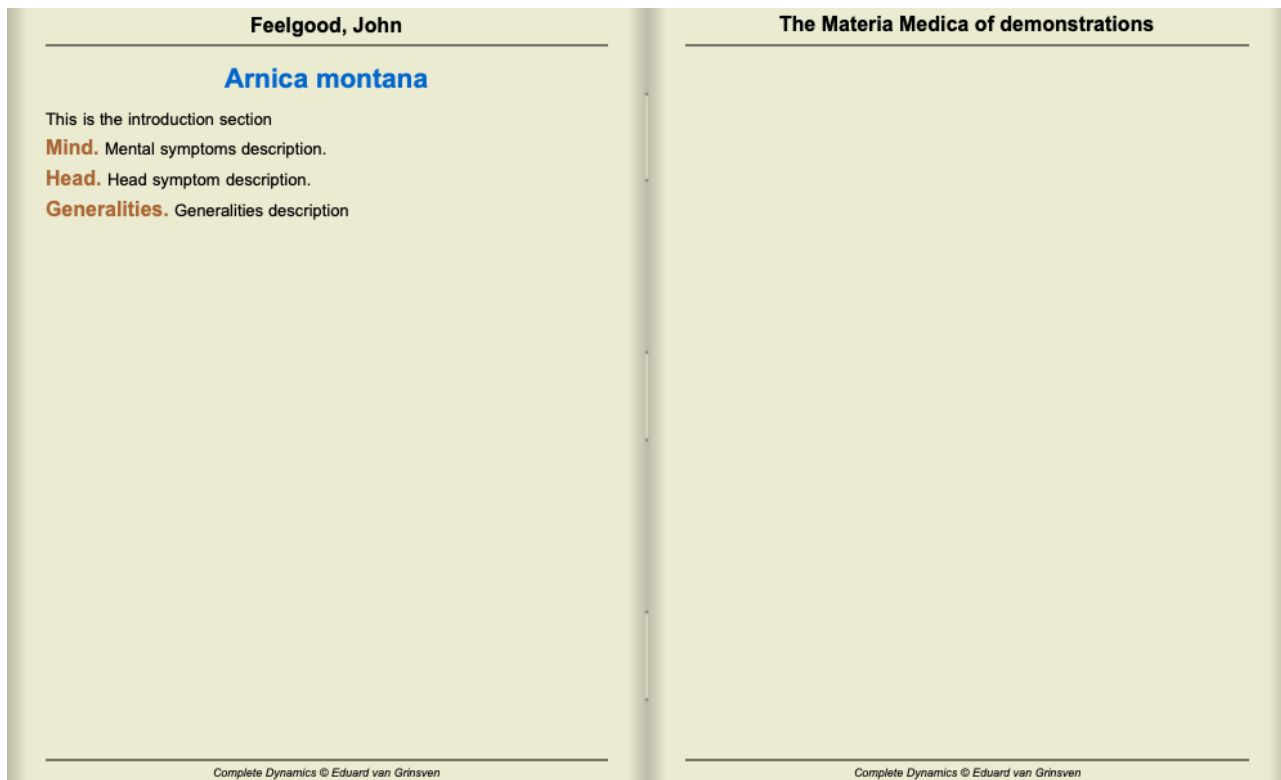

Ustvarjanje dodatnih poglavij

Poleg urejanja posameznih pravnih sredstev lahko ustvarite tudi poglavja, ki so neodvisna od posameznega pravnega sredstva. Če želite ustvariti dodatna poglavja, odprite urejevalnik za katero koli sredstvo in kliknite gumb *Poglavja*. Odprlo se bo pogovorno okno, v katerem boste lahko ustvarili poglavja in jih razvrstili po zaporedju.

Vsa ustvarjena poglavja bodo prikazana v kazalu. (Možnost priročnega menija *Indeks*).

Deljenje svoje Materia Medica z drugimi

Če želite svoje knjige Materia Medica deliti z drugimi, potrebujete le datoteko, ki ste jo ustvarili. Datoteka vaše knjige Materia Medica ima končnico *.rep*.

Upoštevajte, da drugi ne bodo mogli dodatno urejati vaše knjige. Urejanje je omejeno na izvirnega avtorja.

Informacije o pravnem sredstvu

Podrobne informacije o pravnem sredstvu

Kot primer si oglejmo rubriko *Splošnosti; Hrana in pijača; jabolka; želje*.

FOOD	GENER.
FOOD and drinks; apples (cont.)	
desires: adam Adon ALOE aml-n ANT-T ap-g arge-p Asaf bit-at bro-s-g Cham cit-n cub dama-d fel GUAI Hafn helod-c kali-p lac-drom lsd lyss Manc menth merl meteo-a ory-c ozon phos polyst prun pyrus-c Ruta sabad sep stront-c SULPH tax TELL toxop-p Tritic-v vip • Food and drinks; cool things, like apples, desires (2) • Food and drinks; fruits; desires (233) • eleven thirty pm., on falling asleep: fel	

Če želite izvedeti več o zdravilu v rubriki, se najlažje premaknete z miško nad ime zdravila in si ogledate območje za sporočila v spodnjem levem kotu okna.

Če miško premaknete nad **ANT-T**, se prikaže sporočilo:

ant-t = Antimonium tartaricum (Allen, Bönninghausen, Lilienthal, Lippe)

Zdaj ne veste le, da je Antimonium v tretjem razredu (po načinu tiskanja), ampak tudi, da je njegovo celotno ime *Antimonium tartaricum*, in da je v tej rubriki zato, ker so ta podatek prispevali štirje omenjeni avtorji.

Če želite več informacij, dvakrat kliknite **ANT-T**.

Prikaže se okno Remedy Information:

Rubric: GENERALITIES; FOOD and drinks; apples; desires.	
Remedy abbreviation: ant-t, grade 3. Rank 1 out of 42 in rubric.	
Standard name: Antimonium tartaricum.	
English name: Tartrate of antimony & potash.	
Occurrences in related rubrics: 2, average grade: 2.0. (similar rubrics: 1, sub rubrics: 1, sections: 1).	
Sources.	
Allen T F	<i>Encyclopedia of Pure Materia Medica</i> , 1874.
Allen T F	<i>Index of Encyclopedia</i> , 1876.
Bönninghausen C M von	<i>Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht-antipsorischen Arzneien with handwritten annotations</i> , 1833.
Knerr C B	<i>Repertory of Hering's Guiding Symptoms</i> , 1896.
Lilienthal S	<i>Homoeopathic Therapeutics</i> , Jain. B. (New Dehli), 1890.
Lippe A von	<i>Keynotes and Red line symptoms of Materia Medica</i> , 1915.
Saine A	<i>Materia Medica Pura Project</i> , 2018.
Trinks C F & Müller C	<i>Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III</i> , T.O. Weigel (Leipzig), 1847.

Close

Pojavljanje v sorodnih rubrikah

Sorodne rubrike so rubrike, ki so nekako povezane z rubriko, ki jo pregledujete za to sredstvo.

V tem primeru so te rubrike:

Splošnosti; hrana in pijača; kul stvari, kot so jabolka, želje

Splošno; Hrana in pijača; jabolka, želje; voda, z željo po hladnem

Obe rubriki vsebujeta tudi *ant t*.

Večje kot je število pojavitev v sorodnih rubrikah in večja kot je povprečna teža v teh rubrikah, večjo pomembnost lahko pripišemo sredstvu.

Podobne rubrike

Podobni rubriki predstavljajo pojavljanje sredstva v rubrikah s podobnimi, vendar bolj specifičnimi informacijami kot zadevna rubrika. Pri zelo specifičnih rubrikah je število podobnih rubrik večinoma, če ne vedno, enako 0, toda bolj splošna kot je zadevna rubrika, višje je lahko število. Na splošno večje število podobnih rubrik v rubrikah pomeni, da je zadevno sredstvo bolj splošno pomembno, saj je več potrditvev tega sredstva v ustreznih rubrikah drugje v repertoriju.

Za ta primer je podobna rubrika *Splošnosti; Hrana in pijača; kul stvari, kot so jabolka, želje*, ki vsebuje tudi *ant-t* (avtor Allen).

Opomba: Na podoben način je rubrika *jabolka; želje* sama podobna rubriki *sadje; želje*. V tej rubriki *ant-t* je število podobnih rubrik 2.

Opomba: Podobne rubrike štejejo podrobnejše rubrike in ne bolj splošne rubrike. Pojavitev sredstva v bolj splošni rubriki ne poveča pomembnosti sredstva v zadevni rubriki.

Podrubrike

Ne razlikuje se od podobnih rubrik, le da so povezane rubrike v podrubrikah zadevne rubrike.

Na splošno večje število podrubrik pomeni, da je pravno sredstvo pridobljeno iz več virov in ga je zato mogoče šteti za pomembnejše. V tem primeru je podrubrika *voda z željo po hladni*.

Opomba: v navedeni rubriki *sadje; želje* pogostost podrubrik za *ant-t* je 3.

Oddelki

Sorodne rubrike so lahko kjer koli v repertoarju. Če so povezane rubrike v več različnih razdelkih (poglavjih), se zdravilo lahko šteje za pomembnejše.

Viri

Našteje vse vire, iz katerih izvira pravno sredstvo. To vključuje vsaj ime avtorja, naslov knjige ali revije in leto izida.

Avtorske številke

Če ste že prej delali s spletno stranjo *MacRepertory*, ste morda navajeni, da namesto imen avtorjev uporabljate številke avtorjev. V nastavitvah preferenc lahko aktivirate možnost *Številke avtorjev*. Za podrobnosti glejte razdelek *Preferences*.

V oknu z informacijami o pravnem sredstvu bodo nato prikazane tudi številke avtorjev:

Rubric: GENERALITIES; FOOD and drinks; apples; desires.

Remedy abbreviation: ant-t, **grade** 3. Rank 1 out of 42 in rubric.

Standard name: Antimonium tartaricum.

English name: Tartrate of antimony & potash.

Occurrences in related rubrics: 2, **average grade:** 2.0.
(**similar rubrics:** 1, **sub rubrics:** 1, **sections:** 1).

Sources.

Allen T F	(36)	<i>Encyclopedia of Pure Materia Medica</i> , 1874.
Allen T F	(36)	<i>Index of Encyclopedia</i> , 1876.
Bönninghausen C M von	(5)	<i>Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht-antipsorischen Arzneien with handwritten annotations</i> , 1833.
Knerr C B	(54)	<i>Repertory of Hering's Guiding Symptoms</i> , 1896.
Lilienthal S	(11)	<i>Homoeopathic Therapeutics</i> , Jain.B. (New Dehli), 1890.
Lippe A von	(22)	<i>Keynotes and Red line symptoms of Materia Medica</i> , 1915.
Saine A	(809)	<i>Materia Medica Pura Project</i> , 2018.
Trinks C F & Müller C	(4)	<i>Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III</i> , T.O. Weigel (Leipzig), 1847.

Close

Polje za preskok na

Namen

Polje *Skok na* na spodnji levi strani okna se uporablja za hiter skok na določeno rubriko v repertoarju.

Z njo lahko hitro preidete na znane rubrike.

Če niste prepričani, kaj iščete, namesto tega uporabite polje *Find*; polje *Jump to* vam pomaga pri hitri navigaciji, če veste, kam želite iti.

Premikanje fokusa tipkovnice


Da bo polje *Jump to* sprejemalo poteze tipkovnice, ga je treba najprej izbrati.

Če enkrat ali dvakrat pritisnete tipko Tab, se fokus premakne na polje *Jump to*. (Možnost menija *Oglejte si / polje "Skok na, ⌘-J*).

Če želite takoj skočiti nazaj v knjigo, pritisnite tipko Enter.


Polje lahko seveda kliknete tudi z miško.

Polje ima fokus tipkovnice

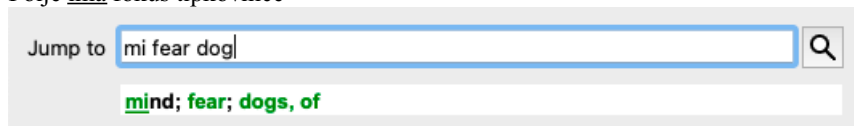

The screenshot shows the 'Jump to' search box. The input field contains the text 'mi fear dog' and is highlighted with a blue border, indicating it has focus. Below the input field, the search results 'mind; fear; dogs, of' are displayed in green text.

Polje ne ne ima fokus

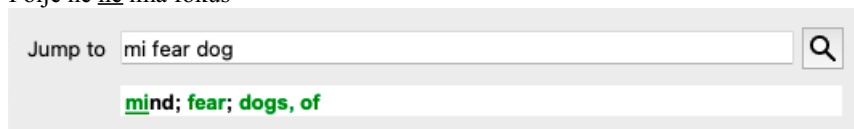

The screenshot shows the 'Jump to' search box. The input field contains the text 'mi fear dog' and is not highlighted with a blue border, indicating it does not have focus. Below the input field, the search results 'mind; fear; dogs, of' are displayed in green text.

Uporaba polja

V polje *Jump to* vpišite prve črke rubrike, na katero želite skočiti. Deli rubrike so ločeni s presledkom.

V zgornjem primeru se preskoči rubrika *Mind; Fear, dogs of*.

Vnesti morate le najmanjše število črk, ki so potrebne za identifikacijo vsakega dela rubrike. V tem primeru bi zadostoval vnos *m fe dog*.

Med vnašanjem so na voljo povratne informacije o razlagi, ki so prikazane neposredno pod poljem *Jump to*.

Poleg tega se med pisanjem knjiga ob vsakem pritisku tipke takoj preklopi na novo rubriko.

Na kratko: če se osredotočite na knjigo, pritisnite Tab, vnesite nekaj črk za prehod na rubriko in pritisnite Enter, da se ponovno osredotočite na knjigo. Z nekaj vaje je ta navigacija zelo učinkovita.

Za primer vzemimo rubriko *Um; strah; psi* iz in pogledjmo, kaj se zgodi med tipkanjem.

Prvi *m* se interpretira kot *mind*. V oklepaju so navedene 3 možnosti, ki se prav tako začenjajo z *m*.

Upoštevajte, da je del besede, ki je interpretiran kot morda pravilen, natisnjen v zeleni barvi (*m* v *um*, *usta*, *moški*, *mirillijeve teme*).



The screenshot shows the 'Jump to' search box. The input field contains the text 'm' and is highlighted with a blue border. Below the input field, the search results 'mind (mouth / male / mirilli's themes)' are displayed in green text.

Ko pritisnete preslednico, je ta del končan. *Mind* je potrjena možnost izmed 4 možnosti.



The screenshot shows the 'Jump to' search box. The input field contains the text 'm' and is highlighted with a blue border. Below the input field, the search results 'mind' are displayed in green text.

Zdaj se začne drugi del imena rubrike. *f* se interpretira kot *popoldne*, kar je prva možna možnost.



The screenshot shows the 'Jump to' search box. The input field contains the text 'm f' and is highlighted with a blue border. Below the input field, the search results 'mind; forenoon (faces / facetiousness / fails / failure... / faint-hearted / fai)' are displayed in green text.


Ne iščemo *forenoon*, zato vnesite še eno črko. Zdaj je izbran *fear*, ostalo pa je še nekaj drugih možnosti.

Črtice za besedami (npr. *nahranjen...*, *občutek...*) kažejo, da je besedilo rubrike dejansko daljše (*nahranjen*, *želi biti* / *občutek*, *izguba*), vendar so bile dodatne besede izpuščene, da bi ostalo več prostora za druge možnosti.

Jump to 


mind; fear (**fearlessness** / **feces** / **fed...** / **feeling...** / **feigning** / **fever**)

Ponovno pritisnite na prostor in potrdite, da je to pravilno.

Jump to 


mind; fear

d vodi do podnevi le.

Jump to 


mind; fear; daytime only (**day...** / **delirium...** / **delirium...** / **delivery...** / **delu...**)

storite in se preusmerite na spletno stran zdravniki.

Jump to 

mind; fear; doctor, physician (**dogs...** / **dominate...** / **dominated...** / **door** / ...)

In pes daje res želite. Knjiga je odprta na *Um; strah; psi, od.*

Jump to 

mind; fear; dogs, of

Pritisnite Enter in že ste tam, kjer ste želeli biti!

Opomba: *psov, od* je v celoti natisnjen v zeleni barvi. To pa zato, ker je to edina možna razlaga *pes* v tem kontekstu.

um je natisnjen samo prvi *m* v zeleni barvi, ker obstajajo tudi alternative, ki se začnejo z *m*.

strah je natisnjen z dvema zelenima črkama, ker je *fe* edinstven. Nadomestne *fekalije, hranjene, občutek, pretvarjanje* itd. se prav tako začnejo s *fe*.

Delati napake je človeško


Seveda ne poznate celotne strukture repertoarja na pamet. Nihče ne zna.

Zato je zelo verjetno, da se boste pogosto zmotili in vnesli nekaj napačnega.

Na primer, želeli bi obiskati rubriko *Um; blodnje; levi*.


Ta rubrika ne obstaja, saj je pravilna rubrika dejanska *Um; blodnje; mačke, mačkoni, vidi; levi*.

Tako vnesete *m delu lion*

Jump to 

mind; delusions, imaginations; lion?

Zdaj vidite, da je *lion* natisnjen rdeče, saj ni ujemanja.

Ni vam treba skrbeti, samo preklopite na iskanje s pritiskom na gumb  med polji *Jump to* in *Find*.

To kopira besedilo iz polja *Jump to* v polje *Find* in takoj začne iskanje.

Modul *Find* vam zdaj prikazuje rubrike, ki ste jih morda iskali:

MIND

DELUSIONS, imaginations; **cats**, felines, sees; **lions**: (2)

DELUSIONS, imaginations; **hand**, hands; **paw** of a lioness, change into: (1)

Dvakrat kliknite na prvo rubriko in knjiga se bo odprla prav tam, kjer ste jo nameravali odpreti.

Knjižni modul

Ko izberete rubriko v modulu *Book*, polje *Jump to* namesto vas samodejno izpolni kratko besedilo za to rubriko. Tako boste zlahka našli

povezane rubrike.

Primeri:

Ko izberete rubriko *Mind; fear; dogs, of; attacking him, in delirium*, se v polju *Jump to* samodejno izpolni *min fear dog att*.

Ko izberete rubriko *Generalities; food and drinks; cold; drinks, water; agg.*, se v polje *Jump to* samodejno vpiše *gen foo cold dri agg*.


Za vsak del imena rubrike se uporabijo vsaj trije znaki. Pogosto zadostujeta 1 ali 2, vendar je potem besedilo zelo neberljivo.

Kadar trije znaki ne zadostujejo, se uporabi več znakov za razlikovanje rubrike od drugih rubrik.

Poiščite polje


Zmogljivo in enostavno iskanje

Polje *Find* omogoča zelo učinkovito, zmogljivo in hitro iskanje.

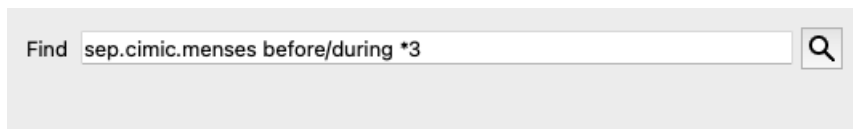

V to polje lahko vnesete vsa iskalna merila, ki jih lahko vnesete tudi v posamezna polja (glejte poglavje *Modul za iskanje*). Vendar je lahko polje *Poišči* učinkovitejše, saj lahko vnesete in spremenite, kaj želite poiskati, ne da bi morali preklapljati med polji. To je lahko zelo, zelo hitro.

Vedeti morate nekaj stvari. Pravzaprav je to zelo preprosto, saj se vsakič, ko v posamezna polja modula *Find* vnesete merila iskanja, pravilno oblikovan niz samodejno vnese v polje *Find*. To deluje v obe smeri; vse, kar vnesete v polje *Find*, se prikaže v posameznih poljih, kot je interpretirano.

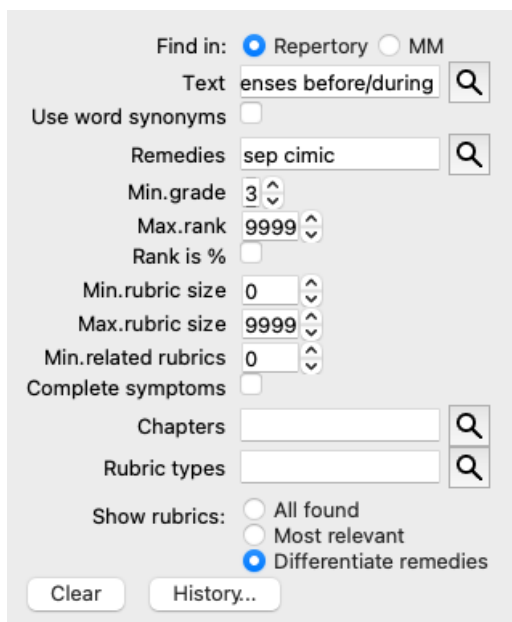

Polje *Poišči* je tako zmogljivo, ker lahko iskane elemente vnesete v poljubnem vrstnem redu. Če najdete preveč rubrik, preprosto vnesite nekaj dodatnih izrazov, da zmanjšate rezultat. Ponovite lahko celo merila, ki ste jih prej vnesli v polje; upošteva se zadnja razlaga (ocena, velikost rubrike).

Uporabo polja *Find* lahko celo kombinirate s posameznimi polji. Vse, kar spremenite na eni lokaciji, se samodejno odraža tudi na drugi lokaciji.

Tukaj so pravila:

- Besedilo** Fragmenti besedila se samodejno interpretirajo kot besedilo, kot ga vnesete v posamezno polje *Besedilo*. Pri tem velja enaka uporaba /, + in - (glej primere v razdelku . *Najdi modul*). V zgornjem primeru se išče beseda *menses* v kombinaciji z *pred* ali *med*.
- Pravna sredstva** Okrajšave zdravil se morajo končati s piko. V polju *Remedies* to ni obvezno, vendar se mora končati s piko, da ne pride do zmede med delčki besedila in okrajšavami pravnih sredstev. (Primer zmede: *sep* lahko pomeni *sepia* ali *ločitev*). Enako velja za uporabo / in +, glejte primere v razdelku . *Poiščite modul*. V zgornjem primeru je iskanje opravljeno na *sepia* ali *cimicifuga*. Opomba: tudi sredstva, ki sama po sebi niso okrajšava (kot so *Apis* ali *Bufo*), je treba končati s piko (apis. bufo.).
- Gradacija** Najmanjše stopnje odpravljanja napak od 1 do 4 lahko določite z vnosom *1, *2, *3 ali *4. Ta izraz lahko preberemo kot: Vsa (*) zahtevana sredstva morajo imeti to ali višjo oceno. Številke 1, 2, 3 in 4 brez * se prav tako razlagajo kot najmanjša stopnja zaščite. Tako je 4 enako kot *4.
- Velikost rubrike** Najmanjšo in največjo velikost rubrike lahko določite s številom, pred katerim je > ali <. <50 pomeni 50 pravnih sredstev ali manj. >10 pomeni 10 pravnih sredstev ali več. Druga možnost je, da se vsako število, ki se začne s 5 in več, samodejno razlaga kot največja velikost rubrike. Tako je 50 enako kot <50.

Primeri

Razširimo zgornji primer z omejitvijo na rubrike, ki vsebujejo največ 50 pravnih sredstev. Vsi naslednji načini vnosa meril vodijo do enakega rezultata:

sep. cemic. menstruacija pred/med *3 <50
sep. cemic. menstruacija pred/med 3 50
menstruacija ločeno pred / med 3 <50 cemic.
50 menstruacija+pred/med sep./cemic. 3
menstruacija pred/med sep. 2 cemic. 200 50 3

V zadnjem primeru vidite, kako se začetno stopnjevanje 2 kasneje nadomesti s 3, največja velikost rubrike 200 pa se spremeni v 50. V primeru se to morda zdi zmedeno, vendar je dejansko zelo učinkovito, ko iščete in želite med iskanjem zožiti rezultate. Novo merilo lahko vnesete, ne da bi prej odstranili predhodno vneseno merilo; zadnje preprosto prevlada nad prvim.

Nasvet: Ne pozabite, da se pri iskanju besedila uporabljajo tudi posebni zapisi =, * in "":

=*dog* bo našel *dog*, ne pa tudi *dogmatic*.

**acija* bo našla *palpitacijo* ter *potenje* in *ovulacijo*.


"*on je*" bo našel samo *on* in *je*, če sta v točno takšnem vrstnem redu.

Nastavitve prednostnih nastavitev

Več možnosti programa je mogoče nastaviti glede na vaše osebne želje. Te možnosti lahko spremenite v meniju *Preferences*. (Možnost menija *Splošno / Nastavitve*).

Odpri se pogovorno okno z več razdelki.

Splošne nastavitve

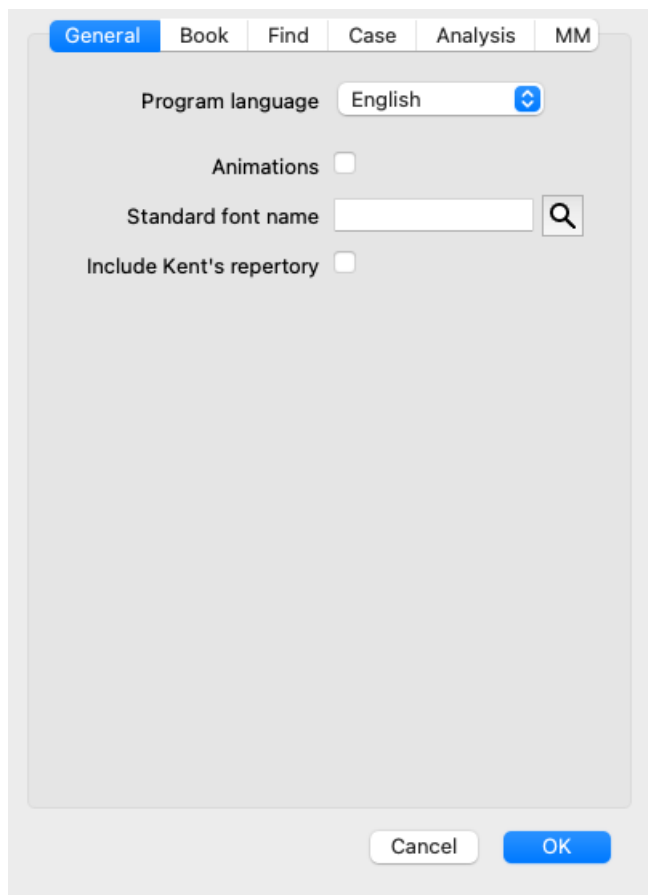

Programski jezik Na voljo je več jezikovnih možnosti.

Jeziki, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na različico *Complete Dynamics*; jeziki, ki niso na voljo, bodo morda dodani v novejši različici.

Animacije V nekaterih delih programa *Complete Dynamics* se uporabljajo animacije, na primer pri odpiranju in zapiranju zadeve. Ti so videti lepo, vendar je za dokončanje potreben čas. Če teh animacij ne želite, odkljukajte to možnost.

Standardno ime pisave Tu lahko izberete željeno pisavo, ki jo bo uporabljal program.

Vključite Kentov repertoar Označite to možnost, če želite, da je *Kent's Repertory, 6th edition* na voljo kot ločen repertoar.

Celotna vsebina *Kentovega repertorija* je že vključena v *Complete Repertory*. Vendar pa se nekateri ljudje raje posvetujejo s spletnim mestom *Kent* brez vseh dodatkov iz drugega gradiva. Po potrditvi te možnosti bo v modulu na voljo *Kent Indeks*[//I].

Nastavitve knjige

Repertorijski jezik Jezik, ki se uporablja za repertoar.

Druga možnost je sekundarni jezik, ki je prikazan za besedilom rubrike. Drugi jezik je na voljo le, če ste kupili repertoarni prevod.

Avtorske številke Če je ta možnost označena, so poleg imen avtorjev prikazane tudi številke avtorjev v slogu MacRepertory.

Vodoravno pomikanje Če je ta možnost označena, je omogočena funkcija vodoravnega pomikanja.

Ta funkcija je na voljo le, če miška ali sledilna ploščica podpira vodoravno pomikanje.

Prikaži velikost rubrike Če je ta možnost označena, je v modulu Knjiga vedno prikazano število pravnih sredstev za rubriko. Če ta možnost ni označena, se številka prikaže le, če sredstva niso vidna.

Rubrike po abecednem vrstnem redu Če je ta možnost označena, so v modulu Knjiga rubrike vedno prikazane po abecednem vrstnem redu. Če ni označeno, se uporabi standardni vrstni red repertoarja, kot ga je uvedel Kent.

Repertorijski filtri Tu lahko določite osebne filtre repertoarja.

Za podrobnosti glejte razdelek *Filtriranje / Filtri po meri modula Book*.

Iskanje nastavitev

□


Samodejna postavitve Če je ta možnost označena, se rezultati iskanja samodejno izrišejo v več stolpcih, če je na zaslonu dovolj prostora. Če ni označeno, so vsi rubriki narisani v enem stolpcu.

Nastavitve primera

□

<i>Največ dni za nedavni primer</i>	Modul Primer lahko filtrira seznam bolnikov samo po nedavnih primerih. S to možnostjo lahko izberete število dni za ta filter.
<i>Minute do samodejnega zaklepanja primerov</i>	Če ste nastavili geslo za zaščito podatkov o pacientu, ta možnost določa število minut, po katerih se modul Case samodejno zaklene. Če tukaj vnesete 0, se samodejno zaklepanje ne izvede.
<i>Samodejno brisanje arhiviranih primerov</i>	Izberite, po kolikšnem času naj se arhivirani primeri trajno izbrišejo. Če izberete <i>Nikoli</i> , se arhivirani primeri ne bodo samodejno izbrisali.
<i>Uporaba strežnika v oblaku</i>	Kopijo svojih primerov shranite v strežnik v oblaku.

Nastavitve analize

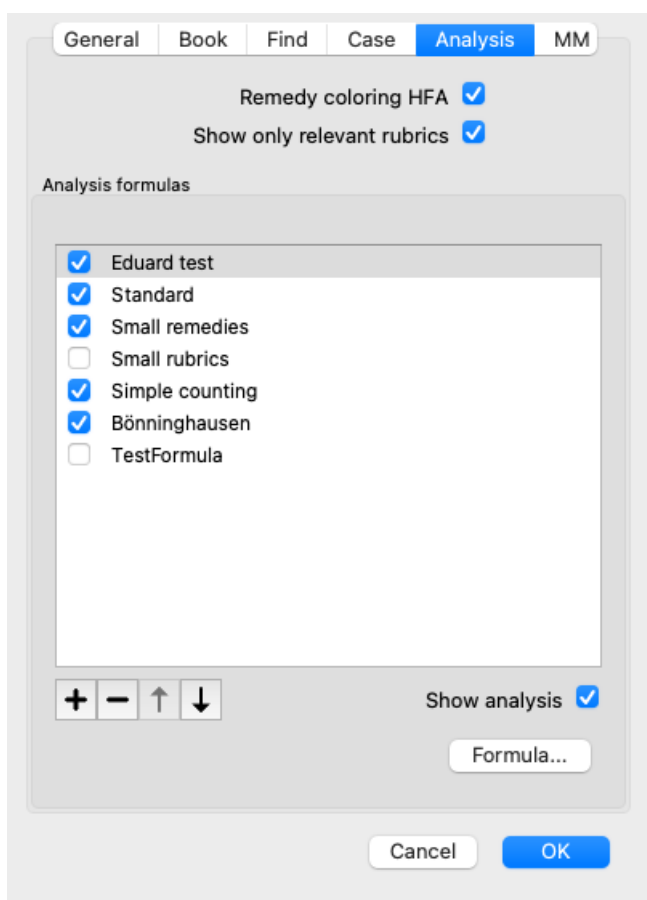

Remedy coloring HFA Če je ta možnost označena, se lahko analiza barvno popravi v skladu z metodo analize obraza Granta Bentleyja. V modulu Analiza se v orodni vrstici pojavi nov gumb (==), s katerim lahko vklopite ali izklopite barvanje. Uporaba te možnosti je uporabna le, če ste uspešno zaključili tečaj te metode.

Prikaži samo ustrezne rubrike V modulu Analysis je povezava med rubrikami in popravki prikazana v tabelaričnih grafih. Simptomi in rubrike z nastavitvijo uteži 0 dejansko ne prispevajo k rezultatom analize. Če je ta možnost označena, se popravki iz rubrik, ki ne prispevajo k rezultatom analize, ne vključijo v graf tabele rezultatov. Tako boste lažje videli, kako rubrike prispevajo k rezultatom analize.

Analizne formule V modulu Analiza lahko uporabite več formul za analizo. Izberete lahko, katere od teh formul bodo prikazane in v kakšnem vrstnem redu. Če želite spremeniti vrstni red prikaza analiz, izberite analizo s klikom na njeno ime. Z gumboma == in == ga lahko premaknete navzgor ali navzdol po seznamu. Če želite vključiti ali izključiti analizo, jo izberite in nato kliknite potrditveno polje *Prikaži analizo*.

Analizne formule lahko ustvarite tudi po lastnih željah.
To je podrobno razloženo v razdelku Modul za analizo / *Formule*.

Nastavitve Materia Medica

Jeziki Na voljo je več jezikov *Materia Medica*.

Privzeto so jeziki prikazani v skladu z nastavitvami jezika in države računalnika ter licenčnimi možnostmi. Izberete lahko, kateri jeziki knjig so prikazani v modulu *Materia Medica*.

Jeziki

Complete Repertory prevodi

Complete Repertory je bila prevedena v več jezikov. Redno dodajamo nove prevode.

Complete Dynamics ima angleščino kot standardni jezik.

Na voljo so dodatni jeziki, ki omogočajo ogled repertoarja v drugem jeziku ali v dveh jezikih hkrati.

Funkcija *Find* vam omogoča tudi iskanje rubrik v maternem jeziku, če ne poznate pravih besed v angleščini!

Če želite uporabljati dodatne jezike, morate kupiti licenčni ključ.

Trenutno so podprti naslednji jeziki:

- ☐ *Angleščina* To je standardni jezik.
- ☐ *Nemščina*
- ☐ *Nizozemska*
- ☐ *Francoski*
- ☐ *Španščina*
- ☐ *Portugalska*
- ☐ *Italijanski*
- ☐ *Madžarski*
- ☐ *Romunski*
- ☐ *Bolgarski*
- ☐ *Ruski*
- ☐ *Hindi*
- ☐ *Japonski*

Če želite kupiti licenčni ključ, obiščite našo spletno stran v meniju pod *Meni* / *Pomoč* / *Nakup dodatnega jezika*.


Za dodatni jezik je treba plačati manjšo pristojbino, da se prevajalcu plača delo, ki ga je opravil za vas.

Nakup homeopatskih zdravil

V programu lahko enostavno naročite homeopatska zdravila neposredno iz spletne lekarne.

Dostopnost lekarne se lahko razlikuje po državah glede na lokalne in mednarodne predpise. Ta razpoložljivost se določi ob zagonu programa.

Če želite naročiti zdravilo, odprite priročni meni na imenu zdravila kjer koli v modulu Knjiga ali Analiza in izberite možnost *Kupi zdravilo iz lekarne*. (Možnost priročnega menija *Kupite zdravilo iz lekarne*).

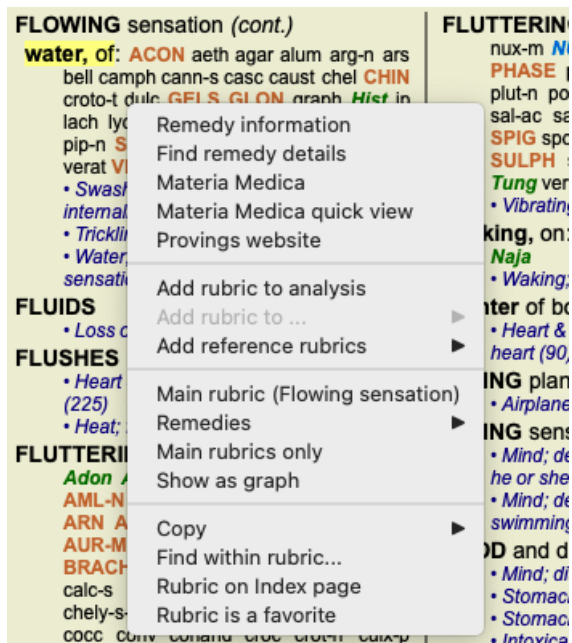

Če ta možnost ni na voljo, pomeni, da v vaši državi lekarna ni podprta.

Po izbiri možnosti boste samodejno vodeni do spletne lekarne, ki vam je na voljo.

Upoštevajte, da je podjetje *Complete Dynamics* neodvisno od lekarne. Našim strankam nudimo neposreden dostop do lekarne kot storitev.

Bližnjice na tipkovnici

Izbira modula

command I Indeksni modul
command B Knjižni modul
command S Poiščite modul
command D Modul primera
command R Analizni modul
command M Modul Materia Medica
command J Preskoči na
command F Poišči
command Y Prikaži/skrij polja
Skoči na in poišči
F1 Dokumentacija

Knjižni modul

→ Pojdi na naslednjo stran
← Pojdi na prejšnjo stran
shift → Pojdi na naslednje poglavje
shift ← Pojdi na prejšnje poglavje
↓ Pojdi na naslednjo rubriko
↑ Pojdi na prejšnjo rubriko
shift ↓ Pojdi na naslednjo glavno rubriko
shift ↑ Pojdi na prejšnjo glavno rubriko
control ↓ Prehod na naslednjo rubriko na isti ravni
control ↑ Prehod na prejšnjo rubriko na isti ravni
control ← Skok nazaj na prejšnjo rubriko, ko sledite referenci
control → Skok naprej (nasprotno od Skok nazaj)
prostor Prikaži/skrij sredstva
1 Vsi razredi pravnih sredstev
2 Pravna sredstva razred 2-3-4
3 Pravna sredstva razred 3-4
4 Pravna sredstva razred 4
command G Pogled na rubriko grafikona/besedila

Repertorijska poglavja



shift-command A Trebuh
shift-command B Nazaj
shift-command C Klinični
shift-command E Ekstremitete
shift-command F Ženske
shift-command G Splošnosti
shift-command H Vodja
shift-command L Grlo in sapnik
shift-command M Um
shift-command P Potenje
shift-command R Dihanje
shift-command S Koža
shift-command T Grlo
shift-command U Uretra
shift-command V Vertigo
shift-command X Anatomske indeksi

Primer

control N Nov primer
control O Odprite izbrani primer

control C Zaprite primer in izberite drug primer
control E Urejanje informacij o izbranem primeru
control A Dodajte analizo
control T Dodajanje analize z uporabo predloge
control D Podvojena izbrana analiza
control S Dodajte simptom
control R Dodajte rubriko o izbranem repertoarju k analizi
control V Prikaži pregled rubrik v analizi
control X Dodajte recept
command P Natisni

Analiza

command C Kopiranje izbranih vrstic
command V Prilepi kopirane vrstice
shift ↑ Premik izbranih vrstic navzgor
shift ↓ Premaknite izbrane vrstice navzdol
1 Nastavitev teže izbranih vrstic na 1
2 Nastavitev teže izbranih vrstic na 2
3 Nastavitev teže izbranih vrstic na 3
4 Nastavitev teže izbranih vrstic na 4
0 Izbranih vrstic ne upoštevajte v analizi
← Skrij rubrike za simptom (zaprite)
→ Prikaži rubrike za simptom (odprto)
command 1  1
command 2  2
Etcetera...

Materia Medica

→ Pojdi na naslednjo stran
← Pojdi na prejšnjo stran
shift → Pojdi na naslednje poglavje
shift ← Pojdi na prejšnje poglavje

Povratne informacije

Potrebujemo vašo pomoč in cenimo vaše povratne informacije!

Ustvarjalci programa *Complete Dynamics* so se zavezali, da vam bodo ponudili najboljšo možno kakovost in uporabnost ter zmerne cene za komercialne izdaje.

Kar zadeva kakovost, pri razvoju programske opreme uporabljamo pristop, ki ne dopušča napak. Programskih napak preprosto ne sprejemamo in če jih odkrijemo, jih bomo odpravili z najvišjo možno prioriteto.

Uporabnost je bolj zapleteno vprašanje, saj je uporabnost zelo osebna zadeva. Mi in naša predana skupina strokovnih ocenjevalcev nenehno iščemo najboljšo možno uporabnost in vedno ocenjujemo vaše povratne informacije.

Z vašo pomočjo lahko še naprej nenehno izboljšujemo *Complete Dynamics*.

Kako posredovati povratne informacije

Če je računalnik povezan z internetom, je posredovanje povratnih informacij preprosto.

Odprite meni in izberite možnosti *Splošne povratne informacije* ali *Prijava težave*. (Možnost menija *Pomoč* / *Splošne povratne informacije*, možnost menija *Pomoč* / *Poročilo o težavi*).

Če vaš "homeopatski računalnik" nima neposrednega dostopa do interneta, pošljite e-pošto na podpora@completedynamics.com